

Dentaurum

Germany | Benelux | España | France | Italia |
Switzerland | Australia | Canada | USA
and in more than 130 countries worldwide.

IN

Anwendungshinweise | Notes on application | Conseils d'utilisation
Indicaciones de uso | Modo de empleo | Istruzioni per l'uso



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE



- Informationen zu Produkten finden Sie unter
www.dentaurum.com
- For more information on our products, please
visit www.dentaurum.com
- Vous trouverez toutes les informations sur nos produits
sur www.dentaurum.com
- Descubra nuestros productos
en www.dentaurum.com
- Informazioni su prodotti sono disponibili
nel sito www.dentaurum.com

Stand der Information | Date of information | Mise à jour |
Fecha de la información | Data dell'informazione: 07/21

Änderungen vorbehalten
Subject to modifications
Sous réserve de modifications
Reservado el derecho de modificación
Con riserva di apportare modifiche

Germany 07/21/C/R1-2
Printed by Dentaurum
982-601-20

discovery
pearl


Debonding Instrument
Debonding Instrument
Instrument de dépose
Instrumento para descementar
Debonding Instrument

D
DENTAURUM

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germany | Tel. +49 7231/803-0 | Fax +49 7231/803-295
www.dentaurum.com | info@dentaurum.com

D
DENTAURUM

1

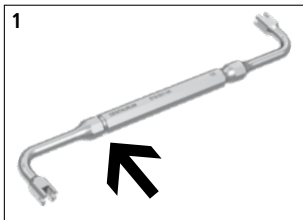

DE

Abnahme der OK 2er und UK 1er und 2er Brackets mit der Seite A (schmale Vertiefung). Alle anderen Brackets werden mit der Seite B (breite Vertiefung) debondet.

EN

Debond brackets on the upper lateral incisors and lower central and lateral incisors with side A (narrow groove). All other brackets are debonded with side B (wide groove).

FR

Dépose de brackets des incisives latérales supérieures, des incisives centrales inférieures et des incisives latérales inférieures avec la partie A (petit creux). La dépose des autres brackets se fait avec la partie B (creux large).


ES

Quite los brackets de los incisivos laterales superiores y de los incisivos inferiores centrales y laterales con el lado A (cavidad estrecha). Quite el resto de los brackets con el lado B (cavidad ancha).

IT

Asportare i laterali superiori e gli incisivi inferiori con il lato A (utensile stretto). Tutti gli altri bracket vengono asportati con il lato B (utensile largo).

2

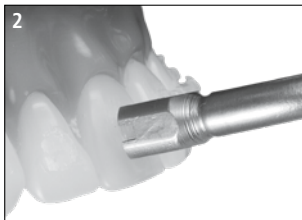

Körperhafte Umfassung des Brackets bis zur Basis.


Engage the entire body of the bracket down to the base.

Bien agripper le bracket jusqu'à la base.

Abarcar por completo el cuerpo del bracket hasta la base.

Preso in toto del bracket fino alla base.

3

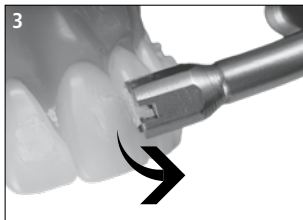

Ablösen des Brackets durch leichtes seitliches Kippen in Slot- bzw. Bogenverlaufsrichtung.

Debond the bracket by tilting it slightly sideways along the horizontal axis.

Désolidariser le bracket en faisant un léger mouvement de bascule dans le sens de l'axe horizontale.

Desprender el bracket mediante ligera inclinación lateral en el slot o en dirección del transcurso del arco.

Rimozione del bracket con una leggera rotazione laterale in direzione dello slot.