

amda[®]




**ADVANCED
MOLAR
DISTALIZATION
APPLIANCE**

D
DENTAURUM
1886

DIE ALTERNATIVE ZU EXTRAKTIONEN BEI KLASSE II ANOMALIEN

In Verbindung mit dem tomas® System bietet amda® eine sicher geführte bi- oder unilateralen Distalisation bzw. Mesialisation von oberen Molaren als auch die Möglichkeit der Retraktion der oberen Frontzähne. In der Retentionsphase dient die Apparatur als skelettal verankerter Transpalatinalbogen. Erfunden wurde das amda® System von Prof. Dr. med. dent. Moschos A. Papadopoulos. Dentaforum entwickelte es in enger Zusammenarbeit mit ihm weiter. Dr. Papadopoulos ist Professor und Direktor der Abteilung für Kieferorthopädie an der Aristoteles Universität von Thessaloniki in Griechenland.


- Keine Mitarbeit des Patienten notwendig
- 24 h in situ
- Angenehm und hygienisch für den Patienten
- Keine Verschmutzung der Feder
- Einfache Montage/Demontage

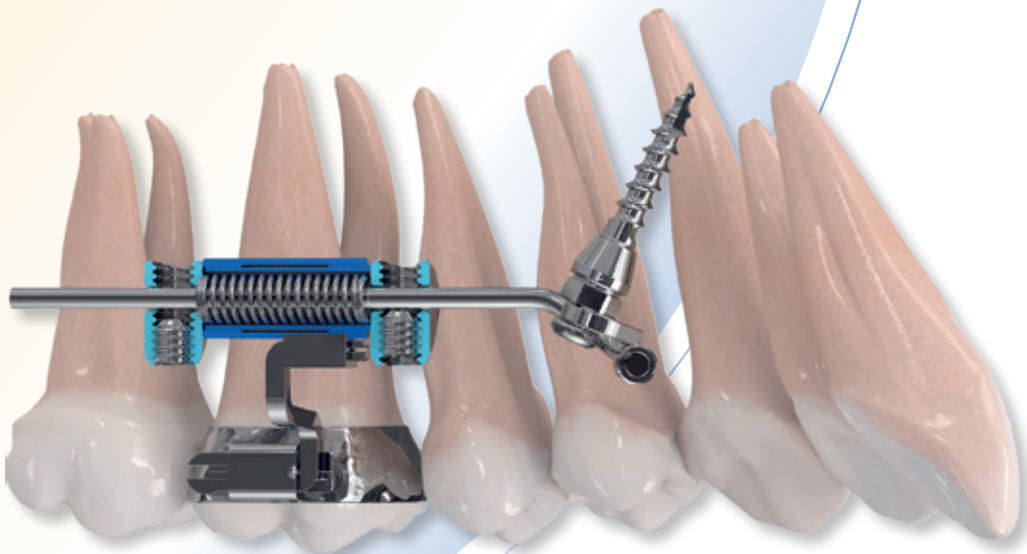



Das **amda® System** besteht durch ein sehr überschaubares Produktprogramm, eine einfache Anwendung und einen compliance-unabhängigen Behandlungsablauf. Alle Teile werden bereits vormontiert geliefert und können in wenigen Arbeitsschritten individualisiert werden. Dabei ist nur wenig Laborarbeit nötig. Kern der Apparatur ist die durch das im Teleskoprohr geschützte Nickel-Titan-Feder. Das ist hygienisch und angenehm für den Patienten. Durch die auswechselbare Verbindung zwischen Teleskop und Zahn (amda® connector) kann der Kraftansatz für die Zahnbewegung den individuellen Anforderungen leicht angepasst werden.

Das **tomas® System** ist weltweit seit vielen Jahren eines der führenden Systeme für die skelettale Verankerung. Die Anwender schätzen das einfache Handling und die hohe Zuverlässigkeit des Systems. Egal ob Distalisation, Mesialisation, Intrusion, Gaumennahterweiterung oder indirekte Verankerung: tomas® ist das Komplettsystem für alle Indikationen. Sowohl für den Einsteiger als auch für den Profi in der skelettalen Verankerung lässt es keine Wünsche offen.

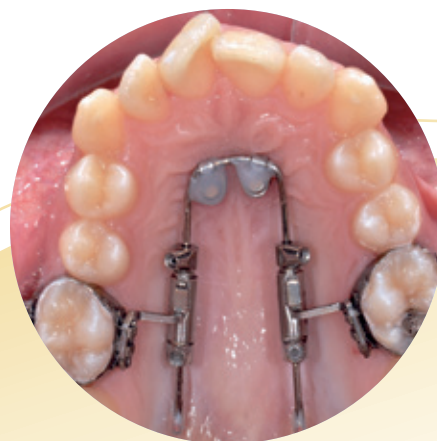

amda® in situ



Skelettale Verankerung von amda®
über zwei tomas®-pin EP



ORTHODONTICS



IMPLANTOLOGY



PROSTHETICS



CERAMICS



DIGITAL



SEMINARS



CONTACT
DENTAURUM

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31/803-0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM