
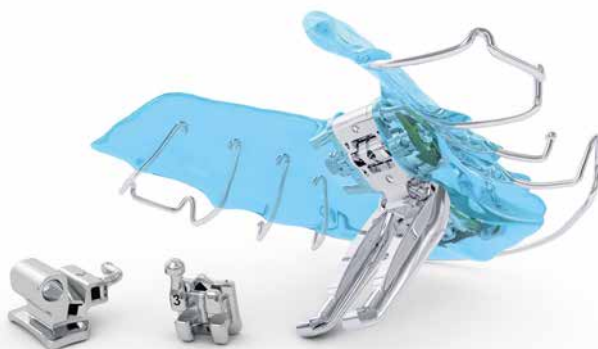


Orthodontie-Katalog

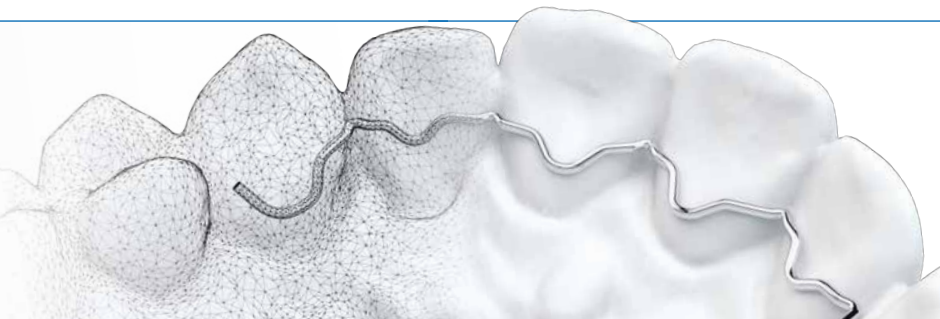

Orthodontie-Katalog

Digitale Kieferorthopädie	
Lingualsystem	
Selbstligierende Brackets	
Metallbrackets	
Ästhetikbrackets	
Nickelfreie Produkte	
Bracketzubehör	
Bukkalkörner	
Bänder	
Adhäsive	
Drähte Bögen Drahtelemente	
Klasse II-Apparaturen	
Intra-/Extraoral	
Verankerungssysteme	
Praxismaterialien	
Dehnschrauben	
KFO-Kunststoffe	
Zangen Instrumente	
Geräte	
Wissen Praxismarketing	
Kurse, Webinare und Events	
Service	

*„Was wir heute tun,
entscheidet darüber,
wie die Welt morgen
aussieht.“*

Boris Pasternak

Kundennummer

Bitte tragen Sie hier Ihre Dentaurum-Kundennummer ein. Zur schnelleren Bearbeitung Ihrer Aufträge benötigen wir bei jeder Bestellung Ihre Kundennummer.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern stets die männliche Form. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Im Unternehmen werden alle Mitarbeiter gleich behandelt, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Religion oder Weltanschauung.

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

seit 1886 haben wir von Dentaureum, dem ältesten Dentalunternehmen der Welt, den Anspruch, Produkte von höchster Qualität und Zuverlässigkeit zu entwickeln und zu produzieren. Wir folgen dabei strengen Standards für hervorragende Verarbeitungseigenschaften und eine hohe Bioverträglichkeit unserer Produkte. Die Anforderungen und die Zufriedenheit unserer Kunden stehen für uns dabei immer im Mittelpunkt. Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen, die Entlastung der Umwelt sowie eine ethisch korrekte Beschaffung unserer Rohstoffe sind für uns von zentraler Bedeutung und bilden die Grundlage aller unserer Entscheidungs- und Herstellungsprozesse. Und dies bereits seit 1989 – seit 1996 ist unser Umweltmanagementsystem zertifiziert.

Mit zahlreichen Dentaureum Produkten ist es uns gelungen, weltweit neue Maßstäbe zu setzen. Unsere Vertriebsniederlassungen in Benelux, Frankreich, Italien, Spanien, Schweiz, USA, Kanada sowie Australien und ein globales Händlernetzwerk vertreiben die hochwertigen Produkte in mehr als 130 Ländern und bieten Ihnen erstklassigen Service vor Ort.

Ob Webinar oder in Präsenz, mit unseren weltweiten Veranstaltungen und Fortbildungen halten wir Sie jederzeit über unsere Produkte und die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse in der Orthodontie auf dem Laufenden.

Seit 1. März 2022 sind wir zu dritt in der Geschäftsleitung. Dies bedeutet dreifache Fachkompetenz und langjährige Erfahrung aus verschiedenen Geschäftsbereichen, so dass Dentaureum auch zukünftig erfolgreich am Markt bestehen wird.

Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft unserer Firma im Erfolg unserer digitalen Produkte liegt. In den vergangenen Jahren haben wir in diesem Bereich viele neue Produkte entwickelt. Neben prime4me® Aligner, dem innovativen 2-Schienen Behandlungskonzept, ist auch prime4me® RETAIN3R ein sehr wichtiger Bestandteil unseres digitalen Produktprogramms geworden. Wir freuen uns darauf, auch zukünftig den Weg der Digitalisierung gemeinsam mit Ihnen zu gehen. Unsere analogen Produkte werden aber nicht vernachlässigt, denn sie sind trotz der fortschreitenden Digitalisierung weiterhin unverzichtbar.

Mit den besten Grüßen aus Ispringen

Mark Stephen Pace

Claudia Stöhrle
Geschäftsleitung Dentaureum

Ralph Dittes

Dentaurum

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
und in über weiteren 130 Ländern weltweit.



Dentale Technologien, die Maßstäbe setzen.

Dentaurum entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Dentalprodukte und Dienstleistungen. Als inhabergeführtes Familienunternehmen mit Hauptsitz in Ispringen (bei Pforzheim im Nordschwarzwald) ist Dentaurum seit mehr als 137 Jahren im Dentalbereich tätig. In Deutschland, Österreich und der Schweiz finden Sie kompetente Medizinprodukteberater auch in Ihrer Nähe.

Erleben Sie Dentaurum bei einem virtuellen Rundgang in der 360° Perspektive. Insgesamt fünf 360° Standpunkte ermöglichen einen tollen Überblick.





Orthodontie

Implantologie

Zahntechnik

Keramik



Foto: © Christian Ferra®

Hightech inhouse.



Die große Sach- und Fachkompetenz des Unternehmens beruht auf in vielen Jahren erarbeitetem Know-how in eigenen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Deutschland und Frankreich. Hochqualifizierte Mitarbeiter finden in interdisziplinären Teams die nötigen Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft. Parallel dazu tragen langjährige Entwicklungs-k Kooperationen mit Experten aus Universitäten und Kliniken zu neuen Innovationsleistungen bei.

Ein weiteres Ergebnis dieser Anstrengungen: ein umfassendes Produktportfolio gehört zu den Stärken von Dentaaurum. Kein anderes Dentalunternehmen verfügt über ein ähnlich breites und tiefes Produktprogramm mit mehr als 8.500 Artikel.





Dentaurum Online Shop.

Einfach bequem online bestellen.



shop.dentaurum.com


Ihre Vorteile:

- Ausführliche Produktinformationen.
- Online-Bestellungen über 150,- € sind für Sie versandkostenfrei*.
- Automatische Verfügbarkeitsprüfung der Produkte.
- Individuelle Merklisten für Ihre häufig bestellten Artikel.
- Anzeige Ihrer persönlichen Konditionen und Preise.
- Sicher bestellen mit SSL-Verschlüsselung.
- Bestimmen des Versandtermins Ihrer Bestellung.
- Paketverfolgung**.
- Aktuellste Informationen zum Produktportfolio und der jeweiligen CE-Kennzeichnung

- | | |
|---|------------------------------|
| ■ shop.dentaurum.de | ➤ Deutschland und Österreich |
| ■ shop.dentaurum.ch | ➤ Schweiz |
| ■ shop.dentaurum.be | ➤ Benelux |
| ■ shop.dentaurum.es | ➤ Spanien |
| ■ shop.dentaurum.fr | ➤ Frankreich |
| ■ shop.dentaurum.it | ➤ Italien |
| ■ shop.dentaurum.us | ➤ USA |
| ■ shop.dentaurum.ca | ➤ Kanada |
| ■ shop.dentaurum.com.au | ➤ Australien |

* Gültig für alle Online-Bestellungen aus Deutschland, Österreich und Benelux.

** Gültig für alle Online-Bestellungen aus Deutschland, Österreich, Benelux und Frankreich.

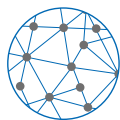

DENTAURUM
DIGITAL

Innovative Bestellplattform für patientenindividuelle Produkte und Dienstleistungen.



digital.dentaurum.de



Einfach und schnell patientenindividuelle Produkte und Dienstleistungen bestellen. Ein professionelles Qualitätsmanagement, validierte Herstellungsprozesse und Industriestandard bei Maschinen und Prozessen sorgen für eine hohe Qualität der hergestellten Produkte.

Verfügbare Produkte:

- **prime4me® Aligner:** Kieferorthopädische Alignertherapie von Dentaurum.
- **prime4me® Modelldruck:** Sockelmodelle und Zahnkranzmodelle für die Kieferorthopädie.
- **prime4me® RETAIN3R:** Einzigartige Passung durch dreidimensionale Konstruktionsgestaltung.

Ihre Vorteile:

- Einfache und intuitive Bestellmöglichkeit für alle Dentaurum Digital Produkte.
- Einfacher Upload von Dateien.
- Aktuelle Statusanzeige Ihrer Aufträge.
- Einfache Freigabe von prime4me® RETAIN3R Design- und prime4me® Aligner Behandlungsvorschlag.
- Archiv aller offenen und abgeschlossenen Aufträge.
- Auftragsbezogene Kommunikation mit erfahrenen Supportmitarbeitern online über die Bestellplattform.

Dentaurum-Produkte mit mawi.net online bestellen.



tecware-gmbh.de/produkte

Die Materialverwaltungssoftware mawi.net unterstützt Praxen im Management ihrer Verwaltung, dem Bestellwesen und der Patientendokumentation.

Vorteile für mawi.net Anwender:

- Die aktuellen Dentaurum-Kataloge Orthodontie und Zahntechnik sind in mawi.net hinterlegt.
- Produkte aus dem Dentaurum-Katalog auswählen und mit einem Mausklick in die mawi.net Bestellung übernehmen.
- **Die Dentaurum-Bestellung direkt online über mawi.net zu Dentaurum senden.**
- **Online-Bestellungen über mawi.net über 150,- € sind für Sie versandkostenfrei*.**
- Anzeigen Ihrer persönlichen Konditionen.



Dentaurum-Produkte mit Wawibox online bestellen.



wawibox.de

Wawibox ist eine Online-Materialverwaltung mit integrierter Marktplatzfunktion für Zahnarztpraxen und Labore. Das System optimiert die Wirtschaftlichkeit und den Arbeitsalltag der Anwender. Der Verbrauch von Beständen wird genau dokumentiert. Das Nachbestellen der Produkte über die Marktplatzfunktion ist schnell und unkompliziert.

Vorteile für Wawibox Anwender:

- Dentaurum-Produkte aus dem Online-Katalog der Wawibox auswählen und in die Wawibox-Bestellung übernehmen.
- **Die Dentaurum-Bestellung direkt online über Wawibox zu Dentaurum senden.**
- **Online-Bestellungen über Wawibox über 150,- € sind für Sie versandkostenfrei*.**
- Anzeigen Ihrer persönlichen Konditionen.
- Bestände von Dentaurum-Produkten in der Materialwirtschaft pflegen.

Dentaurum Bewertung von Wawibox-Anwendern:



4.9 von 5 Sternen

* Gültig für alle mawi.net und Wawibox Online-Bestellungen aus Deutschland und Österreich.

Ihr direkter Kontakt.



Chatten Sie mit uns.



Hallo, schnell und unkompliziert
beantworten wir Ihre Fragen.



Durch Klicken des
Chat-Symbols auf
unserer Website können Sie
bequem Ihre Fragen an uns
stellen. Wir chatten gerne
mit Ihnen.



Probieren Sie es aus.
Wir freuen uns auf Sie!

Auftragsannahme

Telefon	+ 49 72 31 / 803 - 210
E-Mail	verkauf@dentaurum.com

Customer-Service

Reklamationen, Auslieferungen, Rückstände, Fehllieferungen, Produkte	+ 49 72 31 / 803 - 200
---	------------------------

Anwendungsberatung

Kieferorthopädie

festsitzende Technik	+ 49 72 31 / 803 - 550
herausnehmbare Technik	+ 49 72 31 / 803 - 555

Keramik	+ 49 72 31 / 803 - 410
----------------	------------------------

Zahntechnik	+ 49 72 31 / 803 - 410
--------------------	------------------------

Implantologie

zahnärztliche Hotline	+ 49 72 31 / 803 - 590
zahntechnische Hotline	+ 49 72 31 / 803 - 410

Customer Support Digital	+ 49 72 31 / 803 - 280
---------------------------------	------------------------

Technischer Kundendienst – Geräte	+ 49 72 31 / 803 - 211
--	------------------------

Finanzbuchhaltung / Zahlungsverkehr	+ 49 72 31 / 803 - 235
--	------------------------

Fragen zu Materialzusammensetzung und Sicherheitsdatenblättern	+ 49 72 31 / 803 - 565
---	------------------------

Kurse / Veranstaltungen / Webinare

Kieferorthopädie, Implantologie, Zahntechnik, Keramik	+ 49 72 31 / 803 - 470
E-Mail	kurse@dentaurum.de

Gebührenfreie Faxbestellung (aus Deutschland)	0 800 / 4 14 24 34
--	--------------------



Internet	www.dentaurum.com
E-Mail	info@dentaurum.com

	Digitale Kieferorthopädie	18–49
	prime4me® Aligner	30
	prime4me® Modelldruck	30
	prime4me® RETAIN3R	31
	Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow	32–41
	3Shape Laborscanner	42
	3Shape TRIOS Intraoralscanner	43–45
	OnyxCeph ^{3TM}	46–48
	Lingualsystem	50–59
	discovery® delight Lingualbrackets/-röhrchen	54–55
	Bögen	56
	Instrumente	57
	Zubehör	58
	Selbstligierende Brackets	60–67
	discovery® sl	64
	discovery® sl 2.0	65
	Instrumente und Zubehör	66
	Metallbrackets	68–105
	discovery®	76–81
	discovery® smart	82–85
	topic	86–88
	equilibrium® mini	89–93
	equilibrium® 2	94–102
	equilibrium® ti	103–104
	Ästhetikbrackets	106–117
	discovery® pearl Keramikbrackets	112–116
	Zubehör	117
	Nickelfreie Produkte	118–121
	Bracketzubehör	122–123
	Bukkalröhrchen	124–143
	Adhäsivtechnik	128–133
	Bandtechnik	134–141
	Aufschweißteile	142–143
	Bänder	144–179
	dentaform® Snap	150–154
	dentaform®	155–164
	Standard	165–175
	Zubehör	176–178


	Adhäsive	180–189
	Adhäsive und Zubehör	186–189
	Drähte Bögen Drahtelemente	190–245
	Lieferprogramm Bögen / Stangendrähte / Rollendrähte	200–207
	Festsitzende Technik / Bögen / Stangendrähte / Rollendrähte / Retainer / Zubehör	208–234
	Herausnehmbare Technik / Stangendrähte / Rollendrähte / Zubehör	235–243
	Palatinal-/Lingualbogensysteme	244–245
	Klasse II-Apparaturen	246–263
	SUS ³ – Sabbagh Universal Spring	252–253
	Herbst-Scharniere / Sets und Zubehör	254–258
	amda® / Starter Set, Apparatur und Zubehör	259–261
	tomas® / Pins	262
	Intra-/Extraoral	264–279
	Extraorale Apparaturen	268–269
	Zubehör / Extraoral	270–271
	Elastomere Elemente / Intraoral	272–275
	Mundvorhofplatten	276
	Verankerungssysteme	280–313
	tomas® / Tool Sets	290
	tomas® / Pins	291–292
	tomas® / Instrumente und Zubehör	293–303
	amda® / Starter Set	304
	amda® / Apparatur und Zubehör	305–306
	tomas® PI / Gaumenimplantat und Tool Set	307
	tomas® PI / Instrumente und Zubehör	308–312
	Beratungsunterstützung	313
	Praxismaterialien	314–329
	Abformung	318
	Modellherstellung	319–320
	Spangenboxen und Zubehör	321–322
	KFO-Studien-/Demonstrationsmodelle	323–327
	Sonstiges	328
	Dehnschrauben	330–361
	Standard-Dehnschrauben	334–336
	Spezial-Dehnschrauben	337–349
	Variety Dehnschrauben	350–353
	GNE-Schrauben	354–359
	Zubehör	360–361

	KFO-Kunststoffe	362–387
	Orthocryl® LC / Start-Sets / Einzelpackungen / Zubehör	368–369
	Orthocryl® / Sortimente	370
	Orthocryl® / Einzelpackungen	371–372
	Disco-Glimmer	373
	KFO-Einlegemotive	374–377
	Zubehör	378–387
	Zangen I Instrumente	388–421
	Premium-Line Zangen	392–403
	EQ-Line Zangen	406–409
	Instrumente	410–417
	Zubehör	418–420
	Geräte	422–445
	Geräte und Zubehör	430–444
	Wissen I Praxismarketing	446–465
	Bücher / Apps / Downloads	448–465
	Kurse, Webinare und Events	466–471
	CDC – Centrum Dentale Kommunikation / Kurse	468–471
	Service	472–555
	Kontakt	13
	Bracketsysteme – Informationen	474
	Aufschweißdienst – Bandtechnik	476–486
	Bänder – Vergleichstabellen	488–495
	Drähte – Informationen	496–497
	Werkstoffliste	498–505
	Umrechnungstabellen	506
	Lieferservice	508–509
	Umwelt und Nachhaltigkeit	510–511
	Index alphabetisch	512–520
	Index numerisch	522–544
	Liefer- und Zahlungsbedingungen	546–549
	Bestellformular	551–554
	Impressum / Bildnachweis	555

prime4me® Aligner	Seite	30
prime4me® Modelldruck	Seite	30
prime4me® RETAIN3R	Seite	31
Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow	Seite	32
3Shape Laborscanner	Seite	42
3Shape TRIOS Intraoralscanner	Seite	43
OnyxCeph ³ ™	Seite	46




Digitale Kieferorthopädie.

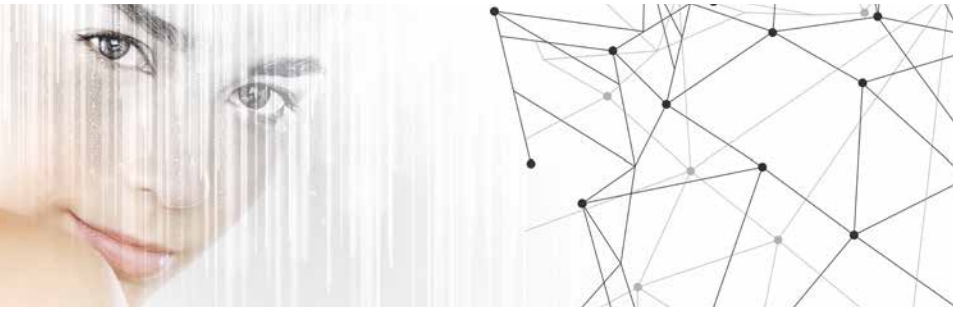

DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com



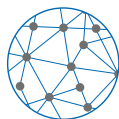

DENTAURUM
DIGITAL


Innovative Bestellplattform für patientenindividuelle
Produkte und Dienstleistungen.





passion and precision.



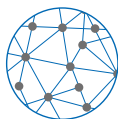

DENTAURUM
DIGITAL

Innovative Bestellplattform für patientenindividuelle Produkte und Dienstleistungen.

2-Schienensystem:

Innovatives Schienenkonzept für optimale Behandlungsergebnisse.

» Effektiv | Präzise | Ästhetisch | Kompetent







Kieferorthopädische Alignertherapie von Dentaureum.

Vorteile:

- » Digitale Fallplanung mit OnyxCeph^{3TM}.
- » Aligner bedeckt einen Teil der Gingiva für bessere Kraftübertragung.
- » Transparentes Alignermaterial für eine nahezu unsichtbare Behandlung.
- » Persönliche Beratung durch erfahrenes Support-Team.

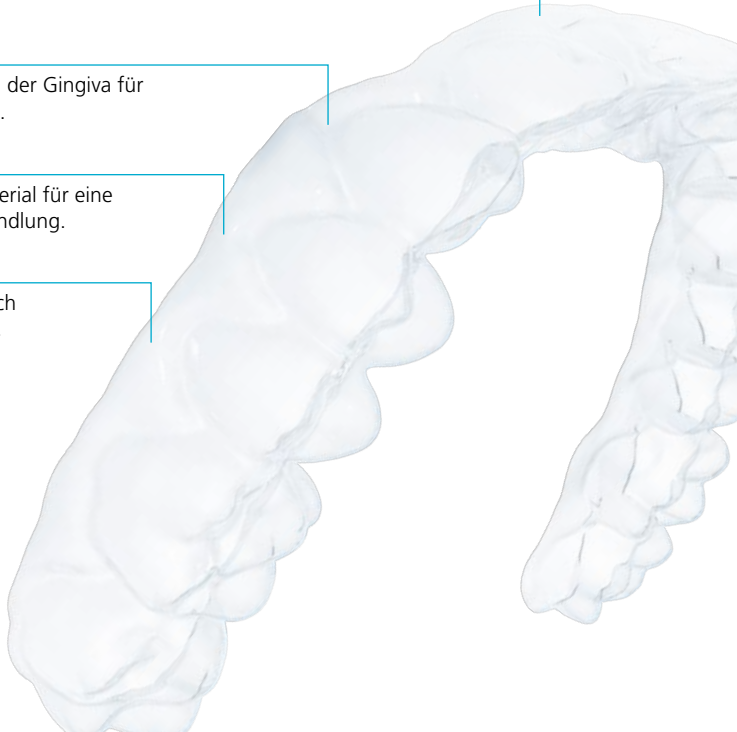

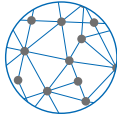


DENTAURUM
DIGITAL

Innovative Bestellplattform für patientenindividuelle Produkte und Dienstleistungen.



prime4me® Modelldruck.

Die gedruckten Sockel- und Zahnkranzmodelle für die Kieferorthopädie werden in höchster Präzision produziert und liefern die ideale Arbeitsgrundlage für alle kieferorthopädischen Behandlungsapparaturen. Bei der Produktion gilt dabei wie immer Dentaurums Qualitätsanspruch: Höchster Industriestandard bei Maschinen und validierte Prozesse mit hochqualifiziertem Personal.

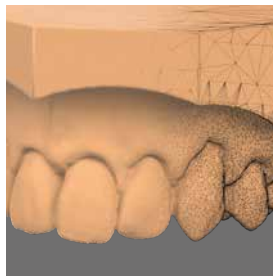




prime4me® RETAIN3R bringt viele Vorteile.

Der nach Kundenwunsch designte Retainer besitzt durch die einzigartige, dreidimensionale Konstruktionsgestaltung eine optimale, individuelle Passform. Auch enge Platzverhältnisse können durch das digitale Design berücksichtigt werden. Für beste Biokompatibilität sorgt das Material, Titan Grade 5, wodurch sich der prime4me® RETAIN3R auch hervorragend für Nickel-Allergiker eignet.

Nach Designfreigabe wird der Retainer eins zu eins aus einem Titan Blank gefräst. Für den Patienten bedeutet dies maximalen Tragekomfort durch die hohe Passgenauigkeit lingual und kleinere Klebeflächen, die wiederum eine bessere und einfachere Mundhygiene ermöglichen.

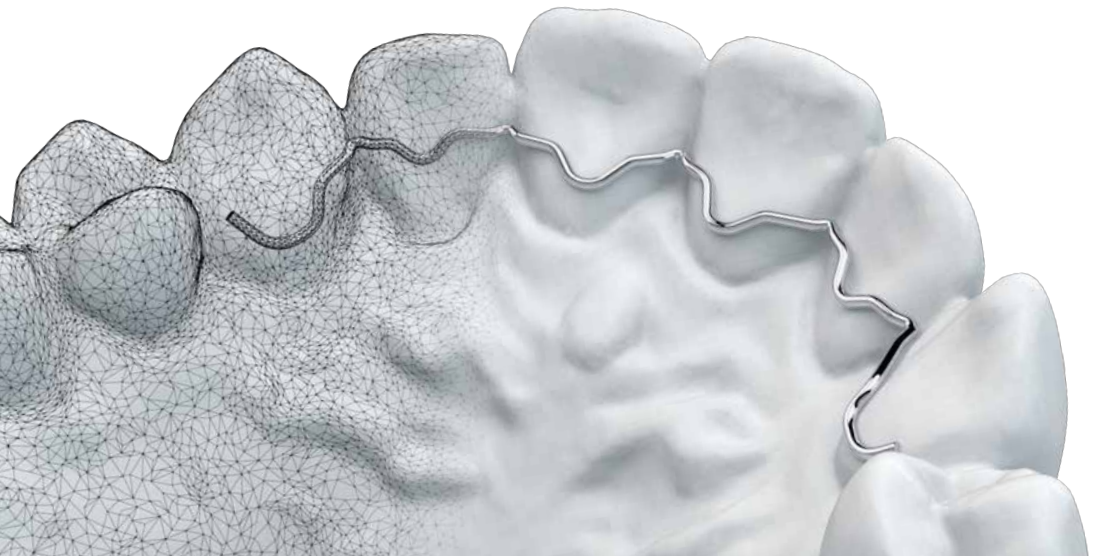

3shape Laborscanner

Laborscanner für jeden Anspruch.

Die passende Wahl für jedes Labor.

Rüsten Sie Ihr Labor mit einer schnelleren und präziseren Scanlösung auf, die extra für die höchste Produktivität optimiert ist. Mit Generation Red E-Scannern oder dem neuesten Scanner F8 mit Dual Scanning Technologie war es noch nie einfacher, Ihr Labor auf die nächste Stufe zu heben.

Ihre Vorteile:

-  ISO-dokumentierte Präzision.
-  Hochgeschwindigkeitsscannen von Modellen und Abdrücken.
-  Kieferorthopädische Laborsoftware.
-  Laborscanner für Ihre Anforderungen und Ihr Budget.



3shape TRIOS

Der Intraoralscanner.

Jedes TRIOS Modell bietet unterschiedliche Möglichkeiten.

Unabhängig davon, ob Sie ein Neueinsteiger in den digitalen Technologien sind oder schon eine vollständig digital arbeitende Praxis haben: TRIOS bietet Ihnen die Möglichkeit durch die Erweiterung Ihres Dienstleistungsangebotes eine herausragende Patientenversorgung anzubieten.

5 Gründe für TRIOS:

- Ausgezeichnete Scantechnologien.
- Naturgetreue Farben.
- Flexible Hardwarekonfigurationen.
- Software zur Analyse und Behandlungsplanung.
- Reibungsloser Auftragsaustausch mit Laboren.




3shape  TRIOS 5




Die dentale Imaging Software.

Mit OnyxCeph^{3TM} ist Image Instruments der Inbegriff dentaler Imaging Software. Die umfangreichen Lösungen für Archivierung, Diagnostik, Behandlungsplanung und Patientenberatung werden von Kunden in mehr als 99 Ländern rund um den Globus eingesetzt – mit beeindruckendem Erfolg.


Behandlungsplanung und Anwendungsgebiete:

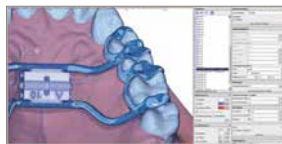


Modul Ortho Apps 3D

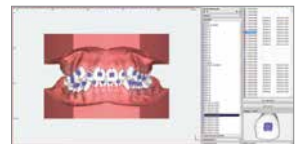


Modul FA_Bonding 3D

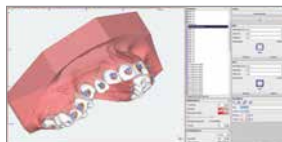


Modul Kylix 3D

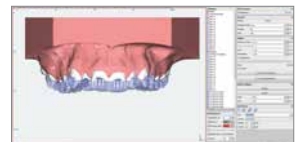

Modul Bonding Trays 3D

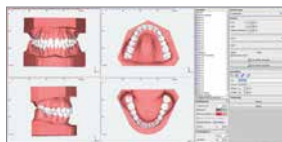

Modul Retainer 3D

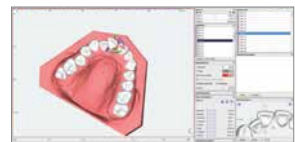

Modul Aligner 3D

OnyxCeph^{3TM} – Programmversionen und optionale Module zur idealen Kombination mit Laborscannern oder TRIOS.

	Programmversion*	
	3D PRO REF 410-004-00	3D LAB REF 410-005-00
SQL-Datenbank		
Netzwerk-Lizenz (konkurrenente Clients Server)	5 1	20 1
Einzelplatz-Lizenz (Client Server)	1 1	1 1
Imaging Module 2D		
Bild hinzufügen (inkl. Schnittstellen zu Digitalröntgen)	■	■
Bild anpassen (Bild klassifizieren, ausrichten)	■	■
Bildbefund duplizieren	■	■
Bild editieren (Kopie)	■	■
Auswertung (kephalometrische Analysen)	■	■
Kombinieren	■	■
Spiegeln	■	■
CO CR-Konvertierung	■	■
Behandlungssimulation (KFO/MKG)	■	■
Ricketts V.T.O.	■	■
Befundvergleich	■	■
Copy Save as Send to Show Print	■	■
Imaging Module 3D		
Bild hinzufügen (inkl. DICOM extrahieren)	■	■
Bild anpassen (Bild klassifizieren, ausrichten)	■	■
Bildbefund duplizieren	■	■
Auswertung (kephalometrische Analysen)	■	■
Kombinieren	■	■
Spiegeln	■	■
Behandlungssimulation	□	□
Modellausrichtung	■	■
Segmentieren	■	■
FA_Bonding	■	■
V.T.O.3D (Virtuelles Set-Up)	□	■
Wire_Bonding 3D	□	□
Kylix 3D (Indirektes Übertragen)	■	■
Bonding Trays 3D (Indirektes Übertragen)	□	□
Bonding Jigs 3D (Indirektes Übertragen)	■	■
Bracket Erase 3D	□	□
Aligner 3D	□	□
Retainer 3D	□	□
Bite Splint 3D	□	□
Ortho Apps 3D	□	□
Waefer Creation 3D	□	□
TADmatch TM	□	□
3D Export (STL,OBJ, ZPR, u.a.)		■
Presentation (Slide Show, Media)	■	■
Briefe	■	■
Online Formulare (DHTML)	■	■
Internet Browser	■	■
Papierkorb (Lost & Found)	■	■
Web Reports	■	■
Container Exchange	■	■
Bild- und Resultatexport	■	■
Befundlexikon	■	■

* zzgl. jährlicher Supportgebühren
□ optionale Komponenten gegen Aufpreis

Dentaurum Digital



prime4me® Aligner

Nach Prüfung Ihrer Daten wird der Planer ein geeignetes Aligner-Paket für Sie auswählen.

Bezeichnung	REF	Menge
prime4me® Aligner smart	430-140-20	1 Fall
prime4me® Aligner advanced	430-141-21	1 Fall
prime4me® Aligner performance	430-142-21	1 Fall



Aligner Pakete

	smart	advanced	performance
Umfang	Behandlungsplanung	Behandlungsplanung	Behandlungsplanung
	Aligner für bis zu 5 Steps (2-10 Aligner pro Kiefer)	Aligner für 6-9 Steps (12-18 Aligner pro Kiefer)	Aligner für 10-15 Steps (20-30 Aligner pro Kiefer)
		Zwischenkontrolle	Zwischenkontrolle
	1 Attachment Guide (falls Attachments nötig) je behandeltem Kiefer	1 Attachment Guide (falls Attachments nötig) je behandeltem Kiefer	1 Attachment Guide (falls Attachments nötig) je behandeltem Kiefer
	1 Retainerschiene je behandeltem Kiefer	1 Retainerschiene je behandeltem Kiefer	1 Retainerschiene je behandeltem Kiefer
Lieferung	1 Paket	2 Teillieferungen mit 1 Zwischenkontrolle	3 Teillieferungen mit 2 Zwischenkontrollen



prime4me® Sockelmodell

Gedruckte Sockelmodelle für die Kieferorthopädie.

REF 430-110-10	1 Stück
-----------------------	---------



prime4me® Zahnkranzmodell

Gedruckte Zahnkranzmodelle für die Kieferorthopädie.

REF 430-110-30	1 Stück
-----------------------	---------



Jetzt bestellen:
digital.dentaurum.de

3D Isoliermittel

Bildet eine Isolierschicht zwischen Kunststoffmodellen und Orthocryl® / Orthocryl® LC.
Farbe: grün

REF 162-801-00

100 ml



prime4me® RETAIN3R OK

Einzigartige Passung durch dreidimensionale Konstruktionsgestaltung und höchste Biokompatibilität: gefräster Retainer aus Titan Grade 5.

Optional in Verbindung mit prime4me® RETAIN3R bestellbar: Übertragungsschlüssel für prime4me® RETAIN3R für das Einsetzen beim Patienten.

REF 430-120-30

1 Stück



prime4me® RETAIN3R UK

Einzigartige Passung durch dreidimensionale Konstruktionsgestaltung und höchste Biokompatibilität: gefräster Retainer aus Titan Grade 5.

Optional in Verbindung mit prime4me® RETAIN3R bestellbar: Übertragungsschlüssel für prime4me® RETAIN3R für das Einsetzen beim Patienten.

REF 430-120-40

1 Stück



Transfer tray

Übertragungsschlüssel für prime4me® RETAIN3R für das Einsetzen beim Patienten.

Nur in Verbindung mit prime4me® RETAIN3R bestellbar.

REF 430-120-90

1 Stück

NEU



KFO-Demonstrationsmodell

prime4me® RETAIN3R

Zur Patienten-Demonstration.

Bestückt mit:

- prime4me® Sockelmodell
- prime4me® RETAIN3R OK
- Transfer tray für prime4me® RETAIN3R

REF 892-000-29

1 Stück

NEU



Download Datensätze
für die digitale KFO:



Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow



hyrax® click Mini – 7

GNE-Schraube mit Rückdrehsicherung Click

Für eine effiziente und sichere Gaumennahterweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- die perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase
- sicheres Aktivieren / Deaktivieren der Schraube mit deutlichem Spüren des Einrastens nach einer $\frac{1}{4}$ Umdrehung
- kein unbeabsichtigtes Zurückdrehen beim Aktivieren durch das Herausziehen des Sicherheitsschlüssels
- Dehnwegbegrenzung, somit kein Auseinanderfallen der Schraube am Ende der Behandlung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- abgesetzter Körper zum frühestmöglichen Abwinkeln der Arme
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.




Schraubenkörper: 9,8 mm

Maximale Dehnung: 7,0 mm

4 x $\frac{1}{4}$ Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-830-12	1 Stück	602-830-32	10 Stück

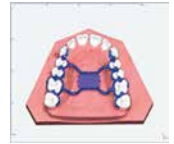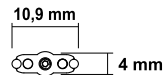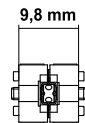

hyrax® click Medium – 10

GNE-Schraube mit Rückdrehsicherung Click

Für eine effiziente und sichere Gaumennahterweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- die perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase
- sicheres Aktivieren / Deaktivieren der Schraube mit deutlichem Spüren des Einrastens nach einer $\frac{1}{4}$ Umdrehung
- kein unbeabsichtigtes Zurückdrehen beim Aktivieren durch das Herausziehen des Sicherheitsschlüssels
- Dehnwegbegrenzung, somit kein Auseinanderfallen der Schraube am Ende der Behandlung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- abgesetzter Körper zum frühestmöglichen Abwinkeln der Arme
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.



Schraubenkörper: 12,8 mm

Maximale Dehnung: 10,0 mm

4 x $\frac{1}{4}$ Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-832-12	1 Stück	602-832-32	10 Stück

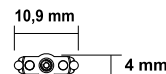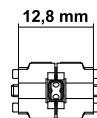

Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow

hyrax® click Maxi – 12

GNE-Schraube mit Rückdrehsicherung Click

Für eine effiziente und sichere Gaumennahterweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- die perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase
- sicheres Aktivieren / Deaktivieren der Schraube mit deutlichem Spüren des Einrastens nach einer 1/4 Umdrehung
- kein unbeabsichtigtes Zurückdrehen beim Aktivieren durch das Herausziehen des Sicherheitsschlüssels
- Dehnbegrenzung, somit kein Auseinanderfallen der Schraube am Ende der Behandlung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- abgesetzter Körper zum frühestmöglichen Abwinkeln der Arme
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert

Schraubenkörper: 14,8 mm



Maximale Dehnung: 12,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl



Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-834-12	1 Stück	602-834-32	10 Stück

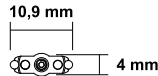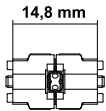

Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow



hyrax® Mini – 7

GNE-Schraube

Für Gaumennaherweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- Dehnwegbegrenzung, somit kein Auseinanderfallen der Schraube am Ende der Behandlung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- abgesetzter Körper zum frühestmöglichen Abwinkeln der Arme
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.




Schraubenkörper: 9,4 mm

Maximale Dehnung: 7,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-800-12	1 Stück	602-800-32	10 Stück

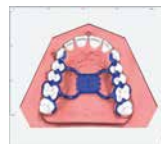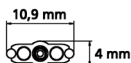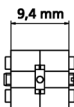

hyrax® Medium – 10

GNE-Schraube

Für Gaumennaherweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- Dehnwegbegrenzung, somit kein Auseinanderfallen der Schraube am Ende der Behandlung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- abgesetzter Körper zum frühestmöglichen Abwinkeln der Arme
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.



Schraubenkörper: 12,4 mm

Maximale Dehnung: 10,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-808-12	1 Stück	602-808-32	10 Stück

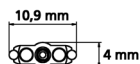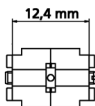

Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow

hyrax® Maxi – 12

GNE-Schraube

Für Gaumennahterweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- Dehnwegbegrenzung, somit kein Auseinanderfallen der Schraube am Ende der Behandlung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- abgesetzter Körper zum frühestmöglichen Abwinkeln der Arme
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Schraubenkörper: 14,4 mm



Maximale Dehnung: 12,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl



Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-811-12	1 Stück	602-811-32	10 Stück

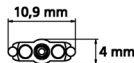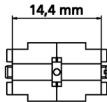

hyrax® neo Mini – 7

GNE-Schraube

Für Gaumennahterweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- (keine aktive) Dehnwegbegrenzung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- TAD optimiertes Design
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Schraubenkörper: 11,2 mm



Maximale Dehnung: 7,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl



Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-845-12	1 Stück	602-845-32	10 Stück

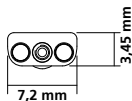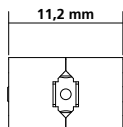

Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow



hyrax® neo Medium – 10

GNE-Schraube

Für Gaumennaherweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- (keine aktive) Dehnwegbegrenzung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- TAD optimiertes Design
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.



Schraubenkörper: 12,4 mm

Maximale Dehnung: 10,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-846-12	1 Stück	602-846-32	10 Stück

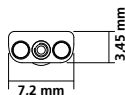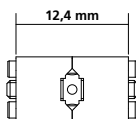

hyrax® neo Maxi – 12

GNE-Schraube

Für Gaumennaherweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- (keine aktive) Dehnwegbegrenzung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- TAD optimiertes Design
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.



Schraubenkörper: 14,4 mm

Maximale Dehnung: 12,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-847-12	1 Stück	602-847-32	10 Stück

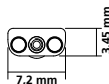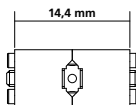

Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow

Titan hyrax® Maxi – 12

GNE-Schraube aus Titan

Für Gaumennahterweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

Die Verankerung an den Zähnen erfolgt über in Titan gegossene und angelaserte Kappenschienen oder alternativ mittels Kunststoff-Kappenschienen aus Orthocryl® Kunststoff.

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Schraubenkörper: 14,4 mm



Maximale Dehnung: 12,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Titan



Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-810-12	1 Stück	602-810-32	10 Stück

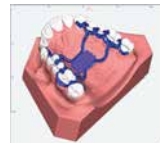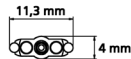

Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow



Variety click Mini – 8

Einführige Spezial-Dehnschraube mit Rückdrehsicherung Click. In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- die perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- sicheres Aktivieren / Deaktivieren der Schraube mit deutlichem Spüren des Einrastens nach einer $\frac{1}{4}$ Umdrehung
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 12,9 mm

Schraubenkörper: 9,6 mm

Maximale Dehnung: 8,0 mm

4 x $\frac{1}{4}$ Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-836-12	1 Stück	602-836-32	10 Stück



Variety click SP (small palate) Mini – 8

Einführige Spezial-Dehnschraube mit Rückdrehsicherung Click. Zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- die perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase
- besonders geeignet für sehr schmale Kiefer
- Abbiegen der Retentionsarme sehr nah am Schraubenkörper möglich
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- sicheres Aktivieren / Deaktivieren der Schraube mit deutlichem Spüren des Einrastens nach einer $\frac{1}{4}$ Umdrehung
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 12,9 mm

Schraubenkörper: 9,6 mm



Maximale Dehnung: 8,0 mm

4 x $\frac{1}{4}$ Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-838-12	1 Stück	602-838-32	10 Stück

Maße Variety click / Variety click SP Mini – 8

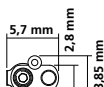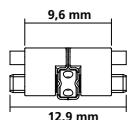

Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow

Variety click Maxi – 12

Einführige Spezial-Dehnschraube mit Rückdrehsicherung Click. In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- die perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- sicheres Aktivieren / Deaktivieren der Schraube mit deutlichem Spüren des Einrastens nach einer 1/4 Umdrehung
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 17,2 mm

Schraubenkörper: 9,6 mm

Maximale Dehnung: 12,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl



Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-837-12	1 Stück	602-837-32	10 Stück

Variety click SP (small palate) Maxi – 12

Einführige Spezial-Dehnschraube mit Rückdrehsicherung Click. In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- die perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase
- besonders geeignet für sehr schmale Kiefer
- Abbiegen der Retentionsarme sehr nah am Schraubenkörper möglich
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- sicheres Aktivieren / Deaktivieren der Schraube mit deutlichem Spüren des Einrastens nach einer 1/4 Umdrehung
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 17,2 mm

Schraubenkörper: 9,6 mm

Maximale Dehnung: 12,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl





Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-839-12	1 Stück	602-839-32	10 Stück

Variety  click



Variety  click SP

Maße Variety click / Variety click SP Maxi – 12

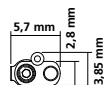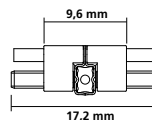

Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow



Variety Mini – 8

Einführige Spezial-Dehnschraube. In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 12,9 mm

Schraubenkörper: 9,6 mm

Maximale Dehnung: 8,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-815-12	1 Stück	602-815-32	10 Stück



Variety SP (small palate) Mini – 8

Einführige Spezial-Dehnschraube. In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- besonders geeignet für sehr schmale Kiefer
- Abbiegen der Retentionsarme sehr nah am Schraubenkörper möglich
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 12,9 mm

Schraubenkörper: 9,6 mm



Maximale Dehnung: 8,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-819-12	1 Stück	602-819-32	10 Stück

Maße Variety/ Variety SP Mini – 8

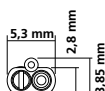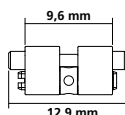

Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow

Variety Maxi – 12

Einführige Spezial-Dehnschraube. In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 14,9 mm

Schraubenkörper: 9,6 mm

Maximale Dehnung: 12,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl



Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-806-12	1 Stück	602-806-32	10 Stück

Variety SP (small palate) Maxi – 12

Einführige Spezial-Dehnschraube. In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- besonders geeignet für sehr schmale Kiefer
- Abbiegen der Retentionsarme sehr nah am Schraubenkörper möglich
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 14,9 mm

Schraubenkörper: 9,6 mm

Maximale Dehnung: 12,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl



Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-809-12	1 Stück	602-809-32	10 Stück



Variety



Variety SP



Maße Variety / Variety SP Maxi – 12

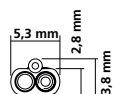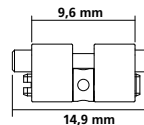

3Shape Laborscanner



Laborscanner E2, Ortho System Scan Only

mit Ortho System Standard (inkl. PC).
Erhöhte Produktivität und Scannen von Texturen.
Optimal für die Archivierung von KFO-Modellen

1 Stück



Laborscanner E3, Ortho System Scan Only

mit Ortho System Standard (inkl. PC).
Hohe Leistungsfähigkeit und Farbscannen.

1 Stück



Laborscanner E4, Ortho System Scan Only

mit Ortho System Standard (inkl. PC).
Extrem hohe Geschwindigkeit und Präzision.

1 Stück



Laborscanner F8, Ortho System Scan Only

Noch schneller mit Dual Scanning Technologie.

1 Stück

NEU

TRIOS 5 Pod

Lieferumfang:

- TRIOS 5 Scanner
- Ladegerät inkl. Netzkabel
- 3 x Akku
- 5 x TRIOS 5 Spitze
- TRIOS 5 Schutzaufsatz
- TRIOS 5 Pod
- Wireless Adapter
- USB Dongle mit Software
- 3Shape Dongle für Jahresgebühr
- 100 x TRIOS Sleeve
- Dokumentation

REF 421-731-00	1 Stück
----------------	---------

NEU

TRIOS 4 Wireless Pod Pen

Lieferumfang:

- TRIOS 4 Wireless Scanner
- Ladegerät inkl. Netzkabel
- Wandmontage-Set für Ladegerät
- 3 x Akku für Pen
- 5 x TRIOS 4 Spitze
- TRIOS 4 Schutzaufsatz
- TRIOS 4 Kalibrierungsskit
- TRIOS 4 Wireless Pod / Wired Pod
- Wireless Adapter
- USB Dongle mit Software
- 3Shape Dongle für Jahresgebühr
- Dokumentation

REF 421-431-01	1 Set
----------------	-------



3Shape TRIOS Intraoralscanner



TRIOS 3 Wireless Pod Pen

Lieferumfang:

- TRIOS 3 Wireless Scanner
- Ladegerät inkl. Netzkabel
- Wandmontage-Set für Ladegerät
- 3 x Akku für Pen
- 5 x TRIOS 3 Spitze
- TRIOS 3 Schutzaufsatz
- TRIOS 3 Kalibrieraufsatz
- TRIOS 3 Kalibrierungskit
- TRIOS 3 Wireless Pod
- TRIOS 3 Wireless Adapter
- USB Dongle mit Software
- 3Shape Dongle für Jahresgebühr
- Dokumentation

REF 421-131-00

1 Set



TRIOS 3 Pod Pen

Lieferumfang:

- TRIOS 3 Scanner
- 5 x TRIOS 3 Spitze
- TRIOS 3 Schutzaufsatz
- TRIOS 3 Kalibrieraufsatz
- TRIOS 3 Kalibrierungskit
- TRIOS 3 Pod
- Verbindungskabel
- USB / Ethernet Adapter
- Pod PSU inkl. Netzkabel
- USB Dongle mit Software
- 3Shape Dongle für Jahresgebühr
- Pod Installationsanleitung
- Dokumentation

REF 421-231-00

1 Set

3Shape TRIOS Intraoralscanner

TRIOS Move+

Ohne Scanner. Kompatibel mit TRIOS 3, TRIOS 4 und TRIOS 5.

REF 420-100-40

1 Stück



TRIOS 5 Spitzen sterilisierbar

REF 420-100-38

3 Stück



TRIOS 4 Spitzen sterilisierbar

REF 420-100-25

3 Stück



TRIOS 3 Spitzen sterilisierbar

REF 420-100-01

3 Stück



OnyxCeph^{3TM}


 OnyxCeph^{3TM}	OnyxCeph^{3TM} Basic (Kauflizenz) Software für Archivierung und Patientenberatung inklusive 5 gleichzeitig nutzbarer Netz-Arbeitsplätze.	REF 410-001-00	1 Stück
 OnyxCeph^{3TM}	OnyxCeph^{3TM} 2D Pro (Kauflizenz) Software für Archivierung, Diagnostik, Behandlungsplanung und Patientenberatung in 2D inklusive 5 gleichzeitig nutzbarer Netz-Arbeitsplätze.	REF 410-002-00	1 Stück
 OnyxCeph^{3TM}	OnyxCeph^{3TM} 3D Pro (Kauflizenz) Software für Archivierung, Diagnostik, Behandlungsplanung und Patientenberatung in 3D inklusive 5 gleichzeitig nutzbarer Netz-Arbeitsplätze.	REF 410-004-00	1 Stück
 OnyxCeph^{3TM}	OnyxCeph^{3TM} 3D Lab (Kauflizenz) Software für Archivierung, Diagnostik, Behandlungsplanung und Patientenberatung in 3D inklusive der Option Virtuelles Setup (V.T.O.3D) sowie insgesamt 20 gleichzeitig nutzbarer Netz-Arbeitsplätze.	REF 410-005-00	1 Stück
 OnyxCeph^{3TM}	Zusätzliche Serverlizenz Zweitpraxis-Serverlizenz (LAN 5/1) zur gleichen Praxis.	REF 410-000-01	1 Stück
 OnyxCeph^{3TM}	Zusätzliche Einzelplatzlizenz Notebooklizenz (1/1) zum gleichen Praxisnamen.	REF 410-000-02	1 Stück
 OnyxCeph^{3TM}	Zusätzlicher Arbeitsplatz Zusätzlicher Arbeitsplatz im Netzwerk.	REF 410-000-03	1 Stück
 OnyxCeph^{3TM}	Anwenderverwaltung Rechtevergabe in Abhängigkeit vom Nutzer-Login.	REF 410-000-04	1 Stück
 OnyxCeph^{3TM}	Statistik-Paket Statistische Auswertung von Befundergebnissen.	REF 410-000-05	1 Stück

Modul Waefer Creation

Erstellung chirurgischer Splints.

REF 410-000-06

1 Stück

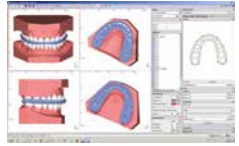


Modul V.T.O.3D (Virtual Treatment Objective)

Erstellung virtueller Zielsetups.

REF 410-000-07

1 Stück

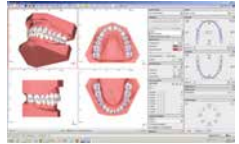


Modul Bonding Trays 3D

Konstruktion von Bracket-Übertragungsschienen.

REF 410-000-11

1 Stück

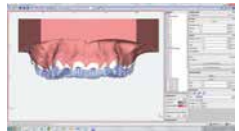


OnyxCeph^{3TM} Modul Bite Splint 3D

Konstruktion von Aufbiss-, Schnarcher-, Sport- u.a. Schienen.

REF 410-000-13

1 Stück

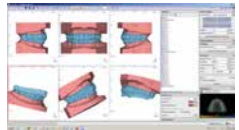


Modul Ortho Apps 3D


Konstruktion von GNE-, Lingualbogen-, Herbst- u.a. Apparaturen.

REF 410-000-14

1 Stück

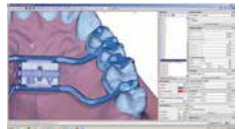

OnyxCeph^{3TM}

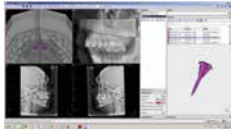


Modul TADmatch™

Modul von OnyxCeph^{3TM} zum virtuellen Setzen von tomas®-pin und als Basis zur Herstellung von Insertionsschablonen.

REF 410-000-15

1 Stück

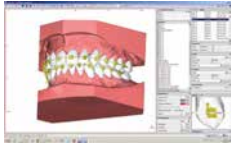


Modul Wire_Bonding

Positionierung von Drähten / Brackets am Set-Up.

REF 410-000-08

1 Stück

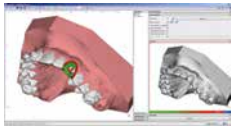


Modul Bracket Erase 3D

Virtuelles Bracket entfernen.

REF 410-000-12

1 Stück

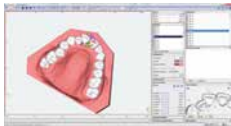


Modul Aligner 3D

Planung von Alignern.

REF 410-000-09

1 Stück

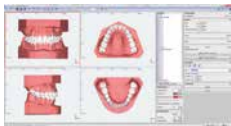

Modul Retainer 3D

Planung von Retainern.

REF 410-000-10

1 Stück

Lingualbrackets	Seite	54
Lingualröhrchen	Seite	55
Bögen	Seite	56
Instrumente	Seite	57
Zubehör	Seite	58



Lingualsystem.

Überraschend anders.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





Erstaunlich effektiv.

discovery® delight steht für die kompromisslose Reduzierung der für die Behandlung benötigten Komponenten. Die freie Auswahl aller lingualen Behandlungsvarianten, von der 2D- bis hin zur 3D-Behandlung, bleibt dabei gewährleistet.

In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Rubens Demichieri, Montevideo, entstand ein Lingualsystem, das auf die Patientenwünsche eingeht und gleichzeitig alle Vorzüge der bewährten discovery® Bracketfamilie bietet:

- Höchste Qualität.
- Nahezu unsichtbar.
- Kurze Behandlungsdauer.
- Sehr hoher Tragekomfort.
- Perfektes Design.






Lingualbrackets / Sortimente

discovery® delight

Slot: 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20 - mit Vertikalhäkchen

Zahn	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26
Breite	2,0 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2,0 mm
REF	724-102-51	790-452-00	790-452-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-452-00	790-452-00	724-102-51
Menge	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
REF	724-103-51	790-453-00	790-453-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-453-00	790-453-00	724-103-51
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

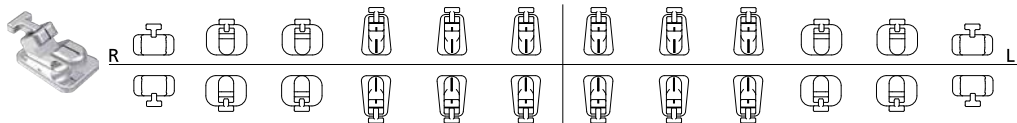

Zahn	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36
Breite	2,0 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2,0 mm
REF	724-102-51	790-452-00	790-452-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-452-00	790-452-00	724-102-51
Menge	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
REF	724-103-51	790-453-00	790-453-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-453-00	790-453-00	724-103-51
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

discovery® delight social six pack	1 Fall	6 Frontzahnbrackets (REF 790-450-00)	REF 891-406-00
discovery® delight single jaw	1 Fall	6 Frontzahnbrackets (REF 790-450-00) + 4 Seitenzahnbrackets (REF 790-452-00)	REF 891-407-00
discovery® delight single jaw + tubes	1 Fall	6 Frontzahnbrackets (REF 790-450-00) + 4 Seitenzahnbrackets (REF 790-452-00) + 2 Molarenröhrchen (REF 724-102-51)	REF 891-408-00
discovery® delight complete case	1 Fall	12 Frontzahnbrackets (REF 790-450-00) + 8 Seitenzahnbrackets (REF 790-452-00) + 4 Molarenröhrchen (REF 724-102-51)	REF 891-409-00

discovery® delight Frontzahnbracket

mit Vertikalhäkchen

Zahn	Torque	Distal Offset	In/Out	Häkchen	Breite	REF	Menge
13-11 / 21-23 / 43-41 / 31-33				•	1,5 mm	790-450-00	1 Stück
13-11 / 21-23 / 43-41 / 31-33				•	1,5 mm	790-451-00	10 Stück

Slot: 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20



discovery® delight Seitenzahnbracket, offen

mit Vertikalhäkchen

Zahn	Torque	Distal Offset	In/Out	Häkchen	Breite	REF	Menge
15-14 / 24-25 / 45-44 / 34-35				•	1,5 mm	790-452-00	1 Stück
15-14 / 24-25 / 45-44 / 34-35				•	1,5 mm	790-453-00	10 Stück

Slot: 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20



discovery® delight Seitenzahnbracket, geschlossen

nicht konvertierbar · mit Vertikalhäkchen

Zahn	Torque	Distal Offset	In/Out	Häkchen	Breite	REF	Menge
15-14 / 24-25 / 45-44 / 34-35				•	2,0 mm	724-100-51	1 Stück
15-14 / 24-25 / 45-44 / 34-35				•	2,0 mm	724-101-51	10 Stück

Slot: 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20



discovery® delight Lingualröhrchen / Adhäsivtechnik

nicht konvertierbar · mit Vertikalhäkchen

Zahn	Torque	Distal Offset	In/Out	Häkchen	Breite	REF	Menge
16 / 26 / 46 / 36				•	2,0 mm	724-102-51	1 Stück
16 / 26 / 46 / 36				•	2,0 mm	724-103-51	10 Stück

Slot: 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20





rematitan® LITE Lingualbogen, rund

Festigkeitsklasse: superelastisch

Ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,25 mm / 10			766-760-00	10 Stück
0,30 mm / 12			766-761-00	10 Stück
0,35 mm / 14			766-762-00	10 Stück
0,40 mm / 16			766-763-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-764-00	10 Stück



rematitan® LITE Lingualbogen, vierkant

Festigkeitsklasse: superelastisch

∏	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-765-00	10 Stück
0,48 mm x 0,48 mm / 19 x 19		0,62 mm	766-766-00	10 Stück



remanium® Lingualbogen, rund

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

Ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,40 mm / 16			766-767-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-768-00	10 Stück



remanium® Lingualbogen, vierkant

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

∏	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18			766-769-00	10 Stück
0,48 mm x 0,48 mm / 19 x 19			766-770-00	10 Stück



dentaflex® Lingualbogen, rund, 6-fach verseilt

Festigkeitsklasse: super federhart · 2.500 N/mm² - 2.700 N/mm²

Ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,38 mm / 15			766-771-00	10 Stück

Lingualbiegezange

sterilisierbar

Zum Biegen von Stufen und Ausgleichsbiegungen in die Bögen für die Lingualtechnik.

Stufenbreite: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm und 3,0 mm

Max. Drahtstärke: ø 0,5 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-001-00

1 Stück



Mosquitoklemme, gebogen

sterilisierbar

Zum Setzen und Ligieren von Dentalastics® Kunststoffligaturen, speziell in der Lingualtechnik.

REF 000-732-00

1 Stück



Klemmpinzette

sterilisierbar

Graziles Pinzettendesign für das einfache Positionieren von Brackets und Bukkalröhrchen.

REF 025-280-00

1 Stück



Positionierungstool, lingual

sterilisierbar

REF 023-278-00

1 Stück



Mundspiegel mit Hilfslinien (montiert), lingual

sterilisierbar

REF 023-279-00

1 Stück



Mundspiegel mit Hilfslinien (ohne Griff), lingual

sterilisierbar

REF 023-279-10

1 Stück



Bracket-Abnehmezange, abgewinkelt

sterilisierbar

Zum einfachen Entfernen von Lingualbrackets und Brackets im Seitenzahnbereich. Einsätze aus Hartmetall.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-347-00

1 Stück



Zubehör



SUPER Elasto-Force Kunststoffketten

Konstante Zugwirkung bei längerer Wirkungsdauer. Hohe Elastizität mit sehr gutem Rückstellverhalten.

Farbe	Ring-Innen ø	Länge	Steg	REF	Menge
transparent	1,3 mm	4,6 m	•	774-220-01	1 Rolle
transparent	1,3 mm	4,6 m		774-221-01	1 Rolle



KFO-Demonstrationsmodell discovery® delight

Bestückt mit:

- discovery® delight Lingualbrackets
 - discovery® delight Molarenröhrchen
 - rematitan® LITE Lingualbogen
 - dentaflex® Lingualbogen
- OK und UK aus Kunststoff, verbunden mit Scharnier.

REF 892-000-22

1 Stück



discovery® sl / Sortimente

Roth 18/22 Seite 64

discovery® sl 2.0 / Sortiment

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22 Seite 65

Instrumente und Zubehör

Seite 66

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



FDI-System

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28		
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8		
R	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	L
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	

Selbstligierende Brackets.

Dynamisch und funktionell.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





Kieferorthopädische Behandlung auf hohem Niveau.

Einfaches Handling sowie ein hohes Maß an Tragekomfort für den Patienten und eine effiziente Behandlung mit kurzen Stuhlzeiten für die Praxis – dies alles bieten die selbstligierenden Bracketsysteme discovery® sl von Dentauro.

discovery® sl und discovery® sl 2.0 zählen immer noch zu den kleinsten und flachsten sl-Brackets am Markt. Das Herzstück ist hier der klappenartige Verschlussmechanismus, der dem Patienten durch seine glatten Oberflächen und dem geschlossenen Design ein ausgezeichnetes Tragegefühl und beste Hygiene bietet. Der Deckel ist mit dem jeweils speziell abgestimmten Instrument einfach zu öffnen und zu schließen. Die sl-Brackets von Dentauro überzeugen Patient und Behandler gleichermaßen und erfüllen nebenbei alle Anforderungen an ein modernes Bracketsystem.


discovery® sl

Eines der kleinsten sl-Brackets der Welt.



discovery® sl 2.0

Bewährtes für Ihren Erfolg.

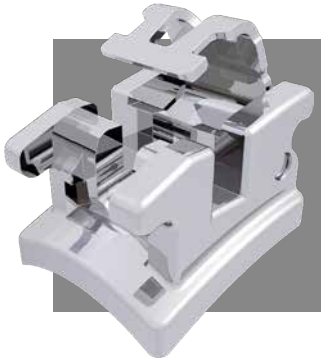

Selbstligierende Brackets


discovery® sl / Sortimente

Roth 18

Slot: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,6 mm	2,6 mm	2,7 mm	2,4 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,4 mm	2,7 mm	2,6 mm	2,6 mm
REF	718-101-15	718-101-14	718-141-13	718-101-12	718-101-11	718-101-21	718-101-22	718-141-23	718-101-24	718-101-25
Menge	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

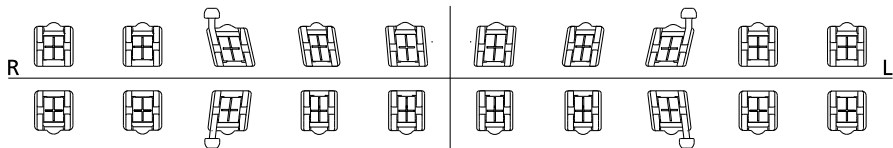

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,6 mm	2,6 mm	2,7 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,7 mm	2,6 mm	2,6 mm
REF	718-101-45	718-101-44	718-141-43	718-101-42	718-101-41	718-101-31	718-101-32	718-141-33	718-101-34	718-101-35
Menge	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück

Sortimente:


1 Fall	20 Brackets	REF 718-101-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 718-101-10

Roth 22

Slot: 0,56 mm x 0,64 mm / 22 x 25 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,6 mm	2,6 mm	2,7 mm	2,4 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,4 mm	2,7 mm	2,6 mm	2,6 mm
REF	722-101-15	722-101-14	722-141-13	722-101-12	722-101-11	722-101-21	722-101-22	722-141-23	722-101-24	722-101-25
Menge	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

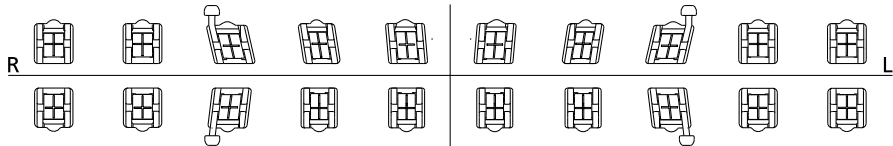

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,6 mm	2,6 mm	2,7 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,7 mm	2,6 mm	2,6 mm
REF	722-101-45	722-101-44	722-141-43	722-101-42	722-101-41	722-101-31	722-101-32	722-141-33	722-101-34	722-101-35
Menge	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück

Sortimente:


1 Fall	20 Brackets	REF 722-101-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 722-101-10

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Slot: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Breite	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm
REF	722-102-15	722-102-14	722-142-13	722-102-12	722-102-11	722-102-21	722-102-22	722-142-23	722-102-24	722-102-25
Menge	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

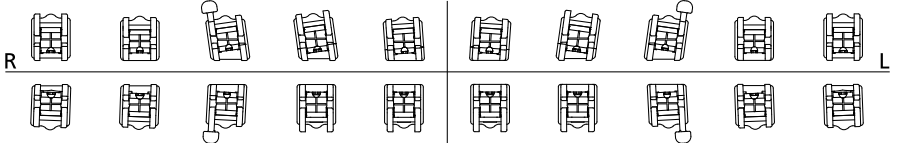

Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm
REF	722-102-45	722-102-44	722-142-43	722-102-42	722-102-41	722-102-31	722-102-32	722-142-33	722-102-34	722-102-35
Menge	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 722-102-01
--------	-------------	-----------------------

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Selbstligierende Brackets

Instrumente und Zubehör



sl-Instrument, für discovery® sl

sterilisierbar

Zum Öffnen und Schließen der selbstligierenden Brackets
discovery® sl (System Roth), **dynamique® m** und
dynamique® c sowie zum leichteren Einligieren des Bogens.

REF 023-276-00

1 Stück



sl-Instrument, für discovery® sl 2.0

sterilisierbar

Zum Öffnen und Schließen der selbstligierenden Brackets
discovery® sl 2.0 (System McLaughlin-Bennett-Trevisi*)
sowie zum leichteren Einligieren des Bogens.

REF 023-277-00

1 Stück

* The Dentauro version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentauro imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



KFO-Demonstrationsmodell discovery® sl

Angle Klasse I, Normalokklusion

Roth 22

Bestückt mit:

- discovery® sl selbstligierenden Metallbrackets
- Ortho-Cast M-Series mini Bukkalröhrchen
- Equire Edelstahlbogen, OK
- rematitan® sl Bogen, UK

OK und UK aus Kunststoff, verbunden mit Scharnier.

REF 892-000-17

1 Stück



KFO-Demonstrationsmodell discovery® sl 2.0

Angle Klasse I, Normalokklusion

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Bestückt mit:

- discovery® sl 2.0 selbstligierenden Metallbrackets
- Ortho-Cast M-Series und M-Series mini Bukkalröhrchen
- Tensi® Bögen

OK und UK aus Kunststoff, verbunden mit Scharnier.

REF 892-000-19

1 Stück

* The Dentauro version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentauro imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

discovery® / Sortimente

Roth 18/22	Seite	76
Ricketts® – IV. Dimension 18	Seite	78
Ricketts® Universal 18	Seite	78
Hilgers 18	Seite	79
Standard Edgewise 18/22	Seite	79

discovery® / Einzelpackungen – Adhäsivtechnik

Roth 18/22	Seite	81
------------	-------	----

discovery® smart / Sortimente

Roth 18/22	Seite	82
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Seite	84

topic / Sortimente

Roth 18/22	Seite	86
------------	-------	----

topic / Einzelpackungen – Adhäsivtechnik

Roth 18/22	Seite	88
------------	-------	----

equilibrium® mini / Sortimente

Roth 18/22	Seite	89
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Seite	91

equilibrium® mini / Einzelpackungen – Adhäsivtechnik

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Seite	93
-----------------------------------	-------	----

equilibrium® 2 / Sortimente

Roth 18/22	Seite	94
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Seite	96
Ricketts® Universal 18	Seite	98
Standard Edgewise 18/22	Seite	98

equilibrium® 2 / Einzelpackungen – Adhäsivtechnik

Roth 18/22	Seite	100
Ricketts® Universal 18	Seite	100

equilibrium® 2 / Einzelpackungen – Bandtechnik

Roth 18/22	Seite	101
Roth, McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Seite	101
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Seite	101
Standard Edgewise 18/22	Seite	102
Individuelle Systeme 18/22	Seite	102

equilibrium® ti / Sortimente

Roth 18/22	Seite	103
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Seite	104

Bracketzubehör

	Seite	122
--	-------	-----

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Metallbrackets.

Immer eine gute Wahl.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





Höchstleistungen für Präzision.

Das Design und die Fertigung der hochwertigen Brackets erfolgt in modernsten Konstruktions- und Produktionsverfahren. Was zählt, ist höchste Präzision für eine sichere und verlässliche Anwendung in der kieferorthopädischen Therapie. Die Vielfalt der Dentaureum-Metallbrackets ist weltweit einzigartig und bietet Einsatzmöglichkeiten für alle Indikationen. Die Metallbrackets werden aus hochkorrosionsfesten, medizinischen Edelstahllegierungen in einem Stück gefertigt. Sie sind deshalb für den Patienten besonders bioverträglich, da auf Lote verzichtet wird. Das breite Programm umfasst auch nickelfreie* Brackets aus einer speziell entwickelten CoCr-Legierung und für Allergiker besonders geeignete Brackets aus Reintitan.



* siehe KFO-Werkstoffliste

discovery®

Die Summe der Erfahrung.



discovery® smart

Klein und brillant.



topic

Die nickelfreie* Alternative.



equilibrium® mini

Das Minibracket.



equilibrium® 2

Harmonie in Funktion und Komfort.



equilibrium® ti

Ausgezeichnete Bioverträglichkeit.



FDI-System

	18	17	16	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	26	27	28	
	8	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	8	
R	8	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	8	L
	48	47	46	45	44	43	42	41		31	32	33	34	35	36	37	38	

Die discovery® Linie.



Die discovery® Linie.

Die discovery® Bracketfamilie umfasst die Premium-Brackets im Programm der Dentaaurum-Metallbrackets. Sie werden komplett als Ein-Stück-Bracket in der MIM-Technik – Metal Injection Molding – auf modernsten Anlagen gespritzt. Auch die Häkchen auf dem 3er-, auf Wunsch auch auf dem 4er- und 5er-Bracket, werden mit dem Bracketkörper zusammen in einem Stück realisiert und direkt mitgespritzt. Durch die innovative Pilzform geben sie zusätzlichen Gummiringen den nötigen Halt. Die Systemvielfalt bietet für jede Therapie das richtige Bracket.

Innovative Produktionsverfahren garantieren maximalen Erfolg.

Die Basen aller Brackets der discovery® Linie sind per 3D-CAD (Computer Aided Design) ideal an die Zahnform angepasst und bieten dem Anwender ein optimales Handling beim Kleben auf dem Zahn. Durch die anatomische Form ist es einfach, das Bracket auf dem Zahn zu positionieren. Es saugt sich regelrecht am Zahn fest.



Optimale Haftkraft und einfaches Debonding.

Die patentierte laserstrukturierte Basis mit FDI-Kennzeichnung garantiert sicheren Halt während der Behandlung. Die ideale Verteilung von Mikro- und Makroretentionen ermöglicht einen optimalen Verbund von Zahn/Adhäsiv zum Bracket. Gleichmäßige Retentionen unterstützen die Haftung der Brackets auf der Zahnoberfläche. Das Debonding der konventionell ligierbaren Brackets ist durch die Sollknickstelle spielend einfach. Sie ermöglicht die Verformbarkeit der Brackets und damit ein sicheres Abnehmen vom Zahn.

Individualität und einfaches Handling zugleich.

Das Design aller discovery® Brackets ist so ausgelegt, dass genügend Platz für Mehrfachligaturen besteht. Zusätzlich abgerundete Bracketflügel erleichtern das Ligieren und geben dem Patienten ein angenehmes Tragegefühl ohne scharfe Kanten. Alle discovery® Brackets werden zur besseren Identifikation und Positionierung bioverträglich lasermarkiert.

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.

Da alle Brackets der discovery® Linie dem gleichen Design folgen, stehen der Individualität der Behandlung keine Grenzen entgegen. Alle Brackets sind problemlos miteinander kombinierbar. Ein geringer In/Out von 0,7 mm macht das individuelle Zusammenstellen der Brackets innerhalb der Familie ohne jegliche Ausgleichsbiegungen möglich.



Die equilibrium® Linie.

equilibrium® **mini**

equilibrium® 2

equilibrium® ti

Die equilibrium® Linie.

Die equilibrium® Serie ist Dentaurs klassische Bracketserie. Das ansprechende und funktionelle Design hat sich durch verlässliche Ergebnisse am Patienten über Jahre bewährt.

Die Brackets der equilibrium® Familie werden aus Stangenmaterial umgeformt, geschnitten und in vielen vollautomatisierten Arbeitsschritten weiterverarbeitet. Sie sind wie viele weitere Dentaurs-Brackets echte Ein-Stück-Brackets.

Die equilibrium® 2 und equilibrium® mini werden in einem Stück – Körper und Basis – aus hochfestem, rostfreiem Edelstahl* produziert. Die equilibrium® ti werden aus Titan** hergestellt und sind nickelfrei. Die Brackets der equilibrium® Familie sind besonders biokompatibel, da keine Lote verwendet werden.



* Werkstoffnummer nach DIN 1.4404

** Werkstoffnummer nach DIN 3.7035



Optimale Haftkraft und einfaches Debonding.

Die patentierte laserstrukturierte Basis mit FDI-Kennzeichnung garantiert auch bei den equilibrium® Brackets sicheren Halt während der Behandlung. Die ideale Verteilung von Mikro- und Makroretentionen ermöglicht einen optimalen Verbund von Zahn/Adhäsiv zum Bracket. Vorzeitige Ablösungen der Brackets können durch gleichmäßige Retentionen vermieden werden.

Einfaches Handling und sichere Therapie.

Alle equilibrium® Brackets werden zur besseren Identifikation und Positionierung bioverträglich lasermarkiert. Auch auf der Basis wird die Kennzeichnung mit FDI umgesetzt. Dieses Symbolsystem hilft, jedes Bracket zahnspezifisch zuzuordnen. Die Markierung ist abriebfest und enthält keine bedenklichen Farbstoffe.

Bewährtes Design.


Das Design der equilibrium® Brackets bietet ausgezeichnete Unterschnitte der Bracketflügel, die jederzeit auch die Verwendung von Mehrfachligaturen erlaubt. Die Mesial- und Distalseiten des Brackets sind so gestaltet, dass das Greifen und Andrücken der Brackets noch einfacher wird. Das Design der rhomboiden Basis mit zusätzlicher Mittenmarkierung erleichtert das Setzen zur klinischen Krone. Die niedrigen In/Out-Werte ermöglichen einen idealen Kraftansatz.

discovery® / Sortimente

Roth 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-106-00	790-106-00	790-104-00	790-102-00	790-163-00	790-164-00	790-103-00	790-105-00	790-106-00	790-106-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

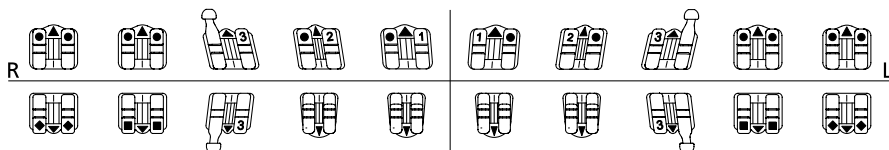

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	790-111-00	790-110-00	790-108-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-109-00	790-110-00	790-111-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 891-180-00
10 Fälle	200 Brackets	REF 891-181-00
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 891-182-00


Hinweis:

Weitere Brackets mit Roth-Werten siehe Einzelpackungen.

Roth 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-141-00	790-141-00	790-104-00	790-102-00	790-163-00	790-164-00	790-103-00	790-105-00	790-142-00	790-142-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

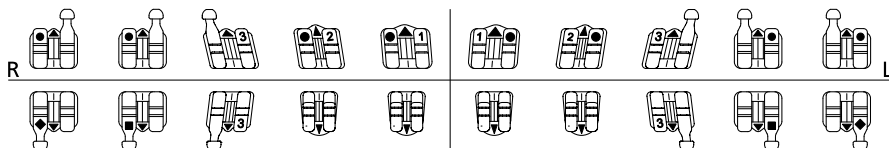

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	790-145-00	790-143-00	790-108-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-109-00	790-144-00	790-146-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 891-295-00
10 Fälle	200 Brackets	REF 891-296-00
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 891-297-00


Hinweis:

Weitere Brackets mit Roth-Werten siehe Einzelpackungen.

Roth 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-118-00	790-118-00	790-116-00	790-114-00	790-165-00	790-166-00	790-115-00	790-117-00	790-118-00	790-118-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

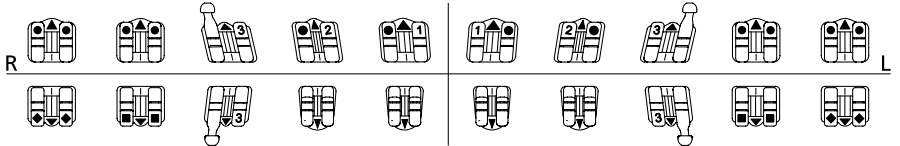

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	790-123-00	790-122-00	790-120-00	790-119-00	790-119-00	790-119-00	790-119-00	790-121-00	790-122-00	790-123-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 891-183-00
10 Fälle	200 Brackets	REF 891-184-00
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 891-185-00


Hinweis:

Weitere Brackets mit Roth-Werten siehe Einzelpackungen.

Roth 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-147-00	790-147-00	790-116-00	790-114-00	790-165-00	790-166-00	790-115-00	790-117-00	790-148-00	790-148-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

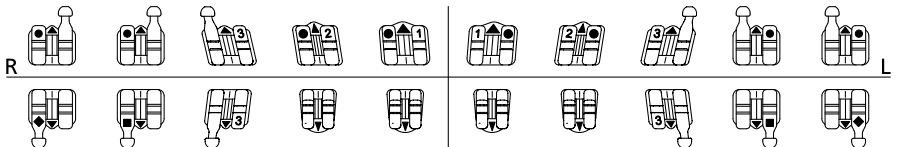

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	790-151-00	790-149-00	790-120-00	790-119-00	790-119-00	790-119-00	790-119-00	790-121-00	790-150-00	790-152-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 891-298-00
10 Fälle	200 Brackets	REF 891-299-00
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 891-300-00


Hinweis:

Weitere Brackets mit Roth-Werten siehe Einzelpackungen.

Ricketts® - IV. Dimension 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	+ 7°	+ 14°	+ 22°	+ 22°	+ 14°	+ 7°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-106-00	790-106-00	790-134-00	790-132-00	790-130-00	790-131-00	790-133-00	790-135-00	790-106-00	790-106-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

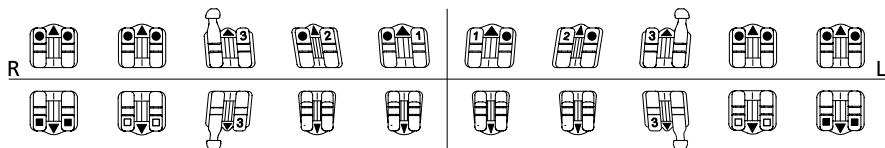

Torque	- 17°	- 11°	+ 7°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	+ 7°	- 11°	- 17°
Angulation	0°	0°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	790-110-00	790-128-00	790-138-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-139-00	790-128-00	790-110-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück


Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 891-375-00
10 Fälle	200 Brackets	REF 891-376-00
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 891-377-00

Ricketts® Universal 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Häkchen auf 3ern

Torque	0°	0°	+ 7°	+ 14°	+ 22°	+ 22°	+ 14°	+ 7°	0°	0°
Angulation	0°	0°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,3 mm	3,3 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	790-136-00	790-136-00	790-134-00	790-132-00	790-130-00	790-131-00	790-133-00	790-135-00	790-136-00	790-136-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

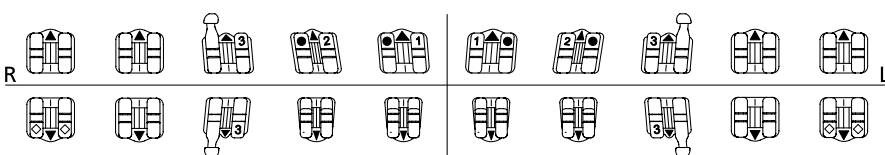

Torque	- 14°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	- 14°
Angulation	0°	0°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	790-140-00	790-136-00	790-138-00	790-137-00	790-137-00	790-137-00	790-137-00	790-139-00	790-136-00	790-140-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück


Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 891-188-00
10 Fälle	200 Brackets	REF 891-189-00
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 891-196-00

Hilgers 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	+ 7°	+ 14°	+ 22°	+ 22°	+ 14°	+ 7°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-106-00	790-106-00	790-134-00	790-132-00	790-130-00	790-131-00	790-133-00	790-135-00	790-106-00	790-106-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

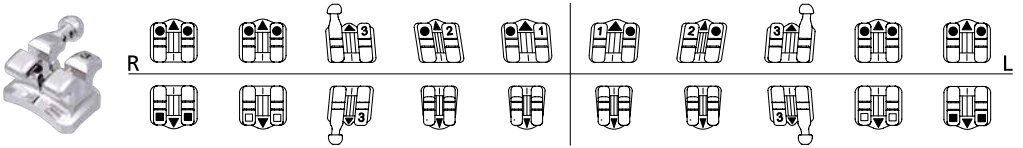

Torque	- 17°	- 11°	+ 7°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	+ 7°	- 11°	- 17°
Angulation	0°	0°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	790-110-00	790-128-00	790-138-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-139-00	790-128-00	790-110-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:


1 Fall	20 Brackets	REF 891-261-00
10 Fälle	200 Brackets	REF 891-262-00
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 891-263-00

Standard Edgewise 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · ohne Häkchen

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,0 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-205-15	718-205-14	718-205-13	718-205-12	718-205-11	718-205-21	718-205-22	718-205-23	718-205-24	718-205-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

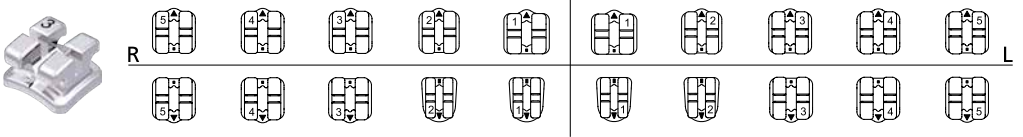

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-205-45	718-205-44	718-205-43	718-205-42	718-205-41	718-205-31	718-205-32	718-205-33	718-205-34	718-205-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:


1 Fall	20 Brackets	REF 718-205-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 718-205-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 718-205-50

Standard Edgewise 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 - ohne Häkchen

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	3,0 mm	3,0 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-205-15	722-205-14	722-205-13	722-205-12	722-205-11	722-205-21	722-205-22	722-205-23	722-205-24	722-205-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

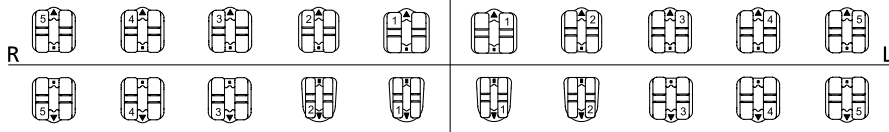

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-205-45	722-205-44	722-205-43	722-205-42	722-205-41	722-205-31	722-205-32	722-205-33	722-205-34	722-205-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 722-205-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 722-205-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 722-205-50

Roth 18/22

Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	Menge
11	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,8 mm	790-100-00	790-112-00	10 Stück
21	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,8 mm	790-101-00	790-113-00	10 Stück
13	- 2°	+ 9°	0,7 mm	•	3,4 mm	790-155-00	790-157-00	10 Stück
23	- 2°	+ 9°	0,7 mm	•	3,4 mm	790-156-00	790-158-00	10 Stück



Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30




discovery® smart / Sortimente

Roth 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-901-15	718-901-14	718-941-13	718-901-12	718-901-11	718-901-21	718-901-22	718-941-23	718-901-24	718-901-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

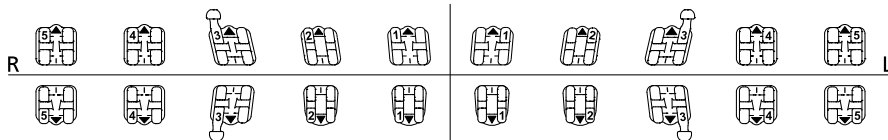

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-901-45	718-901-44	718-941-43	718-901-42	718-901-41	718-901-31	718-901-32	718-941-33	718-901-34	718-901-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:


1 Fall	20 Brackets	REF 718-901-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 718-901-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 718-901-50

Roth 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-941-15	718-941-14	718-941-13	718-901-12	718-901-11	718-901-21	718-901-22	718-941-23	718-941-24	718-941-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

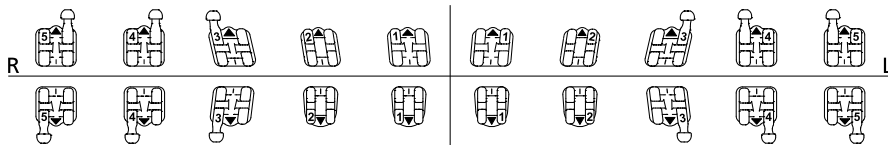

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-941-45	718-941-44	718-941-43	718-901-42	718-901-41	718-901-31	718-901-32	718-941-33	718-941-34	718-941-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:


1 Fall	20 Brackets	REF 718-941-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 718-941-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 718-941-50

Roth 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-901-15	722-901-14	722-941-13	722-901-12	722-901-11	722-901-21	722-901-22	722-941-23	722-901-24	722-901-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

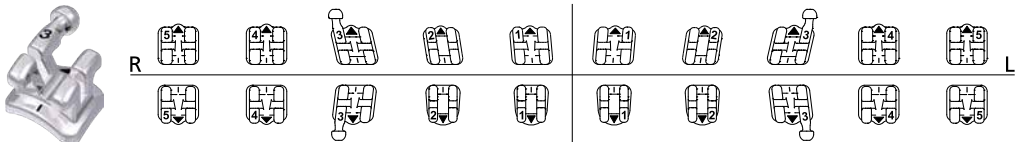

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-901-45	722-901-44	722-941-43	722-901-42	722-901-41	722-901-31	722-901-32	722-941-33	722-901-34	722-901-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:


1 Fall	20 Brackets	REF 722-901-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 722-901-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 722-901-50

Roth 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-941-15	722-941-14	722-941-13	722-901-12	722-901-11	722-901-21	722-901-22	722-941-23	722-941-24	722-941-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

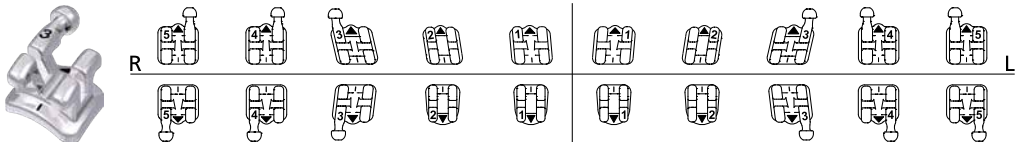

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-941-45	722-941-44	722-941-43	722-901-42	722-901-41	722-901-31	722-901-32	722-941-33	722-941-34	722-941-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:


1 Fall	20 Brackets	REF 722-941-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 722-941-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 722-941-50

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Breite	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-902-15	718-902-14	718-942-13	718-902-12	718-902-11	718-902-21	718-902-22	718-942-23	718-902-24	718-902-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

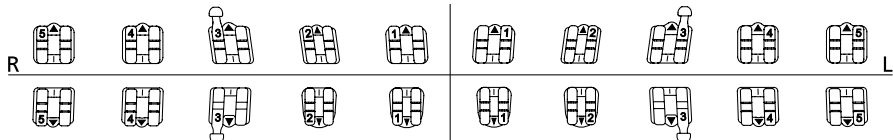

Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-902-45	718-902-44	718-942-43	718-902-42	718-902-41	718-902-31	718-902-32	718-942-33	718-902-34	718-902-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 718-902-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 718-902-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 718-902-50


** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Breite	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-942-15	718-942-14	718-942-13	718-902-12	718-902-11	718-902-21	718-902-22	718-942-23	718-942-24	718-942-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

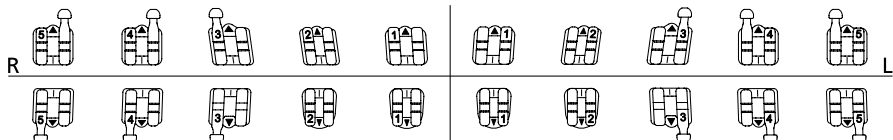

Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-942-45	718-942-44	718-942-43	718-902-42	718-902-41	718-902-31	718-902-32	718-942-33	718-942-34	718-942-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 718-942-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 718-942-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 718-942-50


** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Breite	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-902-15	722-902-14	722-942-13	722-902-12	722-902-11	722-902-21	722-902-22	722-942-23	722-902-24	722-902-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

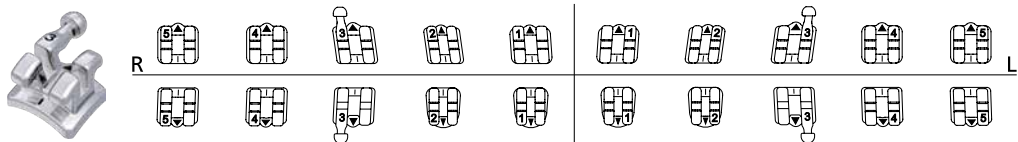

Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-902-45	722-902-44	722-942-43	722-902-42	722-902-41	722-902-31	722-902-32	722-942-33	722-902-34	722-902-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 722-902-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 722-902-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 722-902-50


** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Breite	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-942-15	722-942-14	722-942-13	722-902-12	722-902-11	722-902-21	722-902-22	722-942-23	722-942-24	722-942-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

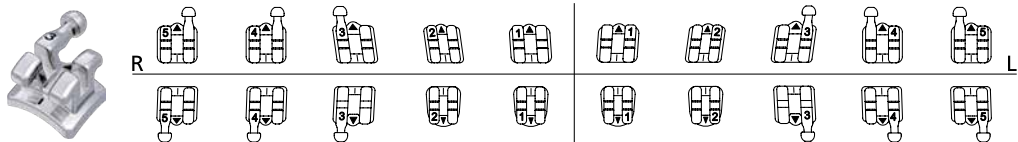

Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-942-45	722-942-44	722-942-43	722-902-42	722-902-41	722-902-31	722-902-32	722-942-33	722-942-34	722-942-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 722-942-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 722-942-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 722-942-50


** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

topic / Sortimente

Roth 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Häkchen auf 3ern · nickelfrei*

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-306-00	790-306-00	790-304-00	790-302-00	790-363-00	790-364-00	790-303-00	790-305-00	790-306-00	790-306-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

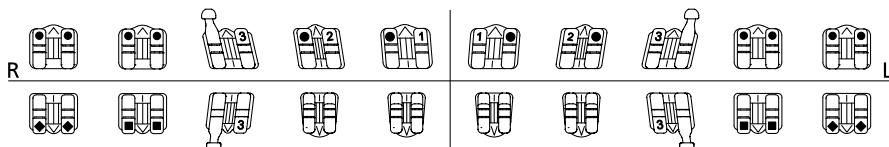

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,4 mm	3,4 mm	3,1 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-311-00	790-310-00	790-308-00	790-307-00	790-307-00	790-307-00	790-307-00	790-309-00	790-310-00	790-311-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 891-333-00
10 Fälle	200 Brackets	REF 891-334-00
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 891-335-00

Hinweis:


Weitere Brackets mit Roth-Werten siehe Einzelpackungen.

* siehe KFO-Werkstoffliste

Roth 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern · nickelfrei*

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-341-00	790-341-00	790-304-00	790-302-00	790-363-00	790-364-00	790-303-00	790-305-00	790-342-00	790-342-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

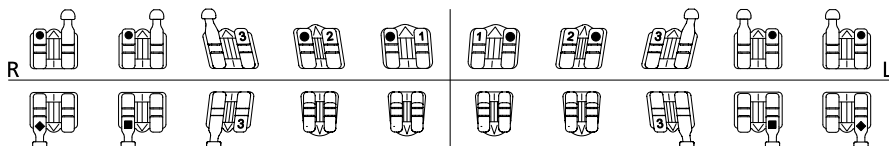

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,4 mm	3,4 mm	3,1 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-345-00	790-343-00	790-308-00	790-307-00	790-307-00	790-307-00	790-307-00	790-309-00	790-344-00	790-346-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 891-336-00
10 Fälle	200 Brackets	REF 891-337-00
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 891-338-00

Hinweis:


Weitere Brackets mit Roth-Werten siehe Einzelpackungen.

* siehe KFO-Werkstoffliste

Roth 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Hakenchen auf 3ern · nickelfrei*

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-318-00	790-318-00	790-316-00	790-314-00	790-365-00	790-366-00	790-315-00	790-317-00	790-318-00	790-318-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

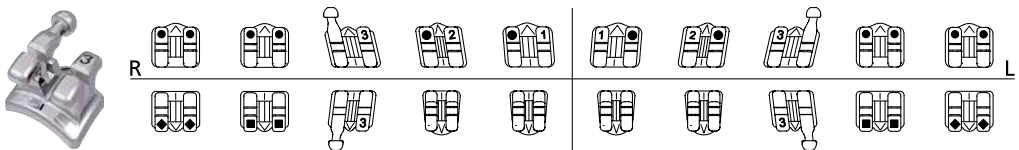

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,4 mm	3,4 mm	3,1 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-323-00	790-322-00	790-320-00	790-319-00	790-319-00	790-319-00	790-319-00	790-321-00	790-322-00	790-323-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 891-339-00
10 Fälle	200 Brackets	REF 891-340-00
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 891-341-00

Hinweis:


Weitere Brackets mit Roth-Werten siehe Einzelpackungen.

* siehe KFO-Werkstoffliste

Roth 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Hakenchen auf 3ern, 4ern und 5ern · nickelfrei*

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-347-00	790-347-00	790-316-00	790-314-00	790-365-00	790-366-00	790-315-00	790-317-00	790-348-00	790-348-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

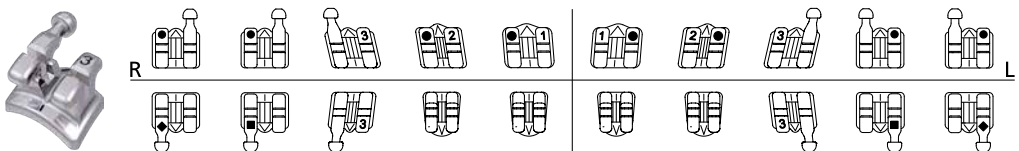

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,4 mm	3,4 mm	3,1 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-351-00	790-349-00	790-320-00	790-319-00	790-319-00	790-319-00	790-319-00	790-321-00	790-350-00	790-352-00
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 891-342-00
10 Fälle	200 Brackets	REF 891-343-00
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 891-344-00

Hinweis:

Weitere Brackets mit Roth-Werten siehe Einzelpackungen.

* siehe KFO-Werkstoffliste

topic / Einzelpackungen – Adhäsivtechnik



Roth 18/22

nickelfrei*

Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	Menge
11	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,9 mm	790-300-00	790-312-00	10 Stück
21	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,9 mm	790-301-00	790-313-00	10 Stück

Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30


* siehe KFO-Werkstoffliste

Roth 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	718-401-15	718-401-14	718-441-13	718-401-12	718-401-11	718-401-21	718-401-22	718-441-23	718-401-24	718-401-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

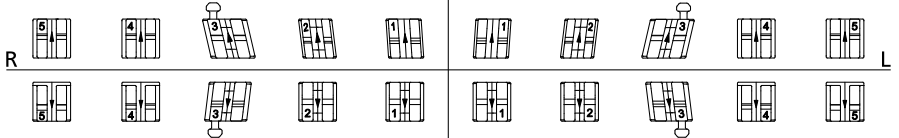

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	718-401-45	718-401-44	718-441-43	718-401-42	718-401-41	718-401-31	718-401-32	718-441-33	718-401-34	718-401-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:


1 Fall	20 Brackets	REF 718-401-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 718-401-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 718-401-50

Roth 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	718-441-15	718-441-14	718-441-13	718-401-12	718-401-11	718-401-21	718-401-22	718-441-23	718-441-24	718-441-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

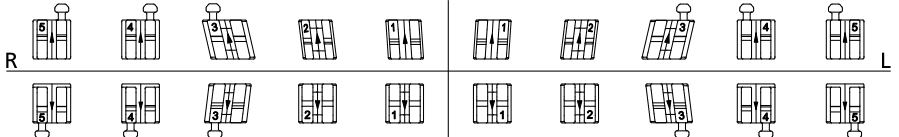

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	718-441-45	718-441-44	718-441-43	718-401-42	718-401-41	718-401-31	718-401-32	718-441-33	718-441-34	718-441-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 718-441-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 718-441-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 718-441-50


equilibrium® mini / Sortimente

Roth 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	722-401-15	722-401-14	722-441-13	722-401-12	722-401-11	722-401-21	722-401-22	722-441-23	722-401-24	722-401-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

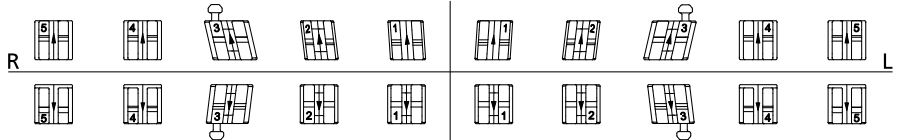

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	722-401-45	722-401-44	722-441-43	722-401-42	722-401-41	722-401-31	722-401-32	722-441-33	722-401-34	722-401-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:


1 Fall	20 Brackets	REF 722-401-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 722-401-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 722-401-50

Roth 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	722-441-15	722-441-14	722-441-13	722-401-12	722-401-11	722-401-21	722-401-22	722-441-23	722-441-24	722-441-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

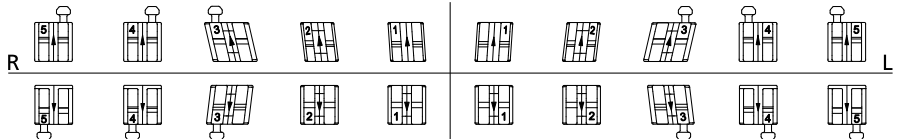

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	722-441-45	722-441-44	722-441-43	722-401-42	722-401-41	722-401-31	722-401-32	722-441-33	722-441-34	722-441-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:


1 Fall	20 Brackets	REF 722-441-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 722-441-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 722-441-50

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Breite	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	718-402-15	718-402-14	718-442-13	718-402-12	718-402-11	718-402-21	718-402-22	718-442-23	718-402-24	718-402-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

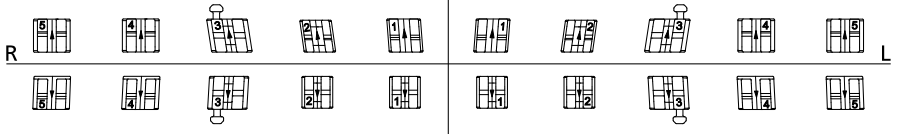

Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	718-402-45	718-402-44	718-442-43	718-402-42	718-402-41	718-402-31	718-402-32	718-442-33	718-402-34	718-402-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 718-402-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 718-402-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 718-402-50

Hinweis:

Weitere Brackets mit McLaughlin-Bennett-Trevisi**-Werten siehe Einzelpackungen.


** The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Breite	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	718-442-15	718-442-14	718-442-13	718-402-12	718-402-11	718-402-21	718-402-22	718-442-23	718-442-24	718-442-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

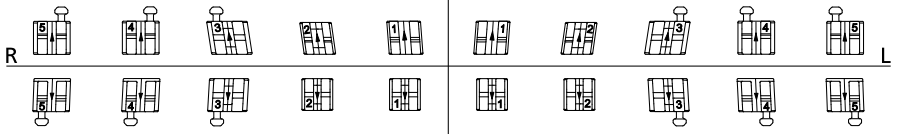

Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	718-442-45	718-442-44	718-442-43	718-402-42	718-402-41	718-402-31	718-402-32	718-442-33	718-442-34	718-442-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 718-442-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 718-442-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 718-442-50

Hinweis:

Weitere Brackets mit McLaughlin-Bennett-Trevisi**-Werten siehe Einzelpackungen.

** The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.


equilibrium® mini / Sortimente

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Breite	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	722-402-15	722-402-14	722-442-13	722-402-12	722-402-11	722-402-21	722-402-22	722-442-23	722-402-24	722-402-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

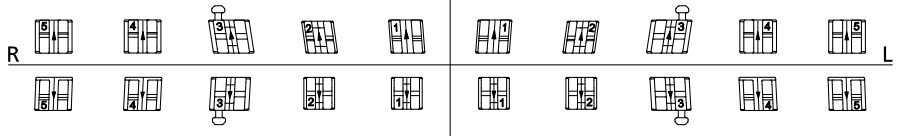

Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	722-402-45	722-402-44	722-442-43	722-402-42	722-402-41	722-402-31	722-402-32	722-442-33	722-402-34	722-402-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 722-402-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 722-402-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 722-402-50

Hinweis:

Weitere Brackets mit McLaughlin-Bennett-Trevisi**-Werten siehe Einzelpackungen.


** The Dentaum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Breite	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	722-442-15	722-442-14	722-442-13	722-402-12	722-402-11	722-402-21	722-402-22	722-442-23	722-442-24	722-442-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

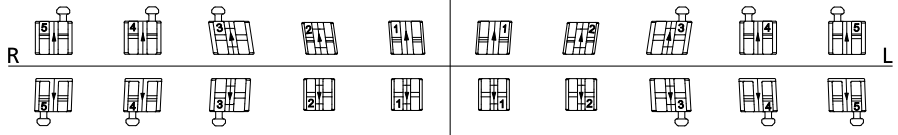

Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	722-442-45	722-442-44	722-442-43	722-402-42	722-402-41	722-402-31	722-402-32	722-442-33	722-442-34	722-442-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 722-442-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 722-442-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 722-442-50

Hinweis:

Weitere Brackets mit McLaughlin-Bennett-Trevisi**-Werten siehe Einzelpackungen.

** The Dentaum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

equilibrium® mini / Einzelpackungen – Adhäsivtechnik

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	Menge
11	+ 17°	+ 4°	0,7 mm		2,8 mm		722-462-11	10 Stück
21	+ 17°	+ 4°	0,7 mm		2,8 mm		722-462-21	10 Stück
12	+ 10°	+ 8°	1,3 mm		2,4 mm		722-462-12	10 Stück
22	+ 10°	+ 8°	1,3 mm		2,4 mm		722-462-22	10 Stück
15	- 7°	0°	0,7 mm		2,4 mm	718-452-15		10 Stück
25	- 7°	0°	0,7 mm		2,4 mm	718-452-25		10 Stück
15	- 7°	0°	0,7 mm	•	2,4 mm	718-462-15		10 Stück
25	- 7°	0°	0,7 mm	•	2,4 mm	718-462-25		10 Stück



Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.




equilibrium® 2 / Sortimente

Roth 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-301-15	718-301-14	718-341-13	718-301-12	718-301-11	718-301-21	718-301-22	718-341-23	718-301-24	718-301-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

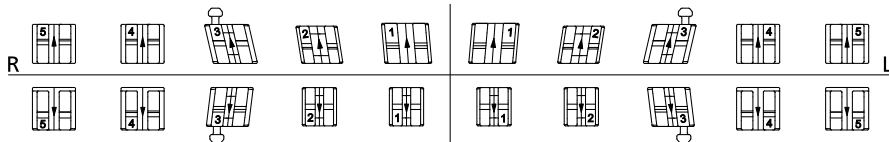

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-301-45	718-301-44	718-341-43	718-301-42	718-301-41	718-301-31	718-301-32	718-341-33	718-301-34	718-301-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 718-301-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 718-301-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 718-301-50

Hinweis:


Weitere Brackets mit Roth-Werten siehe Einzelpackungen.

Roth 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-341-15	718-341-14	718-341-13	718-301-12	718-301-11	718-301-21	718-301-22	718-341-23	718-341-24	718-341-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

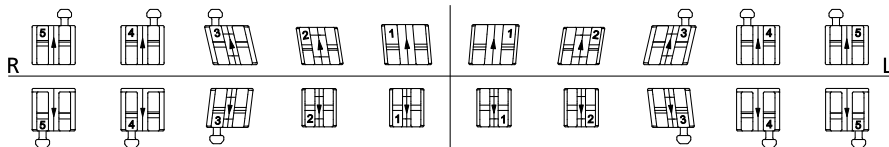

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-341-45	718-341-44	718-341-43	718-301-42	718-301-41	718-301-31	718-301-32	718-341-33	718-341-34	718-341-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 718-341-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 718-341-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 718-341-50

Hinweis:


Weitere Brackets mit Roth-Werten siehe Einzelpackungen.

Roth 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-301-15	722-301-14	722-341-13	722-301-12	722-301-11	722-301-21	722-301-22	722-341-23	722-301-24	722-301-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

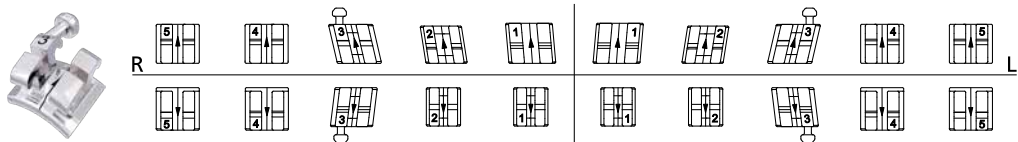

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-301-45	722-301-44	722-341-43	722-301-42	722-301-41	722-301-31	722-301-32	722-341-33	722-301-34	722-301-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 722-301-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 722-301-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 722-301-50

Hinweis:


Weitere Brackets mit Roth-Werten siehe Einzelpackungen.

Roth 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-341-15	722-341-14	722-341-13	722-301-12	722-301-11	722-301-21	722-301-22	722-341-23	722-341-24	722-341-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

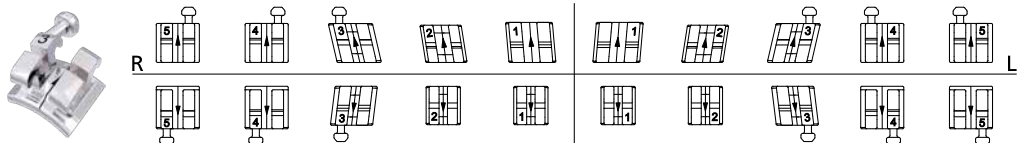

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-341-45	722-341-44	722-341-43	722-301-42	722-301-41	722-301-31	722-301-32	722-341-33	722-341-34	722-341-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 722-341-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 722-341-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 722-341-50

Hinweis:

Weitere Brackets mit Roth-Werten siehe Einzelpackungen.


equilibrium® 2 / Sortimente

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-302-15	718-302-14	718-342-13	718-302-12	718-302-11	718-302-21	718-302-22	718-342-23	718-302-24	718-302-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

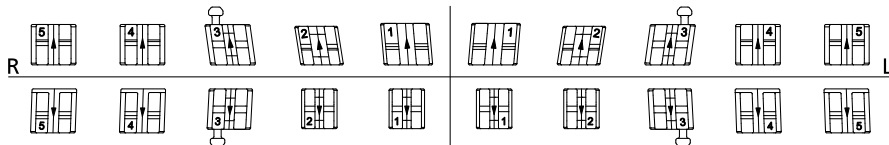

Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-302-45	718-302-44	718-342-43	718-302-42	718-302-41	718-302-31	718-302-32	718-342-33	718-302-34	718-302-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 718-302-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 718-302-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 718-302-50


** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-342-15	718-342-14	718-342-13	718-302-12	718-302-11	718-302-21	718-302-22	718-342-23	718-342-24	718-342-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

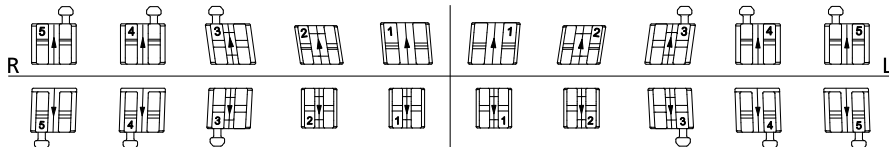

Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-342-45	718-342-44	718-342-43	718-302-42	718-302-41	718-302-31	718-302-32	718-342-33	718-342-34	718-342-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 718-342-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 718-342-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 718-342-50


** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-302-15	722-302-14	722-342-13	722-302-12	722-302-11	722-302-21	722-302-22	722-342-23	722-302-24	722-302-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

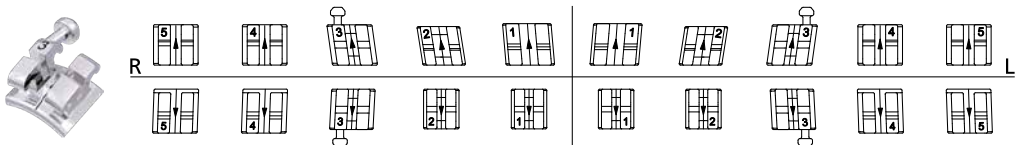

Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-302-45	722-302-44	722-342-43	722-302-42	722-302-41	722-302-31	722-302-32	722-342-33	722-302-34	722-302-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 722-302-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 722-302-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 722-302-50


** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-342-15	722-342-14	722-342-13	722-302-12	722-302-11	722-302-21	722-302-22	722-342-23	722-342-24	722-342-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

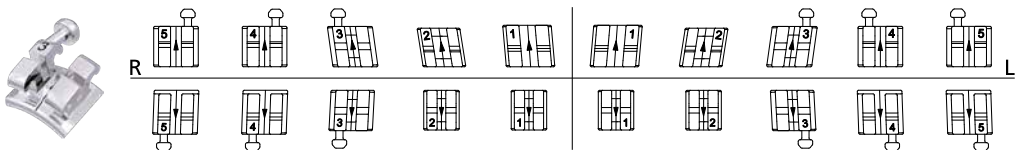

Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-342-45	722-342-44	722-342-43	722-302-42	722-302-41	722-302-31	722-302-32	722-342-33	722-342-34	722-342-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 722-342-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 722-342-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 722-342-50

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.


equilibrium® 2 / Sortimente

Ricketts® Universal 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 - ohne Häkchen

Torque	0°	0°	+ 7°	+ 14°	+ 22°	+ 22°	+ 14°	+ 7°	0°	0°
Angulation	0°	0°	+ 5°	+ 8°	0°	0°	+ 8°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,9 mm	3,3 mm	3,3 mm	2,9 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-303-15	718-303-14	718-303-13	718-303-12	718-303-11	718-303-21	718-303-22	718-303-23	718-303-24	718-303-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

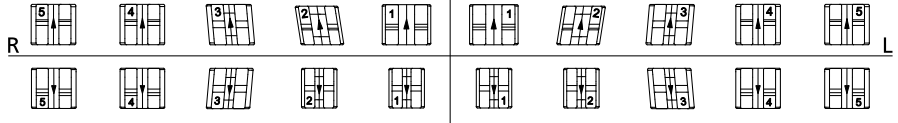

Torque	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
Angulation	0°	0°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-303-45	718-303-44	718-303-43	718-303-42	718-303-41	718-303-31	718-303-32	718-303-33	718-303-34	718-303-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 718-303-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 718-303-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 718-303-50

Hinweis:


Weitere Brackets mit Ricketts® Universal-Werten siehe Einzelpackungen.

Standard Edgewise 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 - ohne Häkchen

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,9 mm	3,3 mm	3,3 mm	2,9 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-305-15	718-305-14	718-305-13	718-305-12	718-305-11	718-305-21	718-305-22	718-305-23	718-305-24	718-305-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

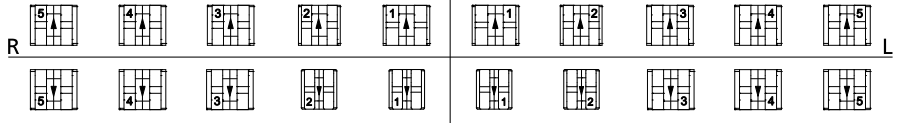

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-305-45	718-305-44	718-305-43	718-305-42	718-305-41	718-305-31	718-305-32	718-305-33	718-305-34	718-305-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:


1 Fall	20 Brackets	REF 718-305-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 718-305-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 718-305-50

Standard Edgewise 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 - ohne Häkchen

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,9 mm	3,3 mm	3,3 mm	2,9 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-305-15	722-305-14	722-305-13	722-305-12	722-305-11	722-305-21	722-305-22	722-305-23	722-305-24	722-305-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

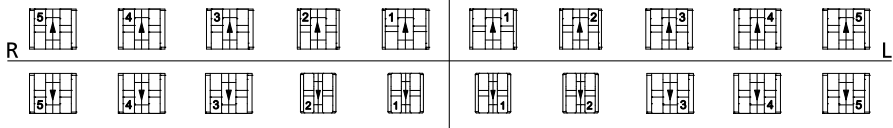

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-305-45	722-305-44	722-305-43	722-305-42	722-305-41	722-305-31	722-305-32	722-305-33	722-305-34	722-305-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 722-305-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 722-305-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 722-305-50



equilibrium® 2 / Einzelpackungen – Adhäsivtechnik



Roth 18/22

Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	Menge
13	- 2°	+ 13°	0,7 mm		3,1 mm		722-301-13	10 Stück
23	- 2°	+ 13°	0,7 mm		3,1 mm		722-301-23	10 Stück



Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	Menge
43	- 11°	+ 7°	0,7 mm		3,1 mm	718-301-43	722-301-43	10 Stück
33	- 11°	+ 7°	0,7 mm		3,1 mm	718-301-33	722-301-33	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!
 Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
 Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30



Ricketts® Universal 18

Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	Menge
13	+ 7°	+ 5°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-343-13		10 Stück
23	+ 7°	+ 5°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-343-23		10 Stück



Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	Menge
43	+ 7°	+ 5°	0,7 mm	•	2,7 mm	718-343-43		10 Stück
33	+ 7°	+ 5°	0,7 mm	•	2,7 mm	718-343-33		10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!
 Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

equilibrium® 2 / Einzelpackungen – Bandtechnik

Roth 18/22

Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	Menge
13	- 2°	+ 13°	0,7 mm		3,1 mm	790-259-02	790-263-02	10 Stück
13	- 2°	+ 13°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-204-02	790-216-02	10 Stück
23	- 2°	+ 13°	0,7 mm		3,1 mm	790-260-02	790-264-02	10 Stück
23	- 2°	+ 13°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-205-02	790-217-02	10 Stück



Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	Menge
43	- 11°	+ 7°	0,7 mm		3,1 mm	790-261-02	790-265-02	10 Stück
43	- 11°	+ 7°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-208-02	790-220-02	10 Stück
33	- 11°	+ 7°	0,7 mm		3,1 mm	790-262-02	790-266-02	10 Stück
33	- 11°	+ 7°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-209-02	790-221-02	10 Stück
44 / 34	- 17°	0°	0,7 mm		3,1 mm	790-210-02	790-222-02	10 Stück
44	- 17°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-251-02	790-255-02	10 Stück
34	- 17°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-252-02	790-256-02	10 Stück
45 / 35	- 22°	0°	0,7 mm		3,1 mm	790-211-02	790-223-02	10 Stück
45	- 22°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-253-02	790-257-02	10 Stück
35	- 22°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-254-02	790-258-02	10 Stück



Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

Roth, McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	Menge
15-14 / 24-25	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	790-206-02	790-218-02	10 Stück
15-14	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-249-02	790-243-02	10 Stück
24-25	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-250-02	790-244-02	10 Stück



Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaforum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaforum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	Menge
13	0°	+ 8°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-274-02	790-228-02	10 Stück
13	- 7°	+ 8°	0,7 mm		3,1 mm		790-230-02	10 Stück
23	0°	+ 8°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-275-02	790-229-02	10 Stück
23	- 7°	+ 8°	0,7 mm		3,1 mm		790-231-02	10 Stück



Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	Menge
43	0°	+ 3°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-278-02	790-234-02	10 Stück
43	- 6°	+ 3°	0,7 mm		3,1 mm		790-236-02	10 Stück
33	0°	+ 3°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-279-02	790-235-02	10 Stück
33	- 6°	+ 3°	0,7 mm		3,1 mm		790-237-02	10 Stück



Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaforum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaforum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevi.

equilibrium® 2 / Einzelpackungen – Bandtechnik



Standard Edgewise 18/22

Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	Menge
42-41 / 31-32	0°	0°	0,7 mm		2,4 mm	790-603-02	790-607-02	10 Stück



Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	Menge
15-13 / 23-25 / 45-43 / 33-35	0°	0°	0,7 mm		3,1 mm	790-602-02	790-606-02	10 Stück

Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30



Individuelle Systeme 18/22

Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	Menge
13 / 24-25	+ 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-290-02		10 Stück
15-14 / 23	+ 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-291-02		10 Stück



Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	Menge
45-43	- 11°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm		790-294-02	10 Stück
33-35	- 11°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm		790-295-02	10 Stück


Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

Roth 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-501-15	718-501-14	718-541-13	718-501-12	718-501-11	718-501-21	718-501-22	718-541-23	718-501-24	718-501-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

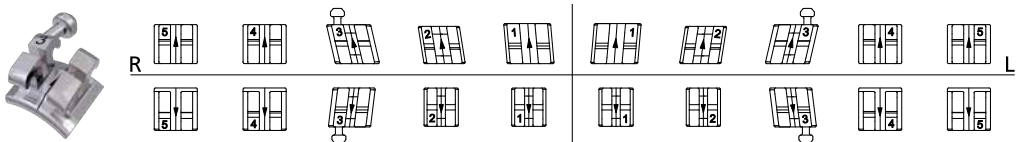

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-501-45	718-501-44	718-541-43	718-501-42	718-501-41	718-501-31	718-501-32	718-541-33	718-501-34	718-501-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 718-501-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 718-501-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 718-501-50

Hinweis:


1 Fall Sortiment **REF 718-501-02** entspricht REF 718-501-01, enthält aber zusätzlich 4 Bukkalröhrchen mit Vertikalhäkchen (1 x 723-028-00 / 1 x 723-032-00 / 2 x 723-026-00).

Roth 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-501-15	722-501-14	722-541-13	722-501-12	722-501-11	722-501-21	722-501-22	722-541-23	722-501-24	722-501-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

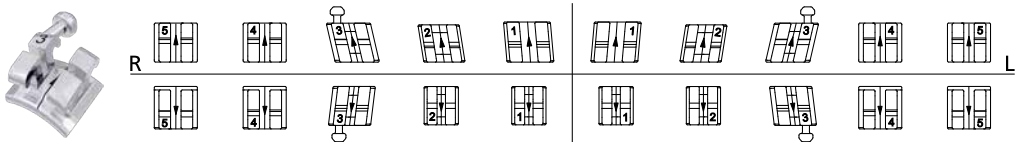

Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-501-45	722-501-44	722-541-43	722-501-42	722-501-41	722-501-31	722-501-32	722-541-33	722-501-34	722-501-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 722-501-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 722-501-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 722-501-50

Hinweis:

1 Fall Sortiment **REF 722-501-02** entspricht REF 722-501-01, enthält aber zusätzlich 4 Bukkalröhrchen mit Vertikalhäkchen (1 x 723-029-00 / 1 x 723-033-00 / 2 x 723-027-00).


equilibrium® ti / Sortimente

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-502-15	718-502-14	718-542-13	718-502-12	718-502-11	718-502-21	718-502-22	718-542-23	718-502-24	718-502-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

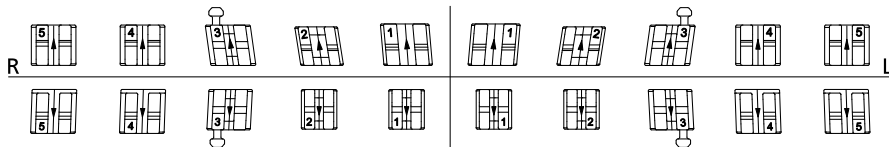

Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-502-45	718-502-44	718-542-43	718-502-42	718-502-41	718-502-31	718-502-32	718-542-33	718-502-34	718-502-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 718-502-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 718-502-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 718-502-50

Hinweis:

1 Fall Sortiment REF 718-502-02 entspricht REF 718-502-01, enthält aber zusätzlich 4 Bukkalröhren mit Vertikalhäkchen (1 x 723-028-00 / 1 x 723-032-00 / 2 x 723-030-00).


** The Dentaum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Häkchen auf 3ern

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-502-15	722-502-14	722-542-13	722-502-12	722-502-11	722-502-21	722-502-22	722-542-23	722-502-24	722-502-25
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Noch leichtere Identifizierung der Brackets durch FDI-Kennzeichnung auf der Basis!

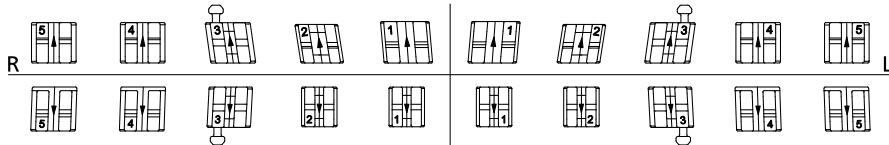

Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Breite	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-502-45	722-502-44	722-542-43	722-502-42	722-502-41	722-502-31	722-502-32	722-542-33	722-502-34	722-502-35
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	20 Brackets	REF 722-502-01
10 Fälle	200 Brackets	REF 722-502-10
50 Fälle	1.000 Brackets	REF 722-502-50

Hinweis:

1 Fall Sortiment REF 722-502-02 entspricht REF 722-502-01, enthält aber zusätzlich 4 Bukkalröhren mit Vertikalhäkchen (1 x 723-029-00 / 1 x 723-033-00 / 2 x 723-031-00).

** The Dentaum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal grey lines.

discovery® pearl Keramikbrackets / Sortimente

Roth 18/22	Seite	112
------------	-------	-----

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Seite	113
-----------------------------------	-------	-----

discovery® pearl Keramikbrackets / Einzelpackungen

Roth 18/22	Seite	114
------------	-------	-----

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Seite	115
-----------------------------------	-------	-----

discovery® pearl & smart Kombi-Sortimente

Roth 22	Seite	116
---------	-------	-----

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22	Seite	116
--------------------------------	-------	-----

discovery® pearl Keramikbrackets / Zubehör

Seite	117
-------	-----

Nickelfreie Produkte

Seite	118
-------	-----

Bracketzubehör


Seite	122
-------	-----

* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ästhetikbrackets.

Für ein noch schöneres Lächeln.

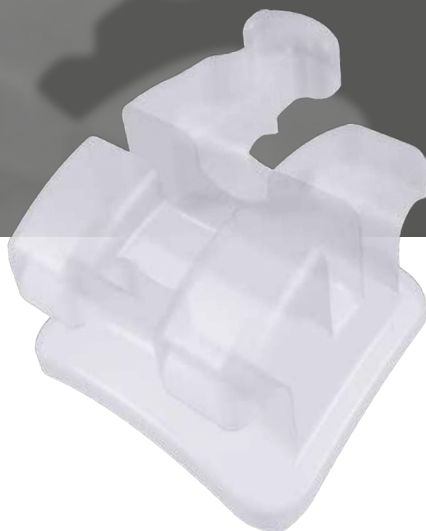

DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





Ästhetik neu erleben.

Qualität auf höchstem Niveau.

In modernsten Konstruktions- und Produktionsverfahren werden am Standort Ispringen Brackets der großen Dentaurnum-Vielfalt produziert, egal ob Brackets aus Metall oder Brackets aus Keramik. Über Jahre hinweg wurden all diese Verfahren optimiert und perfekt aufeinander abgestimmt. Was zählt, ist höchste Präzision für eine sichere und verlässliche Anwendung in der kieferorthopädischen Therapie. Mit innovativen Produktionstechnologien wie zum Beispiel dem CIM-Verfahren (Ceramic Injection Molding) ist es möglich, unterschiedlichste keramische Produkte spritzgegossen zu fertigen. Dentaurnum hat den Anspruch, die ästhetischen Materialien kontinuierlich weiterzuentwickeln, um so optimal auf die steigende Nachfrage im Bereich Keramikbrackets reagieren zu können.



discovery® pearl

Faszinierend natürlich.



FDI-System

	18	17	16	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	26	27	28	
	8	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	8	
R	8	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	8	L
	48	47	46	45	44	43	42	41		31	32	33	34	35	36	37	38	



faszinierend natürlich.



Maximale Qualität und Leistung natürlich ohne Kompromisse.

discovery® pearl überschreitet alle bisherigen Grenzen der Ästhetik, Qualität und Leistung. Auf den Zahn gebondet passt sich discovery® pearl dank seiner Farbe und seiner hohen Transluzenz vollkommen an die natürliche Zahnumgebung an.

Das Bracket besteht vollständig aus Keramik ohne störende Metalleinsätze im Slot. Es wurde als Ein-Stück-Bracket konstruiert und wird auf modernsten Produktionsanlagen in der CIM-Technik (Ceramic Injection Molding) gefertigt.

Die Basis des Brackets ist per CAD (Computer-Aided Design) optimal an die Zahnform angepasst, wodurch es sich einfach auf dem Zahn positionieren lässt. Ein übersichtliches System aus farbigen Setzhilfen und FDI-Markierung auf der Basis erleichtert die zahnspezifische Zuordnung. Die Setzhilfen unterstützen Sie zudem dabei, das Bracket auf einfachste Art auszurichten und zu platzieren.

Mit einer innovativen laserstrukturierten Basis, die sowohl gute Haftwerte erreicht als auch sicheres Debonding gewährleistet, garantiert discovery® pearl optimale Therapie-Ergebnisse und erfüllt die steigenden Anforderungen an eine ästhetische Zahnkorrektur im Höchstmaß!



Zuverlässige Produkteigenschaften:

Bewährte Bracketgeometrie der discovery® Familie

sorgt für problemlose Kombinierbarkeit zwischen den discovery® Metall- und Keramikbrackets.

Perfekte Farbanpassung

an die natürliche Zahnumgebung, als wäre das Bracket gar nicht da.

Farbige Setzhilfen

erleichtern das Positionieren auf dem Zahn.

Optimale Größe

klein im Design, groß in der Kraft für optimale Therapie-Ergebnisse.

Anatomische Basis

für perfekten Sitz auf dem Zahn.

Laserstrukturierte Basis mit FDI-Kennzeichnung

für beste Bonding- und Debonding-Eigenschaften.

Auch im 1 Fall-Sortiment ohne Setzhilfe erhältlich.



discovery® pearl Keramikbrackets / Sortimente



Roth 18/22

Häkchen auf 3ern

Zahn	mit Setzhilfe		ohne Setzhilfe		Menge
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
13-11 / 21-23	718-701-03	722-701-03	718-701-73	722-701-73	6 Stück (je 1 Bracket)
15-11 / 21-25	718-701-05	722-701-05	718-701-75	722-701-75	10 Stück (je 1 Bracket)

Zahn	mit Setzhilfe		ohne Setzhilfe		Menge
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
13-11 / 21-23 / 43-41 / 31-33	718-701-63	722-701-63	718-701-83	722-701-83	12 Stück (je 1 Bracket)
15-11 / 21-25 / 45-41 / 31-35	718-701-65	722-701-65	718-701-85	722-701-85	20 Stück (je 1 Bracket)

Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30



Roth 18/22

Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern

Zahn	mit Setzhilfe		ohne Setzhilfe		Menge
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
15-11 / 21-25	718-741-60	722-741-60	718-741-80	722-741-80	10 Stück (je 1 Bracket)

Zahn	mit Setzhilfe		ohne Setzhilfe		Menge
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
15-11 / 21-25 / 45-41 / 31-35	718-741-65	722-741-65	718-741-85	722-741-85	20 Stück (je 1 Bracket)

Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

Häkchen auf 3ern

Zahn	mit Setzhilfe		ohne Setzhilfe		Menge
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
13-11 / 21-23	718-702-03	722-702-03	718-702-73	722-702-73	6 Stück (je 1 Bracket)
15-11 / 21-25	718-702-05	722-702-05	718-702-75	722-702-75	10 Stück (je 1 Bracket)

Zahn	mit Setzhilfe		ohne Setzhilfe		Menge
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
13-11 / 21-23 / 43-41 / 31-33	718-702-63	722-702-63	718-702-83	722-702-83	12 Stück (je 1 Bracket)
15-11 / 21-25 / 45-41 / 31-35	718-702-65	722-702-65	718-702-85	722-702-85	20 Stück (je 1 Bracket)

Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern

Zahn	mit Setzhilfe		ohne Setzhilfe		Menge
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
15-11 / 21-25	718-742-60	722-742-60	718-742-80	722-742-80	10 Stück (je 1 Bracket)

Zahn	mit Setzhilfe		ohne Setzhilfe		Menge
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
15-11 / 21-25 / 45-41 / 31-35	718-742-65	722-742-65	718-742-85	722-742-85	20 Stück (je 1 Bracket)

Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



discovery® pearl Keramikbrackets / Einzelpackungen



Roth 18/22

mit Setzhilfe

Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	Menge
11	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-11	722-701-11	1 Stück
21	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-21	722-701-21	1 Stück
12	+ 8°	+ 9°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-12	722-701-12	1 Stück
22	+ 8°	+ 9°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-22	722-701-22	1 Stück
13	- 2°	+ 13°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-13	722-741-13	1 Stück
23	- 2°	+ 13°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-23	722-741-23	1 Stück
14	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-14	722-701-14	1 Stück
24	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-24	722-701-24	1 Stück
14	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-14	722-741-14	1 Stück
24	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-24	722-741-24	1 Stück
15	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-15	722-701-15	1 Stück
25	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-25	722-701-25	1 Stück
15	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-15	722-741-15	1 Stück
25	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-25	722-741-25	1 Stück



Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	Menge
41	- 1°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-41	722-701-41	1 Stück
31	- 1°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-31	722-701-31	1 Stück
42	- 1°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-42	722-701-42	1 Stück
32	- 1°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-32	722-701-32	1 Stück
43	- 11°	+ 7°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-43	722-741-43	1 Stück
33	- 11°	+ 7°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-33	722-741-33	1 Stück
44	- 17°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-44	722-701-44	1 Stück
34	- 17°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-34	722-701-34	1 Stück
44	- 17°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-44	722-741-44	1 Stück
34	- 17°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-34	722-741-34	1 Stück
45	- 22°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-45	722-701-45	1 Stück
35	- 22°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-35	722-701-35	1 Stück
45	- 22°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-45	722-741-45	1 Stück
35	- 22°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-35	722-741-35	1 Stück

Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

mit Setzhilfe



Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	Menge
11	+ 17°	+ 4°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-11	722-702-11	1 Stück
21	+ 17°	+ 4°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-21	722-702-21	1 Stück
12	+ 10°	+ 8°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-12	722-702-12	1 Stück
22	+ 10°	+ 8°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-22	722-702-22	1 Stück
13	0°	+ 8°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-13	722-742-13	1 Stück
23	0°	+ 8°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-23	722-742-23	1 Stück
14	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-14	722-702-14	1 Stück
24	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-24	722-702-24	1 Stück
14	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-14	722-742-14	1 Stück
24	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-24	722-742-24	1 Stück
15	- 7°	0°	1,2 mm		3,1 mm	718-702-15	722-702-15	1 Stück
25	- 7°	0°	1,2 mm		3,1 mm	718-702-25	722-702-25	1 Stück
15	- 7°	0°	1,2 mm	•	3,1 mm	718-742-15	722-742-15	1 Stück
25	- 7°	0°	1,2 mm	•	3,1 mm	718-742-25	722-742-25	1 Stück

Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	Menge
41	- 6°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-41	722-702-41	1 Stück
31	- 6°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-31	722-702-31	1 Stück
42	- 6°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-42	722-702-42	1 Stück
32	- 6°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-32	722-702-32	1 Stück
43	0°	+ 3°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-43	722-742-43	1 Stück
33	0°	+ 3°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-33	722-742-33	1 Stück
44	- 12°	+ 2°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-44	722-702-44	1 Stück
34	- 12°	+ 2°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-34	722-702-34	1 Stück
44	- 12°	+ 2°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-44	722-742-44	1 Stück
34	- 12°	+ 2°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-34	722-742-34	1 Stück
45	- 17°	+ 2°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-45	722-702-45	1 Stück
35	- 17°	+ 2°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-35	722-702-35	1 Stück
45	- 17°	+ 2°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-45	722-742-45	1 Stück
35	- 17°	+ 2°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-35	722-742-35	1 Stück



Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

discovery® pearl & smart Kombi-Sortimente



Roth 22

Häkchen auf 3ern · mit Setzhilfe

Brackets	Zahn	REF (22)	Menge
discovery® pearl	15-11 / 21-25	891-404-00	20 Stück (je 1 Bracket)
discovery® smart	45-41 / 31-35		

Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30



McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Häkchen auf 3ern · mit Setzhilfe

Brackets	Zahn	REF (22)	Menge
discovery® pearl	15-11 / 21-25	891-400-00	20 Stück (je 1 Bracket)
discovery® smart	45-41 / 31-35		

Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaforum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaforum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

discovery® pearl Keramikbrackets / Zubehör

discovery® pearl Debonding-Instrument

sterilisierbar

Zum einfachen und sicheren Entfernen von

discovery® pearl Keramikbrackets.

REF 019-001-00

1 Stück




Dentalastics® pearl

Ligaturenringe

Besonders zierliche, elastische Kunststoffringe zum Fixieren der Bögen in Brackets anstatt Drahtligaturen.

Inhalt: 50 Stege x 20 Ringe = 1.000 Stück

Farbe	Ring-Innen ø	REF	Menge
pearl	1,3 mm	774-563-01	1 Packung

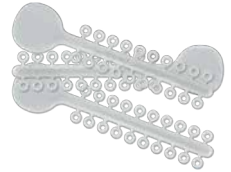

SUPER Elasto-Force Kunststoffkette pearl

Konstante Zugwirkung bei längerer Wirkungsdauer. Hohe Elastizität mit sehr gutem Rückstellverhalten.

Farbe	Ring-Innen ø	Länge	REF	Menge
pearl	1,3 mm	4,6 m	774-236-01	1 Rolle



KFO-Demonstrationsmodell discovery® pearl

McLaughlin-Bennett-Trevisi * 22

Bestückt mit:

- discovery® pearl Keramikbrackets
- transluzenter Bogen pearl
- Dentalastics® pearl Ligaturenringe

OK aus Kunststoff.

REF 892-000-18

1 Stück

* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



KFO-Demonstrationsmodell discovery® pearl

Roth 22

Bestückt mit:

- discovery® pearl Keramikbrackets, OK/UK 5-5
- Ortho-Cast M-Series Bukkalröhrchen, OK/UK 6
- transluzenter Bogen pearl, OK
- Tensic® Bogen, UK
- Dentalastics® pearl Ligaturenringe

OK und UK aus Kunststoff, verbunden mit Scharnier.

REF 892-000-21

1 Stück



Weitere Informationen finden Sie unter
www.dentaurum.de/nickelfrei.



Nickelfreie Produkte.

Die nickelfreie Therapie.






DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com



Produktübersicht.

Dentaurum bietet eine große Auswahl an nickelfreien Produkten für die ganzheitliche Therapie.

Produkte	Kapitel	
topic · Bracket aus remanium® star*	Metallbrackets	
equilibrium® ti · Bracket aus Reintitan	Metallbrackets	
discovery® pearl · Bracket aus Aluminiumoxid	Ästhetikbrackets	

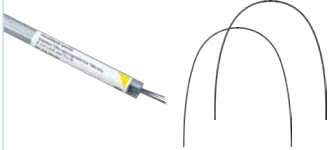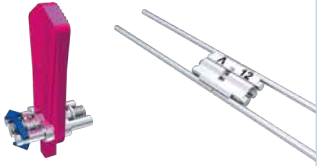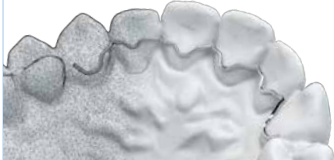Produkte	Kapitel	
Noninium® Face Bow/Gesichtsbogen**	Intra-/Extraoral	
rematitan® · Bukkalröhrchen aus Reintitan	Bukkalröhrchen/ Adhäsivtechnik	
rematitan® SPECIAL Drähte und rematitan® SPECIAL Bögen	Drähte Bögen Drahteile	
rematitan® & Titan hyrax® · Dehnschrauben aus Reintitan	Dehnschrauben	
prime4me® RETAIN3R · Gefräst aus Titan Grade 5	Digitale Kieferorthopädie	

* siehe KFO-Werkstoffliste

**Nickel ≤ 0,2 % ist verfahrenstechnisch bedingt

Bracketzubehör



Bite-Bumper™

Adhäsivtechnik
Material: Kunststoff
Palatinale Aufbisse zur Hebung des tiefen Bisses
bei der Klasse II-Behandlung.

REF 705-000-00	10 Stück
----------------	----------



Titan-Knopfchen mit Kette nach Watted

Adhäsivtechnik
Mit laserstrukturierter Basis und Kette aus Titan.
Zum Eingliedern verlagerter Front- und Seitenzähne.
Länge: 5 cm

REF 750-003-51	1 Stück
----------------	---------



Knöpfchen

Adhäsivtechnik
Mit laserstrukturierter Basis, flach, eckig.
Für Schneidezähne.
Maße (H x B): 3,5 mm x 3,5 mm

REF 750-002-51	10 Stück
----------------	----------



Knöpfchen

Adhäsivtechnik
Mit laserstrukturierter Basis, gewölbt, rund.
Für Eckzähne und Prämolaren.
ø 3,0 mm

REF 750-001-51	10 Stück
----------------	----------



Doppelhäkchen

Adhäsivtechnik
Mit Netzbasis zum Bonding, flach.
Für mehrere Gummizüge oder Zugfedern.
Maße (H x B): 3,8 mm x 3,8 mm

REF 750-602-50	10 Stück
----------------	----------

Netzbasis

Adhäsivtechnik
Anatomisch konturiert.



Indikation	Basis	Maße (H x B)	REF	Menge
für Schneidezähne	flach	3,8 mm x 3,8 mm	799-202-00	10 Stück
für Bukkalröhrchen und 2. Molaren	klein	3,0 mm x 6,5 mm	799-206-00	10 Stück

Schutzwachs

Zum Schutz der Schleimhaut und Lippen in den ersten Tagen nach dem Bonding der Brackets, bis der Patient sich an die Apparatur gewöhnt hat. Verwendung auch bei Irritationen im Verlauf der Behandlung.

Lieferform:

50 Kleinschachteln mit je 5 Stangen Schutzwachs.
Farbe: weiß

REF 124-305-01

50 Packungen



Bracket-Tray

Mit Selbstklebefolie zum Vorsortieren von Brackets.

REF 891-002-00

50 Stück



Bracket-Container

Zur Aufbewahrung vorsortierter Brackets.

REF 891-001-00

1 Stück



Sortimentsschachtel

Zum individuellen Einsortieren der Brackets.

REF 766-003-10

1 Stück



Adhäsivtechnik	Seite	128
Adhäsivtechnik / Titanröhrchen	Seite	133
Bandtechnik	Seite	134
Aufschweißteile	Seite	142



Hinweis

Röhrchenmaße

Hauptröhrchen

Slot: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 oder
Slot: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Hilfsröhrchen

Slot: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
z.B. für Teilbögen im Rahmen der Segmentbogentechnik
(max. empfohlene Drahtstärke: 0,43 mm x 0,64 mm /
17 x 25)

Lip Bumper/Face Bow Röhrchen

ø 1,15 mm / 45

In/Out

0,3 mm

Häkchen

Sofern nicht anders angegeben, sind Häkchen
mesial positioniert!
Leichte Identifizierung:
+ = Oberkiefer – = Unterkiefer

Abbildungen der Bukkalröhrchen sind exemplarisch!

Leichte Orientierung im Katalog durch die Farbcodierung von Dentaureum

Oberkiefer


Unterkiefer

OK + UK

Bukkaleröhrchen.

Perfekt in Funktion und Design.



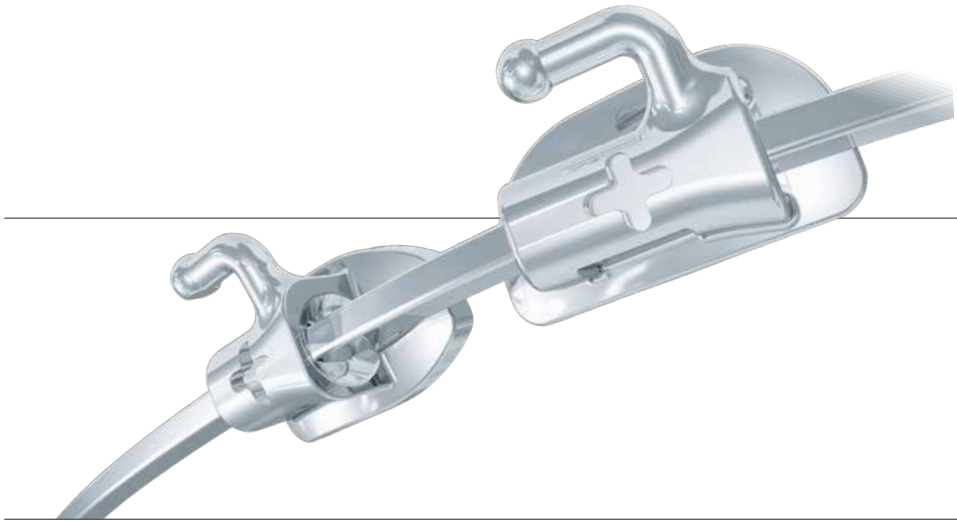

Perfekt in Funktion und Design.

Genau wie die Dentaurum-Brackets werden auch die Bukkalröhrchen in modernsten Konstruktions- und Produktionsverfahren hergestellt. Je nach Material gibt es die Röhrchen in vielen Varianten – vom einfach nicht konvertierbaren Röhrchen bis hin zur aufwendigen Dreifachkombination. Das gibt noch mehr Flexibilität in der Planung der Therapie. Zahlreiche Bukkalröhrchen gibt es sowohl für die Adhäsiv- als auch für die Bandtechnik. In unserem Aufschweißdienst können die Röhrchen problemlos an die passenden Bänder geschweißt werden.

Mit den Ortho-Cast M-Series präsentiert sich die neueste Generation Bukkalröhrchen besonders einfach im Handling. Durch eine Konturierung in der Basis und eine Kerbe für die Setzpinzette ist es spielend einfach, das Röhrchen zu positionieren. Durch die trompetenförmige Öffnung kann der Bogen einfach eingeführt werden. Die M-Series werden auch in einer Ortho-Cast M-Series mini-Version für den 7er angeboten.



Ortho-Cast M-Series mini

Die zierlichen Bukkalährchen.



Ortho-Cast M-Series

Die neueste Generation.



Ortho-Cast

Die MIM-Bukkälährchen.



Ortho

Die klassischen Bukkalährchen.



rematitan®

Die einzigen Bukkalährchen aus Reintitan.



einfachrund



Ortho

nicht konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhrchen · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF	System
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°		6,0 mm	725-203-51	

Slot: 0,9 mm / 36

einfachvierkant



Ortho-Cast M-Series mini 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-17	822-411-17	Roth
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-27	822-411-27	Roth
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-17	822-412-17	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-27	822-412-27	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-17		Ricketts® Universal
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-27		Ricketts® Universal
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-17	822-415-17	Standard Edgewise
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-27	822-415-27	Standard Edgewise



Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-47	822-411-47	Roth
37	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-37	822-411-37	Roth
47	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-47	822-412-47	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-37	822-412-37	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-46	822-412-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-36	822-412-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-47		Ricketts® Universal
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-37		Ricketts® Universal
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-47	822-415-47	Standard Edgewise
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-37	822-415-37	Standard Edgewise

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

einfachvierkant

Ortho-Cast M-Series 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-16	822-211-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-26	822-211-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-16	822-212-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-26	822-212-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
16	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-16	822-215-16	Standard Edgewise
26	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-26	822-215-26	Standard Edgewise



Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-46	822-211-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-36	822-211-36	Roth
47	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-47	822-212-47	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-37	822-212-37	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-46	822-212-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-36	822-212-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-46	822-215-46	Standard Edgewise
36	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-36	822-215-36	Standard Edgewise
46	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-46	822-219-46	
36	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-36	822-219-36	



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-16	822-111-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-26	822-111-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-16	822-112-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-26	822-112-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-46	822-111-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-36	822-111-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-46	822-112-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-36	822-112-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

einfachvierkant



Ortho-Cast 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 36-37	0°	6°	•	4,0 mm	724-092-51	724-094-51	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	4,0 mm	724-093-51	724-095-51	
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		4,0 mm	724-090-51	724-091-51	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho-Cast 18

nicht konvertierbar · mit größerer Basis · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		4,0 mm	724-090-50		

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25



Ortho-Cast 18/22

nicht konvertierbar · distale Kerbe · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 36-37	0°	6°	•	3,3 mm	724-607-51	724-610-51	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	3,3 mm	724-608-51	724-611-51	
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		3,3 mm	724-609-51	724-612-51	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho 18/22

nicht konvertierbar · distale Verlängerung · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 36-37	0°	0°	•	6,0 mm	725-164-50	725-166-50	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27 / 47-46	0°	0°	•	6,0 mm	725-165-50	725-167-50	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16 / 36-37	0°	6°	•	6,0 mm	725-168-50	725-170-50	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	6,0 mm	725-169-50	725-171-50	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

einfachvierkant

Ortho-Cast 18

konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 10°	8°	•	4,0 mm	724-048-51		
26-27	- 10°	8°	•	4,0 mm	724-049-51		

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25



doppelvierkant

Ortho-Cast M-Series 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-16	822-221-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-26	822-221-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-16	822-222-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-26	822-222-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-46	822-221-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-36	822-221-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-46	822-222-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-36	822-222-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-16	822-121-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-26	822-121-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-16	822-122-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-26	822-122-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-46	822-121-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-36	822-121-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-46	822-122-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-36	822-122-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Adhäsivtechnik

doppelvierkant



Ortho-Cast 18/22

nicht konvertierbar · mit Vertikalhäkchen · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	0°	•	3,5 mm	724-018-51	724-019-51	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Zweifachkombination



Ortho-Cast 18/22

konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhrchen gingival · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	- 20°	0°	•	4,0 mm	724-240-51	724-222-51	McLaughlin-Bennett- Trevisi** für 6er
36-37	- 20°	0°	•	4,0 mm	724-241-51	724-223-51	McLaughlin-Bennett- Trevisi** für 6er

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (gingival)

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (gingival)

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

doppelvierkant

rematitan® 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 26-27	- 10°	0°		4,0 mm	723-020-00	723-021-00	
Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46 / 36-37	- 22°	0°		4,0 mm	723-022-00	723-023-00	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



rematitan® 18/22

nicht konvertierbar · mit Vertikalhäkchen · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 14°	10°	•	4,0 mm	723-028-00	723-029-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4,0 mm	723-032-00	723-033-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46 / 36-37	- 20°	0°	•	4,0 mm	723-030-00	723-031-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er
47-46 / 36-37	- 22°	0°	•	4,0 mm	723-026-00	723-027-00	
Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	- 10°	0°	•	4,0 mm	723-024-00	723-025-00	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



einfachrund



Ortho

nicht konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhrchen · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite		REF	System
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°		6,0 mm		725-203-00	

Slot: 0,9 mm / 36



Ortho

nicht konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhrchen · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite		REF	System
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°		6,0 mm		725-206-00	

Slot: 1,15 mm / 45

doppelrund



Ortho

nicht konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhrchen · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite		REF	System
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°		4,6 mm		726-011-00	

Slot: 0,9 mm / 36 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (okklusal)

einfachvierkant

Ortho-Cast M-Series 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-10	822-212-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-20	822-212-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17-16	- 10°	8°	•	3,3 mm	818-217-10	822-217-10	
26-27	- 10°	8°	•	3,3 mm	818-217-20	822-217-20	



Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-512-40	822-512-40	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-512-30	822-512-30	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
47-46	- 25°	8°	•	3,3 mm	818-217-40	822-217-40	
36-37	- 25°	8°	•	3,3 mm	818-217-30	822-217-30	
47-46	- 30°	12°	•	3,3 mm	818-218-40	822-218-40	
36-37	- 30°	12°	•	3,3 mm	818-218-30	822-218-30	



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-10	822-111-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-20	822-111-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-10	822-112-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-20	822-112-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-40	822-111-40	Roth
36-37	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-30	822-111-30	Roth
47-46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-40	822-112-40	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er
36-37	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-30	822-112-30	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

einfachvierkant



Ortho-Cast 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 36-37	0°	6°	•	4,0 mm	724-092-00	724-094-00	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	4,0 mm	724-093-00	724-095-00	
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		4,0 mm	724-090-00	724-091-00	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho-Cast 18

konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 10°	8°	•	4,0 mm	724-048-00		
26-27	- 10°	8°	•	4,0 mm	724-049-00		

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25



Ortho-Cast 18/22

nicht konvertierbar · distale Kerbe · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 36-37	0°	6°	•	3,3 mm	724-607-00	724-610-00	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	3,3 mm	724-608-00	724-611-00	
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		3,3 mm	724-609-00	724-612-00	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho 18/22

nicht konvertierbar · distale Verlängerung · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 36-37	0°	0°	•	6,0 mm	725-164-00	725-166-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27 / 47-46	0°	0°	•	6,0 mm	725-165-00	725-167-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16 / 36-37	0°	6°	•	6,0 mm	725-168-00	725-170-00	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	6,0 mm	725-169-00	725-171-00	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

doppelvierkant

Ortho-Cast M-Series 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-10	822-221-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-20	822-221-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-10	822-222-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-20	822-222-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17-16	- 9°	10°	•	3,6 mm	818-227-10	822-227-10	
26-27	- 9°	10°	•	3,6 mm	818-227-20	822-227-20	



Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-40	822-221-40	Roth
36-37	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-30	822-221-30	Roth
47-46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-40	822-222-40	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er
36-37	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-30	822-222-30	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er
47-46	- 22°	12°	•	3,6 mm	818-224-40	822-224-40	Ricketts® 18 - IV. Dimension für 6er
36-37	- 22°	12°	•	3,6 mm	818-224-30	822-224-30	Ricketts® 18 - IV. Dimension für 6er



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
 Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
 ** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-10	822-121-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-20	822-121-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-10	822-122-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-20	822-122-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	0°	0°	•	3,6 mm	818-125-40	822-125-40	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
36-37	0°	0°	•	3,6 mm	818-125-30	822-125-30	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
 Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
 ** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

doppelvierkant



Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · Hilfsröhrchen nach gingival-bukkal versetzt · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	- 30°	4°	•	3,6 mm	818-151-40	822-151-40	Roth
36-37	- 30°	4°	•	3,6 mm	818-151-30	822-151-30	Roth
47-46	- 20°	0°	•	3,6 mm	818-152-40	822-152-40	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er
36-37	- 20°	0°	•	3,6 mm	818-152-30	822-152-30	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast 18/22

nicht konvertierbar · mit Vertikalhäkchen · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46 / 36-37	- 30°	0°	•	4,0 mm	724-616-00	724-617-00	



Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	0°	•	3,5 mm	724-018-00	724-019-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho-Cast 18/22

konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	- 25°	8°	•	4,0 mm	724-056-00	724-156-00	
36-37	- 25°	8°	•	4,0 mm	724-057-00	724-157-00	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Zweifachkombination

Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhrchen okklusal · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 14°	14°	•	3,6 mm	818-141-10	822-141-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,6 mm	818-141-20	822-141-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,6 mm		822-142-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,6 mm		822-142-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (okklusal)

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (okklusal)

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhrchen gingival · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	- 25°	8°	•	3,6 mm	818-147-40	822-147-40	
36-37	- 25°	8°	•	3,6 mm	818-147-30	822-147-30	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (gingival)

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (gingival)



Ortho-Cast 18/22

konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhrchen gingival · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	- 20°	0°	•	4,0 mm	724-240-00	724-222-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er
36-37	- 20°	0°	•	4,0 mm	724-241-00	724-223-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (gingival)

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (gingival)

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho 18/22

nicht konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhrchen okklusal · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	0°	0°	•	4,6 mm	727-365-00	727-385-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27	0°	0°	•	4,6 mm	727-366-00	727-386-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16 / 26-27	0°	0°		4,6 mm	727-265-00	727-266-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16	0°	6°	•	4,6 mm	727-367-00	727-387-00	
26-27	0°	6°	•	4,6 mm	727-368-00	727-388-00	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (okklusal)

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (okklusal)



Zweifachkombination



Ortho 18/22

nicht konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhren gingival · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	0°	0°	•	4,6 mm	727-267-00	727-269-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
36-37	0°	0°	•	4,6 mm	727-268-00	727-270-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (gingival)
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (gingival)

Dreifachkombination



Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhren okklusal · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 14°	14°	•	3,6 mm	818-131-10	822-131-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,6 mm	818-131-20	822-131-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,6 mm	818-132-10	822-132-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,6 mm	818-132-20	822-132-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17-16	- 10°	8°	•	3,6 mm		822-137-10	
26-27	- 10°	8°	•	3,6 mm		822-137-20	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhren: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (okklusal)
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhren: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (okklusal)

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast 18/22

nicht konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhren zentral · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	0°	0°	•	3,6 mm	724-600-00		Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27	0°	0°	•	3,6 mm	724-601-00		Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16	0°	6°	•	3,6 mm	724-602-00	724-613-00	
26-27	0°	6°	•	3,6 mm	724-603-00	724-614-00	
17-16	- 9°	10°	•	3,6 mm	724-618-00	724-620-00	
26-27	- 9°	10°	•	3,6 mm	724-619-00	724-621-00	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhren: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (zentral)
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhren: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (zentral)



Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	- 25°	8°	•	4,0 mm	724-060-00	724-160-00	
36-37	- 25°	8°	•	4,0 mm	724-061-00	724-161-00	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhren: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (zentral)
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhren: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (zentral)



Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	0°		3,6 mm	724-604-00	724-615-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		3,6 mm	724-605-00		

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhren: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (zentral)
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhren: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (zentral)

Dreifachkombination

Ortho-Cast 18

nicht konvertierbar · mit Mesial-/Distalhäkchen · mit Lip Bumper/Face Bow Röhren zentral · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	0°	•	3,6 mm	724-606-00		Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhren: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (zentral)

Ortho-Cast 18/22

konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhren okklusal · Menge: 10 Stück

Zahn	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	0°	8°	•	4,0 mm	724-006-00	724-106-00	
26-27	0°	8°	•	4,0 mm	724-007-00	724-107-00	

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhren: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (okklusal)
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhren: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhren: 1,15 mm / 45 (okklusal)

Aufschweißteile



Lingual-/Palatinalschlösser

für Orthorama®, Lingual-/Palatinalbögen, Goshgarian, Quad Helix · offen

Zahn	Torque	Distal Offset	In/Out	Häkchen	Breite	REF	Menge
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°	0,25 mm		3,5 mm	728-010-00	10 Stück

Slot: 2 x 0,9 mm / 36



Lingual-/Palatinalschlösser

für Orthorama®, Lingual-/Palatinalbögen, Goshgarian, Quad Helix · geschlossen

Zahn	Torque	Distal Offset	In/Out	Häkchen	Breite	REF	Menge
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°	0,25 mm		3,5 mm	728-110-00	10 Stück

Slot: 2 x 0,9 mm / 36



Lingual-/Palatinalschlösser

für Orthorama®, Lingual-/Palatinalbögen, Goshgarian, Quad Helix · offen · mit Mesial-/Distalhäkchen

Zahn	Torque	Distal Offset	In/Out	Häkchen	Breite	REF	Menge
17-16 / 36-37		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	728-011-00	10 Stück
26-27 / 47-46		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	728-012-00	10 Stück

Slot: 2 x 0,9 mm / 36



Lingual-/Palatinalschlösser

für Orthorama®, Lingual-/Palatinalbögen, Goshgarian, Quad Helix · geschlossen · mit Mesial-/Distalhäkchen

Zahn	Torque	Distal Offset	In/Out	Häkchen	Breite	REF	Menge
17-16 / 36-37		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	728-111-00	10 Stück
26-27 / 47-46		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	728-112-00	10 Stück

Slot: 2 x 0,9 mm / 36



Lingual-/Palatinalschlösser

für Orthorama®, Lingual-/Palatinalbögen, Goshgarian, Quad Helix · offen · mit Distalhäkchen

Zahn	Torque	Distal Offset	In/Out	Häkchen	Breite	REF	Menge
17-16 / 36-37		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	728-016-00	10 Stück
26-27 / 47-46		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	728-017-00	10 Stück

Slot: 2 x 0,9 mm / 36



Lingual-/Palatinalschlösser easy in

für Orthorama®, Lingual-/Palatinalbögen, Goshgarian, Quad Helix · geschlossen · mit Einführkerbe

In die Lingual-/Palatinalschlösser easy in lassen sich – dank der Einführkerbe – Orthorama®, Lingual-/Palatinalbögen, Goshgarian sowie Quad Helix einfacher ein- und wieder ausgliedern, ohne dass es zu störenden Behinderungen durch die Frontzähne kommt. Die Einführkerbe easy in zeigt beim Aufschweißen auf die Bänder immer nach okklusal, so dass die Bögen von okklusal horizontal eingeführt werden können.

Zahn	Torque	Distal Offset	In/Out	Häkchen	Breite	REF	Menge
17-16 / 36-37		0°	0,25 mm		3,5 mm	728-113-00	10 Stück
26-27 / 47-46		0°	0,25 mm		3,5 mm	728-114-00	10 Stück

Slot: 2 x 0,9 mm / 36

Knöpfchen / Bandtechnik

Für Gummizüge oder Dentalastics®.

Ausführung	REF	Menge
runde Basis, langgestielt	750-002-00	10 Stück
breite Basis, kurzgestielt	750-101-00	10 Stück



Aufsetzlasche / Bandtechnik

Für alle vorgeformten Bänder.


Lieferform	REF	Menge
am Streifen	750-201-00	100 Stück



Doppelhäkchen / Bandtechnik

Für mehrere Gummizüge oder Zugfedern.

Ausführung	Lieferform	REF	Menge
schmal, für Eckzahn- und Prämolarenbänder	am Streifen	750-602-00	10 Stück
schmal, für Eckzahn- und Prämolarenbänder	einzel	750-602-10	10 Stück
breit, für Molarenbänder	am Streifen	750-603-00	10 Stück
breit, für Molarenbänder	einzel	750-603-10	10 Stück

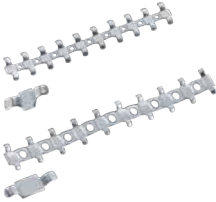

Häkchen mit Setzlasche / Bandtechnik

Für Gummizüge, Ligaturen u.ä.

Lieferform	REF	Menge
einzel	750-401-00	100 Stück



dentaform® Snap

Sortimente	Seite	150
Einzelpackungen	Seite	151

dentaform®

Sortimente	Seite	155
Einzelpackungen	Seite	157

Standard

Sortimente	Seite	165
Einzelpackungen	Seite	169

Zubehör	Seite	176
---------	-------	-----



FDI-System

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28		
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8		
R	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	L
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	

Bänder.

Moderne Bandsysteme für zufriedene Behandler
und Patienten.



Individuell beschweißte
Bänder können über
die Auftragsannahme
schriftlich oder telefonisch
bestellt werden.

**DENTAURUM
SERVICE**



Beste Qualität.

Leichtes und präzises Setzen, Elastizität und anatomische Passung des Bandes sind Kriterien, die Bänder für die kieferorthopädische Behandlung voll und ganz erfüllen müssen. Dentaform legt bei der Herstellung seiner Bänder größten Wert auf beste Qualität und Passung bei Verwendung bester Materialien. Alle Bänder werden dauerhaft und bioverträglich lasermarkiert. Sie sind hochglanzpoliert und werden auf den Innenseiten durch ein Spezialverfahren aufgeraut, um die Haftung zu verbessern.

Die anatomisch vorgeformten dentaform® Bänder sind aus einem sehr weichen Material, das sich perfekt an den Zahn adaptieren lässt. dentaform® Snap Bänder bestehen aus härterer Qualität für optimale Stabilität und dauerhafte Passform. Die hohe Kantenstabilität verhindert die ungewollte Verformung des Bandrandes. Zusätzlich bieten wir preiswerte Standard-Bänder für den universellen Einsatz.

dentaform® Snap

Die Bänder mit dem Super-Schnapp-Effekt.

dentaform®

Die leicht adaptierbaren Bänder.

Standard

Die universellen Standard-Bänder.



Aufschweißdienst – Bandtechnik.

Zuverlässig und schnell.

Optimaler Service.

Alle Dentaureum-Brackets, Bukkalröhrchen, linguale und palatinale Hilfsteile werden auf Wunsch in unserer Aufschweißabteilung auf Dentaureum-Bänder geschweißt. Unser kompetentes Team steht Ihnen bei der Bestellung hilfreich zur Seite und stellt eine schnelle Abwicklung sicher. Die EDV-unterstützte Erfassung von individuellen Stammdaten ermöglicht eine schnelle und korrekte Lieferung.

Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 7:00–18:00 Uhr.



Schnell und einfach bestellen.

- **Formular Aufschweißdienst anfordern.**
Zur schnelleren Abwicklung bitte stets die Aufschweißformulare verwenden.
- **Stammbblatt Aufschweißdienst mit Bestellvarianten.**
Die Erstellung erfolgt nach Ihren Angaben und individuellen Wünschen. Wir beraten Sie gerne.
- **Vorbeschweißte Lagerware.**
Nutzen Sie unsere vorbeschweißte Lagerware*, für noch kürzere Lieferzeiten.
- **Fertige Bänder.**
Sie erhalten Ihre beschweißten Bänder verpackt in Minigrip-Beuteln mit vollständiger Inhaltsangabe.

Kontakt.

- | | |
|--|-------------------|
| ■ Telefon | +49 72 31/803-216 |
| ■ Gebührenfreie Faxbestellung (national) | 0 800/4 14 24 34 |
| ■ Faxbestellung (international) | +49 72 31/803-219 |
| ■ E-Mail | asd@dentaforum.de |

* Oberkiefer/Unterkiefer 1. Molar rechts/links in Bandqualität dentaform® Snap/dentaform® beschweißt nach Roth 18/22 und Oberkiefer/Unterkiefer 1. und 2. Prämolare rechts/links in Bandqualität Standard beschweißt nach Roth 18/22.

dentaform® Snap / Sortimente

- mit Super-Schnapp-Effekt
- harte, feste Bandqualität
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- ideal für extraorale Technik (Face Bow) oder SUS
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- Auslieferung in einer Lade (geeignet für Sortimentsschrank REF 890-414-00)
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 1. Molarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾	REF	
16	Nr. 5-36 (2)	878-364-18	878-364-22	878-064-00	64 Stück
26	Nr. 5-36 (2)	879-364-18	879-364-22	879-064-00	64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾	REF	
16	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	878-350-18	878-350-22	878-150-00	150 Stück
26	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	879-350-18	879-350-22	879-150-00	150 Stück

¹⁾ (16) beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10
(26) beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-131-20 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ (16) beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10
(26) beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-131-20 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Unterkiefer 1. Molarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾	REF	
46	Nr. 5-36 (2)	880-364-18	880-364-22	880-264-00	64 Stück
36	Nr. 5-36 (2)	881-364-18	881-364-22	881-264-00	64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾	REF	
46	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	880-350-18	880-350-22	880-250-00	150 Stück
36	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	881-350-18	881-350-22	881-250-00	150 Stück

¹⁾ (36) beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-151-30 und Doppelhäkchen 750-602-10
(46) beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ (36) beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-151-30 und Doppelhäkchen 750-602-10
(46) beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- mit Super-Schnapp-Effekt
- harte, feste Bandqualität
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- ideal für extraorale Technik (Face Bow) oder SUS
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 1. Molarenbänder, rechts

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		REF	
16	1	0,12 mm	8,78 mm	878-301-18	878-301-22	1 Stück	878-001-00	10 Stück
16	2	0,12 mm	8,89 mm	878-302-18	878-302-22	1 Stück	878-002-00	10 Stück
16	3	0,12 mm	8,99 mm	878-303-18	878-303-22	1 Stück	878-003-00	10 Stück
16	4	0,12 mm	9,09 mm	878-304-18	878-304-22	1 Stück	878-004-00	10 Stück
16	5	0,12 mm	9,20 mm	878-305-18	878-305-22	1 Stück	878-005-00	10 Stück
16	6	0,12 mm	9,30 mm	878-306-18	878-306-22	1 Stück	878-006-00	10 Stück
16	7	0,12 mm	9,40 mm	878-307-18	878-307-22	1 Stück	878-007-00	10 Stück
16	8	0,12 mm	9,50 mm	878-308-18	878-308-22	1 Stück	878-008-00	10 Stück
16	9	0,15 mm	9,61 mm	878-309-18	878-309-22	1 Stück	878-009-00	10 Stück
16	10	0,15 mm	9,71 mm	878-310-18	878-310-22	1 Stück	878-010-00	10 Stück
16	11	0,15 mm	9,81 mm	878-311-18	878-311-22	1 Stück	878-011-00	10 Stück
16	12	0,15 mm	9,92 mm	878-312-18	878-312-22	1 Stück	878-012-00	10 Stück
16	13	0,15 mm	10,02 mm	878-313-18	878-313-22	1 Stück	878-013-00	10 Stück
16	14	0,15 mm	10,12 mm	878-314-18	878-314-22	1 Stück	878-014-00	10 Stück
16	15	0,15 mm	10,23 mm	878-315-18	878-315-22	1 Stück	878-015-00	10 Stück
16	16	0,15 mm	10,33 mm	878-316-18	878-316-22	1 Stück	878-016-00	10 Stück
16	17	0,15 mm	10,43 mm	878-317-18	878-317-22	1 Stück	878-017-00	10 Stück
16	18	0,15 mm	10,54 mm	878-318-18	878-318-22	1 Stück	878-018-00	10 Stück
16	19	0,15 mm	10,64 mm	878-319-18	878-319-22	1 Stück	878-019-00	10 Stück
16	20	0,15 mm	10,74 mm	878-320-18	878-320-22	1 Stück	878-020-00	10 Stück
16	21	0,15 mm	10,85 mm	878-321-18	878-321-22	1 Stück	878-021-00	10 Stück
16	22	0,15 mm	10,95 mm	878-322-18	878-322-22	1 Stück	878-022-00	10 Stück
16	23	0,15 mm	11,05 mm	878-323-18	878-323-22	1 Stück	878-023-00	10 Stück
16	24	0,15 mm	11,16 mm	878-324-18	878-324-22	1 Stück	878-024-00	10 Stück
16	25	0,18 mm	11,26 mm	878-325-18	878-325-22	1 Stück	878-025-00	10 Stück
16	26	0,18 mm	11,36 mm	878-326-18	878-326-22	1 Stück	878-026-00	10 Stück
16	27	0,18 mm	11,47 mm	878-327-18	878-327-22	1 Stück	878-027-00	10 Stück
16	28	0,18 mm	11,57 mm	878-328-18	878-328-22	1 Stück	878-028-00	10 Stück
16	29	0,18 mm	11,67 mm	878-329-18	878-329-22	1 Stück	878-029-00	10 Stück
16	30	0,18 mm	11,78 mm	878-330-18	878-330-22	1 Stück	878-030-00	10 Stück
16	31	0,18 mm	11,88 mm	878-331-18	878-331-22	1 Stück	878-031-00	10 Stück
16	32	0,18 mm	11,98 mm	878-332-18	878-332-22	1 Stück	878-032-00	10 Stück
16	33	0,18 mm	12,08 mm	878-333-18	878-333-22	1 Stück	878-033-00	10 Stück
16	34	0,18 mm	12,19 mm	878-334-18	878-334-22	1 Stück	878-034-00	10 Stück
16	35	0,18 mm	12,29 mm	878-335-18	878-335-22	1 Stück	878-035-00	10 Stück
16	36	0,18 mm	12,39 mm	878-336-18	878-336-22	1 Stück	878-036-00	10 Stück

¹⁾ beschweißt mit Bukkalröhren 818-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweißt mit Bukkalröhren 822-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10



* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® Snap / Einzelpackungen

- mit Super-Schnapp-Effekt
- harte, feste Bandqualität
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- ideal für extraorale Technik (Face Bow) oder SUS
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 1. Molarenbänder, links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾			
26	1	0,12 mm	8,78 mm	879-301-18	879-301-22	1 Stück	879-001-00	10 Stück
26	2	0,12 mm	8,89 mm	879-302-18	879-302-22	1 Stück	879-002-00	10 Stück
26	3	0,12 mm	8,99 mm	879-303-18	879-303-22	1 Stück	879-003-00	10 Stück
26	4	0,12 mm	9,09 mm	879-304-18	879-304-22	1 Stück	879-004-00	10 Stück
26	5	0,12 mm	9,20 mm	879-305-18	879-305-22	1 Stück	879-005-00	10 Stück
26	6	0,12 mm	9,30 mm	879-306-18	879-306-22	1 Stück	879-006-00	10 Stück
26	7	0,12 mm	9,40 mm	879-307-18	879-307-22	1 Stück	879-007-00	10 Stück
26	8	0,12 mm	9,50 mm	879-308-18	879-308-22	1 Stück	879-008-00	10 Stück
26	9	0,15 mm	9,61 mm	879-309-18	879-309-22	1 Stück	879-009-00	10 Stück
26	10	0,15 mm	9,71 mm	879-310-18	879-310-22	1 Stück	879-010-00	10 Stück
26	11	0,15 mm	9,81 mm	879-311-18	879-311-22	1 Stück	879-011-00	10 Stück
26	12	0,15 mm	9,92 mm	879-312-18	879-312-22	1 Stück	879-012-00	10 Stück
26	13	0,15 mm	10,02 mm	879-313-18	879-313-22	1 Stück	879-013-00	10 Stück
26	14	0,15 mm	10,12 mm	879-314-18	879-314-22	1 Stück	879-014-00	10 Stück
26	15	0,15 mm	10,23 mm	879-315-18	879-315-22	1 Stück	879-015-00	10 Stück
26	16	0,15 mm	10,33 mm	879-316-18	879-316-22	1 Stück	879-016-00	10 Stück
26	17	0,15 mm	10,43 mm	879-317-18	879-317-22	1 Stück	879-017-00	10 Stück
26	18	0,15 mm	10,54 mm	879-318-18	879-318-22	1 Stück	879-018-00	10 Stück
26	19	0,15 mm	10,64 mm	879-319-18	879-319-22	1 Stück	879-019-00	10 Stück
26	20	0,15 mm	10,74 mm	879-320-18	879-320-22	1 Stück	879-020-00	10 Stück
26	21	0,15 mm	10,85 mm	879-321-18	879-321-22	1 Stück	879-021-00	10 Stück
26	22	0,15 mm	10,95 mm	879-322-18	879-322-22	1 Stück	879-022-00	10 Stück
26	23	0,15 mm	11,05 mm	879-323-18	879-323-22	1 Stück	879-023-00	10 Stück
26	24	0,15 mm	11,16 mm	879-324-18	879-324-22	1 Stück	879-024-00	10 Stück
26	25	0,18 mm	11,26 mm	879-325-18	879-325-22	1 Stück	879-025-00	10 Stück
26	26	0,18 mm	11,36 mm	879-326-18	879-326-22	1 Stück	879-026-00	10 Stück
26	27	0,18 mm	11,47 mm	879-327-18	879-327-22	1 Stück	879-027-00	10 Stück
26	28	0,18 mm	11,57 mm	879-328-18	879-328-22	1 Stück	879-028-00	10 Stück
26	29	0,18 mm	11,67 mm	879-329-18	879-329-22	1 Stück	879-029-00	10 Stück
26	30	0,18 mm	11,78 mm	879-330-18	879-330-22	1 Stück	879-030-00	10 Stück
26	31	0,18 mm	11,88 mm	879-331-18	879-331-22	1 Stück	879-031-00	10 Stück
26	32	0,18 mm	11,98 mm	879-332-18	879-332-22	1 Stück	879-032-00	10 Stück
26	33	0,18 mm	12,08 mm	879-333-18	879-333-22	1 Stück	879-033-00	10 Stück
26	34	0,18 mm	12,19 mm	879-334-18	879-334-22	1 Stück	879-034-00	10 Stück
26	35	0,18 mm	12,29 mm	879-335-18	879-335-22	1 Stück	879-035-00	10 Stück
26	36	0,18 mm	12,39 mm	879-336-18	879-336-22	1 Stück	879-036-00	10 Stück

¹⁾ beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-131-20 und Doppelhaken 750-602-10

²⁾ beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-131-20 und Doppelhaken 750-602-10



* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- mit Super-Schnapp-Effekt
- harte, feste Bandqualität
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- ideal für extraorale Technik (Face Bow) oder SUS
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 1. Molarenbänder, rechts

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		REF	
46	1	0,12 mm	8,91 mm	880-301-18	880-301-22	1 Stück	880-201-00	10 Stück
46	2	0,12 mm	9,03 mm	880-302-18	880-302-22	1 Stück	880-202-00	10 Stück
46	3	0,12 mm	9,15 mm	880-303-18	880-303-22	1 Stück	880-203-00	10 Stück
46	4	0,12 mm	9,28 mm	880-304-18	880-304-22	1 Stück	880-204-00	10 Stück
46	5	0,12 mm	9,40 mm	880-305-18	880-305-22	1 Stück	880-205-00	10 Stück
46	6	0,12 mm	9,52 mm	880-306-18	880-306-22	1 Stück	880-206-00	10 Stück
46	7	0,12 mm	9,65 mm	880-307-18	880-307-22	1 Stück	880-207-00	10 Stück
46	8	0,12 mm	9,77 mm	880-308-18	880-308-22	1 Stück	880-208-00	10 Stück
46	9	0,15 mm	9,89 mm	880-309-18	880-309-22	1 Stück	880-209-00	10 Stück
46	10	0,15 mm	10,01 mm	880-310-18	880-310-22	1 Stück	880-210-00	10 Stück
46	11	0,15 mm	10,14 mm	880-311-18	880-311-22	1 Stück	880-211-00	10 Stück
46	12	0,15 mm	10,25 mm	880-312-18	880-312-22	1 Stück	880-212-00	10 Stück
46	13	0,15 mm	10,38 mm	880-313-18	880-313-22	1 Stück	880-213-00	10 Stück
46	14	0,15 mm	10,50 mm	880-314-18	880-314-22	1 Stück	880-214-00	10 Stück
46	15	0,15 mm	10,63 mm	880-315-18	880-315-22	1 Stück	880-215-00	10 Stück
46	16	0,15 mm	10,75 mm	880-316-18	880-316-22	1 Stück	880-216-00	10 Stück
46	17	0,15 mm	10,87 mm	880-317-18	880-317-22	1 Stück	880-217-00	10 Stück
46	18	0,15 mm	10,99 mm	880-318-18	880-318-22	1 Stück	880-218-00	10 Stück
46	19	0,15 mm	11,12 mm	880-319-18	880-319-22	1 Stück	880-219-00	10 Stück
46	20	0,15 mm	11,24 mm	880-320-18	880-320-22	1 Stück	880-220-00	10 Stück
46	21	0,15 mm	11,36 mm	880-321-18	880-321-22	1 Stück	880-221-00	10 Stück
46	22	0,15 mm	11,48 mm	880-322-18	880-322-22	1 Stück	880-222-00	10 Stück
46	23	0,15 mm	11,61 mm	880-323-18	880-323-22	1 Stück	880-223-00	10 Stück
46	24	0,15 mm	11,73 mm	880-324-18	880-324-22	1 Stück	880-224-00	10 Stück
46	25	0,18 mm	11,85 mm	880-325-18	880-325-22	1 Stück	880-225-00	10 Stück
46	26	0,18 mm	11,97 mm	880-326-18	880-326-22	1 Stück	880-226-00	10 Stück
46	27	0,18 mm	12,10 mm	880-327-18	880-327-22	1 Stück	880-227-00	10 Stück
46	28	0,18 mm	12,22 mm	880-328-18	880-328-22	1 Stück	880-228-00	10 Stück
46	29	0,18 mm	12,34 mm	880-329-18	880-329-22	1 Stück	880-229-00	10 Stück
46	30	0,18 mm	12,46 mm	880-330-18	880-330-22	1 Stück	880-230-00	10 Stück
46	31	0,18 mm	12,59 mm	880-331-18	880-331-22	1 Stück	880-231-00	10 Stück
46	32	0,18 mm	12,71 mm	880-332-18	880-332-22	1 Stück	880-232-00	10 Stück
46	33	0,18 mm	12,83 mm	880-333-18	880-333-22	1 Stück	880-233-00	10 Stück
46	34	0,18 mm	12,96 mm	880-334-18	880-334-22	1 Stück	880-234-00	10 Stück
46	35	0,18 mm	13,08 mm	880-335-18	880-335-22	1 Stück	880-235-00	10 Stück
46	36	0,18 mm	13,20 mm	880-336-18	880-336-22	1 Stück	880-236-00	10 Stück

¹⁾ beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10



* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® Snap / Einzelpackungen

- mit Super-Schnapp-Effekt
- harte, feste Bandqualität
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- ideal für extraorale Technik (Face Bow) oder SUS
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 1. Molarenbänder, links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾			
36	1	0,12 mm	8,91 mm	881-301-18	881-301-22	1 Stück	881-201-00	10 Stück
36	2	0,12 mm	9,03 mm	881-302-18	881-302-22	1 Stück	881-202-00	10 Stück
36	3	0,12 mm	9,15 mm	881-303-18	881-303-22	1 Stück	881-203-00	10 Stück
36	4	0,12 mm	9,28 mm	881-304-18	881-304-22	1 Stück	881-204-00	10 Stück
36	5	0,12 mm	9,40 mm	881-305-18	881-305-22	1 Stück	881-205-00	10 Stück
36	6	0,12 mm	9,52 mm	881-306-18	881-306-22	1 Stück	881-206-00	10 Stück
36	7	0,12 mm	9,65 mm	881-307-18	881-307-22	1 Stück	881-207-00	10 Stück
36	8	0,12 mm	9,77 mm	881-308-18	881-308-22	1 Stück	881-208-00	10 Stück
36	9	0,15 mm	9,89 mm	881-309-18	881-309-22	1 Stück	881-209-00	10 Stück
36	10	0,15 mm	10,01 mm	881-310-18	881-310-22	1 Stück	881-210-00	10 Stück
36	11	0,15 mm	10,14 mm	881-311-18	881-311-22	1 Stück	881-211-00	10 Stück
36	12	0,15 mm	10,25 mm	881-312-18	881-312-22	1 Stück	881-212-00	10 Stück
36	13	0,15 mm	10,38 mm	881-313-18	881-313-22	1 Stück	881-213-00	10 Stück
36	14	0,15 mm	10,50 mm	881-314-18	881-314-22	1 Stück	881-214-00	10 Stück
36	15	0,15 mm	10,63 mm	881-315-18	881-315-22	1 Stück	881-215-00	10 Stück
36	16	0,15 mm	10,75 mm	881-316-18	881-316-22	1 Stück	881-216-00	10 Stück
36	17	0,15 mm	10,87 mm	881-317-18	881-317-22	1 Stück	881-217-00	10 Stück
36	18	0,15 mm	10,99 mm	881-318-18	881-318-22	1 Stück	881-218-00	10 Stück
36	19	0,15 mm	11,12 mm	881-319-18	881-319-22	1 Stück	881-219-00	10 Stück
36	20	0,15 mm	11,24 mm	881-320-18	881-320-22	1 Stück	881-220-00	10 Stück
36	21	0,15 mm	11,36 mm	881-321-18	881-321-22	1 Stück	881-221-00	10 Stück
36	22	0,15 mm	11,48 mm	881-322-18	881-322-22	1 Stück	881-222-00	10 Stück
36	23	0,15 mm	11,61 mm	881-323-18	881-323-22	1 Stück	881-223-00	10 Stück
36	24	0,15 mm	11,73 mm	881-324-18	881-324-22	1 Stück	881-224-00	10 Stück
36	25	0,18 mm	11,85 mm	881-325-18	881-325-22	1 Stück	881-225-00	10 Stück
36	26	0,18 mm	11,97 mm	881-326-18	881-326-22	1 Stück	881-226-00	10 Stück
36	27	0,18 mm	12,10 mm	881-327-18	881-327-22	1 Stück	881-227-00	10 Stück
36	28	0,18 mm	12,22 mm	881-328-18	881-328-22	1 Stück	881-228-00	10 Stück
36	29	0,18 mm	12,34 mm	881-329-18	881-329-22	1 Stück	881-229-00	10 Stück
36	30	0,18 mm	12,46 mm	881-330-18	881-330-22	1 Stück	881-230-00	10 Stück
36	31	0,18 mm	12,59 mm	881-331-18	881-331-22	1 Stück	881-231-00	10 Stück
36	32	0,18 mm	12,71 mm	881-332-18	881-332-22	1 Stück	881-232-00	10 Stück
36	33	0,18 mm	12,83 mm	881-333-18	881-333-22	1 Stück	881-233-00	10 Stück
36	34	0,18 mm	12,96 mm	881-334-18	881-334-22	1 Stück	881-234-00	10 Stück
36	35	0,18 mm	13,08 mm	881-335-18	881-335-22	1 Stück	881-235-00	10 Stück
36	36	0,18 mm	13,20 mm	881-336-18	881-336-22	1 Stück	881-236-00	10 Stück



¹⁾ beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-151-30 und Doppelhaken 750-602-10

²⁾ beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-151-30 und Doppelhaken 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- Auslieferung in einer Lade (geeignet für Sortimentsschrank REF 890-414-00)
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 1. Molarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾	REF	
16	Nr. 5-36 (2)	882-364-18	882-364-22	882-064-00	64 Stück
26	Nr. 5-36 (2)	883-364-18	883-364-22	883-064-00	64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾	REF	
16	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	882-350-18	882-350-22	882-150-00	150 Stück
26	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	883-350-18	883-350-22	883-150-00	150 Stück

Maxi

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
16	Nr. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			882-300-00	300 Stück
26	Nr. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			883-300-00	300 Stück

¹⁾ (16) beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10

(26) beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-131-20 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ (16) beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10

(26) beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-131-20 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Oberkiefer 2. Molarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
17	Nr. 1-32 (2)			886-064-00	64 Stück
27	Nr. 1-32 (2)			887-064-00	64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
17	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			886-150-00	150 Stück
27	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			887-150-00	150 Stück

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® / Sortimente

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- Auslieferung in einer Lade (geeignet für Sortimentsschrank REF 890-414-00)
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 1. Molarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾	REF	
46	Nr. 5-36 (2)	884-364-18	884-364-22	884-064-00	64 Stück
36	Nr. 5-36 (2)	885-364-18	885-364-22	885-064-00	64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾	REF	
46	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	884-350-18	884-350-22	884-150-00	150 Stück
36	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	885-350-18	885-350-22	885-150-00	150 Stück

Maxi

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
46	Nr. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			884-300-00	300 Stück
36	Nr. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			885-300-00	300 Stück

¹⁾ (36) beschweiß mit Bukkalröhrchen 818-151-30 und Doppelhäkchen 750-602-10

(46) beschweiß mit Bukkalröhrchen 818-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ (36) beschweiß mit Bukkalröhrchen 822-151-30 und Doppelhäkchen 750-602-10

(46) beschweiß mit Bukkalröhrchen 822-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Unterkiefer 2. Molarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
47	Nr. 1-32 (2)			888-064-00	64 Stück
37	Nr. 1-32 (2)			889-064-00	64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
47	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			888-150-00	150 Stück
37	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			889-150-00	150 Stück

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 1. Molarenbänder, rechts

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		REF	
16	1	0,12 mm	8,78 mm	882-301-18	882-301-22	1 Stück	882-001-00	10 Stück
16	2	0,12 mm	8,89 mm	882-302-18	882-302-22	1 Stück	882-002-00	10 Stück
16	3	0,12 mm	8,99 mm	882-303-18	882-303-22	1 Stück	882-003-00	10 Stück
16	4	0,12 mm	9,09 mm	882-304-18	882-304-22	1 Stück	882-004-00	10 Stück
16	5	0,12 mm	9,20 mm	882-305-18	882-305-22	1 Stück	882-005-00	10 Stück
16	6	0,12 mm	9,30 mm	882-306-18	882-306-22	1 Stück	882-006-00	10 Stück
16	7	0,12 mm	9,40 mm	882-307-18	882-307-22	1 Stück	882-007-00	10 Stück
16	8	0,12 mm	9,50 mm	882-308-18	882-308-22	1 Stück	882-008-00	10 Stück
16	9	0,15 mm	9,61 mm	882-309-18	882-309-22	1 Stück	882-009-00	10 Stück
16	10	0,15 mm	9,71 mm	882-310-18	882-310-22	1 Stück	882-010-00	10 Stück
16	11	0,15 mm	9,81 mm	882-311-18	882-311-22	1 Stück	882-011-00	10 Stück
16	12	0,15 mm	9,92 mm	882-312-18	882-312-22	1 Stück	882-012-00	10 Stück
16	13	0,15 mm	10,02 mm	882-313-18	882-313-22	1 Stück	882-013-00	10 Stück
16	14	0,15 mm	10,12 mm	882-314-18	882-314-22	1 Stück	882-014-00	10 Stück
16	15	0,15 mm	10,23 mm	882-315-18	882-315-22	1 Stück	882-015-00	10 Stück
16	16	0,15 mm	10,33 mm	882-316-18	882-316-22	1 Stück	882-016-00	10 Stück
16	17	0,15 mm	10,43 mm	882-317-18	882-317-22	1 Stück	882-017-00	10 Stück
16	18	0,15 mm	10,54 mm	882-318-18	882-318-22	1 Stück	882-018-00	10 Stück
16	19	0,15 mm	10,64 mm	882-319-18	882-319-22	1 Stück	882-019-00	10 Stück
16	20	0,15 mm	10,74 mm	882-320-18	882-320-22	1 Stück	882-020-00	10 Stück
16	21	0,15 mm	10,85 mm	882-321-18	882-321-22	1 Stück	882-021-00	10 Stück
16	22	0,15 mm	10,95 mm	882-322-18	882-322-22	1 Stück	882-022-00	10 Stück
16	23	0,15 mm	11,05 mm	882-323-18	882-323-22	1 Stück	882-023-00	10 Stück
16	24	0,15 mm	11,16 mm	882-324-18	882-324-22	1 Stück	882-024-00	10 Stück
16	25	0,18 mm	11,26 mm	882-325-18	882-325-22	1 Stück	882-025-00	10 Stück
16	26	0,18 mm	11,36 mm	882-326-18	882-326-22	1 Stück	882-026-00	10 Stück
16	27	0,18 mm	11,47 mm	882-327-18	882-327-22	1 Stück	882-027-00	10 Stück
16	28	0,18 mm	11,57 mm	882-328-18	882-328-22	1 Stück	882-028-00	10 Stück
16	29	0,18 mm	11,67 mm	882-329-18	882-329-22	1 Stück	882-029-00	10 Stück
16	30	0,18 mm	11,78 mm	882-330-18	882-330-22	1 Stück	882-030-00	10 Stück
16	31	0,18 mm	11,88 mm	882-331-18	882-331-22	1 Stück	882-031-00	10 Stück
16	32	0,18 mm	11,98 mm	882-332-18	882-332-22	1 Stück	882-032-00	10 Stück
16	33	0,18 mm	12,08 mm	882-333-18	882-333-22	1 Stück	882-033-00	10 Stück
16	34	0,18 mm	12,19 mm	882-334-18	882-334-22	1 Stück	882-034-00	10 Stück
16	35	0,18 mm	12,29 mm	882-335-18	882-335-22	1 Stück	882-035-00	10 Stück
16	36	0,18 mm	12,39 mm	882-336-18	882-336-22	1 Stück	882-036-00	10 Stück

¹⁾ beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10



* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® / Einzelpackungen

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 1. Molarenbänder, links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾			
26	1	0,12 mm	8,78 mm	883-301-18	883-301-22	1 Stück	883-001-00	10 Stück
26	2	0,12 mm	8,89 mm	883-302-18	883-302-22	1 Stück	883-002-00	10 Stück
26	3	0,12 mm	8,99 mm	883-303-18	883-303-22	1 Stück	883-003-00	10 Stück
26	4	0,12 mm	9,09 mm	883-304-18	883-304-22	1 Stück	883-004-00	10 Stück
26	5	0,12 mm	9,20 mm	883-305-18	883-305-22	1 Stück	883-005-00	10 Stück
26	6	0,12 mm	9,30 mm	883-306-18	883-306-22	1 Stück	883-006-00	10 Stück
26	7	0,12 mm	9,40 mm	883-307-18	883-307-22	1 Stück	883-007-00	10 Stück
26	8	0,12 mm	9,50 mm	883-308-18	883-308-22	1 Stück	883-008-00	10 Stück
26	9	0,15 mm	9,61 mm	883-309-18	883-309-22	1 Stück	883-009-00	10 Stück
26	10	0,15 mm	9,71 mm	883-310-18	883-310-22	1 Stück	883-010-00	10 Stück
26	11	0,15 mm	9,81 mm	883-311-18	883-311-22	1 Stück	883-011-00	10 Stück
26	12	0,15 mm	9,92 mm	883-312-18	883-312-22	1 Stück	883-012-00	10 Stück
26	13	0,15 mm	10,02 mm	883-313-18	883-313-22	1 Stück	883-013-00	10 Stück
26	14	0,15 mm	10,12 mm	883-314-18	883-314-22	1 Stück	883-014-00	10 Stück
26	15	0,15 mm	10,23 mm	883-315-18	883-315-22	1 Stück	883-015-00	10 Stück
26	16	0,15 mm	10,33 mm	883-316-18	883-316-22	1 Stück	883-016-00	10 Stück
26	17	0,15 mm	10,43 mm	883-317-18	883-317-22	1 Stück	883-017-00	10 Stück
26	18	0,15 mm	10,54 mm	883-318-18	883-318-22	1 Stück	883-018-00	10 Stück
26	19	0,15 mm	10,64 mm	883-319-18	883-319-22	1 Stück	883-019-00	10 Stück
26	20	0,15 mm	10,74 mm	883-320-18	883-320-22	1 Stück	883-020-00	10 Stück
26	21	0,15 mm	10,85 mm	883-321-18	883-321-22	1 Stück	883-021-00	10 Stück
26	22	0,15 mm	10,95 mm	883-322-18	883-322-22	1 Stück	883-022-00	10 Stück
26	23	0,15 mm	11,05 mm	883-323-18	883-323-22	1 Stück	883-023-00	10 Stück
26	24	0,15 mm	11,16 mm	883-324-18	883-324-22	1 Stück	883-024-00	10 Stück
26	25	0,18 mm	11,26 mm	883-325-18	883-325-22	1 Stück	883-025-00	10 Stück
26	26	0,18 mm	11,36 mm	883-326-18	883-326-22	1 Stück	883-026-00	10 Stück
26	27	0,18 mm	11,47 mm	883-327-18	883-327-22	1 Stück	883-027-00	10 Stück
26	28	0,18 mm	11,57 mm	883-328-18	883-328-22	1 Stück	883-028-00	10 Stück
26	29	0,18 mm	11,67 mm	883-329-18	883-329-22	1 Stück	883-029-00	10 Stück
26	30	0,18 mm	11,78 mm	883-330-18	883-330-22	1 Stück	883-030-00	10 Stück
26	31	0,18 mm	11,88 mm	883-331-18	883-331-22	1 Stück	883-031-00	10 Stück
26	32	0,18 mm	11,98 mm	883-332-18	883-332-22	1 Stück	883-032-00	10 Stück
26	33	0,18 mm	12,08 mm	883-333-18	883-333-22	1 Stück	883-033-00	10 Stück
26	34	0,18 mm	12,19 mm	883-334-18	883-334-22	1 Stück	883-034-00	10 Stück
26	35	0,18 mm	12,29 mm	883-335-18	883-335-22	1 Stück	883-035-00	10 Stück
26	36	0,18 mm	12,39 mm	883-336-18	883-336-22	1 Stück	883-036-00	10 Stück

¹⁾ beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-131-20 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-131-20 und Doppelhäkchen 750-602-10



* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 1. Molarenbänder, rechts

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	ø mesial-distal	beschweiß		Menge	unbeschweiß	Menge
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		REF	
46	1	0,12 mm	8,91 mm	884-301-18	884-301-22	1 Stück	884-001-00	10 Stück
46	2	0,12 mm	9,03 mm	884-302-18	884-302-22	1 Stück	884-002-00	10 Stück
46	3	0,12 mm	9,15 mm	884-303-18	884-303-22	1 Stück	884-003-00	10 Stück
46	4	0,12 mm	9,28 mm	884-304-18	884-304-22	1 Stück	884-004-00	10 Stück
46	5	0,12 mm	9,40 mm	884-305-18	884-305-22	1 Stück	884-005-00	10 Stück
46	6	0,12 mm	9,52 mm	884-306-18	884-306-22	1 Stück	884-006-00	10 Stück
46	7	0,12 mm	9,65 mm	884-307-18	884-307-22	1 Stück	884-007-00	10 Stück
46	8	0,12 mm	9,77 mm	884-308-18	884-308-22	1 Stück	884-008-00	10 Stück
46	9	0,15 mm	9,89 mm	884-309-18	884-309-22	1 Stück	884-009-00	10 Stück
46	10	0,15 mm	10,01 mm	884-310-18	884-310-22	1 Stück	884-010-00	10 Stück
46	11	0,15 mm	10,14 mm	884-311-18	884-311-22	1 Stück	884-011-00	10 Stück
46	12	0,15 mm	10,25 mm	884-312-18	884-312-22	1 Stück	884-012-00	10 Stück
46	13	0,15 mm	10,38 mm	884-313-18	884-313-22	1 Stück	884-013-00	10 Stück
46	14	0,15 mm	10,50 mm	884-314-18	884-314-22	1 Stück	884-014-00	10 Stück
46	15	0,15 mm	10,63 mm	884-315-18	884-315-22	1 Stück	884-015-00	10 Stück
46	16	0,15 mm	10,75 mm	884-316-18	884-316-22	1 Stück	884-016-00	10 Stück
46	17	0,15 mm	10,87 mm	884-317-18	884-317-22	1 Stück	884-017-00	10 Stück
46	18	0,15 mm	10,99 mm	884-318-18	884-318-22	1 Stück	884-018-00	10 Stück
46	19	0,15 mm	11,12 mm	884-319-18	884-319-22	1 Stück	884-019-00	10 Stück
46	20	0,15 mm	11,24 mm	884-320-18	884-320-22	1 Stück	884-020-00	10 Stück
46	21	0,15 mm	11,36 mm	884-321-18	884-321-22	1 Stück	884-021-00	10 Stück
46	22	0,15 mm	11,48 mm	884-322-18	884-322-22	1 Stück	884-022-00	10 Stück
46	23	0,15 mm	11,61 mm	884-323-18	884-323-22	1 Stück	884-023-00	10 Stück
46	24	0,15 mm	11,73 mm	884-324-18	884-324-22	1 Stück	884-024-00	10 Stück
46	25	0,18 mm	11,85 mm	884-325-18	884-325-22	1 Stück	884-025-00	10 Stück
46	26	0,18 mm	11,97 mm	884-326-18	884-326-22	1 Stück	884-026-00	10 Stück
46	27	0,18 mm	12,10 mm	884-327-18	884-327-22	1 Stück	884-027-00	10 Stück
46	28	0,18 mm	12,22 mm	884-328-18	884-328-22	1 Stück	884-028-00	10 Stück
46	29	0,18 mm	12,34 mm	884-329-18	884-329-22	1 Stück	884-029-00	10 Stück
46	30	0,18 mm	12,46 mm	884-330-18	884-330-22	1 Stück	884-030-00	10 Stück
46	31	0,18 mm	12,59 mm	884-331-18	884-331-22	1 Stück	884-031-00	10 Stück
46	32	0,18 mm	12,71 mm	884-332-18	884-332-22	1 Stück	884-032-00	10 Stück
46	33	0,18 mm	12,83 mm	884-333-18	884-333-22	1 Stück	884-033-00	10 Stück
46	34	0,18 mm	12,96 mm	884-334-18	884-334-22	1 Stück	884-034-00	10 Stück
46	35	0,18 mm	13,08 mm	884-335-18	884-335-22	1 Stück	884-035-00	10 Stück
46	36	0,18 mm	13,20 mm	884-336-18	884-336-22	1 Stück	884-036-00	10 Stück

¹⁾ beschweiß mit Bukkalröhrchen 818-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweiß mit Bukkalröhrchen 822-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10



* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform claim that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® / Einzelpackungen

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 1. Molarenbänder, links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		REF	
36	1	0,12 mm	8,91 mm	885-301-18	885-301-22	1 Stück	885-001-00	10 Stück
36	2	0,12 mm	9,03 mm	885-302-18	885-302-22	1 Stück	885-002-00	10 Stück
36	3	0,12 mm	9,15 mm	885-303-18	885-303-22	1 Stück	885-003-00	10 Stück
36	4	0,12 mm	9,28 mm	885-304-18	885-304-22	1 Stück	885-004-00	10 Stück
36	5	0,12 mm	9,40 mm	885-305-18	885-305-22	1 Stück	885-005-00	10 Stück
36	6	0,12 mm	9,52 mm	885-306-18	885-306-22	1 Stück	885-006-00	10 Stück
36	7	0,12 mm	9,65 mm	885-307-18	885-307-22	1 Stück	885-007-00	10 Stück
36	8	0,12 mm	9,77 mm	885-308-18	885-308-22	1 Stück	885-008-00	10 Stück
36	9	0,15 mm	9,89 mm	885-309-18	885-309-22	1 Stück	885-009-00	10 Stück
36	10	0,15 mm	10,01 mm	885-310-18	885-310-22	1 Stück	885-010-00	10 Stück
36	11	0,15 mm	10,14 mm	885-311-18	885-311-22	1 Stück	885-011-00	10 Stück
36	12	0,15 mm	10,25 mm	885-312-18	885-312-22	1 Stück	885-012-00	10 Stück
36	13	0,15 mm	10,38 mm	885-313-18	885-313-22	1 Stück	885-013-00	10 Stück
36	14	0,15 mm	10,50 mm	885-314-18	885-314-22	1 Stück	885-014-00	10 Stück
36	15	0,15 mm	10,63 mm	885-315-18	885-315-22	1 Stück	885-015-00	10 Stück
36	16	0,15 mm	10,75 mm	885-316-18	885-316-22	1 Stück	885-016-00	10 Stück
36	17	0,15 mm	10,87 mm	885-317-18	885-317-22	1 Stück	885-017-00	10 Stück
36	18	0,15 mm	10,99 mm	885-318-18	885-318-22	1 Stück	885-018-00	10 Stück
36	19	0,15 mm	11,12 mm	885-319-18	885-319-22	1 Stück	885-019-00	10 Stück
36	20	0,15 mm	11,24 mm	885-320-18	885-320-22	1 Stück	885-020-00	10 Stück
36	21	0,15 mm	11,36 mm	885-321-18	885-321-22	1 Stück	885-021-00	10 Stück
36	22	0,15 mm	11,48 mm	885-322-18	885-322-22	1 Stück	885-022-00	10 Stück
36	23	0,15 mm	11,61 mm	885-323-18	885-323-22	1 Stück	885-023-00	10 Stück
36	24	0,15 mm	11,73 mm	885-324-18	885-324-22	1 Stück	885-024-00	10 Stück
36	25	0,18 mm	11,85 mm	885-325-18	885-325-22	1 Stück	885-025-00	10 Stück
36	26	0,18 mm	11,97 mm	885-326-18	885-326-22	1 Stück	885-026-00	10 Stück
36	27	0,18 mm	12,10 mm	885-327-18	885-327-22	1 Stück	885-027-00	10 Stück
36	28	0,18 mm	12,22 mm	885-328-18	885-328-22	1 Stück	885-028-00	10 Stück
36	29	0,18 mm	12,34 mm	885-329-18	885-329-22	1 Stück	885-029-00	10 Stück
36	30	0,18 mm	12,46 mm	885-330-18	885-330-22	1 Stück	885-030-00	10 Stück
36	31	0,18 mm	12,59 mm	885-331-18	885-331-22	1 Stück	885-031-00	10 Stück
36	32	0,18 mm	12,71 mm	885-332-18	885-332-22	1 Stück	885-032-00	10 Stück
36	33	0,18 mm	12,83 mm	885-333-18	885-333-22	1 Stück	885-033-00	10 Stück
36	34	0,18 mm	12,96 mm	885-334-18	885-334-22	1 Stück	885-034-00	10 Stück
36	35	0,18 mm	13,08 mm	885-335-18	885-335-22	1 Stück	885-035-00	10 Stück
36	36	0,18 mm	13,20 mm	885-336-18	885-336-22	1 Stück	885-036-00	10 Stück

¹⁾ beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-151-30 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-151-30 und Doppelhäkchen 750-602-10



* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 2. Molarenbänder, rechts

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
17	1	0,12 mm	8,10 mm				886-001-00	10 Stück
17	2	0,12 mm	8,22 mm				886-002-00	10 Stück
17	3	0,12 mm	8,33 mm				886-003-00	10 Stück
17	4	0,12 mm	8,45 mm				886-004-00	10 Stück
17	5	0,12 mm	8,56 mm				886-005-00	10 Stück
17	6	0,12 mm	8,68 mm				886-006-00	10 Stück
17	7	0,15 mm	8,80 mm				886-007-00	10 Stück
17	8	0,15 mm	8,91 mm				886-008-00	10 Stück
17	9	0,15 mm	9,03 mm				886-009-00	10 Stück
17	10	0,15 mm	9,14 mm				886-010-00	10 Stück
17	11	0,15 mm	9,26 mm				886-011-00	10 Stück
17	12	0,15 mm	9,38 mm				886-012-00	10 Stück
17	13	0,15 mm	9,49 mm				886-013-00	10 Stück
17	14	0,15 mm	9,61 mm				886-014-00	10 Stück
17	15	0,15 mm	9,72 mm				886-015-00	10 Stück
17	16	0,15 mm	9,84 mm				886-016-00	10 Stück
17	17	0,15 mm	9,96 mm				886-017-00	10 Stück
17	18	0,15 mm	10,07 mm				886-018-00	10 Stück
17	19	0,15 mm	10,19 mm				886-019-00	10 Stück
17	20	0,15 mm	10,30 mm				886-020-00	10 Stück
17	21	0,15 mm	10,42 mm				886-021-00	10 Stück
17	22	0,15 mm	10,54 mm				886-022-00	10 Stück
17	23	0,18 mm	10,65 mm				886-023-00	10 Stück
17	24	0,18 mm	10,77 mm				886-024-00	10 Stück
17	25	0,18 mm	10,88 mm				886-025-00	10 Stück
17	26	0,18 mm	11,00 mm				886-026-00	10 Stück
17	27	0,18 mm	11,12 mm				886-027-00	10 Stück
17	28	0,18 mm	11,23 mm				886-028-00	10 Stück
17	29	0,18 mm	11,35 mm				886-029-00	10 Stück
17	30	0,18 mm	11,46 mm				886-030-00	10 Stück
17	31	0,18 mm	11,58 mm				886-031-00	10 Stück
17	32	0,18 mm	11,70 mm				886-032-00	10 Stück

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



dentaform® / Einzelpackungen

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 2. Molarenbänder, links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
27	1	0,12 mm	8,10 mm				887-001-00	10 Stück
27	2	0,12 mm	8,22 mm				887-002-00	10 Stück
27	3	0,12 mm	8,33 mm				887-003-00	10 Stück
27	4	0,12 mm	8,45 mm				887-004-00	10 Stück
27	5	0,12 mm	8,56 mm				887-005-00	10 Stück
27	6	0,12 mm	8,68 mm				887-006-00	10 Stück
27	7	0,15 mm	8,80 mm				887-007-00	10 Stück
27	8	0,15 mm	8,91 mm				887-008-00	10 Stück
27	9	0,15 mm	9,03 mm				887-009-00	10 Stück
27	10	0,15 mm	9,14 mm				887-010-00	10 Stück
27	11	0,15 mm	9,26 mm				887-011-00	10 Stück
27	12	0,15 mm	9,38 mm				887-012-00	10 Stück
27	13	0,15 mm	9,49 mm				887-013-00	10 Stück
27	14	0,15 mm	9,61 mm				887-014-00	10 Stück
27	15	0,15 mm	9,72 mm				887-015-00	10 Stück
27	16	0,15 mm	9,84 mm				887-016-00	10 Stück
27	17	0,15 mm	9,96 mm				887-017-00	10 Stück
27	18	0,15 mm	10,07 mm				887-018-00	10 Stück
27	19	0,15 mm	10,19 mm				887-019-00	10 Stück
27	20	0,15 mm	10,30 mm				887-020-00	10 Stück
27	21	0,15 mm	10,42 mm				887-021-00	10 Stück
27	22	0,15 mm	10,54 mm				887-022-00	10 Stück
27	23	0,18 mm	10,65 mm				887-023-00	10 Stück
27	24	0,18 mm	10,77 mm				887-024-00	10 Stück
27	25	0,18 mm	10,88 mm				887-025-00	10 Stück
27	26	0,18 mm	11,00 mm				887-026-00	10 Stück
27	27	0,18 mm	11,12 mm				887-027-00	10 Stück
27	28	0,18 mm	11,23 mm				887-028-00	10 Stück
27	29	0,18 mm	11,35 mm				887-029-00	10 Stück
27	30	0,18 mm	11,46 mm				887-030-00	10 Stück
27	31	0,18 mm	11,58 mm				887-031-00	10 Stück
27	32	0,18 mm	11,70 mm				887-032-00	10 Stück

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 2. Molarenbänder, rechts

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
47	1	0,12 mm	9,88 mm				888-001-00	10 Stück
47	2	0,12 mm	9,92 mm				888-002-00	10 Stück
47	3	0,12 mm	10,04 mm				888-003-00	10 Stück
47	4	0,12 mm	10,17 mm				888-004-00	10 Stück
47	5	0,12 mm	10,29 mm				888-005-00	10 Stück
47	6	0,12 mm	10,41 mm				888-006-00	10 Stück
47	7	0,15 mm	10,53 mm				888-007-00	10 Stück
47	8	0,15 mm	10,65 mm				888-008-00	10 Stück
47	9	0,15 mm	10,78 mm				888-009-00	10 Stück
47	10	0,15 mm	10,90 mm				888-010-00	10 Stück
47	11	0,15 mm	11,02 mm				888-011-00	10 Stück
47	12	0,15 mm	11,14 mm				888-012-00	10 Stück
47	13	0,15 mm	11,26 mm				888-013-00	10 Stück
47	14	0,15 mm	11,39 mm				888-014-00	10 Stück
47	15	0,15 mm	11,51 mm				888-015-00	10 Stück
47	16	0,15 mm	11,63 mm				888-016-00	10 Stück
47	17	0,15 mm	11,75 mm				888-017-00	10 Stück
47	18	0,15 mm	11,87 mm				888-018-00	10 Stück
47	19	0,15 mm	11,99 mm				888-019-00	10 Stück
47	20	0,15 mm	12,12 mm				888-020-00	10 Stück
47	21	0,15 mm	12,24 mm				888-021-00	10 Stück
47	22	0,15 mm	12,36 mm				888-022-00	10 Stück
47	23	0,18 mm	12,48 mm				888-023-00	10 Stück
47	24	0,18 mm	12,61 mm				888-024-00	10 Stück
47	25	0,18 mm	12,73 mm				888-025-00	10 Stück
47	26	0,18 mm	12,85 mm				888-026-00	10 Stück
47	27	0,18 mm	12,97 mm				888-027-00	10 Stück
47	28	0,18 mm	13,09 mm				888-028-00	10 Stück
47	29	0,18 mm	13,22 mm				888-029-00	10 Stück
47	30	0,18 mm	13,34 mm				888-030-00	10 Stück
47	31	0,18 mm	13,46 mm				888-031-00	10 Stück
47	32	0,18 mm	13,59 mm				888-032-00	10 Stück

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



dentaform® / Einzelpackungen

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 2. Molarenbänder, links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
37	1	0,12 mm	9,88 mm				889-001-00	10 Stück
37	2	0,12 mm	9,92 mm				889-002-00	10 Stück
37	3	0,12 mm	10,04 mm				889-003-00	10 Stück
37	4	0,12 mm	10,17 mm				889-004-00	10 Stück
37	5	0,12 mm	10,29 mm				889-005-00	10 Stück
37	6	0,12 mm	10,41 mm				889-006-00	10 Stück
37	7	0,15 mm	10,53 mm				889-007-00	10 Stück
37	8	0,15 mm	10,65 mm				889-008-00	10 Stück
37	9	0,15 mm	10,78 mm				889-009-00	10 Stück
37	10	0,15 mm	10,90 mm				889-010-00	10 Stück
37	11	0,15 mm	11,02 mm				889-011-00	10 Stück
37	12	0,15 mm	11,14 mm				889-012-00	10 Stück
37	13	0,15 mm	11,26 mm				889-013-00	10 Stück
37	14	0,15 mm	11,39 mm				889-014-00	10 Stück
37	15	0,15 mm	11,51 mm				889-015-00	10 Stück
37	16	0,15 mm	11,63 mm				889-016-00	10 Stück
37	17	0,15 mm	11,75 mm				889-017-00	10 Stück
37	18	0,15 mm	11,87 mm				889-018-00	10 Stück
37	19	0,15 mm	11,99 mm				889-019-00	10 Stück
37	20	0,15 mm	12,12 mm				889-020-00	10 Stück
37	21	0,15 mm	12,24 mm				889-021-00	10 Stück
37	22	0,15 mm	12,36 mm				889-022-00	10 Stück
37	23	0,18 mm	12,48 mm				889-023-00	10 Stück
37	24	0,18 mm	12,61 mm				889-024-00	10 Stück
37	25	0,18 mm	12,73 mm				889-025-00	10 Stück
37	26	0,18 mm	12,85 mm				889-026-00	10 Stück
37	27	0,18 mm	12,97 mm				889-027-00	10 Stück
37	28	0,18 mm	13,09 mm				889-028-00	10 Stück
37	29	0,18 mm	13,22 mm				889-029-00	10 Stück
37	30	0,18 mm	13,34 mm				889-030-00	10 Stück
37	31	0,18 mm	13,46 mm				889-031-00	10 Stück
37	32	0,18 mm	13,59 mm				889-032-00	10 Stück

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- Auslieferung in einer Lade (geeignet für Sortimentsschrank REF 890-414-00)
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 1. und 2. Prämolarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾	REF	
15-14 / 24-25	Nr. 1-32 (2)	860-064-18	860-064-22	864-064-00	64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾	REF	
15-14 / 24-25	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	860-150-18	860-150-22	864-150-00	150 Stück

Maxi

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
15-14 / 24-25	Nr. 1-4, 28-32 (4), 5-10, 21-27 (8), 11-12, 19-20 (12), 13, 18 (16), 14-17 (20)			864-300-00	300 Stück

¹⁾ beschweiß mit equilibrium® 2 Bracket 790-206-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweiß mit equilibrium® 2 Bracket 790-218-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Unterkiefer 1. Prämolarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾	REF	
44 / 34	Nr. 1-32 (2)	861-064-18	861-064-22		64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾	REF	
44 / 34	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	861-150-18	861-150-22		150 Stück

¹⁾ beschweiß mit equilibrium® 2 Bracket 790-210-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweiß mit equilibrium® 2 Bracket 790-222-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Standard Bänder / Sortimente

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- Auslieferung in einer Lade (geeignet für Sortimentsschrank REF 890-414-00)
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 2. Prämolarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾	REF	
45 / 35	Nr. 1-32 (2)	862-064-18	862-064-22		64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾	REF	
45 / 35	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	862-150-18	862-150-22		150 Stück

¹⁾ beschweiß mit equilibrium® 2 Bracket 790-211-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweiß mit equilibrium® 2 Bracket 790-223-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Unterkiefer 1. und 2. Prämolarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
45-44 / 34-35	Nr. 1-32 (2)			865-064-00	64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
45-44 / 34-35	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			865-150-00	150 Stück

Maxi

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
45-44 / 34-35	Nr. 1-4, 28-32 (4), 5-10, 21-27 (8), 11-12, 19-20 (12), 13, 18 (16), 14-17 (20)			865-300-00	300 Stück

* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- Auslieferung in einer Lade (geeignet für Sortimentsschrank REF 890-414-00)
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 1. und 2. Molarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
17-16 / 26-27	Nr. 1-32 (2)			872-064-00	64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
17-16 / 26-27	Nr. 1-8, 30-32 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)			872-150-00	150 Stück

* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Unterkiefer 1. und 2. Molarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
47-46 / 36-37	Nr. 1-32 (2)			873-064-00	64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
47-46 / 36-37	Nr. 1-8, 30-32 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)			873-150-00	150 Stück

* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Standard Bänder / Sortimente

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- Auslieferung in einer Lade (geeignet für Sortimentsschrank REF 890-414-00)
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer Eckzahnblätter

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
13 / 23	Nr. 1-20 (2)			855-050-00	50 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
13 / 23	Nr. 1-5; 19-20 (4), 6-8; 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 12,5; 16-18 (6), 9; 10; 11; 12; 13-15 (8)			855-150-00	150 Stück

* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Unterkiefer Eckzahnblätter

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
43 / 33	Nr. 1-16 (2)			857-042-00	42 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
43 / 33	Nr. 1-2; 5,5; 6,5; 15-16 (4), 7,5; 8,5; 9,5 (6), 3-5; 12-14 (8), 6; 7; 8; 9; 10-11 (10)			857-150-00	150 Stück

* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Standard Bänder / Einzelpackungen

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 1. und 2. Prämolarenbänder, rechts und links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißst		Menge	unbeschweißst	Menge
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		REF	
15-14 / 24-25	1	0,12 mm	5,52 mm	860-101-18	860-101-22	1 Stück	860-101-00	10 Stück
15-14 / 24-25	2	0,12 mm	5,57 mm	860-102-18	860-102-22	1 Stück	860-102-00	10 Stück
15-14 / 24-25	3	0,12 mm	5,62 mm	860-103-18	860-103-22	1 Stück	860-103-00	10 Stück
15-14 / 24-25	4	0,12 mm	5,67 mm	860-104-18	860-104-22	1 Stück	860-104-00	10 Stück
15-14 / 24-25	5	0,12 mm	5,75 mm	860-105-18	860-105-22	1 Stück	860-105-00	10 Stück
15-14 / 24-25	6	0,12 mm	5,82 mm	860-106-18	860-106-22	1 Stück	860-106-00	10 Stück
15-14 / 24-25	7	0,12 mm	5,89 mm	860-107-18	860-107-22	1 Stück	860-107-00	10 Stück
15-14 / 24-25	8	0,12 mm	5,94 mm	860-108-18	860-108-22	1 Stück	860-108-00	10 Stück
15-14 / 24-25	9	0,12 mm	6,01 mm	860-109-18	860-109-22	1 Stück	860-109-00	10 Stück
15-14 / 24-25	10	0,12 mm	6,08 mm	860-110-18	860-110-22	1 Stück	860-110-00	10 Stück
15-14 / 24-25	11	0,12 mm	6,13 mm	860-111-18	860-111-22	1 Stück	860-111-00	10 Stück
15-14 / 24-25	12	0,12 mm	6,20 mm	860-112-18	860-112-22	1 Stück	860-112-00	10 Stück
15-14 / 24-25	13	0,12 mm	6,24 mm	860-113-18	860-113-22	1 Stück	860-113-00	10 Stück
15-14 / 24-25	14	0,12 mm	6,30 mm	860-114-18	860-114-22	1 Stück	860-114-00	10 Stück
15-14 / 24-25	15	0,12 mm	6,34 mm	860-115-18	860-115-22	1 Stück	860-115-00	10 Stück
15-14 / 24-25	16	0,12 mm	6,42 mm	860-116-18	860-116-22	1 Stück	860-116-00	10 Stück
15-14 / 24-25	17	0,12 mm	6,48 mm	860-117-18	860-117-22	1 Stück	860-117-00	10 Stück
15-14 / 24-25	18	0,12 mm	6,56 mm	860-118-18	860-118-22	1 Stück	860-118-00	10 Stück
15-14 / 24-25	19	0,12 mm	6,64 mm	860-119-18	860-119-22	1 Stück	860-119-00	10 Stück
15-14 / 24-25	20	0,12 mm	6,71 mm	860-120-18	860-120-22	1 Stück	860-120-00	10 Stück
15-14 / 24-25	21	0,12 mm	6,80 mm	860-121-18	860-121-22	1 Stück	860-121-00	10 Stück
15-14 / 24-25	22	0,12 mm	6,90 mm	860-122-18	860-122-22	1 Stück	860-122-00	10 Stück
15-14 / 24-25	23	0,12 mm	7,00 mm	860-123-18	860-123-22	1 Stück	860-123-00	10 Stück
15-14 / 24-25	24	0,12 mm	7,11 mm	860-124-18	860-124-22	1 Stück	860-124-00	10 Stück
15-14 / 24-25	25	0,12 mm	7,18 mm	860-125-18	860-125-22	1 Stück	860-125-00	10 Stück
15-14 / 24-25	26	0,12 mm	7,26 mm	860-126-18	860-126-22	1 Stück	860-126-00	10 Stück
15-14 / 24-25	27	0,12 mm	7,35 mm	860-127-18	860-127-22	1 Stück	860-127-00	10 Stück
15-14 / 24-25	28	0,12 mm	7,43 mm	860-128-18	860-128-22	1 Stück	860-128-00	10 Stück
15-14 / 24-25	29	0,12 mm	7,51 mm	860-129-18	860-129-22	1 Stück	860-129-00	10 Stück
15-14 / 24-25	30	0,12 mm	7,61 mm	860-130-18	860-130-22	1 Stück	860-130-00	10 Stück
15-14 / 24-25	31	0,12 mm	7,71 mm	860-131-18	860-131-22	1 Stück	860-131-00	10 Stück
15-14 / 24-25	32	0,12 mm	7,80 mm	860-132-18	860-132-22	1 Stück	860-132-00	10 Stück

¹⁾ beschweißst mit equilibrium® 2 Bracket 790-206-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweißst mit equilibrium® 2 Bracket 790-218-02 und Doppelhäkchen 750-602-10



* The Dentaum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Standard Bänder / Einzelpackungen

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 1. Prämolarenbänder, rechts und links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißte		Menge	unbeschweißte	Menge
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		REF	
44 / 34	1	0,12 mm	6,34 mm	861-101-18	861-101-22	1 Stück	861-101-00	10 Stück
44 / 34	2	0,12 mm	6,45 mm	861-102-18	861-102-22	1 Stück	861-102-00	10 Stück
44 / 34	3	0,12 mm	6,56 mm	861-103-18	861-103-22	1 Stück	861-103-00	10 Stück
44 / 34	4	0,12 mm	6,68 mm	861-104-18	861-104-22	1 Stück	861-104-00	10 Stück
44 / 34	5	0,12 mm	6,80 mm	861-105-18	861-105-22	1 Stück	861-105-00	10 Stück
44 / 34	6	0,12 mm	6,90 mm	861-106-18	861-106-22	1 Stück	861-106-00	10 Stück
44 / 34	7	0,12 mm	7,02 mm	861-107-18	861-107-22	1 Stück	861-107-00	10 Stück
44 / 34	8	0,12 mm	7,13 mm	861-108-18	861-108-22	1 Stück	861-108-00	10 Stück
44 / 34	9	0,12 mm	7,25 mm	861-109-18	861-109-22	1 Stück	861-109-00	10 Stück
44 / 34	10	0,12 mm	7,37 mm	861-110-18	861-110-22	1 Stück	861-110-00	10 Stück
44 / 34	11	0,12 mm	7,50 mm	861-111-18	861-111-22	1 Stück	861-111-00	10 Stück
44 / 34	12	0,12 mm	7,63 mm	861-112-18	861-112-22	1 Stück	861-112-00	10 Stück
44 / 34	13	0,12 mm	7,75 mm	861-113-18	861-113-22	1 Stück	861-113-00	10 Stück
44 / 34	14	0,12 mm	7,88 mm	861-114-18	861-114-22	1 Stück	861-114-00	10 Stück
44 / 34	15	0,12 mm	8,05 mm	861-115-18	861-115-22	1 Stück	861-115-00	10 Stück
44 / 34	16	0,12 mm	8,13 mm	861-116-18	861-116-22	1 Stück	861-116-00	10 Stück
44 / 34	17	0,12 mm	8,26 mm	861-117-18	861-117-22	1 Stück	861-117-00	10 Stück
44 / 34	18	0,12 mm	8,40 mm	861-118-18	861-118-22	1 Stück	861-118-00	10 Stück
44 / 34	19	0,12 mm	8,53 mm	861-119-18	861-119-22	1 Stück	861-119-00	10 Stück
44 / 34	20	0,12 mm	8,70 mm	861-120-18	861-120-22	1 Stück	861-120-00	10 Stück
44 / 34	21	0,12 mm	8,84 mm	861-121-18	861-121-22	1 Stück	861-121-00	10 Stück
44 / 34	22	0,12 mm	9,02 mm	861-122-18	861-122-22	1 Stück	861-122-00	10 Stück
44 / 34	23	0,12 mm	9,17 mm	861-123-18	861-123-22	1 Stück	861-123-00	10 Stück
44 / 34	24	0,12 mm	9,28 mm	861-124-18	861-124-22	1 Stück	861-124-00	10 Stück
44 / 34	25	0,12 mm	9,38 mm	861-125-18	861-125-22	1 Stück	861-125-00	10 Stück
44 / 34	26	0,12 mm	9,48 mm	861-126-18	861-126-22	1 Stück	861-126-00	10 Stück
44 / 34	27	0,12 mm	9,59 mm	861-127-18	861-127-22	1 Stück	861-127-00	10 Stück
44 / 34	28	0,12 mm	9,70 mm	861-128-18	861-128-22	1 Stück	861-128-00	10 Stück
44 / 34	29	0,12 mm	9,82 mm	861-129-18	861-129-22	1 Stück	861-129-00	10 Stück
44 / 34	30	0,12 mm	9,96 mm	861-130-18	861-130-22	1 Stück	861-130-00	10 Stück
44 / 34	31	0,12 mm	10,11 mm	861-131-18	861-131-22	1 Stück	861-131-00	10 Stück
44 / 34	32	0,12 mm	10,28 mm	861-132-18	861-132-22	1 Stück	861-132-00	10 Stück

¹⁾ beschweißte mit equilibrium® 2 Bracket 790-210-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweißte mit equilibrium® 2 Bracket 790-222-02 und Doppelhäkchen 750-602-10



* The Dentaum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Standard Bänder / Einzelpackungen

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhaken) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 2. Prämolarenbänder, rechts und links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißst		Menge	unbeschweißst	Menge
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		REF	
45 / 35	1	0,12 mm	6,34 mm	862-101-18	862-101-22	1 Stück	861-101-00	10 Stück
45 / 35	2	0,12 mm	6,45 mm	862-102-18	862-102-22	1 Stück	861-102-00	10 Stück
45 / 35	3	0,12 mm	6,56 mm	862-103-18	862-103-22	1 Stück	861-103-00	10 Stück
45 / 35	4	0,12 mm	6,68 mm	862-104-18	862-104-22	1 Stück	861-104-00	10 Stück
45 / 35	5	0,12 mm	6,80 mm	862-105-18	862-105-22	1 Stück	861-105-00	10 Stück
45 / 35	6	0,12 mm	6,90 mm	862-106-18	862-106-22	1 Stück	861-106-00	10 Stück
45 / 35	7	0,12 mm	7,02 mm	862-107-18	862-107-22	1 Stück	861-107-00	10 Stück
45 / 35	8	0,12 mm	7,13 mm	862-108-18	862-108-22	1 Stück	861-108-00	10 Stück
45 / 35	9	0,12 mm	7,25 mm	862-109-18	862-109-22	1 Stück	861-109-00	10 Stück
45 / 35	10	0,12 mm	7,37 mm	862-110-18	862-110-22	1 Stück	861-110-00	10 Stück
45 / 35	11	0,12 mm	7,50 mm	862-111-18	862-111-22	1 Stück	861-111-00	10 Stück
45 / 35	12	0,12 mm	7,63 mm	862-112-18	862-112-22	1 Stück	861-112-00	10 Stück
45 / 35	13	0,12 mm	7,75 mm	862-113-18	862-113-22	1 Stück	861-113-00	10 Stück
45 / 35	14	0,12 mm	7,88 mm	862-114-18	862-114-22	1 Stück	861-114-00	10 Stück
45 / 35	15	0,12 mm	8,05 mm	862-115-18	862-115-22	1 Stück	861-115-00	10 Stück
45 / 35	16	0,12 mm	8,13 mm	862-116-18	862-116-22	1 Stück	861-116-00	10 Stück
45 / 35	17	0,12 mm	8,26 mm	862-117-18	862-117-22	1 Stück	861-117-00	10 Stück
45 / 35	18	0,12 mm	8,40 mm	862-118-18	862-118-22	1 Stück	861-118-00	10 Stück
45 / 35	19	0,12 mm	8,53 mm	862-119-18	862-119-22	1 Stück	861-119-00	10 Stück
45 / 35	20	0,12 mm	8,70 mm	862-120-18	862-120-22	1 Stück	861-120-00	10 Stück
45 / 35	21	0,12 mm	8,84 mm	862-121-18	862-121-22	1 Stück	861-121-00	10 Stück
45 / 35	22	0,12 mm	9,02 mm	862-122-18	862-122-22	1 Stück	861-122-00	10 Stück
45 / 35	23	0,12 mm	9,17 mm	862-123-18	862-123-22	1 Stück	861-123-00	10 Stück
45 / 35	24	0,12 mm	9,28 mm	862-124-18	862-124-22	1 Stück	861-124-00	10 Stück
45 / 35	25	0,12 mm	9,38 mm	862-125-18	862-125-22	1 Stück	861-125-00	10 Stück
45 / 35	26	0,12 mm	9,48 mm	862-126-18	862-126-22	1 Stück	861-126-00	10 Stück
45 / 35	27	0,12 mm	9,59 mm	862-127-18	862-127-22	1 Stück	861-127-00	10 Stück
45 / 35	28	0,12 mm	9,70 mm	862-128-18	862-128-22	1 Stück	861-128-00	10 Stück
45 / 35	29	0,12 mm	9,82 mm	862-129-18	862-129-22	1 Stück	861-129-00	10 Stück
45 / 35	30	0,12 mm	9,96 mm	862-130-18	862-130-22	1 Stück	861-130-00	10 Stück
45 / 35	31	0,12 mm	10,11 mm	862-131-18	862-131-22	1 Stück	861-131-00	10 Stück
45 / 35	32	0,12 mm	10,28 mm	862-132-18	862-132-22	1 Stück	861-132-00	10 Stück

¹⁾ beschweißst mit equilibrium® 2 Bracket 790-211-02 und Doppelhaken 750-602-10

²⁾ beschweißst mit equilibrium® 2 Bracket 790-223-02 und Doppelhaken 750-602-10



* The Dentaum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Standard Bänder / Einzelpackungen

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 1. und 2. Molarenbänder, rechts und links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
17-16 / 26-27	1	0,15 mm	7,94 mm				870-001-00	10 Stück
17-16 / 26-27	2	0,15 mm	8,06 mm				870-002-00	10 Stück
17-16 / 26-27	3	0,15 mm	8,18 mm				870-003-00	10 Stück
17-16 / 26-27	4	0,15 mm	8,30 mm				870-004-00	10 Stück
17-16 / 26-27	5	0,15 mm	8,42 mm				870-005-00	10 Stück
17-16 / 26-27	6	0,15 mm	8,54 mm				870-006-00	10 Stück
17-16 / 26-27	7	0,15 mm	8,66 mm				870-007-00	10 Stück
17-16 / 26-27	8	0,15 mm	8,78 mm				870-008-00	10 Stück
17-16 / 26-27	9	0,15 mm	8,90 mm				870-009-00	10 Stück
17-16 / 26-27	10	0,15 mm	9,02 mm				870-010-00	10 Stück
17-16 / 26-27	11	0,15 mm	9,14 mm				870-011-00	10 Stück
17-16 / 26-27	12	0,15 mm	9,26 mm				870-012-00	10 Stück
17-16 / 26-27	13	0,15 mm	9,38 mm				870-013-00	10 Stück
17-16 / 26-27	14	0,15 mm	9,50 mm				870-014-00	10 Stück
17-16 / 26-27	15	0,15 mm	9,62 mm				870-015-00	10 Stück
17-16 / 26-27	16	0,15 mm	9,74 mm				870-016-00	10 Stück
17-16 / 26-27	17	0,15 mm	9,86 mm				870-017-00	10 Stück
17-16 / 26-27	18	0,15 mm	9,98 mm				870-018-00	10 Stück
17-16 / 26-27	19	0,15 mm	10,10 mm				870-019-00	10 Stück
17-16 / 26-27	20	0,15 mm	10,22 mm				870-020-00	10 Stück
17-16 / 26-27	21	0,15 mm	10,34 mm				870-021-00	10 Stück
17-16 / 26-27	22	0,15 mm	10,46 mm				870-022-00	10 Stück
17-16 / 26-27	23	0,15 mm	10,58 mm				870-023-00	10 Stück
17-16 / 26-27	24	0,15 mm	10,70 mm				870-024-00	10 Stück
17-16 / 26-27	25	0,15 mm	10,82 mm				870-025-00	10 Stück
17-16 / 26-27	26	0,15 mm	10,94 mm				870-026-00	10 Stück
17-16 / 26-27	27	0,15 mm	11,06 mm				870-027-00	10 Stück
17-16 / 26-27	28	0,15 mm	11,18 mm				870-028-00	10 Stück
17-16 / 26-27	29	0,15 mm	11,30 mm				870-029-00	10 Stück
17-16 / 26-27	30	0,15 mm	11,42 mm				870-030-00	10 Stück
17-16 / 26-27	31	0,15 mm	11,54 mm				870-031-00	10 Stück
17-16 / 26-27	32	0,15 mm	11,66 mm				870-032-00	10 Stück

* The Denta-urum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Denta-urum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevi.



Standard Bänder / Einzelpackungen

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 1. und 2. Molarenbänder, rechts und links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
47-46 / 36-37	1	0,15 mm	8,94 mm				871-001-00	10 Stück
47-46 / 36-37	2	0,15 mm	9,06 mm				871-002-00	10 Stück
47-46 / 36-37	3	0,15 mm	9,18 mm				871-003-00	10 Stück
47-46 / 36-37	4	0,15 mm	9,30 mm				871-004-00	10 Stück
47-46 / 36-37	5	0,15 mm	9,42 mm				871-005-00	10 Stück
47-46 / 36-37	6	0,15 mm	9,54 mm				871-006-00	10 Stück
47-46 / 36-37	7	0,15 mm	9,56 mm				871-007-00	10 Stück
47-46 / 36-37	8	0,15 mm	9,78 mm				871-008-00	10 Stück
47-46 / 36-37	9	0,15 mm	9,90 mm				871-009-00	10 Stück
47-46 / 36-37	10	0,15 mm	10,02 mm				871-010-00	10 Stück
47-46 / 36-37	11	0,15 mm	10,14 mm				871-011-00	10 Stück
47-46 / 36-37	12	0,15 mm	10,25 mm				871-012-00	10 Stück
47-46 / 36-37	13	0,15 mm	10,38 mm				871-013-00	10 Stück
47-46 / 36-37	14	0,15 mm	10,50 mm				871-014-00	10 Stück
47-46 / 36-37	15	0,15 mm	10,62 mm				871-015-00	10 Stück
47-46 / 36-37	16	0,15 mm	10,74 mm				871-016-00	10 Stück
47-46 / 36-37	17	0,15 mm	10,86 mm				871-017-00	10 Stück
47-46 / 36-37	18	0,15 mm	10,98 mm				871-018-00	10 Stück
47-46 / 36-37	19	0,15 mm	11,10 mm				871-019-00	10 Stück
47-46 / 36-37	20	0,15 mm	11,22 mm				871-020-00	10 Stück
47-46 / 36-37	21	0,15 mm	11,34 mm				871-021-00	10 Stück
47-46 / 36-37	22	0,15 mm	11,46 mm				871-022-00	10 Stück
47-46 / 36-37	23	0,15 mm	11,58 mm				871-023-00	10 Stück
47-46 / 36-37	24	0,15 mm	11,70 mm				871-024-00	10 Stück
47-46 / 36-37	25	0,15 mm	11,82 mm				871-025-00	10 Stück
47-46 / 36-37	26	0,15 mm	11,94 mm				871-026-00	10 Stück
47-46 / 36-37	27	0,15 mm	12,06 mm				871-027-00	10 Stück
47-46 / 36-37	28	0,15 mm	12,18 mm				871-028-00	10 Stück
47-46 / 36-37	29	0,15 mm	12,30 mm				871-029-00	10 Stück
47-46 / 36-37	30	0,15 mm	12,42 mm				871-030-00	10 Stück
47-46 / 36-37	31	0,15 mm	12,54 mm				871-031-00	10 Stück
47-46 / 36-37	32	0,15 mm	12,66 mm				871-032-00	10 Stück

* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Standard Bänder / Einzelpackungen

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer Eckzahnbänder, rechts und links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißte		Menge	unbeschweißte	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
13 / 23	1	0,12 mm	7,10 mm				850-101-00	10 Stück
13 / 23	2	0,12 mm	7,20 mm				850-102-00	10 Stück
13 / 23	3	0,12 mm	7,30 mm				850-103-00	10 Stück
13 / 23	4	0,12 mm	7,50 mm				850-104-00	10 Stück
13 / 23	5	0,12 mm	7,60 mm				850-105-00	10 Stück
13 / 23	6	0,12 mm	7,80 mm				850-106-00	10 Stück
13 / 23	7	0,12 mm	7,90 mm				850-107-00	10 Stück
13 / 23	8	0,12 mm	8,00 mm				850-108-00	10 Stück
13 / 23	8,5	0,12 mm	8,10 mm				850-121-00	10 Stück
13 / 23	9	0,12 mm	8,20 mm				850-109-00	10 Stück
13 / 23	9,5	0,12 mm	8,30 mm				850-122-00	10 Stück
13 / 23	10	0,12 mm	8,40 mm				850-110-00	10 Stück
13 / 23	10,5	0,12 mm	8,50 mm				850-123-00	10 Stück
13 / 23	11	0,12 mm	8,60 mm				850-111-00	10 Stück
13 / 23	11,5	0,12 mm	8,70 mm				850-124-00	10 Stück
13 / 23	12	0,12 mm	8,80 mm				850-112-00	10 Stück
13 / 23	12,5	0,12 mm	8,90 mm				850-125-00	10 Stück
13 / 23	13	0,12 mm	9,10 mm				850-113-00	10 Stück
13 / 23	14	0,12 mm	9,20 mm				850-114-00	10 Stück
13 / 23	15	0,12 mm	9,40 mm				850-115-00	10 Stück
13 / 23	16	0,12 mm	9,50 mm				850-116-00	10 Stück
13 / 23	17	0,12 mm	9,80 mm				850-117-00	10 Stück
13 / 23	18	0,12 mm	9,90 mm				850-118-00	10 Stück
13 / 23	19	0,12 mm	10,00 mm				850-119-00	10 Stück
13 / 23	20	0,12 mm	10,10 mm				850-120-00	10 Stück

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Standard Bänder / Einzelpackungen

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer Eckzahnbänder, rechts und links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
43 / 33	1	0,12 mm	6,20 mm				851-101-00	10 Stück
43 / 33	2	0,12 mm	6,30 mm				851-102-00	10 Stück
43 / 33	3	0,12 mm	6,50 mm				851-103-00	10 Stück
43 / 33	4	0,12 mm	6,60 mm				851-104-00	10 Stück
43 / 33	5	0,12 mm	6,80 mm				851-105-00	10 Stück
43 / 33	5,5	0,12 mm	6,90 mm				851-117-00	10 Stück
43 / 33	6	0,12 mm	7,00 mm				851-106-00	10 Stück
43 / 33	6,5	0,12 mm	7,10 mm				851-118-00	10 Stück
43 / 33	7	0,12 mm	7,20 mm				851-107-00	10 Stück
43 / 33	7,5	0,12 mm	7,30 mm				851-119-00	10 Stück
43 / 33	8	0,12 mm	7,40 mm				851-108-00	10 Stück
43 / 33	8,5	0,12 mm	7,50 mm				851-120-00	10 Stück
43 / 33	9	0,12 mm	7,60 mm				851-109-00	10 Stück
43 / 33	9,5	0,12 mm	7,80 mm				851-121-00	10 Stück
43 / 33	10	0,12 mm	7,90 mm				851-110-00	10 Stück
43 / 33	11	0,12 mm	8,00 mm				851-111-00	10 Stück
43 / 33	12	0,12 mm	8,20 mm				851-112-00	10 Stück
43 / 33	13	0,12 mm	8,30 mm				851-113-00	10 Stück
43 / 33	14	0,12 mm	8,40 mm				851-114-00	10 Stück
43 / 33	15	0,12 mm	8,60 mm				851-115-00	10 Stück
43 / 33	16	0,12 mm	8,70 mm				851-116-00	10 Stück

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



DENTAURUM

ONLINE SHOP

shop.dentaaurum.com



Zubehör



Bandmaterial

auf Rolle

Weich, Oberseite hochglanzpoliert, Unterseite matt.

Stärke x Breite	Länge	REF	Menge
0,10 mm x 3,80 mm / 4 x 150	10 m	812-038-00	1 Stück
0,12 mm x 4,55 mm / 5 x 180	10 m	813-045-00	1 Stück
0,15 mm x 4,55 mm / 6 x 180	10 m	814-045-00	1 Stück



Matrizenband

auf Rolle

Werkstoff-Nr.: 1.4310

federhart

Stärke x Breite	Länge	REF	Menge
0,05 mm x 5,00 mm	1 m	831-601-00	1 Stück
0,05 mm x 5,00 mm	10 m	831-701-00	1 Stück
0,05 mm x 6,00 mm	1 m	831-606-00	1 Stück
0,05 mm x 7,00 mm	1 m	831-603-00	1 Stück
0,05 mm x 7,00 mm	10 m	831-703-00	1 Stück

Sortimentsschrank

Standardausführung Kunststoff

Für vorgeformte Bänder, 10 Laden (ohne Inhalt und Tiefzieheinsätze).

Maße (H x B x T)	REF	Menge
31 cm x 27,5 cm x 25 cm	890-414-00	1 Stück



Laden mit Deckel und Tiefzieheinsätzen

Für Sortimentsschrank (REF 890-414-00).

Beschriftung	REF	Menge
Standard OK Eckzahnblätter	890-420-00	1 Stück
Standard UK Eckzahnblätter	890-421-00	1 Stück
Standard OK Prämolarenblätter	890-422-00	1 Stück
Standard UK Prämolarenblätter	890-423-00	1 Stück
Standard OK Molarenblätter	890-424-00	1 Stück
Standard UK Molarenblätter	890-425-00	1 Stück
dentaform® OK 1. Molarenblätter, rechts	890-426-00	1 Stück
dentaform® OK 1. Molarenblätter, links	890-427-00	1 Stück
dentaform® OK 2. Molarenblätter, rechts	890-428-00	1 Stück
dentaform® OK 2. Molarenblätter, links	890-429-00	1 Stück
dentaform® UK 1. Molarenblätter, rechts	890-430-00	1 Stück
dentaform® UK 1. Molarenblätter, links	890-431-00	1 Stück
dentaform® UK 2. Molarenblätter, rechts	890-432-00	1 Stück
dentaform® UK 2. Molarenblätter, links	890-433-00	1 Stück
Klebertechnik	890-412-00	1 Stück
ohne Beschriftung	890-406-00	1 Stück



Zubehör



Stopper

Für Sortimentsschrank (REF 890-414-00).

REF 890-414-10

1 Stück



Kopfaufbaurahmen

Für die individuelle Zusammenstellung des Sortimentsschranks (REF 890-414-00).
Ohne Stopper (REF 890-414-10).

REF 890-402-00

1 Stück



Aufbaurahmen

Für die individuelle Erweiterung des Sortimentsschranks (REF 890-414-00).
Inkl. Stopper (REF 890-414-10).

REF 890-407-00

1 Stück



Fußplatte

Für die individuelle Zusammenstellung des Sortimentsschranks (REF 890-414-00).
Ohne Stopper (REF 890-414-10).


REF 890-403-00

1 Stück



Adhäsive.

Für perfekte Bonding-Ergebnisse.

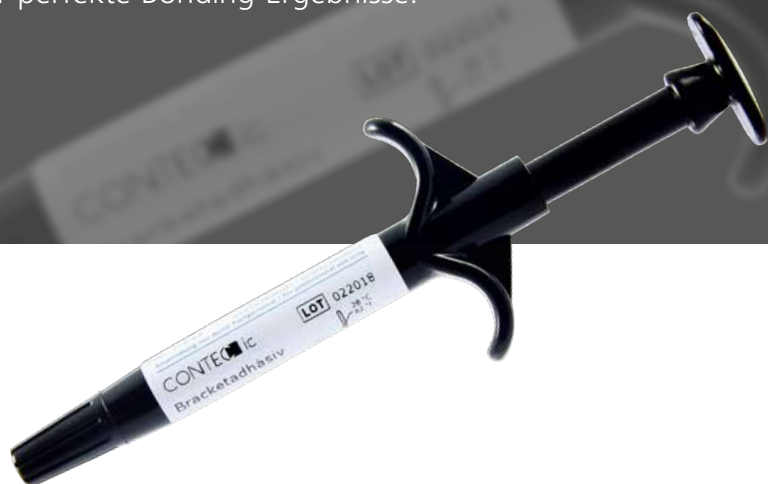

DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





Unsere Adhäsive für Ihre Praxis.

Mit dem Adhäsivprogramm bietet Dentauroom den Anwendern eine umfassende Lösung für alle Bonding-Arbeiten in der KFO-Praxis.

Die lichthärtenden Adhäsive CONTEC lc und CONTEC lcr wurden speziell für das Bonden von festsitzenden KFO-Produkten entwickelt – CONTEC lc zur Befestigung von Metall-, Keramik- und Kunststoffbrackets sowie Bukkalröhrchen, CONTEC lcr zur adhäsiven Befestigung von kieferorthopädischen Retainern. Beide Adhäsive zeichnen sich durch eine besonders hohe Haftkraft aus. Als Alternative zu dem lichthärtenden Adhäsiv CONTEC lc bietet sich das chemischhärtende Bracketadhäsiv CONTEC go an. CONTEC lc ist frei von BisGMA (Bisphenol A Glyceroldimethacrylat), TEGDMA (Triethylenglykoldimethacrylat) und HEMA (Hydroxyethylmethacrylat). CONTEC lcr und CONTEC go sind TEGDMA- und HEMA-frei. Dadurch eignen sich die Adhäsive auch für Patienten mit einer nachgewiesenen Allergie auf Methacrylate.

CONTEC

Beste Verträglichkeit, ohne TEGDMA und HEMA.



Anwendungsbereich Adhäsive.

	CONTEC lc	CONTEC lcr	CONTEC go
discovery® sl	+++	+	+++
discovery® sl 2.0	+++	+	+++
discovery®	+++	+	+++
discovery® smart	+++	+	+++
discovery® pearl	+++	+	+++
discovery® delight	+++	++	+
topic	+++	+	+++
equilibrium® 2 / ti	+++	+	+++
equilibrium® mini	+++	+	+++
Retainer	++	+++	—
Bukkalkörchen	++	+	++

+++ sehr gut geeignet

++ gut geeignet

+ bedingt geeignet

— nicht geeignet

Adhäsive und Zubehör



CONTEC Ic Set

Lichthärtend.

Zur Befestigung von Metallbrackets und Bukkalröhrchen, Keramik- und Kunststoffbrackets.

Für ca. 800 Brackets (40 Behandlungsfälle).

Zur Befestigung von Kunststoffbrackets unbedingt einen Kunststoff-Primer verwenden!

Inhalt:

- 3 x CONTEC Ic Bracketadhäsiv, je 3 g (REF 163-111-00)
- 1 x CONTEC Ic / Icr Primer, 5 ml (REF 163-113-10)
- 2 x CONTEC Ätzel, je 2,5 ml (REF 163-115-00)
- 6 x CONTEC Einmalkanüle für Ätzel
- 50 x CONTEC Einmalpinsel
- 1 x CONTEC Kombi-Instrument
- 1 x CONTEC Mischblock

CONTEC Ic ist bei Verwendung von Metall- und Keramikbrackets frei von BisGMA, TEGDMA und HEMA.

CONTEC Ic ist bei Verwendung von Kunststoffbrackets TEGDMA- und HEMA-frei.

REF 163-110-00

1 Set



CONTEC Ic Bracketadhäsiv

Lichthärtend.

Zur Befestigung von Metallbrackets und Bukkalröhrchen, Keramik- und Kunststoffbrackets.

Zur Befestigung von Kunststoffbrackets unbedingt einen Kunststoff-Primer verwenden!

CONTEC Ic ist bei Verwendung von Metall- und Keramikbrackets frei von BisGMA, TEGDMA und HEMA.

CONTEC Ic ist bei Verwendung von Kunststoffbrackets TEGDMA- und HEMA-frei.

REF 163-111-00

2 Stück (je 3 g)



CONTEC Icr Set

Lichthärtend.

Zur Befestigung von Retainern.

Für ca. 80 Retainer, versellt oder ca. 250 Retainer 3-3.

Inhalt:

- 2 x CONTEC Icr Retaineradhäsiv, je 3,4 g (REF 163-131-00)
- 1 x CONTEC Ic / Icr Primer, 5 ml (REF 163-113-10)
- 2 x CONTEC Ätzel, je 2,5 ml (REF 163-115-00)
- 6 x CONTEC Icr Einmalkanüle
- 6 x CONTEC Einmalkanüle für Ätzel
- 50 x CONTEC Einmalpinsel
- 1 x CONTEC Kombi-Instrument
- 1 x CONTEC Mischblock

CONTEC Icr ist frei von TEGDMA und HEMA.

REF 163-130-00

1 Set

CONTEC Icr Retaineradhäsiv

Lichthärtend.

Zur Befestigung von Retainern.

Ohne Einmalkanüle.

CONTEC Icr ist frei von TEGDMA und HEMA.

REF 163-131-00

3,4 g



CONTEC Ic / Icr Primer

Lichthärtend.

Für CONTEC Ic Bracketadhäsiv (REF 163-111-00)

und CONTEC Icr Retaineradhäsiv (REF 163-131-00).

REF 163-113-10

5 ml



CONTEC Ätzgel

35% Phosphorsäure

Zum Ätzen des Zahnschmelzes.

Geeignet für alle CONTEC Adhäsive.

Ohne Einmalkanüle.

REF 163-115-00

2 Stück (je 2,5 ml)



Adhäsive und Zubehör



CONTEC go Set

Chemischhärtend

Zur Befestigung von Metallbrackets und Bukkalröhrchen, Keramik- und Kunststoffbrackets.

Für ca. 600 Brackets (30 Behandlungsfälle).

Inhalt:

- 3 x CONTEC go Bracketadhäsiv, je 2,5 g (REF 163-121-00)
- 1 x CONTEC go Primer, 5 ml (REF 163-114-00)
- 2 x CONTEC Ätzel, je 2,5 ml (REF 163-115-00)
- 6 x CONTEC Einmalkanüle für Ätzel
- 50 x CONTEC Einmalpinsel
- 1 x CONTEC Kombi-Instrument
- 1 x CONTEC Mischblock

CONTEC go ist frei von TEGDMA und HEMA.

Nur mit REF 163-114-00 CONTEC go Primer und

REF 163-121-00 CONTEC go Bracketadhäsiv kompatibel.

Alle anderen Dentaureum Adhäsive sind nicht kompatibel und dürfen nicht kombiniert werden.

REF 163-107-00

1 Set

NEU



CONTEC go Bracketadhäsiv

Chemischhärtend

Zur Befestigung von Metallbrackets und Bukkalröhrchen, Keramik- und Kunststoffbrackets.

CONTEC go ist frei von TEGDMA und HEMA.

Nur mit REF 163-107-00 CONTEC go Set und REF 163-114-00

CONTEC go Primer kompatibel. Alle anderen Dentaureum

Adhäsive sind nicht kompatibel und dürfen nicht kombiniert

werden.

REF 163-121-00

2 Stück (je 2,5 g)

NEU



CONTEC go Primer

Chemischhärtend

Zur Befestigung von Metallbrackets und Bukkalröhrchen, Keramik- und Kunststoffbrackets

Nur mit REF 163-107-00 CONTEC go Set und REF 163-121-00

CONTEC go Bracketadhäsiv kompatibel. Alle anderen

Dentaureum Adhäsive sind nicht kompatibel und dürfen nicht

kombiniert werden.

REF 163-114-00

5 ml

NEU



CONTEC Ätzel

35% Phosphorsäure

Zum Ätzen des Zahnschmelzes.

Geeignet für alle CONTEC Adhäsive.

Ohne Einmalkanüle.

REF 163-115-00

2 Stück (je 2,5 ml)

Adhäsivreste-Entferner

Für die schonende Entfernung von Adhäsiv- und Zementresten ohne Beschädigung des Zahnschmelzes.

Wasserkühlung verwenden!

Empfohlene Drehzahl: 5.000 min⁻¹ - max. 10.000 min⁻¹

Form	REF	Menge
Kegel	123-700-00	10 Stück
Rad	123-701-00	10 Stück
Birne, groß	123-702-00	10 Stück
Birne, klein	123-703-00	10 Stück



Hartmetallfinierer

sterilisierbar

Für die Entfernung von Adhäsivresten.

Schaft ø: 2,35 mm

Empfohlene Drehzahl: 40.000 min⁻¹

Form	REF	Menge	REF	Menge
fein	123-604-00	1 Stück	123-604-30	10 Stück
grob	123-603-00	1 Stück	123-603-30	10 Stück



Lieferprogramm

Bögen / Stangendrähte / Rollendrähte	Seite	200
--------------------------------------	-------	-----

Festsitzende Technik

Bögen

Nickel-Titan	Seite	208
Nickel-Titan thermoaktiv	Seite	215
Edelstahl (Nickel-Chrom)	Seite	219
Kobalt-Chrom	Seite	221
Titan-Molybdän nickelfrei*	Seite	222

Stangendrähte	Seite	225
---------------	-------	-----

Rollendrähte	Seite	227
--------------	-------	-----

Retainer	Seite	228
----------	-------	-----

Zubehör	Seite	230
---------	-------	-----

Herausnehmbare Technik

Stangendrähte	Seite	235
---------------	-------	-----

Rollendrähte	Seite	237
--------------	-------	-----

Zubehör	Seite	239
---------	-------	-----


Palatinal-/Lingualbogensysteme	Seite	244
--------------------------------	-------	-----

* siehe KFO-Werkstoffliste




Drähte | Bögen Drahtelemente.

Höchste Maßgenauigkeit für
zuverlässige Ergebnisse.

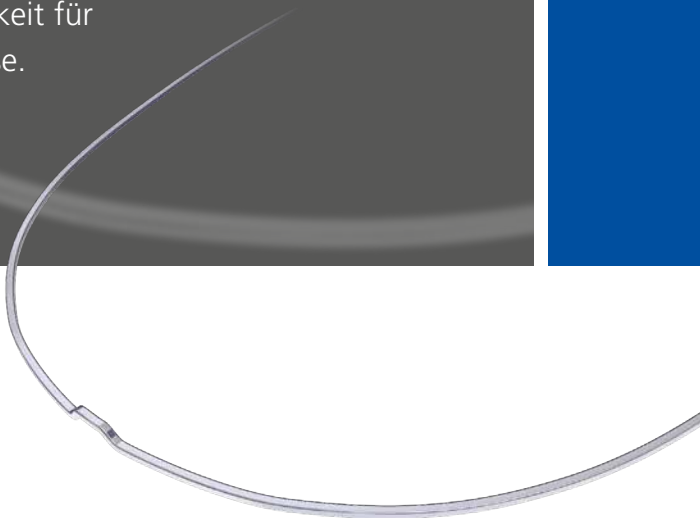

DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com



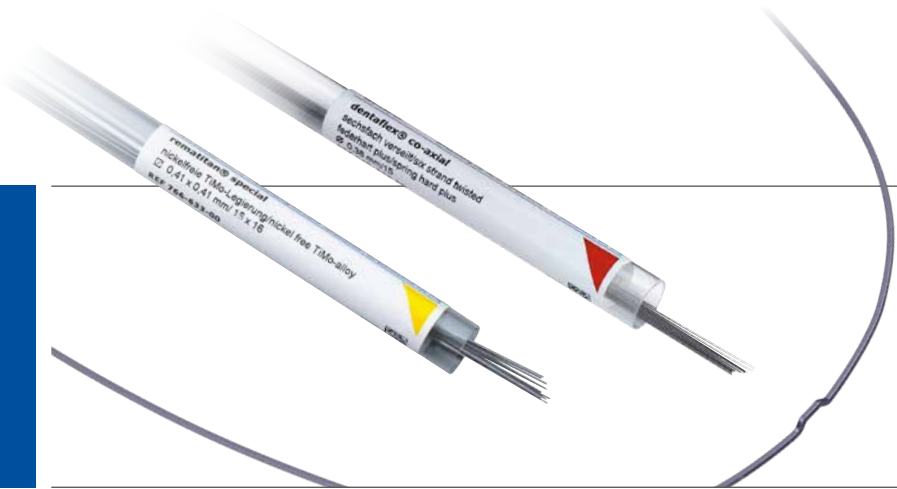

Bögen für jede Behandlung.

Die Auswahl eines Behandlungsbogens für die Therapie ist von entscheidender Bedeutung für den optimalen Verlauf der kieferorthopädischen Behandlung. Dentaureum bietet aus diesem Grund eine breite Auswahl hochwertiger Bögen aus verschiedensten Materialien zur Behandlung jeglicher Situation. Auch in der Tiefe des Programmes ist die Auswahl an Formen, Dimensionen und Festigkeitsklassen einzigartig.

Doch nicht nur für die festsitzende Behandlung, auch für das kieferorthopädische Fachlabor bietet Dentaureum eine Vielzahl an Produkten, vom Klammerdraht auf der Rolle, bis hin zu bereits vorgebogenen Drahtelementen zur direkten Verwendung in herausnehmbaren Platten.

Darüber hinaus wird das Draht- und Bogenprogramm durch besonders bioverträgliche Materialien, wie rematitan® SPECIAL ergänzt. Diese Materialien sind die perfekte Ergänzung zu den nickelfreien Brackets und ermöglichen in Kombination eine komplett nickelfreie Behandlung eines sensiblen Allergiepatrienten.

rematitan® LITE /
rematitan® LITE White
Nickel-Titan.

rematitan® LITE Spee®
Nickel-Titan.

Tensic® / Tensic® White
Thermoaktives Nickel-Titan.

Equire Thermo-Active
Thermoaktives Nickel-Titan.

dentaflex®
Edelstahl (verseilt und geflochten).

remanium® / Equire
Edelstahl (Nickel-Chrom).

remaloy®
Kobalt-Chrom.

Noninium®
Nickelfreier* Edelstahl draht.

rematitan® SPECIAL
Titan-Molybdän.

* Nickel $\leq$ 0,2 % ist verfahrenstechnisch bedingt

Anwendungshinweise für Dentaureum-Drähte und -Bögen.

Drahtmaterial	Anfangsphase			Zwischenphase				Endphase	
	Nivellierung	Torque	Rotation	Zahnbogen- ausgleich	Torque	Rotation	Retraktion mit Loops	Zahnbogen- ausgleich	Torque
Nickel-Titan									
rematitan® LITE rund	+		+						
rematitan® LITE vierkant		+		+	+	+		+	+
rematitan® sl rund	+		+						
Nickel-Titan (weiß beschichtet)									
rematitan® LITE White rund	+		+			+			
rematitan® LITE White vierkant		+			+	+			
Thermoaktives Nickel-Titan									
Tensic® rund	+		+			+			
Tensic® vierkant	+	+			+	+			
Equire Thermo-Active rund	+		+			+			
Equire Thermo-Active vierkant	+	+			+	+			
Thermoaktives Nickel-Titan (weiß beschichtet)									
Tensic® White rund	+		+			+			
Tensic® White vierkant	+	+			+	+			
Edelstahl (verseilt und geflochten)									
dentaflex® 3-fach rund	+								
dentaflex® 6-fach rund	+								
dentaflex® 3-fach vierkant		+							
dentaflex® 8-fach vierkant	+	+							
Edelstahl									
remanium® rund				+					
remanium® vierkant				+	+		+	+	+
Equire rund				+					
Equire vierkant				+	+		+	+	+
Kobalt-Chrom									
remaloy® vierkant					+		+		
Nickelfreies Titan-Molybdän									
rematitan® SPECIAL rund				+					
rematitan® SPECIAL vierkant		+			+		+		+

Festigkeitsklassen.

Festigkeitsklasse	N/mm ²	rematitan® LITE	Tensic®	Equire	dentaflex®	remanium®	remaloy®	Noninium®	rematitan® SPECIAL
mittel plus 0	1.100 – < 1.400								+
hart 1	1.400 – < 1.600					+	+	+	
hart plus 2	1.600 – < 1.800				+		+		
federhart 3	1.800 – < 2.000					+	+	+	
federhart plus 4	2.000 – < 2.300			+		+			
extrafederhart 5	2.300 – < 2.500					+			
superfederhart 6	2.500 – < 2.700				+				
superelastisch 7	–	+	+	+					





Bogenformen im Vergleich.

Die Abbildungen dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.



- Nur in rematitan® LITE erhältlich.
- Ober- und Unterkiefer gleiche Form.

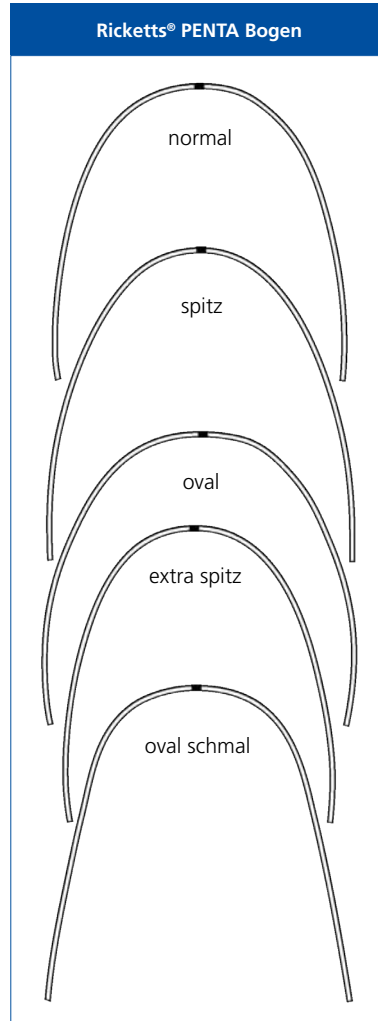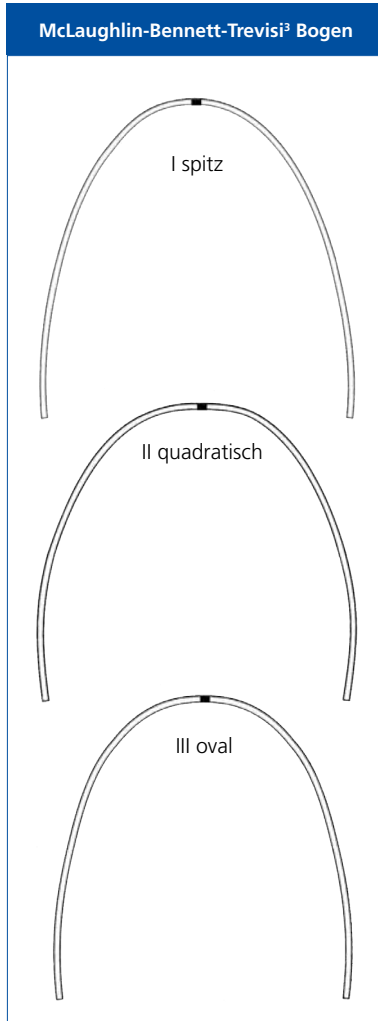

¹ Damon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Ormco BV.

² Nur in rematitan® LITE erhältlich.

³ The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Kurzübersicht des Lieferprogramms.

rematitan® LITE – Nickel-Titan.

rematitan® LITE Bögen bestehen aus einer superelastischen Nickel-Titan-Legierung. Die Superelastizität sorgt für eine Reversibilität und eine gleichmäßig geringe Kraftübertragung. Die hohe Elastizität und die geringe Rückstellkraft machen die rematitan® LITE Bögen ideal für den Einsatz in der Nivellierungsphase.

Verfügbar in den Festigkeitsklassen 0 1 2 3 4 5 6 7

Tensic® – thermoaktives Nickel-Titan.

Tensic® Bögen sind superelastisch und im martensitischen Zustand bei Raumtemperatur sehr gut biegsam. Die nahe der Körpertemperatur eingestellte Umwandlungstemperatur ist Ursache für die Übertragung konstanter Kräfte, wodurch Wurzelresorptionen in der Nivellierungsphase vermieden werden können.

Verfügbar in den Festigkeitsklassen 0 1 2 3 4 5 6 7

Equire – thermoaktives Nickel-Titan (American Style ≙ Damon® Style').

Equire Nickel-Titan-Bögen sind superelastisch. Sie sind bis auf die Bogenform identisch mit den Tensic® Bögen und gut geeignet für den Einsatz während der ganzen Behandlung, auch bei häufigem Bogenwechsel. Equire Nickel-Titan-Bögen sind im martensitischen Zustand bei Raumtemperatur gut formbar und zeichnen sich durch eine glatte, friktionsarme Oberfläche aus. Die Bogenform entspricht dem Ideal amerikanischer Kieferorthopäden.

Verfügbar in den Festigkeitsklassen 0 1 2 3 4 5 6 7

dentaflex® – verseilter und geflochtener Edelstahl.

dentaflex® Drähte und Bögen gibt es 3-fach verseilt. Sie zeichnen sich durch geringfügig stärkere Kräfte im Vergleich zur ebenfalls lieferbaren 6-fach co-axial verseilten Version aus und sind eine preiswerte und bewährte Alternative zu NiTi-Drähten. Darüber hinaus gibt es noch dentaflex® 8-fach geflochtene Bögen. Diese Spezialbögen sind besonders für das Torquen im Anfangsstadium geeignet.

Verfügbar in den Festigkeitsklassen 0 1 2 3 4 5 6 7

remanium® – Edelstahl.

remanium® Drähte und Bögen sind die beste Lösung, wenn größere Kräfte erforderlich sind oder wenn am Behandlungsende präzise Torquekontrolle benötigt wird. Die breite Palette der lieferbaren Festigkeitsklassen ermöglicht den Einsatz während der ganzen Behandlung, auch bei häufigem Bogenwechsel. remanium® Drähte und Bögen sind gut form- und schweißbar und zeichnen sich durch eine glatte, friktionsarme Oberfläche aus.

Verfügbar in den Festigkeitsklassen 0 1 2 3 4 5 6 7

Equire – Edelstahl (American Style $\triangle$ Damon® Style¹).

Equire Edelstahl-Bögen sind die beste Lösung, wenn Kräfte, ähnlich wie bei remanium® Bögen, benötigt werden. Sie sind gut geeignet für den Einsatz während der ganzen Behandlung, auch bei häufigem Bogenwechsel. Equire Bögen sind gut form- und schweißbar und zeichnen sich durch eine glatte, friktionsarme Oberfläche aus. Die Bogenform entspricht dem Ideal amerikanischer Kieferorthopäden.

Verfügbar in den Festigkeitsklassen 0 1 2 3 4 5 6 7

remaloy® – Kobalt-Chrom.

Die remaloy® Drähte und Bögen aus einer Kobalt-Chrom-Legierung sind vergütbar und besonders bruchstabil. Das Biegen von Schlaufen mit den Fingern oder der Zange wird dadurch sehr erleichtert. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch glatte, friktionsarme Oberflächen aus.

Verfügbar in den Festigkeitsklassen 0 1 2 3 4 5 6 7

Noninium® – nickelfreier² Edelstahldraht.

Noninium® Drähte sind besonders für nickelsensibilisierte Patienten geeignet, da sie kein Nickel² enthalten. Sie sind sehr bruchfest und zeichnen sich durch ausgezeichnete mechanische Eigenschaften aus.

Verfügbar in den Festigkeitsklassen 0 1 2 3 4 5 6 7

rematitan® SPECIAL – Titan-Molybdän.

Die rematitan® SPECIAL Drähte und Bögen aus einer Titan-Molybdän-Legierung sind nickelfrei und deshalb besonders für nickelsensibilisierte Patienten geeignet. Der gegenüber Edelstahldrähten deutlich niedrigere Elastizitätsmodul sorgt für geringere Kräfte bei hoher Elastizität und ausreichend guter Biegebarkeit.

Verfügbar in den Festigkeitsklassen 0 1 2 3 4 5 6 7

¹ Damon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FirmaOrmco BV

² Nickel $\leq 0,2\%$ ist verfahrenstechnisch bedingt

Lieferprogramm Bögen

Nickel-Titan, superelastisch

ø	REF (OK)	REF (UK)	Menge
---	----------	----------	-------

rematitan® LITE Idealbogen, rund

12	766-058-00	766-059-00	10 Stück
14	766-080-00	766-081-00	10 Stück
14	766-080-01	766-081-01	50 Stück
16	766-082-00	766-083-00	10 Stück
16	766-082-01	766-083-01	50 Stück
18	766-084-00	766-085-00	10 Stück
18	766-084-01	766-085-01	50 Stück
20	768-100-00	768-101-00	10 Stück
20	768-100-01	768-101-01	50 Stück

rematitan® LITE Idealbogen, vierkant

16 x 16	766-088-00	766-089-00	10 Stück
16 x 16	766-088-01	766-089-01	50 Stück
16 x 22	766-090-00	766-091-00	10 Stück
16 x 22	766-090-01	766-091-01	50 Stück
17 x 25	766-092-00	766-093-00	10 Stück
18 x 18	768-102-00	768-103-00	10 Stück
18 x 18	768-102-01	768-103-01	50 Stück
18 x 25	768-104-00	768-105-00	10 Stück
18 x 25	768-104-01	768-105-01	50 Stück
19 x 25	768-106-00	768-107-00	10 Stück
19 x 25	768-106-01	768-107-01	50 Stück
20 x 20	768-108-00	768-109-00	10 Stück
20 x 20	768-108-01	768-109-01	50 Stück
21 x 25	768-110-00	768-111-00	10 Stück
21 x 25	768-110-01	768-111-01	50 Stück

rematitan® LITE Idealbogen, rund, mit Dimple

12	766-060-00	766-061-00	10 Stück
14	766-062-00	766-063-00	10 Stück
16	766-064-00	766-065-00	10 Stück
18	766-066-00	766-067-00	10 Stück
20	768-112-00	768-113-00	10 Stück

rematitan® LITE Idealbogen, vierkant, mit Dimple

16 x 16	766-068-00	766-069-00	10 Stück
16 x 22	766-070-00	766-071-00	10 Stück
17 x 25	766-072-00	766-073-00	10 Stück
18 x 18	766-074-00	766-075-00	10 Stück
18 x 25	766-076-00	766-077-00	10 Stück
19 x 25	766-078-00	766-079-00	10 Stück
20 x 20	768-114-00	768-115-00	10 Stück
21 x 25	766-086-00	766-087-00	10 Stück

rematitan® LITE Idealbogen, rund, schmale Form, mit Dimple

12	766-160-00	766-161-00	10 Stück
14	766-162-00	766-163-00	10 Stück
16	766-164-00	766-165-00	10 Stück
18	766-166-00	766-167-00	10 Stück
20	768-116-00	768-117-00	10 Stück

rematitan® LITE Idealbogen, vierkant, schmale Form, mit Dimple

16 x 16	766-168-00	766-169-00	10 Stück
16 x 22	766-170-00	766-171-00	10 Stück
17 x 25	766-172-00	766-173-00	10 Stück
18 x 18	766-174-00	766-175-00	10 Stück
18 x 25	766-176-00	766-177-00	10 Stück
19 x 25	766-178-00	766-179-00	10 Stück
20 x 20	768-118-00	768-119-00	10 Stück
21 x 25	768-120-00	768-121-00	10 Stück

rematitan® LITE Spee® Umkehrbogen, rund, mit Dimple

12	766-014-00	766-015-00	10 Stück
14	766-018-00	766-019-00	10 Stück
16	766-050-00	766-051-00	10 Stück
18	766-052-00	766-053-00	10 Stück

rematitan® LITE Spee® Umkehrbogen, vierkant, mit Dimple

16 x 22	766-054-00	766-055-00	10 Stück
17 x 25	766-056-00	766-057-00	10 Stück
18 x 18	766-032-00	766-033-00	10 Stück
18 x 25	766-034-00	766-037-00	10 Stück
19 x 25	766-036-00	766-039-00	10 Stück

Nickel-Titan, superelastisch

☒	REF	Menge
rematitan® LITE Bogen, Bogenform I, spitz, vierkant		
16 x 16	766-180-00	10 Stück
16 x 22	766-181-00	10 Stück
17 x 25	766-182-00	10 Stück
rematitan® LITE Bogen, Bogenform II, quadratisch, vierkant		
16 x 16	766-183-00	10 Stück
16 x 22	766-184-00	10 Stück
17 x 25	766-185-00	10 Stück
rematitan® LITE Bogen, Bogenform III, oval, vierkant		
16 x 16	766-186-00	10 Stück
16 x 22	766-187-00	10 Stück
17 x 25	766-188-00	10 Stück
rematitan® LITE Ricketts® PENTA Bogen, normal, vierkant		
16 x 16	766-250-00	10 Stück
16 x 22	766-251-00	10 Stück
17 x 25	766-252-00	10 Stück
rematitan® LITE Ricketts® PENTA Bogen, spitz, vierkant		
16 x 16	766-253-00	10 Stück
16 x 22	766-254-00	10 Stück
17 x 25	766-255-00	10 Stück
rematitan® LITE Ricketts® PENTA Bogen, oval, vierkant		
16 x 16	766-256-00	10 Stück
16 x 22	766-257-00	10 Stück
17 x 25	766-258-00	10 Stück
rematitan® LITE Ricketts® PENTA Bogen, extra spitz, vierkant		
16 x 16	766-259-00	10 Stück
16 x 22	766-260-00	10 Stück
17 x 25	766-261-00	10 Stück
rematitan® LITE Ricketts® PENTA Bogen, oval schmal, vierkant		
16 x 16	766-262-00	10 Stück
16 x 22	766-263-00	10 Stück
17 x 25	766-264-00	10 Stück

Thermoaktives Nickel-Titan, superelastisch

ø	REF (OK)	REF (UK)	Menge
Tensic® Idealbogen, rund			
12	766-700-00	766-701-00	10 Stück
14	766-702-00	766-703-00	10 Stück
16	766-704-00	766-705-00	10 Stück
18	766-706-00	766-707-00	10 Stück
Tensic® Idealbogen, vierkant			
16 x 16	766-710-00	766-711-00	10 Stück
16 x 22	766-712-00	766-713-00	10 Stück
17 x 25	766-714-00	766-715-00	10 Stück
18 x 25	766-716-00	766-717-00	10 Stück
19 x 25	766-718-00	766-719-00	10 Stück
21 x 25	766-720-00	766-721-00	10 Stück
Equire Thermo-Active, vorgeformter Idealbogen, rund, Bogenform: American Style ± Damon Style*			
12	766-800-00	766-801-00	10 Stück
14	766-802-00	766-803-00	10 Stück
16	766-804-00	766-805-00	10 Stück
18	766-806-00	766-807-00	10 Stück
Equire Thermo-Active, vorgeformter Idealbogen, vierkant, Bogenform: American Style ± Damon Style*			
16 x 16	766-808-00	766-809-00	10 Stück
16 x 22	766-810-00	766-811-00	10 Stück
17 x 25	766-812-00	766-813-00	10 Stück
18 x 25	766-814-00	766-815-00	10 Stück
19 x 25	766-816-00	766-817-00	10 Stück
21 x 25	766-818-00	766-819-00	10 Stück

*Damon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Ormco BV

Lieferprogramm Bögen

Edelstahl (verseilt und geflochten), super federhart

ø	REF (OK)	REF (UK)	Menge
dentaflex® Idealbogen, rund, 3-fach verseilt			
15	766-120-00	766-121-00	10 Stück
15	766-120-01	766-121-01	50 Stück
18	766-122-00	766-123-00	10 Stück
18	766-122-01	766-123-01	50 Stück
20	766-124-00	766-125-00	10 Stück

dentaflex® Idealbogen, vierkant, 3-fach verseilt			
16 x 16	766-130-00	766-131-00	10 Stück
16 x 22	766-132-00	766-133-00	10 Stück
16 x 22	766-132-01	766-133-01	50 Stück

dentaflex® Idealbogen, vierkant, 8-fach geflochten			
16 x 16	766-100-00	766-200-00	10 Stück
16 x 16	766-100-01	766-200-01	50 Stück
16 x 22	766-101-00	766-201-00	10 Stück
16 x 22	766-101-01	766-201-01	50 Stück
17 x 25	766-103-00	766-203-00	10 Stück
18 x 25	766-104-00	766-204-00	10 Stück
19 x 25	766-105-00	766-205-00	10 Stück

Edelstahl (verseilt und geflochten), hart plus

ø	REF (OK)	REF (UK)	Menge
dentaflex® Idealbogen, rund, 6-fach co-axial			
15	766-300-00	766-400-00	10 Stück
15	766-300-01	766-400-01	50 Stück
18	766-301-00	766-401-00	10 Stück
18	766-301-01	766-401-01	50 Stück

Edelstahl (Nickel-Chrom), federhart plus

ø	REF (OK)	REF (UK)	Menge
remanium® Idealbogen, rund			
14	765-200-00	765-300-00	10 Stück
16	765-201-00	765-301-00	10 Stück
16	765-201-01	765-301-01	50 Stück
18	765-202-00	765-302-00	10 Stück
18	765-202-01	765-302-01	50 Stück
20	765-203-00	765-303-00	10 Stück

remanium® Idealbogen, vierkant			
16 x 16	767-100-00	767-200-00	10 Stück
16 x 16	767-100-01	767-200-01	50 Stück
16 x 22	767-101-00	767-201-00	10 Stück
16 x 22	767-101-01	767-201-01	50 Stück
17 x 22	767-102-00	767-202-00	10 Stück
17 x 25	767-103-00	767-203-00	10 Stück
17 x 25	767-103-01	767-203-01	50 Stück
18 x 25	767-104-00	767-204-00	10 Stück
19 x 25	767-105-00	767-205-00	10 Stück
19 x 25	767-105-01	767-205-01	50 Stück
21,5 x 25	767-106-00	767-206-00	10 Stück
21,5 x 28	767-107-00	767-207-00	10 Stück

Equire vorgeformter Idealbogen, rund, Bogenform: American Style ± Damon Style*			
12	769-000-00	769-001-00	10 Stück
14	769-002-00	769-003-00	10 Stück
16	769-004-00	769-005-00	10 Stück
18	769-006-00	769-007-00	10 Stück

Equire vorgeformter Idealbogen, vierkant, Bogenform: American Style ± Damon Style*			
16 x 16	769-008-00	769-009-00	10 Stück
16 x 22	769-010-00	769-011-00	10 Stück
17 x 25	769-012-00	769-013-00	10 Stück
18 x 25	769-014-00	769-015-00	10 Stück
19 x 25	769-016-00	769-017-00	10 Stück
21 x 25	769-018-00	769-019-00	10 Stück

*Damon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Ormco BV

Kobalt-Chrom, hart plus

□	REF (OK)	REF (UK)	Menge
remaloy® Idealbogen, vierkant			
16 x 16	769-100-00	769-200-00	10 Stück
16 x 22	769-101-00	769-201-00	10 Stück

Nickelfreies Titan-Molybdän, mittel plus

ø	REF (OK)	REF (UK)	Menge
rematitan® SPECIAL Idealbogen, rund			
16	766-605-00	766-606-00	10 Stück
18	766-607-00	766-608-00	10 Stück

rematitan® SPECIAL Idealbogen, vierkant			
16 x 16	766-631-00	766-632-00	10 Stück
16 x 22	766-609-00	766-610-00	10 Stück
17 x 25	766-611-00	766-612-00	10 Stück
18 x 18	766-613-00	766-614-00	10 Stück
18 x 25	766-615-00	766-616-00	10 Stück
19 x 25	766-617-00	766-618-00	10 Stück
21 x 25	766-619-00	766-620-00	10 Stück

Nickel-Titan (weiß beschichtet), superelastisch

ø	REF (OK)	REF (UK)	Menge
rematitan® LITE White Idealbogen, rund			
16	768-014-00	768-015-00	3 Stück
18	768-016-00	768-017-00	3 Stück

rematitan® LITE White Idealbogen, vierkant			
16 x 16	768-018-00	768-019-00	3 Stück
16 x 22	768-020-00	768-021-00	3 Stück
17 x 25	768-022-00	768-023-00	3 Stück

Thermoaktives Nickel-Titan (weiß beschichtet), superelastisch

ø	REF (OK)	REF (UK)	Menge
Tensic® White Idealbogen, rund			
16	768-026-00	768-027-00	3 Stück
18	768-028-00	768-029-00	3 Stück

Tensic® White Idealbogen, vierkant			
16 x 16	768-030-00	768-031-00	3 Stück
16 x 22	768-032-00	768-033-00	3 Stück
17 x 25	768-034-00	768-035-00	3 Stück
18 x 25	768-038-00	768-039-00	3 Stück
19 x 25	768-040-00	768-041-00	3 Stück

Lieferprogramm Stangendrahte

Edelstahl (verseilt und geflochten)

ø	REF	Menge
---	-----	-------

dentaflex® Stangendraht, rund, 3-fach verseilt, super federhart

0,38 mm / 15	545-738-00	10 Stück
0,45 mm / 18	545-745-00	10 Stück
0,50 mm / 20	545-750-00	10 Stück

dentaflex® Stangendraht, rund, 6-fach co-axial, hart plus

0,38 mm / 15	545-638-00	10 Stück
0,45 mm / 18	545-645-00	10 Stück

rematain® flat Retainerdraht, 6-fach geflochten

10 x 29	530-000-00	10 Stück
---------	------------	----------

Edelstahl (Nickel-Chrom)

ø	REF	Menge
---	-----	-------

remanium® Stangendraht, rund, extra federhart

0,35 mm / 14	535-035-00	25 Stück
0,40 mm / 16	535-040-00	25 Stück
0,45 mm / 18	535-045-00	25 Stück

remanium® Stangendraht, vierkant, federhart

16 x 16	537-340-00	10 Stück
16 x 22	537-310-00	10 Stück
17 x 22	537-311-00	10 Stück
17 x 25	537-313-00	10 Stück
18 x 25	537-314-00	10 Stück
19 x 19	535-048-00	25 Stück
20 x 20	535-051-00	25 Stück
21,5 x 28	537-324-00	10 Stück

remanium® Stangendraht, vierkant, federhart plus

16 x 16	537-440-00	10 Stück
16 x 22	537-410-00	10 Stück
17 x 22	537-411-00	10 Stück
17 x 25	537-413-00	10 Stück
18 x 25	537-414-00	10 Stück
21,5 x 25	537-423-00	10 Stück
21,5 x 28	537-424-00	10 Stück

remanium® Stangendraht, rund, federhart

0,40 mm / 16	525-040-00	25 Stück
0,50 mm / 20	535-002-00	25 Stück
0,60 mm / 23	535-003-00	25 Stück
0,70 mm / 28	527-070-00	25 Stück
0,70 mm / 28	527-005-00	900 Stück
0,70 mm / 28	527-004-00	1.100 Stück
0,75 mm / 30	535-005-00	25 Stück
0,80 mm / 31	527-080-00	25 Stück
0,80 mm / 31	527-006-00	875 Stück
0,90 mm / 36	527-090-00	25 Stück
1,00 mm / 39	527-100-00	25 Stück
1,15 mm / 45	535-009-00	25 Stück

Kobalt-Chrom

☑	REF	Menge
---	-----	-------

remaloy® Stangendraht, vierkant, hart plus

16 x 16	537-540-00	10 Stück
16 x 22	537-510-00	10 Stück

remaloy® Stangendraht, rund, hart

0,70 mm / 28	528-070-00	10 Stück
0,80 mm / 31	528-080-00	10 Stück
0,90 mm / 36	528-090-00	10 Stück
1,00 mm / 39	528-100-00	10 Stück
1,10 mm / 43	528-110-00	10 Stück
1,20 mm / 47	528-120-00	10 Stück
1,30 mm / 51	528-130-00	10 Stück
1,50 mm / 59	528-150-00	10 Stück

remaloy® Stangendraht, halbrund, federhart

1,50 mm x 0,75 mm / 59 x 30	528-155-00	10 Stück
1,75 mm x 0,90 mm / 69 x 36	528-158-00	10 Stück

remaloy® Stangendraht, vierkant gerundet, hart plus

1,92 mm x 0,90 mm / 76 x 36	528-159-00	10 Stück
-----------------------------	------------	----------

Nickelfreies Titan-Molybdän

ø	REF	Menge
---	-----	-------

rematitan® SPECIAL Stangendraht, rund, mittel plus

0,40 mm / 16	766-600-00	10 Stück
0,45 mm / 18	766-601-00	10 Stück
0,80 mm / 32	766-629-00	10 Stück

rematitan® SPECIAL Stangendraht, vierkant, mittel plus

16 x 16	766-633-00	10 Stück
16 x 22	766-602-00	10 Stück
17 x 25	766-603-00	10 Stück
19 x 25	766-604-00	10 Stück

Titan

ø	REF	Menge
---	-----	-------

Titan-Retainerdraht, 3-fach verseilt, Ti1, rund

0,44 mm / 17	528-001-01	10 Stück
0,50 mm / 20	528-000-01	10 Stück

Titan-Retainerdraht, 3-fach verseilt, Ti5, rund

0,44 mm / 17	528-001-00	10 Stück
0,50 mm / 20	528-000-00	10 Stück

Gold

ø	REF	Menge
---	-----	-------

Gold-Retainerdraht, 3-fach verseilt, rund

0,50 mm / 20	529-000-00	1 Stück
--------------	-------------------	---------

Maßangaben

Inch		mm
10	rund	0,25 mm
12	rund	0,30 mm
14	rund	0,35 mm
15	rund	0,38 mm
16	rund	0,40 mm
18	rund	0,45 mm
20	rund	0,50 mm
23	rund	0,60 mm
28	rund	0,70 mm
32	rund	0,80 mm
36	rund	0,90 mm
39	rund	1,00 mm
43	rund	1,10 mm
47	rund	1,20 mm
51	rund	1,30 mm
59	rund	1,50 mm

Inch		mm
16 x 16	vierkant	0,41 mm x 0,41 mm
16 x 22	vierkant	0,41 mm x 0,56 mm
17 x 22	vierkant	0,43 mm x 0,56 mm
17 x 25	vierkant	0,43 mm x 0,64 mm
18 x 25	vierkant	0,46 mm x 0,64 mm
19 x 25	vierkant	0,48 mm x 0,64 mm
21 x 25	vierkant	0,53 mm x 0,64 mm
21,5 x 25	vierkant	0,55 mm x 0,64 mm
21,5 x 28	vierkant	0,55 mm x 0,70 mm

Lieferprogramm Rollendrähte

Nickel-Titan

ø	REF	Menge
rematitan® LITE Rollendraht, rund, superelastisch		
0,30 mm / 12	766-094-00	4,5 m
0,35 mm / 14	766-095-00	4,5 m
0,40 mm / 16	766-196-00	4,5 m

Edelstahl (verseilt und geflochten)

ø	REF	Menge
dentaflex® Rollendraht, rund, 3-fach verseilt, super federhart		
0,38 mm / 15	545-738-01	4 m
0,45 mm / 18	545-745-01	4 m

dentaflex® Rollendraht, rund, 6-fach co-axial, super federhart		
0,38 mm / 15	545-638-01	4 m
0,45 mm / 18	545-645-01	4 m

Edelstahl (Nickel-Chrom)

ø	REF	Menge
remanium® Rollendraht, rund, extra federhart		
0,35 mm / 14	530-035-00	7,5 m
0,40 mm / 16	530-040-00	7,5 m
0,45 mm / 18	530-045-00	7,5 m

remanium® Ligaturendraht, rund, weich		
0,25 mm / 10	500-025-00	80 m
0,25 mm / 10	501-025-00	1.160 m
0,30 mm / 12	500-030-00	60 m
0,40 mm / 16	500-040-00	30 m
0,50 mm / 20	503-050-00	50 m
0,50 mm / 20	501-050-00	320 m

remanium® Laborrolle, rund, hart		
0,70 mm / 28	513-070-00	30 m
0,80 mm / 31	513-080-00	20 m
0,90 mm / 36	513-090-00	10 m
1,00 mm / 39	513-100-00	10 m
1,20 mm / 47	513-120-00	10 m
1,50 mm / 59	513-150-00	10 m

remanium® Klinikrolle, rund, hart		
0,70 mm / 28	514-070-00	165 m
0,80 mm / 31	514-080-00	125 m
0,90 mm / 36	514-090-00	100 m
1,00 mm / 39	514-100-00	80 m

remanium® Laborrolle, rund, federhart

0,40 mm / 16	521-040-00	30 m
0,50 mm / 20	523-050-00	50 m
0,60 mm / 23	523-060-00	40 m
0,70 mm / 28	523-070-00	30 m
0,80 mm / 31	523-080-00	20 m
0,90 mm / 36	523-090-00	10 m
1,00 mm / 39	523-100-00	10 m
1,10 mm / 43	523-110-00	10 m
1,20 mm / 47	523-120-00	10 m
1,50 mm / 59	523-150-00	10 m

remanium® Klinikrolle, rund, federhart

0,60 mm / 23	524-060-00	225 m
0,70 mm / 28	524-070-00	165 m
0,80 mm / 31	524-080-00	125 m
0,90 mm / 36	524-090-00	100 m
1,00 mm / 39	524-100-00	80 m
1,10 mm / 43	524-110-00	70 m

remanium® Rollendraht, halbrund, hart

1,30 mm x 0,65 mm / 51 x 26	308-513-00	10 m
1,50 mm x 0,75 mm / 59 x 30	308-515-00	10 m
1,75 mm x 0,90 mm / 69 x 36	308-518-00	10 m
2,00 mm x 1,00 mm / 79 x 40	308-520-00	10 m

remanium® Klinikrolle, halbrund, hart

1,30 mm x 0,65 mm / 51 x 26	308-713-00	90 m
1,50 mm x 0,75 mm / 59 x 30	308-715-00	65 m
1,75 mm x 0,90 mm / 69 x 36	308-718-00	50 m

remanium® Rollendraht, oval, hart

2,40 mm x 1,40 mm / 95 x 55	385-624-00	10 m
3,00 mm x 1,50 mm / 118 x 59	385-630-00	10 m

Nickelfreier* Edelstahl

ø	REF	Menge
---	-----	-------

Noninium® Rollendraht, rund, hart

0,70 mm / 28	520-070-10	30 m
0,80 mm / 31	520-080-10	20 m
0,90 mm / 36	520-090-10	10 m
1,20 mm / 47	520-120-10	10 m

Noninium® Rollendraht, rund, federhart

0,60 mm / 23	520-062-10	40 m
0,70 mm / 28	520-072-10	30 m
0,80 mm / 31	520-082-10	20 m
0,90 mm / 36	520-092-10	10 m

* Nickel ≤ 0,05 % ist verfahrenstechnisch bedingt


Titan

ø	REF	Menge
---	-----	-------

Titan-Retainerdraht, 3-fach verseilt, Ti1, rund

0,50 mm / 20	528-000-02	2 m
--------------	-------------------	-----



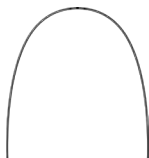

rematitan® LITE Idealbogen, rund


Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange


Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,30 mm / 12			766-058-00	10 Stück
0,35 mm / 14			766-080-00	10 Stück
0,35 mm / 14			766-080-01	50 Stück
0,40 mm / 16			766-082-00	10 Stück
0,40 mm / 16			766-082-01	50 Stück
0,45 mm / 18			766-084-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-084-01	50 Stück
0,50 mm / 20			768-100-00	10 Stück
0,50 mm / 20			768-100-01	50 Stück

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt

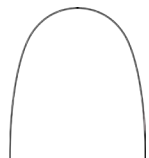

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,30 mm / 12			766-059-00	10 Stück
0,35 mm / 14			766-081-00	10 Stück
0,35 mm / 14			766-081-01	50 Stück
0,40 mm / 16			766-083-00	10 Stück
0,40 mm / 16			766-083-01	50 Stück
0,45 mm / 18			766-085-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-085-01	50 Stück
0,50 mm / 20			768-101-00	10 Stück
0,50 mm / 20			768-101-01	50 Stück

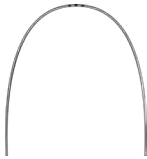

rematitan® LITE Idealbogen, vierkant

Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange


Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

↗	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-088-00	10 Stück
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-088-01	50 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-090-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-090-01	50 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-092-00	10 Stück
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	768-102-00	10 Stück
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	768-102-01	50 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	768-104-00	10 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	768-104-01	50 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	768-106-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	768-106-01	50 Stück
0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	768-108-00	10 Stück
0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	768-108-01	50 Stück
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	768-110-00	10 Stück
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	768-110-01	50 Stück

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt




↗	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-089-00	10 Stück
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-089-01	50 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-091-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-091-01	50 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-093-00	10 Stück
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	768-103-00	10 Stück
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	768-103-01	50 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	768-105-00	10 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	768-105-01	50 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	768-107-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	768-107-01	50 Stück
0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	768-109-00	10 Stück
0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	768-109-01	50 Stück
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	768-111-00	10 Stück
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	768-111-01	50 Stück

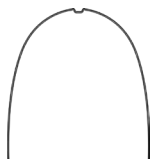

rematitan® LITE Idealbogen, rund

Festigkeitsklasse: superelastisch
Farbcodierung Verpackung: orange
Mittenmarkierung: mit Dimple

Ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,30 mm / 12			766-060-00	10 Stück
0,35 mm / 14			766-062-00	10 Stück
0,40 mm / 16			766-064-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-066-00	10 Stück
0,50 mm / 20			768-112-00	10 Stück

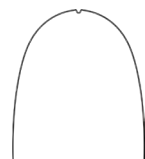

Ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,30 mm / 12			766-061-00	10 Stück
0,35 mm / 14			766-063-00	10 Stück
0,40 mm / 16			766-065-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-067-00	10 Stück
0,50 mm / 20			768-113-00	10 Stück




rematitan® LITE Idealbogen, vierkant

Festigkeitsklasse: superelastisch
Farbcodierung Verpackung: orange
Mittenmarkierung: mit Dimple

∏	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-068-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-070-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-072-00	10 Stück
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	766-074-00	10 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-076-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-078-00	10 Stück
0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	768-114-00	10 Stück
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	766-086-00	10 Stück



∏	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-069-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-071-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-073-00	10 Stück
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	766-075-00	10 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-077-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-079-00	10 Stück
0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	768-115-00	10 Stück
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	766-087-00	10 Stück

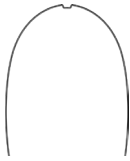

rematitan® LITE Idealbogen, rund


Für **schmale Kiefer. Schmale Bogenform.**

Festigkeitsklasse: superelastisch


Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: mit Dimple

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,30 mm / 12			766-160-00	10 Stück
0,35 mm / 14			766-162-00	10 Stück
0,40 mm / 16			766-164-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-166-00	10 Stück
0,50 mm / 20			768-116-00	10 Stück

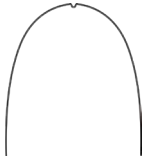

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,30 mm / 12			766-161-00	10 Stück
0,35 mm / 14			766-163-00	10 Stück
0,40 mm / 16			766-165-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-167-00	10 Stück
0,50 mm / 20			768-117-00	10 Stück

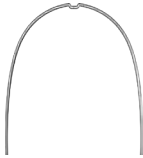

rematitan® LITE Idealbogen, vierkant


Für **schmale Kiefer. Schmale Bogenform.**

Festigkeitsklasse: superelastisch


Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: mit Dimple

▧	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-168-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-170-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-172-00	10 Stück
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	766-174-00	10 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-176-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-178-00	10 Stück
0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	768-118-00	10 Stück
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	768-120-00	10 Stück

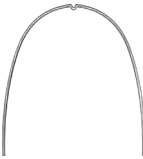

▧	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-169-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-171-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-173-00	10 Stück
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	766-175-00	10 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-177-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-179-00	10 Stück
0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	768-119-00	10 Stück
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	768-121-00	10 Stück

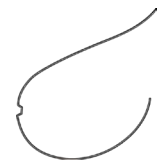


rematitan® LITE Spee® Umkehrbogen, rund

Festigkeitsklasse: superelastisch

Mittenmarkierung: mit Dimple

Ø	Länge	Diagonalmmaß	REF	Menge
0,30 mm / 12			766-014-00	10 Stück
0,35 mm / 14			766-018-00	10 Stück
0,40 mm / 16			766-050-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-052-00	10 Stück

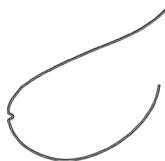

Ø	Länge	Diagonalmmaß	REF	Menge
0,30 mm / 12			766-015-00	10 Stück
0,35 mm / 14			766-019-00	10 Stück
0,40 mm / 16			766-051-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-053-00	10 Stück



rematitan® LITE Spee® Umkehrbogen, vierkant

Festigkeitsklasse: superelastisch

Mittenmarkierung: mit Dimple

↗	Länge	Diagonalmmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-054-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-056-00	10 Stück
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	766-032-00	10 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-034-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-036-00	10 Stück



↗	Länge	Diagonalmmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-055-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-057-00	10 Stück
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	766-033-00	10 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-037-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-039-00	10 Stück



rematitan® LITE Bogen, Bogenform I, spitz

Für McLaughlin-Bennett-Trevisi Technik**

Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: Oberkiefer / Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

▣	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-180-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-181-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-182-00	10 Stück

** The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



rematitan® LITE Bogen, Bogenform II, quadratisch

Für McLaughlin-Bennett-Trevisi Technik**

Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: Oberkiefer / Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

▣	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-183-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-184-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-185-00	10 Stück

** The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



rematitan® LITE Bogen, Bogenform III, oval

Für McLaughlin-Bennett-Trevisi Technik**

Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: Oberkiefer / Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

▣	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-186-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-187-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-188-00	10 Stück

** The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



rematitan® LITE Ricketts® PENTA Bogen, normal

Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: Oberkiefer / Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

▣	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-250-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-251-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-252-00	10 Stück


rematitan® LITE Ricketts® PENTA Bogen, spitz

Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: Oberkiefer / Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

☑	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-253-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-254-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-255-00	10 Stück


rematitan® LITE Ricketts® PENTA Bogen, oval

Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: Oberkiefer / Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

☑	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-256-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-257-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-258-00	10 Stück


rematitan® LITE Ricketts® PENTA Bogen, extra spitz

Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: Oberkiefer / Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

☑	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-259-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-260-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-261-00	10 Stück



rematitan® LITE Ricketts® PENTA Bogen, oval schmal

Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: Oberkiefer / Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

☑	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-262-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-263-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-264-00	10 Stück

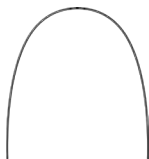

Tensic® Idealbogen, rund

Festigkeitsklasse: superelastisch


Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,30 mm / 12			766-700-00	10 Stück
0,35 mm / 14			766-702-00	10 Stück
0,40 mm / 16			766-704-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-706-00	10 Stück

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,30 mm / 12			766-701-00	10 Stück
0,35 mm / 14			766-703-00	10 Stück
0,40 mm / 16			766-705-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-707-00	10 Stück

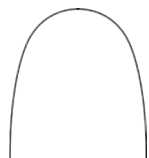

Tensic® Idealbogen, vierkant

Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange


Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

⊠	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-710-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-712-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-714-00	10 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-716-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-718-00	10 Stück
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	766-720-00	10 Stück

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt

⊠	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-711-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-713-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-715-00	10 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-717-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-719-00	10 Stück
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	766-721-00	10 Stück



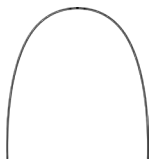

Equire Thermo-Active, vorgeformter Idealbogen, rund

Bogenform: American Style ± Damon Style*

Festigkeitsklasse: superelastisch


Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte, geätzt

Ø	Länge	Diagonalmmaß	REF	Menge
0,30 mm / 12			766-800-00	10 Stück
0,35 mm / 14			766-802-00	10 Stück
0,40 mm / 16			766-804-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-806-00	10 Stück

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

Ø	Länge	Diagonalmmaß	REF	Menge
0,30 mm / 12			766-801-00	10 Stück
0,35 mm / 14			766-803-00	10 Stück
0,40 mm / 16			766-805-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-807-00	10 Stück

*Damon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Ormco BV

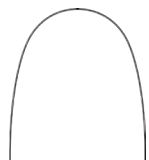

Equire Thermo-Active, vorgeformter Idealbogen, viereck

Bogenform: American Style ± Damon Style*

Festigkeitsklasse: superelastisch

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte, geätzt

∅	Länge	Diagonalmmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-808-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-810-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-812-00	10 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-814-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-816-00	10 Stück
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	766-818-00	10 Stück

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

∅	Länge	Diagonalmmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-809-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-811-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-813-00	10 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-815-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-817-00	10 Stück
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	766-819-00	10 Stück

*Damon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Ormco BV





dentaflex® Idealbogen, rund, 3-fach verseilt

Festigkeitsklasse: super federhart · 2.500 N/mm² - 2.700 N/mm²

Farbcodierung Verpackung: rot

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,38 mm / 15			766-120-00	10 Stück
0,38 mm / 15			766-120-01	50 Stück
0,45 mm / 18			766-122-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-122-01	50 Stück
0,50 mm / 20			766-124-00	10 Stück

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,38 mm / 15			766-121-00	10 Stück
0,38 mm / 15			766-121-01	50 Stück
0,45 mm / 18			766-123-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-123-01	50 Stück
0,50 mm / 20			766-125-00	10 Stück



dentaflex® Idealbogen, vierkant, 3-fach verseilt

Festigkeitsklasse: super federhart · 2.500 N/mm² - 2.700 N/mm²

Farbcodierung Verpackung: rot

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

∇	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-130-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-132-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-132-01	50 Stück

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt

∇	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-131-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-133-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-133-01	50 Stück





dentaflex® Idealbogen, vierkant, 8-fach geflochten

Festigkeitsklasse: super federhart · 2.500 N/mm² - 2.700 N/mm²


Farbcodierung Verpackung: rot

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

∅	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-100-00	10 Stück
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-100-01	50 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-101-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-101-01	50 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-103-00	10 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-104-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-105-00	10 Stück

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt

∅	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-200-00	10 Stück
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-200-01	50 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-201-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-201-01	50 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-203-00	10 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-204-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-205-00	10 Stück

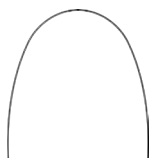

dentaflex® Idealbogen, rund, 6-fach co-axial

Festigkeitsklasse: hart plus · 1.600 N/mm² - 1.800 N/mm²

Farbcodierung Verpackung: rot


Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,38 mm / 15			766-300-00	10 Stück
0,38 mm / 15			766-300-01	50 Stück
0,45 mm / 18			766-301-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-301-01	50 Stück

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,38 mm / 15			766-400-00	10 Stück
0,38 mm / 15			766-400-01	50 Stück
0,45 mm / 18			766-401-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-401-01	50 Stück



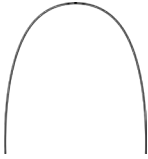

remanium® Idealbogen, rund


Festigkeitsklasse: federhart plus - 2.000 N/mm² - 2.300 N/mm²

Farbcodierung Verpackung: rot

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,35 mm / 14			765-200-00	10 Stück
0,40 mm / 16			765-201-00	10 Stück
0,40 mm / 16			765-201-01	50 Stück
0,45 mm / 18			765-202-00	10 Stück
0,45 mm / 18			765-202-01	50 Stück
0,50 mm / 20			765-203-00	10 Stück

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt

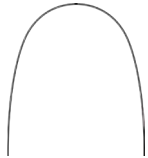

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,35 mm / 14			765-300-00	10 Stück
0,40 mm / 16			765-301-00	10 Stück
0,40 mm / 16			765-301-01	50 Stück
0,45 mm / 18			765-302-00	10 Stück
0,45 mm / 18			765-302-01	50 Stück
0,50 mm / 20			765-303-00	10 Stück





remanium® Idealbogen, vierkant

Festigkeitsklasse: federhart plus · 2.000 N/mm² - 2.300 N/mm²


Farbcodierung Verpackung: rot

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

∅	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	767-100-00	10 Stück
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	767-100-01	50 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	767-101-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	767-101-01	50 Stück
0,43 mm x 0,56 mm / 17 x 22		0,64 mm	767-102-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	767-103-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	767-103-01	50 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	767-104-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	767-105-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	767-105-01	50 Stück
0,55 mm x 0,64 mm / 21,5 x 25		0,76 mm	767-106-00	10 Stück
0,55 mm x 0,70 mm / 21,5 x 28		0,81 mm	767-107-00	10 Stück

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt

∅	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	767-200-00	10 Stück
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	767-200-01	50 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	767-201-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	767-201-01	50 Stück
0,43 mm x 0,56 mm / 17 x 22		0,64 mm	767-202-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	767-203-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	767-203-01	50 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	767-204-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	767-205-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	767-205-01	50 Stück
0,55 mm x 0,64 mm / 21,5 x 25		0,76 mm	767-206-00	10 Stück
0,55 mm x 0,70 mm / 21,5 x 28		0,81 mm	767-207-00	10 Stück

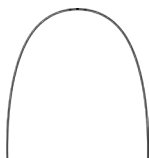

Equire vorgeformter Idealbogen, rund

Bogenform: American Style ± Damon Style*

Festigkeitsklasse: federhart plus · 2.000 N/mm² - 2.300 N/mm²

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte, geätzt


∅	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,30 mm / 12			769-000-00	10 Stück
0,35 mm / 14			769-002-00	10 Stück
0,40 mm / 16			769-004-00	10 Stück
0,45 mm / 18			769-006-00	10 Stück

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt, geätzt

∅	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,30 mm / 12			769-001-00	10 Stück
0,35 mm / 14			769-003-00	10 Stück
0,40 mm / 16			769-005-00	10 Stück
0,45 mm / 18			769-007-00	10 Stück

*Damon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Ormco BV

Edelstahl (Nickel-Chrom)

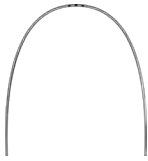

Equire vorgeformter Idealbogen, vierkant

Bogenform: American Style $\hat{=}$ Damon Style*

Festigkeitsklasse: federhart plus - 2.000 N/mm² - 2.300 N/mm²

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte, geätzt

☑	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	769-008-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	769-010-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	769-012-00	10 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	769-014-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	769-016-00	10 Stück
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	769-018-00	10 Stück

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt, geätzt



☑	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	769-009-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	769-011-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	769-013-00	10 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	769-015-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	769-017-00	10 Stück
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	769-019-00	10 Stück

*Damon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Ormco BV

Kobalt-Chrom



remaloy® Idealbogen, vierkant

Festigkeitsklasse: hart plus - 1.600 N/mm² - 1.800 N/mm²

Farbcodierung Verpackung: blau


Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

☑	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	769-100-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	769-101-00	10 Stück

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt



☑	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	769-200-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	769-201-00	10 Stück

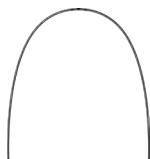

rematitan® SPECIAL Idealbogen, rund

Festigkeitsklasse: mittel plus · 1.100 N/mm² - 1.400 N/mm²



Farbcodierung Verpackung: gelb

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,40 mm / 16			766-605-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-607-00	10 Stück

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,40 mm / 16			766-606-00	10 Stück
0,45 mm / 18			766-608-00	10 Stück

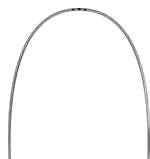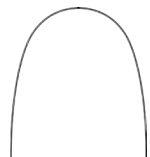

rematitan® SPECIAL Idealbogen, vierkant

Festigkeitsklasse: mittel plus · 1.100 N/mm² - 1.400 N/mm²

Farbcodierung Verpackung: gelb

Mittenmarkierung: Oberkiefer 3 Punkte


∅	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-631-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-609-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-611-00	10 Stück
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	766-613-00	10 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-615-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-617-00	10 Stück
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	766-619-00	10 Stück

Mittenmarkierung: Unterkiefer 1 Punkt

∅	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-632-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-610-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-612-00	10 Stück
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	766-614-00	10 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-616-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-618-00	10 Stück
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	766-620-00	10 Stück



Nickel-Titan (weiß beschichtet)

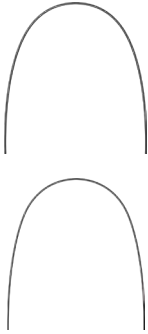

rematitan® LITE White Idealbogen, rund


Festigkeitsklasse: superelastisch

Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: keine

Ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,40 mm / 16			768-014-00	3 Stück
0,45 mm / 18			768-016-00	3 Stück

Ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,40 mm / 16			768-015-00	3 Stück
0,45 mm / 18			768-017-00	3 Stück

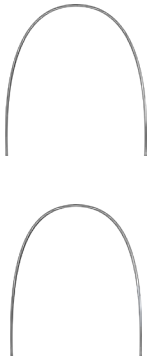

rematitan® LITE White Idealbogen, viereck

Festigkeitsklasse: superelastisch


Farbcodierung Verpackung: orange

Mittenmarkierung: keine

▧	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	768-018-00	3 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	768-020-00	3 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	768-022-00	3 Stück

▧	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	768-019-00	3 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	768-021-00	3 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	768-023-00	3 Stück




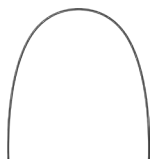


Tensic® White Idealbogen, rund

Festigkeitsklasse: superelastisch
Farbcodierung Verpackung: orange
Mittenmarkierung: keine

Ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,40 mm / 16			768-026-00	3 Stück
0,45 mm / 18			768-028-00	3 Stück

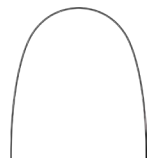

Ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,40 mm / 16			768-027-00	3 Stück
0,45 mm / 18			768-029-00	3 Stück

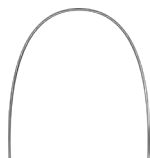

Tensic® White Idealbogen, vierkant

Festigkeitsklasse: superelastisch
Farbcodierung Verpackung: orange
Mittenmarkierung: keine

▣	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	768-030-00	3 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	768-032-00	3 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	768-034-00	3 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	768-038-00	3 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	768-040-00	3 Stück



▣	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	768-031-00	3 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	768-033-00	3 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	768-035-00	3 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	768-039-00	3 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	768-041-00	3 Stück

Edelstahl (verseilt und geflochten)

dentaflex® Stangendraht, rund, 3-fach verseilt

Festigkeitsklasse: super federhart · 2.500 N/mm² - 2.700 N/mm²

Farbcodierung Verpackung: rot

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,38 mm / 15	à 380 mm		545-738-00	10 Stück
0,45 mm / 18	à 380 mm		545-745-00	10 Stück
0,50 mm / 20	à 380 mm		545-750-00	10 Stück

dentaflex® Stangendraht, rund, 6-fach co-axial

Festigkeitsklasse: hart plus · 1.600 N/mm² - 1.800 N/mm²

Farbcodierung Verpackung: rot

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,38 mm / 15	à 380 mm		545-638-00	10 Stück
0,45 mm / 18	à 380 mm		545-645-00	10 Stück

Edelstahl (Nickel-Chrom)

remanium® Stangendraht, rund

Festigkeitsklasse: extra federhart · 2.300 N/mm² - 2.500 N/mm²

Farbcodierung Verpackung: rot

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,35 mm / 14	à 380 mm		535-035-00	25 Stück
0,40 mm / 16	à 380 mm		535-040-00	25 Stück
0,45 mm / 18	à 380 mm		535-045-00	25 Stück

remanium® Stangendraht, vierkant

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

Farbcodierung Verpackung: rot

⊠	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16	à 380 mm	0,54 mm	537-340-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22	à 380 mm	0,62 mm	537-310-00	10 Stück
0,43 mm x 0,56 mm / 17 x 22	à 380 mm	0,64 mm	537-311-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25	à 380 mm	0,70 mm	537-313-00	10 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25	à 380 mm	0,71 mm	537-314-00	10 Stück
0,48 mm x 0,48 mm / 19 x 19	à 380 mm	0,62 mm	535-048-00	25 Stück
0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20	à 380 mm	0,64 mm	535-051-00	25 Stück
0,55 mm x 0,70 mm / 21,5 x 28	à 380 mm	0,81 mm	537-324-00	10 Stück

Festsitzende Technik / Stangendrahte

Edelstahl (Nickel-Chrom)

remanium® Stangendraht, vierkant

Festigkeitsklasse: federhart plus · 2.000 N/mm² - 2.300 N/mm²

Farbcodierung Verpackung: rot

∅	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16	à 380 mm	0,54 mm	537-440-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22	à 380 mm	0,62 mm	537-410-00	10 Stück
0,43 mm x 0,56 mm / 17 x 22	à 380 mm	0,64 mm	537-411-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25	à 380 mm	0,70 mm	537-413-00	10 Stück
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25	à 380 mm	0,71 mm	537-414-00	10 Stück
0,55 mm x 0,64 mm / 21,5 x 25	à 380 mm	0,76 mm	537-423-00	10 Stück
0,55 mm x 0,70 mm / 21,5 x 28	à 380 mm	0,81 mm	537-424-00	10 Stück

Kobalt-Chrom

remaloy® Stangendraht, vierkant

Festigkeitsklasse: hart plus · 1.600 N/mm² - 1.800 N/mm²

Farbcodierung Verpackung: blau

∅	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16	à 380 mm	0,54 mm	537-540-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22	à 380 mm	0,62 mm	537-510-00	10 Stück

Nickelfreies Titan-Molybdän

rematitan® SPECIAL Stangendraht, rund

Festigkeitsklasse: mittel plus · 1.100 N/mm² - 1.400 N/mm²

Farbcodierung Verpackung: gelb

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,40 mm / 16	à 380 mm		766-600-00	10 Stück
0,45 mm / 18	à 380 mm		766-601-00	10 Stück
0,80 mm / 32	à 360 mm		766-629-00	10 Stück

rematitan® SPECIAL Stangendraht, vierkant

Festigkeitsklasse: mittel plus · 1.100 N/mm² - 1.400 N/mm²

Farbcodierung Verpackung: gelb

∅	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16	à 360 mm	0,54 mm	766-633-00	10 Stück
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22	à 380 mm	0,62 mm	766-602-00	10 Stück
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25	à 380 mm	0,70 mm	766-603-00	10 Stück
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25	à 380 mm	0,73 mm	766-604-00	10 Stück

Nickel-Titan



rematitan® LITE Rollendraht, rund

Zum schonenden Nivellieren in der Anfangsphase direkt nach dem Bonding.
Festigkeitsklasse: superelastisch

Ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,30 mm / 12	4,5 m		766-094-00	1 Stück
0,35 mm / 14	4,5 m		766-095-00	1 Stück
0,40 mm / 16	4,5 m		766-196-00	1 Stück

Edelstahl (verseilt und geflochten)



dentaflex® Rollendraht, rund, 3-fach verseilt

Festigkeitsklasse: super federhart · 2.500 N/mm² - 2.700 N/mm²

Ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,38 mm / 15	4 m		545-738-01	1 Stück
0,45 mm / 18	4 m		545-745-01	1 Stück



dentaflex® Rollendraht, rund, 6-fach co-axial

Festigkeitsklasse: super federhart · 2.500 N/mm² - 2.700 N/mm²

Ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,38 mm / 15	4 m		545-638-01	1 Stück
0,45 mm / 18	4 m		545-645-01	1 Stück

Edelstahl (Nickel-Chrom)



remanium® Rollendraht, rund

Festigkeitsklasse: extra federhart · 2.300 N/mm² - 2.500 N/mm²

Ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,35 mm / 14	7,5 m		530-035-00	1 Stück
0,40 mm / 16	7,5 m		530-040-00	1 Stück
0,45 mm / 18	7,5 m		530-045-00	1 Stück



Festsitzende Technik / Retainer

Edelstahl (Nickel-Chrom)

rematain® flat Retainerdraht

Für Ober- und Unterkiefer, 6-fach geflochten.

Leicht anzupassen und sehr flach für hohen Patientenkomfort.

	☑	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,25 mm x 0,73 mm / 10 x 29		150 mm	0,77 mm	530-000-00	10 Stück



Titan

Titan-Retainerdraht, Ti1

Für Ober- und Unterkiefer, 3-fach verseilt.

Grade 1 weist einen sehr geringen Sauerstoffgehalt auf, ist relativ weich und lässt sich gut kalt verformen.

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,44 mm / 17	50 mm		528-001-01	10 Stück
0,50 mm / 20	50 mm		528-000-01	10 Stück




Titan-Retainerdraht, Ti5

Für Ober- und Unterkiefer, 3-fach verseilt.

Grade 5 weist eine sehr hohe mechanische Festigkeit auf.

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,44 mm / 17	50 mm		528-001-00	10 Stück
0,50 mm / 20	50 mm		528-000-00	10 Stück

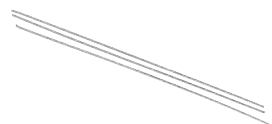

Titan-Retainerdraht, Ti1

Für Ober- und Unterkiefer, 3-fach verseilt.

Grade 1 weist einen sehr geringen Sauerstoffgehalt auf, ist relativ weich und lässt sich gut kalt verformen.

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,50 mm / 20	2 m		528-000-02	1 Stück



Gold

Gold-Retainerdraht

Für Ober- und Unterkiefer, 3-fach verseilt.

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,50 mm / 20	160 mm		529-000-00	1 Stück



remanium® Lingualretainer, Sortiment

Für Unterkiefer-Eckzähne 3-3, anatomisch vorgeformt.

1 Sortiment = 20 Stück

Material: Edelstahl

ø 0,80 mm / 32

REF 728-500-00	1 Sortiment
Inhalt:	
4 x Lingualretainer, 22 mm	REF 728-501-00
4 x Lingualretainer, 24 mm	REF 728-502-00
4 x Lingualretainer, 26 mm	REF 728-503-00
4 x Lingualretainer, 28 mm	REF 728-504-00
4 x Lingualretainer, 30 mm	REF 728-505-00



remanium® Lingualretainer

Für Unterkiefer-Eckzähne 3-3, anatomisch vorgeformt.

Die angegebene Länge entspricht dem transversalen Abstand der beiden Unterkiefer-Eckzähne.

Material: Edelstahl



ø	Länge	REF	Menge
0,80 mm / 32	22 mm	728-501-00	5 Stück
0,80 mm / 32	24 mm	728-502-00	5 Stück
0,80 mm / 32	26 mm	728-503-00	5 Stück
0,80 mm / 32	28 mm	728-504-00	5 Stück
0,80 mm / 32	30 mm	728-505-00	5 Stück

prime4me® RETAIN3R OK

Einzigartige Passung durch dreidimensionale Konstruktionsgestaltung und höchste Biokompatibilität: gefräster Retainer aus Titan Grade 5.

Optional in Verbindung mit prime4me® RETAIN3R bestellbar:

Übertragungsschlüssel für prime4me® RETAIN3R für das Einsetzen beim Patienten.

REF 430-120-30	1 Stück
----------------	---------



prime4me® RETAIN3R UK

Einzigartige Passung durch dreidimensionale Konstruktionsgestaltung und höchste Biokompatibilität: gefräster Retainer aus Titan Grade 5.

Optional in Verbindung mit prime4me® RETAIN3R bestellbar:

Übertragungsschlüssel für prime4me® RETAIN3R für das Einsetzen beim Patienten.

REF 430-120-40	1 Stück
----------------	---------



Festsitzende Technik / Zubehör



remanium® Ligaturendraht

Material: Edelstahl

Festigkeitsklasse: weich · $\leq 800 \text{ N/mm}^2$

ø	Länge	REF	Menge
0,25 mm / 10	80 m	500-025-00	1 Stück
0,25 mm / 10	1.160 m	501-025-00	1 Stück
0,30 mm / 12	60 m	500-030-00	1 Stück
0,40 mm / 16	30 m	500-040-00	1 Stück
0,50 mm / 20	50 m	503-050-00	1 Stück
0,50 mm / 20	320 m	501-050-00	1 Stück




remanium® vorgeformte Ligatur

Material: Edelstahl

Festigkeitsklasse: weich · $\leq 800 \text{ N/mm}^2$

Ausführung	ø	REF	Menge
kurz	0,25 mm / 10	751-000-00	1.000 Stück
lang	0,25 mm / 10	751-001-00	1.000 Stück

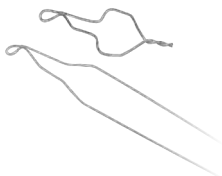

remanium® Kobayashi Ligatur

Mit Häkchen für Gummiringe.

Material: Edelstahl

Festigkeitsklasse: weich · $\leq 800 \text{ N/mm}^2$

Ausführung	ø	REF	Menge
kurz	0,30 mm / 12	751-005-00	100 Stück
kurz	0,35 mm / 14	751-004-00	100 Stück
lang	0,30 mm / 12	751-003-00	100 Stück



Ligatur White, kurz

Material: Edelstahl

Festigkeitsklasse: weich · $\leq 800 \text{ N/mm}^2$

ø	REF	Menge
0,30 mm / 12	768-036-00	100 Stück

Kobayashi White Ligatur, kurz

Mit Häkchen für Gummiringe.

Material: Edelstahl

Festigkeitsklasse: weich · ≤ 800 N/mm²



ø	REF	Menge
0,40 mm / 16	768-037-00	20 Stück

remanium® Zugfeder

Material: Edelstahl

Außen ø	Innen ø	Länge	REF	Menge
1,15 mm / 45	0,70 mm / 28	1 m	758-165-00	1 Stück
1,21 mm / 48	0,75 mm / 30	1 m	758-175-00	1 Stück
1,66 mm / 66	1,20 mm / 47	10 mm	758-180-00	6 Stück



rematitan® LITE Zugfeder

Vorteile:

- höchste Elastizität mit nahezu konstanter Rückstellkraft
- ermüdungsfreie gleichmäßig geringe Kraftübertragung

Mit Ösen zum Einhängen.

Material: Nickel-Titan

Festigkeitsklasse: superelastisch



Außen ø	Innen ø	Länge mit Ösen	Drahtstärke ø	REF	Menge
1,26 mm / 50	0,76 mm / 30	9 mm	0,25 mm / 10	758-160-00	10 Stück
1,26 mm / 50	0,76 mm / 30	12 mm	0,25 mm / 10	758-161-00	10 Stück



Festsitzende Technik / Zubehör



Eckzahn-Zugfeder

nach Ladanyi

Zum Distalisieren eines Eckzahnes.

Material: Edelstahl

Kieferseite	REF	Menge
OK rechts / UK links	758-861-00	10 Stück
OK links / UK rechts	758-862-00	10 Stück



remanium® Druckfeder

Material: Edelstahl

Außen ø	Innen ø	Länge	REF	Menge
1,16 mm / 45	0,70 mm / 28	1 m	758-365-00	1 Stück
1,21 mm / 48	0,75 mm / 30	1 m	758-375-00	1 Stück
1,66 mm / 66	1,20 mm / 47	15 mm	758-380-00	6 Stück

rematitan® LITE Druckfeder

Vorteile:

- höchste Elastizität mit nahezu konstanter Rückstellkraft
- ermüdungsfreie gleichmäßig geringe Kraftübertragung

Zum individuellen Kürzen.

Material: Nickel-Titan

Festigkeitsklasse: superelastisch

Innen ø	Länge	Drahtstärke ø	Kraft	REF	Menge
0,76 mm / 30	18 cm	0,25 mm / 10	schwach	758-360-00	3 Stück
1,14 mm / 45	18 cm	0,25 mm / 10	schwach	758-367-00	3 Stück
0,76 mm / 30	18 cm	0,30 mm / 12	mittel	758-361-00	3 Stück
1,00 mm / 40	18 cm	0,30 mm / 12	mittel	758-368-00	3 Stück
0,90 mm / 36	18 cm	0,35 mm / 14	stark	758-362-00	3 Stück



Kieferbruch-Schiene

Mit Häkchen.
Material: Edelstahl

REF 402-253-00	1 m
----------------	-----



Gleitröhrchen, rund

Geschlossen, mit Häkchen. Für Lip Bumper etc.
Material: Edelstahl

Innen ø	Länge	REF	Menge
0,60 mm / 23	2 mm	480-803-00	10 Stück
0,90 mm / 36	2 mm	480-809-00	10 Stück



Klemmröhrchen, vierkant

Geschlitzt, mit Häkchen. Können direkt auf den Bogen gesetzt werden ohne diesen auszuligieren.
Universell verwendbar für 18er- / 22er-Technik.
Material: Edelstahl

Kieferseite	REF	Menge
OK rechts / UK links	480-619-00	10 Stück
OK links / UK rechts	480-620-00	10 Stück



Klemmröhrchen, vierkant

Geschlitzt, mit Draht ø 0,70 mm federhart.
Können direkt auf den Bogen gesetzt werden ohne diesen auszuligieren.
Universell verwendbar für 18er- / 22er-Technik.
Material: Edelstahl

Kieferseite	REF	Menge
OK / UK rechts und links	480-621-00	10 Stück
OK / UK rechts und links	480-621-02	2 Stück



Klemmzange
sterilisierbar

Spitze mit V-förmiger Kerbung zum Halten und Zusammenpressen von Gleit-/Klemm- und Stoppröhrchen.
Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-711-00	1 Stück
----------------	---------



Festsitzende Technik / Zubehör



Kreuzröhrchen

Kreuzweise Verbindung von zwei kleinen Vierkantröhrchen für das Verbinden von zwei Drähten ohne Schweißen. Ideal für Stahl- oder Titanverbindungen.

Horizontales Röhrchen:

Gesamtlänge: 4,0 mm

Innen $\square$: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Vertikales Röhrchen:

Gesamtlänge: 2,0 mm

Innen $\square$: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Material: Edelstahl

REF 480-000-00

10 Stück



Kreuzröhrchen

Kreuzweise Verbindung von zwei kleinen Vierkantröhrchen für das Verbinden von zwei Drähten ohne Schweißen. Ideal für Stahl- oder Titanverbindungen.

Horizontales Röhrchen:

Gesamtlänge: 4,0 mm

Innen $\square$: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Vertikales Röhrchen:

Gesamtlänge: 2,0 mm

Innen $\square$: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Material: Edelstahl

REF 480-100-00

10 Stück



Vierkant-Röhrchen

Zur Verwendung bei Suprakonstruktionen in der kieferorthopädischen Implantologie zur Aufnahme von Drähten und Federn.

Material: Edelstahl

Innen $\square$	Länge	REF	Menge
0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28	5 mm	480-022-00	10 Stück



Stoppröhrchen, geschlitzt

Verhindert das Verrutschen innerhalb der Bracket-Bukkalaröhrchen-Sequenz bei Nickel-Titan Bögen. Auch als Stopp für Druckfedern geeignet.

Material: Edelstahl

$\square$	REF	Menge
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25	480-617-01	100 Stück
0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28	480-618-01	100 Stück



Bogenständer für vorgeformte Bögen

Für 11 unterschiedliche Bogendurchmesser.

Mit Schutzhaube, daher besonders hygienisch.

Material: Plexiglas

Maße: 25,3 cm x 11,0 cm x 10,3 cm (B x H x T)

REF 055-104-00

1 Stück

Edelstahl (Nickel-Chrom)



remanium® Stangendraht, rund

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

Farbcodierung Verpackung: rot

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,40 mm / 16	à 380 mm		525-040-00	25 Stück
0,50 mm / 20	à 380 mm		535-002-00	25 Stück
0,60 mm / 23	à 380 mm		535-003-00	25 Stück
0,70 mm / 28	à 300 mm		527-070-00	25 Stück
0,70 mm / 28	à 190 mm		527-005-00	900 Stück
0,70 mm / 28	à 150 mm		527-004-00	1.100 Stück
0,75 mm / 30	à 380 mm		535-005-00	25 Stück
0,80 mm / 31	à 300 mm		527-080-00	25 Stück
0,80 mm / 31	à 150 mm		527-006-00	875 Stück
0,90 mm / 36	à 300 mm		527-090-00	25 Stück
1,00 mm / 39	à 300 mm		527-100-00	25 Stück
1,15 mm / 45	à 380 mm		535-009-00	25 Stück

Kobalt-Chrom



remaloy® Stangendraht, rund

Empfohlen für Quad Helix, Crozatgeräte, Palatinal- und Lingualbögen etc.

Vergütbar · ca. 5 min bei 450 °C

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

Farbcodierung Verpackung: blau

ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,70 mm / 28	à 380 mm		528-070-00	10 Stück
0,80 mm / 31	à 380 mm		528-080-00	10 Stück
0,90 mm / 36	à 380 mm		528-090-00	10 Stück
1,00 mm / 39	à 380 mm		528-100-00	10 Stück
1,10 mm / 43	à 380 mm		528-110-00	10 Stück
1,20 mm / 47	à 380 mm		528-120-00	10 Stück
1,30 mm / 51	à 380 mm		528-130-00	10 Stück
1,50 mm / 59	à 380 mm		528-150-00	10 Stück



remaloy® Stangendraht, halbrund

Vergütbar · ca. 5 min bei 450 °C

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

Farbcodierung Verpackung: blau

Ø	Länge	Diagonalmäß	REF	Menge
1,50 mm x 0,75 mm / 59 x 30	à 380 mm		528-155-00	10 Stück
1,75 mm x 0,90 mm / 69 x 36	à 380 mm		528-158-00	10 Stück



remaloy® Stangendraht, vierkant gerundet

Mit gerundeten Kanten, zur Verwendung als TPA oder Verstärkungsbügel.

Vergütbar · ca. 5 min bei 450 °C

Festigkeitsklasse: hart plus · 1.600 N/mm² - 1.800 N/mm²

Farbcodierung Verpackung: blau

Ø	Länge	Diagonalmäß	REF	Menge
1,92 mm x 0,90 mm / 76 x 36	à 380 mm		528-159-00	10 Stück



remanium® Laborrolle, rund

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

Ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,70 mm / 28	30 m		513-070-00	1 Stück
0,80 mm / 31	20 m		513-080-00	1 Stück
0,90 mm / 36	10 m		513-090-00	1 Stück
1,00 mm / 39	10 m		513-100-00	1 Stück
1,20 mm / 47	10 m		513-120-00	1 Stück
1,50 mm / 59	10 m		513-150-00	1 Stück



remanium® Klinikrolle, rund

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

Ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,70 mm / 28	165 m		514-070-00	1 Stück
0,80 mm / 31	125 m		514-080-00	1 Stück
0,90 mm / 36	100 m		514-090-00	1 Stück
1,00 mm / 39	80 m		514-100-00	1 Stück



remanium® Laborrolle, rund

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

Ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,40 mm / 16	30 m		521-040-00	1 Stück
0,50 mm / 20	50 m		523-050-00	1 Stück
0,60 mm / 23	40 m		523-060-00	1 Stück
0,70 mm / 28	30 m		523-070-00	1 Stück
0,80 mm / 31	20 m		523-080-00	1 Stück
0,90 mm / 36	10 m		523-090-00	1 Stück
1,00 mm / 39	10 m		523-100-00	1 Stück
1,10 mm / 43	10 m		523-110-00	1 Stück
1,20 mm / 47	10 m		523-120-00	1 Stück
1,50 mm / 59	10 m		523-150-00	1 Stück



remanium® Klinikrolle, rund

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

Ø	Länge	Diagonalmaß	REF	Menge
0,60 mm / 23	225 m		524-060-00	1 Stück
0,70 mm / 28	165 m		524-070-00	1 Stück
0,80 mm / 31	125 m		524-080-00	1 Stück
0,90 mm / 36	100 m		524-090-00	1 Stück
1,00 mm / 39	80 m		524-100-00	1 Stück
1,10 mm / 43	70 m		524-110-00	1 Stück



remanium® Rollendraht, halbrund

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

Ø	Länge	Diagonalmass	REF	Menge
1,30 mm x 0,65 mm / 51 x 26	10 m		308-513-00	1 Stück
1,50 mm x 0,75 mm / 59 x 30	10 m		308-515-00	1 Stück
1,75 mm x 0,90 mm / 69 x 36	10 m		308-518-00	1 Stück
2,00 mm x 1,00 mm / 79 x 40	10 m		308-520-00	1 Stück



remanium® Klinikrolle, halbrund

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

Ø	Länge	Diagonalmass	REF	Menge
1,30 mm x 0,65 mm / 51 x 26	90 m		308-713-00	1 Stück
1,50 mm x 0,75 mm / 59 x 30	65 m		308-715-00	1 Stück
1,75 mm x 0,90 mm / 69 x 36	50 m		308-718-00	1 Stück



remanium® Rollendraht, oval

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

Ø	Länge	Diagonalmass	REF	Menge
2,40 mm x 1,40 mm / 95 x 55	10 m		385-624-00	1 Stück
3,00 mm x 1,50 mm / 118 x 59	10 m		385-630-00	1 Stück



Noninium® Rollendraht, rund

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

Ø	Länge	Diagonalmass	REF	Menge
0,70 mm / 28	30 m		520-070-10	1 Stück
0,80 mm / 31	20 m		520-080-10	1 Stück
0,90 mm / 36	10 m		520-090-10	1 Stück
1,20 mm / 47	10 m		520-120-10	1 Stück

* Nickel ≤ 0,05 % ist verfahrenstechnisch bedingt



Noninium® Rollendraht, rund

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

Ø	Länge	Diagonalmass	REF	Menge
0,60 mm / 23	40 m		520-062-10	1 Stück
0,70 mm / 28	30 m		520-072-10	1 Stück
0,80 mm / 31	20 m		520-082-10	1 Stück
0,90 mm / 36	10 m		520-092-10	1 Stück


* Nickel ≤ 0,05 % ist verfahrenstechnisch bedingt

Noninium® Standard Labialbogen

Material: nickelfreier* Edelstahl

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

ø	Länge mesial-mesial	REF	Menge
0,80 mm / 31	28 mm	621-028-01	10 Stück
0,80 mm / 31	31 mm	621-031-01	10 Stück
0,80 mm / 31	34 mm	621-034-01	10 Stück
0,80 mm / 31	37 mm	621-037-01	10 Stück
0,80 mm / 31	40 mm	621-040-01	10 Stück
0,80 mm / 31	43 mm	621-043-01	10 Stück
0,80 mm / 31	46 mm	621-046-01	10 Stück

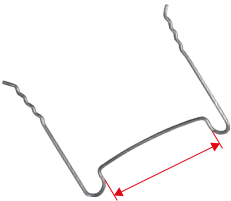

* Nickel ≤ 0,05 % ist verfahrenstechnisch bedingt

Noninium® Adamsklammer, Sortiment

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

1 Sortiment = 250 Stück

Material: nickelfreier* Edelstahl

ø 0,70 mm / 28

REF 621-500-01	1 Sortiment
Inhalt:	
30 x Adamsklammer, 7 mm	REF 621-404-01
30 x Adamsklammer, 8 mm	REF 621-405-01
40 x Adamsklammer, 9 mm	REF 621-406-01
60 x Adamsklammer, 10 mm	REF 621-407-01
60 x Adamsklammer, 11 mm	REF 621-408-01
30 x Adamsklammer, 12 mm	REF 621-409-01
1 x Bogenlineal	REF 766-000-00



* Nickel ≤ 0,05 % ist verfahrenstechnisch bedingt

Noninium® Adamsklammer

Material: nickelfreier* Edelstahl

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

ø	Länge mesial-distal	REF	Menge
0,70 mm / 28	7 mm	621-404-01	10 Stück
0,70 mm / 28	8 mm	621-405-01	10 Stück
0,70 mm / 28	9 mm	621-406-01	10 Stück
0,70 mm / 28	10 mm	621-407-01	10 Stück
0,70 mm / 28	11 mm	621-408-01	10 Stück
0,70 mm / 28	12 mm	621-409-01	10 Stück



* Nickel ≤ 0,05 % ist verfahrenstechnisch bedingt

Herausnehmbare Technik / Zubehör



Noninium® Dreiecksklammer

Material: nickelfreier* Edelstahl

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

ø	Länge	REF	Menge
0,70 mm / 28	à 36 mm	621-300-01	100 Stück

* Nickel ≤ 0,05 % ist verfahrenstechnisch bedingt



Noninium® Ösenklammer

Material: nickelfreier* Edelstahl

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

ø	Länge	REF	Menge
0,70 mm / 28	à 41 mm	621-200-01	100 Stück

* Nickel ≤ 0,05 % ist verfahrenstechnisch bedingt



Noninium® Knopfanker

Material: nickelfreier* Edelstahl

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

ø	Länge	REF	Menge
0,70 mm / 28	à 38 mm	620-207-02	100 Stück
0,80 mm / 32	à 38 mm	620-208-02	100 Stück
0,90 mm / 36	à 38 mm	620-209-02	100 Stück

* Nickel ≤ 0,05 % ist verfahrenstechnisch bedingt



remanium® Knopfanker

Material: Edelstahl

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

ø	Länge	REF	Menge
0,70 mm / 28	à 38 mm	620-107-00	100 Stück
0,80 mm / 31	à 38 mm	620-108-00	100 Stück
0,90 mm / 36	à 38 mm	620-109-00	100 Stück
1,00 mm / 39	à 38 mm	620-110-00	100 Stück

Doppelplatten Führungssporn

nach G. Müller®
Gleitverbindung zwischen Ober- und Unterkieferplatte
zur Korrektur von Angle Klasse II + Klasse III.
Material: Edelstahl

REF 607-204-00	2 Stück
REF 607-204-30	20 Stück



Doppelplatten Führungssporn

nach Hinz
Material: Edelstahl

ø	REF	Menge	REF	Menge
1,50 mm / 59	607-202-00	1 Stück	607-202-30	10 Stück



Lingualbügel

Anatomisch konturiert, z.B. für zungenfreie Aufbissplatten.
Material: Edelstahl

Länge	Maße	REF	Menge
6 cm	3,0 mm x 1,5 mm	311-306-30	10 Stück
7 cm	3,0 mm x 1,5 mm	311-307-30	10 Stück
8 cm	3,0 mm x 1,5 mm	311-308-30	10 Stück



Herausnehmbare Technik / Zubehör



Drahteinlage

Verseilt und flach gewalzt.

Material: Edelstahl

Länge	☑	REF	Menge
10 m	1,8 mm x 0,8 mm	312-106-00	1 Stück
10 m	2,4 mm x 0,8 mm	312-107-00	1 Stück



Edelstahlrohr

Rund

Material: Edelstahl

Innen ø	Länge	REF	Menge
0,50 mm / 20	30 cm	480-001-00	1 Stück
0,60 mm / 23	30 cm	480-003-00	1 Stück
0,70 mm / 28	30 cm	480-005-00	1 Stück
0,80 mm / 31	30 cm	480-007-00	1 Stück
0,90 mm / 36	30 cm	480-009-00	1 Stück
1,00 mm / 39	30 cm	480-011-00	1 Stück
1,10 mm / 43	30 cm	480-013-00	1 Stück
1,20 mm / 47	30 cm	480-015-00	1 Stück
1,30 mm / 51	30 cm	480-017-00	1 Stück



remanium® Goshgarian Palatinalbügel, Sortiment

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

Reverse Loop – mesial

Der umgekehrte Loop unterdrückt besser den Würdereflex.

Ermöglicht kontrollierbare Bewegungen der Oberkiefermolaren.

1 Sortiment = 30 Stück

Material: Edelstahl

ø 0,90 mm / 36

REF 728-020-00	1 Sortiment
Inhalt:	
5 x Palatinalbügel, 37 mm	REF 728-021-00
5 x Palatinalbügel, 40 mm	REF 728-022-00
5 x Palatinalbügel, 43 mm	REF 728-023-00
5 x Palatinalbügel, 46 mm	REF 728-024-00
5 x Palatinalbügel, 49 mm	REF 728-025-00
5 x Palatinalbügel, 52 mm	REF 728-026-00

remanium® Goshgarian Palatinalbügel


Reverse Loop – mesial

Der umgekehrte Loop unterdrückt besser den Würgereflex.

Ermöglicht kontrollierbare Bewegungen der Oberkiefermolaren.

Material: Edelstahl

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

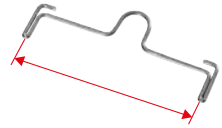

ø	Größe	REF	Menge
0,90 mm / 36	1 = 37 mm	728-021-00	10 Stück
0,90 mm / 36	2 = 40 mm	728-022-00	10 Stück
0,90 mm / 36	3 = 43 mm	728-023-00	10 Stück
0,90 mm / 36	4 = 46 mm	728-024-00	10 Stück
0,90 mm / 36	5 = 49 mm	728-025-00	10 Stück
0,90 mm / 36	6 = 52 mm	728-026-00	10 Stück


remanium® Goshgarian Palatinalbügel

Standard Loop – distal

Ermöglicht kontrollierbare Bewegungen der Oberkiefermolaren.

Material: Edelstahl

Festigkeitsklasse: hart · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

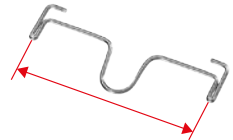

ø	Größe	REF	Menge
0,90 mm / 36	1 = 34 mm	728-005-00	10 Stück
0,90 mm / 36	2 = 37 mm	728-006-00	10 Stück
0,90 mm / 36	3 = 41 mm	728-007-00	10 Stück
0,90 mm / 36	4 = 45 mm	728-008-00	10 Stück
0,90 mm / 36	5 = 47 mm	728-013-00	10 Stück
0,90 mm / 36	6 = 49 mm	728-014-00	10 Stück
0,90 mm / 36	7 = 52 mm	728-015-00	10 Stück


remanium® Quad Helix

Herausnehmbar; wird an den oberen Molaren in Palatinalschlösser eingesetzt.

Anwendungsbereich: Expansion der Seitenzähne

Material: Edelstahl

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

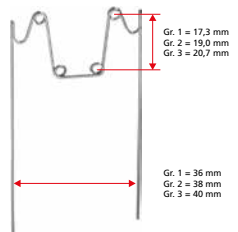

ø	Länge	Größe	REF	Menge
0,90 mm / 36	17,3 mm	1 = 36 mm	728-100-01	10 Stück
0,90 mm / 36	19,0 mm	2 = 38 mm	728-101-01	10 Stück
0,90 mm / 36	20,7 mm	3 = 40 mm	728-102-01	10 Stück

Palatinal-/Lingualbogensysteme



Orthorama® Palatinalbögen, Sortiment


1 Sortiment = 10 Stück

Material: CoCr

REF 728-205-00	1 Sortiment
----------------	-------------

Inhalt:

2 x Orthorama® Palatinalbogen, 40 mm	REF 728-200-00
2 x Orthorama® Palatinalbogen, 45 mm	REF 728-201-00
2 x Orthorama® Palatinalbogen, 50 mm	REF 728-202-00
2 x Orthorama® Palatinalbogen, 55 mm	REF 728-203-00
2 x Orthorama® Palatinalbogen, 60 mm	REF 728-204-00
1 x Bogenlineal	REF 766-000-00

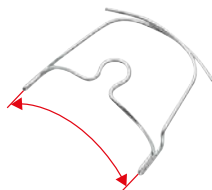

Orthorama® Palatinalbogen

Material: CoCr

ø	Größe	REF	Menge
0,90 mm / 36	1 = 40 mm	728-200-00	10 Stück
0,90 mm / 36	2 = 45 mm	728-201-00	10 Stück
0,90 mm / 36	3 = 50 mm	728-202-00	10 Stück
0,90 mm / 36	4 = 55 mm	728-203-00	10 Stück
0,90 mm / 36	5 = 60 mm	728-204-00	10 Stück



Orthorama® Lingualbögen, Sortiment


1 Sortiment = 18 Stück

Material: CoCr

REF 728-215-00	1 Sortiment
----------------	-------------

Inhalt:

2 x Orthorama® Lingualbogen, 48 mm	REF 728-206-00
2 x Orthorama® Lingualbogen, 51 mm	REF 728-207-00
2 x Orthorama® Lingualbogen, 54 mm	REF 728-208-00
2 x Orthorama® Lingualbogen, 57 mm	REF 728-209-00
2 x Orthorama® Lingualbogen, 60 mm	REF 728-210-00
2 x Orthorama® Lingualbogen, 63 mm	REF 728-211-00
2 x Orthorama® Lingualbogen, 66 mm	REF 728-212-00
2 x Orthorama® Lingualbogen, 69 mm	REF 728-213-00
2 x Orthorama® Lingualbogen, 72 mm	REF 728-214-00
1 x Bogenlineal	REF 766-000-00

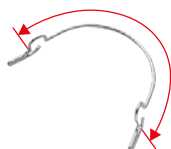

Orthorama® Lingualbogen

Material: CoCr

ø	Größe	REF	Menge
0,90 mm / 36	1 = 48 mm	728-206-00	10 Stück
0,90 mm / 36	2 = 51 mm	728-207-00	10 Stück
0,90 mm / 36	3 = 54 mm	728-208-00	10 Stück
0,90 mm / 36	4 = 57 mm	728-209-00	10 Stück
0,90 mm / 36	5 = 60 mm	728-210-00	10 Stück
0,90 mm / 36	6 = 63 mm	728-211-00	10 Stück
0,90 mm / 36	7 = 66 mm	728-212-00	10 Stück
0,90 mm / 36	8 = 69 mm	728-213-00	10 Stück
0,90 mm / 36	9 = 72 mm	728-214-00	10 Stück

Orthorama® Multi-Action Lingualbögen, Sortiment

1 Sortiment = 8 Stück

Material: CoCr

REF 728-222-00	1 Sortiment
Inhalt:	
2 x Orthorama® Multi-Action Lingualbogen, 53 mm	REF 728-218-00
2 x Orthorama® Multi-Action Lingualbogen, 57 mm	REF 728-219-00
2 x Orthorama® Multi-Action Lingualbogen, 61 mm	REF 728-220-00
2 x Orthorama® Multi-Action Lingualbogen, 65 mm	REF 728-221-00
1 x Bogenlineal	REF 766-000-00



Orthorama® Multi-Action Lingualbogen

Material: CoCr

ø	Größe	REF	Menge
0,90 mm / 36	1 = 53 mm	728-218-00	10 Stück
0,90 mm / 36	2 = 57 mm	728-219-00	10 Stück
0,90 mm / 36	3 = 61 mm	728-220-00	10 Stück
0,90 mm / 36	4 = 65 mm	728-221-00	10 Stück



Orthorama® Sektionsbogen

Material: CoCr

Ausführung	REF	Menge
mit Omegaschlaufe	728-216-00	10 Stück
ohne Omegaschlaufe	728-217-00	10 Stück



Orthorama® Transfersystem

Die indirekte Übertragung erlaubt das exakte Anpassen eines Orthorama® Bogens auf dem Gipsmodell und die absolut identische Übertragung der Position der Palatinal- bzw. Lingualschlösser vom Mund auf das Modell.

Material: Edelstahl

REF 728-400-00	10 Paar
Inhalt:	
10 x Transferwinkel	REF 728-401-00
10 x Retentionsring	REF 728-402-00



Orthorama® Transferwinkel

Material: Edelstahl

REF 728-401-00	10 Stück
----------------	----------



Orthorama® Retentionsring

Material: Edelstahl

REF 728-402-00	10 Stück
----------------	----------



SUS ³ – Sabbagh Universal Spring	Seite	252
Herbst-Scharniere / Sets	Seite	254
Herbst-Scharniere / Zubehör	Seite	256
amda® / Starter Set	Seite	259
amda® / Apparatur und Zubehör	Seite	260
tomas® / Pins	Seite	262



Klasse II-Apparaturen.

Mit Erfolg zur Klasse I.




DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com






Der ideale Weg zur Klasse I.

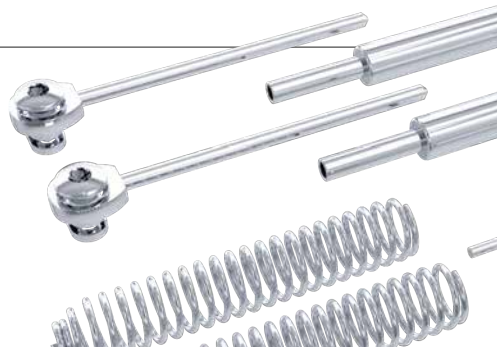

SUS³ – die beste Therapie für Ihre Klasse II.

Die SUS³ – Sabbagh Universal Spring – ist ein Teleskopelement mit Feder und kann universell intermaxillär zur Klasse II Behandlung eingesetzt werden. Sie stellt eine exzellente Alternative zur compliance-abhängigen Behandlung dar. Die SUS³ wirkt konstant mit sanften, weitgehend horizontalen Kräften, daher ist ihr Einsatz schonend für das Kiefergelenk. Extraktionen und dysgnathische Operationen könnten damit vermieden werden.

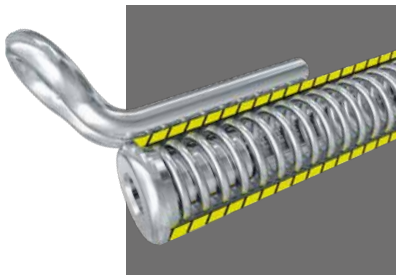



Indikationen.

- Distalbisslagen/Klasse II (unilateral/bilateral).
- Molarendistalisation (Headgear-Ersatz).
- Dentoalveolärer Ausgleich der Okklusion (Elastics-Ersatz).
- Mittellinienverschiebung.
- Lückenschluss (Aplasie)/Verankerung (Mini-Schrauben Alternative).
- Dysgnathie-Operation Alternative.
- Kiefergelenkdysfunktion und CMD (Repositions-Effekt).
- Schnarch- und Schlafapnoe-Therapie.

Die ideale Lösung für Patienten mit:

- mangelnder Kooperation.
- geringem Restwachstum.
- erschwertem Einsatz von herausnehmbaren Apparaturen.
- Erkrankungen der oberen Atemwege oder Asthma.
- Allergie gegen Bestandteile der Kunststoffe.
- vorliegender Behinderung.

Herbst-Scharniere.

Sicher, bewährt, effektiv.



Die klassische Korrektur der Distalbisslage.

Das Dentaureum-Programm umfasst vier Varianten des bewährten Herbst-Retentionsscharniers. Allen Varianten gemeinsam ist die hohe mechanische Stabilität und die sehr gute Verarbeitung, welche auch unter großer Belastung ausreichend Sicherheitsreserven für eine effektive Therapie garantieren.





Herbst TS.

Diese Variante ist mit einem Innenteleskop ausgestattet. Ein Auseinandergleiten des Scharniers wird so verhindert.

Die neue Laserbeschriftung auf dem Teleskopelement mit der jeweiligen Patientenseite und Größe gewährleistet eine eindeutige Zuordnung zum Kiefer.

Herbst I.

Das klassische Retentionsscharnier zum Anschweißen an Bänder. Je nach Erfahrung und Zielsetzung des Behandlers ist die Dentaurohm Herbst-Technik für die Band- oder Gusstechnik geeignet. Das bedeutet maximale Flexibilität und ermöglicht individuelle Umsetzungen.

Herbst II.

Das modifizierte Herbst-Scharnier zur Fixierung an den Bögen einer Multibracket-Apparatur.

Herbst IV.

Modifizierte Variante mit Kugelgelenk und Fixierung mit C-Clips. Größere laterale Bewegungsfreiheit.

Diese Lösung mit „Köpfchen“ eröffnet eine neue Dimension der UK-Beweglichkeit im Rahmen einer Therapie mit Herbst-Retentionsscharnieren, denn das Kugelkopfgelenk von Herbst IV bringt dem Patienten ein sehr deutlich spürbares Plus an Komfort.

Mit den C-Clips wurde beim Dentaurohm Herbst IV Retentionsscharnier ein Eindrehen der Schrauben vermieden. Das macht die Variante einfacher im Handling, bedeutet aber vor allem auch mehr Sicherheit.

SUS³ – Sabbagh Universal Spring



SUS³ Start-Set



REF 607-160-00	1 Set
-----------------------	-------


Inhalt:

2 x SUS ³ Teleskopelement	REF 607-157-00
2 x SUS ³ Teleskopstange, montiert	REF 607-158-00
2 x SUS ³ Knopfanker, ø 1,0 mm	REF 607-154-00
2 x SUS ³ Turbofeder (Edelstahl), Länge 27 mm	REF 607-156-00
2 x Distanzring, geschlitz, Länge 1 mm	REF 607-103-11
2 x Distanzring, geschlitz, Länge 2 mm	REF 607-104-11
1 x Innensechskantschlüssel 1,5	REF 607-144-00



SUS³ Set

Im Lieferumfang ist kein Innensechskantschlüssel enthalten!

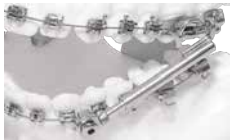

REF 607-165-00	1 Set
-----------------------	-------

Inhalt:

2 x SUS ³ Teleskopelement	REF 607-157-00
2 x SUS ³ Teleskopstange, montiert	REF 607-158-00
2 x SUS ³ Knopfanker, ø 1,0 mm	REF 607-154-00
2 x SUS ³ Turbofeder (Edelstahl), Länge 27 mm	REF 607-156-00
2 x Distanzring, geschlitz, Länge 1 mm	REF 607-103-11
2 x Distanzring, geschlitz, Länge 2 mm	REF 607-104-11



SUS³ Teleskopstange, montiert

REF 607-158-00	2 Stück
-----------------------	---------

Inhalt:

2 x SUS ³ Bogen-Adapter / Fixierschraube (1 Paar)	REF 607-153-00
2 x SUS ³ Teleskopstange	REF 607-159-00



SUS³ Teleskopstange

REF 607-159-00	2 Stück
-----------------------	---------



SUS³ Bogen-Adapter / Fixierschraube

REF 607-153-00	1 Paar
-----------------------	--------



SUS³ Teleskopelement

REF 607-157-00	1 Stück
-----------------------	---------

SUS³ Turbokfeder (Edelstahl)

Länge: 27 mm

REF 607-156-00

6 Stück



SUS³ Druckfeder (Edelstahl)

Länge: 15 mm

REF 607-151-00

6 Stück



SUS³ Distanzfeder

Länge: 10 mm

REF 607-152-00

6 Stück



Klemmzange, für Herbst TS / SUS sterilisierbar

Zum Aufkleben von geschlitzten Distanzringen für Herbst TS und SUS.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-710-00

1 Stück



SUS³ Knopfanker

Schaft ø: 1 mm

Kopf ø: 2,1 mm

Länge: 18 mm

REF 607-154-00

10 Stück



Distanzringe, geschlitzt

Länge	für	REF	Menge
1 mm	Herbst TS, SUS	607-103-11	10 Stück
2 mm	Herbst TS, SUS	607-104-11	10 Stück
3 mm	Herbst TS, SUS	607-105-11	10 Stück
4 mm	Herbst TS, SUS	607-107-11	10 Stück



Innensechskantschlüssel 1,5

sterilisierbar

Schlüsselweite	für	REF	Menge
1,5 mm	Herbst TS / I / II, SUS	607-144-00	1 Stück



Herbst-Scharniere / Sets



Herbst TS Set

Teleskop-System. Zum Anschweißen auf Bänder oder gegossene Schienen.

Inhalt:

- 1 x Teleskopgeschiebe, rechts
- 1 x Teleskopgeschiebe, links
- 4 x Innensechskantschraube
- 4 x F-Sockel

Im Lieferumfang ist kein Innensechskantschlüssel enthalten!

Länge	REF	Menge
20 mm	607-126-20	1 Set
22 mm	607-126-22	1 Set
24 mm	607-126-24	1 Set



Bitte beachten Sie unseren kostenlosen Doppelbänder-Schweißservice für die Herbst-Technik.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Medizinprodukteberater.
Telefon: +497231 / 803-216



Herbst I Set

Mit Innensechskantschrauben.

Zum Anschweißen auf Bänder oder gegossene Schienen.

Im Lieferumfang ist kein Innensechskantschlüssel enthalten!



REF 607-120-00	1 Set
-----------------------	-------

Inhalt:

1 x Teleskoprohr, rechts	REF 607-121-00
1 x Teleskoprohr, links	REF 607-122-00
2 x Teleskopstange	REF 607-124-00
4 x Innensechskantschraube	REF 607-122-30
4 x F-Sockel	REF 607-127-30

Bitte beachten Sie unseren kostenlosen Doppelbänder-Schweißservice für die Herbst-Technik. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Medizinprodukteberater.
Telefon: +497231 / 803-216



Herbst II Set

Mit Innensechskantschrauben.

Für die Fixierung auf Bögen in der Multibrackettechnik.

Im Lieferumfang ist kein Innensechskantschlüssel enthalten!



REF 607-108-00	1 Set
-----------------------	-------

Inhalt:

1 x Teleskoprohr, rechts	REF 607-121-00
1 x Teleskoprohr, links	REF 607-122-00
2 x Teleskopstange	REF 607-124-00
2 x Innensechskantschraube, kurz	REF 607-108-10
2 x Innensechskantschraube, lang	REF 607-108-20
4 x Mutter	REF 607-111-00

Herbst IV Set

Mit Kugelkopf.

Zum Anschweißen auf Bänder oder gegossene Schienen.
Große Beweglichkeit. Wird mit Sicherungsscheiben
am Sockel befestigt. Keine Verschraubung, dadurch kein
Schraubenverlust. Hoher Patientenkomfort.

Inhalt:

- 2 x Teleskoprohr mit Kugelgelenk
- 2 x Teleskopstange mit Kugelkopf
- 2 x Kupplung für Kugelkopf
- 4 x Sockel
- 10 x C-Clip, Sicherungsscheibe



REF 607-115-00

1 Set

Bitte beachten Sie unseren kostenlosen Doppelbänder-
Schweißservice für die Herbst-Technik. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an
Ihren Medizinprodukteberater.
Telefon: +497231 / 803-216



Herbst-Scharniere / Zubehör

Innensechskantschrauben



Ausführung	für	REF	Menge
mit Sockel	Herbst TS / I	607-121-30	10 Paar
ohne Sockel	Herbst TS / I	607-122-30	10 Stück
mit kurzem Schaft und Spitze	Herbst II	607-108-10	10 Stück
mit langem Schaft und Spitze	Herbst II	607-108-20	10 Stück

Schlitzschrauben



Ausführung	für	REF	Menge
mit Sockel	Herbst TS / I	607-101-00	10 Paar
ohne Sockel	Herbst TS / I	607-102-00	10 Stück
mit kurzem Schaft und Spitze	Herbst II	607-109-00	10 Stück
mit langem Schaft und Spitze	Herbst II	607-110-00	10 Stück

Sicherungsscheiben



Bezeichnung	für	REF	Menge
C-Clip	Herbst IV	607-116-00	10 Stück

Sockel / Muttern

Bezeichnung	für	REF	Menge
F-Sockel, konkave Form	Herbst TS / I	607-127-30	10 Stück
Sockel, zylindrische Form	Herbst TS / I	607-117-00	10 Stück
Sockel, nach innen gewölbte Form	Herbst IV	607-118-00	10 Stück
Mutter	Herbst II	607-111-00	10 Stück



Teleskoprohre

Bezeichnung	für	REF	Menge
Teleskoprohr, rechts	Herbst I / II	607-121-00	1 Stück
Teleskoprohr, links	Herbst I / II	607-122-00	1 Stück
Teleskoprohr mit Kugelgelenk	Herbst IV	607-125-00	1 Stück



Teleskopstangen

Bezeichnung	für	REF	Menge
Teleskopstange	Herbst I / II	607-124-00	1 Stück
Teleskopstange mit Kugelkopf	Herbst IV	607-128-00	1 Stück



Herbst-Scharniere / Zubehör



Distanzringe

Für Herbst I bis IV.

Länge	für	REF	Menge
1 mm	Herbst I / II / IV	607-103-00	10 Stück
2 mm	Herbst I / II / IV	607-104-00	10 Stück
3 mm	Herbst I / II / IV	607-105-00	10 Stück
4 mm	Herbst I / II / IV	607-107-00	10 Stück
5 mm	Herbst I / II / IV	607-112-00	10 Stück



Distanzringe, geschlitzt

Länge	für	REF	Menge
1 mm	Herbst TS, SUS	607-103-11	10 Stück
2 mm	Herbst TS, SUS	607-104-11	10 Stück
3 mm	Herbst TS, SUS	607-105-11	10 Stück
4 mm	Herbst TS, SUS	607-107-11	10 Stück



Klemmzange, für Herbst TS / SUS

sterilisierbar

Zum Aufklemmen von geschlitzten Distanzringen
für Herbst TS und SUS.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-710-00

1 Stück



Innensechskantschlüssel 1,5

sterilisierbar

Schlüsselweite	für	REF	Menge
1,5 mm	Herbst TS / I / II, SUS	607-144-00	1 Stück



Innensechskantschlüssel

Nur zur Anwendung im Labor!

Schlüsselweite	für	REF	Menge
1,5 mm	Herbst TS / I	607-123-10	1 Stück

amda® starter set (montiert)

Apparatur zur skelettal verankerten Distalisation von Molaren mit dem tomas®-pin EP.



REF 607-180-00	1 Set
----------------	-------

Inhalt:

1 x amda® telescope (2 Stück)	REF 607-181-02
1 x amda® connector, pair 7 mm	REF 607-184-07
1 x amda® connector, pair 10 mm	REF 607-184-10
1 x amda® connector, pair 13 mm	REF 607-184-13
1 x amda® palatal arch	REF 607-185-01
1 x Hexagon socket key 0.9	REF 607-129-00

amda® / Apparatur und Zubehör



amda® telescope

Gekapselte Edelstahl-Feder mit zwei Stoppschrauben
(REF 302-013-01).

Federkraft: max. 4,7 N

Federweg: max. 4,0 mm

REF 607-181-02	2 Stück
REF 607-181-10	10 Stück



amda® connector, left

links

Elemente zur Verbindung zwischen der amda®-Apparatur und den Palatinalschlössern der Molaren.

Höhe	REF	Menge
7 mm	607-182-07	10 Stück
10 mm	607-182-10	10 Stück
13 mm	607-182-13	10 Stück



amda® connector, right

rechts

Elemente zur Verbindung zwischen der amda®-Apparatur und den Palatinalschlössern der Molaren.

Höhe	REF	Menge
7 mm	607-183-07	10 Stück
10 mm	607-183-10	10 Stück
13 mm	607-183-13	10 Stück



amda® connector, pair

Elemente zur Verbindung zwischen der amda®-Apparatur und den Palatinalschlössern der Molaren.

Höhe	REF	Menge
7 mm	607-184-07	1 Paar
10 mm	607-184-10	1 Paar
13 mm	607-184-13	1 Paar

amda® palatal arch

(inkl. 2 x tomas®-abutment EP, REF 302-027-00).

Gaumenbügel für amda® zur Aufnahme der amda® telescopes.

REF 607-185-01	1 Stück
REF 607-185-10	10 Stück



Hexagon socket key 0.9

sterilisierbar

(Innensechskantschlüssel)

Schlüsselweite: 0,9 mm

REF 607-129-00	1 Stück
----------------	---------



KFO-Demonstrationsmodell tomas® / amda®

Bestückt mit:

- tomas®-pin EP
- amda®
- Lingual-/Palatinalschlössern easy in,
aufgeschweißt auf Standard Molarenbänder
OK aus Kunststoff.

REF 892-000-26	1 Stück
----------------	---------



tomas® / Pins



tomas®-pin EP selbstbohrend steril

Titan Grade 5
Gewinde ø: 1,6 mm
Kern ø: 1,2 mm
Kopfform: Pilz



Länge	Farbcodierung Verpackung	REF	Menge
6 mm	weiß	302-206-00	1 Stück
8 mm	grau	302-208-00	1 Stück
10 mm	schwarz	302-210-00	1 Stück



tomas®-pin EP N selbstbohrend unsteril sterilisierbar

Titan Grade 5
Gewinde ø: 1,6 mm
Kern ø: 1,2 mm
Kopfform: Pilz



Länge	REF	Menge	REF	Menge
6 mm	302-206-10	1 Stück	302-206-30	10 Stück
8 mm	302-208-10	1 Stück	302-208-30	10 Stück
10 mm	302-210-10	1 Stück	302-210-30	10 Stück

Extraorale Apparaturen	Seite	268
Zubehör / Extraoral	Seite	270
Elastomere Elemente / Intraoral	Seite	272
Mundvorhofplatten	Seite	276



Intra-/Extraoral.

Apparaturen für alle Behandlungstechniken.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





Abgerundetes Lieferprogramm für alle Einsatzgebiete.

Die Palette der intra- und extraoralen Produkte von Dentaureum reicht von einfachen Gummiringen oder Separatoren für den intraoralen Einsatz bis zu innovativen Apparaturen, wie dem FaceFormer.

Bei der Entwicklung, Produktion und Auswahl der intra- und extraoralen Produkte wurde sehr großer Wert auf die schon sprichwörtliche Dentaureum-Qualität gelegt. Das bedeutet nicht nur ein hohes Maß an Sicherheit für Anwender und Patient, sondern ermöglicht auch ein zeitsparendes und effektives Arbeiten.



Elastomere Elemente


In vielen Farben, Durchmessern und mit unterschiedlichen Zugkräften.

Dentalastics® Separatoren

Zum schnellen und problemlosen Separieren.



Extraorale Apparaturen

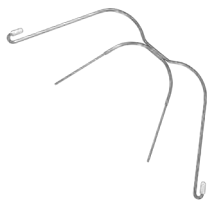

Noninium® Face Bow / Gesichtsbogen medium

nickelfrei

(Nickel $\leq 0,2\%$ ist verfahrenstechnisch bedingt)

Bruchssichere, lasergeschweißte Außen-/Innenbogenverbindung.

Sicherheitshinweis:

Gesichtsbogen (Face Bow) darf nur mit Kopf- und Nackenbändern mit Sicherheitsmodulen verwendet werden!

Innenbogen ø	Schutzkappen	REF	Menge
1,15 mm / 45	weiß	740-000-00	1 Stück




Standard Face Bow / Gesichtsbogen mini

Bruchssichere, lasergeschweißte Außen-/Innenbogenverbindung.

Sicherheitshinweis:

Gesichtsbogen (Face Bow) darf nur mit Kopf- und Nackenbändern mit Sicherheitsmodulen verwendet werden!

Innenbogen ø	Stoppschlaufen	Schutzkappen	REF	Menge
1,15 mm / 45		weiß	740-019-00	1 Stück
1,15 mm / 45	97 mm	rot	741-049-00	1 Stück

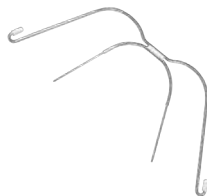

Standard Face Bow / Gesichtsbogen medium

Bruchssichere, lasergeschweißte Außen-/Innenbogenverbindung.

Sicherheitshinweis:

Gesichtsbogen (Face Bow) darf nur mit Kopf- und Nackenbändern mit Sicherheitsmodulen verwendet werden!

Innenbogen ø	Schutzkappen	REF	Menge
1,00 mm / 40	weiß	740-010-00	1 Stück
1,15 mm / 45	weiß	740-020-00	1 Stück

Standard Face Bow / Gesichtsbogen maxi

Bruchssichere, lasergeschweißte Außen-/Innenbogenverbindung.

Sicherheitshinweis:

Gesichtsbogen (Face Bow) darf nur mit Kopf- und Nackenbändern mit Sicherheitsmodulen verwendet werden!

Innenbogen ø	Schutzkappen	REF	Menge
1,15 mm / 45	weiß	740-021-00	1 Stück



Face Bow / Gesichtsbogen medium, mit Stoppschlaufen

Gesichtsbogen: ohne Beschichtung


Innenbogen ø: 1,15 mm / 45

Bruchssichere, lasergeschweißte Außen-/Innenbogenverbindung. Außenbogen nur in medium.

Sicherheitshinweis:

Gesichtsbogen (Face Bow) darf nur mit Kopf- und Nackenbändern mit Sicherheitsmodulen verwendet werden!

Außenbogen-höhe	Innenbogen-höhe	Stopp-schlaufen	Schutzkappen/Größe	Eckzahn-häkchen	REF	Menge
49 mm	29 mm	83 mm	gelb / Gr. 1		741-040-00	1 Stück
49 mm	32 mm	90 mm	grau / Gr. 2		741-045-00	1 Stück
49 mm	35 mm	97 mm	rot / Gr. 3		741-050-00	1 Stück
49 mm	38 mm	104 mm	grün / Gr. 4		741-055-00	1 Stück
49 mm	41 mm	111 mm	blau / Gr. 5		741-060-00	1 Stück
49 mm	35 mm	97 mm	rot / Gr. 3	•	741-150-00	1 Stück

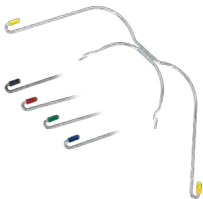

Zubehör / Extraoral



Dentalastics® Extraorale Kunststoffkette

Farbe	Länge	REF	Menge
transparent	118 mm	774-300-00	10 Stück



Extraorale Latex-Gummiringe

Höchste Elastizität und Ermüdungsfreiheit.

Die Gummiringe sind entsprechend der Größe und Stärke nach Symbolen sortiert.

Jede Type ist dadurch schnell und verwechslungssicher zu identifizieren.

Zugkräfte:

Die angegebenen Zugkräfte kommen bei dreifacher Streckung des Innendurchmessers der einzelnen Ringe zur Wirkung.

Inhalt:

30 x 100 Ringe = 3.000 Stück bzw. 30 x 50 Ringe = 1.500 Stück



Zugkraft	Ring-Innen ø	REF	Menge
schwach 2,2 N (225 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-203-02	3.000 Stück
schwach 2,2 N (225 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-204-02	3.000 Stück
schwach 2,2 N (225 g)	9,5 mm / 3/8 inch	772-205-02	3.000 Stück
stark 4,0 N (400 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-208-02	1.500 Stück
stark 4,0 N (400 g)	12,7 mm / 1/2 inch	772-210-02	1.500 Stück



Lip Bumper

Mit Kunststoffschild und Haken für intermaxilläre Gummizüge.

Indikationen:

- zur Distalisation der Molaren
- zur Stabilisation der Molaren im späten Wechselgebiss
- bei Labialkippen der Frontzähne durch Zungendruck

für Röhrchen	REF	Menge
ø 0,90 mm / 36	748-009-00	1 Stück
ø 1,15 mm / 45	748-114-00	1 Stück

Stoppröhrchen

Für Face Bows / Gesichtsbogen und Lip Bumper.

Innen ø	Länge	REF	Menge
1,15 mm / 45	2 mm	480-914-00	100 Stück



Stoppschrauben

nach Ladanyi

Für Face Bows / Gesichtsbogen und Lip Bumper.

Innen ø	REF	Menge
1,15 mm / 45	480-918-02	10 Stück



Innensechskant-Schlüssel

Für Stoppschrauben nach Ladanyi.

Nur zur Anwendung im Labor!

Schlüsselweite	REF	Menge
0,9 mm	480-924-02	1 Stück



Aktivator-Röhrchen

Z.B. für Teuscher-Aktivator. Kann mittels Retentionssteg direkt in den Aktivator eingebaut werden.

Dient zur Aufnahme eines Gesichtsbogens (Face Bow).

Innen ø	REF	Menge
1,15 mm / 45	607-300-00	10 Stück
1,30 mm / 51	607-301-00	10 Stück



Elastomere Elemente / Intraoral



Elastic Placer

Zum Setzen und Entfernen von intraoralen Gummiringen.
Farbe: bunt gemischt

REF 772-400-00

50 Stück



Intraorale Latex-Gummiringe

Höchste Elastizität und Ermüdungsfreiheit.

Die Gummiringe sind entsprechend der Größe und Stärke nach Symbolen sortiert.

Jede Type ist dadurch schnell und verwechslungssicher zu identifizieren.

Zugkräfte:

Die angegebenen Zugkräfte kommen bei dreifacher Streckung des Innendurchmessers der einzelnen Ringe zur Wirkung.

Inhalt:

10 x 100 Stück = 1.000 Stück

	Farbe	Zugkraft	Ring-Innen ø	REF	Menge
 1	naturfarben	schwach 0,7 N (71 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-103-00	1.000 Stück
 2	naturfarben	schwach 0,7 N (71 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-104-00	1.000 Stück
 3	naturfarben	schwach 0,7 N (71 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-106-00	1.000 Stück
 4	naturfarben	schwach 0,7 N (71 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-107-00	1.000 Stück
 5	naturfarben	schwach 0,7 N (71 g)	9,5 mm / 3/8 inch	772-109-00	1.000 Stück
 6	naturfarben	mittel 1,3 N (128 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-113-00	1.000 Stück
 7	naturfarben	mittel 1,3 N (128 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-114-00	1.000 Stück
 8	naturfarben	mittel 1,3 N (128 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-116-00	1.000 Stück
 9	naturfarben	mittel 1,3 N (128 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-117-00	1.000 Stück
 10	naturfarben	mittel 1,3 N (128 g)	9,5 mm / 3/8 inch	772-119-00	1.000 Stück
 11	naturfarben	stark 1,8 N (184 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-123-00	1.000 Stück
 12	naturfarben	stark 1,8 N (184 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-124-00	1.000 Stück
 13	naturfarben	stark 1,8 N (184 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-125-00	1.000 Stück
 14	naturfarben	stark 1,8 N (184 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-126-00	1.000 Stück
 15	naturfarben	stark 1,8 N (184 g)	9,5 mm / 3/8 inch	772-127-00	1.000 Stück

Intraorale Non-Latex-Gummiringe

Höchste Elastizität und Ermüdungsfreiheit.

Die Gummiringe sind entsprechend der Größe und Stärke nach Symbolen sortiert. Jede Type ist dadurch schnell und verwechslungssicher zu identifizieren.

Zugkräfte:

Die angegebenen Zugkräfte kommen bei dreifacher Streckung des Innendurchmessers der einzelnen Ringe zur Wirkung.

Inhalt:

30 x 100 Stück = 3.000 Stück



Farbe	Zugkraft	Ring-Innen ø	REF	Menge
transparent	mittel 1,3 N (128 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-313-01	3.000 Stück
transparent	mittel 1,3 N (128 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-314-01	3.000 Stück
transparent	mittel 1,3 N (128 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-316-01	3.000 Stück
transparent	mittel 1,3 N (128 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-317-01	3.000 Stück
transparent	stark 1,8 N (184 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-323-01	3.000 Stück
transparent	stark 1,8 N (184 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-324-01	3.000 Stück
transparent	stark 1,8 N (184 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-325-01	3.000 Stück
transparent	stark 1,8 N (184 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-326-01	3.000 Stück



Container für intraorale Gummiringe

Für Mini-Patientenpackungen. Mit Wandaufhängevorrichtung.

Maße (B x H x T): 508 mm x 169 mm x 107 mm

Farbe: weiß

REF 772-000-00

1 Stück



Intraorale Latex-Gummiringe

Sondergrößen

Eckzahn zu Eckzahn, für Face Bows mit Eckzahnhäkchen. Höchste Elastizität und Ermüdungsfreiheit.

Die angegebenen Zugkräfte kommen bei dreifacher Streckung des Innendurchmessers der einzelnen Ringe zur Wirkung.

Zugkraft	Ring-Innen ø	REF	Menge
mittel 1,3 N (128 g)	16 mm / 5/8 inch	772-100-00	1.000 Stück
mittel 1,3 N (128 g)	19 mm / 3/4 inch	772-200-00	1.000 Stück




Elastomere Elemente / Intraoral



Dentalastics® Kunststoffringe

Zum Fixieren der Bögen in Brackets anstatt Drahtligaturen.

Farbe	Ring-Innen ø	Höhe	REF	Menge
transparent	1,3 mm	0,9 mm	774-002-01	1.000 Stück

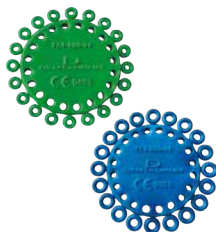

Dentalastics® Separatoren

Zum schnellen und problemlosen Separieren. Röntgenkontrasteffekt (Ideal-Einstellung 60 kV und 3 mA).

Farbe	Ring-Innen ø	Indikation	REF	Menge
grün	1,5 mm	für Frontzähne	774-100-01	1.000 Stück
blau	2,1 mm	für Seitenzähne	774-200-01	1.000 Stück



SUPER Elasto-Force Kunststoffketten

Konstante Zugwirkung bei längerer Wirkungsdauer. Hohe Elastizität mit sehr gutem Rückstellverhalten.

Farbe	Ring-Innen ø	Länge	Steg	REF	Menge
transparent	1,3 mm	4,6 m	•	774-220-01	1 Rolle
rosa	1,3 mm	4,6 m	•	774-231-01	1 Rolle
blau	1,3 mm	4,6 m	•	774-232-01	1 Rolle
rot	1,3 mm	4,6 m	•	774-233-01	1 Rolle
silber	1,3 mm	4,6 m	•	774-235-01	1 Rolle
transparent	1,3 mm	4,6 m		774-221-01	1 Rolle
blau	1,3 mm	4,6 m		774-226-01	1 Rolle
silber	1,3 mm	4,6 m		774-229-01	1 Rolle
pearl	1,3 mm	4,6 m		774-236-01	1 Rolle




Dentalastics® Personal / Sortiment**Bunte Ligaturenringe**

Besonders zierliche, elastische Kunststoffringe zum Fixieren der Bögen in Brackets anstatt Drahtligaturen.

Inhalt:

10 Farben (ohne gelb & orange) à 5 Stege, insgesamt 50 Stege x 20 Ringe = 1.000 Stück

Farbe	Ring-Innen ø	Höhe	REF	Menge
10 Farben	1,3 mm	0,7 mm	774-561-04	1 Sortiment

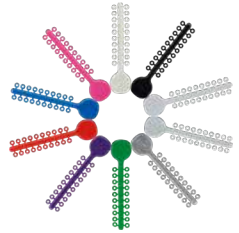**Dentalastics® Personal / Einzelpackungen****Bunte Ligaturenringe**

Besonders zierliche, elastische Kunststoffringe zum Fixieren der Bögen in Brackets anstatt Drahtligaturen.

Inhalt: 50 Stege x 20 Ringe = 1.000 Stück

Farbe	Ring-Innen ø	Höhe	REF	Menge
silber	1,3 mm	0,7 mm	774-549-01	1 Packung
transparent	1,3 mm	0,7 mm	774-551-02	1 Packung
schwarz	1,3 mm	0,7 mm	774-552-01	1 Packung
weiß	1,3 mm	0,7 mm	774-553-01	1 Packung
pink	1,3 mm	0,7 mm	774-554-01	1 Packung
blau	1,3 mm	0,7 mm	774-555-01	1 Packung
rot	1,3 mm	0,7 mm	774-556-01	1 Packung
purpur	1,3 mm	0,7 mm	774-557-01	1 Packung
gelb	1,3 mm	0,7 mm	774-558-01	1 Packung
grün	1,3 mm	0,7 mm	774-559-01	1 Packung
orange	1,3 mm	0,7 mm	774-560-01	1 Packung
pearl	1,3 mm	0,7 mm	774-563-01	1 Packung



Mundvorhofplatten



Mundvorhofplatte Ulmer Modell

Indikationen:

- Zungenfehlfunktionen (Zungenpressen, falsche Zungenlage)
- Lippenbeißen
- Lippensaugen
- Daumenlutschen
- zu schwache Lippenmuskulatur

Vorteile:

- keine Druckstellen durch elastisches Material
- erhöhter Tragekomfort
- erhöhte Akzeptanz
- gute Kontrollmöglichkeiten beim Ausführen der myofunktionellen Übungen

Spezielle Spangensboxen siehe Praxismaterialien!

Größe	REF	Menge
Mini / Größe 1 = für Patienten bis Schulalter	074-000-00	1 Stück
Maxi / Größe 2 = für Patienten ab Schulalter und Erwachsene	074-001-00	1 Stück



FaceFormer ONE blue mit Hygienebox

nach Berndsen

Die FaceFormer-Therapie ist ursachenorientiert und ganzheitlich. Regelmäßiges FaceFormer-Training nimmt wirksamen Einfluss auf die Spannung von Gewebe, Muskeln und Haut im Mund und Gesicht. Es stärkt und harmonisiert Muskelfunktionen, die für Kauen, Schlucken, Sprechen, Atmung, Zahnstellung sowie Mimik und Hautspannung von besonderer Bedeutung sind.

Indikationen:

- Schluckstörungen (Dysphagien)
- Zungenfehlfunktionen
- gestörte Kaufunktion
- Sprech-, Sprach- und Redeflussstörungen
- Abgewöhnen von Daumenlutschen, Schnuller, Lippenbeißen etc.
- Lähmungen der Mund-/Gesichtsregion
- vor / nach Gesichts-, Kiefer- und Zungenoperationen
- Zahnfehlstellungen, Kieferanomalien
- Zähneknirschen, -pressen (Bruxismus)
- CMD, Kiefergelenksstörungen
- Zahnprothetik, Zahnimplantate
- Schlafstörungen, Schnarchen, Schlafapnoe
- Hörsturz, Tinnitus
- Schwindel, Menière'sche Krankheit
- Druckausgleichsprobleme im Mittelohr
- Umstellen von Mund- auf Nasenatmung
- etc.


Farbe	Form	REF	Menge
blau-transparent	anatomical	074-101-01	1 Stück

tomas® / Tool Sets	Seite	290
tomas® / Pins	Seite	291
tomas® / Instrumente und Zubehör	Seite	293
amda® / Starter Set	Seite	304
amda® / Apparatur und Zubehör	Seite	305
tomas® PI / Gaumenimplantat und Tool Set	Seite	307
tomas® PI / Instrumente und Zubehör	Seite	308
Beratungsunterstützung	Seite	313





Verankerungssysteme.
innovativ – umfassend – effizient.

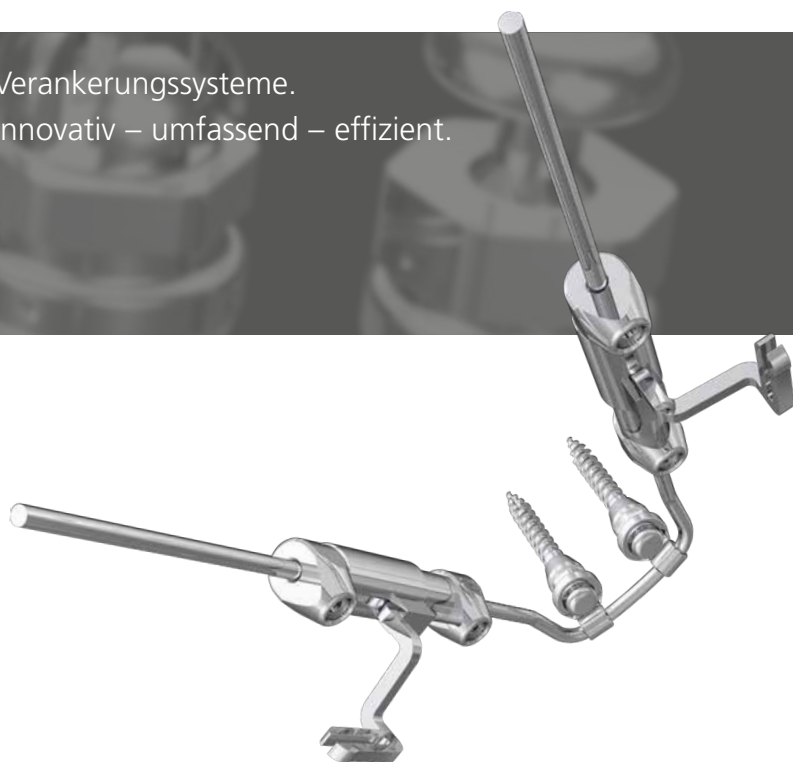

DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





Das Komplettsystem für alle Indikationen.

Das Konzept.

Das tomas® System ist weltweit seit vielen Jahren eines der führenden Systeme für die skelettale Verankerung. Die Anwender schätzen das einfache Handling und die hohe Zuverlässigkeit. Mit der Integration des tomas®-pin EP sowie einer Auswahl an Abutments zur direkten und indirekten Kopplung stehen dem Behandler sowohl die Anwendungen von vestibulär als auch der palatinale Einsatz offen. Egal ob Distalisation, Mesialisation, Intrusion, Gaumennahterweiterung oder indirekte Verankerung: Sowohl für den Einsteiger als auch für den Profi lässt das tomas® System keine Wünsche offen.



Indikationen.

Der tomas®-pin SD und der tomas®-pin EP dienen als temporäre orthodontische Anker, die zum Beispiel für folgende Behandlungen angewendet werden können:


- Distalisation und Mesialisation von Zähnen.
- Aufrichten von Molaren.
- Intrusion von Zähnen.
- Lückenschluss bei Klasse-I-Okklusion.
- Sliding mechanics in Klasse II.
- Vermeidung der Protrusion von Schneidezähnen.
- Erweiterung der Gaumennaht.
- Bei Oligodontie.
- Veränderungen der Zahnstellung im Rahmen einer präprothetischen Behandlung.
- Verankerung von temporären Kronen.

Die Vorteile:

- Schnell und einfach einsetzbar.
- Abgestimmtes Zubehör.
- Wirksamkeit 24 h – Tag und Nacht.
- Keine Mitarbeit des Patienten notwendig.
- Perfekte Biomechanik.




TADmatch™.

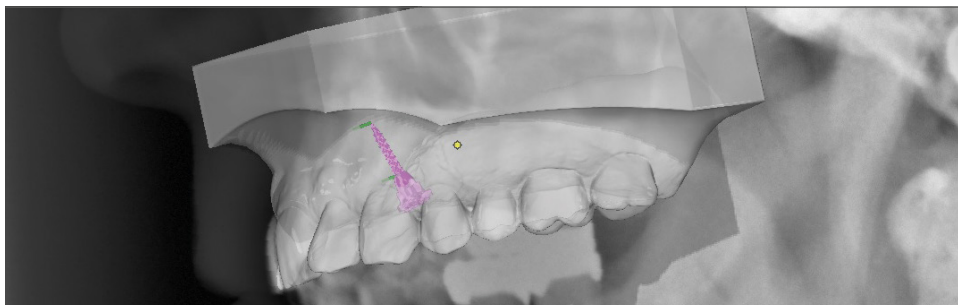

Die geführte Insertion des tomas®-pin.


TADmatch™ ist der Einstieg, um den Workflow der skelettalen Verankerung nahezu vollständig digital durchführen zu können. Die Planung der Pinposition kann sowohl mit 2D- als auch mit 3D-Bildvorlagen in Relation zu den virtuellen Modellen erfolgen. Das Modul der OnyxCeph^{3TM} Software eröffnet neben der Planung auch die Möglichkeit Insertionsschablonen rein digital (mit anderen Modulen von OnyxCeph^{3TM}) oder analog im eigenen Labor herzustellen. TADmatch™ bietet somit mehr Sicherheit innerhalb der Insertion.



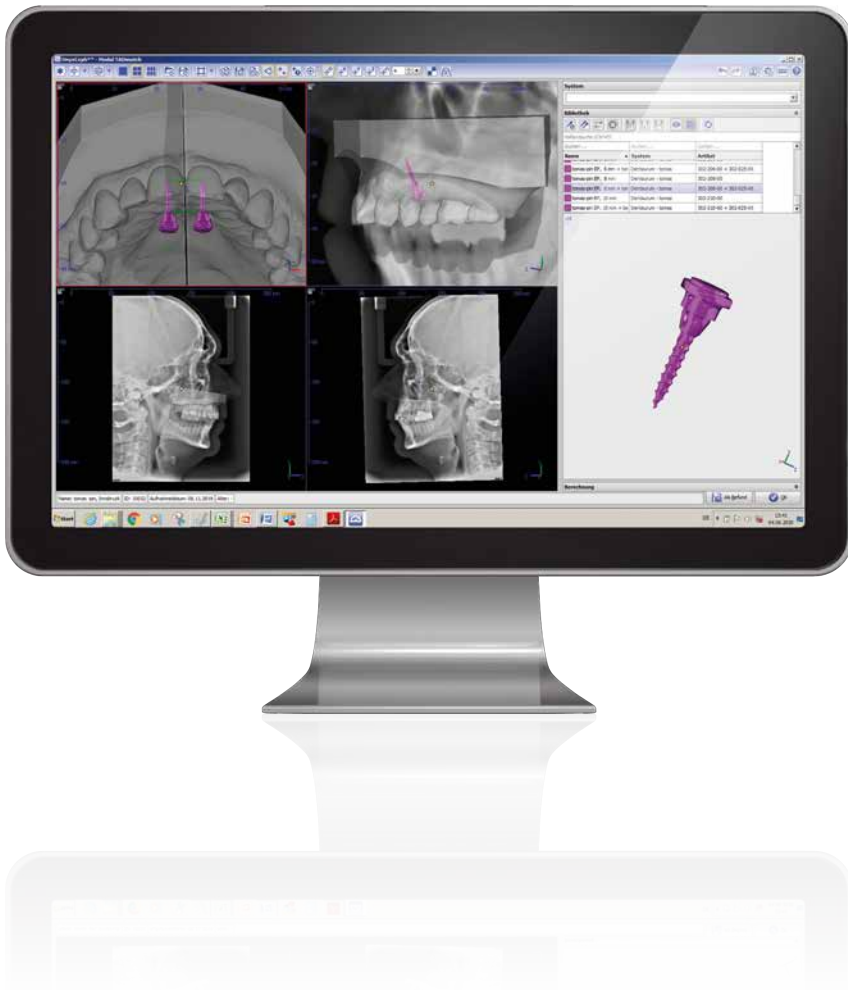



advanced
molar
distalization
appliance.

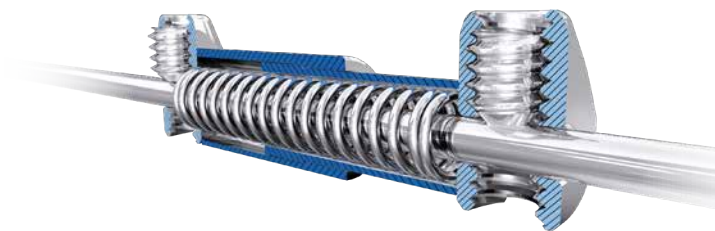

advanced molar distalization appliance.

In Verbindung mit dem tomas® System bietet amda® eine sicher geführte Distalisation von oberen Molaren. Als skelettal verankerte Apparatur dient sie je nach Einbau sowohl zur bi- oder unilateralen Distalisation bzw. Mesialisation von oberen Molaren als auch zur Retraktion der oberen Frontzähne.

In der Retentionsphase dient die Apparatur als skelettal verankerter Transpalatinalbogen. amda® ist mehr als nur eine Distalationsapparatur.

Erfunden wurde das amda® System von Prof. Dr. med. dent. Moschos A. Papadopoulos. Dentaforum entwickelte es in enger Zusammenarbeit mit ihm weiter. Dr. Papadopoulos ist Professor und Direktor der Abteilung für Kieferorthopädie an der Aristoteles Universität von Thessaloniki in Griechenland.




Indikationen.

- Distalisation von Molaren.
- Mesialisation von Molaren.
- Retraktion der Frontzähne.
- Kombination von Distalisation und Mesialisation.
- Retention von Molaren.

Die Vorteile:

- Keine Mitarbeit des Patienten notwendig.
- 24 h – in situ.
- Hygienisch und angenehm für den Patienten.
- Keine Verschmutzung der Feder.
- Einfache Montage/Demontage.



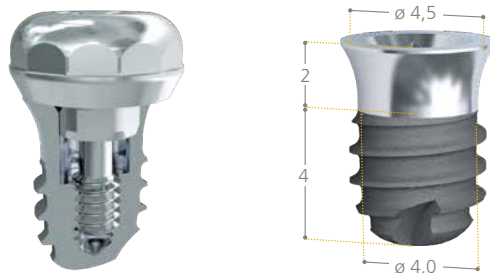

Ein Gaumenimplantat, viele Möglichkeiten.

Das tomas® PI bietet in zuverlässiger und effektiver Weise die unterschiedlichsten Möglichkeiten im Bereich der skelettalen Verankerung.

Durch seine Implantatgeometrie in Verbindung mit der geätzten und gestrahlten Oberfläche ermöglicht es eine bestmögliche Verankerung und hervorragende Sicherheit in der Anwendung. Mit nur zwei Bohrsequenzen und dem selbstschneidenden Gewinde wird eine effiziente Implantation gewährleistet.

Unterschiedliche Abutments erlauben eine große Vielfalt an Behandlungsapparaturen.



Indikationen.

Das tomas® PI dient als temporärer orthodontischer Anker und kann unter anderem für die folgenden Behandlungen angewendet werden:

- Indirekte Verankerung.
- Distalisation.
- Mesialisation.
- Intrusion von Zähnen.

Die Vorteile:

- Optimales Design für beste Verankerung.
- Insertion bei eingeschränkten Platzverhältnissen möglich.
- Wirksamkeit 24 h – Tag und Nacht.
- Keine Mitarbeit des Patienten notwendig.
- Perfekte Biomechanik.



Tool Sets



tomas®-tool set XL

(Set mit Instrumenten)

Das tomas®-tool set XL enthält alle Instrumente für die manuelle und maschinelle Insertion eines tomas®-pin.

REF 302-151-00

1 Set

Inhalt:

1 x tomas®-drill SD 1.1, short pilot drill	REF 302-103-00
1 x tomas®-guide driver	REF 302-080-00
1 x tomas®-driver	REF 302-004-50
1 x tomas®-applicator	REF 302-004-20
1 x tomas®-wheel, ø 10 mm	REF 302-004-30
1 x tomas®-applicator, lange Ausführung	REF 302-004-70
1 x tomas®-torque ratchet	REF 302-004-41
1 x tomas®-screwdriver	REF 302-004-10
1 x tomas®-tool tray	REF 302-156-00



tomas®-tool set S

(Set mit Instrumenten)

Das tomas®-tool set S beinhaltet Instrumente, die für die Insertion eines tomas®-pin absolut notwendig sind.

REF 302-251-00

1 Set

Inhalt:

1 x tomas®-drill SD 1.1, short pilot drill	REF 302-103-00
1 x tomas®-guide driver	REF 302-080-00
1 x tomas®-screwdriver	REF 302-004-10
1 x tomas®-tool tray	REF 302-156-00

tomas®-pin SD
selbstbohrend
steril

Titan Grade 5
Gewinde ø: 1,6 mm
Kern ø: 1,2 mm
Kopfform: Kreuzslot

Länge	Farbcodierung Verpackung	REF	Menge
6 mm	gelb	302-106-00	1 Stück
8 mm	blau	302-108-00	1 Stück
10 mm	grün	302-110-00	1 Stück



tomas®-pin EP
selbstbohrend
steril


Titan Grade 5
Gewinde ø: 1,6 mm
Kern ø: 1,2 mm
Kopfform: Pilz

Länge	Farbcodierung Verpackung	REF	Menge
6 mm	weiß	302-206-00	1 Stück
8 mm	grau	302-208-00	1 Stück
10 mm	schwarz	302-210-00	1 Stück



ISO 19023

	SD / SD N	EP / EP N
d ₁	1,6 mm	1,6 mm
d ₂	1,2 mm	1,2 mm
d ₃	2,8 mm	2,8 mm
k ₁	2,2 mm	2,9 mm
k ₂	2,0 mm	2,0 mm
l ₁	10,2 mm / 12,2 mm / 14,2 mm	10,9 mm / 12,9 mm / 14,9 mm
l ₂	6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm	6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm

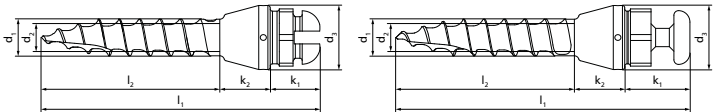

Pins, unsteril



tomas®-pin SD N

selbstbohrend

unsteril

sterilisierbar

Titan Grade 5

Gewinde ø: 1,6 mm

Kern ø: 1,2 mm

Kopfform: Kreuzslot

Länge	REF	Menge	REF	Menge
6 mm	302-106-10	1 Stück	302-106-30	10 Stück
8 mm	302-108-10	1 Stück	302-108-30	10 Stück
10 mm	302-110-10	1 Stück	302-110-30	10 Stück



tomas®-pin EP N

selbstbohrend

unsteril

sterilisierbar

Titan Grade 5

Gewinde ø: 1,6 mm

Kern ø: 1,2 mm

Kopfform: Pilz

Länge	REF	Menge	REF	Menge
6 mm	302-206-10	1 Stück	302-206-30	10 Stück
8 mm	302-208-10	1 Stück	302-208-30	10 Stück
10 mm	302-210-10	1 Stück	302-210-30	10 Stück

tomas®-drill SD 1.1, short pilot drill

sterilisierbar

(Pilotbohrer)

Die Pilotbohrung sollte bei 800 min⁻¹ (max. 1.500 min⁻¹) und mit steriler, physiologischer Kochsalzlösung erfolgen.

Zur Perforation der Compacta (≥ 2,0 mm) bei Verwendung von tomas®-pin SD und EP.



Länge	ø	Farbcodierung Verpackung	REF	Menge
4 mm	1,1 mm	gelb	302-103-00	1 Stück

tomas®-applicator

sterilisierbar

(Manuelle Eindrehhilfe)

Zur manuellen Insertion und Explantation des tomas®-pin.

Lange Ausführung sehr gut geeignet für die palatinale Insertion.

Länge	REF	Menge
18 mm	302-004-20	1 Stück
28 mm	302-004-70	1 Stück



tomas®-wheel

sterilisierbar

(Rändel)

Zur manuellen Insertion und Explantation des tomas®-pin, zusammen mit dem tomas®-applicator (REF 302-004-20 / 302-004-70).

ø: 10,0 mm

REF 302-004-30

1 Stück



Instrumente und Zubehör



tomas®-torque ratchet

(Drehmomentratsche)

Zur manuellen Insertion und Explantation des tomas®-pin, zusammen mit dem tomas®-applicator (REF 302-004-20 / 302-004-70); Drehmoment ist auf 20 Ncm zu begrenzen.

REF 302-004-41

1 Stück



tomas®-driver

sterilisierbar

(Maschinelle Eindreihilfe)

Zur maschinellen Insertion des tomas®-pin mit Hilfe eines im Drehmoment begrenzten Winkelstückes. Die Begrenzung ist auf 20 Ncm und 25 min⁻¹ einzustellen.

Länge: 22 mm

REF 302-004-50

1 Stück



tomas®-guide driver

sterilisierbar

(Maschinelle Eindreihilfe)

Lange Ausführung.

Auf die tomas®-guide tubes abgestimmtes maschinell-getriebenes Insertionsinstrument. Zur maschinellen Insertion des tomas®-pin mit Hilfe eines im Drehmoment begrenzten Winkelstückes. Die Begrenzung ist auf 20 Ncm und 25 min⁻¹ einzustellen. Sehr gut geeignet für die freie oder schablonengeführte palatinale Insertion des tomas®-pin. Länge: 27 mm

REF 302-080-00

1 Stück



Manueller Drehsatz mod. nach Pauls, mit einstellbarem Drehmoment von 0 - 40 Ncm

sterilisierbar

(Manueller Drehsatz)

Manueller Drehsatz mit einstellbarem Drehmoment von 0 Ncm - 40 Ncm. Das Drehmoment ist auf 20 Ncm zu begrenzen. Zum Aufstecken auf ein Winkelstück als preiswerte Alternative zu chirurgischen Motoren oder elektrisch betriebenen Geräten.

REF 302-004-81

1 Stück



tomas®-screwdriver

sterilisierbar

(Schraubendreher)

Zur manuellen Insertion und Explantation des tomas®-pin.

Enthält tomas®-screwdriver key 1.3

(Sechskantschlüssel, REF 302-004-16)

und tomas®-screwdriver key 3.0

(Sechskantschlüssel, REF 302-004-14).

REF 302-004-10

1 Stück



tomas®-tool tray

sterilisierbar

(Instrumentenbox)

Zur Aufnahme von tomas®-Komponenten.

REF 302-156-00

1 Stück

tomas®-abutment kit

(Set Kopplungselemente)

Das tomas®-abutment kit enthält Abutments für den tomas®-pin SD und tomas®-pin EP.

Zur skelettalen Verankerung von Apparaturen für das Mesialisieren, Distalisieren und die Intrusion von Zähnen sowie zur Erweiterung der Gaumennaht. Die Apparaturen können am Stuhl oder im Labor hergestellt werden.

REF 302-050-00	1 Set
Inhalt:	
6 x tomas®-abutment universal	REF 302-025-00
6 x tomas®-abutment tube 1.1	REF 302-025-11
2 x tomas®-abutment tube 1.5	REF 302-025-15
2 x tomas®-abutment tube square 22	REF 302-025-22
2 x tomas®-abutment wire 6	REF 302-025-06
4 x tomas®-abutment wire 12	REF 302-025-12
2 x tomas®-abutment plain	REF 302-026-00
2 x tomas®-abutment EP	REF 302-027-00
50 x tomas®-transfer cap	REF 302-028-01
10 x tomas®-laboratory pin EP	REF 302-029-01
10 x tomas®-laboratory pin SD	REF 302-030-01
1 x tomas®-box	REF 302-023-10



tomas®-abutment universal

(Kopplungselement)

Indirekte Kopplung zwischen dem tomas®-pin und der herkömmlichen Multibrackettechnik über einzelne oder mehrere Zähne. Direkte Kopplung zu skelettal verankerten Apparaturen. Temporäre Fixierung von Drähten mit 1,1 mm ø durch Schnapp-Effekt (nur in Verbindung mit tomas®-pin SD!).

REF 302-025-00	2 Stück
----------------	---------



tomas®-abutment tube 1.1

(Kopplungselement mit Röhrchen)

Abutment mit drehbar gelagertem Röhrchen zur direkten Kopplung zwischen dem tomas®-pin und verschiedenen Apparaturen, z.B. zur bi- oder unilateralen Mesialisierung, Distalisation, Intrusion etc. Ergänzend dazu kann das tomas®-abutment wire 6 (REF 302-025-06) und tomas®-abutment wire 12 (REF 302-025-12) verwendet werden.

Innen ø Röhrchen	Breite Röhrchen	REF	Menge
1,15 mm / 45	3,0 mm	302-025-11	1 Stück



tomas®-abutment tube 1.5

(Kopplungselement mit Röhrchen)

Abutment mit drehbar gelagertem Röhrchen zur direkten Kopplung zwischen dem tomas®-pin und allen hyrax® GNE-Schrauben.

Einsatz für Hybrid GNE-Apparatur oder skelettale GNE-Apparatur nach Pin-First® approach.

Innen ø Röhrchen	Breite Röhrchen	REF	Menge
1,55 mm / 61	3,0 mm	302-025-15	1 Stück



tomas®-RPE eyelet

(Kopplungselement für GNE-Schrauben)

Öse zur direkten Kopplung zwischen dem tomas®-pin und allen hyrax® GNE-Schrauben. Mit zwei Haltern zur leichteren Platzierung auf dem Arbeitsmodell.

Einsatz für Hybrid GNE-Apparatur oder skelettale GNE-Apparatur nach Pin-Last® approach.

Außen ø Eyelet	Innen ø Eyelet	Dicke Eyelet	REF	Menge
5,0 mm	oben 3,0 mm unten 2,3 mm	1,5 mm	302-602-00	12 Stück + 2 Halter



Instrumente und Zubehör



tomas®-abutment tube square 22

(Kopplungselement mit Röhrchen)

Abutment mit drehbar gelagertem Vierkantröhrchen zur direkten Kopplung zwischen dem tomas®-pin und Apparaturen zur Intrusion.

Innen $\square$ Röhrchen	Breite Röhrchen	REF	Menge
0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28	4,0 mm	302-025-22	1 Stück



tomas®-abutment double tube 1.5

Concept by Dr. Sohani

(Kopplungselement mit 2 Röhrchen)

Abutment mit drehbar gelagertem Doppelröhrchen zur direkten Kopplung zwischen dem tomas®-pin und verschiedenen Apparaturen, z.B. zur bi- oder unilateralen Mesialisation, Distalisation, Intrusion etc. Ergänzend dazu kann das tomas®-abutment U-wire (REF 302-025-21) verwendet werden.

Innen ϕ Röhrchen	Breite Röhrchen	REF	Menge
1,55 mm / 61	2 x 3,0 mm	302-025-30	1 Stück



tomas®-abutment U-wire

(Kopplungselement mit Draht)

Abutment mit drehbar gelagertem, bilateralem Draht zur direkten Kopplung zwischen dem tomas®-pin und verschiedenen Apparaturen, z.B. zur bi- oder unilateralen Mesialisation, Distalisation etc.

Ergänzend dazu kann das tomas®-abutment double tube 1.5 (REF 302-025-30) verwendet werden.

Draht ϕ	Drahtlänge	REF	Menge
1,10 mm / 43	2 x 80 mm	302-025-21	1 Stück



tomas®-abutments median

Kombination aus dem tomas®-abutment U wire (REF 302-025-21) und dem tomas®-abutment double tube 1.5 (REF 302-025-30). Diese Kombination ist vorgesehen für zwei tomas®-pin, die sagittal im Bereich der Gaumennaht (mediane Insertion) gesetzt wurden. Der Abstand zwischen den beiden tomas®-pin muss mindestens 6 mm betragen.

Innen ϕ Röhrchen	Breite Röhrchen	Draht ϕ	Drahtlänge	REF	Menge
1,55 mm / 61	2 x 3,0 mm	1,10 mm / 43	2 x 80 mm	302-025-51	1 Stück



tomas®-abutment wire 6

(Kopplungselement mit Draht)

Abutment mit drehbar gelagertem, unilateralem Draht zur direkten Kopplung zwischen dem tomas®-pin und verschiedenen Apparaturen, z.B. zur bi- oder unilateralen Mesialisation, Distalisation etc.

Ergänzend dazu kann das tomas®-abutment tube 1.1 (REF 302-025-11) verwendet werden.

Draht ϕ	Drahtlänge	REF	Menge
1,10 mm / 43	60 mm	302-025-06	1 Stück

tomas®-abutment wire 12

(Kopplungselement mit Draht)

Abutment mit drehbar gelagertem, bilateralem Draht zur direkten Kopplung zwischen dem tomas®-pin und verschiedenen Apparaturen, z.B. zur bi- oder unilateralen Mesialisation, Distalisation etc.

Ergänzend dazu kann das tomas®-abutment tube 1.1 (REF 302-025-11) verwendet werden.

Draht ø	Drahtlänge	REF	Menge
1,10 mm / 43	120 mm	302-025-12	1 Stück



tomas®-abutment plain

(Kopplungselement)

Zum Anschweißen individueller Elemente und zur Verankerung von provisorischen Kronen.

REF 302-026-00

1 Stück



tomas®-abutment EP

(Kopplungselement)

Direkte Kopplung zwischen dem tomas®-pin EP und Distalisationsapparaturen.

Innen ø Röhrchen	Breite Röhrchen	Innen ø Öse	Dicke Öse	REF	Menge
1,05 mm / 41	2,0 mm	2,4 mm / 94	0,8 mm	302-027-00	2 Stück



tomas®-transfer cap

(Übertragungskappe)

Übertragung der Mundsituation auf ein Modell.

REF 302-028-01

2 Stück



tomas®-laboratory pin EP

Laboranalog für den tomas®-pin EP zur Anfertigung von skelettal verankerten kieferorthopädischen Apparaturen im Labor.

REF 302-029-01

1 Stück



tomas®-laboratory pin SD

Laboranalog für den tomas®-pin SD zur Anfertigung von skelettal verankerten kieferorthopädischen Apparaturen im Labor.

REF 302-030-01

1 Stück



Instrumente und Zubehör



tomas®-auxiliary kit

(Zubehörset)

Das tomas®-auxiliary kit enthält Zubehör zum Mesialisieren, Distalisieren und Aufrichten von Zähnen in Verbindung mit dem tomas®-pin.

REF 302-001-20

1 Set

Inhalt:

10 x tomas®-coil spring, light (8 mm)	REF 302-012-00
10 x tomas®-coil spring, medium (8 mm)	REF 302-012-10
10 x tomas®-coil spring, heavy (8 mm)	REF 302-012-20
10 x tomas®-uprighting spring	REF 302-009-00
3 x rematitan® LITE Druckfeder	REF 758-361-00
10 x tomas®-stop screw	REF 302-013-01
1 x Hexagon socket key 0.9	REF 607-129-00
10 x tomas®-T-wire	REF 302-024-00
10 x tomas®-power arm, square	REF 302-015-00
10 x tomas®-power arm, round	REF 302-019-00
10 x tomas®-crimp hook, OK links/UK rechts	REF 302-020-00
10 x tomas®-crimp hook, OK rechts/UK links	REF 302-020-10
10 x tomas®-aligner hook, OK links/UK rechts	REF 302-021-00
10 x tomas®-aligner hook, OK rechts/UK links	REF 302-021-10
1 x tomas®-box	REF 302-023-10



tomas®-coil spring

Nickel-Titan-Zugfeder mit Ösen, zum Einhängen in den tomas®-pin und an Hakenchen.

Länge: 8 mm (gemessen von der Mitte der beiden Ösen)

Innen ø: 0,90 mm / 36

Festigkeitsklasse: superelastisch

Zugkräfte	Drahtstärke ø	Farbcodierung Verpackung	REF	Menge
light 1,38 N (140 g)	0,21 mm / 8	blau	302-012-00	10 Stück
medium 2,01 N (200 g)	0,23 mm / 9	gelb	302-012-10	10 Stück
heavy 2,74 N (270 g)	0,23 mm / 9	rot	302-012-20	10 Stück



SUPER Elasto-Force Kunststoffketten

Konstante Zugwirkung bei längerer Wirkungsdauer. Hohe Elastizität mit sehr gutem Rückstellverhalten.

Farbe	Ring-Innen ø	Länge	REF	Menge
transparent	1,3 mm	4,6 m	774-221-01	1 Rolle



tomas®-uprighting spring

(Aufrichtefeder)

Zum Aufrichten sowie zur gleichzeitigen Intrusion bzw. Extrusion von Molaren.

REF 302-009-00

10 Stück

rematitan® LITE Druckfeder

Vorteile:


- höchste Elastizität mit nahezu konstanter Rückstellkraft
- ermüdungsfreie gleichmäßig geringe Kraftübertragung

Zum individuellen Kürzen.

Material: Nickel-Titan

Festigkeitsklasse: superelastisch

Innen ø	Länge	Drahtstärke ø	Kraft	REF	Menge
0,76 mm / 30	18 cm	0,30 mm / 12	mittel	758-361-00	3 Stück

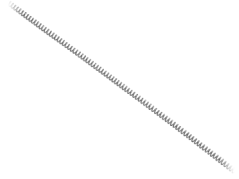

tomas®-stop screw

(Stoppschraube)

Ohne Innensechskantschlüssel.

REF 302-013-01	10 Stück
----------------	----------



Hexagon socket key 0.9

sterilisierbar

(Innensechskantschlüssel)

Schlüsselweite: 0,9 mm

REF 607-129-00	1 Stück
----------------	---------



tomas®-slotted stop

(Stoppöhrchen)

Als Stopp für Druckfedern geeignet.

☑	REF	Menge
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25	302-022-18	100 Stück
0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28	302-022-22	100 Stück



tomas®-hook

(Drahthäkchen)

Zur Fixierung von elastischen Elementen

(Gummiketten, Federn) am Kopf des tomas®-pin SD.

REF 302-009-10	10 Stück
----------------	----------



tomas®-T-wire

(T-Draht)

Aus remanium® zur direkten und indirekten Ankopplung an den tomas®-pin SD.

Material: Edelstahl

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

☑	REF	Menge
0,55 mm x 0,70 mm / 21,5 x 28	302-024-00	10 Stück



Instrumente und Zubehör



tomas®-cross tube 18

(Kreuzröhrchen)

Kreuzweise Verbindung von zwei kleinen Vierkantröhrchen

für das Verbinden von zwei Drähten ohne Schweißen.

Ideal für die Verbindung zwischen tomas®-pin SD und Bogen.

Horizontales Röhrchen:

Gesamtlänge: 4,0 mm

Innen $\square$: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Vertikales Röhrchen:

Gesamtlänge: 2,0 mm

Innen $\square$: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

REF 302-014-18

10 Stück



tomas®-cross tube 22

(Kreuzröhrchen)

Kreuzweise Verbindung von zwei kleinen Vierkantröhrchen

für das Verbinden von zwei Drähten ohne Schweißen.

Ideal für die Verbindung zwischen tomas®-pin SD und Bogen.

Horizontales Röhrchen:

Gesamtlänge: 4,0 mm

Innen $\square$: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Vertikales Röhrchen:

Gesamtlänge: 2,0 mm

Innen $\square$: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

REF 302-014-22

10 Stück



tomas®-power arm, square

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

Klemmröhrchen geschlitzt, mit federhartem Vierkantdraht

($\square$ 0,55 mm x 0,70 mm / 21,5 x 28). Kann direkt auf

den Bogen gesetzt werden, ohne diesen auszuligieren.

Universell verwendbar für 18er-/22er-Technik. Optimal zur

Ankopplung an den tomas®-pin SD und zur Anfertigung

individueller Häkchen.

Maße:

Röhrchenlänge: 2,0 mm

Drahtlänge: 25,0 mm

REF 302-015-00

10 Stück



tomas®-power arm, round

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

Klemmröhrchen geschlitzt, mit federhartem Runddraht

($\varnothing$ 0,7 mm / 28). Kann direkt auf den Bogen gesetzt werden,

ohne diesen auszuligieren. Universell verwendbar für

18er-/22er-Technik. Zur Anfertigung individueller Häkchen.

Maße:

Röhrchenlänge: 2,0 mm

Drahtlänge: 25,0 mm

REF 302-019-00

10 Stück

Klemmzange

sterilisierbar

Spitze mit V-förmiger Kerbung zum Halten und Zusammendrücken von Gleit-/Klemm- und Stoppröhrchen.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-711-00	1 Stück
----------------	---------



tomas®-crimp hook

Klemmhäkchen geschlitzt, mit 4 Häkchen zum Einhängen von Federn und Gummiketten.

Universell verwendbar für 18er-/22er-Technik.

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²



Kieferseite	REF	Menge
OK links / UK rechts	302-020-00	10 Stück
OK rechts / UK links	302-020-10	10 Stück

tomas®-aligner hook

(Klebehäkchen)

Häkchen zum Aufkleben auf Zähne oder Aligner zur direkten Kopplung mit dem tomas®-pin.

Zur Befestigung auf dem Kunststoff der Aligner ist ein Spezialkleber erforderlich (Bond Aligner™, Fa. Reliance).

Festigkeitsklasse: federhart · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²



Kieferseite	REF	Menge
OK links / UK rechts	302-021-00	10 Stück
OK rechts / UK links	302-021-10	10 Stück

tomas®-box

Kunststoffbox mit 2 Einsätzen.

REF 302-023-10	1 Stück
----------------	---------



Instrumente und Zubehör



tomas®-guide tube, left sterilisierbar

Führungsrohr links mit 4 Retentionsrillen zur individuellen Anordnung in einer Insertionsschablone.

REF 302-041-00

1 Stück



tomas®-guide tube, right sterilisierbar

Führungsrohr rechts mit 5 Retentionsrillen zur individuellen Anordnung in einer Insertionsschablone.

REF 302-042-00

1 Stück



tomas®-guide tube, pair sterilisierbar

Paarig angeordnete Führungsrohre zum Einfügen in eine Insertionsschablone mit einem festen Abstand.

Abstand	REF	Menge
6 mm	302-040-06	1 Stück
8 mm	302-040-08	1 Stück
10 mm	302-040-10	1 Stück



tomas®-guide drill sterilisierbar

Auf die tomas®-guide tubes abgestimmter Pilotbohrer. Die Pilotbohrung sollte bei 800 min⁻¹ (max. 1.500 min⁻¹) und mit steriler, physiologischer Kochsalzlösung erfolgen.

REF 302-060-06

1 Stück



tomas®-guide driver sterilisierbar

(Maschinelle Eindrehhilfe)

Lange Ausführung.

Auf die tomas®-guide tubes abgestimmtes maschinengetriebenes Insertionsinstrument. Zur maschinellen Insertion des tomas®-pin mit Hilfe eines im Drehmoment begrenzten Winkelstückes. Die Begrenzung ist auf 20 Ncm und 25 min⁻¹ einzustellen. Sehr gut geeignet für die freie oder schablonengeführte palatinale Insertion des tomas®-pin. Länge: 27 mm

REF 302-080-00

1 Stück

tomas®-laboratory screw SD

Schraubbares Laborimplantat mit SD-Kopf.

REF 302-070-02

2 Stück



tomas®-laboratory screw EP

Schraubbares Laborimplantat mit EP-Kopf.

REF 302-071-02

2 Stück




Modul TADmatch™


Modul von OnyxCeph^{37M} zum virtuellen Setzen von tomas®-pin und als Basis zur Herstellung von Insertionsschablonen.

REF 410-000-15

1 Stück

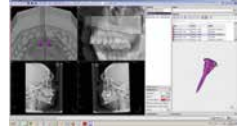

amda® / Starter Set

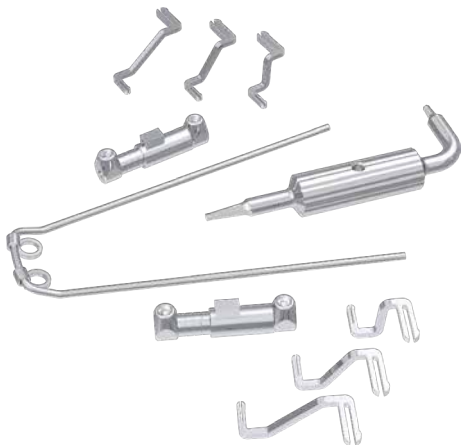

amda® starter set (montiert)

Apparatur zur skelettal verankerten Distalisation von Molaren mit dem tomas®-pin EP.



REF 607-180-00	1 Set
----------------	-------

Inhalt:

1 x amda® telescope (2 Stück)	REF 607-181-02
1 x amda® connector, pair 7 mm	REF 607-184-07
1 x amda® connector, pair 10 mm	REF 607-184-10
1 x amda® connector, pair 13 mm	REF 607-184-13
1 x amda® palatal arch	REF 607-185-01
1 x Hexagon socket key 0.9	REF 607-129-00

amda® telescope

Gekapselte Edelstahl-Feder mit zwei Stoppschrauben
(REF 302-013-01).

Federkraft: max. 4,7 N

Federweg: max. 4,0 mm

REF 607-181-02	2 Stück
REF 607-181-10	10 Stück



amda® connector, left

links

Elemente zur Verbindung zwischen der amda®-Apparatur und den Palatinalschlössern der Molaren.

Höhe	REF	Menge
7 mm	607-182-07	10 Stück
10 mm	607-182-10	10 Stück
13 mm	607-182-13	10 Stück



amda® connector, right

rechts

Elemente zur Verbindung zwischen der amda®-Apparatur und den Palatinalschlössern der Molaren.


Höhe	REF	Menge
7 mm	607-183-07	10 Stück
10 mm	607-183-10	10 Stück
13 mm	607-183-13	10 Stück



amda® connector, pair

Elemente zur Verbindung zwischen der amda®-Apparatur und den Palatinalschlössern der Molaren.

Höhe	REF	Menge
7 mm	607-184-07	1 Paar
10 mm	607-184-10	1 Paar
13 mm	607-184-13	1 Paar

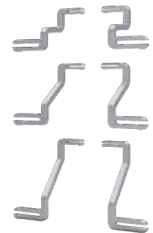

amda® / Apparatur und Zubehör



amda® palatal arch

(inkl. 2 x tomas®-abutment EP, REF 302-027-00).

Gaumenbügel für amda® zur Aufnahme der amda® telescopes.

REF 607-185-01	1 Stück
REF 607-185-10	10 Stück



Hexagon socket key 0.9

sterilisierbar

(Innensechskantschlüssel)

Schlüsselweite: 0,9 mm

REF 607-129-00	1 Stück
-----------------------	---------

tomas® PI / Gaumenimplantat und Tool Set

tomas® PI 4.0

steril

Gaumenimplantat

Auslieferung mit separat liegender und einsatzbereiter, steriler Verschlusskappe

(tomas® PI-abutment multiple set, REF 303-400-00).



Länge	Gewinde ø	Hals ø	REF	Menge
4 mm	4,0 mm	4,5 mm	303-100-40	1 Stück

tomas® PI-tool set

(Set mit Instrumenten)

Das tomas® PI-tool set enthält alle Instrumente für die Insertion und Explantation des tomas® PI 4.0.

REF 303-010-01	1 Set
Inhalt:	
1 x tomas® PI-reusable punch	REF 303-210-10
3 x Surgical Bur	REF 303-220-01
1 x tomas® PI-lance drill	REF 303-230-00
1 x tomas® PI-pre-drill 2.0	REF 303-240-20
1 x tomas® PI-final drill 3.4	REF 303-240-34
1 x tomas® PI-depth gauge	REF 303-240-54
1 x tomas® PI-driver 2.5	REF 303-310-00
1 x tomas® PI-applicator	REF 303-320-00
1 x tomas® PI-torque ratchet	REF 303-330-00
1 x tomas® PI-wheel	REF 303-340-00
1 x tomas® PI-lock key	REF 303-350-00
1 x tomas® PI-driver 1.3	REF 303-360-00
1 x tomas® PI-guide sleeve	REF 303-500-10
1 x Trepanbohrer	REF 303-500-21
1 x tomas® PI-tool tray	REF 303-010-10



tomas® PI / Instrumente und Zubehör



tomas® PI-reusable punch sterilisierbar

(Gingiva-Entferner)

Zum Ausschneiden der Schleimhaut am Insertionsort des tomas® PI 4.0. Das Ausschneiden sollte bei 500 min⁻¹ (max. 800 min⁻¹) und mit steriler, gekühlter physiologischer Kochsalzlösung (5 °C) erfolgen.

Außen ø	Innen ø	REF	Menge
4,2 mm	3,7 mm	303-210-10	1 Stück



Bohrer Verlängerung

ISO Schaft-Hexagon

REF 387-509-00	1 Stück
----------------	---------



Surgical Bur

sterilisierbar

Das Ankörnen sollte bei 500 min⁻¹ (max. 800 min⁻¹) und mit steriler, gekühlter physiologischer Kochsalzlösung (5 °C) erfolgen.

Markierungsbohrer (Rosenbohrer) zum Ankörnen.

ø 2,0 mm

REF 303-220-01	3 Stück
----------------	---------



tomas® PI-lance drill

sterilisierbar

Die Pilotbohrung sollte bei 500 min⁻¹ (max. 800 min⁻¹) und mit steriler, gekühlter physiologischer Kochsalzlösung (5 °C) erfolgen.

Markierungsbohrer (Vorböhrer) mit Tiefenmarkierungen zum Festlegen der Insertionsrichtung.

ø 1,5 mm

REF 303-230-00	1 Stück
----------------	---------



tomas® PI-pre-drill 2.0

sterilisierbar

Die Pilotbohrung sollte bei 500 min⁻¹ (max. 800 min⁻¹) und mit steriler, gekühlter physiologischer Kochsalzlösung (5 °C) erfolgen.

Vorböhrer mit Tiefenmarkierungen zum Aufbereiten des Knochens.

ø 2,0 mm

REF 303-240-20	1 Stück
----------------	---------



tomas® PI-final drill 3.4

sterilisierbar

Die Finalbohrung sollte bei 500 min⁻¹ (max. 800 min⁻¹) und mit steriler, gekühlter physiologischer Kochsalzlösung (5 °C) erfolgen.

Finaler Bohrer mit Tiefenmarkierung zum Aufbereiten des Knochens.

ø 3,4 mm

REF 303-240-34	1 Stück
----------------	---------

tomas® PI-depth gauge

sterilisierbar

Tiefenmesslehre zur Überprüfung der Vorbohrung / Finalbohrung.

REF 303-240-54

1 Stück



tomas® PI-driver 2.5

sterilisierbar

Instrument zur maschinellen und manuellen Insertion des tomas® PI 4.0.

Eindreh Schlüssel Schlüsselweite 2,5 mm mit Tiefenmarkierungen.

REF 303-310-00

1 Stück



tomas® PI-applicator

sterilisierbar

Adapter

- ISO Schaft / tomas® PI-torque ratchet (REF 303-330-00)

- ISO Schaft / tomas® PI-wheel (REF 303-340-00)

Zur manuellen Insertion und Explantation des tomas® PI 4.0 und zum Eindrehen der tomas® PI-abutment screw.

REF 303-320-00

1 Stück



tomas® PI-torque ratchet

sterilisierbar

(Drehmomentratsche)

Zur manuellen Insertion und Explantation des tomas® PI 4.0 zusammen mit dem tomas® PI-applicator (REF 303-320-00).

Drehmoment ist bei der Insertion auf 40 Ncm und beim Anziehen der Abutmentschraube auf 15 Ncm zu begrenzen.

REF 303-330-00

1 Stück



tomas® PI-wheel

sterilisierbar

Verwendbar in Kombination mit dem tomas® PI-applicator (REF 303-320-00) für die manuelle Insertion und Explantation des tomas® PI 4.0.

ø 18,0 mm

REF 303-340-00

1 Stück



tomas® PI-lock key

sterilisierbar

Konterschlüssel zum Festziehen und Lösen der

tomas® PI-abutment screw bei zu geringer Primärstabilität des tomas® PI 4.0.

Länge: 70,2 mm

REF 303-350-00

1 Stück



tomas® PI-driver 1.3

sterilisierbar

Instrument zur maschinellen und manuellen Insertion der tomas® PI-abutment screw.

Eindreh Schlüssel Schlüsselweite 1,3 mm.

REF 303-360-00

1 Stück



tomas® PI / Instrumente und Zubehör



Sechskantschlüssel - Ratsche

L: 23,0 mm

SW: 2,5

REF 387-522-00

1 Stück



Sechskantschlüssel - Ratsche

L: 26,0 mm

SW: 1,3

REF 387-622-00

1 Stück

tomas® PI-abutment multiple set

Einheilkappe und Abutment in einem, mit vormontierter tomas® PI-abutment screw. Set besteht aus 2 Teilen.

Maximales Drehmoment zum Anziehen der tomas® PI-abutment screw mit max. 15 Ncm.



Bezeichnung	ø	Höhe	REF	Menge
tomas® PI-abutment multiple 2.4 set	5,1 mm	2,4 mm	303-400-00	1 Set
tomas® PI-abutment multiple 5.0 set	5,1 mm	5,0 mm	303-400-70	1 Set

tomas® PI-abutment plain set

Abutment mit planer Auflage und mit vormontierter tomas® PI-abutment screw. Set besteht aus 2 Teilen.

Maximales Drehmoment zum Anziehen der tomas® PI-abutment screw mit max. 15 Ncm.



Bezeichnung	ø	Höhe	REF	Menge
tomas® PI-abutment plain 2.4 set	5,1 mm	2,4 mm	303-400-40	1 Set
tomas® PI-abutment plain 5.0 set	5,1 mm	5,0 mm	303-400-80	1 Set

tomas® PI-abutment plain set with wire

Abutment mit vormontierter Abutmentschraube und Runddraht.



Bezeichnung	Draht ø	Drahtlänge	Höhe	REF	Menge
tomas® PI-abutment plain 2.4 set with wire	1,10 mm / 43	120 mm	2,4 mm	303-400-52	1 Stück
tomas® PI-abutment plain 5.0 set with wire	1,10 mm / 43	120 mm	5,0 mm	303-400-82	1 Stück

tomas® PI-straight wire with notch

Mit gerundeten Kanten, zur Verwendung als TPA oder Verstärkungsbügel passend zum tomas® PI-abutment plain (REF 303-400-41 und 303-400-80).
vergütbar · ca. 5 min bei 450 °C
hart plus · 1.600 N/mm² - 1.800 N/mm²

ø	Länge	REF	Menge
1,92 mm x 0,90 mm / 76 x 36	50 mm	303-700-00	1 Stück



tomas® PI-abutment screw

Abutmentschraube zur Befestigung der tomas® PI-abutments und des tomas® PI-impression post.
Maximales Drehmoment zum Anziehen der tomas® PI-abutment screw mit max. 15 Ncm.

Bezeichnung	Länge	REF	Menge
tomas® PI-abutment 2.4 screw	7,0 mm	303-400-20	1 Stück
tomas® PI-abutment 5.0 screw	9,6 mm	303-400-72	1 Stück



tomas® PI-impression post, set

Abformpfosten für die digitale Technik mit vormontierter Sicherungsschraube.
Set besteht aus 2 Teilen.
Maximales Drehmoment zum Anziehen der Sicherungsschraube 15 Ncm.

Auch für Abformung mittels Silikon und Polyether geeignet.

REF 303-400-30	1 Set
-----------------------	-------



tomas® PI-transfer cap

(Übertragungskappe)
Übertragung der Mundsituation auf ein Modell.
Insbesondere für die Abformung mit Alginate geeignet.

REF 303-400-60	1 Stück
-----------------------	---------



tomas® PI-laboratory analog

Laboranalog für das tomas® PI 4.0 zur Anfertigung von skelettal verankerten kieferorthopädischen Apparaturen im Labor.

REF 303-410-00	1 Stück
-----------------------	---------



tomas® PI / Instrumente und Zubehör



tomas® PI-guide sleeve

sterilisierbar

Führungszylinder zur Explantation des tomas® PI 4.0.

Maximales Drehmoment zum Anziehen der

tomas® PI-guide sleeve mit max. 15 Ncm.

REF 303-500-10

1 Stück



tomas® PI-tool tray

sterilisierbar

(Instrumentenbox)

Zur Aufnahme von tomas® PI Komponenten.

REF 303-010-10

1 Stück

tomas®-demonstration pin SD 08 selbstbohrend

Zur Patienten-Demonstration.

Maßstab 5 : 1

REF 302-007-20

1 Stück



tomas®-demonstration pin EP 08 selbstbohrend

Zur Patienten-Demonstration

Maßstab 5 : 1

REF 302-007-30

1 Stück



KFO-Demonstrationsmodell tomas® / amda®

Bestückt mit:

- tomas®-pin EP
- amda®
- Lingual-/Palatinalschlössern easy in,
aufgeschweißt auf Standard Molarenbänder
OK aus Kunststoff.

REF 892-000-26

1 Stück



Abformung	Seite	318
Modellherstellung	Seite	319
Spangenboxen und Zubehör	Seite	321
KFO-Studien-/Demonstrationsmodelle	Seite	323
Sonstiges	Seite	328



Praxismaterialien.

Zuverlässig und preiswert.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





Professionelle Praxismaterialien für die KFO.

Unser breites Produktprogramm an Praxismaterialien reicht vom Abformmaterial bis zur orthodontischen Zahnbürste. Mittels unserer Demomodelle und KFO-Studienmodelle können alle Fragen im Patientengespräch beantwortet werden.

Ob mini, maxi oder magnum, die bunten Spangenboxen werden Ihre Patienten begeistern.

Zuverlässige, sichere und schnelle Reinigung von Multibracket-Apparaturen mit Ortho Brush.



Orthalgenat® Duo

Das universelle KFO-Abformmaterial.

Flexaponal®

Spezialwachs nach Uhlig.

Orthalgenat® Ex

Das perfekte Reinigungsmittel für Abformlöffel.

Rapidur®

Der weiße, superhart-synthetische Hartgips.

KFO-Studien-/Demonstrationsmodelle

Breites Angebot an Modellen.

Spangenboxen

In allen Größen und Farben.

Abformung



Orthalgemat® Duo

Abformmaterial inkl. Messbesteck.

Geschmack	Farbe	REF	Menge
mint	grün	150-501-20	1 kg
mint	grün	150-509-20	9 kg
mint	grün	150-520-20	20 kg

Lieferform: 1 kg (Dose), 9 x 1 kg und 20 x 1 kg (Karton)
DIN EN ISO 21563



Dosierflasche

Für Flüssigkeiten.

Fassungsvermögen	REF	Menge
500 ml	150-000-00	1 Stück



Orthalgemat® Ex

Abformlöfl-Reinigungsmittel. Zur Entfernung von Alginat- und Gipsresten. Konzentrat für manuelle oder Ultraschallreinigung.

REF 150-010-00	1,5 kg
----------------	--------

Flexaponal®, Spezialwachs

nach Uhlig

- zur Bissnahme (als Quetschbiss oder Bisswall)
- für Hafränder an Abformlöffeln
- weich, flexibel und gut klebend

Stärke: 1,0 mm



Maße (L x B)	Farbe	REF	Menge
120 mm x 15 mm	rot	124-003-00	50 Stück
200 mm x 10 mm	rot	124-002-00	50 Stück
200 mm x 10 mm	weiß	124-202-00	50 Stück

Rapidur®

Synthetischer Hartgips

- superhart, geringe Expansion
- schnell abbindend

Einsatzbereich:

geeignet für alle Bereiche der Kieferorthopädie und Zahntechnik

Norm: DIN EN ISO 6873

Klasse 4

Abbindeexpansion	max. 0,15 %
Verarbeitungszeit	min. 3 min
Druckfestigkeit	min. 35 MPa
Erstarrungszeit	max. 30 min
Farbe	weiß

REF 164-450-00

6 kg



Mischbecher

Für Gips, Abform- und Einbettmassen, pflegeleicht.

Fassungsvermögen	REF	Menge
400 ml	164-651-00	1 Stück
600 ml	164-650-00	1 Stück



Modellglänzer

Umweltfreundliche Imprägnierung für Demonstrationsmodelle aus Gips (z.B. aus Rapidur®, REF 164-450-00).

Modelloberfläche wird glänzend und staubabweisend.

REF 166-450-00

4,5 kg



Ultraschall-Reinigungslösung

Zum Entfernen von	REF	Menge
Poliermittel, Wachs, Fett	094-610-00	1.000 ml
Gips und gipsgebundener Einbettmasse	094-611-00	1.000 ml
Zahnstein, Zement, Beizrückständen	094-612-00	1.000 ml



Modellherstellung



Sockelgerät

nach Hinz

Zur Fixierung dreidimensional orientierter Kiefermodelle.

Die einheitliche Höhe der Kiefermodelle von 6 cm wird durch das einfach zu handhabende Sockelgerät bestimmt.

REF 050-500-00

1 Stück



Sockelform mit Gelenk

Aus schlagfestem Kunststoff. Zeitraubendes Trimmen der Gipssockel entfällt. Passend zum Sockelgerät nach Hinz.

Material	Farbe	REF	Menge
Kunststoff	weiß	050-501-00	100 Paar



Steg mit Gelenk

Für Sockelform (REF 050-501-00).

Passend zum Sockelgerät nach Hinz.

Material	Farbe	REF	Menge
Kunststoff	weiß	050-503-01	200 Stück

NEU



Kiefermodell-Tray

Mit farbigen Beschriftungsetiketten.

Für 5 Modellpaare, stapelbar.

Maße (B x H x T): 94 mm x 83 mm x 330 mm

Material: Kunststoff

Farbe: weiß

REF 050-502-00

10 Stück

Spangenboxen und Zubehör

Spangenbox mini

Die Mini-Version ist besonders für Einzelgeräte und Mundvorhofplatten (z.B. Ulmer Modell) geeignet.

Material: Kunststoff (formstabil und schlagfest)

Maße (B x H x T): 7,00 cm x 3,30 cm x 4,80 cm

Größe	Farbe	REF	Menge
mini	perlblau	163-602-01	10 Stück
mini	türkis	163-610-01	10 Stück
mini	neonkoralle	163-611-01	10 Stück
mini	neongrün	163-612-01	10 Stück



Spangenbox maxi

Die Maxi-Version ist besonders für bimaxilläre Geräte (z.B. Aktivator, Bionator) geeignet.

Material: Kunststoff (formstabil und schlagfest)

Maße (B x H x T): 7,80 cm x 4,50 cm x 5,80 cm

Größe	Farbe	REF	Menge
maxi	rubinrot	163-701-01	10 Stück
maxi	perlblau	163-702-01	10 Stück
maxi	rosa	163-703-01	10 Stück
maxi	schwarz	163-707-01	10 Stück
maxi	türkis	163-710-01	10 Stück
maxi	neonkoralle	163-711-01	10 Stück
maxi	neongrün	163-712-01	10 Stück
maxi	neongelb	163-713-01	10 Stück



Spangenbox magnum

Die Magnum-Version ist besonders für extrem große FKO-Geräte (z.B. Funktionsregler nach Fränkel,

Erwachsenen-KFO-Apparaturen oder Zahnprothesen) geeignet.

Material: Kunststoff (formstabil und schlagfest)

Maße (B x H x T): 6,80 cm x 4,70 cm x 7,80 cm

Größe	Farbe	REF	Menge
magnum	rubinrot	163-801-01	10 Stück
magnum	perlblau	163-802-01	10 Stück



Spangenboxen und Zubehör



Spangenbox Fußball

Universelle Größe für Platten-Apparaturen, bimaxilläre Geräte, Funktionsregler inkl. Karabinerhaken.

Material: Kunststoff (formstabil und schlagfest)

Farbe	REF	Menge
schwarz-weiß	163-805-01	10 Stück



Karabinerhaken

Zum Anhängen von Spangenboxen an den Gürtel.

REF 163-801-00	10 Stück
----------------	----------



Umhängeband mit Sicherheitsverschluss

Für Spangenboxen, bedruckt mit Dentaurum Logo.

Farbe	REF	Menge
bunt gemischt	163-807-00	25 Stück

KFO-Studien-/Demonstrationsmodelle

Typodont / Dentoform

Studien- und Funktionsprüfgerät für festsitzende Apparaturen. Das Gerät entspricht mechanisch einem Gelenkartikulator. Je nach Aufgabe werden die Metall-/Kunststoffzähne in die Wachsformen aufgestellt, mit Brackets und Bändern versehen und die Bögen einligiert.

Lieferumfang:

Gerät ohne Zähne und Zubehör.

REF 050-801-00

1 Stück



Metall-/Kunststoffzähne

Für Typodont / Dentoform-Gerät (REF 050-801-00). Zahnkronen aus Kunststoff, Zahnwurzeln aus Metall.

REF 050-803-01

28 Stück



Wachsformen

Für Typodont / Dentoform-Gerät (REF 050-801-00). Idealokklusion (OK und UK inkl. 2 Wachsplatten).

REF 050-802-00

1 Paar



KFO-Studienmodell

Angle Klasse I, Normalokklusion

OK und UK aus Kunststoff.

REF 892-001-00

1 Stück



KFO-Studienmodell

Angle Klasse II/1, Distalokklusion mit Tiefbiss

OK und UK aus Kunststoff.

REF 892-002-01

1 Stück



KFO-Studien-/Demonstrationsmodelle



KFO-Studienmodell

Angle Klasse II/2, Distalokklusion mit Deckbiss

OK und UK aus Kunststoff.

REF 892-002-02

1 Stück



KFO-Studienmodell

Angle Klasse III, Mesialokklusion, progene Verzahnung

OK und UK aus Kunststoff.

REF 892-003-00

1 Stück



KFO-Demonstrationsmodell discovery®

Angle Klasse I, Normalokklusion

Roth 22

Bestückt mit:

- discovery® Metallbrackets
- Ortho-Cast M-Series und M-Series mini Bukkalröhrchen
- dentaform® Bändern
- rematitan® LITE Bögen

OK und UK aus Kunststoff, verbunden mit Scharnier.

REF 892-000-07

1 Stück



KFO-Demonstrationsmodell equilibrium® mini / equilibrium® 2

Angle Klasse I, Normalokklusion

Roth 22

Bestückt mit:

- equilibrium® mini und equilibrium® 2 Metallbrackets
- Ortho-Cast M-Series und M-Series mini Bukkalröhrchen
- dentaform® Bänder
- rematitan® LITE Bögen

OK und UK aus Kunststoff, verbunden mit Scharnier.

REF 892-000-14

1 Stück

KFO-Studien-/Demonstrationsmodelle

KFO-Demonstrationsmodell discovery® delight

Bestückt mit:

- discovery® delight Lingualbrackets
- discovery® delight Molarenröhrchen
- rematitan® LITE Lingualbogen
- dentaflex® Lingualbogen

OK und UK aus Kunststoff, verbunden mit Scharnier.



REF 892-000-22

1 Stück



KFO-Demonstrationsmodell discovery® smart

Angle Klasse I, Normalokklusion

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Bestückt mit:

- discovery® smart Metallbrackets
- Ortho-Cast M-Series und M-Series mini Bukkalröhrchen
- rematitan® LITE Bögen

OK und UK aus Kunststoff, verbunden mit Scharnier.

REF 892-000-20

1 Stück

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



KFO-Demonstrationsmodell discovery® pearl

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Bestückt mit:

- discovery® pearl Keramikbrackets
- transluzenter Bogen pearl
- Dentalastics® pearl Ligaturenringe

OK aus Kunststoff.

REF 892-000-18

1 Stück

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



KFO-Demonstrationsmodell discovery® pearl

Roth 22

Bestückt mit:

- discovery® pearl Keramikbrackets, OK/UK 5-5
- Ortho-Cast M-Series Bukkalröhrchen, OK/UK 6
- transluzenter Bogen pearl, OK
- Tensic® Bogen, UK
- Dentalastics® pearl Ligaturenringe

OK und UK aus Kunststoff, verbunden mit Scharnier.

REF 892-000-21

1 Stück



KFO-Studien-/Demonstrationsmodelle



KFO-Demonstrationsmodell discovery® sl

Angle Klasse I, Normalokklusion

Roth 22

Bestückt mit:

- discovery® sl selbstligierenden Metallbrackets
 - Ortho-Cast M-Series mini Bukkalröhrchen
 - Equire Edelstahlbogen, OK
 - rematitan® sl Bogen, UK
- OK und UK aus Kunststoff, verbunden mit Scharnier.

REF 892-000-17

1 Stück



KFO-Demonstrationsmodell discovery® sl 2.0

Angle Klasse I, Normalokklusion

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Bestückt mit:

- discovery® sl 2.0 selbstligierenden Metallbrackets
- Ortho-Cast M-Series und M-Series mini Bukkalröhrchen
- Tensic® Bögen

OK und UK aus Kunststoff, verbunden mit Scharnier.

REF 892-000-19

1 Stück

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



KFO-Demonstrationsmodell prime4me® RETAIN3R

Zur Patienten-Demonstration.

Bestückt mit:

- prime4me® Sockelmodell
- prime4me® RETAIN3R OK
- Transfer tray für prime4me® RETAIN3R

REF 892-000-29

1 Stück

NEU



KFO-Demonstrationsmodell tomas® / amda®

Bestückt mit:

- tomas®-pin EP
 - amda®
 - Lingual-/Palatinalschlössern easy in, aufgeschweißt auf Standard Molarenbänder
- OK aus Kunststoff.

REF 892-000-26

1 Stück



KFO-Studien-/Demonstrationsmodelle

tomas®-demonstration pin SD 08 selbstbohrend

Zur Patienten-Demonstration.

Maßstab 5 : 1

REF 302-007-20

1 Stück



tomas®-demonstration pin EP 08 selbstbohrend

Zur Patienten-Demonstration.

Maßstab 5 : 1

REF 302-007-30

1 Stück



Sonstiges



Ortho Brush

Orthodontische Zahnbürste.

Ideal zur Massage der Zahnfleischpapillen und
Reinigung festsitzender Bracket- und Bandapparaturen.

REF 163-300-00


10 Stück

Standard-Dehnschrauben	Seite	334
Spezial-Dehnschrauben	Seite	337
Variety Dehnschrauben	Seite	350
GNE-Schrauben	Seite	354
Zubehör	Seite	360



Dehnschrauben.

Perfekt in Form, Funktion und Design.

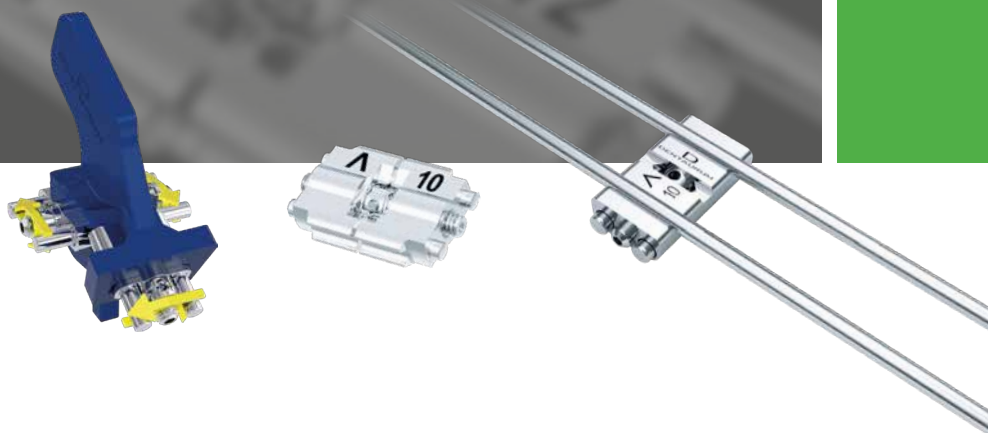

DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com



Perfekt in Form, Funktion und Design.



Breites Produktspektrum.

Das Angebot an Edelstahl-Dehnschrauben bei Dentaureum reicht von einfachen Standard-Dehnschrauben bis hin zu komplexen Spezial-Dehnschrauben. Mit der Neo-VDP nach F.M. Sander* erweitern wir die Spezial-Dehnschrauben um eine moderne, patentierte dreidimensionale Bertoni-Dehnschraube mit Vorschubdoppelstegen nach F.M. Sander*. Darüber hinaus wird die Palette durch besonders bioverträgliche Dehnschrauben wie der Titan hyrax® und der rematitan® Dehnschraube aus Reintitan abgerundet.

Perfekt bis ins Detail.

Dentaureum-Dehnschrauben zeichnen sich u.a. dadurch aus, dass sie bei kleinsten Abmessungen größtmögliche Dehnwege erlauben. Die exakt berechnete Gewindefriktion und der ebenfalls integrierte Rückstell-Stopp garantieren ein gleichmäßiges Öffnen der Schraube ohne selbstständiges Zurückdrehen. Höchste Präzision in der Herstellung und überdurchschnittliche Qualität sorgen für stabile und verwindungssteife Konstruktionen. Zusätzliche Bohrungen im Schraubenkörper sichern den Halt im Kunststoff.



Dentaurum-Dehnschrauben

Für jede Behandlungstechnik die richtige Lösung.

Neo-VDP nach F.M. Sander*

Neueste Generation der Sander-Apparatur.

hyrax®

Spezial-Dehnschraube für Gaumennahterweiterung.

hyrax® click

Die GNE-Schraube mit Rückdrehsicherung.

hyrax® neo

Die Alternative zur klassischen hyrax®-Schraube.

Titan hyrax®

Die weltweit erste GNE-Schraube aus Titan.

Variety

Die vielseitige, multifunktionelle
Spezial-Dehnschraube.

Variety click

Die Spezial-Dehnschraube mit Rückdrehsicherung.

Standard-Dehnschrauben



Dehnschraube Mini


Material: Edelstahl

- mit **zapfenförmigem oder breitem** Dehnschraubenhalter
 - skelettiert
 - Dehnschraubenkörper mit Querbohrungen für die optimale Retention des Kunststoffes
 - Begrenzung des Dehnweges nach Erreichen der Maximaldehnung
- Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).

Indikation: für Unterkiefer Transversaldehnung und Distalisierung oder für besonders schmale Oberkiefer

Drehrichtungspfeil: Kunststoff, weiß

Maximale Dehnung	4 x 1/4 Umdrehung	REF (zapfenförmig)	REF (breit)	Menge
6,5 mm	= 0,70 mm	600-300-10	600-320-10	1 Stück
6,5 mm	= 0,70 mm	600-300-30	600-320-30	10 Stück
6,5 mm	= 0,70 mm	600-300-60	600-320-60	100 Stück

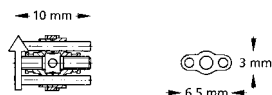

Dehnschraube Medium


Material: Edelstahl

- mit **zapfenförmigem oder breitem** Dehnschraubenhalter
 - skelettiert
 - Dehnschraubenkörper mit Querbohrungen für die optimale Retention des Kunststoffes
 - Begrenzung des Dehnweges nach Erreichen der Maximaldehnung
- Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).

Indikation: für Ober- und Unterkiefer Transversaldehnung und Distalisierung

Drehrichtungspfeil: Kunststoff, leuchtgelb

Maximale Dehnung	4 x 1/4 Umdrehung	REF (zapfenförmig)	REF (breit)	Menge
7,5 mm	= 0,80 mm	600-301-10	600-321-10	1 Stück
7,5 mm	= 0,80 mm	600-301-30	600-321-30	10 Stück
7,5 mm	= 0,80 mm	600-301-60	600-321-60	100 Stück

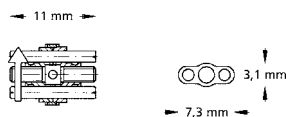

Dehnschraube Maxi

Material: Edelstahl

- mit **zapfenförmigem oder breitem** Dehnschraubenhalter
 - skelettiert
 - Dehnschraubenkörper mit Querbohrungen für die optimale Retention des Kunststoffes
 - Begrenzung des Dehnweges nach Erreichen der Maximaldehnung
- Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).


Indikation: für Oberkiefer Transversaldehnung

Drehrichtungspfeil: Kunststoff, leuchtgelb

Maximale Dehnung	4 x 1/4 Umdrehung	REF (zapfenförmig)	REF (breit)	Menge
7,5 mm	= 0,80 mm	600-302-10	600-322-10	1 Stück
7,5 mm	= 0,80 mm	600-302-30	600-322-30	10 Stück
7,5 mm	= 0,80 mm	600-302-60	600-322-60	100 Stück



→ 11 mm →

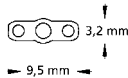

Dehnschraube Magnum

Material: Edelstahl

- mit **zapfenförmigem** Dehnschraubenhalter
 - skelettiert
 - Ausführung: extra kräftig, mit größerem Schraubenkörper
 - Dehnschraubenkörper mit Querbohrungen für die optimale Retention des Kunststoffes
 - Begrenzung des Dehnweges nach Erreichen der Maximaldehnung
- Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).



Indikation: für Oberkiefer Transversaldehnung und bimaxilläre FKO-Geräte

Drehrichtungspfeil: Kunststoff, leuchtgelb

Maximale Dehnung	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
11,0 mm	= 0,80 mm	600-303-10	1 Stück
11,0 mm	= 0,80 mm	600-303-30	10 Stück
11,0 mm	= 0,80 mm	600-303-60	100 Stück



→ 14,5 mm →

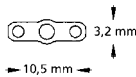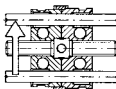

Dehnschrauben

Standard-Dehnschrauben



rematitan® Dehnschraube Medium

Material: Titan


- mit **zapfenförmigem** Dehnschraubenhalter
 - skelettiert
 - Dehnschraubenkörper mit Querbohrungen für die optimale Retention des Kunststoffes
 - Begrenzung des Dehnweges nach Erreichen der Maximaldehnung
- Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).

Indikation: für Ober- und Unterkiefer Transversaldehnung und Distalisierung

Drehrichtungspfeil: Kunststoff, perlblau

Maximale Dehnung	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
7,5 mm	= 0,80 mm	600-400-10	1 Stück
7,5 mm	= 0,80 mm	600-400-30	10 Stück

→ 11 mm →

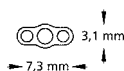

Trapez-Dehnschraube

Material: Edelstahl



- mit **zapfenförmigem** Dehnschraubenhalter
 - skelettiert
 - Dehnschraubenkörper mit Querbohrungen für die optimale Retention des Kunststoffes
 - Begrenzung des Dehnweges nach Erreichen der Maximaldehnung
- Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).

Indikation: für Transversaldehnung schmaler Oberkiefer und als Aktivatorschraube für bimaxilläre FKO-Geräte

Drehrichtungspfeil: Kunststoff, leuchtgelb

Maximale Dehnung	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
7,5 mm	= 0,80 mm	600-310-30	10 Stück

→ 14,5 mm →
→ 11 mm →

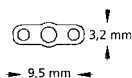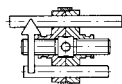

Sektorenschraube Mini

Material: Edelstahl

- mit **breitem** Dehnschraubenhalter
- skelettartig
- Führungsstift: U-förmig, **gerade**


Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).

Indikation: für Einzelzahnbewegungen

Drehrichtungspfeil: aufgedruckt, blau-gelb

Maximale Dehnung	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
4,0 mm	= 0,35 mm	600-502-10	1 Stück
4,0 mm	= 0,35 mm	600-502-30	10 Stück
4,0 mm	= 0,35 mm	600-502-60	100 Stück

← 9,5 mm →

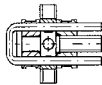

Sektorenschraube Mini

Material: Edelstahl

- mit **breitem** Dehnschraubenhalter
- skelettartig
- Führungsstift: U-förmig, **abgewinkelt nach unten**



Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).

Indikation: für Einzelzahnbewegungen

Drehrichtungspfeil: aufgedruckt, blau-gelb

Maximale Dehnung	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
4,0 mm	= 0,35 mm	600-503-10	1 Stück
4,0 mm	= 0,35 mm	600-503-30	10 Stück
4,0 mm	= 0,35 mm	600-503-60	100 Stück

← 9,5 mm →

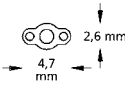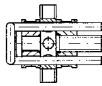

Spezial-Dehnschrauben



Sektorenschraube Medium

Material: Edelstahl


- mit **zapfenförmigem** Dehnschraubenhalter
 - skelettiert
 - Führungsstift: **gerade**, mit Pilzkopffretention
 - Dehnschraubenkörper mit Querbohrungen für die optimale Retention des Kunststoffes
 - Begrenzung des Dehnweges nach Erreichen der Maximaldehnung
- Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).

Indikation: für **Distalisierung und Segmentierung von Apparaturen, Y-Platten**

Drehrichtungspfeil: Kunststoff, leuchtgelb

Maximale Dehnung	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
6,0 mm	= 0,40 mm	600-500-10	1 Stück
6,0 mm	= 0,40 mm	600-500-30	10 Stück
6,0 mm	= 0,40 mm	600-500-60	100 Stück

→ 12,5 mm →

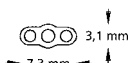

Sektorenschraube Medium

Material: Edelstahl

- mit **zapfenförmigem** Dehnschraubenhalter
 - skelettiert
 - Führungsstift: U-förmig, **abgewinkelt nach unten**
 - Dehnschraubenkörper mit Querbohrungen für die optimale Retention des Kunststoffes
- Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).



Indikation: für **Distalisierung und Segmentierung von Apparaturen,**

Protrusion eines Frontzahnsegmentes

Drehrichtungspfeil: Kunststoff, leuchtgelb

Maximale Dehnung	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
6,0 mm	= 0,40 mm	600-501-10	1 Stück
6,0 mm	= 0,40 mm	600-501-30	10 Stück
6,0 mm	= 0,40 mm	600-501-60	100 Stück

→ 13 mm →

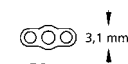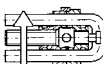

Zugschraube Extra Mini

Material: Edelstahl


- mit **zapfenförmigem** Dehnschraubenhalter
- Schraubengehäuse: geschlossen
- Führungstift: U-förmig, gerade

Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).

Indikation: für Lückenschluss und Einzelzahnbewegungen

Drehrichtungspfeil: aufgedruckt, blau-gelb

Maximaler Zugweg	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
3,0 mm	= 0,40 mm	600-602-30	10 Stück

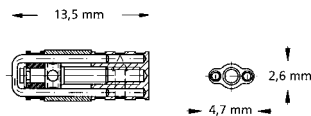

Zugschraube Mini

Material: Edelstahl


- mit **zapfenförmigem** Dehnschraubenhalter
- Schraubengehäuse: geschlossen
- Führungstift: U-förmig, gerade

Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).

Indikation: für Lückenschluss und Einzelzahnbewegungen

Drehrichtungspfeil: aufgedruckt, blau-gelb

Maximaler Zugweg	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
2,5 mm	= 0,40 mm	600-601-30	10 Stück

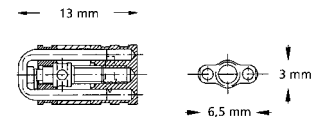

Spezial-Dehnschrauben



Zugschraube Medium

Material: Edelstahl



- mit **zapfenförmigem** Dehnschraubenhalter
- Schraubengehäuse: geschlossen
- Führungsstift: U-förmig, gerade

Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).

Indikation: für Lückenschluss und Einzelzahnbewegungen

Drehrichtungspfeil: aufgedruckt, blau-gelb

Maximaler Zugweg	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
4,5 mm	= 0,40 mm	600-600-30	10 Stück

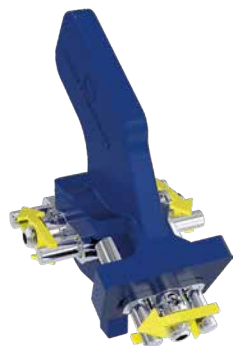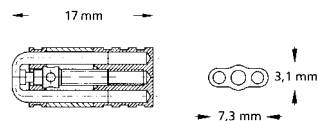

Neo-Bertoni Mehrsektorenschraube – drei Sektionsbereiche (Typ A)

Material: Edelstahl


- anatomisch abgewinkelte Mehrsektorenschraube
- drei unabhängig voneinander wirkende Sektionsbereiche
- Gesamtdehnung pro Segment gleich

Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).

Indikation: für kombinierte Transversal- und Protrusionsbewegungen bei Y-Platten

Drehrichtungspfeil: Kunststoff, leuchtgelb

Maximale Dehnung	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
3,5 mm / Segment	= 0,40 mm / Segment	600-131-10	1 Stück

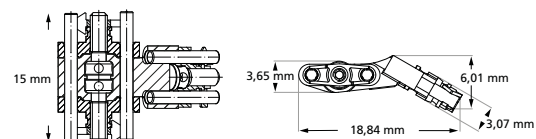

NEU

Neo-Bertoni Mehrsektorenschraube – zwei Sektionsbereiche (Typ B)

Material: Edelstahl


- anatomisch abgewinkelte Mehrsektorenschraube
- zwei unabhängig voneinander wirkende Sektionsbereiche (symmetrische Transversaldehnung)
- Gesamtdehnung pro Segment gleich

Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).

Indikation: für kombinierte Transversal- und Protrusionsbewegungen bei Y-Platten

Drehrichtungspfeil: Kunststoff, leuchtgelb

Maximale Dehnung	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
3,5 mm / Segment	= 0,40 mm / Segment	600-132-10	1 Stück

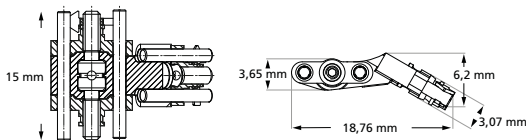

NEU



Neo-Bertoni 3D

Material: Edelstahl


- anatomisch, individuell einstellbare Mehrsektorenschraube
- das frontale Segment kann individuell dem Gaumen angepasst werden
- zwei unabhängig voneinander wirkende Sektionsbereiche (symmetrische Transversaldehnung)
- Gesamtdehnung pro Segment gleich

Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).

Indikation: für kombinierte Transversal- und Protrusionsbewegungen bei Y-Platten

Drehrichtungspfeil: Kunststoff, leuchtgelb


Maximale Dehnung	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
3,5 mm / Segment	= 0,40 mm / Segment	600-133-10	1 Stück

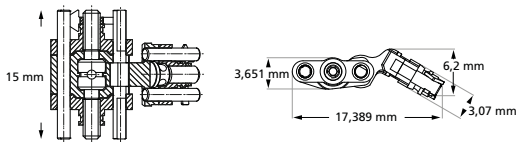

NEU



Spezial-Dehnschrauben

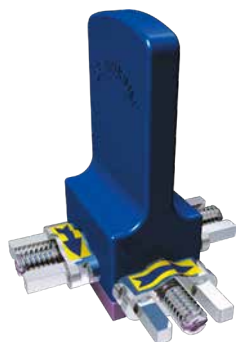

Mehrsektorenschraube nach Bertoni – drei Sektionsbereiche (Typ A)

Material: Edelstahl



- verstärkte Führungen
- drei unabhängig voneinander wirkende Sektionsbereiche
- Gesamtdehnung pro Segment gleich

Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).

Indikation: für kombinierte Transversal- und Protrusionsbewegungen bei Y-Platten

Drehrichtungspfeil: aufgedruckt, blau-gelb

Maximale Dehnung	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
4,0 mm / Segment	= 0,35 mm / Segment	602-605-10	1 Stück

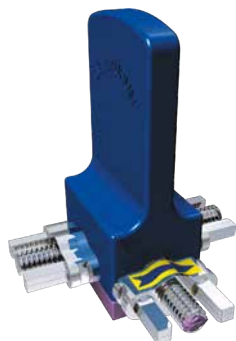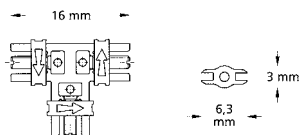

Mehrsektorenschraube nach Bertoni – zwei Sektionsbereiche (Typ B)

Material: Edelstahl


- verstärkte Führungen
- zwei unabhängig voneinander wirkende Sektionsbereiche (symmetrische Transversaldehnung)
- Gesamtdehnung pro Segment gleich

Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).

Indikation: für kombinierte Transversal- und Protrusionsbewegungen bei Y-Platten

Drehrichtungspfeil: aufgedruckt, blau-gelb

Maximale Dehnung	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
4,0 mm / Segment	= 0,35 mm / Segment	602-606-10	1 Stück

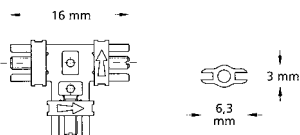

Mehrsektorenschraube nach Steiner


Material: Edelstahl

- verstärkte Führungen
 - individuell verformbarer Mittelsteg für die Anpassung an unterschiedliche Gaumendachwölbungen
 - zwei unabhängig voneinander wirkende Sektionsbereiche (symmetrische Transversaldehnung)
 - Gesamtdehnung pro Segment gleich
- Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).

Indikation: für kombinierte Transversal- und Protrusionsbewegungen bei Y-Platten

Drehrichtungspfeil: aufgedruckt, blau-gelb

Maximale Dehnung	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
4,0 mm / Segment	= 0,35 mm / Segment	602-604-10	1 Stück

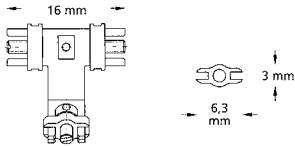

Spezial-Dehnschrauben



Fächerdehnschraube

Material: Edelstahl

- mit **breitem** Dehnschraubenhalter
- fächerartige Öffnung der Plattenteile

Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).

Indikation: für **anteriore oder posteriore Dehnung im Oberkiefer**

Drehrichtungspfeil: aufgedruckt, blau-gelb

Maximale Dehnung	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
7,0 mm	= 0,80 mm	606-600-00	1 Stück
7,0 mm	= 0,80 mm	606-600-30	10 Stück

↔ 12 mm ↔



Unterkieferbogenschraube nach Müller

Material: Edelstahl


- mit **zapfenförmigem** Dehnschraubenhalter
 - minimale fächerartige Öffnung der Bogenschraube, dem Frontzahnbogen entsprechend
- Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).

Indikation: für **transversale Erweiterung des Unterkiefer-Frontzahnbogens**

Drehrichtungspfeil: Kunststoff, leuchtgelb

Maximale Dehnung	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
5,0 mm	= 0,80 mm	606-701-00	1 Stück
5,0 mm	= 0,80 mm	606-701-30	10 Stück

↔ 20 mm ↔

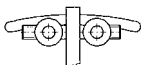

Neo-VDP nach F.M. Sander*, Set


Material: Edelstahl

Patenterte dreidimensionale Bertoni-Dehnschraube mit Vorschubdoppelstegen nach F.M. Sander*. Diese neueste

Generation der Sander-Apparatur ermöglicht neben der Klasse II/1 Behandlung erstmals auch Korrekturen der Klasse II/2 durch das sagittale Dehnelement.

REF 600-120-00	1 Set
Inhalt:	
1 x Neo-VDP nach F.M. Sander	REF 600-121-10
1 x Neo-VDP Montageschablone	REF 600-122-00
1 x Neo-VDP Führungsschablone (für schiefe Ebene)	REF 600-123-00

NEU

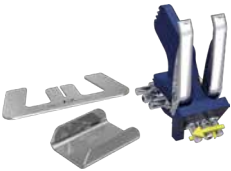


Neo-VDP nach F.M. Sander*

Material: Edelstahl

Drehrichtungspfeil: Kunststoff, leuchtgelb

Maximale Dehnung	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
4,0 mm / Segment	= 0,35 mm / Segment	600-121-10	1 Stück

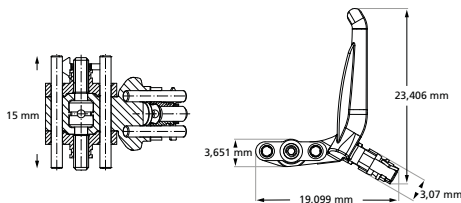

NEU



Neo-VDP Montageschablone

nach Sander & Höbel

In Kombination mit den 55°, 60° und 65° Schlitten im Dehnschraubenhalter der Neo-VDP kann der Winkel zur Kauebene patientenindividuell eingestellt werden.

REF 600-122-00	1 Stück
----------------	---------

NEU



Neo-VDP Führungsschablone

nach Sander & Höbel

Zur Herstellung der schiefen Ebene im Unterkiefer.

REF 600-123-00	10 Stück
----------------	----------

NEU



Spezial-Dehnschrauben



Elastisches Vorschubdoppelplatten-System nach Schaneng, Set


Material: Edelstahl

- elastisches intermaxilläres Führungselement
- Oberkiefer-Dehnschrauben mit intermaxillärem Vorschubdoppelplatten-Steg. Doppel-Loop, abgewachst

Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).

Indikation: zur Behandlung der Angle Klasse II/1 (Distalbisslage), zur Vorverlagerung des Unterkiefers

REF 600-000-00	1 Set
Inhalt:	
3 x OK-Dehnschraube mit elastischem Vorschubdoppelplatten-Steg	REF 600-001-00
1 x Adapter, schmal	REF 600-003-00
1 x Adapter, breit	REF 600-004-00
1 x Montage-Schablone	REF 600-005-00

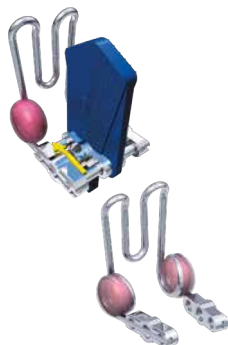

Elastischer Vorschubdoppelplatten-Steg nach Schaneng

Mit Doppel-Loop, abgewachst.

Material: Edelstahl

Steglänge: 14,0 mm

Ausführung	REF	Menge	REF	Menge
mit OK-Dehnschraube	600-001-00	1 Stück	600-001-30	10 Stück
ohne OK-Dehnschraube	600-002-00	1 Stück	600-002-30	10 Stück



Adapter für elastischen Vorschubdoppelplatten-Steg nach Schaneng

Zur Herstellung der schiefen Ebene im Unterkiefer.

Adapter	Breite	REF	Menge
schmal	14,0 mm	600-003-00	10 Stück
breit	18,0 mm	600-004-00	10 Stück



Montage-Schablone nach Schaneng

Montage-Schablone zur Herstellung des Neigungswinkels von 60°.

Material: Edelstahl

REF 600-005-00	1 Stück
----------------	---------

Dehnschraube für geteilten Aktivator

Material: Edelstahl

- mit **zapfenförmigem** Dehnschraubenhalter
- verstärkte Führungen

Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).



Indikation: für **separate Ober- oder Unterkieferdehnung**

Drehrichtungspfeil: aufgedruckt, blau-gelb

Maximale Dehnung	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
7,0 mm	= 0,80 mm	600-610-00	1 Stück
7,0 mm	= 0,80 mm	600-610-30	10 Stück



→ 14,5 mm →

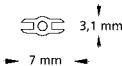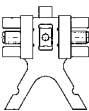

Dehnschraube für Progenie-Aktivator nach Weise

Material: Edelstahl

- ohne Dehnschraubenhalter
 - zur Herstellung von horizontal geteilten Aktivatoren, die eine Verbindung bzw. Verschiebung beider Teilungsebenen ermöglichen
 - stabile Verbindung der Oberkiefer-Platte mit der Unterkiefer-Platte durch einen starken U-förmigen Bügel
- Mit Dehnschraubenschlüssel, Standard (gerade, klein).



Indikation: zur **Behandlung der Angle Klasse III (Progenie)**, für eine **Distalverschiebung des Unterkiefers**

Drehrichtungspfeil: aufgedruckt, blau-gelb

Maximale Dehnung	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
5,0 mm	= 0,90 mm	603-000-00	1 Stück



→ 14 mm →

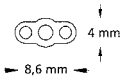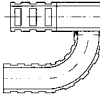

Spezial-Dehnschrauben




Federbolzenschrauben, Set

Material: Edelstahl

- zierliche Ausführung
- konstanter, elastischer und fein dosierbarer Druck auf den zu bewegenden Zahn
- mit drei verschiedenen Schraubenlängen (4 / 6 / 8 mm) kann, entsprechend dem Behandlungsfortschritt, eine Protrusion von bis zu 7 mm erreicht werden

Indikation: für Einzelzahnbewegungen

4 x 1/4 Umdrehung = 0,35 mm

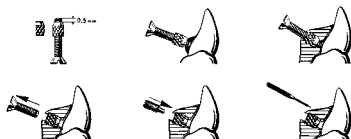

REF 609-500-00

1 Set

Inhalt:

10 x Federbolzenschraube, 4 mm	REF 609-004-00
10 x Federbolzenschraube, 6 mm	REF 609-006-00
10 x Federbolzenschraube, 8 mm	REF 609-008-00
10 x Montageschraube	REF 609-100-00
10 x gerändelte Mutter	REF 609-200-30
1 x Gewindeschneider	REF 609-300-01
1 x Schraubendreher	REF 609-400-00



Federbolzenschraube

Material: Edelstahl

- zierliche Ausführung
- konstanter, elastischer und fein dosierbarer Druck auf den zu bewegenden Zahn

Indikation: für Einzelzahnbewegungen

Länge	4 x 1/4 Umdrehung	REF	Menge
4,0 mm	= 0,35 mm	609-004-00	10 Stück
6,0 mm	= 0,35 mm	609-006-00	10 Stück
8,0 mm	= 0,35 mm	609-008-00	10 Stück



Montageschraube

Für Federbolzenschraube.

Zum Einbau der Federbolzenschrauben im Kunststoff notwendig.

Material: Edelstahl

Länge	REF	Menge
12,0 mm	609-100-00	10 Stück



Gerändelte Mutter

Für Federbolzenschraube.

Wird im Kunststoff eingebettet oder an Drahtelemente angeschweißt.

Material: Edelstahl

Länge	REF	Menge
3,0 mm	609-200-30	10 Stück

Gewindeschneider

Für Federbolzenschraube.

Material: Edelstahl

REF 609-300-01

1 Stück

NEU



Schraubendreher

Für Federbolzenschraube.

Zum Aktivieren der Federbolzenschrauben.

Material: Aluminium

REF 609-400-00

1 Stück



Variety Dehnschrauben



Variety click Mini – 8

Einführige Spezial-Dehnschraube mit Rückdrehsicherung Click. In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- die perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- sicheres Aktivieren / Deaktivieren der Schraube mit deutlichem Spüren des Einrastens nach einer $\frac{1}{4}$ Umdrehung
- bruchstabile Retentionsarme und stabile Führung über den gesamten Dehnweg
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert

Packung (1 Stück / 50 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 12,9 mm

Schraubenkörper: 9,6 mm

4 x $\frac{1}{4}$ Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Maximale Dehnung	REF (ohne Retentionsarme)	REF (gerade Retentionsarme)	Menge
8,0 mm	602-836-12	602-836-10	1 Stück
8,0 mm	602-836-32	602-836-30	10 Stück
8,0 mm		602-836-50	50 Stück



Variety click SP (small palate) Mini – 8

Einführige Spezial-Dehnschraube mit Rückdrehsicherung Click. Zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- die perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase
- besonders geeignet für sehr schmale Kiefer
- Abbiegen der Retentionsarme sehr nah am Schraubenkörper möglich
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- sicheres Aktivieren / Deaktivieren der Schraube mit deutlichem Spüren des Einrastens nach einer $\frac{1}{4}$ Umdrehung
- bruchstabile Retentionsarme und stabile Führung über den gesamten Dehnweg
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert

Packung (1 Stück / 50 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 12,9 mm


Schraubenkörper: 9,6 mm

4 x $\frac{1}{4}$ Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Maximale Dehnung	REF (ohne Retentionsarme)	REF (gerade Retentionsarme)	Menge
8,0 mm	602-838-12	602-838-10	1 Stück
8,0 mm	602-838-32	602-838-30	10 Stück
8,0 mm		602-838-50	50 Stück

Maße Variety click / Variety click SP Mini – 8

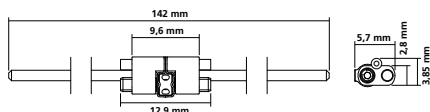

Variety click Maxi – 12

Einführige Spezial-Dehnschraube mit Rückdrehsicherung Click. In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- die perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- sicheres Aktivieren / Deaktivieren der Schraube mit deutlichem Spüren des Einrastens nach einer 1/4 Umdrehung
- bruchstabile Retentionsarme und stabile Führung über den gesamten Dehnweg
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert

Packung (1 Stück / 50 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 17,2 mm

Schraubenkörper: 9,6 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl



Maximale Dehnung	REF (ohne Retentionsarme)	REF (gerade Retentionsarme)	Menge
12,0 mm	602-837-12	602-837-10	1 Stück
12,0 mm	602-837-32	602-837-30	10 Stück
12,0 mm		602-837-50	50 Stück

Variety click SP (small palate) Maxi – 12

Einführige Spezial-Dehnschraube mit Rückdrehsicherung Click. In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- die perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase
- besonders geeignet für sehr schmale Kiefer
- Abbiegen der Retentionsarme sehr nah am Schraubenkörper möglich
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- sicheres Aktivieren / Deaktivieren der Schraube mit deutlichem Spüren des Einrastens nach einer 1/4 Umdrehung
- bruchstabile Retentionsarme und stabile Führung über den gesamten Dehnweg
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert

Packung (1 Stück / 50 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 17,2 mm


Schraubenkörper: 9,6 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm


Material: Edelstahl



Maximale Dehnung	REF (ohne Retentionsarme)	REF (gerade Retentionsarme)	Menge
12,0 mm	602-839-12	602-839-10	1 Stück
12,0 mm	602-839-32	602-839-30	10 Stück
12,0 mm		602-839-50	50 Stück

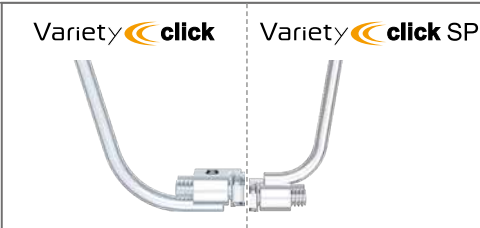

Maße Variety click/Variety click SP Maxi – 12

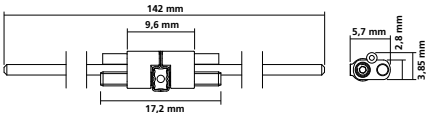

Variety Dehnschrauben



Variety Mini – 8

Einführige Spezial-Dehnschraube. In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- bruchstabile Retentionsarme und stabile Führung über den gesamten Dehnweg
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück / 50 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 12,9 mm

Schraubenkörper: 9,6 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Maximale Dehnung	REF (ohne Retentionsarme)	REF (gerade Retentionsarme)	Menge
8,0 mm	602-815-12	602-815-10	1 Stück
8,0 mm	602-815-32	602-815-30	10 Stück
8,0 mm		602-815-50	50 Stück



Variety SP (small palate) Mini – 8

Einführige Spezial-Dehnschraube. In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- besonders geeignet für sehr schmale Kiefer
- Abbiegen der Retentionsarme sehr nah am Schraubenkörper möglich
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- bruchstabile Retentionsarme und stabile Führung über den gesamten Dehnweg
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück / 50 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 12,9 mm


Schraubenkörper: 9,6 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Maximale Dehnung	REF (ohne Retentionsarme)	REF (gerade Retentionsarme)	Menge
8,0 mm	602-819-12	602-819-10	1 Stück
8,0 mm	602-819-32	602-819-30	10 Stück
8,0 mm		602-819-50	50 Stück

Maße Variety / Variety SP Mini – 8

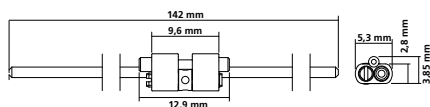

Variety Maxi – 12

Einführige Spezial-Dehnschraube. In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- bruchstabile Retentionsarme und stabile Führung über den gesamten Dehnweg
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück / 50 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 14,9 mm

Schraubenkörper: 9,6 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl



Maximale Dehnung	REF (ohne Retentionsarme)	REF (gerade Retentionsarme)	Menge
12,0 mm	602-806-12	602-806-10	1 Stück
12,0 mm	602-806-32	602-806-30	10 Stück
12,0 mm		602-806-50	50 Stück



Variety SP (small palate) Maxi – 12

Einführige Spezial-Dehnschraube. In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- besonders geeignet für sehr schmale Kiefer
- Abbiegen der Retentionsarme sehr nah am Schraubenkörper möglich
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- bruchstabile Retentionsarme und stabile Führung über den gesamten Dehnweg
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück / 50 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 14,9 mm

Schraubenkörper: 9,6 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl



Maximale Dehnung	REF (ohne Retentionsarme)	REF (gerade Retentionsarme)	Menge
12,0 mm	602-809-12	602-809-10	1 Stück
12,0 mm	602-809-32	602-809-30	10 Stück
12,0 mm		602-809-50	50 Stück



Variety



Variety SP



Maße Variety / Variety SP Maxi – 12

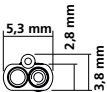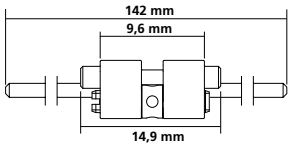

GNE-Schrauben



Titan hyrax® Maxi – 12

GNE-Schraube aus Titan

Für Gaumennaherweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

Die Verankerung an den Zähnen erfolgt über in Titan gegossene und angelaserte Kappenschienen oder alternativ mittels Kunststoff-Kappenschienen aus Orthocryl® Kunststoff.




Packung (1 Stück / 50 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Schraubenkörper: 14,4 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Titan

Maximale Dehnung	REF (ohne Retentionsarme)	REF (gerade Retentionsarme)	Menge
12,0 mm	602-810-12	602-810-10	1 Stück
12,0 mm	602-810-32	602-810-30	10 Stück
12,0 mm		602-810-50	50 Stück

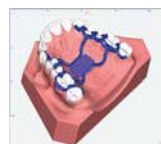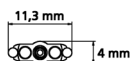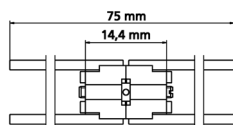

rematitan® Stangendraht

Titan Grade 1

Für Laserschweißungen.

Norm: DIN EN ISO 28319, DIN EN ISO 5832-2

ø	Länge	REF	Menge
1,00 mm / 39	à 100 mm	528-041-00	10 Stück
1,20 mm / 47	à 100 mm	528-042-00	10 Stück



hyrax® click Mini – 7

GNE-Schraube mit Rückdrehsicherung Click

Für eine effiziente und sichere Gaumennahterweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- die perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase
- sicheres Aktivieren / Deaktivieren der Schraube mit deutlichem Spüren des Einrastens nach einer 1/4 Umdrehung
- kein unbeabsichtigtes Zurückdrehen beim Aktivieren durch das Herausziehen des Sicherheitsschlüssels
- Dehnwegbegrenzung, somit kein Auseinanderfallen der Schraube am Ende der Behandlung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- bruchstabile Retentionsarme und stabile Führung über den gesamten Dehnweg
- abgesetzter Körper zum frühestmöglichen Abwinkeln der Arme
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert




Packung (1 Stück / 50 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Schraubenkörper: 9,8 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Maximale Dehnung	REF (ohne Retentionsarme)	REF (gerade Retentionsarme)	REF (abgewinkelte Retentionsarme)	Menge
7,0 mm	602-830-12	602-830-10	602-831-10	1 Stück
7,0 mm	602-830-32	602-830-30	602-831-30	10 Stück
7,0 mm		602-830-50	602-831-50	50 Stück

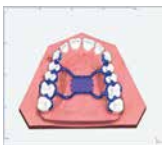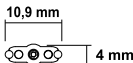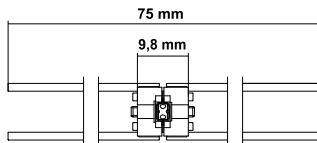

hyrax® click Medium – 10

GNE-Schraube mit Rückdrehsicherung Click

Für eine effiziente und sichere Gaumennahterweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- die perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase
- sicheres Aktivieren / Deaktivieren der Schraube mit deutlichem Spüren des Einrastens nach einer 1/4 Umdrehung
- kein unbeabsichtigtes Zurückdrehen beim Aktivieren durch das Herausziehen des Sicherheitsschlüssels
- Dehnwegbegrenzung, somit kein Auseinanderfallen der Schraube am Ende der Behandlung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- bruchstabile Retentionsarme und stabile Führung über den gesamten Dehnweg
- abgesetzter Körper zum frühestmöglichen Abwinkeln der Arme
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert


Packung (1 Stück / 50 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Schraubenkörper: 12,8 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Maximale Dehnung	REF (ohne Retentionsarme)	REF (gerade Retentionsarme)	REF (abgewinkelte Retentionsarme)	Menge
10,0 mm	602-832-12	602-832-10	602-833-10	1 Stück
10,0 mm	602-832-32	602-832-30	602-833-30	10 Stück
10,0 mm		602-832-50	602-833-50	50 Stück

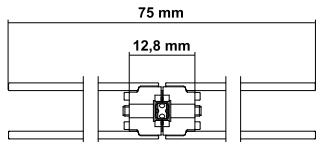

GNE-Schrauben



hyrax® click Maxi – 12

GNE-Schraube mit Rückdrehsicherung Click

Für eine effiziente und sichere Gaumennaherweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- die perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase
- sicheres Aktivieren / Deaktivieren der Schraube mit deutlichem Spüren des Einrastens nach einer 1/4 Umdrehung
- kein unbeabsichtigtes Zurückdrehen beim Aktivieren durch das Herausziehen des Sicherheitsschlüssels
- Dehnwegbegrenzung, somit kein Auseinanderfallen der Schraube am Ende der Behandlung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- bruchstabile Retentionsarme und stabile Führung über den gesamten Dehnweg
- abgesetzter Körper zum frühestmöglichen Abwinkeln der Arme
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert


Packung (1 Stück / 50 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Schraubenkörper: 14,8 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Maximale Dehnung	REF (ohne Retentionsarme)	REF (gerade Retentionsarme)	REF (abgewinkelte Retentionsarme)	Menge
12,0 mm	602-834-12	602-834-10	602-835-10	1 Stück
12,0 mm	602-834-32	602-834-30	602-835-30	10 Stück
12,0 mm		602-834-50	602-835-50	50 Stück

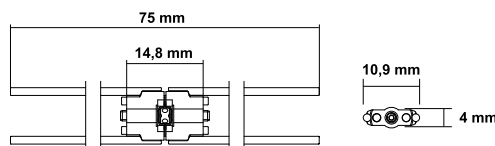

tomas®-RPE eyelet

(Kopplungselement für GNE-Schrauben)

Öse zur direkten Kopplung zwischen dem tomas®-pin und allen hyrax® GNE-Schrauben. Mit zwei Haltern zur leichteren Platzierung auf dem Arbeitsmodell.

Einsatz für Hybrid GNE-Apparatur oder skelettale GNE-Apparatur nach Pin-Last® approach.

Außen ø Eyelet	Innen ø Eyelet	Dicke Eyelet	REF	Menge
5,0 mm	oben 3,0 mm unten 2,3 mm	1,5 mm	302-602-00	12 Stück + 2 Halter

hyrax® Mini – 7

GNE-Schraube

Für Gaumennahterweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.


- Dehnwegbegrenzung, somit kein Auseinanderfallen der Schraube am Ende der Behandlung
 - kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
 - bruchstabile Retentionsarme und stabile Führung über den gesamten Dehnweg
 - abgesetzter Körper zum frühestmöglichen Abwinkeln der Arme
 - Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
 - Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
 - Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich
- Packung (1 Stück / 50 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Schraubenkörper: 9,4 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Maximale Dehnung	REF (ohne Retentionsarme)	REF (gerade Retentionsarme)	REF (abgewinkelte Retentionsarme)	Menge
7,0 mm	602-800-12	602-800-10	602-801-10	1 Stück
7,0 mm	602-800-32	602-800-30	602-801-30	10 Stück
7,0 mm		602-800-50	602-801-50	50 Stück

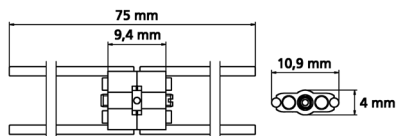

hyrax® Medium – 10

GNE-Schraube

Für Gaumennahterweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.


- Dehnwegbegrenzung, somit kein Auseinanderfallen der Schraube am Ende der Behandlung
 - kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
 - bruchstabile Retentionsarme und stabile Führung über den gesamten Dehnweg
 - abgesetzter Körper zum frühestmöglichen Abwinkeln der Arme
 - Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
 - Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
 - Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich
- Packung (1 Stück / 50 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Schraubenkörper: 12,4 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Maximale Dehnung	REF (ohne Retentionsarme)	REF (gerade Retentionsarme)	REF (abgewinkelte Retentionsarme)	Menge
10,0 mm	602-808-12	602-808-10	602-840-10	1 Stück
10,0 mm	602-808-32	602-808-30	602-840-30	10 Stück
10,0 mm		602-808-50	602-840-50	50 Stück

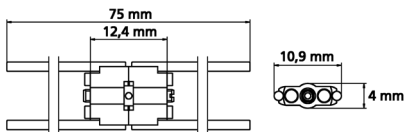

GNE-Schrauben



hyrax® Maxi – 12

GNE-Schraube

Für Gaumennaherweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- Dehnwegbegrenzung, somit kein Auseinanderfallen der Schraube am Ende der Behandlung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- bruchstabile Retentionsarme und stabile Führung über den gesamten Dehnweg
- abgesetzter Körper zum frühestmöglichen Abwinkeln der Arme
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich


Packung (1 Stück / 50 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Schraubenkörper: 14,4 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Maximale Dehnung	REF (ohne Retentionsarme)	REF (gerade Retentionsarme)	REF (abgewinkelte Retentionsarme)	Menge
12,0 mm	602-811-12	602-811-10	602-812-10	1 Stück
12,0 mm	602-811-32	602-811-30	602-812-30	10 Stück
12,0 mm		602-811-50	602-812-50	50 Stück

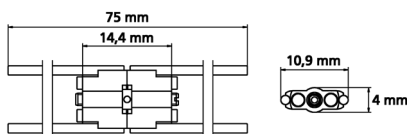

hyrax® neo Mini – 7

GNE-Schraube

Für Gaumennaherweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- (keine aktive) Dehnwegbegrenzung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- TAD optimiertes Design
- bruchstabile Retentionsarme und stabile Führung über den gesamten Dehnweg
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich



Packung (1 Stück / 50 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Schraubenkörper: 11,2 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Maximale Dehnung	REF (ohne Retentionsarme)	REF (gerade Retentionsarme)	Menge
7,0 mm	602-845-12	602-845-10	1 Stück
7,0 mm	602-845-32	602-845-30	10 Stück
7,0 mm		602-845-50	50 Stück

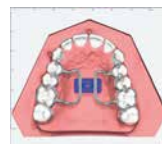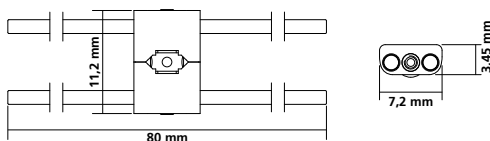

hyrax® neo Medium – 10

GNE-Schraube

Für Gaumennahterweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.




- (keine aktive) Dehnwegbegrenzung
 - kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
 - TAD optimiertes Design
 - bruchstabile Retentionsarme und stabile Führung über den gesamten Dehnweg
 - Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
 - Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
 - Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich
- Packung (1 Stück / 50 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Schraubenkörper: 12,4 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Maximale Dehnung	REF (ohne Retentionsarme)	REF (gerade Retentionsarme)	Menge
10,0 mm	602-846-12	602-846-10	1 Stück
10,0 mm	602-846-32	602-846-30	10 Stück
10,0 mm		602-846-50	50 Stück

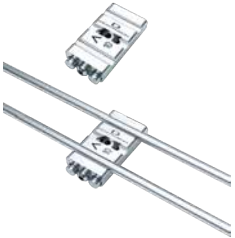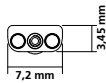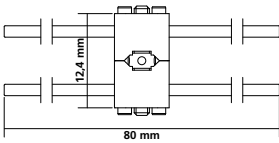

hyrax® neo Maxi – 12

GNE-Schraube

Für Gaumennahterweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.



- (keine aktive) Dehnwegbegrenzung
 - kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
 - TAD optimiertes Design
 - bruchstabile Retentionsarme und stabile Führung über den gesamten Dehnweg
 - Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
 - Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
 - Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich
- Packung (1 Stück / 50 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.


Schraubenkörper: 14,4 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Maximale Dehnung	REF (ohne Retentionsarme)	REF (gerade Retentionsarme)	Menge
12,0 mm	602-847-12	602-847-10	1 Stück
12,0 mm	602-847-32	602-847-30	10 Stück
12,0 mm		602-847-50	50 Stück

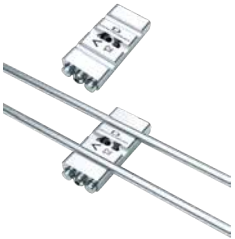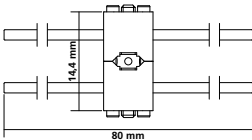

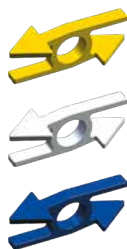

Drehrichtungspfeil

Für Dehnschrauben.

Farbe	REF	Menge
gelb	611-130-00	50 Stück
weiß	611-131-00	50 Stück
perlblau	611-132-00	50 Stück



Universal-Biegeschlüssel

Zum leichten und schonenden Biegen der Retentionsarme von hyrax® und Variety Schrauben ohne Verwendung zusätzlicher Zangen (Hebelgesetz).

Material: Edelstahl

REF 611-122-00	1 Stück
----------------	---------



Sicherheitsschlüssel

Passend für alle Dentaaurum hyrax® und Variety Schrauben. Zur sicheren Aktivierung der Dehnschrauben bei festsitzenden Apparaturen beim Patienten.

REF 611-120-01	10 Stück
----------------	----------



Dehnschraubenschlüssel, Standard gerade, klein

Passend für alle Dentaaurum-Dehnschrauben. Zur Aktivierung aller Dehnschrauben bei herausnehmbaren Apparaturen (außerhalb des Mundes).

Material: Edelstahl

REF 611-115-00	1 Stück
REF 611-115-30	10 Stück
REF 611-115-60	100 Stück



Dehnschraubenschlüssel, groß mit verlängertem Griff

Passend für alle Dentaaurum-Dehnschrauben. Zur Aktivierung aller Dehnschrauben bei herausnehmbaren Apparaturen (außerhalb des Mundes).

Material: Edelstahl

REF 611-116-00	1 Stück
----------------	---------

Dehnschrauben Musteretui

Bei dem Inhalt des Dehnschrauben Musteretuis handelt es sich um eine Auswahl unseres Dehnschrauben-Programms und dient ausschließlich zu Werbe- und Demonstrationszwecken. Der Inhalt dieses Dehnschrauben Musteretuis ist nicht zur Anwendung am Patienten zugelassen!
Gefüllt mit 27 lieferbaren Dehnschrauben, 2 Dehnschraubenschlüsseln und 1 Universal-Biegeschlüssel. **1 Set = 30 Teile.**

REF 612-000-00

1 Set



Messkeil

Zur Kontrolle der Spaltbreite bei Dehnplatten.

REF 043-720-00

1 Stück




Orthocryl® LC	Seite	368
Orthocryl® / Sortimente	Seite	370
Orthocryl® / Einzelpackungen	Seite	371
Disco-Glimmer	Seite	373
KFO-Einlegemotive	Seite	374
Zubehör	Seite	378




KFO-Kunststoffe.

Bunte Farben – faszinierende Vielfalt.

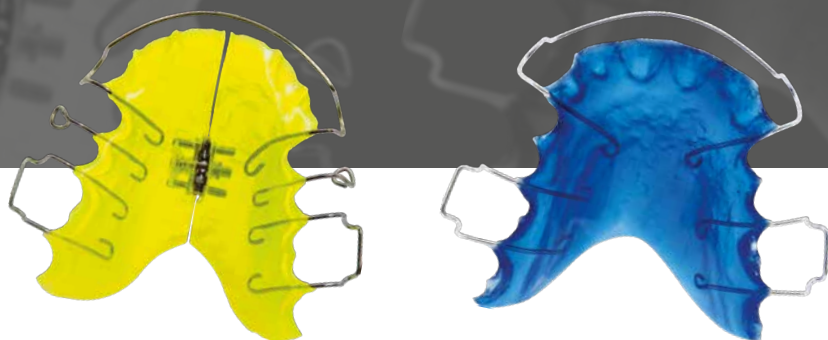

DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com




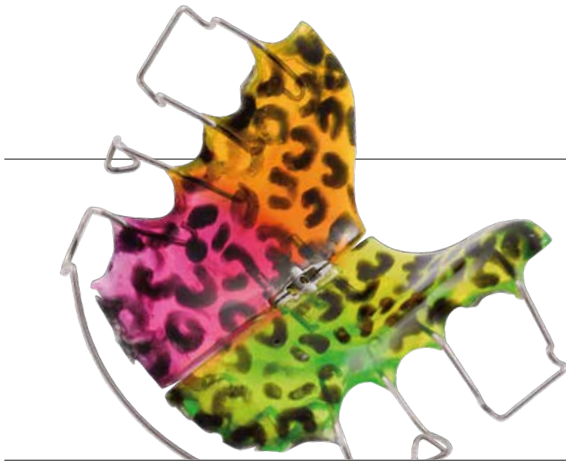

Das vielseitige Kunststoffsystem.

Orthocryl® ist seit 60 Jahren eine feste Größe in kieferorthopädischen Laboren. Es verbindet seit Jahrzehnten exzellente Produkteigenschaften mit einfachem Handling.

Beim Verarbeiten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, denn egal ob schwarz, weiß oder leuchtend bunt – Orthocryl® bietet durch die Vielzahl lebendiger Farben, Glitzer und Einlegemotive maximale Gestaltungsfreiheit. Neben dem klassischen Kaltpolymerisat ist Orthocryl® auch als lichthärtendes Material erhältlich. Orthocryl® LC wurde speziell für die Anforderungen bei der Herstellung von KFO-Apparaturen entwickelt. Es ist rein lichthärtend, zeitsparend und einfach in der Anwendung.

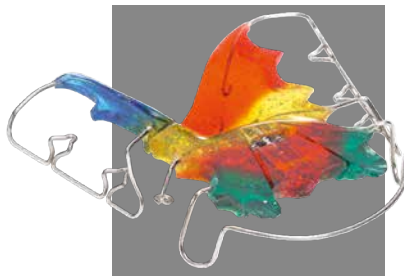

Orthocryl® LC

Der lichthärtende Kunststoff.

Orthocryl®

Abgestimmt auf die Streutechnik.

Orthocryl® Neon

Leuchtende Farben.

Orthocryl® EQ

Abgestimmt auf die Anteigtechnik.

Orthocryl® black & white

Kontrastreich, vielseitig.

Breite Palette

praxiserprobter Zubehörartikel

Alles aus einer Hand.



Orthocryl® LC

Der lichthärtende KFO-Spezialkunststoff.



Alles außer gewöhnlich.

Orthocryl® LC, ein moderner Kunststoff mit Mehrwert: rein lichthärtend, zeitsparend und einfach in der Anwendung. Orthocryl® LC ist speziell abgestimmt auf die Anforderungen in der Kieferorthopädie bei der Herstellung von KFO-Apparaturen. Aber auch Bohrschablonen für die Implantologie oder Aufbiss- und spezielle Schnarcherschienen können im Handumdrehen mit wenig Aufwand hergestellt werden.

Orthocryl® LC ist alles, außer gewöhnlich und damit erfrischend anders. Ein echtes Premium-Produkt mit Mehrwert.

Vorteile:

- Einfache Anwendung.
- Zeit- und materialsparend.
- Perfekt abgestimmte Fließfähigkeit.
- Breites Einsatzspektrum.
- Absolut geruchsneutral.
- Biokompatibel.


Spielend einfach und flexibel.

Die Anwendung von Orthocryl® LC ist spielend einfach. Das Produkt ist gebrauchsfertig in schwarzen, lichtundurchlässigen Kartuschen erhältlich. Die zeitaufwändige Vorbereitung entfällt, der Kunststoff muss nicht mehr angeteigt oder gestreut werden.

Das Material wird aus der Kartusche auf das vorbereitete Modell aufgetragen. Mit dem zugehörigen Injektor lässt es sich punktgenau dosieren. Diese einfache Handhabung spart nicht nur Zeit für die Herstellung und Ausarbeitung einer Platte, sondern auch Material.

Durch die perfekt abgestimmte Fließfähigkeit ist es besonders einfach, Orthocryl® LC auf das vorbereitete Modell zu adaptieren.

Orthocryl® LC steht in drei Farben zur Verfügung. Durch verschiedenfarbigen Disco-Glimmer und zahlreiche Einlegemotive aus dem umfangreichen Orthocryl® Produktportfolio wird jede Apparatur zum individuellen Unikat.

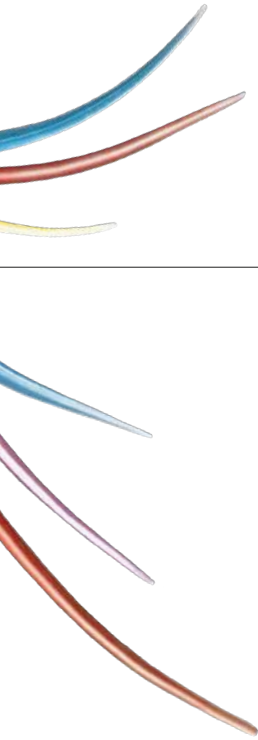

Orthocryl® LC



Orthocryl® LC Start-Set

Lichthärtender Kunststoff.

REF 160-400-00	1 Set
----------------	-------

Inhalt:

2 x Orthocryl® LC, klar	REF 160-401-00
2 x Orthocryl® LC, rosa-transparent	REF 160-402-00
2 x Orthocryl® LC, blau	REF 160-404-00
1 x Injektor für Orthocryl® LC	REF 160-420-00
50 x Kartuschenspitze für Orthocryl® LC	REF 160-421-00



Orthocryl® LC Start-Set, klar

Lichthärtender Kunststoff.

REF 160-400-20	1 Set
----------------	-------

Inhalt:

6 x Orthocryl® LC, klar	REF 160-401-00
1 x Injektor für Orthocryl® LC	REF 160-420-00
50 x Kartuschenspitze für Orthocryl® LC	REF 160-421-00

Orthocryl® LC

Lichthärtender Kunststoff in lichtundurchlässiger Kartusche.

Farbe	REF	Menge
klar	160-401-00	30 g
rosa-transparent	160-402-00	30 g
blau	160-404-00	30 g

**Aufbisspaste**

Für Orthocryl® LC.

Farbe: transparent

REF 160-410-00

50 g

**Injektor**

Für Orthocryl® LC.

REF 160-420-00

1 Stück

**Kartuschenspitze**

Für Orthocryl® LC.

REF 160-421-00

50 Stück

**Reinigungsflüssigkeit**

Für Orthocryl® LC.

REF 160-430-00

100 ml

**Kartuschenständer**

Für Orthocryl® LC. Geeignet für 6 Kartuschen.

Material: Kunststoff

Nicht geeignet für ethanol-, phenol-
bzw. alkoholhaltige Desinfektionsmittel.

Maße: ca. 170 mm x 110 mm x 110 mm (B x H x T)

Farbe: transparent, klar

REF 160-422-00

1 Stück



Orthocryl® / Sortimente



Orthocryl® Start-Set, klar

REF 161-912-00	1 Set
Inhalt:	
1 x Orthocryl® Pulver (Polymer), klar	REF 160-112-00
1 x Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer), klar	REF 161-100-00
1 x Isoliermittel	REF 162-800-00
2 x Sprühflasche	REF 162-100-00
1 x Messbecher	REF 162-200-00
1 x Trichter	REF 162-600-00
1 x Sprühdüse für Pulver (Polymer)	REF 162-751-00
1 x Spritzdüse für Flüssigkeit (Monomer)	REF 162-752-00



Orthocryl® Set, klein

Kleines Set 200 g Pulver (Polymer) und 100 ml Flüssigkeit (Monomer)

Farbe	REF	Menge
rosa-transparent	160-501-00	1 Set
klar	160-502-00	1 Set



Orthocryl® bunte Palette, Sortiment

REF 160-600-00	1 Sortiment
Inhalt:	
1 x Orthocryl® Pulver (Polymer), klar	REF 160-112-00
1 x Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer), rot	REF 161-127-00
1 x Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer), grün	REF 161-128-00
1 x Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer), blau	REF 161-129-00
1 x Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer), gelb	REF 161-130-00
1 x Trichter	REF 162-600-00



Orthocryl® Neon Sortiment

**Leuchtfarbiger Kunststoff
Flüssigkeit (Monomer)**

Leuchtfarben eingefärbte Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer) zur Herstellung leuchtfarbiger KFO-Apparaturen. Kaltpolymerisat mit großer Verarbeitungsbreite für die rationelle Kunststofftechnik in der Kieferorthopädie. Einfache Verarbeitung sowohl in der Streu- als auch in der Anteigtechnik in Verbindung mit dem klaren Orthocryl® Pulver (Polymer, REF 160-112-00 / 160-212-00). Auch die Verwendung von Disco-Glimmer ist möglich und erhöht den Effekt der Farben.

REF 160-700-00	1 Sortiment
Inhalt:	
1 x Orthocryl® Pulver (Polymer), klar	REF 160-112-00
1 x Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer), neongelb	REF 161-135-00
1 x Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer), neonorange	REF 161-136-00
1 x Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer), neopink	REF 161-137-00
1 x Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer), neongrün	REF 161-138-00
1 x Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer), neonblau	REF 161-139-00
1 x Trichter	REF 162-600-00

Orthocryl®**Pulver (Polymer)**

Kaltpolymerisat mit großer Verarbeitungsbreite für die rationelle Kunststofftechnik in der Kieferorthopädie.

Optimale Standfestigkeit bei Anwendung in der Streutechnik.

Auch für die Anteigtechnik sehr gut geeignet.

Farbe	REF	Menge	REF	Menge
klar	160-112-00	1 kg	160-212-00	10 kg

**Orthocryl® EQ****Pulver (Polymer)**

Kaltpolymerisat mit großer Verarbeitungsbreite für die rationelle Kunststofftechnik in der Kieferorthopädie.

Optimales Fließverhalten bei Anwendung in der Anteigtechnik.

Auch für die Streutechnik sehr gut geeignet.

Farbe	REF	Menge	REF	Menge
klar	160-300-00	1 kg	160-301-00	10 kg

**Orthocryl® black & white****Pulver (Polymer), opak**

Kaltpolymerisat mit großer Verarbeitungsbreite für die rationelle Kunststofftechnik in der Kieferorthopädie.

Optimale Standfestigkeit bei Anwendung in der Streutechnik.

Auch für die Anteigtechnik sehr gut geeignet.

Farbe	REF	Menge	REF	Menge
schwarz	160-011-00	200 g	160-013-00	1 kg
weiß	160-012-00	200 g	160-014-00	1 kg

**Orthocryl® Neon****Leuchtfarbiger Kunststoff****Flüssigkeit (Monomer)**

Leuchtfarben eingefärbte Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer) zur Herstellung leuchtfarbiger KFO-Apparaturen.

Kaltpolymerisat mit großer Verarbeitungsbreite für die rationelle Kunststofftechnik in der Kieferorthopädie.

Einfache Verarbeitung sowohl in der Streu- als auch in der Anteigtechnik in Verbindung mit dem klaren Orthocryl® Pulver (Polymer, REF 160-112-00 / 160-212-00). Auch die Verwendung von Disco-Glimmer ist möglich und erhöht den Effekt der Farben.

Farbe	REF	Menge
neongelb	161-135-00	250 ml
neonorange	161-136-00	250 ml
neonpink	161-137-00	250 ml
neongrün	161-138-00	250 ml
neonblau	161-139-00	250 ml



Orthocryl® / Einzelpackungen



Orthocryl®

Flüssigkeit (Monomer)

Kaltpolymerisat mit großer Verarbeitungsbreite für die rationelle Kunststofftechnik in der Kieferorthopädie.

Farbe	REF	Menge	REF	Menge	REF	Menge
rot	161-127-00	250 ml				
grün	161-128-00	250 ml				
blau	161-129-00	250 ml				
gelb	161-130-00	250 ml				
türkis	161-131-00	250 ml				
pink	161-132-00	250 ml				
smaragdgrün	161-133-00	250 ml				
violett	161-134-00	250 ml				
klar			161-100-00	500 ml	161-150-00	1.000 ml
rosa-transparent			161-300-00	500 ml	161-350-00	1.000 ml



Orthocryl®

Farbkonzentrat

Zum Einfärben der klaren Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer, REF 161-100-00 / 161-150-00). Mit 1 Dosierpipette.

Farbe	Mischverhältnis	REF	Menge
rot	1 : 10	161-620-00	100 ml
blau	1 : 50	161-622-00	100 ml

Mischverhältnis:

	Flüssigkeit, klar	Farbkonzentrat	Flüssigkeit, klar	Farbkonzentrat
1 : 10 (rot)	100 ml	10 ml	50 ml	5 ml
1 : 50 (blau)	100 ml	2 ml	50 ml	1 ml

Orthocryl® Disco-Glimmer

Zum Einfärben der herausnehmbaren KFO-Apparaturen. Der Glimmer-Zusatz wird dem Orthocryl® Pulver (Polymer), je nach gewünschter Intensität, beigemischt und ergibt dann den gewünschten Glimmer-Glanz. Die normale Orthocryl® Verarbeitung ändert sich durch den Glimmer-Zusatz nicht. Die KFO-Apparaturen lassen sich problemlos ausarbeiten und polieren.

Mischverhältnis:

0,5 : 100 (Volumenanteile Glimmer : Pulver)

Farbe	REF	Menge
iris	161-605-00	50 g
rot	161-606-00	50 g
blau	161-607-00	50 g
silber	161-608-00	50 g
gold	161-609-00	50 g
perlmutter	161-611-00	50 g



KFO-Einlegemotive



KFO-Einlegemotive, Sortiment

Für kieferorthopädische herausnehmbare Apparaturen. Zur Einarbeitung in Orthocryl® Kunststoff. Jede herausnehmbare KFO-Apparatur kann somit individuell angefertigt werden.

Lieferumfang:

Sortiment besteht aus 20 Motiven à 20 Stück = 400 Stück inkl. Pinzette.

REF 160-100-00

1 Sortiment

Inhalt:

20 x Krokodil	REF 160-100-01
20 x Frosch	REF 160-100-02
20 x Papagei	REF 160-100-04
20 x Marienkäfer	REF 160-100-05
20 x Drache	REF 160-100-06
20 x Fisch	REF 160-100-07
20 x Formel 1	REF 160-100-09
20 x Elefant	REF 160-100-10
20 x Herz	REF 160-100-11
20 x Ente	REF 160-100-12
20 x Dinosaurier	REF 160-100-13
20 x Motorrad	REF 160-100-14
20 x Schnecke	REF 160-100-15
20 x Teddybär	REF 160-100-16
20 x Pilze	REF 160-100-18
20 x Auto	REF 160-100-19
20 x Rabe	REF 160-100-27
20 x Teufel	REF 160-100-29
20 x Fußballer	REF 160-100-31
20 x Maus	REF 160-100-45



KFO-Einlegemotiv Fußball

Bogen mit zwei verschiedenen Motiv-Größen

Für kieferorthopädische herausnehmbare Apparaturen. Zur Einarbeitung in Orthocryl® Kunststoff. Jede herausnehmbare KFO-Apparatur kann somit individuell angefertigt werden.

Motiv	REF	Menge
Fußball	160-100-39	1 Bogen = 20 Stück



KFO-Einlegemotiv Biber

Für kieferorthopädische herausnehmbare Apparaturen. Zur Einarbeitung in Orthocryl® Kunststoff. Jede herausnehmbare KFO-Apparatur kann somit individuell angefertigt werden.

Motiv	REF	Menge
Biber	160-100-40	1 Bogen = 20 Stück



KFO-Einlegemotive Black Edition

Für kieferorthopädische herausnehmbare Apparaturen. Zur Einarbeitung in Orthocryl® Kunststoff. Jede herausnehmbare KFO-Apparatur kann somit individuell angefertigt werden.

Motiv	REF	Menge
Black Edition	160-100-41	1 Bogen = 12 Motive

KFO-Einlegemotiv

Für kieferorthopädische herausnehmbare Apparaturen. Zur Einarbeitung in Orthocryl® Kunststoff.
Jede herausnehmbare KFO-Apparatur kann somit individuell angefertigt werden.

Motiv	REF	Menge
Hallo Biber	160-100-42	2 Bogen = 20 Stück
Pferd	160-100-43	2 Bogen = 20 Stück
Pink Pony	160-100-44	2 Bogen = 20 Stück
Einhorn	160-100-46	2 Bogen = 20 Stück

**KFO-Einlegemotiv**

Für kieferorthopädische herausnehmbare Apparaturen. Zur Einarbeitung in Orthocryl® Kunststoff.
Jede herausnehmbare KFO-Apparatur kann somit individuell angefertigt werden.

Motiv	REF	Menge
Krokodil	160-100-01	20 Stück
Frosch	160-100-02	20 Stück
Papagei	160-100-04	20 Stück



KFO-Einlegemotive

KFO-Einlegemotiv

Für kieferorthopädische herausnehmbare Apparaturen. Zur Einarbeitung in Orthocryl® Kunststoff.
Jede herausnehmbare KFO-Apparatur kann somit individuell angefertigt werden.



Motiv	REF	Menge
Marienkäfer	160-100-05	20 Stück
Drache	160-100-06	20 Stück
Fisch	160-100-07	20 Stück
Formel 1	160-100-09	20 Stück
Elefant	160-100-10	20 Stück
Herz	160-100-11	20 Stück
Ente	160-100-12	20 Stück
Dinosaurier	160-100-13	20 Stück
Motorrad	160-100-14	20 Stück
Schnecke	160-100-15	20 Stück

KFO-Einlegemotiv

Für kieferorthopädische herausnehmbare Apparaturen. Zur Einarbeitung in Orthocryl® Kunststoff.
Jede herausnehmbare KFO-Apparatur kann somit individuell angefertigt werden.

Motiv	REF	Menge
Teddybär	160-100-16	20 Stück
Pilze	160-100-18	20 Stück
Auto	160-100-19	20 Stück
Rabe	160-100-27	20 Stück
Spinne	160-100-28	20 Stück
Teufel	160-100-29	20 Stück
Graffiti	160-100-30	20 Stück
Fußballer	160-100-31	20 Stück
Maus	160-100-45	20 Stück
Delphin	160-100-34	20 Stück



Zubehör



Sprühflasche

Für Pulver (Polymer) und Flüssigkeit (Monomer).

Fassungsvermögen	REF	Menge
100 ml	162-100-00	1 Stück



Spritzdüse für Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer)

Innen ø	Länge	REF	Menge
0,40 mm	10 mm	162-752-00	12 Stück



Sprühdüse für Orthocryl® Pulver (Polymer)

REF 162-751-00	1 Stück
----------------	---------



Anrührbecher

Flexibel, mit Saugfuß. Für alle Anrührarbeiten in Praxis und Labor.

Nicht für Silikon-Massen geeignet!

Material: Silikon

Fassungsvermögen	REF	Menge
5 ml	162-501-00	3 Stück
25 ml	162-502-00	1 Stück
75 ml	162-503-00	1 Stück



Trichter

REF 162-600-00	1 Stück
----------------	---------



Messbecher

REF 162-200-00	1 Stück
----------------	---------



Dosierpipette

Für Orthocryl® Farbkonzentrate.

REF 162-101-00	10 Stück
----------------	----------

Isoliermittel

Spezielles Isoliermittel auf Alginatbasis, wodurch ein dünner, abriebfester Isolierfilm gebildet wird.

Isoliert:

- Gips gegen Kunststoff
- Gips gegen Gips

Farbe: rosa

REF 162-800-00

1.000 ml

**3D Isoliermittel**

Bildet eine Isolierschicht zwischen Kunststoffmodellen und Orthocryl® / Orthocryl® LC.

Farbe: grün

REF 162-801-00

100 ml

**Modellierwachs, rosa**

Für Kunststofftechnik, Konstruktionsbisse etc.

- gut verformbar
- sehr gute Modellierbarkeit
- standfest bis ca. 37 °C
- leichtes Fixieren von Zähnen

Schmelzpunkt	Maße (L x B)	Stärke	REF	Menge
60 °C	175 mm x 80 mm	1,50 mm	119-150-00	500 g

**Thermowachs**

- hitzebeständiges Ausblockwachs
- zum Abdecken von Federn in der Orthocryl® Technik
- verhindert Milchigwerden des Kunststoffes

Schmelzpunkt	Farbe	REF	Menge
87 °C	rosa	120-170-00	50 g

**Klebewachs**

- gute Klebewirkung auf allen Werkstoffen
- ideal zum Fixieren von Halte- oder Abstützelementen, Reparatur- und Lötarbeiten

Schmelzpunkt	Farbe	REF	Menge
71 °C	rot	122-300-00	60 g



Zubehör

Fräser für Kunststoff

fräsverzahnt, gerade

- spanabhebende Schneideigenschaften

Einsatzbereich: Kunststoff

Max. Drehzahl: 15.000 min⁻¹



ISO-Nummerncodierung	Größe	Form	REF	Menge
310.104.266.171.040	klein	Knospe, rund, lang	180-201-00	1 Stück
310.104.266.171.050	mittel	Knospe, rund, lang	180-202-00	1 Stück
310.104.260.171.070	mittel	Knospe, rund	180-304-00	1 Stück
310.104.260.171.080	groß	Knospe, rund	180-305-00	1 Stück



Superhartmetallfräser

kreuzverzahnt, grob

- präzisionsgefräst
- beste spanabhebende Schneideigenschaften

Einsatzbereich: Gips, Kunststoff

Empfohlene Drehzahl: 15.000 min⁻¹ - 20.000 min⁻¹

Max. Drehzahl: 30.000 min⁻¹

ISO-Nummerncodierung	Form	REF	Menge
500.104.263.190.070	Knospe, rund, schlank	180-308-00	1 Stück

Superhartmetallfräser/-bohrer**kreuzverzahnt, grob**

- präzisionsgefräst
- beste spanabhebende Schneideigenschaften

Einsatzbereich: Kunststoff, ModellgussEmpfohlene Drehzahl: 20.000 min⁻¹ - 25.000 min⁻¹Max. Drehzahl: 50.000 min⁻¹

ISO-Nummerncodierung	Form	REF	Menge
500.104.116.190.023	zylindrisch, nur Seite schneidend	123-580-00	1 Stück
500.104.137.190.023	zylindrisch, Stirn rund	123-581-00	1 Stück
500.104.292.190.023	Torpedo, zylindrisch	123-582-00	1 Stück
500.104.001.190.023	kugelförmig (rund), ø 2,1 mm	123-583-00	1 Stück
500.104.274.190.060	Granate	123-584-00	1 Stück
500.104.194.190.023	konisch, Stirn rund	123-585-00	1 Stück

**Superhartmetallfräser****kreuzverzahnt, grob**

- präzisionsgefräst
- beste spanabhebende Schneideigenschaften

Einsatzbereich: Gips, KunststoffEmpfohlene Drehzahl: 20.000 min⁻¹ - 25.000 min⁻¹Max. Drehzahl: 30.000 min⁻¹

ISO-Nummerncodierung	Form	REF	Menge
500.104.237.220.060	Birne	123-594-00	1 Stück
500.104.194.220.060	konisch, Stirn rund	123-596-00	1 Stück



Zubehör

Superhartmetallfräser

fräsverzahnt, rechts gewunden

- Wolfram-Karbid
- präzisionsgeschliffen
- beste spanabhebende Schneideigenschaften


Einsatzbereich: CoCr-Legierungen, Kunststoff

Empfohlene Drehzahl: 20.000 min⁻¹ - 25.000 min⁻¹

Max. Drehzahl: 30.000 min⁻¹



ISO-Nummerncodierung	Form	REF	Menge
500.104.274.175.060	Granate	123-597-00	1 Stück
500.104.194.175.045	konisch, Stirn rund	123-598-00	1 Stück

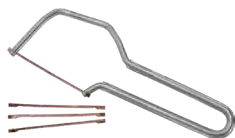

Bogensäge

Für Kieferorthopädie / Zahntechnik.

Kleine handliche Bogensäge mit auswechselbarem Sägeblatt.

Lieferumfang:

Säge inkl. 3 Sägeblätter

REF 180-702-00

1 Stück



Sägeblatt

Für Bogensäge.

Länge	REF	Menge
70 mm	180-703-00	5 Stück



Polierbürste

Für Poliermotor.

Einsatzbereich: KFO, Kronen und Brücken, Kunststoff-Prothetik, Modellguss

Max. Drehzahl: 2.800 min⁻¹

ø	REF	Menge	REF	Menge
50 mm	141-700-00	1 Stück	141-700-10	10 Stück



Polierbürste

Kombination Chungking-Borsten / Baumwolle, für Poliermotor.

Einsatzbereich: KFO, Kronen und Brücken, Kunststoff-Prothetik

Max. Drehzahl: 1.500 min⁻¹

ø	REF	Menge
80 mm	141-710-00	1 Stück

Polierbürste

Kurze Chungking-Borsten, für Poliermotor.

Einsatzbereich: KFO, Kronen und Brücken, Modellguss

Max. Drehzahl: 6.000 min⁻¹

Anzahl Borstenreihen	ø	REF	Menge
2	60 mm	141-711-00	10 Stück
3	60 mm	141-712-00	10 Stück

**Palatinal Rundkopfbürste**

Chungking-Borsten, für Poliermotor.

Einsatzbereich: KFO, Kunststoff-Prothetik

Max. Drehzahl: 3.000 min⁻¹

ø	REF	Menge	REF	Menge
30 mm	141-713-10	1 Stück	141-713-00	10 Stück

**Leinenschwabbel, montiert**

Für Handstück.

Einsatzbereich: KFO, Kronen und Brücken, Kunststoff-Prothetik, Modellguss

Empfohlene Drehzahl: 1.500 min⁻¹ - 4.000 min⁻¹

Max. Drehzahl: 5.000 min⁻¹

ø	REF	Menge
20 mm	181-100-01	6 Stück

**Leinenschwabbel**

Für Poliermotor.

Einsatzbereich: KFO, Kronen und Brücken, Kunststoff-Prothetik, Modellguss

Max. Drehzahl: 5.000 min⁻¹

ø	REF	Menge
100 mm	181-200-00	1 Stück

**Wildlederschwabbel**

Für Hochglanzpolitur, für Poliermotor.

Einsatzbereich: KFO, Kronen und Brücken, Kunststoff-Prothetik, Modellguss

Max. Drehzahl: 1.500 min⁻¹

ø	REF	Menge
90 mm	181-201-00	1 Stück



Zubehör



Edelweiß-Polierstab

Ideal für die Hochglanzpolitur von Kunststoff geeignet.

REF 190-100-00

80 g



Edelweiß Kunststoff-Flüssigpolitur

Ideal für die Hochglanzpolitur von Kunststoff geeignet.

REF 190-200-00

1.000 g

Silikon-Polierer

- keine Beschädigung der Metallteile, Drahtelemente

Einsatzbereich: KFO-Apparaturen, Vorpolitur von Prothesenkunststoffen

Empfohlene Drehzahl: 5.000 min⁻¹ - 7.000 min⁻¹

Max. Drehzahl: 15.000 min⁻¹



ISO-Nummerncodierung	Form	REF	Menge
658.104.275.523.100	Torpedo	138-623-00	10 Stück



Mandrell

Ausführung	Max. Drehzahl	REF	Menge
für Schmirgelleinen	16.000 min ⁻¹	139-500-00	10 Stück



Schmirgelleinen

Körnung	Breite	REF	Menge
120 = fein	15 mm	140-015-00	25 m

FKO-Split Fixator

nach Gordon

Das handliche Hilfsgerät für präzise Modellfixierung in der Konstruktionsbisslage. Mit Rundteleskop-Doppelführung. Eingegipste Modelle können leicht entfernt und wieder eingesetzt werden.

REF 072-004-00

1 Stück

**Polyclav®**

Drucktopf für die Polymerisation von Kaltpolymerisaten, induktionsgeeignet.

Mit Sicherheitsventil.

Ohne Druckschlauch.

Fassungsvermögen: 4,5 l

REF 070-010-00

1 Stück

**Druckschlauch**

Für Polyclav® (REF 070-010-00).

Mit Stecknippel passend zum Einlassventil sowie Normanschluss für Pressluftsteckdosen.

Länge: 1,5 m

Pmax: 8,0 bar

REF 070-015-00

1 Stück

**Wärmeplatte**

Für Polyclav® (REF 070-000-00 und 070-010-00).

Netzspannung	REF	Menge
230 V~	070-900-00	1 Stück

Technische Daten

Nennleistung	125 W
Wassertemperatur thermostatisch reguliert	43 °C
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Gewicht	2,6 kg
Abmessungen (B x H x T)	240 mm x 240 mm x 75 mm



Zubehör



Absauggerät mit Aktivkohlefilter

Zum Schutz gegen Dämpfe bei der Verarbeitung von Kunststoffen im Labor.

- Steuerung durch eine Lichtschranke (automatisches Ein- und Ausschalten)
- mit Betriebsstundenzähler
- einfacher Filterwechsel (Filterkassette, REF 072-001-40, nach etwa 50 Betriebsstunden wechseln)

Netzspannung	REF	Menge
230 V~	072-001-00	1 Stück

Technische Daten

Nennleistung	100 W
Netzfrequenz	50 Hz
Gewicht	6 kg
Abmessungen (B x H x T)	220 mm x 260 mm x 260 mm



activeblue Reinigungsgerät

Mit activefluid Reinigungsflüssigkeit.

Für die schonende Entfernung von Belägen an herausnehmbaren KFO-Apparaturen.

Lieferumfang:

- 1 x Reinigungsflüssigkeit, 1.000 ml (REF 150-020-00)
- 1 x Reinigungsbecher, weiß
- 1 x Reinigungsnadeln, 75 g (REF 098-001-00)
- 1 x Pinzette
- 1 x Haltermagnet
- 1 x Netzkabel (230 V)

Technische Daten

Netzspannung	100 V~ - 240 V~ bei 50 Hz / 60 Hz
Drehzahl	1.200 min ⁻¹ / 1.600 min ⁻¹ / 2.000 min ⁻¹
Netzsicherung	T 1,6 A L 250 V
Geräuschpegel	< 70 dB (A)
Gewicht	3 kg
Abmessungen (B x H x T)	150 mm x 240 mm x 280 mm

REF 098-000-00	1 Stück
----------------	---------



Reinigungsnadeln für activeblue

Für activeblue Reinigungsgerät.

REF 098-001-00	1 Dose à 75 g
----------------	---------------

activefluid Reinigungsflüssigkeit

Für activeblue Reinigungsgerät.

REF 150-020-00	1.000 ml
----------------	----------



Dermatril®, Einmal-Schutzhandschuhe

Zum Schutz bei der Verarbeitung von Polymethylmethacrylaten wie Orthocryl®.
Aus Spezial-Nitril, puderfrei, frei von Naturlatex.

Schichtstärke	Größe	REF	Menge
0,10 mm	S	162-907-00	100 Stück
0,10 mm	M	162-908-00	100 Stück
0,10 mm	L	162-909-00	100 Stück



Premium-Line Zangen /
Festsitzende Technik

Seite 392

Premium-Line Zangen /
Herausnehmbare Technik

Seite 400



Premium-Line Zangen.

Premium-Qualität – Premium-Funktion.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com






Abdeckung aller Einsatzbereiche mit einem Programm.

Ob für die kieferorthopädische Technik oder die Prothetik, das Dentaforum Zangen-Programm deckt alle Standardeinsatzgebiete ab. Das bedeutet für den Anwender, stets auf die gleiche Qualität und Verlässlichkeit zurückgreifen zu können. Das macht den Einsatz schneller und effektiver.

Made in Germany.

Die Herstellung durch langjährig erfahrene Fachkräfte mit ausgefeilten Fertigungstechniken und modernsten Maschinen führt zu der sprichwörtlich guten „Made-in-Germany“-Qualität. Dadurch haben die Dentaforum Premium-Line Zangen auch eine extra lange Lebensdauer*.

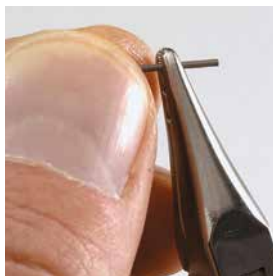




PREMIUM
LINE

10-Jahres-Garantie!**



* Reinigung und Pflege von Dentaum-Zangen und -Instrumenten siehe separate Anweisung REF 989-590-10. Reparaturservice werkseitig möglich (z.B. Verschleiß).

** 10 Jahre Garantie auf Material und Herstellungsfehler, auf Herausfallen der Einsätze, auf Bruch und Korrosion des Zangenkörpers bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und sachgemäßer Pflege. Bei Manipulation erlischt der Garantieanspruch.

Premium-Line Zangen / Festsitzende Technik



Ortho-Cast M-Series Konvertierzange sterilisierbar

Mit austauschbarer Klinge.

Nur zur Verwendung mit Ortho-Cast M-Series

Bukkalarhrchen geeignet!

Lieferumfang:

Zange komplett mit Klinge sowie 2 Ersatzklingen
und 1 Innensechskantschlüssel

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-805-00

1 Stück



Klinge

sterilisierbar

Für Ortho-Cast M-Series Konvertierzange, REF 003-805-00.

Lieferumfang:

10 Klingen + 2 Schrauben

REF 038-805-10

10 Stück



Spezial-Bracket-Debonding-Zange, 45° abgewinkelt

sterilisierbar

Zum Entfernen von Brackets und Adhäsivresten.

45° Abwinkelung der Schneideflächen, spezielle
Schliffführung. Einsätze aus Hartmetall.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-350-00

1 Stück



Bracket-Abnehmezange, gerade

sterilisierbar

Zum Abscheren von Brackets zwischen Bracketbasis
und Adhäsiv. Einsätze aus Hartmetall.

Länge: 13,0 cm

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-346-00

1 Stück



Bracket-Abnehmezange

sterilisierbar

Zum Abscheren von Brackets zwischen Bracketbasis
und Adhäsiv.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-349-00

1 Stück



Kunststoffeffsatz

sterilisierbar

Für Bracket-Abnehmezangen, REF 003-349-00
und 045-005-00.

REF 038-356-00

4 Stück

Premium-Line Zangen / Festsitzende Technik

Bracket-Abnehmezange, abgewinkelt sterilisierbar

Zum einfachen Entfernen von Lingualbrackets und Brackets im Seitenzahnbereich. Einsätze aus Hartmetall.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-347-00

1 Stück



Oliver-Jones Band-Abnehmezange sterilisierbar

Mit austauschbarer Kunststoffkappe. Einsatz aus Hartmetall.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 026-347-00

1 Stück



Kunststoffkappe

sterilisierbar

Für Oliver-Jones Band-Abnehmezangen, REF 026-347-00 und 045-004-00.

REF 039-357-00

10 Stück



Johnson Konturenzange

sterilisierbar

Backen nur in einer Fläche gewölbt. Zum Konturieren und Anpassen von Bändern und Kronen.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-114-00

1 Stück



Separierzange

sterilisierbar

Zum Spreizen der Dentalastics®-Separierringe vor dem Positionieren.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 015-160-00

1 Stück



How Zange, gerade

sterilisierbar

Universell einsetzbare Zange für die Multibrackettechnik.

Durch die schmalen Branchen speziell zum Setzen von Bändern mit aufgeschweißten Brackets geeignet. Auch für den UK-Frontzahnbereich. **Nicht für das Debonding von Brackets geeignet.**

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-112-00

1 Stück



Premium-Line Zangen / Festsitzende Technik



How Zange, gebogen sterilisierbar

Die gebogene Zange kommt insbesondere für den Seitenzahnbereich zur Anwendung. **Nicht für das Debonding von Brackets geeignet.**

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-111-00

1 Stück



Seitenschneider Maxi sterilisierbar

Einsätze aus Hartmetall.

Wir empfehlen, im vorderen Drittel der Schneiden keine Drähte der maximal vorgesehenen Drahtstärke zu schneiden!

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 1,0 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-266-00

1 Stück



Distalschneider Mini sterilisierbar

Zum Kürzen der Bogenenden in der Multibrackettechnik. Zierliche Ausführung. Drahtfangvorrichtung. Einsätze aus Hartmetall.

Länge: 12,0 cm

Max. Drahtstärke: $\square$ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-701-00

1 Stück



Distalschneider Mini sterilisierbar

Mit längerem Griff für leichteres Handling beim Kürzen der Bogenenden. Zierliche Ausführung. Drahtfangvorrichtung. Einsätze aus Hartmetall.

Länge: 14,0 cm

Max. Drahtstärke: $\square$ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-702-00

1 Stück



Distalschneider Maxi sterilisierbar

Zum Kürzen der Bogenenden in der Multibrackettechnik. Kräftige Ausführung. Drahtfangvorrichtung. Einsätze aus Hartmetall.

Länge: 12,0 cm

Max. Drahtstärke: $\square$ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-700-00

1 Stück



Flush Cutter Mini, mit Silikon O-Ring sterilisierbar

Zum Kürzen von Runddrähten in der Multibrackettechnik. Elastische Drahtfangvorrichtung durch Silikon O-Ring, REF 037-356-00. Einsätze aus Hartmetall.

Länge: 11,7 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,50 mm / 20

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-705-00

1 Stück

Premium-Line Zangen / Festsitzende Technik

Flush Cutter Maxi, mit Silikon O-Ring

sterilisierbar

Mit längerem Griff für leichteres Handling beim Kürzen von Runddrähten in der Multibrackettechnik. Elastische Drahtfangvorrichtung durch Silikon O-Ring, REF 037-356-00. Einsätze aus Hartmetall.

Länge: 14,2 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,50 mm / 20

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-706-00

1 Stück



Silikon O-Ring

sterilisierbar

Für Flush Cutter Mini und Maxi, REF 003-705-00 und 003-706-00.

REF 037-356-00

10 Stück



Ligatureschneider Mini

sterilisierbar

Exakt bis zur Spitze schließende Schneiden garantieren einen glatten Schnitt von weichen Ligaturrendrähten. Einsätze aus Hartmetall.

Wir empfehlen, im vorderen Drittel der Schneiden keine Drähte der maximal vorgesehenen Drahtstärke zu schneiden! Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,4 mm, weich

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 014-151-00

1 Stück



Ligatureschneider 45°

sterilisierbar

45° abgewinkelte Schneidefläche. Erleichtert das Trennen der Ligaturen im Seitenzahnbereich. Einsätze aus Hartmetall.

Wir empfehlen, im vorderen Drittel der Schneiden keine Drähte der maximal vorgesehenen Drahtstärke zu schneiden! Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,4 mm, weich

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 014-152-00

1 Stück



Seitenschneider Medium

sterilisierbar

Schwarz DLC beschichtet. Glatte Schnittflächen durch exakte Schneidekanten. Einsätze aus Hartmetall.

Wir empfehlen, im vorderen Drittel der Schneiden keine Drähte der maximal vorgesehenen Drahtstärke zu schneiden! Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 016-153-00

1 Stück



Light Wire Zange

sterilisierbar

Für besonders feine Biegungen von Drähten in der Light Wire Technik.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, federhart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-130-00

1 Stück



Premium-Line Zangen / Festsitzende Technik



Begg Light Wire Zange

sterilisierbar

Für besonders feine Biegungen von Drähten in der Light Wire Technik. Zusätzliche Schneidevorrichtung.

Einsätze aus Hartmetall.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, federhart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-130-00

1 Stück



Angle / Tweed Bogenbiegezange

sterilisierbar

Zum Torquen von Vierkantdrähten. Verhindert Quetschen des Drahtes durch paralleles Halten. Einsätze aus Hartmetall.

Max. Drahtstärke: $\square$ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-442-00

1 Stück



Weingart Universalzange

sterilisierbar

Zum Positionieren des Bogens und Umbiegen der Bogenenden geeignet. Exakt schließende geriffelte Spitze. Einsätze aus Hartmetall. Auch für das Debonding von Brackets geeignet.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-120-00

1 Stück



Weingart Universalzange Mini

sterilisierbar

Sehr grazile Ausführung. Zum Halten und Positionieren des Bogens. Exakt schließende, geriffelte Spitzen.

Nicht für das Debonding von Brackets geeignet.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-121-00

1 Stück



Lingualbiegezange

sterilisierbar

Zum Biegen von Stufen und Ausgleichsbiegungen in die Bögen für die Lingualtechnik.

Stufenbreite: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm und 3,0 mm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-001-00

1 Stück



Nance Schlaufenbiegezange

sterilisierbar

Mit vierstufigen Backen zum Biegen verschieden langer Schlaufen aus Rund- und Vierkant-Draht.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 000-001-00

1 Stück

Premium-Line Zangen / Festsitzende Technik

Jarabak Light Wire Zange

sterilisierbar

Mit Führungsgrillen.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, federhart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-125-00

1 Stück



Tweed Schlaufenbiegezange

sterilisierbar

Für besonders feine Biegungen.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 012-350-00

1 Stück



Tweed Schlaufenbiegezange

sterilisierbar

Für besonders feine Biegungen.

Mit individuell auswechselbarer Hartmetallspitze.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 012-351-00

1 Stück



Spitze

sterilisierbar

Für Tweed Schlaufenbiegezange, REF 012-351-00.

REF 038-357-00

3 Stück



De La Rosa Konturenzange

sterilisierbar

Mit Führungsgrillen zum Formen von Rund- und Vierkant-Bögen 16, 18, 22.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-109-00

1 Stück



Bügelbiegezange

sterilisierbar

Für die individuelle Herstellung und Aktivierung von Lingual- bzw. Palatinalbügel. Die mit dieser Zange gebogenen Drahtenden passen in alle Dentaurum-Lingual-/Palatinalschlösser $\varnothing$ 2 x 0,9 mm.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,9 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-185-00

1 Stück



Premium-Line Zangen / Festsitzende Technik



Klemmzange, für Herbst TS / SUS sterilisierbar

Zum Aufklemmen von geschlitzten Distanzringen für Herbst TS und SUS.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-710-00

1 Stück



Klemmzange sterilisierbar

Spitze mit V-förmiger Kerbung zum Halten und Zusammendrücken von Gleit-/Klemm- und Stoppröhrchen.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-711-00

1 Stück



Angle Drahtbiegezange Standard sterilisierbar

In kräftiger Ausführung mit je einer kurzen flachen und einer runden Backe.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-139-00

1 Stück



Angle Drahtbiegezange sterilisierbar

In kräftiger Ausführung mit je einer kurzen flachen und einer runden Backe. Einsätze aus Hartmetall.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-139-00

1 Stück



Bügelbiegezange Magnum sterilisierbar

Ideal zum Biegen der Außenbögen von Face Bows. Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 1,8 mm

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-180-01

1 Stück

Premium-Line Zangen / Festsitzende Technik

Hohlkehlzange Extra-Mini

sterilisierbar

Ideal für das Biegen von unterschiedlichsten Schlaufen und zum Anpassen von vorgeformten Bögen in der festsitzenden Technik.

Max. Drahtstärke: ø 0,5 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-350-00

1 Stück



Hohlkehlzange Mini

sterilisierbar

Zum Biegen von Schlaufen an Rund- und Vierkant-Drähten.

Max. Drahtstärke: ø 0,5 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-351-00

1 Stück



Hammerhead Zange

sterilisierbar

Zum Umbiegen von Nickel-Titan-Bögen/-Drähten im Molarenbereich. Die beiden Enden schmiegen sich wie Nut und Feder um den Nickel-Titan-Draht, so dass die Drahtenden durch einmaliges Zudrücken der Zange die gewünschte Biegung erhalten.

Max. Drahtstärke: ø 0,45 mm / 18,

☒ 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-355-00

1 Stück



Aderer Dreifingerzange Extra-Mini

sterilisierbar

Zum Biegen von Drähten / Bögen in der festsitzenden Technik. Besonders gut geeignet für das Biegen von Nickel-Titan-Drähten / Bögen wie rematitan® LITE und Tensic®.

Max. Drahtstärke: ø 0,5 mm, hart,

☒ 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-205-00

1 Stück



Premium-Line Zangen / Herausnehmbare Technik



Hohlkehlzange Medium

Zum Biegen von kleinen Federn, Ösen und Schlaufen.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-053-00

1 Stück



Hohlkehlzange Maxi

Zum Biegen von Federn, Schlaufen und Platzhaltern.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,8 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-233-00

1 Stück



Ruhland Hohlkehlzange Magnum

Zum Biegen von Coffin- und Verbindungsfedern,

Labialbögen und U-Schlaufen.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 1,1 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 001-650-00

1 Stück



Adams Zange Medium

Mit zwei Vierkantbacken, innen glatt. **Mit Führungsritzen.**

Länge: 12,0 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-514-00

1 Stück



Adams Zange Medium

Mit zwei Vierkantbacken, innen glatt.

Hartmetallbeschichtete Arbeitsflächen.

Länge: 12,0 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-515-00

1 Stück



Adams Zange Medium

Mit zwei Vierkantbacken, innen glatt.

Einsätze aus Hartmetall. Mit Führungsritze.

Länge: 12,0 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, federhart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-515-00

1 Stück

Premium-Line Zangen / Herausnehmbare Technik

Adams Zange Maxi

Mit zwei Vierkantbacken, innen glatt.

Länge: 14,5 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,8 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-094-00

1 Stück



Adams Zange Medium

Mit einer Vierkant- und einer Rundbacke, innen glatt.

Länge: 14,0 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-516-00

1 Stück



Adams Zange Maxi

Mit einer Vierkant- und einer Rundbacke, innen glatt.

Einsätze aus Hartmetall.

Länge: 16,0 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,8 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-095-00

1 Stück



Flachzange, breit

Geriffelte Spitzen. Mit Führungsrille.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,8 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 033-452-00

1 Stück



Kramponzange Maxi

Geriffelte Spitzen. Mit Führungsrille.

Universal Biege- und Schneidezange. Einsätze aus Hartmetall.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,9 mm, hart

Schneiden bis: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 013-522-00

1 Stück



Universal Drahtbiegezange

Mit geriffelten Spitzen und Führungsrillen.

Hartmetallbeschichtete Arbeitsflächen.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,8 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-290-00

1 Stück



Premium-Line Zangen / Herausnehmbare Technik



Spitzflachzange

Innen glatt, mit Führungsrille. Einsätze aus Hartmetall.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, federhart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-455-00

1 Stück



Spitzflachzange

Geriffelt, mit Führungsrille. Zierliche Maulspitze.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 035-455-00

1 Stück



Young Schlaufenzange

Eine Universalzange zum Biegen von Schlaufen in beliebiger Abmessung. Ideal für Labialbögen.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 012-074-00

1 Stück



Aderer Dreifingerzange Mini

Länge: 12,5 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-201-00

1 Stück



Aderer Dreifingerzange Medium

Länge: 12,5 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,9 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-200-00

1 Stück



Aderer Dreifingerzange Maxi

Kräftige Ausführung.

Länge: 15,0 cm

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 1,5 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-202-00

1 Stück

Premium-Line Zangen / Herausnehmbare Technik

Pfeilformzange

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie



REF 012-520-00


1 Stück



Pfeilknickzange

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

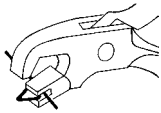

REF 012-521-00

1 Stück



EQ-Line Zangen / Festsitzende Technik	Seite 406
EQ-Line Zangen / Herausnehmbare Technik	Seite 408
Instrumente	Seite 410
Zubehör	Seite 418



EQ-Line Zangen. Dentale Instrumente.

Gute Zangen zu günstigen Preisen.
Ein vielseitiges Programm für KFO-Praxis und Labor.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com



EQ-Line Zangen / Festsitzende Technik



Bracket-Abnehmezange sterilisierbar

Zum Entfernen von Brackets.

REF 045-005-00

1 Stück



Kunststoffeffinsatz sterilisierbar

Für Bracket-Abnehmezangen, REF 003-349-00 und 045-005-00.

REF 038-356-00

4 Stück



Distalschneider sterilisierbar

Zum Kürzen der Bogenenden in der Multibrackettechnik. Drahtfangvorrichtung. Einsätze aus Hartmetall. Max. Drahtstärke: $\square$ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

REF 045-021-00

1 Stück



Seitenschneider Medium sterilisierbar

Zum Schneiden von Drähten und Bögen. Einsätze aus Hartmetall.

Wir empfehlen, im vorderen Drittel der Schneiden keine Drähte der maximal vorgesehenen Drahtstärke zu schneiden! Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

REF 045-022-00

1 Stück



Oliver-Jones Band-Abnehmezange sterilisierbar

Mit austauschbarer Kunststoffkappe.

REF 045-004-00

1 Stück



Kunststoffkappe sterilisierbar

Für Oliver-Jones Band-Abnehmezangen, REF 026-347-00 und 045-004-00.

REF 039-357-00

10 Stück



How Zange, gerade sterilisierbar

Universell einsetzbare Zange für die Multibrackettechnik. Durch die einseitig ausladenden Spitzen eignet sich diese Zange auch zum Herstellen von individuellen Frontzahnbandern.

REF 045-006-00

1 Stück

EQ-Line Zangen / Festsitzende Technik

Angle / Tweed Bogenbiegezange

sterilisierbar

Zum Torquen von Vierkantdrähten.

Verhindert Quetschen des Drahtes durch paralleles Halten.

Max. Drahtstärke: $\square$ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

REF 045-000-00

1 Stück



Weingart Universalzange

sterilisierbar

Zum Positionieren des Bogens und Umbiegen der Bogenenden.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, hart

REF 045-003-00

1 Stück



Nance Schlaufenbiegezange

sterilisierbar

Mit vierstufigen Backen zum Biegen verschieden langer Schlaufen aus Rund- und Vierkant-Draht.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, federhart

REF 045-010-00

1 Stück



Jarabak Light Wire Zange

sterilisierbar

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, federhart

REF 045-009-00

1 Stück



Tweed Schlaufenbiegezange

sterilisierbar

Für besonders feine Biegungen.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,5 mm, hart

REF 045-001-00

1 Stück



Angle Drahtbiegezange

sterilisierbar

In kräftiger Ausführung mit je einer kurzen flachen und einer runden Backe.

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

REF 045-002-00

1 Stück



EQ-Line Zangen / Herausnehmbare Technik



Hohlkehlzange Medium

Max. Drahtstärke: $\emptyset$ 0,7 mm, hart

REF 045-012-00

1 Stück



Hohlkehlzange Maxi

Z.B. zum Formen von Platzhaltern.

Max. Drahtstärke: $\emptyset$ 0,8 mm, hart

REF 045-013-00

1 Stück



Ruhland Hohlkehlzange Magnum

Zum Biegen von Coffin- und Verbindungsfedern,
Labialbögen und U-Schlaufen.

Max. Drahtstärke: $\emptyset$ 1,1 mm, hart

REF 045-014-00

1 Stück



Adams Zange Medium

Mit zwei Vierkantbacken, innen glatt.

Mit Führungsrille.

Max. Drahtstärke: $\emptyset$ 0,7 mm, hart

REF 045-015-00

1 Stück



Adams Zange Maxi

Mit zwei Vierkantbacken, innen glatt.

Mit Führungsrille.

Max. Drahtstärke: $\emptyset$ 0,8 mm, hart

REF 045-016-00

1 Stück



Adams Zange Maxi

Mit einer Vierkant- und einer Rundbacke, innen glatt.

Max. Drahtstärke: $\emptyset$ 0,8 mm, hart

REF 045-017-00

1 Stück



Kramponzange Maxi

Max. Drahtstärke: $\emptyset$ 0,9 mm, hart

Schneiden bis: $\emptyset$ 0,7 mm, hart

REF 045-019-00

1 Stück

EQ-Line Zangen / Herausnehmbare Technik

Spitzflachzange

Glatt, mit Führungsrille. Zierliche Maulspitze.
Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

REF 045-018-00

1 Stück



Young Schlaufenzange

Eine Universalzange für Schlaufen in beliebiger Abmessung.
Ideal für Labialbögen.
Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

REF 045-011-00

1 Stück



Aderer Dreifingerzange Extra-Mini

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,8 mm, hart

REF 045-020-00

1 Stück



Aderer Dreifingerzange Mini

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,7 mm, hart

REF 045-007-00

1 Stück



Aderer Dreifingerzange Medium

Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 0,9 mm, hart

REF 045-008-00

1 Stück



Hebelseitenschneider Magnum

Geringer Kraftaufwand beim Schneiden
durch Hebelübersetzung.
Wir empfehlen, im vorderen Drittel der Schneiden keine
Drähte der maximal vorgesehenen Drahtstärke zu schneiden!
Max. Drahtstärke: $\varnothing$ 1,3 mm, hart

REF 044-177-00

1 Stück



Instrumente



Klemmpinzette sterilisierbar

Zum Setzen der Brackets. Pinzettenende erlaubt das Angulieren von Brackets. Zierliche Einstückkonstruktion.

REF 025-277-00

1 Stück



Klemmpinzette sterilisierbar

Mit langer Setz- und Angulierungshilfe. Zum Setzen der Brackets. Pinzettenende erlaubt das Angulieren von Brackets.

REF 025-276-00

1 Stück



Klemmpinzette sterilisierbar

Für Seitenzähne.

Besonders gut geeignet zum Setzen von Brackets und Bukkalröhrchen im Seitenzahnbereich.

REF 025-279-00

1 Stück



Klemmpinzette sterilisierbar

Graziles Pinzettendesign für das einfache Positionieren von Brackets und Bukkalröhrchen.

REF 025-280-00

1 Stück



discovery® pearl Debonding-Instrument sterilisierbar

Zum einfachen und sicheren Entfernen von **discovery® pearl Keramikbrackets**.

REF 019-001-00

1 Stück



sl-Instrument, für discovery® sl sterilisierbar

Zum Öffnen und Schließen der selbstligierenden Brackets **discovery sl** (System Roth), **dynamique® m** und **dynamique® c** sowie zum leichteren Einligieren des Bogens.

REF 023-276-00

1 Stück



sl-Instrument, für discovery® sl 2.0 sterilisierbar

Zum Öffnen und Schließen der selbstligierenden Brackets **discovery® sl 2.0** (System McLaughlin-Bennett-Trevisi*) sowie zum leichteren Einligieren des Bogens.

REF 023-277-00

1 Stück

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Scaler, doppelendig sterilisierbar

Zum Entfernen von Adhäsiv- und Zementresten.
Mit Setzhilfe für Bänder, geriffelt.

REF 027-349-00

1 Stück



Separierstreifen sterilisierbar

Breite: 4 mm

Beschichtung	REF	Menge
doppelseitig	018-001-01	12 Stück
einseitig	018-002-01	12 Stück



NEU

Schere

Für dünne Stahlbänder.

Ausführung	REF	Menge
gerade	007-024-00	1 Stück
gebogen	008-025-00	1 Stück



Molarenbandaufsetzer, Kunststoff sterilisierbar bis max. 180 °C

Mit geriffelter Dreikant-Hartmetallspitze.

REF 026-355-00

1 Stück



Bandandrücker

nach Mershon

sterilisierbar

Mit geriffelter Vierkantspitze und anatomischem Griff
für eine gute Kraftübertragung beim Bandsetzen.

REF 024-300-01

1 Stück



DENTAURUM
ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com



Instrumente



Bracket-Markierkreuz

sterilisierbar

Zum Abmessen der Höhe zwischen Slot und Schneidekante beim Setzen von Bändern und Brackets.

Mit Metallspitzen.

REF 030-390-00

1 Stück



Nadelhalter Medium

nach Mathieu

sterilisierbar

Ideal zum Ligieren. In besonders handlicher, bewährter Ausführung. Geriffelte Spitzen.

REF 000-030-00

1 Stück



Nadelhalter Medium, mit Fingerring

nach Bachmann

sterilisierbar

Erleichtert das Ligieren mit dem Mittelfinger unter konstantem Zug. Geeignet auch für Kieferbruchschiene. Geriffelte Spitzen.

REF 000-035-00

1 Stück



Nadelhalter Mini

nach Mathieu

sterilisierbar

Mit besonders zierlichen, geriffelten Spitzen. Für Dentalastics® Kunststoffligaturen.

Nicht für Drahtligaturen.

REF 000-031-00

1 Stück



Mosquitoklemme, ohne Häkchen

sterilisierbar

Kronen-Haltezange oder zum Setzen von Dentalastics® Kunststoffligaturen.

REF 000-730-00

1 Stück



Mosquitoklemme, mit Häkchen

sterilisierbar

Zum Setzen von Dentalastics® Kunststoffligaturen.

REF 000-731-00

1 Stück

Mosquitoklemme, gebogen

sterilisierbar

Zum Setzen und Ligieren von Dentalastics® Kunststoff-ligaturen, speziell in der Lingualtechnik.

REF 000-732-00

1 Stück



Mundspiegel mit Hilfslinien (montiert), lingual

sterilisierbar

REF 023-279-00

1 Stück



Mundspiegel mit Hilfslinien (ohne Griff), lingual

sterilisierbar

REF 023-279-10

1 Stück



Positionierungstool, lingual

sterilisierbar

REF 023-278-00

1 Stück



Ligator

sterilisierbar

Zum schnellen Ligieren ganzer Zahnbögen und 8er-Ligaturen. Y-Spitze erleichtert das Verdrillen der Ligatur.

Max. Drahtstärke: ø 0,3 mm, weich

REF 023-292-00

1 Stück



Zubehör (für Ligator REF 023-292-00)

sterilisierbar

Ersatzteil	REF	Menge
Spitze	023-293-00	1 Stück
Spule	023-294-00	1 Stück
Schraube	023-295-00	1 Stück



Instrumente



Ligaturenspanner und Adapter sterilisierbar

Für lange vorgeformte Ligaturen zum Verdrillen der Enden und Adaptieren.

REF 022-274-00

1 Stück



Ligaturenadapter, doppelendig sterilisierbar

Zum Umbiegen und Adaptieren von Drahtligaturen.

REF 021-273-00

1 Stück



Distalbieger, doppelendig nach Langer

sterilisierbar
Zum sicheren Umbiegen von Bogenenden.
Griff ø: 8 mm

REF 019-000-00

1 Stück



Bogenformer ohne Torque

Zur Formung von planen Bögen aus Vierkantdrähten.

Für Vierkantdrähte:

☑ 0,41 mm / 16

☑ 0,43 mm / 17

☑ 0,46 mm / 18

☑ 0,51 mm / 20

☑ 0,56 mm / 22

Farbe: blau

REF 004-180-00

1 Stück



Bogenformer mit Torque / 16

Zur Formung von planen Bögen oder gewinkelten (Torque) Vierkantbögen.

☑ 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16

in 0°, 7°, 10°, 13° und 16° Torque

Farbe: rot

REF 004-186-00

1 Stück

Bogenformer mit Torque / 16 x 16

Zur Formung von planen Bögen oder gewinkelten (Torque) Vierkantbögen.

☐ 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16

in 0°, 10°, 16° und 23° Torque

Speziell für die Ricketts®-Technik.

Farbe: grün

REF 004-187-00

1 Stück



Bogenformer mit Torque / 18

Zur Formung von planen Bögen oder gewinkelten (Torque) Vierkantbögen.

☐ 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

in 0°, 7°, 10°, 13° und 16° Torque

Farbe: gold

REF 004-182-00

1 Stück



Bogenformer mit Torque / 22

Zur Formung von planen Bögen oder gewinkelten (Torque) Vierkantbögen.

☐ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

in 0°, 7°, 10°, 13° und 16° Torque

Farbe: silber

REF 004-184-00

1 Stück



LinguForm Bogenformer ohne Torque

Zur Formung von planen Bögen aus Rund- oder Vierkantdrähten in der Lingualtechnik.

ø 0,35 mm / 14, ☐ 0,35 mm / 14

ø 0,41 mm / 16, ☐ 0,41 mm / 16

ø 0,46 mm / 18, ☐ 0,46 mm / 18

ø 0,48 mm / 19, ☐ 0,48 mm / 19

ø 0,51 mm / 20, ☐ 0,51 mm / 20

Farbe: silber

REF 004-190-00

1 Stück



Federwaage

Mit Schleppanzeiger zur Messung von Zug- und Druckkräften. Für Messungen am Modell geeignet.

Messbereich	REF	Menge
25 g - 250 g	040-711-00	1 Stück
50 g - 500 g	040-712-00	1 Stück
100 g - 1.000 g	040-713-00	1 Stück



Instrumente



Schiebelehre

nach Beerendonk
Mit langen zierlichen Spitzen.
Für Messungen am Modell geeignet.

REF 042-750-00

1 Stück



Schiebelehre Münchner Modell

Mit extra zierlichen Spitzen. Für Breiten- und
Abstandsmessungen am Modell geeignet.

REF 042-751-00

1 Stück



Messstab

nach Bernklau

sterilisierbar

Material: Edelstahl

Ideal für alle diagnostischen Messungen,
intraoral oder am Modell.

REF 044-730-01

1 Stück



Messkeil

Zur Kontrolle der Spaltbreite bei Dehnplatten.

REF 043-720-00

1 Stück



Lineal

Material: Kunststoff

Zum Messen der Labialbögen, A-Klammern,
Palatinalbögen etc.

Farbe: weiß

REF 766-000-00

1 Stück



Lineal Münchner Modell

Material: Edelstahl

Mit $\frac{1}{2}$ mm und mm-Einteilung.

Länge: 15,0 cm

REF 044-731-00

1 Stück



Messplatte

nach Schmuth

Zur parallaxenfreien, optischen Zahnbogenvermessung.

Wenn bei der Durchsicht das rote Visierraster mit den
entsprechenden schwarzen Messlinien in Deckung liegt,
ist der Parallaxen-Ausgleich zur präzisen Distanzmessung
gewährleistet.

REF 003-366-00

1 Stück

Besteck nach Korkhaus

Set mit Orthometer, mm-Scheibe, cm-Scheibe und Zirkel mit Hülse.

REF 029-360-02

1 Set



Orthometer

Für Besteck nach Korkhaus (REF 029-360-01 und 029-360-02).

REF 029-364-00

1 Stück



Zirkel, mit Hülse

Für Besteck nach Korkhaus (REF 029-360-01 und 029-360-02).

REF 029-361-02

1 Stück




Zentimeter-Scheibe

Für Besteck nach Korkhaus (REF 029-360-01 und 029-360-02).

REF 029-362-00

1 Stück

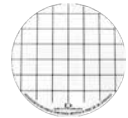


Millimeter-Scheibe

Für Besteck nach Korkhaus (REF 029-360-01 und 029-360-02).

REF 029-363-00

1 Stück

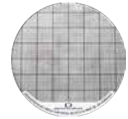

Dreidimensionaler Zirkel

nach Korkhaus
Ermöglicht die Kontrolle über Richtung und Ausmaß der erreichten Zahnbewegungen durch Ansetzen am Modell.
Nicht zur Verwendung im Mund zugelassen!

REF 028-353-00

1 Stück



Zirkel

Standard-Ausführung. Zur Modell-Abmessung und Vermessung von Zahnbreiten durch Ansetzen am Modell.
Nicht zur Verwendung im Mund zugelassen!

REF 030-395-03

1 Stück



Zirkelspitze


Für Zirkel (REF 030-395-02 und 030-395-03).

REF 030-396-02

1 Stück



Zubehör

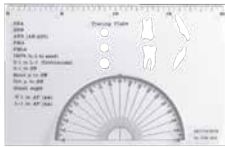

Durchzeichenschablone Standard

Material: Kunststoff
Mit Winkelmesser und Zahnsymbolen.
Zur Auswertung der Fernröntgenbilder.
Maße: 207 mm x 132 mm
Farbe: transparent


REF 004-368-00	1 Stück
----------------	---------



Durchzeichenschablone

nach Ricketts®
Material: Kunststoff
Zur Auswertung der Fernröntgenbilder.
Mit mm-Maßstab, Winkelmesser und ausgestanzten
Zahnsymbolen zum Durchzeichnen.
Maße: 197 mm x 74 mm
Farbe: transparent, klar

REF 004-369-00	1 Stück
----------------	---------

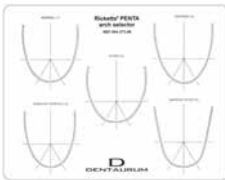

Penta Bogenschablone

nach Ricketts®
Material: Kunststoff
Zur Ermittlung der Penta-Bogenform.
Maße: 30,3 cm x 21,6 cm
Farbe: transparent, klar

REF 004-373-00	1 Stück
----------------	---------



Durchzeichenfolie

Für Fernröntgenbilder. Eine Seite matt, eine Seite glänzend. Abreibblock.

Maße	REF	Menge
17,5 cm x 23,5 cm	075-100-00	100 Stück
24 cm x 30 cm	075-101-00	100 Stück

Pflege-/Schutzöl

Zur Pflege von Zangen und Instrumenten.
Anwendung insbesondere vor der Sterilisation.

REF 055-201-00

50 ml



Zangen- und Drahtständer, kombiniert

Material: Kunststoff

Mit 6 Röhrchen für Stangendrähte.

Nicht geeignet für ethanol-, phenol- bzw.

alkoholhaltige Desinfektionsmittel.

Farbe: transparent, klar

Höhe: ca. 13 cm

Breite: ca. 18 cm

REF 055-101-01

1 Stück



Zangenständer

Material: Kunststoff

Nicht geeignet für ethanol-, phenol- bzw. alkoholhaltige Desinfektionsmittel.

Farbe: transparent, klar

geeignet für	Länge	REF	Menge
ca. 7 Zangen	13,0 cm	055-000-00	1 Stück
ca. 14 Zangen	25,5 cm	055-100-00	1 Stück



Zangenständer

Material: Kunststoff

Für 15 Zangen.

Nicht geeignet für ethanol-, phenol- bzw.

alkoholhaltige Desinfektionsmittel.

Maße: 30 cm x 20 cm x 6,5 cm (B x T x H)

Farbe: weiß

REF 055-105-00

1 Stück



Zubehör



Bohrerständerr Magnethalter

Teilweise aus Kunststoff.

- fester Halt der Instrumente durch Dauermagneten
- Magnethalter ohne Instrumente
- nicht geeignet für ethanol-, phenol- bzw. alkoholhaltige Desinfektionsmittel

REF 089-430-00

1 Stück



Bohrerständerr

Material: Kunststoff

- für 12 Bohrer oder Schleifsteine.
 - Bohrerständerr ohne Instrumente
 - Schaft ø: 2,35 mm
 - nicht geeignet für ethanol-, phenol- bzw. alkoholhaltige Desinfektionsmittel
- Farbe: transparent, klar

REF 089-431-00

1 Stück



Markierungsstift

Fettstift

Farbe: weiß

REF 043-700-00

6 Stück

Markierungsstift

wischfest



Farbe	REF	Menge
schwarz	043-800-00	1 Stück
rot	043-900-00	1 Stück



Geräte.

Für professionelles Arbeiten.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





Zertifizierte Qualität made in Germany.

Dentaurum-Geräte werden in enger Zusammenarbeit mit internen und externen Anwendern entwickelt, gefertigt und geprüft. Die einfache Handhabung und hohe Qualität für eine lange Lebensdauer stehen dabei im Mittelpunkt.

Metallverbindungen in der Kieferorthopädie.

Vom Mini-Gasbrenner bis hin zu technologisch hochentwickelter Laserschweißtechnologie wird ein weites Spektrum für metallische Verbindungen in der Kieferorthopädie abgedeckt.



desktop Compact

Universelles Laserschweißgerät.

Laser Welder SL10

Das Einsteigermodell, ideal für die KFO.

Punktschweißgerät

Assistent 3000.

Doppelscheiben-Modelltrimmer

Schöne Modelle – schnell und sauber getrimmt.

Absauganlage

Schutz gegen Dämpfe bei der Verarbeitung.

activeblue

Schonende Entfernung von Belägen.

Punktschweißgerät.

Für professionelle Schweiß- und Lötarbeiten
in der Kieferorthopädie.

Für alle Anwender das richtige Gerät.

Der Assistent 3000 ist für jede KFO-Schweiß- und Lötaufgabe genau das richtige Gerät für professionelles und rationelles Arbeiten in der kieferorthopädischen Praxis oder im Labor. Funktions- und Zubehörfumfang sowie die Ergonomie basieren auf den langjährigen Erfahrungen unseres Entwicklungsteams in enger Zusammenarbeit mit Kieferorthopäden.

Modernste Technologie – ausgezeichnete Arbeitsergebnisse.

Der Einsatz modernster elektronischer Komponenten in Kombination mit qualitativ hochwertigen mechanischen Bauteilen im Assistent 3000 ist die Ursache für konstant gute Ergebnisse beim Schweißen und Löten. So machen z. B. die elektronischen Schweiß-einstellungen oder die extrabreiten Handauflagen das Arbeiten einfach, komfortabel und effektiv.

Assistent 3000 – das komfortable Gerät für mittlere Nutzungsintensität.

Mit dem Assistent 3000 können bei mittlerem Arbeitsaufkommen hervorragende Ergebnisse rationell erzielt werden.

Besonderes Merkmal ist u. a.

- die 6-stufige Einstellung beim Schweißen oder die 2-stufige beim Löten.



Dentaurum-Lasertechnologie.

Professionelles Schweißen in der Kieferorthopädie.

Laserschweißen – die moderne Fügetechnik.

Das Laserschweißen ermöglicht ein rationelleres Arbeiten. Im Vergleich zum herkömmlichen Löten sparen Sie bis zu 80 % Ihrer Zeit. Neuanfertigungen und Reparaturen können Sie durch den Einsatz eines Dentallasers schneller und besser erledigen.

Ihre Vorteile:

- Materialschonend.
- Biokompatibel.
- Korrosionsfest.



Höchste Stabilität.

Lasergeschweißte Verbindungen zeigen eine wesentlich höhere mechanische Belastbarkeit und sind haltbarer als gelötete Verbindungen. Damit bieten Sie Ihrem Kieferorthopäden und Patienten mehr Sicherheit und Qualität.

Breites Anwendungsspektrum.

In der Fügetechnik ist das Laserschweißen nicht mehr wegzudenken, da es im Vergleich zum Löten ein wesentlich verbessertes Anwendungsspektrum ermöglicht.

Egal ob Sie hochgoldhaltige Edelmetalllegierungen, edelmetallfreie Legierungen oder Titan verarbeiten wollen: Mit den Dentallasern von Dentaureum decken Sie das gesamte Spektrum der Dentalwerkstoffe ab.

Ergonomie – beispielhaft benutzerfreundlich.

Die Dentallaser von Dentaureum zeichnen sich durch ein besonderes ergonomisches Design aus. So wird das Arbeiten mit dem Laser für Sie bequem und einfach.

- Die Dentallaser zeigen ihre besonders gute Ergonomie in der optimalen Neigung der Laserachse. Dadurch sitzen Sie nicht nur entspannt am Mikroskop, sondern können das Werkstück auch im optimalen Winkel halten.
- Durch die Argondüse wird das Werkstück immer optimal mit Argon umspült. Dies gewährleistet eine oxidationsfreie Schweißverbindung mit hoher Festigkeit.
- Der desktop Compact erfüllt höchste Ansprüche in allen Bereichen der Zahntechnik und KFO. Der Laser Welder SL 10 ist das ideale Einstiegsmodell in die Lasertechnologie.

Geräte und Zubehör



Netzspannung	REF	Menge
200 V - 240 V	090-578-50	1 Stück

Technische Daten

max. gemittelte Leistung	60 W
Pulsspitzenleistung	5.000 W
Pulsenergie	50 J
Pulsdauer	0,5 ms - 20 ms
Pulsfrequenz	Einzelpuls - 25 Hz
Schweißpunktdurchmesser	0,2 mm - 2,0 mm, motorisch stufenlos einstellbar
Speicherplätze	39
Pulsformung	4 Pulsformen fest eingestellt
Argondüse	1x flexibel, 1x abklippbar fest
Luftdüse	integriert in Schweißkammer
Absaugung	integriert mit Schwebstofffilter (H14)
Mikroskop	Stereomikroskop mit 16-facher Vergrößerung
Beleuchtung	2 x 3,2 W LED
max. Arbeitshöhe	88 mm
Netzsicherung	T 16 A
Netzfrequenz	50 Hz - 60 Hz
Gewicht	42 kg
Abmessungen (B x H x T)	510 mm x 500 mm x 630 mm

desktop Compact

Laserschweißtechnik – leistungsstark und handlich.

30 Jahre dentale Laserschweißtechnik in einem kompakten Tischgerät gebündelt. Von feinsten Schweißungen bis zur sicheren Fügearbeit, der desktop Compact Laser deckt alle Bereiche der Zahntechnik sowie der kieferorthopädischen Anwendung ab. Eine feine Dosierbarkeit der Leistung erleichtert die Arbeit entscheidend. Die sehr kompakten Baumaße waren bisher für Laser dieser Leistungsbreite nicht möglich. Eine einfache Bedienung des Gerätes erleichtert ermüdungsfreies Arbeiten.

Produktvorteile:

- äußerst kompaktes Tischgerät
- einfache Bedienung und Übersichtlichkeit mit Touchscreen
- hohe Leistungsreserve
- ergonomisches Design – große Arbeitskammer mit Kippung der Laserachse
- hochwertiges Mikroskop mit gutem Blickfeld
- integrierte Pulsformung – 4 voreingestellte Pulsformen
- zwei Schutzgasdüsen, 1x flexibel und 1x abklippbar fest
- große Einstellbreite der Pulsparameter – einfache Bedienung über Joysticks
- integrierte Absaugung und Kühlluftdüse

Weitere Produktinformationen auf Anfrage.

Laser Welder SL10

Der Laser Welder SL10 von Siro Lasertec ergänzt den desktop Compact als günstiges Einstiegsmodell in der Laserschweißtechnik. Er ist ideal für den Einsatz in der KFO-Praxis und kleinen Dentallaboren.

Produktvorteile:

- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- großes farbiges Touch-Display
- besondere Eignung für kieferorthopädische Apparaturen
- Schweißleistung für alle dentalen Einsatzgebiete
- einfache Bedienung
- mit Mikroskop
- solides Metallgehäuse
- Einstellung der Schweißparameter am Touchpanel
- Farbkamera zur Übertragung der Schweißung auf das Display
- als Tischgerät konzipiert



Netzspannung	REF	Menge
230 V~	090-594-00	1 Stück

Technische Daten

max. gemittelte Leistung	60 W
Pulsspitzenleistung	3.800 W
Pulsenergie	33 J
Pulsdauer	0,1 ms - 10 ms
Pulsfrequenz	0,5 Hz - 20 Hz
Schweißpunktdurchmesser	0,2 mm - 2,0 mm, motorisch stufenlos einstellbar
Schutzgas	Argon 99,996 % (Argon 4.6)
Pulsformung	nein
Argondüse	1x flexibel
Absaugung	integriert mit Schwebstofffilter
Mikroskop	Stereomikroskop mit 16-facher Vergrößerung
Beleuchtung	2 x 3 W LED
max. Arbeitshöhe	200 mm
Netzsicherung	T 16 A
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Gewicht	40,5 kg
Abmessungen (B x H x T)	440 mm x 480 mm x 600 mm



Geräte und Zubehör



Elektrisch höhenverstellbares Stativ

Die ergonomisch unübertroffene Lösung mit den Dentaurnum-desk-top-Lasergeräten.

Produktvorteile:

- dieses Stativ bietet dem Anwender die denkbar bestmögliche Ergonomie
- das elektrisch individuell höhenverstellbare Stativ ermöglicht über Fußschalter innerhalb von Sekunden die optimale Anpassung an die jeweils unterschiedliche Körpergröße der Mitarbeiter im Labor. So ist immer die perfekte Arbeitshaltung gegeben
- diese optimalen Voraussetzungen ermöglichen die volle Konzentration auf die auszuführende Laserarbeit und sind die Grundlage für beste Arbeitsergebnisse
- einsetzbar mit allen Dentaurnum-Tischlasergeräten

Netzspannung	REF	Menge
230 V~	090-574-00	1 Stück

Technische Daten

Netzfrequenz	50 Hz
min. Arbeitshöhe	740 mm
max. Arbeitshöhe	1.090 mm



Argonarmatur

Für Laser.

Zum Anschließen des Lasers an die Argongasflasche.
Durchflussanzeige in Liter.

REF 090-404-00

1 Sortiment



Handauflagekissen

Für Laser.

REF 090-513-10

2 Stück

CoCr-Schweißdraht

Ideale Dimensionierung als Zusatzmaterial zum Laserschweißen für alle CoCr-Legierungen.

Norm: DIN EN ISO 28319

ø	Länge	REF	Menge
0,25 mm / 10	2 m	528-215-10	1 Stück
0,35 mm / 14	2 m	528-210-10	1 Stück
0,50 mm / 20	2 m	528-200-10	1 Stück

Zusammensetzung (Massen-%)

Co	Cr	Mo
65,0	28,0	5,5

Weitere Elemente < 1 %: Mn, N, Si

**NiCr-Schweißdraht**

Zum Laserschweißen von NiCr-Basislegierungen.

Speziell für hochwertige Legierungen wie remanium® CSe und G-weich.

Norm: DIN EN ISO 28319

ø	Länge	REF	Menge
0,50 mm / 20	2 m	528-220-00	1 Stück

Zusammensetzung (Massen-%)

Ni	Cr	Mo	Nb
63,0	22,0	9,0	3,5

Weitere Elemente < 1 %: Al, Co, Fe, Ti

**rematitan® Rollendraht**

Titan Grade 1

Für Laserschweißungen von Titangerüsten.

Empfohlen als Zulegematerial für das Laserschweißen, z.B. bei GNE-Apparaturen aus Titan (Titan hyrax® Maxi – 12).

Norm: DIN EN ISO 28319, DIN EN ISO 5832-2

ø	Länge	REF	Menge
0,40 mm / 16	2 m	528-039-50	1 Stück
0,70 mm / 28	2 m	528-040-50	1 Stück



Geräte und Zubehör



rematitan® Stangendraht

Titan Grade 1

Für Laserschweißungen.

Norm: DIN EN ISO 28319, DIN EN ISO 5832-2

ø	Länge	REF	Menge
1,00 mm / 39	à 100 mm	528-041-00	10 Stück
1,20 mm / 47	à 100 mm	528-042-00	10 Stück



rematitan® Stangendraht

Titan Grade 4

Für Laserschweißungen.

Empfohlen für Riegelachsen.

Norm: DIN EN ISO 28319, DIN EN ISO 5832-2

ø	Länge	REF	Menge
1,50 mm / 59	50 mm	528-050-00	1 Stück



rematitan® Stangendraht

Titan Grade 1

Für Laserschweißungen.

Norm: DIN EN ISO 28319, DIN EN ISO 5832-2

ø gewalzt	Länge	REF	Menge
0,50 mm x 1,5 mm / 20 x 59	à 100 mm	528-043-00	10 Stück



Punktschweißgerät Assistent 3000

- Taste für Dauerlöten
- LED-Anzeige
- automatische Spannungserkennung
- Strombegrenzung bei Elektrodenverwechslung
- Stromspareinrichtung (Stand-by nach Nichtbenutzung ab 10 Minuten)
- Fehlermeldung bei:
 - Übertemperatur
 - Verwechslung der Elektroden
- Handelektrodenanschluss
- Fußschalteranschluss

Handelektroden, Halterungen für Handelektroden und Fußschalter sind nicht im Lieferumfang enthalten!



Netzspannung	REF	Menge
110 V~ / 240 V~	078-000-00	1 Stück

Technische Daten

Nennleistung	140 W
Schweißstrom	bis 2.000 A
Schweißstufen	6 Stufen
Lötstufen	2 Stufen, Dauerlöten
Netzspannung	T 3, 15 A
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Gewicht	8 kg
Abmessungen (B x H x T)	335 mm x 130 mm x 310 mm



Geräte und Zubehör



Fußschalter

Geeignet für die Punktschweißgeräte Junior 3000, Assistent 3000 und Master 3000.

REF 080-116-00

1 Stück



Handelektrode

Geeignet für alle Dentaaurum-Punktschweißgeräte.

REF 081-101-00

1 Stück



Halter für Handelektrode

Für Punktschweißgeräte Junior 3000, Assistent 3000 und Master 3000.

Ausführung	REF	Menge
für rechte und linke Seite	081-204-00	2 Stück
für rechte Seite	081-205-00	1 Stück
für linke Seite	081-206-00	1 Stück



Löt Kohle für Handelektrode

Geeignet für alle Dentaaurum-Punktschweißgeräte.
Kupferummantelung.

REF 081-601-00

1 Stück



Elektrode, gekerbt, für Handelektrode

Geeignet für alle Dentaaurum-Punktschweißgeräte.
Zum Weichglühen, Vergüten und Schweißen.

REF 081-501-00

2 Stück



Klemmelektrode für Handelektrode

Geeignet für alle Dentaaurum-Punktschweißgeräte.
Zum Weichglühen, Vergüten und Schweißen.

REF 081-701-00

1 Stück

Schweißelektrode

Geeignet für alle Dentaureum-Punktschweißgeräte.

Material: Kupfer

Schweißelektrode	Ausführung	REF	Menge
obere	rund, fein	085-000-00	1 Stück
obere	breit, flach	085-100-00	1 Stück
obere	rund, dick	085-200-00	1 Stück
untere	rund, fein	086-000-00	1 Stück
untere	breit, mit Kerbe	086-100-00	1 Stück
untere	rund, dick	086-200-00	1 Stück
untere	breit, flach	086-300-00	1 Stück



Lötelektrode

Geeignet für alle Dentaureum-Punktschweißgeräte.

Kohle mit Halter.

REF 085-300-00	1 Stück
----------------	---------



Kohleeinsatz

Für Lötelektrode (REF 085-300-00).

REF 085-400-00	10 Stück
----------------	----------



Geräte und Zubehör



Schraube

Zum Fixieren der Elektroden an Dentaureum-Punktschweißgeräten.

REF 084-100-00

10 Stück



Schmirgelfeile

Zum Reinigen der Kupfer- und Kohleelektroden bei Punktschweißgeräten.

REF 083-300-00

10 Stück



Hitzeschutz

Schützt Metall-, Kunststoff- oder Keramikteile während des Lötvorgangs vor Hitzeschäden.

REF 380-070-00

100 g



Dentaflux® Flussmittel

- Universal-Flussmittel
- für alle Legierungen
- speziell für Kombinationslötungen zwischen Edelmetall- und edelmetallfreien Legierungen

REF 681-100-00

50 g

Universal Silberlot

- in Röhrenform
- eingeschlossenes Flussmittel
- cadmiumfrei

Nicht zur Verwendung im Mund zugelassen.

Ø 1,0 mm - 1,1 mm

Arbeitstemperatur 700 °C

REF 380-604-50	1,2 g
REF 380-604-60	10 Stück je 1,2 g

Zusammensetzung (Massen-%)

Ag	Zn	Cu
59,0	24,0	16,0

**Universal Silberlot**

- auf Rolle
- ohne Flussmittel
- cadmiumfrei

Nicht zur Verwendung im Mund zugelassen.

Ø 0,6 mm

Arbeitstemperatur 700 °C

REF 380-704-50	10 g
----------------	------

Zusammensetzung (Massen-%)

Ag	Zn	Cu
59,0	25,0	16,0

**Weißgoldlot**

- in Röhrenform
- eingeschlossenes Flussmittel
- Reinheit: Kt 18,6
- cadmiumfrei

Nicht zur Verwendung im Mund zugelassen.

Ø 1,0 mm - 1,1 mm

Arbeitstemperatur 950 °C

REF 380-600-50	1,6 g
----------------	-------

Zusammensetzung (Massen-%)

Au	Ni	Zn
77,0	16,0	6,0



Geräte und Zubehör



activeblue Reinigungsgerät

Mit activefluid Reinigungsflüssigkeit.
Für die schonende Entfernung von Belägen an
herausnehmbaren KFO-Apparaturen.

Lieferumfang:

- 1 x Reinigungsflüssigkeit, 1.000 ml (REF 150-020-00)
- 1 x Reinigungsbecher, weiß
- 1 x Reinigungsnadeln, 75 g (REF 098-001-00)
- 1 x Pinzette
- 1 x Haltemagnet
- 1 x Netzkabel (230 V)

Technische Daten

Netzspannung	100 V~ - 240 V~ bei 50 Hz / 60 Hz
Drehzahl	1.200 min ⁻¹ / 1.600 min ⁻¹ / 2.000 min ⁻¹
Netzsicherung	T 1,6 A L 250 V
Geräuschpegel	< 70 dB (A)
Gewicht	3 kg
Abmessungen (B x H x T)	150 mm x 240 mm x 280 mm

REF 098-000-00

1 Stück



Reinigungsnadeln für activeblue

Für activeblue Reinigungsgerät.

REF 098-001-00

1 Dose à 75 g



activefluid Reinigungsflüssigkeit

Für activeblue Reinigungsgerät.

REF 150-020-00

1.000 ml

Polyclav®

Drucktopf für die Polymerisation von Kaltpolymerisaten,
induktionsgeeignet.
Mit Sicherheitsventil.

Ohne Druckschlauch.

Fassungsvermögen: 4,5 l

REF 070-010-00

1 Stück

**Druckschlauch**

Für Polyclav® (REF 070-010-00).

Mit Stecknippel passend zum Einlassventil sowie
Normanschluss für Pressluftsteckdosen.

Länge: 1,5 m

Pmax: 8,0 bar

REF 070-015-00

1 Stück

**Wärmeplatte**

Für Polyclav® (REF 070-000-00 und 070-010-00).

Netzspannung	REF	Menge
230 V~	070-900-00	1 Stück

**Technische Daten**

Nennleistung	125 W
Wassertemperatur thermostatisch reguliert	43 °C
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Gewicht	2,6 kg
Abmessungen (B x H x T)	240 mm x 240 mm x 75 mm

Absauggerät mit Aktivkohlefilter

Zum Schutz gegen Dämpfe bei der Verarbeitung von Kunststoffen im Labor.

- Steuerung durch eine Lichtschranke (automatisches Ein- und Ausschalten)
- mit Betriebsstundenzähler
- einfacher Filterwechsel (Filterkassette, REF 072-001-40, nach etwa 50 Betriebsstunden wechseln)

Netzspannung	REF	Menge
230 V~	072-001-00	1 Stück

**Technische Daten**

Nennleistung	100 W
Netzfrequenz	50 Hz
Gewicht	6 kg
Abmessungen (B x H x T)	220 mm x 260 mm x 260 mm

Geräte und Zubehör



Doppelscheiben-Modelltrimmer

Für Gipsmodelle.

Je eine grobe und eine feine Korundscheibe, beidseitig verwend- und austauschbar. Getrennt einschaltbare Motoren mit 450 W-Leistung. Wasserzufluss einzeln regulierbar. Automatische Wasserdruckkontrolle durch Elektromagnetventil. Arbeitstisch mit Winkleinstellung und Modellfixierung.

Netzspannung	REF	Menge
230 V~	091-100-00	1 Stück

Technische Daten

Nennleistung	2 x 450 W
Drehzahl	1.400 min ⁻¹
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Gewicht	39 kg
Abmessungen (B x H x T)	530 mm x 400 mm x 385 mm

Korundscheibe

Für Denta-urum-Doppelscheiben-Modelltrimmer (REF 091-100-00).

Körnung	REF	Menge
46 = grob	091-101-00	1 Stück
120 = fein	091-102-00	1 Stück

**Diamantscheibe, grob**

Für Denta-urum-Doppelscheiben-Modelltrimmer (REF 091-100-00).

- lange Lebensdauer
- extrem hohe Schleifleistung
- geringer Kraftaufwand

REF 091-105-00	1 Stück
----------------	---------

**Mini-Gasbrenner**

Anzünden und Einstellen der Flamme schnell und unkompliziert mit einem Fingerdruck (Automatik).
Wie ein Feuerzeug zu befüllen. Verstellbare Brennerdüse.

Technische Daten

Max. Temperatur	1.300 °C
Füllmenge	65 ml
Gewicht	280 g

REF 097-400-01	1 Stück
----------------	---------



Geräte und Zubehör

Modelliereinsatz für Thermomat



Bezeichnung	REF	Menge
Wachsmesser, klein	089-602-00	1 Stück
Wachsmesser, groß	089-605-00	1 Stück
Modellierspitze, fein	089-603-00	1 Stück
Modellierspitze, mittel	089-604-00	1 Stück
Modellierlöffel	089-606-00	1 Stück



Handstück mit Kabel

Für Thermomat (REF 089-620-00).

REF 089-612-00

1 Stück

o-atlas II	Seite	448
Gullivers Reise ins Zahnspangenland	Seite	450
Zahnspangenland	Seite	452
Mediathek	Seite	454
Download-Center	Seite	456
Newsletter/Social Media	Seite	458
Patientenberatung	Seite	460
Build-a-Brace	Seite	462
create®	Seite	464



Wissen I Praxismarketing.

Der Schlüssel zum Erfolg.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





Das Nachschlagewerk für die herausnehmbare KFO-Technik.

Der Atlas der herausnehmbaren KFO-Technik.

In einer komplett überarbeiteten, erweiterten und neu bebilderten Neuauflage stellt Ursula Wirtz alle wichtigen herausnehmbaren KFO-Apparaturen vor.


Das als Arbeits- und Studienhilfe konzipierte Standardwerk der herausnehmbaren KFO-Technik ist reich bebildert und dient sowohl Kieferorthopäden als auch Zahntechnikern als fundiertes Nachschlagewerk.

Der o-atlas II zeigt prägnant und präzise, was bei der Erstellung der KFO-Apparaturen zu beachten ist. Ein ansprechendes und modernes Buchdesign zeichnet diese Neuauflage aus.

- Ca. 390 Seiten mit mehr als 1.000 Bildern in gebundener Version.
- 235 verschiedene KFO-Apparaturen werden gezeigt und beschrieben. Weitere 44 KFO-Apparaturen sind im o-atlas II neu hinzugekommen.
- Mehr als 800 Bilder wurden durch qualitativ hochwertige, neue Aufnahmen ersetzt.
- 360° Drehtelleraufnahmen der 50 interessantesten KFO-Apparaturen werden online vorgestellt unter www.o-atlas.com.
- Intelligente Verbindung von Print- und Online-Medium im o-atlas II.

Jetzt bestellen – Bestellinformation:

Buch – Deutsch	REF 903-920-10
Buch – Englisch	REF 903-920-20
Buch – Französisch	REF 903-920-30
Buch – Spanisch	REF 903-920-40
Buch – Polnisch	auf Anfrage

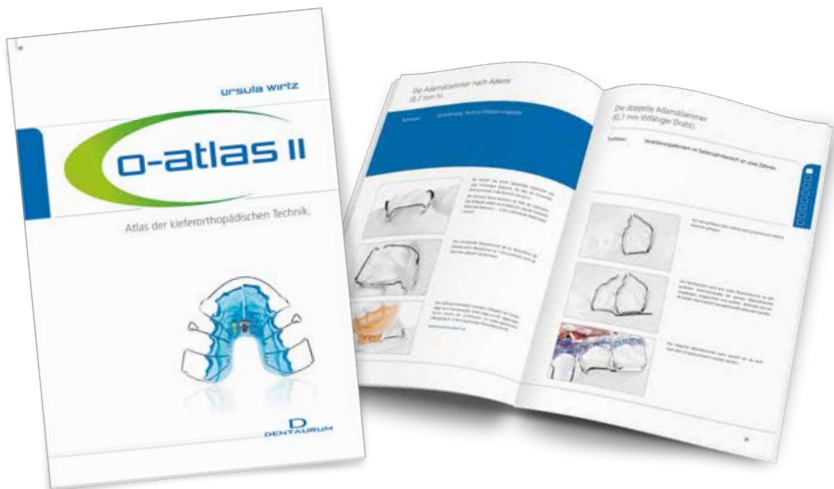

Gullivers Reise ins Zahnspangenland.

Ein Junge. Ein Abenteuer. Ein Buch.

Eine Abenteuergeschichte für Kinder und Eltern.

Die Abenteuergeschichte des kleinen Gulliver bereitet junge Patientinnen und Patienten im Alter von acht bis zwölf Jahren auf eine kieferorthopädische Behandlung vor. Die Geschichte soll Vorurteile gegenüber einer solchen Behandlung abbauen und die Mitarbeit der Patienten, die für den Behandlungserfolg von entscheidender Bedeutung ist, verbessern.

- Ab 8 Jahren.
- Inkl. kleinem KFO-Lexikon im Anhang.
- 52 Seiten, gebunden.
- Format: 21 x 21 cm

Jetzt bestellen – Bestellinformation:


Gullivers Reise ins Zahnspangenland

REF 989-501-11



Ein Kinderbuchklassiker ist wieder da!

Auf Schule und Hausaufgaben hat Gulliver gar keine Lust. Also macht er sich auf in ein Abenteuer. Was wird Gulliver im Zahnsparthenland erleben? Lernen Sie ihn kennen und gehen Sie mit ihm auf große Reise.

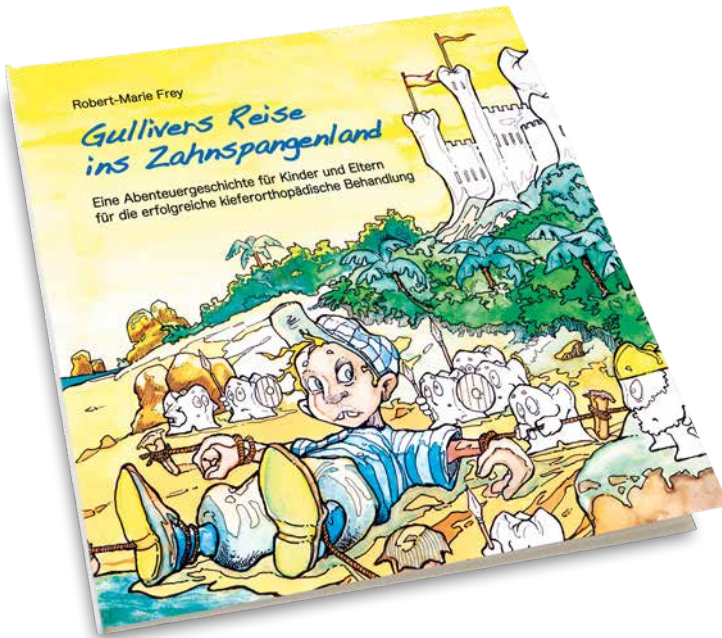

Zahnsparngenland.de

Das KFO-Infoportal für interessierte Patienten.

www.zahnsparngenland.de

Auf jede Frage eine Antwort!


- Wie oft wird eine Zahnsparnge getragen?
- Kann man damit Sprechen und Essen?
- Wie lange dauert eine Behandlung?

www.zahnsparngenland.de informiert junge Patientinnen und Patienten über die Kieferorthopädie. Nützliche Informationen und hilfreiche Tipps klären vor und während der Behandlung auf. Fragen rund um festsitzende und herausnehmbare Zahnsparngen werden leicht verständlich und fachlich korrekt beantwortet, komplizierte Zusammenhänge kindgerecht erläutert und durch Bilder veranschaulicht.



Kinder entdecken die Kieferorthopädie

Tolle Ausmalbilder, Videos und hilfreiche Links zum Thema Zahnsparngen gibt es auf www.zahnsparngenland.de.

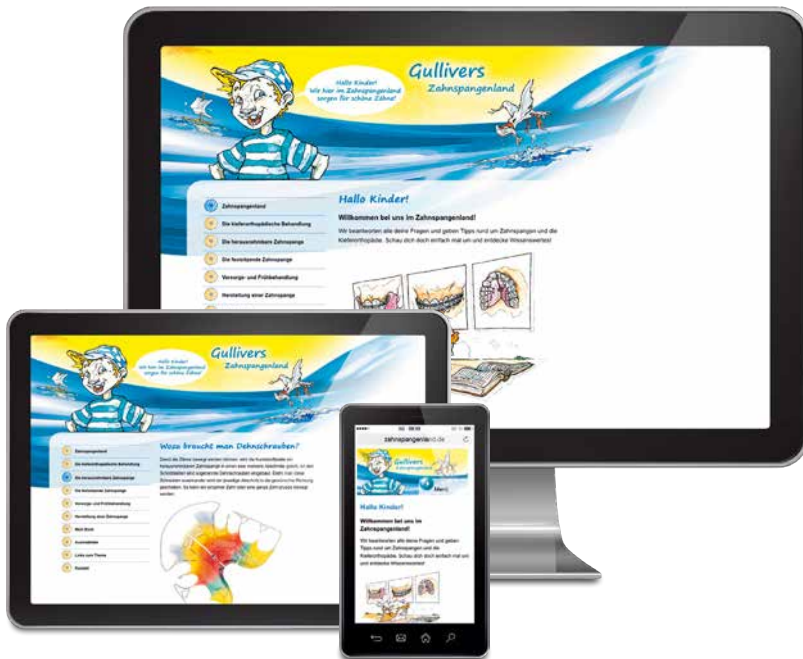

Online-Mediathek.


Videos und Tutorials.

www.dentaurum.com/deu/mediathek

Sehen wie es funktioniert.

In unserer Mediathek auf www.dentaurum.com finden Sie Video-clips und Animationen in höchster Qualität, die Ihnen Schritt für Schritt den Umgang mit unseren Produkten erklären.



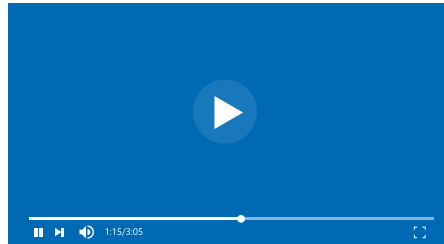

ALLE

ORTHODONTIE

PROTHETIK

KERAMIK

IMPLANTOLOGIE

FORTBILDUNGEN & EVENTS

UNTERNEHMEN

ALLE ORTHODONTIE



Digitale Kieferorthopädie



Dentaurum Dehnschrauben



Dentaurum Bracketwelt



Download-Center.

Schneller und bequemer Zugriff
auf Gebrauchsanweisungen und Co.

www.dentaurum.com/deu/downloads

Kostenlose Downloads.

Den Zugriff auf wichtige Dokumente rund um unsere Produkte wollen wir Ihnen so einfach wie möglich machen.

Auf www.dentaurum.com bieten wir Ihnen deshalb in unserem Download-Center eine umfangreiche Auswahl an kostenlosen Downloads. Übersichtlich strukturiert für einen bequemen Zugriff.

- Gebrauchsanweisungen.
- Sicherheitsdatenblätter.
- Produktinformationen.
- Kataloge.
- Fachpublikationen.
- Patienteninformationen.
- Kursprogramme.
- Zertifikate.





Dentaurum-News.

Stets aktuell informiert.

www.dentaurum.com/deu/newsletter

Dentaurum-News direkt ins E-Mail-Postfach.

Der Dentaurum-Newsletter informiert Sie über unsere Produkte sowie rund um das Thema Fortbildung.

Jetzt anmelden unter:

www.dentaurum.com/deu/newsletter



Social Media.

Aktuelle Informationen, Aktionen und Einblicke in das Unternehmen finden Sie in den Sozialen Netzwerken. **Verbinden Sie sich mit uns!**



www.facebook.com/DentaurumGermany



www.youtube.com/Dentaurum



www.instagram.com/dentaurum_germany



www.pinterest.com/dentaurumgmbhco



www.xing.com/companies/dentaurumgmbh&co.kg



www.kununu.com/dentaurum-co

Patientenberatung.

Erfolgreiche Behandlung mit der richtigen Beratung.

Patientenberatung leicht gemacht.

Die richtige Beratung und das fachgemäße Aufklären des Patienten sind wichtige Schlüssel zum Erfolg einer Behandlung.

Von Postern, über ausführliche Patienteninformationen und Broschüren, bis hin zu verschiedensten Demonstrationsmodellen und einer App für Smartphones und Tablets.

Unser umfangreiches Angebot an Informationsmaterial unterstützt Sie bei der täglichen Patientenberatung.





Build-a-Brace.

Moderne, digitale Patientenberatung.

Patientenberatung mal ganz anders.

Dentaurums Zahnspangen-App: Build-a-Brace eignet sich hervorragend als innovatives Beratungstool für die moderne kieferorthopädische Praxis. Lassen Sie Ihre Patienten ihre eigene Zahnspange am Smartphone oder Tablet designen und leiten Sie das Design direkt an Ihr Dentallabor weiter.

Kostenlos für Smartphones & Tablets – für iOS und Android.

Die Zahnspangen-App ist in den Sprachen Deutsch und Englisch verfügbar und kann kostenlos im App Store oder bei Google Play heruntergeladen werden.







You create your life – we create your website.

www.dentaurum.com/create

Erfolgreiche Websites für Praxen und Labore.

Ein professioneller Auftritt im Internet spiegelt das Potential Ihrer Praxis, Ihres Teams und Ihrer Leistungen optimal wider und überzeugt jeden Patienten.

Mit unserem Website-Service create® erhalten Sie in kürzester Zeit eine professionelle, moderne Website – mit minimalem Zeitaufwand für Sie!

Das Dentaurum Internet-Team ist für Sie da.

Gerne gestalten wir Ihren neuen Internetauftritt oder rücken Ihre alte Website wieder ins richtige Licht.

Unsere Kontaktdaten.

- | | |
|------------|--|
| ■ E-Mail: | create@dentaurum.com |
| ■ Telefon: | 072 31/803-390 |
| ■ Fax: | 072 31/803-278 |



Was bietet Ihnen create®:

- Ausgewähltes Text- und Bildmaterial.
- Umfangreicher Bild- und Medienpool.
- Moderne, individualisierbare Designs.
- Suchmaschinen- und Smartphone-Optimierung.
- Einfache Pflegbarkeit.
- Persönliche Betreuung.

Zufriedene Kunden sind die beste Referenz.

Besuchen Sie eine Auswahl an professionellen Websites, die wir für unsere Kunden bereits erfolgreich umgesetzt haben:

www.dentaurum.com/create-referenzen



Kurse	Seite	468
Webinare	Seite	470



Kurse, Webinare und Events.



Wissen verbindet.

Digital. Analog. International.



Für Kurse und Veranstaltungen bietet Ihnen Dentaurum den Rahmen, ob Präsenz oder Digital auch in den verschiedensten Sprachen. Erweitern Sie mit uns Ihren Horizont und informieren Sie sich über die neuesten, weltweiten Entwicklungen und Erkenntnisse in der Orthodontie.

Ein Überblick.



Fortbildungen Orthodontie.

- Typodontkurse
- Spezialkurse
- Skelettale Verankerung
- Kurse für zahnmedizinische Fachangestellte
- Abrechnung
- Praxismanagement
- Digitale Kieferorthopädie
- Kieferorthopädische Zahntechnik für Einsteiger und Profis

Mehr Informationen über unser Kursangebot unter www.dentaurum.de/kurse oder fordern Sie das aktuelle Kursprogramm an: +49 72 31/803-470.



Jetzt anmelden unter:
www.dentaurum.de/kurse

Webinare bei Dentaaurum.



Informativ, innovativ und international – so präsentiert sich das Webinarangebot von Dentaaurum. Nationale und internationale Experten und Expertinnen aus den Bereichen Orthodontie, Implantologie, Zahntechnik und Keramik referieren zu unterschiedlichen Themen. Ob Live-Webinar oder Webinar on demand – das Angebot ist die ideale Ergänzung zum umfangreichen Kursprogramm von Dentaaurum.

Webinare jederzeit und von überall auf der Welt abrufbereit!



Jetzt registrieren unter:
www.dentaaurum.de/webinare



Kontakt	Seite	13
Bracketsysteme – Informationen	Seite	474
Aufschweißdienst – Bandtechnik	Seite	476
Bänder – Vergleichstabellen	Seite	488
Drähte – Informationen	Seite	496
Werkstoffliste	Seite	498
Umrechnungstabellen	Seite	506
Lieferservice	Seite	508
Umwelt und Nachhaltigkeit	Seite	510
Index alphabetisch	Seite	512
Index numerisch	Seite	522
Liefer- und Zahlungsbedingungen	Seite	546
Bestellformular	Seite	551



Dentaurum-Service.

Mehrwert durch Beratung und Unterstützung.



Bracketsysteme – Informationen

Tabelle der am häufigsten verwendeten „Festsitzenden Behandlungstechniken“

Oberkiefer	<u>1</u> <u>1</u>		<u>2</u> <u>2</u>		<u>3</u> <u>3</u>		<u>4</u> <u>4</u>		<u>5</u> <u>5</u>		<u>6</u> <u>6</u>		<u>7</u> <u>7</u>			
System	Torque	Angu- lation	Torque	Angu- lation	Torque	Angu- lation	Torque	Angu- lation	Torque	Angu- lation	Torque	Angu- lation	Distal Offset = Anti Rota- tion	Torque	Angu- lation	Distal Offset = Anti Rota- tion
Alexander	+ 14°	+ 5°	+ 7°	+ 8°	− 3°	+ 10°	− 7°	0°	− 7°	0°	− 10°	0°	15°	− 10°	0°	12°
Andrews	+ 7°	+ 5°	+ 3°	+ 9°	− 7°	+ 11°	− 7°	+ 2°	− 7°	+ 2°	− 15°	+ 1°	16°	− 15°	+ 1°	16°
McLaughlin- Bennett-Trevisi*	+ 17°	+ 4°	+ 10°	+ 8°	<i>−7°/0°/+7°</i>	+ 8°	− 7°	0°	− 7°	0°	− 14°	0°	10°	− 14°	0°	10°
Burstone	+ 7°	+ 5°	+ 3°	+ 8°	− 7°	+ 10°	− 7°	0°	− 7°	0°	− 10°	− 5°	10°	− 10°	0°	6°
Hasund	+ 20°	+ 3°	+ 14°	+ 9°	− 2°	+ 6°	− 10°	+ 2°	− 10°	+ 2°	− 20°	+ 3°	10°	− 25°	+ 5°	6°
Hilgers	+ 22°	+ 5°	+ 14°	+ 8°	+ 7°	+ 10°	− 7°	0°	− 7°	0°	− 10°	0°	14°	− 10°	0°	10°
Ricketts® – IV. Dimension	+ 22°	0°	+ 14°	+ 8°	+ 7°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	15°	− 10°	0°	12°
Ricketts® Universal	+ 22°	0°	+ 14°	+ 8°	+ 7°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°			
Roth	+ 12°	+ 5°	+ 8°	+ 9°	− 2°	<i>+9°/+13°</i>	− 7°	0°	− 7°	0°	− 14°	0°	14°	− 14°	0°	14°
Standard Edgewise	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Tweed	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°/6°	0°	0°	0°/6°
Begg	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	6°	0°	0°	6°

Unterkiefer	1		2		3		4		5		6		7			
System	Torque	Angulation	Torque	Angulation	Torque	Angulation	Torque	Angulation	Torque	Angulation	Torque	Angulation	Distal Offset = Anti Rotation	Torque	Angulation	Distal Offset = Anti Rotation
Alexander	− 5°	0°	− 5°	0°	− 7°	+ 6°	− 11°	0°	− 17°	0°	− 22°	− 6°	5°	− 27°	0°	5°
Andrews	− 6°	+ 2°	− 6°	+ 2°	− 11°	+ 7°	− 17°	− 2°	− 22°	− 2°	− 30°	− 2°	6°	− 31°	− 2°	6°
McLaughlin-Bennett-Trevisi*	− 6°	0°	− 6°	0°	-6°/0°/+6°	+ 3°	− 12°	+ 2°	− 17°	+ 2°	− 20°	0°	0°	− 10°	0°	0°
Burstone	− 1°	0°	− 1°	0°	− 11°	+ 6°	− 17°	0°	− 22°	0°	− 27°	0°	5°	− 27°	+ 2°	6°
Hasund	0°	0°	0°	+ 5°	0°	+ 5°	− 10°	+ 2°	− 15°	+ 2°	− 22°	+ 4°	0°	− 25°	+ 2°	6°
Hilgers	− 1°	0°	− 1°	0°	+ 7°	+ 6°	− 11°	0°	− 17°	0°	− 25°	− 5°	7°	− 25°	0°	6°
Ricketts® – IV. Dimension	0°	0°	0°	0°	+ 7°	+ 5°	-7° ex 0° n-ex	0°	-7° ex -14° n-ex	0°	− 22°	− 5°	12°	− 27°	0°	16°
Ricketts® Universal	0°	0°	0°	0°	+ 7°	+ 5°	0°	0°	− 14°	0°	0°	− 5°	0°	0°	0°	0°
Roth	− 1°	0°	− 1°	0°	− 11°	+ 7°	− 17°	0°	− 22°	0°	− 30°	− 1°	4°	− 30°	− 1°	4°
Standard Edgewise	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Tweed	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°/6°	0°	0°	0°/6°
Begg	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	6°	0°	0°	6°

* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Hinweis:

Angaben ohne Gewähr, Systeme unterliegen einer ständigen Anpassung seitens der Entwickler!

Aufschweißdienst.

Für Ihr Behandlungssystem – zuverlässig und schnell.

Alle Dentaureum-Brackets, Bukkalröhrchen, linguale und palatinale Hilfsteile werden auf Wunsch in unserer Aufschweißabteilung auf Dentaureum-Bänder aufgeschweißt. Kundenfreundliche, schnelle Abwicklung aller Aufschweißaufträge über kompetente Ansprechpartner in der Firma. EDV unterstützte Erfassung von individuellen Stammdaten ermöglicht eine schnelle und korrekte Lieferung.

So wickeln Sie Ihre Aufschweißaufträge ab.

- Bei Ihrer Bestellung setzen Sie sich direkt oder über unseren Außendienst mit uns in Verbindung.
- Für Bändererstbestellungen erstellen wir ein individuelles Auftragsprofil nach Ihren Angaben – Ihre Systemkarte.
- Mit dem Auftragsformular Aufschweißdienst bestellen Sie die benötigten Ausführungen und Mengen pro Größe. Die Änderungen werden im Stamblatt berücksichtigt.
- ASD – Auftragsannahme: +49 72 31/803 -216.


Standard- / individueller Aufschweißdienst.

Bei uns haben Sie die Möglichkeit, zwischen Standard- und individuellem Aufschweißdienst zu wählen. Brackets und Bukkalröhrchen werden nach den gebräuchlichen Systemen auf das Band geschweißt.


Standard-Aufschweißdienst.

Es steht die Technik Edgewise z.B. Standard Edgewise, Roth, McLaughlin-Bennett-Trevisi* etc. zur Verfügung. Das System Roth 18 und 22 können wir Ihnen ab Lager liefern.

Edgewise.

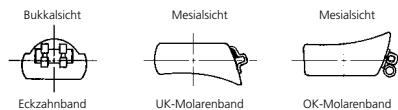


Lingual / Palatal Attachments.

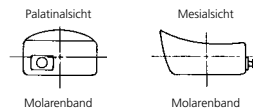

Individueller Aufschweißdienst.

Brackets und Bukkalröhrchen werden nach Ihren Wünschen z.B. anguliert auf das Band geschweißt. Bei Bestellungen bitte genaue Angulation und Positionierung des lingualen/palatalen Attachments angeben.

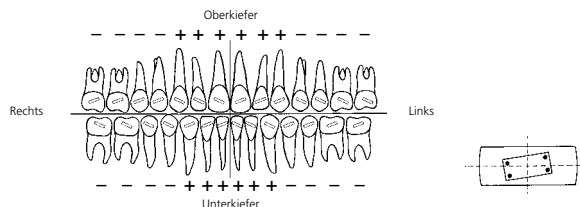

Angulation / Tip

- (+) = Angulation der Wurzel nach distal
- (-) = Angulation der Wurzel nach mesial

Aufschweißdienst – Bandtechnik

Roth 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · 3er, 4er und 5er-Bänder werden standardmäßig mit equilibrium® 2 Brackets beschweißt

Zahn	Position auf dem Band / bukkal Position on band / buccal view		Bandtyp / Größe	Brackets Bukkalaröhren	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset	Palatinales Teil Position auf d. Band	Bukkalaröhren für die Adhäsivtechnik Bondable tubes
Tooth			Band type / size	Brackets Buccal tubes				Anti Rotation	Palatal attachment Position on band	
<u>3 3</u> 13 - 23	R distal	gingival  mesial  L distal incisal 	Standard Eckzahn Cuspids No. 1–25	Rechts / right REF 790-250-02 (B, H) REF 790-254-02 (B, H) Links / left REF 790-260-02 (B, H) REF 790-265-02 (B, H)	– 2°	+ 13°	0,7		REF 750-602-10 central 	
<u>4 4</u> 14 - 24	R distal	gingival  mesial  L distal occlusal 	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts / right REF 790-206-02 (B, H) REF 790-249-02 (B, H) Links / left REF 790-206-02 (B, H) REF 790-250-02 (B, H)	– 7°	0°	0,7		REF 750-602-10 central 	
<u>5 5</u> 15 - 25	R distal	gingival  mesial  L distal occlusal 	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts / right REF 790-206-02 (B, H) REF 790-249-02 (B, H) Links / left REF 790-206-02 (B, H) REF 790-250-02 (B, H)	– 7°	0°	0,7		REF 750-602-10 central 	
<u>6 6</u> 16 - 26	R distal	gingival  mesial  L distal occlusal 	dentaform® 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF 818-131-10 Links / left REF 818-131-20	occlusal – 14° 	0°	0,3	14°	REF 750-602-10 central 	Rechts / right REF 818-211-16 Links / left REF 818-211-26
<u>7 7</u> 17 - 27	R distal	gingival  mesial  L distal occlusal 	dentaform® 2° Molar Bands No. 1–32 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF 818-212-10 Links / left REF 818-212-20	– 14° 	0°	0,3	10°	REF 750-602-10 central 	Rechts / right REF 818-411-17 Links / left REF 818-411-27



Roth 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · 3er, 4er und 5er-Bänder werden standardmäßig mit equilibrium® 2 Brackets beschweißt

Zahn	Position auf dem Band / bukkal Position on band / buccal view		Bandtyp / Größe	Brackets Bukkalaröhren	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkalaröhren für die Adhäsivtechnik Bondable tubes
Tooth			Band type / size	Brackets Buccal tubes				Anti Rotation	Lingual attachment Position on band	
3 3 43 - 33	R	incisal mesial	Standard Eckzahn Cuspids No. 1–21	Rechts / right REF 790-261-02 (B, H) REF 790-268-02 (B, H) Links / left REF 790-262-02 (B, H) REF 790-269-02 (B, H)	– 11°	+ 7°	0,7		REF 750-602-10 central	
4 4 44 - 34	R	occlusal mesial	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts / right REF 790-210-02 (B, H) REF 790-251-02 (B, H) Links / left REF 790-210-02 (B, H) REF 790-252-02 (B, H)	– 17°	0°	0,7		REF 750-602-10 central	
5 5 45 - 35	R	occlusal mesial	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts / right REF 790-211-02 (B, H) REF 790-253-02 (B, H) Links / left REF 790-211-02 (B, H) REF 790-254-02 (B, H)	– 22°	0°	0,7		REF 750-602-10 central	
6 6 46 - 36	R	occlusal mesial	dentaform® 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF 818-151-40 Links / left REF 818-151-30	gingival – 30°	0°	0,3	4°	REF 750-602-10 central	Rechts / right REF 818-211-46 Links / left REF 818-211-36
7 7 47 - 37	R	occlusal mesial	dentaform® 2° Molar Bands No. 1–32 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF 818-218-40 Links / left REF 818-218-30	gingival – 30°	0°	0,3	12°	REF 750-602-10 central	Rechts / right REF 818-411-47 Links / left REF 818-411-37



Alle Brackets, Bukkalröhren, lingualen und palatinalen Hilfssteile werden in unserer Aufschweißabteilung auf Bänder geschweißt. Die Abbildungen zeigen nur exemplarisch Bänder mit aufgeschweißten Attachments und sind nicht identisch mit dem beschriebenen System.

Roth 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · 3er, 4er und 5er-Bänder werden standardmäßig mit equilibrium® 2 Brackets beschweißt

Zahn	Position auf dem Band/bukkal Position on band/buccal view		Bandtyp/Größe	Brackets Bukkalkörhchen	Torque	Angulation	In/Out mm	Distal Offset	Palatinales Teil Position auf d. Band	Bukkalkörhchen für die Adhäsivtechnik/ Bondable tubes
Tooth			Band type/size	Brackets Buccal tubes				Anti Rotation	Palatal attachment Position on band	
<u>3</u> <u>3</u> 13 · 23	R distal	gingival mesial incisal	L distal	Standard Eckzahn Cuspidals No. 1–25	Rechts / right REF 790-263-02 (b,k,l) REF 790-216-02 (b,k,l) Links / left REF 790-264-02 (b,k,l) REF 790-217-02 (b,k,l)	– 2°	+ 13°	0,7	REF 750-602-10 central	
<u>4</u> <u>4</u> 14 · 24	R distal	gingival mesial occlusal	L distal	Standard Prämolaren Bicuspidals No. 1–32	Rechts / right REF 790-218-02 (b,k,l) REF 790-243-02 (b,k,l) Links / left REF 790-218-02 (b,k,l) REF 790-244-02 (b,k,l)	– 7°	0°	0,7	REF 750-602-10 central	
<u>5</u> <u>5</u> 15 · 25	R distal	gingival mesial occlusal	L distal	Standard Prämolaren Bicuspidals No. 1–32	Rechts / right REF 790-218-02 (b,k,l) REF 790-243-02 (b,k,l) Links / left REF 790-218-02 (b,k,l) REF 790-244-02 (b,k,l)	– 7°	0°	0,7	REF 750-602-10 central	
<u>6</u> <u>6</u> 16 · 26	R distal	gingival mesial occlusal	L distal	dentaform® dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF 822-131-10 Links / left REF 822-131-20	occlusal – 14°	0°	0,3	14° REF 750-602-10 central	Rechts / right REF 822-211-16 Links / left REF 822-211-26
<u>7</u> <u>7</u> 17 · 27	R distal	gingival mesial occlusal	L distal	dentaform® 2° Molar Bands No. 1–32 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF 822-212-10 Links / left REF 822-212-20	– 14°	0°	0,3	10° REF 750-602-10 central	Rechts / right REF 822-411-17 Links / left REF 822-411-27



Roth 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · 3er, 4er und 5er-Bänder werden standardmäßig mit equilibrium® 2 Brackets beschweißt

Zahn	Position auf dem Band/bukkal Position on band/buccal view		Bandtyp/Größe	Brackets Bukkalkörhchen	Torque	Angulation	In/Out mm	Distal Offset	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkalkörhchen für die Adhäsivtechnik/ Bondable tubes
Tooth			Band type/size	Brackets Buccal tubes				Anti Rotation	Lingual attachment Position on band	
<u>3</u> <u>3</u> 43 · 33	R distal	incisal mesial	L distal	Standard Eckzahn Cuspidals No. 1–21	Rechts / right REF 790-265-02 (b,k,l) REF 790-220-02 (b,k,l) Links / left REF 790-266-02 (b,k,l) REF 790-221-02 (b,k,l)	– 11°	+ 7°	0,7	REF 750-602-10 central	
<u>4</u> <u>4</u> 44 · 34	R distal	gingival occlusal	L distal	Standard Prämolaren Bicuspidals No. 1–32	Rechts / right REF 790-222-02 (b,k,l) REF 790-255-02 (b,k,l) Links / left REF 790-222-02 (b,k,l) REF 790-256-02 (b,k,l)	– 17°	0°	0,7	REF 750-602-10 central	
<u>5</u> <u>5</u> 45 · 35	R distal	gingival occlusal	L distal	Standard Prämolaren Bicuspidals No. 1–32	Rechts / right REF 790-223-02 (b,k,l) REF 790-257-02 (b,k,l) Links / left REF 790-223-02 (b,k,l) REF 790-258-02 (b,k,l)	– 22°	0°	0,7	REF 750-602-10 central	
<u>6</u> <u>6</u> 46 · 36	R distal	gingival occlusal	L distal	dentaform® dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF 822-151-40 Links / left REF 822-151-30	gingival – 30°	0°	0,3	4° REF 750-602-10 central	Rechts / right REF 822-211-46 Links / left REF 822-211-36
<u>7</u> <u>7</u> 47 · 37	R distal	gingival occlusal	L distal	dentaform® 2° Molar Bands No. 1–32 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF 822-218-40 Links / left REF 822-218-30	– 30°	0°	0,3	12° REF 750-602-10 central	Rechts / right REF 822-411-47 Links / left REF 822-411-37



Alle Brackets, Bukkalröhrchen, lingualen und palatinalen Hilfsteile werden in unserer Aufschweißabteilung auf Bänder geschweißt. Die Abbildungen zeigen nur exemplarisch Bänder mit aufgeschweißten Attachments und sind nicht identisch mit dem beschriebenen System.

Aufschweißdienst – Bandtechnik

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · 3er, 4er und 5er-Bänder werden standardmäßig mit equilibrium® 2 Brackets beschweißt

Zahn	Position auf dem Band/bukkal Position on band/buccal view	Bandtyp/Größe Band type/size	Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset	Palatinales Teil Position auf d. Band	Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Bondable tubes
Tooth			Brackets Buccal tubes				Anti Rotation	Palatal attachment Position on band	
3 3 13 - 23		Standard Eckzahn Cuspid	Rechts / right REF 790-274-02 (20,34) Links / left REF 790-275-02 (20,34)	0°	+ 8°	0,7		REF 750-602-10 central	
4 4 14 - 24		Standard Prämolaren Bicuspid	Rechts / right REF 790-206-02 (20,34) REF 790-249-02 (20,34) Links / left REF 790-206-02 (20,34) REF 790-250-02 (20,34)	- 7°	0°	0,7		REF 750-602-10 central	
5 5 15 - 25		Standard Prämolaren Bicuspid	Rechts / right REF 790-206-02 (20,34) REF 790-249-02 (20,34) Links / left REF 790-206-02 (20,34) REF 790-250-02 (20,34)	- 7°	0°	0,7		REF 750-602-10 central	
6 6 16 - 26		dentaform® dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1-36 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts / right REF 818-132-10 Links / left REF 818-132-20	occlusal -14°	0°	0,3	10°	REF 750-602-10 central	Rechts / right REF 818-212-16 Links / left REF 818-212-26
7 7 17 - 27		dentaform® 2° Molar Bands No. 1-32 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts / right REF 818-212-10 Links / left REF 818-212-20	-14°	0°	0,3	10°	REF 750-602-10 central	Rechts / right REF 818-412-17 Links / left REF 818-412-27



McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · 3er, 4er und 5er-Bänder werden standardmäßig mit equilibrium® 2 Brackets beschweißt

Zahn	Position auf dem Band/bukkal Position on band/buccal view	Bandtyp/Größe Band type/size	Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Bondable tubes
Tooth			Brackets Buccal tubes				Anti Rotation	Lingual attachment Position on band	
3 3 43 - 33		Standard Eckzahn Cuspid	Rechts / right REF 790-278-02 (20,34) Links / left REF 790-279-02 (20,34)	0°	+ 3°	0,7		REF 750-602-10 central	
4 4 44 - 34		Standard Prämolaren Bicuspid	Rechts / right REF 790-210-02 (20,34) REF 790-251-02 (20,34) Links / left REF 790-210-02 (20,34) REF 790-252-02 (20,34)	- 17°	0°	0,7		REF 750-602-10 central	
5 5 45 - 35		Standard Prämolaren Bicuspid	Rechts / right REF 790-210-02 (20,34) REF 790-251-02 (20,34) Links / left REF 790-210-02 (20,34) REF 790-252-02 (20,34)	- 17°	0°	0,7		REF 750-602-10 central	
6 6 46 - 36		dentaform® dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1-36 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts / right REF 818-152-40 Links / left REF 818-152-30	gingival -20°	0°	0,3	0°	REF 750-602-10 central	Rechts / right REF 818-212-46 Links / left REF 818-212-36
7 7 47 - 37		dentaform® 2° Molar Bands No. 1-32 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts / right REF 818-512-40 Links / left REF 818-512-30	-10°	0°	0,3	0°	REF 750-602-10 central	Rechts / right REF 818-412-47 Links / left REF 818-412-37



Alle Brackets, Bukkalröhrchen, lingualen und palatinalen Hilfsteile werden in unserer Aufschweißabteilung auf Bänder geschweißt. Die Abbildungen zeigen nur exemplarisch Bänder mit aufgeschweißten Attachments und sind nicht identisch mit dem beschriebenen System.

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · 3er, 4er und 5er-Bänder werden standardmäßig mit equilibrium® 2 Brackets beschweißt

Zahn	Position auf dem Band/bukkal Position on band/buccal view	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkallröhrchen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset	Palatinales Teil Position auf d. Band	Bukkallröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Bondable tubes
Tooth		Band type / size	Brackets Buccal tubes				Anti Rotation	Palatal attachment Position on band	
<u>3</u> <u>3</u> 13 · 23	R distal gingival mesial L distal incisal	Standard Eckzahn Cuspidals No. 1–25	Rechts / right REF 790-230-02 (D,H,K) REF 790-228-02 (D,H,K) Links / left REF 790-231-02 (D,H,K) REF 790-229-02 (D,H,K)	– 7° 0°	+ 8°	0,7		REF 750-602-10 central	
<u>4</u> <u>4</u> 14 · 24	R distal gingival mesial L distal occlusal	Standard Prämolaren Bicuspidals No. 1–32	Rechts / right REF 790-218-02 (D,H,K) REF 790-243-02 (D,H,K) Links / left REF 790-218-02 (D,H,K) REF 790-244-02 (D,H,K)	– 7° 0°	0°	0,7		REF 750-602-10 central	
<u>5</u> <u>5</u> 15 · 25	R distal gingival mesial L distal occlusal	Standard Prämolaren Bicuspidals No. 1–32	Rechts / right REF 790-218-02 (D,H,K) REF 790-243-02 (D,H,K) Links / left REF 790-218-02 (D,H,K) REF 790-244-02 (D,H,K)	– 7° 0°	0°	0,7		REF 750-602-10 central	
<u>6</u> <u>6</u> 16 · 26	R distal gingival mesial L distal occlusal	dentaform® dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF 822-132-10 Links / left REF 822-132-20	occlusal – 14°	0°	0,3	10°	REF 750-602-10 central	Rechts / right REF 822-212-16 Links / left REF 822-212-26
<u>7</u> <u>7</u> 17 · 27	R distal gingival mesial L distal occlusal	dentaform® 2° Molar Bands No. 1–32 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF 822-212-10 Links / left REF 822-212-20	– 14°	0°	0,3	10°	REF 750-602-10 central	Rechts / right REF 822-412-17 Links / left REF 822-412-27

**McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22**

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · 3er, 4er und 5er-Bänder werden standardmäßig mit equilibrium® 2 Brackets beschweißt

Zahn	Position auf dem Band/bukkal Position on band/buccal view	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkallröhrchen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkallröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Bondable tubes
Tooth		Band type / size	Brackets Buccal tubes				Anti Rotation	Lingual attachment Position on band	
<u>3</u> <u>3</u> 43 · 33	R distal incisal mesial L distal	Standard Eckzahn Cuspidals No. 1–21	Rechts / right REF 790-236-02 (D,H,K) REF 790-234-02 (D,H,K) Links / left REF 790-237-02 (D,H,K) REF 790-235-02 (D,H,K)	– 6° 0°	+ 3°	0,7		REF 750-602-10 central	
<u>4</u> <u>4</u> 44 · 34	R distal gingival occlusal L distal	Standard Prämolaren Bicuspidals No. 1–32	Rechts / right REF 790-222-02 (D,H,K) REF 790-294-02 (D,H,K) Links / left REF 790-222-02 (D,H,K) REF 790-295-02 (D,H,K)	– 17° – 11°	0°	0,7		REF 750-602-10 central	
<u>5</u> <u>5</u> 45 · 35	R distal gingival occlusal L distal	Standard Prämolaren Bicuspidals No. 1–32	Rechts / right REF 790-222-02 (D,H,K) REF 790-294-02 (D,H,K) Links / left REF 790-222-02 (D,H,K) REF 790-295-02 (D,H,K)	– 17° – 11°	0°	0,7		REF 750-602-10 central	
<u>6</u> <u>6</u> 46 · 36	R distal gingival occlusal L distal	dentaform® dentaform® Snap II 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF 822-152-40 Links / left REF 822-152-30	gingival – 20°	0°	0,3	0°	REF 750-602-10 central	Rechts / right REF 822-212-46 Links / left REF 822-212-36
<u>7</u> <u>7</u> 47 · 37	R distal gingival occlusal L distal	dentaform® 2° Molar Bands No. 1–32 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF 822-512-40 Links / left REF 822-512-30	– 10°	0°	0,3	0°	REF 750-602-10 central	Rechts / right REF 822-412-47 Links / left REF 822-412-37

**Alle Brackets, Bukkalröhrchen, lingualen und palatinalen Hilfsteile werden in unserer Aufschweißabteilung auf Bänder geschweißt.**

Die Abbildungen zeigen nur exemplarisch Bänder mit aufgeschweißten Attachments und sind nicht identisch mit dem beschriebenen System.

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Aufschweißdienst – Bandtechnik

Ricketts® 18 – IV. Dimension

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Zahn	Position auf dem Band/bukkal Position on band/buccal view		Bandtyp/Größe	Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In/Out mm	Distal Offset	Palatinales Teil Position auf d. Band	Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Bondable tubes
Tooth	Band type/size		Brackets Buccal tubes					Anti Rotation	Palatal attachment Position on band	
<u>3 3</u> 13 - 23	R distal	gingival mesial incisal	L distal	Standard Eckzahn Cuspid	Rechts / right REF 790-290-02 Links / left REF 790-291-02	+ 7°	0°	0,7	REF 750-602-10 central	
<u>4 4</u> 14 - 24	R distal	gingival mesial occlusal	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid	Rechts / right REF 790-602-02 Links / left REF 790-602-02	0°	0°	0,7	REF 750-602-10 central	
<u>5 5</u> 15 - 25	R distal	gingival mesial occlusal	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid	Rechts / right REF 790-602-02 Links / left REF 790-602-02	0°	0°	0,7	REF 750-602-10 central	
<u>6 6</u> 16 - 26	R distal	gingival mesial occlusal	L distal	dentaform® dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1-36 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts / right REF 724-006-00 Links / left REF 724-007-00	occlusal 0°	0°	0,3	15° REF 750-602-10 central	
<u>7 7</u> 17 - 27	R distal	gingival mesial occlusal	L distal	dentaform® 2° Molar Bands No. 1-32 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts / right REF 818-217-10 Links / left REF 818-217-20	-10°	0°	0,3	8° REF 750-602-10 central	Rechts / right REF 724-048-51 Links / left REF 724-049-51



Ricketts® 18 – IV. Dimension

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Zahn	Position auf dem Band/bukkal Position on band/buccal view		Bandtyp/Größe	Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In/Out mm	Distal Offset	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Bondable tubes
Tooth	Band type/size		Brackets Buccal tubes					Anti Rotation	Lingual attachment Position on band	
<u>3 3</u> 43 - 33	R distal	incisal mesial	L distal	Standard Eckzahn Cuspid	Rechts / right REF 790-278-02 (20,34) Links / left REF 790-279-02 (20,34)	0°	+ 3°	0,7	REF 750-602-10 central	
<u>4 4</u> 44 - 34	R distal	gingival occlusal mesial	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid	Rechts / right REF 790-602-02 Links / left REF 790-602-02	0°	0°	0,7	REF 750-602-10 central	
<u>5 5</u> 45 - 35	R distal	gingival occlusal mesial	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid	Rechts / right REF 790-210-02 Links / left REF 790-210-02	- 17°	0°	0,7	REF 750-602-10 central	
<u>6 6</u> 46 - 36	R distal	gingival occlusal mesial	L distal	dentaform® dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1-36 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts / right REF 724-064-00 Links / left REF 724-065-00	-22° gingival	- 5°	0,3	12° REF 750-602-10 central	Rechts / right REF 818-122-46 Links / left REF 818-122-36
<u>7 7</u> 47 - 37	R distal	gingival occlusal mesial	L distal	dentaform® 2° Molar Bands No. 1-32 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts / right REF 818-218-40 Links / left REF 818-218-30	-30°	- 5°	0,3	12° REF 750-602-10 central	Rechts / right REF 818-211-46 Links / left REF 818-211-36



Alle Brackets, Bukkalröhrchen, lingualen und palatinalen Hilfssteile werden in unserer Aufschweißabteilung auf Bänder geschweißt. Die Abbildungen zeigen nur exemplarisch Bänder mit aufgeschweißten Attachments und sind nicht identisch mit dem beschriebenen System.

Ricketts® Universal 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Zahn	Position auf dem Band/bukkal Position on band/buccal view	Bandtyp / Größe	Brackets Bukkallröhrchen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset	Palatinales Teil Position auf d. Band
Tooth		Band type / size	Brackets Buccal tubes				Anti Rotation	Palatal attachment Position on band
<u>3</u> <u>3</u> 13 - 23	R distal gingival mesial L distal incisal	Standard Eckzahn Cuspidas No. 1–25	Rechts / right REF 790-290-02 Links / left REF 790-290-02	+ 7°	0°	0,7		REF 750-602-10 central
<u>4</u> <u>4</u> 14 - 24	R distal gingival mesial L distal occlusal	Standard Prämolaren Bicuspidas No. 1–32	Rechts / right REF 790-602-02 Links / left REF 790-602-02	0°	0°	0,7		REF 750-602-10 central
<u>5</u> <u>5</u> 15 - 25	R distal gingival mesial L distal occlusal	Standard Prämolaren Bicuspidas No. 1–32	Rechts / right REF 790-602-02 Links / left REF 790-602-02	0°	0°	0,7		REF 750-602-10 central
<u>6</u> <u>6</u> 16 - 26	R distal gingival mesial L distal occlusal	dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF 724-600-00 Links / left REF 724-601-00	zentral 0°	0°	0,3	0°	REF 750-602-10 central

**Ricketts® Universal 18**

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Zahn	Position auf dem Band/bukkal Position on band/buccal view	Bandtyp / Größe	Brackets Bukkallröhrchen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkallröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Bondable tubes
Tooth		Band type / size	Brackets Buccal tubes				Anti Rotation	Lingual attachment Position on band	
<u>3</u> <u>3</u> 43 - 33	R distal incisal mesial L distal	Standard Eckzahn Cuspidas No. 1–21	Rechts / right REF 790-278-02 (20,34) Links / left REF 790-279-02 (20,34)	0°	+ 3°	0,7		REF 750-602-10 central	
<u>4</u> <u>4</u> 44 - 34	R distal gingival occlusal L distal	Standard Prämolaren Bicuspidas No. 1–32	Rechts / right REF 790-602-02 Links / left REF 790-602-02	0°	0°	0,7		REF 750-602-10 central	
<u>5</u> <u>5</u> 45 - 35	R distal gingival occlusal L distal	Standard Prämolaren Bicuspidas No. 1–32	Rechts / right REF 790-210-02 Links / left REF 790-210-02	- 17°	0°	0,7		REF 750-602-10 central	
<u>6</u> <u>6</u> 46 - 36	R distal gingival occlusal L distal	dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF 724-018-00 Links / left REF 724-018-00	gingival 0°	- 5°	0,3	0°	REF 750-602-10 central	Rechts / right REF 724-018-51 Links / left REF 724-018-51



Alle Brackets, Bukkalröhrchen, lingualen und palatinalen Hilfsteile werden in unserer Aufschweißabteilung auf Bänder geschweißt.
Die Abbildungen zeigen nur exemplarisch Bänder mit aufgeschweißten Attachments und sind nicht identisch mit dem beschriebenen System.

Aufschweißdienst – Bandtechnik

Hilgers 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Zahn	Position auf dem Band/bukkal Position on band/buccal view	Bandtyp / Größe	Brackets Bukkälrohrechen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset	Palatinales Teil Position auf d. Band	Bukkälrohrechen für die Adhäsivtechnik/ Bondable tubes
Tooth			Brackets Buccal tubes				Anti Rotation	Palatal attachment Position on band	
<u>3 3</u> 13 - 23	 R distal  L distal	Standard Eckzahn Cuspids No. 1–25	Rechts / right REF 790-290-02 Links / left REF 790-291-02	+ 7°	0°	0,7		REF 750-602-10 central 	
<u>4 4</u> 14 - 24	 R distal  L distal 	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts / right REF 790-206-02 Links / left REF 790-206-02	– 7°	0°	0,7		REF 750-602-10 central 	
<u>5 5</u> 15 - 25	 R distal  L distal 	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts / right REF 790-206-02 Links / left REF 790-206-02	– 7°	0°	0,7		REF 750-602-10 central 	
<u>6 6</u> 16 - 26	 R distal  L distal 	dentaform® 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF 818-131-10 Links / left REF 818-131-20	occlusal – 14°	0°	0,3	14°	REF 750-602-10 central 	Rechts / right REF 724-266-51 Links / left REF 724-267-51
<u>7 7</u> 17 - 27	 R distal  L distal 	dentaform® 2° Molar Bands No. 1–32 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF 818-217-10 Links / left REF 818-217-20	gingival – 10°	0°	0,3	8°	REF 750-602-10 central 	Rechts / right REF 724-048-51 Links / left REF 724-049-51



Hilgers 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Zahn	Position auf dem Band/bukkal Position on band/buccal view	Bandtyp / Größe	Brackets Bukkälrohrechen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkälrohrechen für die Adhäsivtechnik/ Bondable tubes
Tooth			Brackets Buccal tubes				Anti Rotation	Lingual attachment Position on band	
<u>3 3</u> 43 - 33	 R distal  L distal	Standard Eckzahn Cuspids No. 1–21	Rechts / right REF 790-278-02 Links / left REF 790-279-02	0°	+ 3°	0,7		REF 750-602-10 central 	
<u>4 4</u> 44 - 34	 R distal  L distal 	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts / right REF 790-210-02 Links / left REF 790-210-02	– 17°	0°	0,7		REF 750-602-10 central 	
<u>5 5</u> 45 - 35	 R distal  L distal 	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts / right REF 790-210-02 Links / left REF 790-210-02	– 17°	0°	0,7		REF 750-602-10 central 	
<u>6 6</u> 46 - 36	 R distal  L distal 	dentaform® 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF 724-056-00 Links / left REF 724-057-00	gingival – 25°	– 5°	0,3	8°	REF 750-602-10 central 	Rechts / right REF 724-056-51 Links / left REF 724-057-51
<u>7 7</u> 47 - 37	 R distal  L distal 	dentaform® 2° Molar Bands No. 1–32 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF 818-218-40 Links / left REF 818-218-30	gingival – 30°	– 5°	0,3	12°	REF 750-602-10 central 	Rechts / right REF 818-211-46 Links / left REF 818-211-36



Alle Brackets, Bukkalrohrechen, lingualen und palatinalen Hilfsteile werden in unserer Aufschweißabteilung auf Bänder geschweißt. Die Abbildungen zeigen nur exemplarisch Bänder mit aufgeschweißten Attachments und sind nicht identisch mit dem beschriebenen System.

Standard Edgewise 18

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · 3er, 4er und 5er-Bänder werden standardmäßig mit equilibrium® 2 Brackets beschweißt

Zahn	Position auf dem Band/bukkal Position on band/buccal view	Bandtyp / Größe	Brackets Bukkallröhrchen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset	Palatinales Teil Position auf d. Band
Tooth		Band type / size	Brackets Buccal tubes				Anti Rotation	Palatal attachment Position on band
<u>3</u> <u>3</u> 13 - 23	R distal gingival mesial L distal 	Standard Eckzahn Cuspidus No. 1–25	Rechts / right REF 790-602-02 Links / left REF 790-602-02	0°	0°	0,7		REF 750-602-10 central
<u>4</u> <u>4</u> 14 - 24	R distal gingival mesial L distal 	Standard Prämolaren Bicuspidus No. 1–32	Rechts / right REF 790-602-02 Links / left REF 790-602-02	0°	0°	0,7		REF 750-602-10 central
<u>5</u> <u>5</u> 15 - 25	R distal gingival mesial L distal 	Standard Prämolaren Bicuspidus No. 1–32	Rechts / right REF 790-602-02 Links / left REF 790-602-02	0°	0°	0,7		REF 750-602-10 central
<u>6</u> <u>6</u> 16 - 26	R distal gingival mesial L distal 	dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF 727-365-00 Links / left REF 727-366-00	0°	0°	0,3	0°	REF 750-602-10 central

**Standard Edgewise 18**

Slot: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · 3er, 4er und 5er-Bänder werden standardmäßig mit equilibrium® 2 Brackets beschweißt

Zahn	Position auf dem Band/bukkal Position on band/buccal view	Bandtyp / Größe	Brackets Bukkallröhrchen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkallröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Bondable tubes
Tooth		Band type / size	Brackets Buccal tubes				Anti Rotation	Lingual attachment Position on band	
<u>3</u> <u>3</u> 43 - 33	R distal incisal mesial L distal 	Standard Eckzahn Cuspidus No. 1–21	Rechts / right REF 790-602-02 Links / left REF 790-602-02	0°	0°	0,7		REF 750-602-10 central 	
<u>4</u> <u>4</u> 44 - 34	R distal gingival mesial L distal 	Standard Prämolaren Bicuspidus No. 1–32	Rechts / right REF 790-602-02 Links / left REF 790-602-02	0°	0°	0,7		REF 750-602-10 central 	
<u>5</u> <u>5</u> 45 - 35	R distal gingival mesial L distal 	Standard Prämolaren Bicuspidus No. 1–32	Rechts / right REF 790-602-02 Links / left REF 790-602-02	0°	0°	0,7		REF 750-602-10 central 	
<u>6</u> <u>6</u> 46 - 36	R distal gingival mesial L distal 	dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF 724-018-00 Links / left REF 724-018-00	0°	0°	0,3	0°	REF 750-602-10 central 	Rechts / right REF 724-018-51 Links / left REF 724-018-51



Alle Brackets, Bukkalröhrchen, lingualen und palatinalen Hilfsteile werden in unserer Aufschweißabteilung auf Bänder geschweißt. Die Abbildungen zeigen nur exemplarisch Bänder mit aufgeschweißten Attachments und sind nicht identisch mit dem beschriebenen System.

Aufschweißdienst – Bandtechnik

Standard Edgewise 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · 3er, 4er und 5er-Bänder werden standardmäßig mit equilibrium® 2 Brackets beschweißt

Zahn	Position auf dem Band / bukkal Position on band / buccal view		Bandtyp / Größe	Brackets Bukkalaröhrchen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset	Palatinales Teil Position auf d. Band	
Tooth			Band type / size	Brackets Buccal tubes				Anti Rotation	Palatal attachment Position on band	
<u>3 3</u> 13 - 23	R distal	gingival mesial	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–25	Rechts / right REF 790-606-02 Links / left REF 790-606-02	0°	0°	0,7		REF 750-602-10 central	
<u>4 4</u> 14 - 24	R distal	gingival mesial	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts / right REF 790-606-02 Links / left REF 790-606-02	0°	0°	0,7		REF 750-602-10 central	
<u>5 5</u> 15 - 25	R distal	gingival mesial	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts / right REF 790-606-02 Links / left REF 790-606-02	0°	0°	0,7		REF 750-602-10 central	
<u>6 6</u> 16 - 26	R distal	gingival mesial	dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36	Rechts / right REF 727-385-00	0°	0°	0,3	0°	REF 750-602-10 central	
		occlusal	Standard Molar Bands No. 1–32	Links / left REF 727-386-00						



Standard Edgewise 22

Slot: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · 3er, 4er und 5er-Bänder werden standardmäßig mit equilibrium® 2 Brackets beschweißt

Zahn	Position auf dem Band / bukkal Position on band / buccal view		Bandtyp / Größe	Brackets Bukkalaröhrchen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkalaröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Bondable tubes
Tooth			Band type / size	Brackets Buccal tubes				Anti Rotation	Lingual attachment Position on band	
<u>3 3</u> 43 - 33	R distal	incisal mesial	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–21	Rechts / right REF 790-606-02 Links / left REF 790-606-02	0°	0°	0,7		REF 750-602-10 central	
<u>4 4</u> 44 - 34	R distal	gingival occlusal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts / right REF 790-606-02 Links / left REF 790-606-02	0°	0°	0,7		REF 750-602-10 central	
<u>5 5</u> 45 - 35	R distal	gingival occlusal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts / right REF 790-606-02 Links / left REF 790-606-02	0°	0°	0,7		REF 750-602-10 central	
<u>6 6</u> 46 - 36	R distal	gingival occlusal	dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36	Rechts / right REF 724-019-00	0°	0°	0,3	0°	REF 750-602-10 central	Rechts / right REF 724-019-51
		gingival	Standard Molar Bands No. 1–32	Links / left REF 724-019-00						Links / left REF 724-019-51



Alle Brackets, Bukkalaröhrchen, lingualen und palatinalen Hilfstteile werden in unserer Aufschweißabteilung auf Bänder geschweißt.

Die Abbildungen zeigen nur exemplarisch Bänder mit aufgeschweißten Attachments und sind nicht identisch mit dem beschriebenen System.

Bänder – Vergleichstabellen

Um Ihnen den Wechsel zu Dentaureum-Bändern und das Bestellen zu erleichtern, finden Sie hier eine Übersicht der gängigsten Bänder nach Bandgrößen im Vergleich.

Oberkiefer Eckzahnänder

Dentaureum		American Orthodontics	Dentsply Sirona Snap-Fit	Lancer Orthodontics	Ormco	Rocky Mountain Orthodontics	3M		
1		1		00			1+		
2		2	000	0			2+		
3		3,5			1	d	4		
4		4,5		1	2		5		
5		5	1	2		d+	5+		
6		6	2		3	e	6+		
7		7	3	3	4	e+	7+		
8		8	4	4	5		8+		
8,5		8,5		5	6	f	9		
9		9	5		7		9+		
9,5		9,5		6	8	f+	10		
10		10	6	7	9		10+		
10,5		10,5	7			g	11		
11		11		8	10		11+		
11,5		11,5	8	9	11		12		
12		12	9		12	g+	12+		
12,5		12,5		10			13		
13		13	10	11	14	h	13+		
14		13,5	11	12			14		
15		14,5	12	13	16	h+	15		
16		15,5		14			16		
17		16,5	14	15	18	i+	17		
18		17	15	16	19		17+		
19		18		17		j	18+		
20		19	17	19	22	j+	19+		

Bänder – Vergleichstabellen

Unterkiefer Eckzahnbänder

Dentaurum		American Orthodontics	Dentsply Sirona Snap-Fit	Lancer Orthodontics	Ormco	Rocky Mountain Orthodontics	3M		
1		1		0		B	1		
2		2		1	1	B+	2		
3		3				C	3		
4		4	00	2	2		3+		
5		5	0		3	C+	4+		
5,5		5,5		3			5		
6		6	1	4		D	5+		
6,5		6,5		5	4				
7		7	2			D+	6		
7,5		7,5		6	5		6+		
8		8	3	7		E	7		
8,5		8,5			6		7+		
9		9	4	8	7	E+	8		
9,5		9,5		9			8+		
10		10	5		8	F	9+		
11		11	7	11	10	F+	10		
12		12	9	13	12	G	11+		
13		13	10				12+		
14		14		15	14	H	13		
15		15	12		16	H+	14+		
16		16	13	16			15+		

Bänder – Vergleichstabellen

Oberkiefer 1. und 2. Prämolarenbänder

Dentaurum		American Orthodontics	Dentsply Sirona Snap-Fit	Lancer Orthodontics	Ormco	Rocky Mountain Orthodontics	3M CONTOURED	3M GENERAL PURPOSE	3M PROPORTIONED
1		1	1		1			00	
2		3	2	1		G		00+	
3		4	3		2			0	
4		5	4	2	3	G+		0+	1
5		6	5					1	
6			6	3	4	H		1+	
7		8	7		6	H+		2+	
8		9	8	5			2		5
9		10	9	6	7			3	
10		12	10	7	9			4	
11			11		10	I+		4+	
12		13	12	8	11		4		9
13		14	13	9	12	J		5	
14		15	14	10	13	J+		6	12
15		16	15	11	14		6	6+	
16		17	16			K		7	13
17		18	17	12	15		7		
18		19	18	13	16		8	7+	15
19		20	19	14	17	K+		8	
20		23	20	15	19	L	10	9+	
21		24	21	16	20			10	
22		25	22	17	21	L+			20
23			23		22	M	11	10+	
24		26	24	18	23			11	22
25		27	25	19	24		12	11+	
26		29	26	20	25	MI+		12+	24
27		30	27	21	26		13	13	
28		32	28	22	28	N	14	13+	27
29			29	23	29	N+		14	
30			30	24	31			15	29
31			31	25	32				
32			32						

Bänder – Vergleichstabellen

Unterkiefer 1. und 2. Prämolarenbänder

Dentaurum		American Orthodontics	Dentsply Sirona Snap-Fit	Lancer Orthodontics	Ormco	Rocky Mountain Orthodontics	3M CONTOURED	3M GENERAL PURPOSE	3M PROPORTIONED
1		1	1						
2			2	1					
3		2	3		1				1
4		3	4	2		F		1+	4
5		4	5		3		1		5
6		5	6	3	4	F+		2+	6
7		6	7	4	6				8
8		9	8	6	7	G		5	10
9			9	7	8	G+			11
10			10		9	H	5	5+	12
11		10	11	8	10				
12		11	12	9	11	H+	7	7	14
13		12	13	10					16
14		13	14	11	12	I	9	8+	17
15		15	15	12		I+			
16		16	16	13	14		11	10	19
17		17	17	14	15	J	12		21
18		18	18	15	17			12	
19		19	19	16		K	14		23
20		21	20		19		15	13+	25
21		22	21	17		K+			27
22		23	22	18	21		17	15	
23		24	23	19		L	18		28
24		25	24	20	22	L+		16	29
25		27	25	21		M			31
26		28	26	22	25			18	33
27		30	27	23	26	M+			34
28		31	28		27		22	19+	35
29		32	29	24	28				36
30			30	25	29				
31			31	26	30				38
32			32	27					

Bänder – Vergleichstabellen

Oberkiefer 1. Molarenbänder

Dentaurum Standard	Dentaurum dentaform® Snap dentaform®		American Orthodontics CONTOURED IMR2, Mini Master S	American Orthodontics CONTOURED IMR1, Master Series	Dentsply Sirona Snap-Fit	Lancer Orthodontics SUPRA™	Ormco Standard	Ormco ULTIMA® Trimline	Ormco WASHBON®	Rocky Mountain Orthodontics	TP Orthodontics LABS	3M CONTOURED	3M GENERAL PURPOSE
1			1							3			
2	1				1								
	2									5			29
	3				2	1	1						29+
3			2						1				
4	4				3	2	2			6			
5			3			3	3		2	7			30
6	5												30+
	6		4		4	4	4		3				
7			5			5	5	5					
	7					5	6	6	4	8	1	31	
8			6			6		7	5	9	2		31
	8			1,5	5	7	7	8		10		31+	31+
9	9		7		6	8	8		6		3	32	32
10	10		8			9	9			11	5		
	11			2,5	7		10	10	8		6	33	
11	12		9	3	8	10	11	11	9		7		33
12			10			11			10	12	8	33+	33+
13	13		11	3,5	9		12	12			9	34	34
14			12			12	13	13		13	10		
	14		13	4	10	13	14	14	11	14	11	34+	34+
15	15				11		15		12	15	12		
16	16		14	4,5	12	14		15	13	16	13	35	35
17	17		15	5	13	15		16	14	17	14	35+	35+
18					16	16	17	17	15	18	15		
	18		16		14	17		16	16		16	36	36
19				5,5			18	18		17	17		36+
	19		17	6	15	18		19	17	19	18		
20	20		18		16	19	19	20		20	19	36+	
	21		19	6,5	17				18	21	20	37	37
21				7		20	20	21		22	21		
	22		20		18	21		22	19	23	22	37+	37+
22				7,5			21			24			
23	23		21		19	22	22		20	25	23		38
24	24		22	8	20	23	23	23	21	26	24	38	
	25		23		21				22	27	25		
25	26				22	24	24	24		28		38+	39
26	27				23	25	25		24	29	27		
	28				24	27		26	26	31	29	39+	
27	29		26	9,5	25		27	27	27	32	30		39+
	30		27		26	28	28	28		33	31		40
28						29		29	28	34		40	40+
29	31		28	10	27		29			35	32	40+	
30	32			10,5	28	31	30	31	29				
31	33		30	11	29		31	32	30	36		41	
32	34		32	11,5	30	32							41+

Bänder – Vergleichstabellen

Unterkiefer 1. Molarenbänder

Dentaurum Standard	Dentaurum dentaform® Snap dentaform®		American Orthodontics CONTOURED MR2, Mini Master S	American Orthodontics CONTOURED MR1, Master Series, MSH	Dentsply Sirona Snap-Fit	Lancer Orthodontics SUPRA™	Ormco Standard	Ormco ULTIMA® Trimline	Ormco WASHBON®	Rocky Mountain Orthodontics	TP Orthodontics LABS	3M CONTOURED	3M GENERAL PURPOSE
	1									2			28+
	2									3			
	3				1								29+
	4									4			
1			1				1						
2	5				2								30
3			2			1	2		1	5			
4	6		3		3	2							
	7						3		2	6			30+
5			4			3							
	8				4	4	4		3	7			
6	9			1,5		5	5					31	31
7	10		5		5	5	6	5	4	8	1		
8	11		7	2	6	7	7	7		9	2	31+	
	12		8			7	8		6	10	4		32
9				2,5		8		8	7		5	32	
10	13		9		7		9	9		11	6		32+
11	14		10		8	9	10		8		7	32+	
12				3		10	11	10	9	12	8	33	33
	15		11		9				10				
	16		12		10	11	12	11		13	9		33+
13				3,5		12	13	12		14	10	33+	
14	17		13		11		14	13	11	15	11	34	34
15	18			4	12	14		14	13	16	12	34+	34+
	19		14	4,5	13		16	15		17	13	35	35
16			15			15			14		14		
	20		16	5	14	16	17	16	15	18	15	35+	35+
17	21		17		15			17	16		16		
18			18			17	18	18		19	17		
	22		19		16	18			17	20	18	36	36
19	23		20	6	17		19	19		21	19		
20				6,5		19			18	22	20	36+	36+
21	24			7	18	20	20	20		23	21		
	25		21		19			21	19	24		37	37
22	26		22	7,5	20	21	21	22			22		
	27					22	22		20			37+	37+
23	28		23		21		23	23	21	25	23		
	29			8	22	23		24	22	26	24	38	38
24	30				23	24	24			27	25		
25			25			25	25	26	24	29	27		38+
26			26	8,5		26	26		25	30	28	39	39
27	31		27		24			27	26	31		39+	
	32		28	9	25	27	27		27	32			39+
28				9,5		28	28	28		33		40	
29			29			29	29	30	28				40
30	33			10,5	26	30		31		34		40+	40+
31	34		30		27		30		29	35			
32	36		32		29	31		33		36		41	41

Bänder – Vergleichstabellen

Oberkiefer 2. Molarenbänder

Dentaurum dentaform®		American Orthodontics	Dentsply Sirona Snap-Fit	Lancer Orthodontics	Ormco	Rocky Mountain Orthodontics	TP Orthodontics LABS	3M
								28
1			1					28+
2			2					29
3			3					29+
4			4	1				30
5			5	2	1			30+
6				3	2			31
7			6	4	3			31+
8			7	5	4		1	
9			8	6	5		2	
10			9	7		7	3	32
11		1,5	10	8	6		4	32+
12		2	11	9	7		5	33
13		2,5	12	10	8	8	6	33+
14		3	13	11	9	9	7	34
15		3,5	14	12	10	10	8	34+
16		4	15	13	11		9	
		4,5		14	12	11	10	
17		5	16	15	13	12	11	
18			17		14	13	12	
19			18		15	14	13	
20			19		16	15	14	
21		5,5			17		15	
22		6	20	18		16	16	35+
23		6,5	21	19	18	17	17	36
24		7	22	20	19	18	18	36+
25		7,5	23	21	20	19	19	37
26		8	24	22	21	20	20	37+
27			25	23	22	21	21	38
28		8,5	26	24	23	22	22	38+
29		9	27	25	24	23	23	39
30			28	26	25	24	24	39+
31		9,5	29	27	26	25	25	40
32		10	30	28	27	26	26	40+
				29		27	27	41
				30		28	28	
				31		29	29	
				32		30	30	
		10,5			29	31	31	
		11			30			
		11,5			31	32		
					32		33	
							34	
							35	

Bänder – Vergleichstabellen

Unterkiefer 2. Molarenbänder

Dentaurum dentaurum®		American Orthodontics	Dentsply Sirona Snap-Fit	Lancer Orthodontics	Ormco	Rocky Mountain Orthodontics	TP Orthodontics LABS	3M
								28
				29,5				28+
								29
1			3	30	1			29+
2			4		2			30
3				30,5				30+
4			5		3		1	31
5		1,5	6	31	4		2	
				31,5	5		3	31+
		2		32		7		
6			7		6		4	32
7		2,5	8		7		5	
8			9	32,5			6	32+
9			10		8	8	7	
10		3	11	33	9		8	33
		3,5			10	9		
11			12	33,5			9	33+
						10	10	
12			13	34	11		11	34
13		4	14	34,5	12			
		4,5			13	11	12	34+
14						12	13	
15			15	35	14	13	14	35
		5			15	14	15	
16		5,5	16	35,5	16	15	16	35+
							17	
17		6	17	36	17	16	18	36
18		6,5	18	36,5		17	19	
19		7		37	18	18	20	36+
20			19			19	21	
		7,5			19	20		37
21			20	37,5		21	22	37+
					20	22		
22		8	21	38	21		23	38
23			22		22	23	24	
24			23	38,5	23	24	25	38+
					24	25	26	
25			24	39	25		27	39
26		8,5	25	39,5	26	26	28	
27			26		27	27		
		9				28		39+
28		9,5	27		28	29		
29		10				30		40
30			28			31		
					29			40+
31		10,5	29			32		
					30			41
32		11	30		31			
					32			

Drähte – Informationen

Gegenüberstellung Dentaureum-Drähte / Warenbezeichnungen von Mitbewerberprodukten

Dentaureum	American Orthodontics	Dentsply Sirona	FORESTADENT	Lancer Orthodontics	Leone	MASEL
dentaflex® verseilte Drähte	TWIST	Wildcat® Tricat	Forestaflex®	Swiss Strand™	Twist	Triple Twist R™
dentaflex® co-axial Drähte	CO-AX	PentaCat® Hexacat	Forestaflex®	Memorex	Flex	Penta-One™
dentaflex® geflochtene Drähte	Streight™ Woven	Quad-Cat Multibraid Arches	Forestaflex®	Simplicity Wire Braided NiTi	Twist	Octava™
remanium® Edelstahldrähte	SS STAINLESS STEEL Wire	Nubryte Gold Super Gold Stainless Steel	Stahl Forestanit® Forestanit®-Super	High Tensile Stainless Steel X-Resilient Stainless Steel	Leowire® Stainless Steel	Resilient Bright Golden
Equire Edelstahldrähte	SS STAINLESS STEEL Wire	Nubryte Gold Super Gold Stainless Steel	Stahl Forestanit® Forestanit®-Super	High Tensile Stainless Steel	Leowire® Stainless Steel	Resilient Bright Golden
remaloy®/Redur® Cobalt-Basis- Legierung	CC Chromium-Cobalt (Multiphase blue)	Coballoy	Forestalloy	Bendalloy™ Blue Ortholoy Blue	Leoloy® Chrom-Kobalt Draht Crozat	Masiloy™
rematitan® LITE Nickel-Titan-Legierung superelastisch		Sentalloy® superelastisch Lowland NiTi	Titanol® - Superelastisch (SE) - Low Force	Titalan™ Super Elastic Orthinol II	Memoria® superelastisch	Elastinol™ superelastisch Authentic Nitinol Value Brand of NiTi Econo Nickel Titanium
rematitan® SPECIAL Beta-Titan-Legierung	BETA TITANIUM	Resolve® Beta Titanium	Betaflex Titan	Titalan™ Beta-Titanium Molybdenum	Beta Memoria®	CNA BETA III™
Tensic® Nickel-Titan, thermoaktiv	Therma-Ti® Lite Titanium Memory Wire	Neo Sentalloy® Heat-Activation	Titanol® Martensitic BioStarter BioTorque BioFinisher Martensitic	Titalan LT™ Thermodynamic	Thermomemoria®	Therm-A-Form Ultra™ CV SuperForce™
Equire Nickel-Titan, thermoaktiv	Therma-Ti® Lite Titanium Memory Wire	Neo Sentalloy® Heat-Activation	Titanol® Budget Titanol® Martensitic BioStarter BioTorque BioFinisher Martensitic	Titalan LT™ Thermodynamic	Thermomemoria®	Therm-A-Form Ultra™ CV SuperForce™
rematitan® LITE White Nickel-Titan-Legierung superelastisch	Iconix® Aesthetic SE NiTi	Spectra™ Imagination Sentalloy® High Aesthetic	Titanol® Cosmetic	Titalan™ TS Coated	Memoria® Natura®	Orthocosmetic Elastinol™
Tensic® White Nickel-Titan, thermoaktiv			BioCosmetic®		Memoria® Mimetic rhodium coated	

Anmerkung: Es handelt sich teilweise um registrierte Warenbezeichnungen z. B. TMA® Fa. Ormco.

Gegenüberstellung Dentaureum-Drähte / Warenbezeichnungen von Mitbewerberprodukten

Dentaureum	Ormco	Rocky Mountain Orthodontics	SCHEU-DENTAL	TP Orthodontics	World Class Orthodontics Ortho Organizers GmbH	3M
dentaflex® verselte Drähte	Triple Flex™	Tri-Flex™		Twisted 3-Strand Wire	Twist Stainless Steel	Hi-T™ II Twist Flex Twist
dentaflex® co-axial Drähte	Respond®	Supra-Flex™		Co-Ax®	Coaxial Stainless Steel	Coaxial
dentaflex® geflochtene Drähte	D-Rect® Turbo Wire	Flex-VIII™		Woven 8-Strand Wire	Braided Stainless Steel	Braided
remanium® Edelstahldrähte	Stainless Steel	Tru-Chrome®	Chromium	Shiny Bright Wire TP Original Stainless Steel	Stainless Steel	Permachrome Hi-T™ II Stainless Steel
Equire Edelstahldrähte	Stainless Steel	Tru-Chrome®	Chromium	Vela™ Shiny Bright Wire TP Original Stainless Steel	Stainless Steel	Permachrome Hi-T™ II
remaloy® / Redur® Cobalt-Basis- Legierung	Azurloy™	Elgiloy® blue			Ortholoy-Blue	Blue Flexiloy®
rematitan® LITE Nickel-Titan-Legierung superelastisch	Ni-Ti® Align™ SE 200 Align™ XF	Orthonol® Superelastic	Lazium®	Reflex® Superelastic	Nitium S.E. Superelastic	Nitinol® SE Superelastic Nitinol® Classic
rematitan® SPECIAL Beta-Titan-Legierung	TMA® Titanium Molybdenum	Bendaloy™ Titanium- Molybdenum		TiMolium®	CNA™ Beta III	Beta III Titanium
rematitan® sl Nickel-Titan-Legierung superelastisch					Nitium Black Ti™	
Tensic® Nickel-Titan, thermoaktiv		Thermaloy® Thermally activated		Reflex® Heat activated	Accel™ Bio-Kinetix™ Bio-Kinetix™ Plus	Nitinol® Heat activated
Equire Nickel-Titan, thermoaktiv		Thermaloy® Thermally activated		Vela™ Reflex® Heat activated	Accel™ Bio-Kinetix™ Bio-Kinetix™ Plus	Nitinol® Heat activated
rematitan® LITE White Nickel-Titan-Legierung superelastisch		Orthonol® FLI® Wire coated		Reflex® Aesthetic Wire	Nitium Plastic Coated WOOWA Bio- Aesthetic Coated	
Tensic® White Nickel-Titan, thermoaktiv					Bio-Kinetix™ Micro Coated	

Anmerkung: Es handelt sich teilweise um registrierte Warenbezeichnungen z. B. TMA® Fa.Ormco.

Werkstoffliste

Produkt-Gruppen	Produkt	Zusammensetzung laufende Nr. *
Aligner	prime4me® Aligner	4.102
	prime4me® Retainer	4.102
	prime4me® Aligner Attachment Guide	4.004
Lingualsystem	discovery® delight Lingualbrackets / Molarenröhrchen	1.005
	rematitan® LITE Lingualbogen	3.200
	remanium® Lingualbogen	1.012 o. 1.013
	dentaflax® Lingualbogen	1.012 o. 1.013
Selbstligierende Brackets	dinamique® c	5.000 (Körper), 3.300 (Clip), Rh-Beschichtung
	dinamique® m	1.009 (Körper), 3.300 (Clip)
	discovery® sl / discovery® sl 2.0	1.003, 1.009, 3.005
Metallbrackets	discovery® / discovery® smart	1.005
	topic	3.004
	equilibrium® 2 / equilibrium® mini	1.005
	equilibrium® 2 / equilibrium® mini mit Knopfhäkchen	1.001, 1.005
	equilibrium® ti	3.104
	equilibrium® ti mit Knopfhäkchen	3.102, 3.104
	discovery® pearl	5.000, 4.003 (Setzhilfe)
Ästhetikbrackets	Elegance®	1.000, 4.002 fiberglasverstärkt
	Fascination® / Fascination® 2	5.000
	Jewels	5.000
Bracketzubehör	Titan-Knopfchen mit Kette nach Watted	3.100, 3.101
	Knopfchen für Adhäsivtechnik	1.002
	Doppelhäkchen für Adhäsivtechnik	1.005, 1.008
	Netzbasen für Adhäsivtechnik	1.005
	Netzbasen für Bukkalröhrchen für Adhäsivtechnik	1.000, 1.001
	Netz	1.000
	Ortho-Cast / Ortho-Cast m. H. / Ortho-Cast m. H. u. R. / Ortho-Cast M-Series	1.005
Bukkalröhrchen m. H. = mit Häkchen m. R. = mit Röhrchen m. H. u. R. = mit Häkchen und Röhrchen	Ortho-Cast m. H. u. R. zentral	1.000, 1.005
	Ortho-Cast mit größerer Basis / Ortho-Cast m. H. und größerer Basis	1.000, 1.001, 1.005
	Ortho-Cast m. H. u. R. okklusal / gingival	1.005, 1.008
	Ortho-Cast mini / Ortho-Cast sl	1.005
	Ortho-Cast NF	3.004
	Ortho / Ortho m. R.	1.000, 1.002
	Ortho m. H. / Ortho m. H. u. R.	1.000, 1.001, 1.002
	Ortho für Adhäsivtechnik / Ortho m. R. okklusal für Adhäsivtechnik	1.000, 1.001, 1.002
	Ortho mit Mesial- / Distalhäkchen und Röhrchen zentral	1.000, 1.002, 1.005
	rematitan®	3.100, 3.101
	rematitan® mit Häkchen	3.101, 3.102
	Lingual- / Palatinalschlösser	1.008
	Lingual- / Palatinalschlösser mit Mesial- / Distalhäkchen	1.000, 1.008
	Lingual- / Palatinalschlösser mit Distalhäkchen	1.002, 1.008
	Lingual- / Palatinalschlösser easy in	1.008
	Knopfchen	1.002
	Aufsetzlasche	1.005
	Doppelhäkchen / Häkchen mit Setzlasche	1.008
	Knopfhäkchen	1.001
	Insert-Adapter	1.003
Bänder	dentaform® Snap	1.008
	dentaform®	1.001
	Standard Prämolaren- und Eckzahnbander	1.001
	Standard 1. und 2. Molarenbänder	1.008
	Bandmaterial auf Rollen	1.001
	Matrizenband auf Rollen	1.003
	remanium® Idealbogen	1.013
Bögen	Equire vorgeformter Idealbogen	1.013
	dentaflax® Idealbogen	1.012 o. 1.013
	Noninium® Idealbogen	REF XXX-XXX-00 / 1.006
		REF XXX-XXX-10 / 1.014
	Noninium® White Idealbogen	1.006, 4.008
	Tensi® Idealbogen	3.203

Produkt-Gruppen	Produkt	Zusammensetzung laufende Nr. *
Bögen	Equire Thermo-Active vorgeformter Idealbogen	3.200
	Tensic® White Idealbogen	3.200, 4.008
	rematitan® sl Idealbogen	3.200
	rematitan® LITE Idealbogen / Ricketts® PENTA Idealbogen	3.202
	rematitan® LITE Spee® Umkehrbogen	3.202
	rematitan® LITE White Idealbogen	3.202, 4.008
	remaloy® Idealbogen	3.006
	rematitan® SPECIAL Idealbogen	3.103
	Transluzenter Idealbogen pearl	4.005 + Fiberglas
Drähte	remanium® Stangendraht / Rollendraht	1.003
	dentaflax® Stangendraht, rund, 3-fach verseilt	1.003
	dentaflax® Stangendraht, rund, 6-fach co-axial	1.012 o. 1.013
	Noninium® Stangendraht / Rollendraht	REF XXX-XXX-00 / 1.006
		REF XXX-XXX-10 / 1.014
	remaloy® Stangendraht	3.006
	rematitan® SPECIAL Stangendraht	3.103
	dentaflax® Rollendraht, rund, 3-fach verseilt / 6-fach co-axial	1.011
	rematitan® LITE Rollendraht	3.200
Retainer	rematitan® flat Retainerdraht	1.013
	Titan-Retainerdraht Ti 1	3.100
	Titan-Retainerdraht Ti 5	3.102
	Gold-Retainerdraht	2.301
	remanium® Lingualretainer	1.011, 1.013
	Titan Lingualretainer Grade 4	3.101
	prime4me® RETAIN3R	3.102
Drähte, Bögen, Drahtelemente Zubehör	remanium® Ligaturendraht	1.005
	remanium® vorgeformte Ligaturen, kurz	1.005
	remanium® vorgeformte Ligaturen, lang	1.012 o. 1.013
	remanium® Kobayashi Ligaturen	1.012 o. 1.013
	Ligaturen White, Kobayashi White Ligaturen	1.013, 4.008
	remanium® Zugfeder / Druckfeder	1.003
	rematitan® LITE Zugfeder / Druckfeder	3.200
	Eckzahn-Zugfedern	1.000, 1.003
	Kieferbruch-Schiene	1.000
	Gleitröhrchen, rund m. Häkchen	1.000, 1.001
	Klemmröhrchen, vierkant m. Häkchen	1.005
	Klemmröhrchen, vierkant m. Draht	1.003 + 1.005
	Kreuzröhrchen, Vierkant-Röhrchen	1.000
	Stoppröhrchen	1.013
	Noninium® Standard Labialbogen	1.014
	Noninium® Adams- / Dreiecks- / Ösenklammern	1.014
	Noninium® Knopfanker	REF XXX-XXX-01 / 1.014
		REF XXX-XXX-02 / 1.014
	remanium® Knopfanker / remanium® Pfeilanker	1.001
	Doppelplatten-Führungssporne n. G. Müller®	1.003
	Doppelplatten-Führungssporne n. Hinz	1.012 o. 1.013
	Lingualbügel	1.003
	Drahteinlage	1.005
	Edelstahlrohre	1.000
	Plastikschlauch	4.009
	remanium® Goshgarian Palatinalbügel	1.013
	remanium® Quad Helix	1.013
	Orthorama® Palatinal- / Lingual- / Sektionsbögen / Multi-Action	3.006
	Orthorama® Transferwinkel	1.000
	Orthorama® Retentionsringe	1.001 + 1.008
	Verstärkungsgitter Edelstahl	1.000
	Verstärkungsgitter vergoldet	1.000 vergoldet (24 Karat)
Klasse II - Apparaturen	SUS² / SUS³ Teleskopstange, montiert	1.002, 1.003
	SUS² / SUS³ Teleskopstange	1.003
	SUS² / SUS³ Bogen-Adapter / Fixierschraube	1.002

Werkstoffliste

Produkt-Gruppen	Produkt	Zusammensetzung laufende Nr. *
Klasse II - Apparaturen	SUS ² Teleskopelement	1.000, 1.003
	SUS ³ Teleskopelement	1.000, 1.003, 1.015
	SUS ² / SUS ³ Turbo-Feder / Druckfeder (Edelstahl)	1.003
	SUS ² Druckfeder (Nickel-Titan)	3.200
	SUS ² / SUS ³ Distanzfeder	1.003
	Distanzringe, geschlitzt	1.002
	SUS ² / SUS ³ Knopfanker	1.000
	Herbst Innensechskantschrauben / Schlitzschrauben	1.002
	Herbst Sockel / Mutter	1.002
	Herbst Teleskoprohre	1.009
	Herbst Teleskoprohre mit Kugelgelenk	1.000, 1.002, 1.003
	Herbst TS Teleskopgeschiebe	1.000, 1.002, 1.003, 1.009
	Herbst Teleskopstangen	1.002
	Herbst Distanzringe	1.002
Intra- / Extraoral	Metalldip für Sicherheitsmodul	1.003
	Umkehrgesichtsbogen Tübinger Modell	1.000, 1.001, 1.002, 4.100, Wildleder
	Gesichtsmaske Delaire	1.003, 4.100, Wildleder
	Noninium® Face Bow / Gesichtsbogen Medium	1.006, 4.001
	Standard Face Bow / Gesichtsbogen, mit Stoppschlaufen	1.000, 1.003, 4.001
	Standard Face Bow / Gesichtsbogen, mit Stoppschlaufen mit Eckzahnhäkchen	1.000, 1.001, 1.003, 4.001
	Kinnkappe, elastisch	4.009, Polyester, 1.003
	Kinnkappe, starr, mit kurzen Haken	1.002, 1.003, 4.001, 4.100
	Kinnkappe, starr, mit langen Haken	1.003, 4.100, Wildleder
	Kinnkappe für Tübinger Modell	4.100, Wildleder
	Kinnkappeneinlage	4.009, Polyester
	Kinnkappeneinlage Delaire	Wildleder
	J-Haken für Kopfbänder Hickham	1.011, 1.013
	Dentalastics® Extraorale Kunststoffkette	4.009 **
	Extraorale Latex-Gummiringe	4.201 **
	Lip Bumper	1.000, 1.001, 3.006, 4.003
	Stoppröhrchen	1.000
	Stoppschrauben	1.002
	Aktivator-Röhrchen	1.000, 1.001
	Elastic Placers	4.006
	Intraorale Latex-Gummiringe	4.201 **
	Intraorale Non-Latex-Gummiringe	Thermoplastischer Kunststoff **
	Elastische Ligatur	4.009
	Elasto-Force Ligaturenschlauch	4.009 **
	Dentalastics® Rotationselemente / Kunststoffringe / Separatoren / Personal Ligaturenringe	4.009
	Elasto-Force, SUPER Elasto-Force Kunststoffketten	4.009
	Mundvorhofplatte Ulmer Modell	4.009
	FaceFormer ONE blue mit Hygienebox	4.203
	OrthoSafe Sportschutz	4.101
Verankerungssystem tomas®	tomas®-pin	3.102
	tomas®-abutment universal	1.005
	tomas®-abutment tube	1.000, 1.005
	tomas®-RPE eyelet	1.000
	tomas®-abutment wire	1.000, 1.005, 3.000
	tomas®-abutments median	1.000, 1.005, 3.000
	tomas®-abutment plain	1.000, 1.005
	tomas®-abutment EP	1.000
	tomas®-compression spring	3.200
	tomas®-coil spring	3.200 + 1.013
	tomas®-uprighting spring	1.000, 1.003, 3.200
	tomas®-stop screw	1.000, 1.002
	tomas®-slotted stops	1.013
	tomas®-hook / tomas®-T-wire	1.003
	tomas®-cross tube	1.000
	tomas®-power arm	1.003, 1.005

Produkt-Gruppen	Produkt	Zusammensetzung laufende Nr. *
Verankerungssystem tomas®	tomas®-crimp hook	1.005
	tomas®-aligner hook	1.005
	tomas® PI 4.0	3.102
	tomas® PI-abutment multiple	1.000
	tomas® PI-abutment screw	3.102
	tomas® PI-abutment plain	1.000
	tomas® PI-abutment plain set with wire	1.000, 3.000, 3.102
	tomas® PI-straight wire with notch	3.000
Distalisationsapparatur amda®	amda® telescope	1.000, 1.002, 1.003
	amda® connector	1.003
	amda® palatal arch	1.000
Dehnschrauben	Standard Dehnschrauben	1.002, 1.003, 4.006
	rematitan® Dehnschraube Medium	3.101, 3.102, 4.006
	Trapez-Dehnschraube, Sektorenschraube Medium	1.002, 1.003, 4.006
	Sektorenschraube Mini, Zugschrauben	1.002, 1.003
	Neo-Bertoni	1.002, 1.003, 1.005, 4.006
	Mehrspektorenschraube nach Bertoni / nach Steiner	1.002, 1.003
	Fächerdehnschraube	1.000, 1.002
	Unterkieferbogenschraube nach Müller	1.002, 1.003, 4.006
	Neo-VDP nach F.M. Sander	1.002, 1.003, 1.019, 4.006
	Elastischer Vorschubdoppelplatten-Steg nach Schaneng	1.002, 1.003, 1.015
	Dehnschraube für geteilten Aktivator	1.002, 1.003
	Dehnschraube für Progenie-Aktivator nach Weise	1.002
	Federbolzenschrauben	1.002, 1.003
	Gerändelte Mutter	1.002
	Variety / Variety SP / Variety click / Variety click SP Dehnschrauben	1.000, 1.002, 1.003
	Titan hyrax® Maxi Dehnschraube	3.102, 3.104
	rematitan® Stangendraht, rund	3.100
	hyrax® / hyrax® click / hyrax® neo Dehnschraube	1.000, 1.002, 1.003
	Drehrichtungspfeile	4.006
	Dehnschraubenschlüssel, Standard	1.003
	Dehnschraubenschlüssel, groß	1.002 + 1.003
	Sicherheitsschlüssel für hyrax® / Variety Schraube	1.003, 4.100

* **Anmerkung:** Die Angabe mehrerer Werkstoffe bedeutet, dass das Produkt aus all diesen Werkstoffen besteht.

** enthält auch Spuren von weiteren Elementen. Bei Bedarf bitte anfragen.

Werkstoffliste

1. Stähle

chemische Zusammensetzung in Gew. %

Lfd.-Nr.	Werkstoff		C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	P	S	Sonstige	Fe
	Bezeichnung	Nummer (DIN, AISI)*										
1.000	rostfreier Stahl	1.4301	≤ 0,07	≤ 1,0	≤ 2,0	17,0–19,5	–	8,0–10,5	≤ 0,045	≤ 0,03	N ≤ 0,11	Rest
1.001	rostfreier Stahl	1.4303	≤ 0,06	≤ 1,0	≤ 2,0	17,0–19,0	–	11,0–13,0	≤ 0,045	≤ 0,03	N ≤ 0,11	Rest
1.002	rostfreier Stahl	1.4305	≤ 0,10	≤ 1,0	≤ 2,0	17,0–19,0	–	8,0–10,0	≤ 0,045	0,15–0,35	N ≤ 0,11/ Cu ≤ 1,0	Rest
1.003	rostfreier Stahl (dentaflex®, remanium®)	1.4310	0,05–0,15	≤ 2,0	≤ 2,0	16,0–19,0	≤ 0,8	6,0–9,5	≤ 0,045	≤ 0,015	N ≤ 0,11	Rest
1.004	rostfreier Stahl	1.4401	≤ 0,07	≤ 1,0	≤ 2,0	16,5–18,5	2,0–2,5	10,0–13,0	≤ 0,045	≤ 0,03	N ≤ 0,11	Rest
1.005	rostfreier Stahl (remanium®)	1.4404	≤ 0,03	≤ 1,0	≤ 2,0	16,5–18,5	2,0–2,5	10,0–13,0	≤ 0,045	≤ 0,03	N ≤ 0,11	Rest
1.006	rostfreier Stahl (Noninium®)	1.4456	≤ 0,1	≤ 1,0	16,0–20,0	16,0–20,0	1,8–2,5	< 0,2	≤ 0,05	≤ 0,05	V ≤ 0,2 N 0,7–1,0	Rest
1.007	rostfreier Stahl	1.4460	≤ 0,05	≤ 1,0	≤ 2,0	25,0–28,0	1,3–2,0	4,5–6,5	≤ 0,035	≤ 0,3	N 0,05–0,20	Rest
1.008	rostfreier Stahl	1.4541	≤ 0,08	≤ 1,0	≤ 2,0	17,0–19,0	–	9,0–12,0	≤ 0,045	≤ 0,3	Ti 5 x C bis 0,7	Rest
1.009	rostfreier Stahl	1.4542	≤ 0,07	≤ 0,7	≤ 1,5	15,0–17,0	≤ 0,6	3,0–5,0	≤ 0,040	≤ 0,03	Cu 3,0–5,0 Nb 5 x C bis 0,45	Rest
1.010	rostfreier Stahl	1.4435	≤ 0,03	≤ 1,0	≤ 2,0	17,0–19,0	2,5–3,0	12,5–15,0	≤ 0,045	≤ 0,025	N ≤ 0,11	Rest
1.011	rostfreier Stahl (dentaflex®)	AISI 302	≤ 0,15	≤ 1,0	≤ 2,0	17,0–19,0	–	8,0–10,0	≤ 0,045	≤ 0,03	–	Rest
1.012	rostfreier Stahl (dentaflex®)	AISI 302 B	≤ 0,15	2,0–3,0	≤ 2,0	17,0–19,0	–	8,0–10,0	≤ 0,045	≤ 0,03	–	Rest
1.013	rostfreier Stahl (dentaflex®, remanium®)	AISI 304	≤ 0,08	≤ 1,0	≤ 2,0	18,0–20,0	–	8,0–10,5	≤ 0,045	≤ 0,03	–	Rest
1.014	rostfreier Stahl (Noninium®)	1.3808	0,15–0,25	0,2–0,6	9,5–12,5	16,5–18,0	2,7–3,7	< 0,05	0,02	0,01	Cu 0,25 N 0,45–0,55	Rest
1.015	rostfreier Stahl	1.4568	≤ 0,03	≤ 0,70	≤ 1,0	16,0–18,0	–	6,5–7,8	≤ 0,04	≤ 0,015	Al 0,70–1,50	Rest
1.016	rostfreier Stahl	1.4197	0,20–0,26	≤ 1,0	≤ 2,0	12,5–14,0	1,1–1,5	0,75–1,50	≤ 0,04	0,15–0,35	–	Rest
1.017	rostfreier Stahl	1.4034	0,43–0,50	≤ 1,0	≤ 1,0	12,5–14,5	–	–	≤ 0,04	≤ 0,03	–	Rest
1.018	rostfreier Stahl	1.4571	≤ 0,08	≤ 1,0	≤ 2,0	16,5–18,5	2,0–2,5	10,5–13,5	≤ 0,045	≤ 0,03	Ti 5 x C bis 0,7	Rest
1.019	rostfreier Stahl	1.4501	≤ 0,030	≤ 1,0	≤ 1,0	24,0–26,0	3,0–4,0	6,0–8,0	≤ 0,035	≤ 0,015	N 0,20–0,30 Cu 0,50–1,00 W 0,50–1,00	Rest

*Anmerkung: Stähle nach ausländischen Normen, die den DIN-Werkstoff-Nummern entsprechen, sind ebenfalls zulässig.

2. Kupfer- und Edelmetall-Legierungen

chemische Zusammensetzung in Gew. %

Lfd.-Nr.	Werkstoff		Ag	Cu	Ni	Pb	Zn	Fe	Mn	Sn	Sb	Al	Sonst.
	Bezeichnung	Nummer (DIN)*											
2.000	Neusilber	2.0770	–	45–48	9–11	0,5–2,0	38–45	≤ 0,05	≤ 0,5	≤ 0,3	–	–	≤ 0,1
2.001	Neusilber	2.0780	–	56–58	11–13	0,3–1,5	26–33	≤ 0,05	≤ 0,5	≤ 0,3	–	–	≤ 0,1
2.002	Neusilber	2.0790	–	59–63	17–19	0,3–1,5	Rest	≤ 0,03	≤ 0,7	–	–	–	≤ 0,4
2.100	Messing	2.0321	–	62,0–65,5	< 0,3	≤ 0,1	Rest	≤ 0,01	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	–	–
2.101	Messing	2.0360	–	59,0–62,0	< 0,3	≤ 0,1	Rest	≤ 0,01	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	–	–
2.200	Silberlot	2.5153 L-Ag75	74–76	Rest	–	≤ 0,02	2,0–4,0	–	–	–	–	≤ 0,005	≤ 0,1
2.201	Silberlot	2.5147 L-Ag44	43–45	29–31	–	≤ 0,02	Rest	–	–	–	–	≤ 0,005	≤ 0,1
2.202	Silberlot	2.5159 L-Ag55Sn	54–57	21–23	–	≤ 0,02	Rest	–	–	2,0–5,0	–	≤ 0,005	≤ 0,1
2.203	Silberlot	2.5151 L-Ag72	71–73	Rest	–	≤ 0,02	–	–	–	–	–	≤ 0,005	≤ 0,1
2.204	Silberlot	–	43–46	18–22	–	–	6–10	–	–	2,0–6,0	–	–	≤ 0,3
2.205	Silberlot	–	57–61	15–18	–	–	Rest	–	–	–	–	–	≤ 0,3
2.300	Goldlot	–	38,5–39,5	Rest	–	–	–	–	–	–	–	–	Au 33,0
2.301	Au-Pt-Legierung	–	16–17	8–10	–	–	–	–	–	–	–	–	Au 60–62 Pt 13–14

Anmerkung:

Die in den Tabellen 1–4 aufgelisteten Werkstoffe dienen der leichteren Identifikation der jeweiligen chemischen Zusammensetzung.

Nicht jeder der aufgelisteten Werkstoffe wird von Dentaurnum verwendet. Eine tagesaktuelle Werkstoffliste finden Sie unter www.dentaurnum.com

Werkstoffliste

3. Sonstige edelmetallfreie Legierungen

chemische Zusammensetzung in Gew. %

Lfd.-Nr.	Werkstoff		Ni	Fe	Mn	Cr	Mo	W	Ti	Si	C	Co	Al	S	O	H	N	Sonst.
	Bezeichnung	Nummer (DIN)*																
3.000	CoCr-Legierung	—	19–23	4–6	≤ 1,0	18–22	3–5	3–5	0,1–2,0	≤ 0,5	≤ 0,03	Rest	—	≤ 0,1	—	—	—	—
3.002	CoCr-Legierung	—	—	27–31	≤ 1,0	28–32	4–6	—	—	≤ 0,1	≤ 0,35	31–35	—	—	—	—	—	—
3.003	CoCr-Legierung	—	< 1,0	—	≤ 0,3	28–32	4–6	—	—	≤ 1,0	≤ 1,0	Rest	—	—	—	—	≤ 0,3	—
3.004	CoCr-Legierung (topic, Ortho-Cast NF)	—	< 0,1	—	≤ 1,0	26–30	—	8–10	—	0,5–2,5	—	Rest	—	—	—	—	≤ 1,0	Nb < 1,0
3.005	CoCr-Legierung	—	15–16	Rest	1,5–2,0	19–21	6,5–7,5	—	—	≤ 1,2	≤ 0,15	39–41	—	≤ 0,015	—	—	—	P ≤ 0,015 Be ≤ 0,001
3.006	CoCr-Legierung (remaloy®)	—	Rest	5,29	0,75	18,55	3,85	3,86	0,94	0,34	0,003	45,15	—	—	—	—	—	—
3.100	Titan Grade 1 DIN EN ISO 5832-2	3.7025	—	< 0,2	—	—	—	—	> 99,5	—	< 0,08	—	—	—	< 0,18	< 0,0125	< 0,03	—
3.101	Titan Grade 4 DIN EN ISO 5832-2	3.7065	—	< 0,5	—	—	—	—	> 99,0	—	< 0,08	—	—	—	< 0,40	< 0,0125	< 0,05	—
3.102	TiAl6V4 Titan Grade 5 DIN EN ISO 5832-3	3.7165	—	< 0,3	—	—	—	—	90,0	—	< 0,08	—	6,0	—	< 0,20	< 0,0150	< 0,05	V 4,0
3.103	TiMo-Legierung (rematitan® SPECIAL)	—	—	—	—	—	11,5	—	78	—	—	—	—	—	—	—	—	Zr ≤ 6 Sn ≤ 4,5
3.104	Titan Grade 2 DIN EN ISO 5832-2 (equilibrium® ti, Titan hyrax®)	3.7035	—	< 0,3	—	—	—	—	> 99,3	—	< 0,08	—	—	—	< 0,25	< 0,0125	< 0,03	—
3.200	NiTi-Legierung (Equire)	—	50–60	≤ 0,5	—	—	—	—	Rest	—	≤ 0,1	—	≤ 0,1	—	≤ 0,1	≤ 0,01	≤ 0,01	—
3.201	NiTiCu-Legierung	—	50–60	≤ 0,5	—	—	—	—	Rest	—	≤ 0,1	—	≤ 0,1	—	≤ 0,1	≤ 0,017	≤ 0,01	Cu < 1,0
3.202	NiTi-Legierung (rematitan® LTE)	—	54,5–57	< 0,005	—	< 0,005	—	—	Rest	—	< 0,0029	< 0,005	—	—	< 0,05	< 0,005	< 0,002	Cu < 0,005 Nb < 0,005
3.203	NiTi-Legierung (Tensic®)	—	35–60	0–6	—	—	—	—	20–50	—	—	—	—	—	—	—	—	Cu 0–15 HF 0–40 V 0–10 Nb 0–20 B 0–1
3.300	NiCoCrMo-Legierung	MP35N®	33–37	≤ 1	≤ 0,15	19–21	9–10,5	—	≤ 1	≤ 0,15	≤ 0,025	Rest	—	≤ 0,01	—	—	—	P ≤ 0,015 B ≤ 0,015

4. Kunststoffe

Lfd.-Nr.	Werkstoff	
	Bezeichnung	Kurzzeichen (DIN)*
4.000	Epoxid	EP
4.001	Polyamid	PA
4.002	Polycarbonat	PC
4.003	Polyethylen hoher Dichte	PE-HD
4.004	Polyethylen niedriger Dichte	PE-LD
4.005	Polymethylmethacrylat	PMMA
4.006	Polypropylen	PP
4.007	Polystyrol	PS
4.008	Polytetrafluorethylen	PTFE
4.009	Polyurethan	PUR
4.010	Polyvinylchlorid	PVC
4.011	Polyvinylsiloxan	
4.100	Acrylnitril-Butadien-Styrol	ABS
4.101	Ethylen / Vinylacetat	EVA
4.102	Polyethylenterephthalat-Glycol Copolyester	PET-G
4.200	Syn. Isopren-Kautschuk	IR
4.201	Naturkautschuk	NR
4.202	Silikon-Kautschuk	Q
4.203	Silikon	SI

5. Keramische Werkstoffe

chem. Zus. in Gew. %

Lfd.-Nr.	Werkstoff			Al ₂ O ₃	ZnO	MgO	Sonstige
	Bezeichnung	Nummer (DIN)*					
5.000	Aluminiumoxid	—	99,99	—	—	—	≤ 0,01
5.001	Bänderzement	—	—	80–86	6–10	—	≤ 10

Legierungselement

Ag	Silber	O	Sauerstoff
Al	Aluminium	P	Phosphor
Au	Gold	Pb	Blei
Be	Beryllium	Pt	Platin
C	Kohlenstoff	Rh	Rhodium
Cr	Chrom	S	Schwefel
Cu	Kupfer	Sb	Antimon
Co	Kobalt	Si	Silizium
Fe	Eisen	Sn	Zinn
H	Wasserstoff	Ti	Titan
Mn	Mangan	V	Vanadium
Mo	Molybdän	W	Wolfram
N	Stickstoff	Zn	Zink
Nb	Niob	Zr	Zirkonium
Ni	Nickel		

Anmerkung:
Die in den Tabellen 1–4 aufgelisteten Werkstoffe dienen der leichteren Identifikation der jeweiligen chemischen Zusammensetzung.
Nicht jeder der aufgelisteten Werkstoffe wird von Dentaurnum verwendet. Eine tagesaktuelle Werkstoffliste finden Sie unter www.dentaurnum.com

Umrechnungstabellen

Hinweis:

- ø rund
□ vierkant

Maße von Drähten, Brackets, Bukkalröhrchen können zusätzlich zu den metrischen Angaben eine Bezeichnung erhalten, die auf die gewohnten Zollabmessungen schließen lässt (DIN EN ISO 15841) z.B. 17 x 25 = .017" x .025"

1 mm	= 0,0394 inch
1 cm	= 10 mm = 0,3937 inch
1 m	= 1000 mm = 1,0936 yards
1 km	= 0,6214 miles
1 inch	= 25,40 mm
1 foot	= 12 inches = 30,48 cm
1 yard	= 3 feet = 91,44 cm
1 mile	= 1760 yards = 1,6093 km

1 MPa	= 1 N/mm ²
1 N/mm ²	= 145,14 p. s. i.
1 p. s. i.	= 0,00689 N/mm ²

1 mg	= 0,0154 grain
1 g	= 1000 mg = 0,0353 oz
1 kg	= 1000 g = 2,2046 lb
1 ounce	= 28,35 g
1 pound	= 16 ounces = 0,4536 kg

1 l	= 1000 ml = 2,11 pints
	= 1,06 quarts = 0,26 gallons

FDI-System																											
	18	17	16	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	26	27	28										
R	8	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	8										
	8	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	8										
	48	47	46	45	44	43	42	41		31	32	33	34	35	36	37	38										

mm	ø	x 10 ⁻³ inch	Stahldraht 1 kg	mm	ø	x 10 ⁻³ inch	Stahldraht 1 kg
0,10		4	16120 m*	0,60		24	448 m*
0,15		6	7150 m*	0,70		28	329 m*
0,20		8	4030 m*	0,80		32	251 m*
0,22		9	3335 m*	0,90		36	198 m*
0,25		10	2590 m*	1,00		40	161 m*
0,28		11	2055 m*	1,10		44	133 m*
0,30		12	1793 m*	1,20		48	112 m*
0,35		14	1315 m*	1,30		51	95 m*
0,40		16	1010 m*	1,40		55	82 m*
0,45		18	795 m*	1,50		59	71 m*
0,50		20	645 m*				

*Angabe ohne Gewähr

inch	mm
1/64	0,0156
1/32	0,0312
1/16	0,0625
1/8	0,1250
3/16	0,1875
1/4	0,2500
5/16	0,3125
3/8	0,3750
1/2	0,5000
5/8	0,6250
3/4	0,7500
1	1,0000

°C	°F	°C	°F
-40	-40	110	230
-30	-22	120	248
-20	-4	130	266
-10	+14	140	284
0	+32	150	302
10	50	200	392
20	68	300	572
30	86	400	752
40	104	500	932
50	122	600	1112
60	140	700	1292
70	158	800	1472
80	176	900	1652
90	194	1000	1832
100	212	2000	3632

System International (SI)		
Basisgröße	Basiseinheit	Zeichen
Länge	Meter	m
Masse	Kilogramm	kg
Zeit	Sekunde	s
Elektrische Stromstärke	Ampère	A
Thermodynamische Temperatur	Kelvin	K
Lichtstärke	Candela	cd
Stoffmenge	Mol	mol

1 at	= 0,981 bar = 0,981 x 10 ⁵ Pascal (Pa)
1 kp	= 9,81 Newton (N)
1 PS	= 0,746 kW
0 °C	= 273 Kelvin (K)

mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
0,0254	0,001	0,4318	0,017	0,8382	0,033	1,2192	0,048	1,6256	0,064
0,0508	0,002	0,4572	0,018	0,8636	0,034	1,2446	0,049	1,6510	0,065
0,0762	0,003	0,4826	0,019	0,8890	0,035	1,2700	0,050	1,6764	0,066
0,1016	0,004	0,5080	0,020	0,9144	0,036	1,2954	0,051	1,7018	0,067
0,1270	0,005	0,5334	0,021	0,9398	0,037	1,3208	0,052	1,7272	0,068
0,1524	0,006	0,5588	0,022	0,9652	0,038	1,3462	0,053	1,7526	0,069
0,1778	0,007	0,5842	0,023	0,9906	0,039	1,3716	0,054	1,7780	0,070
0,2032	0,008	0,6069	0,024	1,0000	0,0394	1,3970	0,055	1,8034	0,071
0,2286	0,009	0,6350	0,025	1,0160	0,040	1,4224	0,056	1,8288	0,072
0,2540	0,010	0,6604	0,026	1,0414	0,041	1,4478	0,057	1,8542	0,073
0,2794	0,011	0,6858	0,027	1,0668	0,042	1,4732	0,058	1,8796	0,074
0,3048	0,012	0,7112	0,028	1,0922	0,043	1,4986	0,059	1,9050	0,075
0,3302	0,013	0,7366	0,029	1,1176	0,044	1,5240	0,060	1,9304	0,076
0,3556	0,014	0,7620	0,030	1,1430	0,045	1,5494	0,061	1,9558	0,077
0,3810	0,015	0,7874	0,031	1,1634	0,046	1,5748	0,062	1,9812	0,078
0,4064	0,016	0,8128	0,032	1,1938	0,047	1,6002	0,063	2,0000	0,0787

Unser Lieferservice.

Schnell und sicher bei Ihnen.

Wir liefern, wohin Sie möchten. Ihre Bestellung benötigt nach Annahme ca. 10 Minuten bis die Ware versandfertig verpackt ist. Alle Bestellungen verlassen bei Lieferfähigkeit in der Regel noch am selben Tag das Dentauro-Logistikzentrum. Als Direktlieferant ist es uns möglich, eine nahezu 100%ige Lieferfähigkeit sicherzustellen.

Standard-Lieferung.

Deutschland / Österreich / Benelux

Bei Bestelleingang:

Montag–Donnerstag 7:00–15:30 Uhr | Freitag 7:00–14:30 Uhr

Die Zustellung erfolgt in der Regel innerhalb von 48 Stunden (außer Samstag). Es wird ein Versandkostenpauschalbetrag in Höhe von 7,- € erhoben. Ab einem Auftragswert von 250,- € übernehmen wir die Versandkostenpauschale für Sie.

Schweiz

Bei Bestelleingang:

Montag–Donnerstag 7:00–14:00 Uhr | Freitag 7:00–12:00 Uhr

Die Zustellung erfolgt in der Regel innerhalb von 48 Stunden (außer Samstag). Es wird ein Versandkostenpauschalbetrag in Höhe von 12,- CHF erhoben. Ab einem Auftragswert von 300,- CHF übernehmen wir die Versandkostenpauschale für Sie.

Express-Lieferung.

Deutschland / Österreich / Benelux

Bei Bestelleingang:

Montag–Donnerstag 7:00–15:30 Uhr | Freitag 7:00–14:30 Uhr

Zustellung am folgenden Arbeitstag (außer Samstag) zu unterschiedlichen Terminen möglich. Die Versandkosten sind abhängig vom gewünschten Zustellungstermin – Termine und Preise auf Anfrage. Kosten für die Express-Lieferung werden unabhängig vom Warenwert berechnet.

Schweiz

Express-Lieferung wird nicht für die Schweiz angeboten.

Lieferadresse.

Auf Wunsch liefern wir Ihre bestellte Ware auch an eine andere Lieferadresse.

Transportversicherung.

Alle Sendungen sind gegen Transportschäden versichert. Bitte melden Sie Transportschäden sofort beim Empfang der Ware dem Zusteller und Dentaurum.

Rücksendung.

Innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der Lieferung kann die originalverpackte, ungeöffnete und einwandfreie Ware wieder zurückgegeben werden. Bitte legen Sie eine Rechnungskopie der Rücksendung bei. Wir empfehlen eine Wertpaket-Rücksendung, um Beschädigungen und Verlust abzusichern. Versandkosten gehen zu Lasten des Versenders.

**Unser Tipp:**

Online Shop-Bestellungen aus Deutschland/Österreich/Benelux (Standard-Lieferungen) über 150,- € sind für Sie versandkostenfrei. Online Shop-Bestellungen aus der Schweiz über 180,- CHF sind für Sie versandkostenfrei.



Umwelt und Nachhaltigkeit.

www.dentaurum.de/umwelt



Seit mehr als 25 Jahren besitzt Dentaureum ein Umweltmanagementsystem und gehört in der Dentalwelt zu den Ersten.

Ressourcen sind endlich. In einer Welt immer rasanter wachsender Produktionsleistungen und steigender Konsumbedürfnissen sind Unternehmen für einen bewussten und nachhaltigen Umgang mit ihrer Umwelt verantwortlich. Um auch zukünftigen Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen, gilt es Gewohnheiten und Produktionstechniken zu verändern – von einer Wirtschaftsgesellschaft die Ressourcen nutzt, anstatt sie zu verbrauchen. Als langjährig nach DIN EN ISO 14001 und EMAS zertifiziertes Unternehmen ist sich Dentaureum dieser Verantwortung bewusst. Der schonende Umgang mit Ressourcen, die Entlastung der Umwelt sowie eine ethisch korrekte Rohstoffbeschaffung stehen im Mittelpunkt aller Produktions- und Handlungsprozesse und das bereits seit 1989.

Unsere Maßnahmen für den Umweltschutz finden Sie vollständig und übersichtlich chronologisch in einem Zeitstrahl auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt **Umweltschutz bei Dentaureum!**

Oder Sie scannen den QR-Code.



Der Zeitstrahl bietet Ihnen die Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen, um sich gezielt über die Themen, die Sie besonders interessieren, zu informieren.



Index alphabetisch

1, 2, 3	Seite
3D-Druck	30–31
3D Isoliermittel	31, 379
3D-Retainer	31, 229
3Shape	42–45
A	Seite
Abformlöffelreiniger	
• Orthalgenat® Ex	318
Abformmaterial	
• Orthalgenat® Duo	318
Absauggerät mit Aktivkohlefilter	386, 441
Abutments, tomas®	295–297
activeblue Reinigungsgerät	386, 440
activefluid Reinigungsflüssigkeit	387, 440
Adams-Zangen	400–401, 408
Adamsklammern	239
Aderer-Zangen	399, 402, 409
Adhäsive	
• CONTEC go – chemischhärtend	188
• CONTEC lc/lcr – lichthärtend	186–187
Adhäsiv, CONTEC go, CONTEC lc/lcr	186, 188
Adhäsivresteentferner	189
Aktivator / Adhäsivtechnik, CONTEC go	188
Aktivator-Röhrchen	271
Aktivatorschrauben	336, 347
Alginat	318
Aligner	30
amda® – Distalisationsapparatur	
• amda® connector	260, 305
• amda® palatal arch	261, 306
• amda® starter set	259, 304
• amda® telescope	260, 305
Angle-Zangen	
• Bogenbiegezange	396, 407
• Drahtbiegezange	398, 407
Anrührbecher	319, 378
Argonarmatur Laser	432
Assistent 3000 Schweißgerät	435
Ästhetikbrackets	
• discovery® pearl – Keramikbrackets	112–116
Ätzgel / Adhäsivtechnik, CONTEC go, CONTEC lc/lcr	187, 188
Aufbaurahmen für Sortimentsschrank	177–178
Aufbewahrungsbox für Bögen	234
Aufbewahrungsbox für Brackets	123
Aufrichtefeder	298
Aufschweißteile / Bandtechnik	
• Aufsetzlasche	143
• Doppelhaken	143

• Haken mit Setzlasche	143
• Knöpfchen	143
• Lingual-/Palatinalschlösser	142
Aufsetzlasche / Bandtechnik	143
Auswertungslineale	361, 416–418
Auxiliary kit, tomas®	298
B	Seite
Bandabnehmezeugen	393, 406
Bandadapter	411
Bandandrücker	411
Bänder	
• dentaform® Snap (harte, feste Bandqualität)	150–154
• dentaform® (weichere Bandqualität)	155–164
• Standard (höhere Bandform)	165–175
• Zubehör	176–178
Bändercontainer, -schränke	177–178
Bandmaterial	176
Bandzangen	393
Beerendonk Schiebelehre	416
Begg Light Wire Zange	396
Behandlungsplanung	46–48
Bernklau Messstab	416
Bertoni-Schrauben	340–342
Bestellplattform	9
Biegeschlüssel	360
Bite-Bumper™	122
black & white, Orthocryl®	371
Bögen, vorgeformt	56, 200–203, 208–224
Bogenbiegezange, Angle / Tweed	396, 407
Bogenformer	414–415
Bogensäge	382
Bogenschablone	418
Bogenschraube	344
Bogenständer	234
Bohrer, tomas®	293
Bohrerständer	420
Bracket-Abnehmezeugen	57, 392–393, 406
Bracket-Container	123
Bracket-Markierkreuz	412
Bracket-Netzbasen	122
Bracket-Schutzwachs	123
Bracket-Sortimentsschachtel	123
Bracket-Tray	123
Bracketadhäsive	186–188
Brackets / Adhäsivtechnik	
• Keramikbrackets, discovery® pearl 18/22	112–116
• Lingualbrackets, discovery® delight	54–55

• Metallbrackets, discovery® 18/22	76–81
• Metallbrackets, discovery® smart 18/22	82–85, 116
• Metallbrackets, equilibrium® 2 18/22	94–100
• Metallbrackets, equilibrium® mini 18/22	89–93
• nickelfreie® Brackets, topic 18/22	86–88
• Reintitanbrackets, equilibrium® ti 18/22	103–104
• Selbstligierende Brackets, discovery® sl 18/22	64
• Selbstligierende Brackets, discovery® sl 2.0 22	65
Brackets / Bandtechnik	
• Metallbrackets, equilibrium® 2 18/22	101–102
Bracketmarkierkreuz	412
Bracketsetinstrumente	410
Bracketzubehör	122–123
Bügelbiegezeuge	398
Bukkalkörhchen / Adhäsivtechnik	
• Ortho	128, 130
• Ortho-Cast	130, 131, 132
• Ortho-Cast M-Series	129, 131
• Ortho-Cast M-Series mini	128
Bukkalkörhchen / Adhäsivtechnik	
• doppelvierkant	131–132
• doppelvierkant / Titan	133
• einfachrund	128
• einfachvierkant	128–131
• Zweifachkombination	132
Bukkalkörhchen / Bandtechnik	
• Ortho	134, 136, 139–140
• Ortho-Cast	136, 138, 139, 140–141
• Ortho-Cast M-Series	135, 137–138, 139, 140
Bukkalkörhchen / Bandtechnik	
• doppelrund	134
• doppelvierkant	137–138
• Dreifachkombination	140–141
• einfachrund	134
• einfachvierkant	135–136
• Zweifachkombination	139–140
C	Seite
CAD/CAM-Retainer	31, 229
Chemischhärtendes Adhäsiv, CONTEC go	188
Container für Gummiringe	273
CONTEC go – Adhäsiv	
• CONTEC go Adhäsiv	188
• CONTEC go Aktivator	188
• CONTEC go Ätzel	188
• CONTEC go Set	188

CONTEC lc – Adhäsiv	
• CONTEC lc Ätzel	187
• CONTEC lc Bracketadhäsiv	186
• CONTEC lc/lcr Primer	187
• CONTEC lc Set	186
CONTEC lcr – Adhäsiv	
• CONTEC lcr Ätzel	187
• CONTEC lc/lcr Primer	187
• CONTEC lcr Retaineradhäsiv	187
• CONTEC lcr Set	186
Crozat-Drähte	204, 235
D	Seite
De La Rosa-Zange	397
Debonding-Instrument / discovery® pearl	117, 410
Dehnschrauben	
• GNE-Schrauben	32–37, 354–359
• hyrax®	34–35, 357–358
• hyrax® click	32–33, 355–356
• hyrax® neo	35–36, 358–359
• Neo-Bertoni 3D	341
• Neo-Bertoni Mehrsektorenschrauben	340–341
• Neo-VDP nach F.M. Sander	345
• Mehrsektorenschrauben	342–343
• Spezial-Dehnschrauben	337–349
• Standard-Dehnschrauben	334–336
• Titan hyrax®	37, 354
• Variety Dehnschrauben	40–41, 352–353
• Variety click Dehnschrauben	38–39, 350–351
• Zugschrauben	339–340
Dehnschrauben Musteretui	361
Dehnschraubenschlüssel	360
Demonstrationsmodelle	31, 58, 66, 117, 261, 313, 323–327
Dentaflex® Drähte	202, 204, 206, 217–218, 225, 227
Dentaflex® Flussmittel	438
dentaform® – Bänder	
• dentaform® Bänder / Einzelpackungen	157–164
• dentaform® Bänder / Sortimente	155–156
dentaform® Snap – Bänder	
• dentaform® Snap Bänder / Einzelpackungen	151–154
• dentaform® Snap Bänder / Sortimente	150
Dentalastics®	
• Ketten, extraoral	270
• Kunststofffringe	274
• Ligaturen	117, 275
• Personal	117, 275
• Separatoren	274

Index alphabetisch

Dentaurum Digital	9, 30–31, 229
Dentoformgerät	323
Dermatril® Einmal-Schutzhandschuhe	387
desktop Compact Laser	430
Diagnose-Instrumente	416–418
Diamantscheibe / Modelltrimmer	442
Digitale Kieferorthopädie	30–48
Disco-Glimmer	373
discovery® – Premiumbrackets	
• discovery® Premiumbrackets / Einzelpackungen	81
• discovery® Premiumbrackets / Sortimente	76–80
discovery® delight – Lingualbrackets	
• discovery® delight Demonstrationsmodell	58, 325
• discovery® delight Lingualbrackets	55
• discovery® delight Lingualbrackets / Sortimente	54
• discovery® delight Lingualröhrchen	55
discovery® pearl – Keramikbrackets	
• discovery® pearl Keramikbrackets / Demonstrationsmodelle	117, 325
• discovery® pearl Keramikbrackets / Einzelpackungen	114–115
• discovery® pearl Keramikbrackets / Sortimente	112–113
• discovery® pearl Keramikbrackets / Zubehör	117
• discovery® pearl & smart Kombi-Sortimente	116
discovery® pearl Debonding-Instrument	117, 410
discovery® sl – selbstgligerende Brackets	
• discovery® sl Brackets 18/22 (Metall)	64
• discovery® sl Demonstrationsmodell	66, 326
• discovery® sl 2.0 Brackets 22 (Metall)	65
• discovery® sl 2.0 Demonstrationsmodell	66, 326
• sl-Instrumente	66, 410
discovery® smart – Metallbrackets	
• discovery® smart Metallbrackets / Demonstrationsmodell	325
• discovery® smart Metallbrackets / Sortimente	82–85, 116
Distalbieger	414
Distalisationsapparat	259–261, 304–306
Distalisationsapparat, amda®	
• Apparat und Zubehör	260–261, 305–306
• Starter Set	259, 304
Distalschneider	394, 406
Distanzringe	253, 258
Doppelhäkchen / Adhäsivtechnik	122

Doppelhäkchen / Bandtechnik	143
Doppelplattenführungssporne	241
Doppelscheiben-Modelltrimmer, Scheiben	442, 443
Dosierflasche	318
Dosierpipette für Farbkonzentrate	378
Download STL-Daten	31
Draht, flach gewalzt	242
Drähte	56, 200–228, 230, 235–238, 433–434
Drahtligaturen	230
Drahtständer / Zangenständer	419
Drehmomentratsche, tomas®	294
Drehrichtungspfeile	360
Dreiecksklammern	240
Dreifingerzangen	399, 402, 409
Druckfedern	232
Druckservice	9, 30–31
Drucktopf, -schlauch	385, 441
Druckwaagen	415
Durchzeichenfolien	418
Durchzeichenschablonen	418
E	Seite
Eckzahnblätter	168, 174–175
Eckzahnzugfedern	232
Edelstahlrohre	242
Edelstahl-Dehnschrauben	334–335, 336–345, 346, 347, 350–353, 355–359
Edelweiß	
• Kunststoff-Flüssigpolitur	384
• Kunststoff-Polierstab	384
• Kunststoff-Trockenpolierpaste	384
Einlegebildchen für KFO	374–377
Einmal-Schutzhandschuhe, Dermatril®	387
Elastic Placers	272
Elektrisch höhenverstellbares Stativ	432
Elektroden	436–437
EQ-Line Zangen	406–409
equilibrium® 2 – Metallbrackets	
• equilibrium® 2 Metallbrackets / Einzelpackungen	100–102
• equilibrium® 2 Metallbrackets / Sortimente	94–99
equilibrium® mini – Minibrackets	
• equilibrium® mini Minibrackets / Einzelpackungen	93
• equilibrium® mini Minibrackets / Sortimente	89–92

Index alphabetisch

equilibrium® ti – Reintitanbrackets	
• equilibrium® ti Reintitanbrackets / Sortimente	103–104
Equire Drähte	201, 202, 216, 220–221
Extraorale Gummiringe	270
Extraorale Kunststoffkette	270
F	Seite
Face Bow Zubehör	
• Aktivator-Röhrchen	271
• Stoppröhrchen	271
• Stoppschrauben	271
Face Bows	
• mit Stoppschlaufen	269
• nickelfreie	268
• Standard	268–269
FaceFormer	276
Fächerdehnschraube	344
Farbkonzentrate	372
Farbstifte	420
Federbolzenschrauben	348
Federwaagen	415
Fettstift	420
Fixator	385
FKO-Split Fixator	385
Flach gewalzte Drahteinlage	242
Flachzangen	402
Flexaponal® Spezialwachs	318
Flush Cutter	394–395
Flussmittel	438
Fräser	380–382
Führungssporne	241
G	Seite
Gasbrenner, mini	443
Gaumenimplantat	307
Gaumennaht-Erweiterungsschrauben	350–359
Gesichtsbogen	268–269
Gewindeschneider	349
Gips	319
Gipstrimmer, Scheiben	442, 443
Gleit Röhrchen	233
GNE-Schrauben	32–37, 354–359
Gold-Draht	205, 228
Goshgarian	242–243
Gullivers Reise ins Zahnspannenland	450–451
Gummiketten	58, 117, 274
Gummiringe	
• extraoral, Latex	270
• intraoral, Latex	272, 273

• intraoral, Non-Latex	273
H	Seite
Häkchen	
• Doppelhäkchen / Adhäsivtechnik	122
• Doppelhäkchen / Bandtechnik	143
• mit Setzlasche / Bandtechnik	143
Hammerhead Zange	399
Handelektroden, Halter	436
Handsäge	382
Hartmetallfinierer	189
Hebelseitenschneider	409
Herbst-Retentionsscharniere	254–255
Herbst-Zubehör	256–258
Hilgers 18 – Bracketsystem	
• Metallbrackets, discovery® 18	79
Hitzeschutz	438
Hohlkehlzangen	399, 400, 408
How-Zangen	393–394, 406
hyrax® click Schrauben	32–33, 355–356
hyrax® Schrauben	34–35, 354, 357–358
I	Seite
Innensechskant-Schlüssel	253, 258, 261, 271, 299, 306
Innensechskantschrauben / Herbst	256
Intraoralscanner	43–45
Isoliermittel	379
Isoliermittel für gedruckte Modelle	31, 379
Isolierung für gedruckte Modelle	31, 379
J	Seite
Jarabak Light Wire Zange	397, 407
Johnson-Konturenzange	393
K	Seite
Karabinerhaken	322
Kephalometriezubehör	418
Keramikbrackets	
• discovery® pearl	112–116
KFO-Behandlungsplanung	46–48
KFO-Demonstrationsmodelle	
• discovery®	324
• discovery® delight	58, 325
• discovery® pearl	117, 325
• discovery® sl	66, 326
• discovery® sl 2.0	66, 326
• discovery® smart	325
• equilibrium® 2	324
• equilibrium® mini	324
• tomas® / amda®	261, 313, 326

Index alphabetisch

KFO-Einlegemotive	374–377
KFO-Kunststoff	368–373
KFO-Modelle	30
KFO-Planungssoftware	46–48
KFO-Spangenboxen	321–322
Kieferbruch-Schiene	233
Kiefermodell-Tray	320
Kleber (Bracketadhäsive)	186–188
Klebewachs	379
Klemmelektrode	436
Klemmpinzette	57, 410
Klemmröhrchen	233
Klemmzange, Herbst TS/SUS	253, 258, 398
Klemmzangen	233, 253, 258, 398
Knopfanker	240
Knöpfchen	
• Adhäsivtechnik	122
• Bandtechnik	143
• mit Häkchen / Adhäsivtechnik	122
• mit Kette / Adhäsivtechnik	122
Knöpfchen / Adhäsivtechnik	122
Kobayashi Ligaturen	230
Kohleeinsatz	437
Konvertierzange	392
Konvertierzange-Ersatzklingen	392
Kopplungselemente, tomas®	295–297
Korkhaus	
• Diagnostisches Besteck	417
• Zirkel	417
Korundscheibe / Modelltrimmer	442
Kramponzange	401, 408
Kreuzröhrchen	234, 300
Kunststoff, KFO	
• Disco-Glimmer	373
• KFO-Einlegemotive	374–377
• Orthocryl® – Kunststoff	370–373
• Orthocryl® LC – lichthärtender Kunststoff	368–369
• Zubehör	378–387
Kunststoffeinsätze / Zangen	392, 406
L	Seite
Labialbogen	239
Laboranalog, tomas®	297
Laboratory pins, tomas®	297
Laborscanner	42
Laser desktop Compact	430
Laser Welder SL10	431
Laserschweißdrähte	433–434
Leinenschwabbel	383

Lichthärtende Adhäsive,	186–187
CONTEC lc/lcr	
Ligator	413
Ligaturenadapter, -spanner	413
Ligaturendraht	230
Ligaturenringe	117, 275
Ligaturschneider	395
Light Wire Zangen	395–396, 397
Lineale	361, 416
Lingualbiegezange	57, 396
Lingualbögen	56, 244–245
Lingualbrackets, discovery® delight	54–55
Lingualbügel	241
Lingualhäkchen	143
Lingualknöpfchen	143
Lingualröhrchen, discovery® delight	55
Lingualschlösser	142
Lingualsystem	
• Beratungsunterstützung	58, 325
• discovery® delight – Lingualbrackets	55
• discovery® delight – Lingualbrackets / Sortimente	54
• Instrumente	57, 393, 396, 406, 410, 413
• Lingualröhrchen	55
• Lingualbögen	56
• Zubehör	58
Lingualsystem / Instrumente	
• Bracket-Abnehmezange	57, 393
• Klemmpinzette	57, 410
• Lingualbiegezange	57, 396
• Mosquitoklemme	57, 413
• Mundspiegel mit Hilfslinien	57, 413
• Positionierungstool	57, 413
Lingualsystem Orthorama®	244–245
LinguForm Bogenformer	415
Lip Bumper	270
Lippenschild	270
Lote	439
Lötelektrode	437
Lötkohle	436
M	Seite
Mandrell	384
Markierungsstifte	420
Mathieu Nadelhalter	412
Matrizenband	176
McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22 – Bracketsystem	
• Keramikbrackets, discovery® pearl 18/22	113, 115, 116

Index alphabetisch

• Kombisortimente,	116
discovery® pearl & smart 22	
• Metallbrackets, discovery® smart 18/22	84–85, 116
• Metallbrackets, equilibrium® 2 18/22	96–97, 101
• Minibrackets, equilibrium® mini 18/22	91–93
• Reintitanbrackets, equilibrium® ti 18/22	104
• Selbstligierende Brackets,	
discovery® sl 2.0 22	65
Mehrsektorenschrauben	340–343
Mershon-Bandandrücker	411
Messbecher	378
Messinstrumente	361, 416–418
Messkeil	361, 416
Messplatte	416
Messstab	416
Messzirkel	417
Metall-/Kunststoffzähne	323
Metallbrackets / Adhäsivtechnik	
• discovery® 18/22 – Premiumbrackets	76–81
• discovery® delight – Lingualbrackets	54–55
• discovery® sl 18/22 –	
selbstligierende Brackets	64
• discovery® sl 2.0 22 –	
selbstligierende Brackets	65
• discovery® smart 18/22	82–85, 116
• equilibrium® 2 18/22 – Metallbrackets	94–100
• equilibrium® mini 18/22 – Minibrackets	89–93
• equilibrium® ti 18/22 – Reintitanbrackets	103–104
• topic 18/22 – nickelfreie* Brackets	86–88
Metallbrackets / Bandtechnik	
• equilibrium® 2 18/22 – Metallbrackets	101–102
Minibrackets, equilibrium® mini	89–93
Minischraube	262, 291–292
Mischgefäße / -becher	319, 378
Modelldruck	30
Modellglänzer	319
Modelliereinsätze für Thermomat	444
Modellierlöffel für Thermomat	444
Modellierspitze für Thermomat	444
Modellierwachs	379
Modellisoliermittel für gedruckte Modelle	31, 379
Modellisolierung für gedruckte Modelle	31, 379
Modellscanner	42
Modelltray	320
Modelltrimmer, Scheiben	442, 443
Molarenbandabnehmezange	393, 406
Molarenbandaufsetzer	411
Mosquitoklemmen	57, 412–413

Müller-Führungssporne	241
Multi-Action Lingualbögen	245
Münchner Modell Schiebelehre	416
Mundspiegel mit Hilfslinien, lingual	57, 413
Mundvorhofplatte	276
N	Seite
Nadelhalter	412
Nance Zangen	396, 407
Neo-Bertoni 3D	341
Neo-Bertoni Mehrsektorenschrauben	340–341
Neo-VDP nach F.M. Sander	345
Netzbasen (anatomisch konturiert) /	
Adhäsivtechnik	122
Nickelfreie* Brackets	86–88, 103–104
Nickelfreie Therapie	118–121
Noninium® Drähte	207, 238
O	Seite
o-atlas II	448–449
OnyxCeph ^{3TM}	46–48
Ösenklammer	240
Oliver-Jones Bandabnehmezange	393, 406
Orthalgemat®	
• Duo Abformmaterial	318
• Ex Reinigungsmittel	318
Ortho Brush	328
Ortho Bukkalröhrchen / Adhäsivtechnik	128, 130
Ortho Bukkalröhrchen / Bandtechnik	134, 136, 139–140
Ortho-Cast Bukkalröhrchen /	
Adhäsivtechnik	130, 131, 132
Ortho-Cast Bukkalröhrchen /	
Bandtechnik	136, 138, 139, 140–141
Ortho-Cast M-Series Bukkalröhrchen /	
Adhäsivtechnik	129, 131
Ortho-Cast M-Series Bukkalröhrchen /	
Bandtechnik	135, 137–138, 139, 140
Ortho-Cast M-Series Konvertierzange	392
Ortho-Cast M-Series Konvertierzange,	
Ersatzklingen	392
Ortho-Cast M-Series mini Bukkalröhrchen	128
Orthocryl® – Kunststoff	
• black & white	371
• Disco-Glimmer	373
• Einzelpackungen	371–372
• Farbkonzentrate	372
• KFO-Einlegemotive	374–377
• Neon	370, 371
• Sortimente	370
• Zubehör	378–387

Index alphabetisch

Orthocryl® LC – lichterhärtender Kunststoff	
• Einzelpackungen	369
• Start-Sets	368
• Zubehör	369
Orthorama®	
• Lingualbögen	244–245
• Palatinalbögen	244
• Sektionsbögen	245
• Transfersystem	245
P	Seite
Palatal Implant, tomas® PI	307–312
Palatinalbogen, -bügel	242–243, 244
Palatinal Aufbisse / Adhäsivtechnik	122
Palatinalröhrchen, -schloss	142
Pfeilformzange, Pfeilnickzange	403
Pflege-/Schutzöl / Zangen, Instrumente	419
Pilotbohrer, tomas®	293
Pins, tomas®	262, 291–292
Pinzette	410
Planungssoftware	46–48
Polierbürsten	382–383
Poliermittel	384
Polyclav® Polymerisationsdrucktopf	385, 441
Positionierungstool, lingual	57, 413
Premium-Line Zangen	392–403
prime4me® Aligner	30
prime4me® Modelldruck	30
prime4me® RETAIN3R	31
Primer für CONTEC lc/lcr	187
Progenieschraube	347
Punktschweißgerät	435
Q	Seite
Quad Helix	243
R	Seite
Rapidur® Gips	319
Reinigungsflüssigkeit, activefluid	387, 440
Reinigungsgerät, activeblue	386, 440
Reinigungsadeln, activeblue	386, 440
remaloy® Drähte	202, 204, 221, 226, 235–236
remanium® Drähte	202, 204, 206, 219–220, 225–226, 227, 235, 237–238
rematitan® flat Retainerdraht	204, 228
rematitan®	
• Dehnschrauben	336, 354

• LITE Drähte	56, 200–201, 206, 208–214, 227
• LITE Druckfedern	232
• LITE White Drähte	203, 223
• LITE Zugfedern	231
• Schweißdrähte	354, 433–434
• SPECIAL Drähte	203, 205, 222, 226
rematitan® Bukkalröhrchen	133
rematitan® Drähte	200–201, 203, 205, 206, 208–214, 222–223, 226–227
rematitan® LITE Spee® Umkehrbogen	200, 212
Retainer 3D	31, 229
Retainer, gefräst	31, 229
Retainer, konfektioniert	229
Retainer, Titan, Gold, Edelstahl	204, 205, 207, 228, 229
Retentionsringe / Transferwinkel	245
Retentionsscharniere nach Herbst	254–255
Ricketts® 18 – Bracketsystem	
• Metallbrackets, discovery® 18	78
• Metallbrackets, equilibrium® 2 18	98, 100
Röhrchen / Adhäsivtechnik	128–133
Röhrchen / Aktivator	271
Röhrchen / Bandtechnik	134–141
Röhre, Edelstahl	242
Roth 18/22 – Bracketsystem	
• Keramikbrackets, discovery® pearl 18/22	112, 114, 116
• Metallbrackets, discovery® 18/22	76–77, 81
• Metallbrackets, discovery® smart 18/22	82–83, 116
• Metallbrackets, equilibrium® 2 18/22	94–95, 100, 101
• Minibrackets, equilibrium® mini	89–90
• nickelfreie* Brackets, topic 18/22	86–88
• Reintitanbrackets, equilibrium® ti 18/22	103
• Selbstligierende Brackets, discovery® sl 18/22	64
RPE eyelet, tomas®	295, 356
Ruhland Hohlkehlzange	400, 408
S	Seite
Sabbagh Universal Spring – SUS³	252–253
Säge	382
Sägeblätter	382
Sander-Schraube	345
Scaler	411
Scanner, intraoral	43–45
Schablonen für diagnostische Zwecke	418
Schaneng Vorschubdoppelplatten-System	346

Index alphabetisch

Schaumodelle	31, 58, 66, 117, 261, 313, 323–327
Scheren	411
Schiebelehren	416
Schlaufenbiegezeuge	
• Nance	396, 407
• Tweed	396, 397, 407
Schlingenbiegezeuge, Nance	396, 407
Schlitzschrauben / Herbst	256
Schlüssel	
• Dehnschraubenschlüssel	360
• Innensechskant	253, 258, 261, 271, 299, 306
• Sicherheitsschlüssel / hyrax® / Variety	360
• Universal-Biegeschlüssel	360
Schmirkelfeile	438
Schmirkelhalter, -leinen	384
Schmuth Messplatte	416
Schraubendreher	294
Schutzhandschuhe, Dermatri®	387
Schutzöl / Zangen, Instrumente	419
Schutzwachs	123
Schweißelektrode	437
Schweißgeräte	430–431, 435
Seitenschneider	394, 395, 406
Sektionsbögen	245
Sektorenschrauben	337–338
Selbstligierendes Bracketsystem	
• Brackets 18/22 (Metall), discovery® sl	64
• Brackets 22 (Metall), discovery® sl 2.0	65
• discovery® sl Demonstrationsmodell	66, 326
• discovery® sl 2.0 Demonstrationsmodell	66, 326
• sl-Instrumente	66, 410
Separatoren	274
Separierstreifen	411
Separierzange	393
Sicherheitsschlüssel / hyrax®	360
Silberlote	439
Silikon O-Ringe / Flush Cutter	395
Silikonpolierer	384
sl-Instrumente	66, 410
Sockelformen, Gelenke	320
Sockelgerät	320
Sockelmodell	30
Sortimentskästen, -schrank / Bänder	177–178
Sortimentsschachtel / Brackets	123
Spangenboxen	321–322
Spezial-Bracket-Debonding-Zange	392

Spezial-Dehnschrauben	337–349
Spitzflachzangen	402, 409
Sprühdüsen, -flaschen	378
Standard – Bänder	
• Standard Bänder / Einzelpackungen	169–175
• Standard Bänder / Sortimente	165–168
Standard-Dehnschrauben	334–336
Standard Edgewise 18/22 – Bracketsystem	
• Metallbrackets, discovery® 18/22	79–80
• Metallbrackets, equilibrium® 2 18/22	98–99, 102
Stativ, elektrisch höhenverstellbar	432
STL-Download	31
Stopper für Sortimentsschrank / Bänder	178
Stoppröhrchen / Bögen	234
Stoppröhrchen / Face Bow	271
Stoppschrauben / Face Bow, tomas®	271, 299
Stripper	411
Studienmodelle	31, 58, 66, 117, 261, 313, 323–327
SUPER Elasto-Force Kunststoffketten	58, 117, 274
SUS ³ – Sabbagh Universal Spring	252–253
T	Seite
TAD, temporary anchorage device	262, 291–292
Tensic® Drähte	201, 215
Tensic® White Drähte	203, 224
Thermo-Bögen	201, 203, 215–216, 224
Thermowachs, Ausblockwachs	379
Titan	
• Brackets	103–104
• Bukkalröhrchen	133
• Dehnschrauben	37, 336, 354
• Drähte	56, 200–201, 203, 205, 206, 207, 208–216, 222–224, 226–227, 228, 229, 433–434
• Federn	231, 232
• hyrax®	37, 354
• Knöpfchen mit Kette	122
• Retainer	229
Titan-Bukkalröhrchen	133
tomas®-Verankerungssystem	
• Beratungsunterstützung	313, 326–327
• Instrumente und Zubehör	293–303
• tomas®-abutment	295–297

Index alphabetisch

• tomas®-abutment kit	295
• tomas®-auxiliary kit	298
• tomas®-laboratory pin	297
• tomas®-pin	262, 291–292
• tomas®-RPE eyelet	295, 356
• tomas®-tool set	290
tomas® PI – Palatal Implant	
• Instrumente und Zubehör	308–312
• tomas® PI 4.0	307
• tomas® PI-abutment	310, 311
• tomas® PI-laboratory analog	311
• tomas® PI-tool set	307
topic – nickelfreie* Brackets	
• topic nickelfreie* Brackets / Einzelpackungen	88
• topic nickelfreie* Brackets / Sortimente	86–87
Torque ratchet, tomas®	294
Transferwinkel / Retentionsringe	245
Trapez-Dehnschraube	336
Trichter	378
Trimmer, Scheiben	442, 443
TRIOS Intraoralscanner	43–45
Tweed-Zangen	396, 397, 407
Typodont, Gerät	323
U	Seite
Ulmer Modell, Mundvorhofplatte	276
Ultraschall-Reinigungslösung	319
Umhängeband für Spangenboxen	322
Umkehrbögen	200, 212
Universal Drahtbiegezange	401
Universal-Biegeschlüssel	360
Unterkieferbogenschraube	344
Unterzungenbügel	241
V	Seite
Variety Dehnschrauben	40–41, 352–353
Variety click Dehnschrauben	38–39, 350–351
Verankerungssystem, tomas®	
• Beratungsunterstützung	313, 326–327
• Instrumente und Zubehör	293–303
• tomas®-abutment	295–297
• tomas®-abutment kit	295
• tomas®-auxiliary kit	298
• tomas®-laboratory pin	297
• tomas®-pin	262, 291–292
• tomas®-RPE eyelet	295, 356
• tomas®-tool set	290

Verseilte Drähte	202, 204, 205, 206, 207, 217–218, 225, 227, 228
Vierkant-Röhrchen	234
Vorbohrer, tomas®	293
Vorgeformte Bänder	150–164
Vorgeformte Bögen	56, 200–203, 208–224
Vorschubdoppelplatten-System	345, 346
W	Seite
Waagen	415
Wachse	123, 318, 323, 379
Wachsformen	323
Wärmeplatte	385, 441
Weingart-Zange	396, 407
Weiß Bögen	203, 223–224
Weißgoldlot	439
Weißöl / Schutzöl für Zangen, Instrumente	419
Wildlederschwabbel	383
Y	Seite
Young-Schlaufenzange	402, 409
Z	Seite
Zähne	323
Zahnbürsten	328
Zahnkranzmodell	30
Zahnspangenreinigung	386, 440
Zahnstripper	411
Zahnwachs	123
Zangen	57, 233, 253, 258, 301, 392–403, 406–409
Zangenständer	419
Zirkel	417
Zubehörsatz, tomas®	298
Zug- und Druckwaagen	415
Zugfedern	231–232
Zugschrauben	339–340

Index numerisch

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
000-001-00	396	004-180-00	414	026-355-00	411	045-016-00	408
000-030-00	412	004-182-00	415	027-349-00	411	045-017-00	408
000-031-00	412	004-184-00	415	028-353-00	417	045-018-00	409
000-035-00	412	004-186-00	414	029-360-01	417	045-019-00	408
000-730-00	412	004-187-00	415	029-360-02	417	045-020-00	409
000-731-00	412	004-190-00	415	029-361-02	417	045-021-00	406
000-732-00	57, 413	004-266-00	394	029-362-00	417	045-022-00	406
001-650-00	400	004-346-00	392	029-363-00	417	050-500-00	320
003-001-00	57, 396	004-347-00	57, 393	029-364-00	417	050-501-00	320
003-053-00	400	004-350-00	392	030-390-00	412	050-502-00	320
003-094-00	401	004-368-00	418	030-395-02	417	050-503-01	320
003-111-00	394	004-369-00	418	030-395-03	417	050-801-00	323
003-112-00	393	004-373-00	418	030-396-02	417	050-802-00	323
003-114-00	393	004-455-00	402	033-452-00	401	050-803-01	323
003-120-00	396	004-515-00	400	035-455-00	402	055-000-00	419
003-121-00	396	007-024-00	411	037-356-00	394, 395	055-100-00	419
003-125-00	397	008-025-00	411	038-356-00	392, 406	055-101-01	419
003-130-00	395	012-074-00	402	038-357-00	397	055-104-00	234
003-139-00	398	012-350-00	397	038-805-10	392	055-105-00	419
003-180-01	398	012-351-00	397	039-357-00	393, 406	055-201-00	419
003-185-00	397	012-520-00	403	040-711-00	415	070-000-00	385, 441
003-200-00	402	012-521-00	403	040-712-00	415	070-010-00	385, 441
003-201-00	402	013-522-00	401	040-713-00	415	070-015-00	385, 441
003-202-00	402	014-151-00	395	042-750-00	416	070-900-00	385, 441
003-205-00	399	014-152-00	395	042-751-00	150 - 175, 416	072-001-00	386, 441
003-233-00	400	015-160-00	393	043-700-00	420	072-001-40	386, 441
003-290-00	401	016-153-00	395	043-720-00	361, 416	072-004-00	385
003-349-00	392, 406	018-001-01	411	043-800-00	420	074-000-00	276
003-350-00	399	018-002-01	411	043-900-00	420	074-001-00	276
003-351-00	399	019-000-00	414	044-177-00	409	074-101-01	276
003-355-00	399	019-001-00	117, 410	044-730-01	416	075-100-00	418
003-366-00	416	021-273-00	414	044-731-00	416	075-101-00	418
003-442-00	396	022-274-00	414	045-000-00	407	078-000-00	435
003-514-00	400	023-276-00	66, 410	045-001-00	407	080-116-00	436
003-515-00	400	023-277-00	66, 410	045-002-00	407	081-101-00	436
003-516-00	401	023-278-00	57, 413	045-003-00	407	081-204-00	436
003-700-00	394	023-279-00	57, 413	045-004-00	393, 406	081-205-00	436
003-701-00	394	023-279-10	57, 413	045-005-00	392, 406	081-206-00	436
003-702-00	394	023-292-00	413	045-006-00	406	081-501-00	436
003-705-00	394, 395	023-293-00	413	045-007-00	409	081-601-00	436
003-706-00	395	023-294-00	413	045-008-00	409	081-701-00	436
003-710-00	253, 258, 398	023-295-00	413	045-009-00	407	083-300-00	438
003-711-00	233, 301, 398	024-300-01	411	045-010-00	407	084-100-00	438
003-805-00	392	025-276-00	410	045-011-00	409	085-000-00	437
004-095-00	401	025-277-00	410	045-012-00	408	085-100-00	437
004-109-00	397	025-279-00	410	045-013-00	408	085-200-00	437
004-130-00	396	025-280-00	57, 410	045-014-00	408	085-300-00	437
004-139-00	398	026-347-00	393, 406	045-015-00	408	085-400-00	437

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
086-000-00	437	123-703-00	189	160-100-39	374	161-611-00	373
086-100-00	437	124-002-00	318	160-100-40	374	161-620-00	372
086-200-00	437	124-003-00	318	160-100-41	374	161-622-00	372
086-300-00	437	124-202-00	318	160-100-42	375	161-912-00	370
089-430-00	420	124-305-01	123	160-100-43	375	162-100-00	370, 378
089-431-00	420	138-623-00	384	160-100-44	375	162-101-00	378
089-602-00	444	139-500-00	384	160-100-45	374, 377	162-200-00	370, 378
089-603-00	444	140-015-00	384	160-100-46	375	162-501-00	378
089-604-00	444	141-700-00	382	160-112-00	370, 371	162-502-00	378
089-605-00	444	141-700-10	382	160-212-00	370, 371	162-503-00	378
089-606-00	444	141-710-00	382	160-300-00	371	162-600-00	370, 378
089-612-00	444	141-711-00	383	160-301-00	371	162-751-00	370, 378
089-620-00	444	141-712-00	383	160-400-00	368	162-752-00	370, 378
090-404-00	432	141-713-00	383	160-400-20	368	162-800-00	370, 379
090-513-10	432	141-713-10	383	160-401-00	368, 369	162-801-00	31, 379
090-574-00	432	150-000-00	318	160-402-00	368, 369	162-907-00	387
090-578-50	430	150-010-00	318	160-404-00	368, 369	162-908-00	387
090-594-00	431	150-020-00	386, 387, 440	160-410-00	369	162-909-00	387
091-100-00	442, 443	150-501-20	318	160-420-00	368, 369	163-107-00	188
091-101-00	443	150-509-20	318	160-421-00	368, 369	163-110-00	186
091-102-00	443	150-520-20	318	160-422-00	369	163-111-00	186, 187
091-105-00	443	160-011-00	371	160-430-00	369	163-113-10	186, 187
094-610-00	319	160-012-00	371	160-501-00	370	163-114-00	188
094-611-00	319	160-013-00	371	160-502-00	370	163-115-00	186, 187, 188
094-612-00	319	160-014-00	371	160-600-00	370	163-121-00	188
097-400-01	443	160-100-00	374	160-700-00	370	163-130-00	186
098-000-00	386, 440	160-100-01	374, 375	161-100-00	370, 372	163-131-00	186, 187
098-001-00	386, 440	160-100-02	374, 375	161-127-00	370, 372	163-300-00	328
119-150-00	379	160-100-04	374, 375	161-128-00	370, 372	163-602-01	321
120-170-00	379	160-100-05	374, 376	161-129-00	370, 372	163-610-01	321
122-300-00	379	160-100-06	374, 376	161-130-00	370, 372	163-611-01	321
123-580-00	381	160-100-07	374, 376	161-131-00	372	163-612-01	321
123-581-00	381	160-100-09	374, 376	161-132-00	372	163-701-01	321
123-582-00	381	160-100-10	374, 376	161-133-00	372	163-702-01	321
123-583-00	381	160-100-11	374, 376	161-134-00	372	163-703-01	321
123-584-00	381	160-100-12	374, 376	161-135-00	370, 371	163-707-01	321
123-585-00	381	160-100-13	374, 376	161-136-00	370, 371	163-710-01	321
123-594-00	381	160-100-14	374, 376	161-137-00	370, 371	163-711-01	321
123-596-00	381	160-100-15	374, 376	161-138-00	370, 371	163-712-01	321
123-597-00	382	160-100-16	374, 377	161-139-00	370, 371	163-713-01	321
123-598-00	382	160-100-18	374, 377	161-150-00	372	163-801-00	322
123-603-00	189	160-100-19	374, 377	161-300-00	372	163-801-01	321
123-603-30	189	160-100-27	374, 377	161-350-00	372	163-802-01	321
123-604-00	189	160-100-28	377	161-605-00	373	163-805-01	322
123-604-30	189	160-100-29	374, 377	161-606-00	373	163-807-00	322
123-700-00	189	160-100-30	377	161-607-00	373	164-450-00	319
123-701-00	189	160-100-31	374, 377	161-608-00	373	164-650-00	319
123-702-00	189	160-100-34	377	161-609-00	373	164-651-00	319

Index numerisch

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
166-450-00	319	302-025-21	296	303-240-20	307, 308	410-000-02	46
180-201-00	380	302-025-22	295, 296	303-240-34	307, 308	410-000-03	46
180-202-00	380	302-025-30	296	303-240-54	307, 309	410-000-04	46
180-304-00	380	302-025-51	296	303-310-00	307, 309	410-000-05	46
180-305-00	380	302-026-00	295, 297	303-320-00	307, 309	410-000-06	47
180-308-00	380	302-027-00	261, 295, 297, 306	303-330-00	307, 309	410-000-07	47
180-702-00	382	302-028-01	295, 297	303-340-00	307, 309	410-000-08	48
180-703-00	382	302-029-01	295, 297	303-350-00	307, 309	410-000-09	48
181-100-01	383	302-030-01	295, 297	303-360-00	307, 309	410-000-10	48
181-200-00	383	302-040-06	302	303-400-00	307, 310	410-000-11	47
181-201-00	383	302-040-08	302	303-400-20	311	410-000-12	48
190-100-00	384	302-040-10	302	303-400-30	311	410-000-13	47
190-200-00	384	302-041-00	302	303-400-40	310	410-000-14	47
302-001-20	298	302-042-00	302	303-400-41	311	410-000-15	48, 303
302-004-10	290, 294	302-050-00	295	303-400-52	310	410-001-00	46
302-004-14	294	302-060-06	302	303-400-60	311	410-002-00	46
302-004-16	294	302-070-02	303	303-400-70	310	410-004-00	46
302-004-20	290, 293, 294	302-071-02	303	303-400-72	311	410-005-00	46
302-004-30	290, 293	302-080-00	290, 294, 302	303-400-80	310, 311	420-100-01	45
302-004-41	290, 294	302-103-00	290, 293	303-400-82	310	420-100-25	45
302-004-50	290, 294	302-106-00	291	303-410-00	311	420-100-38	45
302-004-70	290, 293, 294	302-106-10	292	303-500-10	307, 312	420-100-40	45
302-004-81	294	302-106-30	292	303-500-21	307	421-131-00	44
302-007-20	313, 327	302-108-00	291	303-700-00	311	421-231-00	44
302-007-30	313, 327	302-108-10	292	308-513-00	206, 238	421-431-01	43
302-009-00	298	302-108-30	292	308-515-00	206, 238	421-731-00	43
302-009-10	299	302-110-00	291	308-518-00	206, 238	430-110-10	30
302-012-00	298	302-110-10	292	308-520-00	206, 238	430-110-30	30
302-012-10	298	302-110-30	292	308-713-00	206, 238	430-120-30	31, 229
302-012-20	298	302-151-00	290	308-715-00	206, 238	430-120-40	31, 229
302-013-01	260, 298, 299, 305	302-156-00	290, 294	308-718-00	206, 238	430-120-90	31
302-014-18	300	302-206-00	262, 291	311-306-30	241	430-140-20	30
302-014-22	300	302-206-10	262, 292	311-307-30	241	430-141-21	30
302-015-00	298, 300	302-206-30	262, 292	311-308-30	241	430-142-21	30
302-019-00	298, 300	302-208-00	262, 291	312-106-00	242	480-000-00	234
302-020-00	298, 301	302-208-10	262, 292	312-107-00	242	480-001-00	242
302-020-10	298, 301	302-208-30	262, 292	380-070-00	438	480-003-00	242
302-021-00	298, 301	302-210-00	262, 291	380-600-50	439	480-005-00	242
302-021-10	298, 301	302-210-10	262, 292	380-604-50	439	480-007-00	242
302-022-18	299	302-210-30	262, 292	380-604-60	439	480-009-00	242
302-022-22	299	302-251-00	290	380-704-50	439	480-011-00	242
302-023-10	295, 298, 301	302-602-00	295, 356	385-624-00	206, 238	480-013-00	242
302-024-00	298, 299	303-010-01	307	385-630-00	206, 238	480-015-00	242
302-025-00	295	303-010-10	307, 312	387-509-00	308	480-017-00	242
302-025-06	295, 296	303-100-40	307	387-522-00	310	480-022-00	234
302-025-11	295, 297	303-210-10	307, 308	387-622-00	310	480-100-00	234
302-025-12	295, 297	303-220-01	307, 308	402-253-00	233	480-617-01	234
302-025-15	295	303-230-00	307, 308	410-000-01	46	480-618-01	234

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
480-619-00	233	524-110-00	206, 237	535-051-00	204, 225	600-302-60	335
480-620-00	233	525-040-00	204, 235	537-310-00	204, 225	600-303-10	335
480-621-00	233	527-004-00	204, 235	537-311-00	204, 225	600-303-30	335
480-621-02	233	527-005-00	204, 235	537-313-00	204, 225	600-303-60	335
480-803-00	233	527-006-00	204, 235	537-314-00	204, 225	600-310-30	336
480-809-00	233	527-070-00	204, 235	537-324-00	204, 225	600-320-10	334
480-914-00	271	527-080-00	204, 235	537-340-00	204, 225	600-320-30	334
480-918-02	271	527-090-00	204, 235	537-410-00	204, 226	600-320-60	334
480-924-02	271	527-100-00	204, 235	537-411-00	204, 226	600-321-10	334
500-025-00	206, 230	528-000-00	205, 228	537-413-00	204, 226	600-321-30	334
500-030-00	206, 230	528-000-01	205, 228	537-414-00	204, 226	600-321-60	334
500-040-00	206, 230	528-000-02	207, 228	537-423-00	204, 226	600-322-10	335
501-025-00	206, 230	528-001-00	205, 228	537-424-00	204, 226	600-322-30	335
501-050-00	206, 230	528-001-01	205, 228	537-440-00	204, 226	600-322-60	335
503-050-00	206, 230	528-039-50	433	537-510-00	204, 226	600-400-10	336
513-070-00	206, 237	528-040-50	433	537-540-00	204, 226	600-400-30	336
513-080-00	206, 237	528-041-00	354, 434	545-638-00	204, 225	600-500-10	338
513-090-00	206, 237	528-042-00	354, 434	545-638-01	206, 227	600-500-30	338
513-100-00	206, 237	528-043-00	434	545-645-00	204, 225	600-500-60	338
513-120-00	206, 237	528-050-00	434	545-645-01	206, 227	600-501-10	338
513-150-00	206, 237	528-070-00	204, 235	545-738-00	204, 225	600-501-30	338
514-070-00	206, 237	528-080-00	204, 235	545-738-01	206, 227	600-501-60	338
514-080-00	206, 237	528-090-00	204, 235	545-745-00	204, 225	600-502-10	337
514-090-00	206, 237	528-100-00	204, 235	545-745-01	206, 227	600-502-30	337
514-100-00	206, 237	528-110-00	204, 235	545-750-00	204, 225	600-502-60	337
520-062-10	207, 238	528-120-00	204, 235	600-000-00	346	600-503-10	337
520-070-10	207, 238	528-130-00	204, 235	600-001-00	346	600-503-30	337
520-072-10	207, 238	528-150-00	204, 235	600-001-30	346	600-503-60	337
520-080-10	207, 238	528-155-00	204, 236	600-002-00	346	600-600-30	340
520-082-10	207, 238	528-158-00	204, 236	600-002-30	346	600-601-30	339
520-090-10	207, 238	528-159-00	204, 236	600-003-00	346	600-602-30	339
520-092-10	207, 238	528-200-10	433	600-004-00	346	600-610-00	347
520-120-10	207, 238	528-210-10	433	600-005-00	346	600-610-30	347
521-040-00	206, 237	528-215-10	433	600-120-00	345	602-604-10	343
523-050-00	206, 237	528-220-00	433	600-121-10	345	602-605-10	342
523-060-00	206, 237	529-000-00	205, 228	600-122-00	345	602-606-10	342
523-070-00	206, 237	530-000-00	204, 228	600-123-00	345	602-800-10	357
523-080-00	206, 237	530-035-00	206, 227	600-131-10	340	602-800-12	34, 357
523-090-00	206, 237	530-040-00	206, 227	600-132-10	341	602-800-30	357
523-100-00	206, 237	530-045-00	206, 227	600-133-10	341	602-800-32	34, 357
523-110-00	206, 237	535-002-00	204, 235	600-300-10	334	602-800-50	357
523-120-00	206, 237	535-003-00	204, 235	600-300-30	334	602-801-10	357
523-150-00	206, 237	535-005-00	204, 235	600-300-60	334	602-801-30	357
524-060-00	206, 237	535-009-00	204, 235	600-301-10	334	602-801-50	357
524-070-00	206, 237	535-035-00	204, 225	600-301-30	334	602-806-10	353
524-080-00	206, 237	535-040-00	204, 225	600-301-60	334	602-806-12	41, 353
524-090-00	206, 237	535-045-00	204, 225	600-302-10	335	602-806-30	353
524-100-00	206, 237	535-048-00	204, 225	600-302-30	335	602-806-32	41, 353

Index numerisch

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
602-806-50	353	602-833-30	355	603-000-00	347	607-158-00	252
602-808-10	357	602-833-50	355	606-600-00	344	607-159-00	252
602-808-12	34, 357	602-834-10	356	606-600-30	344	607-160-00	252
602-808-30	357	602-834-12	33, 356	606-701-00	344	607-165-00	252
602-808-32	34, 357	602-834-30	356	606-701-30	344	607-180-00	259, 304
602-808-50	357	602-834-32	33, 356	607-101-00	256	607-181-02	259, 260, 304, 305
602-809-10	353	602-834-50	356	607-102-00	256	607-181-10	260, 305
602-809-12	41, 353	602-835-10	356	607-103-00	258	607-182-07	260, 305
602-809-30	353	602-835-30	356	607-103-11	252, 253, 258	607-182-10	260, 305
602-809-32	41, 353	602-835-50	356	607-104-00	258	607-182-13	260, 305
602-809-50	353	602-836-10	350	607-104-11	252, 253, 258	607-183-07	260, 305
602-810-10	354	602-836-12	38, 350	607-105-00	258	607-183-10	260, 305
602-810-12	37, 354	602-836-30	350	607-105-11	253, 258	607-183-13	260, 305
602-810-30	354	602-836-32	38, 350	607-107-00	258	607-184-07	259, 260, 304, 305
602-810-32	37, 354	602-836-50	350	607-107-11	253, 258	607-184-10	259, 260, 304, 305
602-810-50	354	602-837-10	351	607-108-00	256	607-184-13	259, 260, 304, 305
602-811-10	358	602-837-12	39, 351	607-108-10	254, 256	607-185-01	259, 261, 304, 306
602-811-12	35, 358	602-837-30	351	607-108-20	254, 256	607-185-10	261, 306
602-811-30	358	602-837-32	39, 351	607-109-00	256	607-202-00	241
602-811-32	35, 358	602-837-50	351	607-110-00	256	607-202-30	241
602-811-50	358	602-838-10	350	607-111-00	254, 257	607-204-00	241
602-812-10	358	602-838-12	38, 350	607-112-00	258	607-204-30	241
602-812-30	358	602-838-30	350	607-115-00	255	607-300-00	271
602-812-50	358	602-838-32	38, 350	607-116-00	256	607-301-00	271
602-815-10	352	602-838-50	350	607-117-00	257	609-004-00	348
602-815-12	40, 352	602-839-10	351	607-118-00	257	609-006-00	348
602-815-30	352	602-839-12	39, 351	607-120-00	254	609-008-00	348
602-815-32	40, 352	602-839-30	351	607-121-00	254, 257	609-100-00	348
602-815-50	352	602-839-32	39, 351	607-121-30	256	609-200-30	348
602-819-10	352	602-839-50	351	607-122-00	254, 257	609-300-01	348, 349
602-819-12	40, 352	602-840-10	357	607-122-30	254, 256	609-400-00	348, 349
602-819-30	352	602-840-30	357	607-123-10	258	609-500-00	348
602-819-32	40, 352	602-840-50	357	607-124-00	254, 257	611-115-00	360
602-819-50	352	602-845-10	358	607-125-00	257	611-115-30	360
602-830-10	355	602-845-12	35, 358	607-126-20	254	611-115-60	360
602-830-12	32, 355	602-845-30	358	607-126-22	254	611-116-00	360
602-830-30	355	602-845-32	35, 358	607-126-24	254	611-120-01	360
602-830-32	32, 355	602-845-50	358	607-127-30	254, 257	611-122-00	360
602-830-50	355	602-846-10	359	607-128-00	257	611-130-00	360
602-831-10	355	602-846-12	36, 359	607-129-00	259, 261, 298, 299, 304, 306	611-131-00	360
602-831-30	355	602-846-30	359	607-144-00	252, 253, 258	611-132-00	360
602-831-50	355	602-846-32	36, 359	607-151-00	253	612-000-00	361
602-832-10	355	602-846-50	359	607-152-00	253	620-107-00	240
602-832-12	32, 355	602-847-10	359	607-153-00	252	620-108-00	240
602-832-30	355	602-847-12	36, 359	607-154-00	252, 253	620-109-00	240
602-832-32	32, 355	602-847-30	359	607-155-00	252, 253	620-110-00	240
602-832-50	355	602-847-32	36, 359	607-156-00	252, 253	620-207-02	240
602-833-10	355	602-847-50	359	607-157-00	252	620-208-02	240

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
620-209-02	240	718-205-21	79	718-302-32	96	718-305-41	98
621-028-01	239	718-205-22	79	718-302-34	96	718-305-42	98
621-031-01	239	718-205-23	79	718-302-35	96	718-305-43	98
621-034-01	239	718-205-24	79	718-302-41	96	718-305-44	98
621-037-01	239	718-205-25	79	718-302-42	96	718-305-45	98
621-040-01	239	718-205-31	79	718-302-44	96	718-305-50	98
621-043-01	239	718-205-32	79	718-302-45	96	718-341-01	94
621-046-01	239	718-205-33	79	718-302-50	96	718-341-10	94
621-200-01	240	718-205-34	79	718-303-01	98	718-341-13	94
621-300-01	240	718-205-35	79	718-303-10	98	718-341-14	94
621-404-01	239	718-205-41	79	718-303-11	98	718-341-15	94
621-405-01	239	718-205-42	79	718-303-12	98	718-341-23	94
621-406-01	239	718-205-43	79	718-303-13	98	718-341-24	94
621-407-01	239	718-205-44	79	718-303-14	98	718-341-25	94
621-408-01	239	718-205-45	79	718-303-15	98	718-341-33	94
621-409-01	239	718-205-50	79	718-303-21	98	718-341-34	94
621-500-01	239	718-301-01	94	718-303-22	98	718-341-35	94
681-100-00	438	718-301-10	94	718-303-23	98	718-341-43	94
705-000-00	122	718-301-11	94	718-303-24	98	718-341-44	94
718-101-01	64	718-301-12	94	718-303-25	98	718-341-45	94
718-101-10	64	718-301-14	94	718-303-31	98	718-341-50	94
718-101-11	64	718-301-15	94	718-303-32	98	718-342-01	96
718-101-12	64	718-301-21	94	718-303-33	98	718-342-10	96
718-101-14	64	718-301-22	94	718-303-34	98	718-342-13	96
718-101-15	64	718-301-24	94	718-303-35	98	718-342-14	96
718-101-21	64	718-301-25	94	718-303-41	98	718-342-15	96
718-101-22	64	718-301-31	94	718-303-42	98	718-342-23	96
718-101-24	64	718-301-32	94	718-303-43	98	718-342-24	96
718-101-25	64	718-301-33	100	718-303-44	98	718-342-25	96
718-101-31	64	718-301-34	94	718-303-45	98	718-342-33	96
718-101-32	64	718-301-35	94	718-303-50	98	718-342-34	96
718-101-34	64	718-301-41	94	718-305-01	98	718-342-35	96
718-101-35	64	718-301-42	94	718-305-10	98	718-342-43	96
718-101-41	64	718-301-43	100	718-305-11	98	718-342-44	96
718-101-42	64	718-301-44	94	718-305-12	98	718-342-45	96
718-101-44	64	718-301-45	94	718-305-13	98	718-342-50	96
718-101-45	64	718-301-50	94	718-305-14	98	718-343-13	100
718-141-13	64	718-302-01	96	718-305-15	98	718-343-23	100
718-141-23	64	718-302-10	96	718-305-21	98	718-343-33	100
718-141-33	64	718-302-11	96	718-305-22	98	718-343-43	100
718-141-43	64	718-302-12	96	718-305-23	98	718-401-01	89
718-205-01	79	718-302-14	96	718-305-24	98	718-401-10	89
718-205-10	79	718-302-15	96	718-305-25	98	718-401-11	89
718-205-11	79	718-302-21	96	718-305-31	98	718-401-12	89
718-205-12	79	718-302-22	96	718-305-32	98	718-401-14	89
718-205-13	79	718-302-24	96	718-305-33	98	718-401-15	89
718-205-14	79	718-302-25	96	718-305-34	98	718-401-21	89
718-205-15	79	718-302-31	96	718-305-35	98	718-401-22	89

Index numerisch

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
718-401-24	89	718-442-14	91	718-502-32	104	718-702-24	115
718-401-25	89	718-442-15	91	718-502-34	104	718-702-25	115
718-401-31	89	718-442-23	91	718-502-35	104	718-702-31	115
718-401-32	89	718-442-24	91	718-502-41	104	718-702-32	115
718-401-34	89	718-442-25	91	718-502-42	104	718-702-34	115
718-401-35	89	718-442-33	91	718-502-44	104	718-702-35	115
718-401-41	89	718-442-34	91	718-502-45	104	718-702-41	115
718-401-42	89	718-442-35	91	718-502-50	104	718-702-42	115
718-401-44	89	718-442-43	91	718-541-13	103	718-702-44	115
718-401-45	89	718-442-44	91	718-541-23	103	718-702-45	115
718-401-50	89	718-442-45	91	718-541-33	103	718-702-63	113
718-402-01	91	718-442-50	91	718-541-43	103	718-702-65	113
718-402-10	91	718-452-15	93	718-542-13	104	718-702-73	113
718-402-11	91	718-452-25	93	718-542-23	104	718-702-75	113
718-402-12	91	718-462-15	93	718-542-33	104	718-702-83	113
718-402-14	91	718-462-25	93	718-542-43	104	718-702-85	113
718-402-15	91	718-501-01	103	718-701-03	112	718-741-13	114
718-402-21	91	718-501-02	103	718-701-05	112	718-741-14	114
718-402-22	91	718-501-10	103	718-701-11	114	718-741-15	114
718-402-24	91	718-501-11	103	718-701-12	114	718-741-23	114
718-402-25	91	718-501-12	103	718-701-14	114	718-741-24	114
718-402-31	91	718-501-14	103	718-701-15	114	718-741-25	114
718-402-32	91	718-501-15	103	718-701-21	114	718-741-33	114
718-402-34	91	718-501-21	103	718-701-22	114	718-741-34	114
718-402-35	91	718-501-22	103	718-701-24	114	718-741-35	114
718-402-41	91	718-501-24	103	718-701-25	114	718-741-43	114
718-402-42	91	718-501-25	103	718-701-31	114	718-741-44	114
718-402-44	91	718-501-31	103	718-701-32	114	718-741-45	114
718-402-45	91	718-501-32	103	718-701-34	114	718-741-60	112
718-402-50	91	718-501-34	103	718-701-35	114	718-741-65	112
718-441-01	89	718-501-35	103	718-701-41	114	718-741-80	112
718-441-10	89	718-501-41	103	718-701-42	114	718-741-85	112
718-441-13	89	718-501-42	103	718-701-44	114	718-742-13	115
718-441-14	89	718-501-44	103	718-701-45	114	718-742-14	115
718-441-15	89	718-501-45	103	718-701-63	112	718-742-15	115
718-441-23	89	718-501-50	103	718-701-65	112	718-742-23	115
718-441-24	89	718-502-01	104	718-701-73	112	718-742-24	115
718-441-25	89	718-502-02	104	718-701-75	112	718-742-25	115
718-441-33	89	718-502-10	104	718-701-83	112	718-742-33	115
718-441-34	89	718-502-11	104	718-701-85	112	718-742-34	115
718-441-35	89	718-502-12	104	718-702-03	113	718-742-35	115
718-441-43	89	718-502-14	104	718-702-05	113	718-742-43	115
718-441-44	89	718-502-15	104	718-702-11	115	718-742-44	115
718-441-45	89	718-502-21	104	718-702-12	115	718-742-45	115
718-441-50	89	718-502-22	104	718-702-14	115	718-742-60	113
718-442-01	91	718-502-24	104	718-702-15	115	718-742-65	113
718-442-10	91	718-502-25	104	718-702-21	115	718-742-80	113
718-442-13	91	718-502-31	104	718-702-22	115	718-742-85	113

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
718-901-01	82	718-941-35	82	722-102-32	65	722-301-24	95
718-901-10	82	718-941-43	82	722-102-34	65	722-301-25	95
718-901-11	82	718-941-44	82	722-102-35	65	722-301-31	95
718-901-12	82	718-941-45	82	722-102-41	65	722-301-32	95
718-901-14	82	718-941-50	82	722-102-42	65	722-301-33	100
718-901-15	82	718-942-01	84	722-102-44	65	722-301-34	95
718-901-21	82	718-942-10	84	722-102-45	65	722-301-35	95
718-901-22	82	718-942-13	84	722-141-13	64	722-301-41	95
718-901-24	82	718-942-14	84	722-141-23	64	722-301-42	95
718-901-25	82	718-942-15	84	722-141-33	64	722-301-43	100
718-901-31	82	718-942-23	84	722-141-43	64	722-301-44	95
718-901-32	82	718-942-24	84	722-142-13	65	722-301-45	95
718-901-34	82	718-942-25	84	722-142-23	65	722-301-50	95
718-901-35	82	718-942-33	84	722-142-33	65	722-302-01	97
718-901-41	82	718-942-34	84	722-142-43	65	722-302-10	97
718-901-42	82	718-942-35	84	722-205-01	80	722-302-11	97
718-901-44	82	718-942-43	84	722-205-10	80	722-302-12	97
718-901-45	82	718-942-44	84	722-205-11	80	722-302-14	97
718-901-50	82	718-942-45	84	722-205-12	80	722-302-15	97
718-902-01	84	718-942-50	84	722-205-13	80	722-302-21	97
718-902-10	84	722-101-01	64	722-205-14	80	722-302-22	97
718-902-11	84	722-101-10	64	722-205-15	80	722-302-24	97
718-902-12	84	722-101-11	64	722-205-21	80	722-302-25	97
718-902-14	84	722-101-12	64	722-205-22	80	722-302-31	97
718-902-15	84	722-101-14	64	722-205-23	80	722-302-32	97
718-902-21	84	722-101-15	64	722-205-24	80	722-302-34	97
718-902-22	84	722-101-21	64	722-205-25	80	722-302-35	97
718-902-24	84	722-101-22	64	722-205-31	80	722-302-41	97
718-902-25	84	722-101-24	64	722-205-32	80	722-302-42	97
718-902-31	84	722-101-25	64	722-205-33	80	722-302-44	97
718-902-32	84	722-101-31	64	722-205-34	80	722-302-45	97
718-902-34	84	722-101-32	64	722-205-35	80	722-302-50	97
718-902-35	84	722-101-34	64	722-205-41	80	722-305-01	99
718-902-41	84	722-101-35	64	722-205-42	80	722-305-10	99
718-902-42	84	722-101-41	64	722-205-43	80	722-305-11	99
718-902-44	84	722-101-42	64	722-205-44	80	722-305-12	99
718-902-45	84	722-101-44	64	722-205-45	80	722-305-13	99
718-902-50	84	722-101-45	64	722-205-50	80	722-305-14	99
718-941-01	82	722-102-01	65	722-301-01	95	722-305-15	99
718-941-10	82	722-102-11	65	722-301-10	95	722-305-21	99
718-941-13	82	722-102-12	65	722-301-11	95	722-305-22	99
718-941-14	82	722-102-14	65	722-301-12	95	722-305-23	99
718-941-15	82	722-102-15	65	722-301-13	100	722-305-24	99
718-941-23	82	722-102-21	65	722-301-14	95	722-305-25	99
718-941-24	82	722-102-22	65	722-301-15	95	722-305-31	99
718-941-25	82	722-102-24	65	722-301-21	95	722-305-32	99
718-941-33	82	722-102-25	65	722-301-22	95	722-305-33	99
718-941-34	82	722-102-31	65	722-301-23	100	722-305-34	99

Index numerisch

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
722-305-35	99	722-401-32	90	722-442-24	92	722-502-41	104
722-305-41	99	722-401-34	90	722-442-25	92	722-502-42	104
722-305-42	99	722-401-35	90	722-442-33	92	722-502-44	104
722-305-43	99	722-401-41	90	722-442-34	92	722-502-45	104
722-305-44	99	722-401-42	90	722-442-35	92	722-502-50	104
722-305-45	99	722-401-44	90	722-442-43	92	722-541-13	103
722-305-50	99	722-401-45	90	722-442-44	92	722-541-23	103
722-341-01	95	722-401-50	90	722-442-45	92	722-541-33	103
722-341-10	95	722-402-01	92	722-442-50	92	722-541-43	103
722-341-13	95	722-402-10	92	722-462-11	93	722-542-13	104
722-341-14	95	722-402-11	92	722-462-12	93	722-542-23	104
722-341-15	95	722-402-12	92	722-462-21	93	722-542-33	104
722-341-23	95	722-402-14	92	722-462-22	93	722-542-43	104
722-341-24	95	722-402-15	92	722-501-01	103	722-701-03	112
722-341-25	95	722-402-21	92	722-501-02	103	722-701-05	112
722-341-33	95	722-402-22	92	722-501-10	103	722-701-11	114
722-341-34	95	722-402-24	92	722-501-11	103	722-701-12	114
722-341-35	95	722-402-25	92	722-501-12	103	722-701-14	114
722-341-43	95	722-402-31	92	722-501-14	103	722-701-15	114
722-341-44	95	722-402-32	92	722-501-15	103	722-701-21	114
722-341-45	95	722-402-34	92	722-501-21	103	722-701-22	114
722-341-50	95	722-402-35	92	722-501-22	103	722-701-24	114
722-342-01	97	722-402-41	92	722-501-24	103	722-701-25	114
722-342-10	97	722-402-42	92	722-501-25	103	722-701-31	114
722-342-13	97	722-402-44	92	722-501-31	103	722-701-32	114
722-342-14	97	722-402-45	92	722-501-32	103	722-701-34	114
722-342-15	97	722-402-50	92	722-501-34	103	722-701-35	114
722-342-23	97	722-441-01	90	722-501-35	103	722-701-41	114
722-342-24	97	722-441-10	90	722-501-41	103	722-701-42	114
722-342-25	97	722-441-13	90	722-501-42	103	722-701-44	114
722-342-33	97	722-441-14	90	722-501-44	103	722-701-45	114
722-342-34	97	722-441-15	90	722-501-45	103	722-701-63	112
722-342-35	97	722-441-23	90	722-501-50	103	722-701-65	112
722-342-43	97	722-441-24	90	722-502-01	104	722-701-73	112
722-342-44	97	722-441-25	90	722-502-02	104	722-701-75	112
722-342-45	97	722-441-33	90	722-502-10	104	722-701-83	112
722-342-50	97	722-441-34	90	722-502-11	104	722-701-85	112
722-401-01	90	722-441-35	90	722-502-12	104	722-702-03	113
722-401-10	90	722-441-43	90	722-502-14	104	722-702-05	113
722-401-11	90	722-441-44	90	722-502-15	104	722-702-11	115
722-401-12	90	722-441-45	90	722-502-21	104	722-702-12	115
722-401-14	90	722-441-50	90	722-502-22	104	722-702-14	115
722-401-15	90	722-442-01	92	722-502-24	104	722-702-15	115
722-401-21	90	722-442-10	92	722-502-25	104	722-702-21	115
722-401-22	90	722-442-13	92	722-502-31	104	722-702-22	115
722-401-24	90	722-442-14	92	722-502-32	104	722-702-24	115
722-401-25	90	722-442-15	92	722-502-34	104	722-702-25	115
722-401-31	90	722-442-23	92	722-502-35	104	722-702-31	115

Index numerisch

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
722-702-32	115	722-901-12	83	722-941-45	83	724-091-00	136
722-702-34	115	722-901-14	83	722-941-50	83	724-091-51	130
722-702-35	115	722-901-15	83	722-942-01	85	724-092-00	136
722-702-41	115	722-901-21	83	722-942-10	85	724-092-51	130
722-702-42	115	722-901-22	83	722-942-13	85	724-093-00	136
722-702-44	115	722-901-24	83	722-942-14	85	724-093-51	130
722-702-45	115	722-901-25	83	722-942-15	85	724-094-00	136
722-702-63	113	722-901-31	83	722-942-23	85	724-094-51	130
722-702-65	113	722-901-32	83	722-942-24	85	724-095-00	136
722-702-73	113	722-901-34	83	722-942-25	85	724-095-51	130
722-702-75	113	722-901-35	83	722-942-33	85	724-100-51	55
722-702-83	113	722-901-41	83	722-942-34	85	724-101-51	55
722-702-85	113	722-901-42	83	722-942-35	85	724-102-51	54, 55
722-741-13	114	722-901-44	83	722-942-43	85	724-103-51	54, 55
722-741-14	114	722-901-45	83	722-942-44	85	724-106-00	141
722-741-15	114	722-901-50	83	722-942-45	85	724-107-00	141
722-741-23	114	722-902-01	85	722-942-50	85	724-156-00	138
722-741-24	114	722-902-10	85	723-020-00	133	724-157-00	138
722-741-25	114	722-902-11	85	723-021-00	133	724-160-00	140
722-741-33	114	722-902-12	85	723-022-00	133	724-161-00	140
722-741-34	114	722-902-14	85	723-023-00	133	724-222-00	139
722-741-35	114	722-902-15	85	723-024-00	133	724-222-51	132
722-741-43	114	722-902-21	85	723-025-00	133	724-223-00	139
722-741-44	114	722-902-22	85	723-026-00	103, 133	724-223-51	132
722-741-45	114	722-902-24	85	723-027-00	103, 133	724-240-00	139
722-741-60	112	722-902-25	85	723-028-00	103, 104, 133	724-240-51	132
722-741-65	112	722-902-31	85	723-029-00	103, 104, 133	724-241-00	139
722-741-80	112	722-902-32	85	723-030-00	104, 133	724-241-51	132
722-741-85	112	722-902-34	85	723-031-00	104, 133	724-600-00	140
722-742-13	115	722-902-35	85	723-032-00	103, 104, 133	724-601-00	140
722-742-14	115	722-902-41	85	723-033-00	103, 104, 133	724-602-00	140
722-742-15	115	722-902-42	85	724-006-00	141	724-603-00	140
722-742-23	115	722-902-44	85	724-007-00	141	724-604-00	140
722-742-24	115	722-902-45	85	724-018-00	138	724-605-00	140
722-742-25	115	722-902-50	85	724-018-51	132	724-606-00	141
722-742-33	115	722-941-01	83	724-019-00	138	724-607-00	136
722-742-34	115	722-941-10	83	724-019-51	132	724-607-51	130
722-742-35	115	722-941-13	83	724-048-00	136	724-608-00	136
722-742-43	115	722-941-14	83	724-048-51	131	724-608-51	130
722-742-44	115	722-941-15	83	724-049-00	136	724-609-00	136
722-742-45	115	722-941-23	83	724-049-51	131	724-609-51	130
722-742-60	113	722-941-24	83	724-056-00	138	724-610-00	136
722-742-65	113	722-941-25	83	724-057-00	138	724-610-51	130
722-742-80	113	722-941-33	83	724-060-00	140	724-611-00	136
722-742-85	113	722-941-34	83	724-061-00	140	724-611-51	130
722-901-01	83	722-941-35	83	724-090-00	136	724-612-00	136
722-901-10	83	722-941-43	83	724-090-50	130	724-612-51	130
722-901-11	83	722-941-44	83	724-090-51	130	724-613-00	140

Index numerisch

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
724-614-00	140	728-012-00	142	728-501-00	229	758-375-00	232
724-615-00	140	728-013-00	243	728-502-00	229	758-380-00	232
724-616-00	138	728-014-00	243	728-503-00	229	758-861-00	232
724-617-00	138	728-015-00	243	728-504-00	229	758-862-00	232
724-618-00	140	728-016-00	142	728-505-00	229	765-200-00	202, 219
724-619-00	140	728-017-00	142	740-000-00	268	765-201-00	202, 219
724-620-00	140	728-020-00	242	740-010-00	268	765-201-01	202, 219
724-621-00	140	728-021-00	242, 243	740-019-00	268	765-202-00	202, 219
725-164-00	136	728-022-00	242, 243	740-020-00	268	765-202-01	202, 219
725-164-50	130	728-023-00	242, 243	740-021-00	269	765-203-00	202, 219
725-165-00	136	728-024-00	242, 243	741-040-00	269	765-300-00	202, 219
725-165-50	130	728-025-00	242, 243	741-045-00	269	765-301-00	202, 219
725-166-00	136	728-026-00	242, 243	741-049-00	268	765-301-01	202, 219
725-166-50	130	728-100-01	243	741-050-00	269	765-302-00	202, 219
725-167-00	136	728-101-01	243	741-055-00	269	765-302-01	202, 219
725-167-50	130	728-102-01	243	741-060-00	269	765-303-00	202, 219
725-168-00	136	728-110-00	142	741-150-00	269	766-000-00	239, 244, 245, 416
725-168-50	130	728-111-00	142	748-009-00	270	766-003-10	123
725-169-00	136	728-112-00	142	748-114-00	270	766-014-00	200, 212
725-169-50	130	728-113-00	142	750-001-51	122	766-015-00	200, 212
725-170-00	136	728-114-00	142	750-002-00	143	766-018-00	200, 212
725-170-50	130	728-200-00	244	750-002-51	122	766-019-00	200, 212
725-171-00	136	728-201-00	244	750-003-51	122	766-032-00	200, 212
725-171-50	130	728-202-00	244	750-101-00	143	766-033-00	200, 212
725-203-00	134	728-203-00	244	750-201-00	143	766-034-00	200, 212
725-203-51	128	728-204-00	244	750-401-00	143	766-036-00	200, 212
725-206-00	134	728-205-00	244	750-602-00	143	766-037-00	200, 212
726-011-00	134	728-206-00	244	750-602-10	143, 150, 160, 165, 166, 169, 171	766-039-00	200, 212
727-265-00	139	728-207-00	244			766-050-00	200, 212
727-266-00	139	728-208-00	244	750-602-50	122	766-051-00	200, 212
727-267-00	140	728-209-00	244	750-603-00	143	766-052-00	200, 212
727-268-00	140	728-210-00	244	750-603-10	143	766-053-00	200, 212
727-269-00	140	728-211-00	244	751-000-00	230	766-054-00	200, 212
727-270-00	140	728-212-00	244	751-001-00	230	766-055-00	200, 212
727-365-00	139	728-213-00	244	751-003-00	230	766-056-00	200, 212
727-366-00	139	728-214-00	244	751-004-00	230	766-057-00	200, 212
727-367-00	139	728-215-00	244	751-005-00	230	766-058-00	200, 208
727-368-00	139	728-216-00	245	758-160-00	231	766-059-00	200, 208
727-385-00	139	728-217-00	245	758-161-00	231	766-060-00	200, 210
727-386-00	139	728-218-00	245	758-165-00	231	766-061-00	200, 210
727-387-00	139	728-219-00	245	758-175-00	231	766-062-00	200, 210
727-388-00	139	728-220-00	245	758-180-00	231	766-063-00	200, 210
728-005-00	243	728-221-00	245	758-360-00	232	766-064-00	200, 210
728-006-00	243	728-222-00	245	758-361-00	232, 298, 299	766-065-00	200, 210
728-007-00	243	728-400-00	245	758-362-00	232	766-066-00	200, 210
728-008-00	243	728-401-00	245	758-365-00	232	766-067-00	200, 210
728-010-00	142	728-402-00	245	758-367-00	232	766-068-00	200, 210
728-011-00	142	728-500-00	229	758-368-00	232	766-069-00	200, 210

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
766-070-00	200, 210	766-122-01	202, 217	766-250-00	201, 213	766-700-00	201, 215
766-071-00	200, 210	766-123-00	202, 217	766-251-00	201, 213	766-701-00	201, 215
766-072-00	200, 210	766-123-01	202, 217	766-252-00	201, 213	766-702-00	201, 215
766-073-00	200, 210	766-124-00	202, 217	766-253-00	201, 214	766-703-00	201, 215
766-074-00	200, 210	766-125-00	202, 217	766-254-00	201, 214	766-704-00	201, 215
766-075-00	200, 210	766-130-00	202, 217	766-255-00	201, 214	766-705-00	201, 215
766-076-00	200, 210	766-131-00	202, 217	766-256-00	201, 214	766-706-00	201, 215
766-077-00	200, 210	766-132-00	202, 217	766-257-00	201, 214	766-707-00	201, 215
766-078-00	200, 210	766-132-01	202, 217	766-258-00	201, 214	766-710-00	201, 215
766-079-00	200, 210	766-133-00	202, 217	766-259-00	201, 214	766-711-00	201, 215
766-080-00	200, 208	766-133-01	202, 217	766-260-00	201, 214	766-712-00	201, 215
766-080-01	200, 208	766-160-00	200, 211	766-261-00	201, 214	766-713-00	201, 215
766-081-00	200, 208	766-161-00	200, 211	766-262-00	201, 214	766-714-00	201, 215
766-081-01	200, 208	766-162-00	200, 211	766-263-00	201, 214	766-715-00	201, 215
766-082-00	200, 208	766-163-00	200, 211	766-264-00	201, 214	766-716-00	201, 215
766-082-01	200, 208	766-164-00	200, 211	766-300-00	202, 218	766-717-00	201, 215
766-083-00	200, 208	766-165-00	200, 211	766-300-01	202, 218	766-718-00	201, 215
766-083-01	200, 208	766-166-00	200, 211	766-301-00	202, 218	766-719-00	201, 215
766-084-00	200, 208	766-167-00	200, 211	766-301-01	202, 218	766-720-00	201, 215
766-084-01	200, 208	766-168-00	200, 211	766-400-00	202, 218	766-721-00	201, 215
766-085-00	200, 208	766-169-00	200, 211	766-400-01	202, 218	766-760-00	56
766-085-01	200, 208	766-170-00	200, 211	766-401-00	202, 218	766-761-00	56
766-086-00	200, 210	766-171-00	200, 211	766-401-01	202, 218	766-762-00	56
766-087-00	200, 210	766-172-00	200, 211	766-600-00	205, 226	766-763-00	56
766-088-00	200, 209	766-173-00	200, 211	766-601-00	205, 226	766-764-00	56
766-088-01	200, 209	766-174-00	200, 211	766-602-00	205, 226	766-765-00	56
766-089-00	200, 209	766-175-00	200, 211	766-603-00	205, 226	766-766-00	56
766-089-01	200, 209	766-176-00	200, 211	766-604-00	205, 226	766-767-00	56
766-090-00	200, 209	766-177-00	200, 211	766-605-00	203, 222	766-768-00	56
766-090-01	200, 209	766-178-00	200, 211	766-606-00	203, 222	766-769-00	56
766-091-00	200, 209	766-179-00	200, 211	766-607-00	203, 222	766-770-00	56
766-091-01	200, 209	766-180-00	201, 213	766-608-00	203, 222	766-771-00	56
766-092-00	200, 209	766-181-00	201, 213	766-609-00	203, 222	766-800-00	201, 216
766-093-00	200, 209	766-182-00	201, 213	766-610-00	203, 222	766-801-00	201, 216
766-094-00	206, 227	766-183-00	201, 213	766-611-00	203, 222	766-802-00	201, 216
766-095-00	206, 227	766-184-00	201, 213	766-612-00	203, 222	766-803-00	201, 216
766-100-00	202, 218	766-185-00	201, 213	766-613-00	203, 222	766-804-00	201, 216
766-100-01	202, 218	766-186-00	201, 213	766-614-00	203, 222	766-805-00	201, 216
766-101-00	202, 218	766-187-00	201, 213	766-615-00	203, 222	766-806-00	201, 216
766-101-01	202, 218	766-188-00	201, 213	766-616-00	203, 222	766-807-00	201, 216
766-103-00	202, 218	766-196-00	206, 227	766-617-00	203, 222	766-808-00	201, 216
766-104-00	202, 218	766-200-00	202, 218	766-618-00	203, 222	766-809-00	201, 216
766-105-00	202, 218	766-200-01	202, 218	766-619-00	203, 222	766-810-00	201, 216
766-120-00	202, 217	766-201-00	202, 218	766-620-00	203, 222	766-811-00	201, 216
766-120-01	202, 217	766-201-01	202, 218	766-629-00	205, 226	766-812-00	201, 216
766-121-00	202, 217	766-203-00	202, 218	766-631-00	203, 222	766-813-00	201, 216
766-121-01	202, 217	766-204-00	202, 218	766-632-00	203, 222	766-814-00	201, 216
766-122-00	202, 217	766-205-00	202, 218	766-633-00	205, 226	766-815-00	201, 216

Index numerisch

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
766-816-00	201, 216	768-036-00	230	769-008-00	202, 221	774-002-01	274
766-817-00	201, 216	768-037-00	231	769-009-00	202, 221	774-100-01	274
766-818-00	201, 216	768-038-00	203, 224	769-010-00	202, 221	774-200-01	274
766-819-00	201, 216	768-039-00	203, 224	769-011-00	202, 221	774-220-01	58, 274
767-100-00	202, 220	768-040-00	203, 224	769-012-00	202, 221	774-221-01	58, 274, 298
767-100-01	202, 220	768-041-00	203, 224	769-013-00	202, 221	774-226-01	274
767-101-00	202, 220	768-100-00	200, 208	769-014-00	202, 221	774-229-01	274
767-101-01	202, 220	768-100-01	200, 208	769-015-00	202, 221	774-231-01	274
767-102-00	202, 220	768-101-00	200, 208	769-016-00	202, 221	774-232-01	274
767-103-00	202, 220	768-101-01	200, 208	769-017-00	202, 221	774-233-01	274
767-103-01	202, 220	768-102-00	200, 209	769-018-00	202, 221	774-235-01	274
767-104-00	202, 220	768-102-01	200, 209	769-019-00	202, 221	774-236-01	117, 274
767-105-00	202, 220	768-103-00	200, 209	769-100-00	202, 221	774-300-00	270
767-105-01	202, 220	768-103-01	200, 209	769-101-00	202, 221	774-549-01	275
767-106-00	202, 220	768-104-00	200, 209	769-200-00	202, 221	774-551-02	275
767-107-00	202, 220	768-104-01	200, 209	769-201-00	202, 221	774-552-01	275
767-200-00	202, 220	768-105-00	200, 209	772-000-00	273	774-553-01	275
767-200-01	202, 220	768-105-01	200, 209	772-100-00	273	774-554-01	275
767-201-00	202, 220	768-106-00	200, 209	772-103-00	272	774-555-01	275
767-201-01	202, 220	768-106-01	200, 209	772-104-00	272	774-556-01	275
767-202-00	202, 220	768-107-00	200, 209	772-106-00	272	774-557-01	275
767-203-00	202, 220	768-107-01	200, 209	772-107-00	272	774-558-01	275
767-203-01	202, 220	768-108-00	200, 209	772-109-00	272	774-559-01	275
767-204-00	202, 220	768-108-01	200, 209	772-113-00	272	774-560-01	275
767-205-00	202, 220	768-109-00	200, 209	772-114-00	272	774-561-04	275
767-205-01	202, 220	768-109-01	200, 209	772-116-00	272	774-563-01	117, 275
767-206-00	202, 220	768-110-00	200, 209	772-117-00	272	790-100-00	81
767-207-00	202, 220	768-110-01	200, 209	772-119-00	272	790-101-00	81
768-014-00	203, 223	768-111-00	200, 209	772-123-00	272	790-102-00	76
768-015-00	203, 223	768-111-01	200, 209	772-124-00	272	790-103-00	76
768-016-00	203, 223	768-112-00	200, 210	772-125-00	272	790-104-00	76
768-017-00	203, 223	768-113-00	200, 210	772-126-00	272	790-105-00	76
768-018-00	203, 223	768-114-00	200, 210	772-127-00	272	790-106-00	76, 78, 79
768-019-00	203, 223	768-115-00	200, 210	772-200-00	273	790-107-00	76, 78, 79
768-020-00	203, 223	768-116-00	200, 211	772-203-02	270	790-108-00	76
768-021-00	203, 223	768-117-00	200, 211	772-204-02	270	790-109-00	76
768-022-00	203, 223	768-118-00	200, 211	772-205-02	270	790-110-00	76, 78, 79
768-023-00	203, 223	768-119-00	200, 211	772-208-02	270	790-111-00	76
768-026-00	203, 224	768-120-00	200, 211	772-210-02	270	790-112-00	81
768-027-00	203, 224	768-121-00	200, 211	772-313-01	273	790-113-00	81
768-028-00	203, 224	769-000-00	202, 220	772-314-01	273	790-114-00	77
768-029-00	203, 224	769-001-00	202, 220	772-316-01	273	790-115-00	77
768-030-00	203, 224	769-002-00	202, 220	772-317-01	273	790-116-00	77
768-031-00	203, 224	769-003-00	202, 220	772-323-01	273	790-117-00	77
768-032-00	203, 224	769-004-00	202, 220	772-324-01	273	790-118-00	77
768-033-00	203, 224	769-005-00	202, 220	772-325-01	273	790-119-00	77
768-034-00	203, 224	769-006-00	202, 220	772-326-01	273	790-120-00	77
768-035-00	203, 224	769-007-00	202, 220	772-400-00	272	790-121-00	77

Index numerisch

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
790-122-00	77	790-228-02	101	790-312-00	88	818-111-46	129
790-123-00	77	790-229-02	101	790-313-00	88	818-112-10	135
790-128-00	78, 79	790-230-02	101	790-314-00	87	818-112-16	129
790-130-00	78, 79	790-231-02	101	790-315-00	87	818-112-20	135
790-131-00	78, 79	790-234-02	101	790-316-00	87	818-112-26	129
790-132-00	78, 79	790-235-02	101	790-317-00	87	818-112-30	135
790-133-00	78, 79	790-236-02	101	790-318-00	87	818-112-36	129
790-134-00	78, 79	790-237-02	101	790-319-00	87	818-112-40	135
790-135-00	78, 79	790-243-02	101	790-320-00	87	818-112-46	129
790-136-00	78	790-244-02	101	790-321-00	87	818-121-10	137
790-137-00	78	790-249-02	101	790-322-00	87	818-121-16	131
790-138-00	78, 79	790-250-02	101	790-323-00	87	818-121-20	137
790-139-00	78, 79	790-251-02	101	790-341-00	86	818-121-26	131
790-140-00	78	790-252-02	101	790-342-00	86	818-121-36	131
790-141-00	76	790-253-02	101	790-343-00	86	818-121-46	131
790-142-00	76	790-254-02	101	790-344-00	86	818-122-10	137
790-143-00	76	790-255-02	101	790-345-00	86	818-122-16	131
790-144-00	76	790-256-02	101	790-346-00	86	818-122-20	137
790-145-00	76	790-257-02	101	790-347-00	87	818-122-26	131
790-146-00	76	790-258-02	101	790-348-00	87	818-122-36	131
790-147-00	77	790-259-02	101	790-349-00	87	818-122-46	131
790-148-00	77	790-260-02	101	790-350-00	87	818-125-30	137
790-149-00	77	790-261-02	101	790-351-00	87	818-125-40	137
790-150-00	77	790-262-02	101	790-352-00	87	818-131-10	140, 150, 151, 155, 157
790-151-00	77	790-263-02	101	790-363-00	86		
790-152-00	77	790-264-02	101	790-364-00	86	818-131-20	140, 150, 152, 155, 158
790-155-00	81	790-265-02	101	790-365-00	87		
790-156-00	81	790-266-02	101	790-366-00	87	818-132-10	140
790-157-00	81	790-274-02	101	790-450-00	54, 55	818-132-20	140
790-158-00	81	790-275-02	101	790-451-00	54, 55	818-141-10	139
790-163-00	76	790-278-02	101	790-452-00	54, 55	818-141-20	139
790-164-00	76	790-279-02	101	790-453-00	54, 55	818-147-30	139
790-165-00	77	790-290-02	102	790-602-02	102	818-147-40	139
790-166-00	77	790-291-02	102	790-603-02	102	818-151-30	138, 150, 154, 156, 160
790-204-02	101	790-294-02	102	790-606-02	102		
790-205-02	101	790-295-02	102	790-607-02	102	818-151-40	138, 150, 153, 156, 159
790-206-02	101, 165, 169	790-300-00	88	799-202-00	122		
790-208-02	101	790-301-00	88	799-206-00	122	818-152-30	138
790-209-02	101	790-302-00	86	812-038-00	176	818-152-40	138
790-210-02	101, 165, 170	790-303-00	86	813-045-00	176	818-211-16	129
790-211-02	101, 166, 171	790-304-00	86	814-045-00	176	818-211-26	129
790-216-02	101	790-305-00	86	818-111-10	135	818-211-36	129
790-217-02	101	790-306-00	86	818-111-16	129	818-211-46	129
790-218-02	101, 165, 169	790-307-00	86	818-111-20	135	818-212-10	135
790-220-02	101	790-308-00	86	818-111-26	129	818-212-16	129
790-221-02	101	790-309-00	86	818-111-30	135	818-212-20	135
790-222-02	101, 165, 170	790-310-00	86	818-111-36	129	818-212-26	129
790-223-02	101, 166, 171	790-311-00	86	818-111-40	135	818-212-36	129

Index numerisch

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
818-212-37	129	818-413-47	128	822-142-20	139	822-224-30	137
818-212-46	129	818-415-17	128	822-147-30	139	822-224-40	137
818-212-47	129	818-415-27	128	822-147-40	139	822-227-10	137
818-215-16	129	818-415-37	128	822-151-30	138, 150, 154, 156, 160	822-227-20	137
818-215-26	129	818-415-47	128	822-151-40	138, 150, 153, 156, 159	822-411-17	128
818-215-36	129	818-512-30	135			822-411-27	128
818-215-46	129	818-512-40	135	822-152-30	138	822-411-37	128
818-217-10	135	822-111-10	135	822-152-40	138	822-411-47	128
818-217-20	135	822-111-16	129	822-211-16	129	822-412-17	128
818-217-30	135	822-111-20	135	822-211-26	129	822-412-27	128
818-217-40	135	822-111-26	129	822-211-36	129	822-412-36	128
818-218-30	135	822-111-30	135	822-211-46	129	822-412-37	128
818-218-40	135	822-111-36	129	822-212-10	135	822-412-46	128
818-219-36	129	822-111-40	135	822-212-16	129	822-412-47	128
818-219-46	129	822-111-46	129	822-212-20	135	822-415-17	128
818-221-10	137	822-112-10	135	822-212-26	129	822-415-27	128
818-221-16	131	822-112-16	129	822-212-36	129	822-415-37	128
818-221-20	137	822-112-20	135	822-212-37	129	822-415-47	128
818-221-26	131	822-112-26	129	822-212-46	129	822-512-30	135
818-221-30	137	822-112-30	135	822-212-47	129	822-512-40	135
818-221-36	131	822-112-36	129	822-215-16	129	831-601-00	176
818-221-40	137	822-112-40	135	822-215-26	129	831-603-00	176
818-221-46	131	822-112-46	129	822-215-36	129	831-606-00	176
818-222-10	137	822-121-10	137	822-215-46	129	831-701-00	176
818-222-16	131	822-121-16	131	822-217-10	135	831-703-00	176
818-222-20	137	822-121-20	137	822-217-20	135	850-101-00	174
818-222-26	131	822-121-26	131	822-217-30	135	850-102-00	174
818-222-30	137	822-121-36	131	822-217-40	135	850-103-00	174
818-222-36	131	822-121-46	131	822-218-30	135	850-104-00	174
818-222-40	137	822-122-10	137	822-218-40	135	850-105-00	174
818-222-46	131	822-122-16	131	822-219-36	129	850-106-00	174
818-224-30	137	822-122-20	137	822-219-46	129	850-107-00	174
818-224-40	137	822-122-26	131	822-221-10	137	850-108-00	174
818-227-10	137	822-122-36	131	822-221-16	131	850-109-00	174
818-227-20	137	822-122-46	131	822-221-20	137	850-110-00	174
818-411-17	128	822-125-30	137	822-221-26	131	850-111-00	174
818-411-27	128	822-125-40	137	822-221-30	137	850-112-00	174
818-411-37	128	822-131-10	140, 150, 151, 155, 157	822-221-36	131	850-113-00	174
818-411-47	128			822-221-40	137	850-114-00	174
818-412-17	128	822-131-20	140, 150, 152, 155, 158	822-221-46	131	850-115-00	174
818-412-27	128			822-222-10	137	850-116-00	174
818-412-36	128	822-132-10	140	822-222-16	131	850-117-00	174
818-412-37	128	822-132-20	140	822-222-20	137	850-118-00	174
818-412-46	128	822-137-10	140	822-222-26	131	850-119-00	174
818-412-47	128	822-137-20	140	822-222-30	137	850-120-00	174
818-413-17	128	822-141-10	139	822-222-36	131	850-121-00	174
818-413-27	128	822-141-20	139	822-222-40	137	850-122-00	174
818-413-37	128	822-142-10	139	822-222-46	131	850-123-00	174

Index numerisch

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
850-124-00	174	860-107-18	169	860-123-18	169	861-106-00	170, 171
850-125-00	174	860-107-22	169	860-123-22	169	861-106-18	170
851-101-00	175	860-108-00	169	860-124-00	169	861-106-22	170
851-102-00	175	860-108-18	169	860-124-18	169	861-107-00	170, 171
851-103-00	175	860-108-22	169	860-124-22	169	861-107-18	170
851-104-00	175	860-109-00	169	860-125-00	169	861-107-22	170
851-105-00	175	860-109-18	169	860-125-18	169	861-108-00	170, 171
851-106-00	175	860-109-22	169	860-125-22	169	861-108-18	170
851-107-00	175	860-110-00	169	860-126-00	169	861-108-22	170
851-108-00	175	860-110-18	169	860-126-18	169	861-109-00	170, 171
851-109-00	175	860-110-22	169	860-126-22	169	861-109-18	170
851-110-00	175	860-111-00	169	860-127-00	169	861-109-22	170
851-111-00	175	860-111-18	169	860-127-18	169	861-110-00	170, 171
851-112-00	175	860-111-22	169	860-127-22	169	861-110-18	170
851-113-00	175	860-112-00	169	860-128-00	169	861-110-22	170
851-114-00	175	860-112-18	169	860-128-18	169	861-111-00	170, 171
851-115-00	175	860-112-22	169	860-128-22	169	861-111-18	170
851-116-00	175	860-113-00	169	860-129-00	169	861-111-22	170
851-117-00	175	860-113-18	169	860-129-18	169	861-112-00	170, 171
851-118-00	175	860-113-22	169	860-129-22	169	861-112-18	170
851-119-00	175	860-114-00	169	860-130-00	169	861-112-22	170
851-120-00	175	860-114-18	169	860-130-18	169	861-113-00	170, 171
851-121-00	175	860-114-22	169	860-130-22	169	861-113-18	170
855-050-00	168	860-115-00	169	860-131-00	169	861-113-22	170
855-150-00	168	860-115-18	169	860-131-18	169	861-114-00	170, 171
857-042-00	168	860-115-22	169	860-131-22	169	861-114-18	170
857-150-00	168	860-116-00	169	860-132-00	169	861-114-22	170
860-064-18	165	860-116-18	169	860-132-18	169	861-115-00	170, 171
860-064-22	165	860-116-22	169	860-132-22	169	861-115-18	170
860-101-00	169	860-117-00	169	860-150-18	165	861-115-22	170
860-101-18	169	860-117-18	169	860-150-22	165	861-116-00	170, 171
860-101-22	169	860-117-22	169	861-064-18	165	861-116-18	170
860-102-00	169	860-118-00	169	861-064-22	165	861-116-22	170
860-102-18	169	860-118-18	169	861-101-00	170, 171	861-117-00	170, 171
860-102-22	169	860-118-22	169	861-101-18	170	861-117-18	170
860-103-00	169	860-119-00	169	861-101-22	170	861-117-22	170
860-103-18	169	860-119-18	169	861-102-00	170, 171	861-118-00	170, 171
860-103-22	169	860-119-22	169	861-102-18	170	861-118-18	170
860-104-00	169	860-120-00	169	861-102-22	170	861-118-22	170
860-104-18	169	860-120-18	169	861-103-00	170, 171	861-119-00	170, 171
860-104-22	169	860-120-22	169	861-103-18	170	861-119-18	170
860-105-00	169	860-121-00	169	861-103-22	170	861-119-22	170
860-105-18	169	860-121-18	169	861-104-00	170, 171	861-120-00	170, 171
860-105-22	169	860-121-22	169	861-104-18	170	861-120-18	170
860-106-00	169	860-122-00	169	861-104-22	170	861-120-22	170
860-106-18	169	860-122-18	169	861-105-00	170, 171	861-121-00	170, 171
860-106-22	169	860-122-22	169	861-105-18	170	861-121-18	170
860-107-00	169	860-123-00	169	861-105-22	170	861-121-22	170

Index numerisch

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
861-122-00	170, 171	862-106-22	171	862-130-22	171	871-004-00	173
861-122-18	170	862-107-18	171	862-131-18	171	871-005-00	173
861-122-22	170	862-107-22	171	862-131-22	171	871-006-00	173
861-123-00	170, 171	862-108-18	171	862-132-18	171	871-007-00	173
861-123-18	170	862-108-22	171	862-132-22	171	871-008-00	173
861-123-22	170	862-109-18	171	862-150-18	166	871-009-00	173
861-124-00	170, 171	862-109-22	171	862-150-22	166	871-010-00	173
861-124-18	170	862-110-18	171	864-064-00	165	871-011-00	173
861-124-22	170	862-110-22	171	864-150-00	165	871-012-00	173
861-125-00	170, 171	862-111-18	171	864-300-00	165	871-013-00	173
861-125-18	170	862-111-22	171	865-064-00	166	871-014-00	173
861-125-22	170	862-112-18	171	865-150-00	166	871-015-00	173
861-126-00	170, 171	862-112-22	171	865-300-00	166	871-016-00	173
861-126-18	170	862-113-18	171	870-001-00	172	871-017-00	173
861-126-22	170	862-113-22	171	870-002-00	172	871-018-00	173
861-127-00	170, 171	862-114-18	171	870-003-00	172	871-019-00	173
861-127-18	170	862-114-22	171	870-004-00	172	871-020-00	173
861-127-22	170	862-115-18	171	870-005-00	172	871-021-00	173
861-128-00	170, 171	862-115-22	171	870-006-00	172	871-022-00	173
861-128-18	170	862-116-18	171	870-007-00	172	871-023-00	173
861-128-22	170	862-116-22	171	870-008-00	172	871-024-00	173
861-129-00	170, 171	862-117-18	171	870-009-00	172	871-025-00	173
861-129-18	170	862-117-22	171	870-010-00	172	871-026-00	173
861-129-22	170	862-118-18	171	870-011-00	172	871-027-00	173
861-130-00	170, 171	862-118-22	171	870-012-00	172	871-028-00	173
861-130-18	170	862-119-18	171	870-013-00	172	871-029-00	173
861-130-22	170	862-119-22	171	870-014-00	172	871-030-00	173
861-131-00	170, 171	862-120-18	171	870-015-00	172	871-031-00	173
861-131-18	170	862-120-22	171	870-016-00	172	871-032-00	173
861-131-22	170	862-121-18	171	870-017-00	172	872-064-00	167
861-132-00	170, 171	862-121-22	171	870-018-00	172	872-150-00	167
861-132-18	170	862-122-18	171	870-019-00	172	873-064-00	167
861-132-22	170	862-122-22	171	870-020-00	172	873-150-00	167
861-150-18	165	862-123-18	171	870-021-00	172	878-001-00	151
861-150-22	165	862-123-22	171	870-022-00	172	878-002-00	151
862-064-18	166	862-124-18	171	870-023-00	172	878-003-00	151
862-064-22	166	862-124-22	171	870-024-00	172	878-004-00	151
862-101-18	171	862-125-18	171	870-025-00	172	878-005-00	151
862-101-22	171	862-125-22	171	870-026-00	172	878-006-00	151
862-102-18	171	862-126-18	171	870-027-00	172	878-007-00	151
862-102-22	171	862-126-22	171	870-028-00	172	878-008-00	151
862-103-18	171	862-127-18	171	870-029-00	172	878-009-00	151
862-103-22	171	862-127-22	171	870-030-00	172	878-010-00	151
862-104-18	171	862-128-18	171	870-031-00	172	878-011-00	151
862-104-22	171	862-128-22	171	870-032-00	172	878-012-00	151
862-105-18	171	862-129-18	171	871-001-00	173	878-013-00	151
862-105-22	171	862-129-22	171	871-002-00	173	878-014-00	151
862-106-18	171	862-130-18	171	871-003-00	173	878-015-00	151

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
878-016-00	151	878-313-22	151	878-350-22	150	879-304-22	152
878-017-00	151	878-314-18	151	878-364-18	150	879-305-18	152
878-018-00	151	878-314-22	151	878-364-22	150	879-305-22	152
878-019-00	151	878-315-18	151	879-001-00	152	879-306-18	152
878-020-00	151	878-315-22	151	879-002-00	152	879-306-22	152
878-021-00	151	878-316-18	151	879-003-00	152	879-307-18	152
878-022-00	151	878-316-22	151	879-004-00	152	879-307-22	152
878-023-00	151	878-317-18	151	879-005-00	152	879-308-18	152
878-024-00	151	878-317-22	151	879-006-00	152	879-308-22	152
878-025-00	151	878-318-18	151	879-007-00	152	879-309-18	152
878-026-00	151	878-318-22	151	879-008-00	152	879-309-22	152
878-027-00	151	878-319-18	151	879-009-00	152	879-310-18	152
878-028-00	151	878-319-22	151	879-010-00	152	879-310-22	152
878-029-00	151	878-320-18	151	879-011-00	152	879-311-18	152
878-030-00	151	878-320-22	151	879-012-00	152	879-311-22	152
878-031-00	151	878-321-18	151	879-013-00	152	879-312-18	152
878-032-00	151	878-321-22	151	879-014-00	152	879-312-22	152
878-033-00	151	878-322-18	151	879-015-00	152	879-313-18	152
878-034-00	151	878-322-22	151	879-016-00	152	879-313-22	152
878-035-00	151	878-323-18	151	879-017-00	152	879-314-18	152
878-036-00	151	878-323-22	151	879-018-00	152	879-314-22	152
878-064-00	150	878-324-18	151	879-019-00	152	879-315-18	152
878-150-00	150	878-324-22	151	879-020-00	152	879-315-22	152
878-301-18	151	878-325-18	151	879-021-00	152	879-316-18	152
878-301-22	151	878-325-22	151	879-022-00	152	879-316-22	152
878-302-18	151	878-326-18	151	879-023-00	152	879-317-18	152
878-302-22	151	878-326-22	151	879-024-00	152	879-317-22	152
878-303-18	151	878-327-18	151	879-025-00	152	879-318-18	152
878-303-22	151	878-327-22	151	879-026-00	152	879-318-22	152
878-304-18	151	878-328-18	151	879-027-00	152	879-319-18	152
878-304-22	151	878-328-22	151	879-028-00	152	879-319-22	152
878-305-18	151	878-329-18	151	879-029-00	152	879-320-18	152
878-305-22	151	878-329-22	151	879-030-00	152	879-320-22	152
878-306-18	151	878-330-18	151	879-031-00	152	879-321-18	152
878-306-22	151	878-330-22	151	879-032-00	152	879-321-22	152
878-307-18	151	878-331-18	151	879-033-00	152	879-322-18	152
878-307-22	151	878-331-22	151	879-034-00	152	879-322-22	152
878-308-18	151	878-332-18	151	879-035-00	152	879-323-18	152
878-308-22	151	878-332-22	151	879-036-00	152	879-323-22	152
878-309-18	151	878-333-18	151	879-064-00	150	879-324-18	152
878-309-22	151	878-333-22	151	879-150-00	150	879-324-22	152
878-310-18	151	878-334-18	151	879-301-18	152	879-325-18	152
878-310-22	151	878-334-22	151	879-301-22	152	879-325-22	152
878-311-18	151	878-335-18	151	879-302-18	152	879-326-18	152
878-311-22	151	878-335-22	151	879-302-22	152	879-326-22	152
878-312-18	151	878-336-18	151	879-303-18	152	879-327-18	152
878-312-22	151	878-336-22	151	879-303-22	152	879-327-22	152
878-313-18	151	878-350-18	150	879-304-18	152	879-328-18	152

Index numerisch

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
879-328-22	152	880-228-00	153	880-319-22	153	881-210-00	154
879-329-18	152	880-229-00	153	880-320-18	153	881-211-00	154
879-329-22	152	880-230-00	153	880-320-22	153	881-212-00	154
879-330-18	152	880-231-00	153	880-321-18	153	881-213-00	154
879-330-22	152	880-232-00	153	880-321-22	153	881-214-00	154
879-331-18	152	880-233-00	153	880-322-18	153	881-215-00	154
879-331-22	152	880-234-00	153	880-322-22	153	881-216-00	154
879-332-18	152	880-235-00	153	880-323-18	153	881-217-00	154
879-332-22	152	880-236-00	153	880-323-22	153	881-218-00	154
879-333-18	152	880-250-00	150	880-324-18	153	881-219-00	154
879-333-22	152	880-264-00	150	880-324-22	153	881-220-00	154
879-334-18	152	880-301-18	153	880-325-18	153	881-221-00	154
879-334-22	152	880-301-22	153	880-325-22	153	881-222-00	154
879-335-18	152	880-302-18	153	880-326-18	153	881-223-00	154
879-335-22	152	880-302-22	153	880-326-22	153	881-224-00	154
879-336-18	152	880-303-18	153	880-327-18	153	881-225-00	154
879-336-22	152	880-303-22	153	880-327-22	153	881-226-00	154
879-350-18	150	880-304-18	153	880-328-18	153	881-227-00	154
879-350-22	150	880-304-22	153	880-328-22	153	881-228-00	154
879-364-18	150	880-305-18	153	880-329-18	153	881-229-00	154
879-364-22	150	880-305-22	153	880-329-22	153	881-230-00	154
880-201-00	153	880-306-18	153	880-330-18	153	881-231-00	154
880-202-00	153	880-306-22	153	880-330-22	153	881-232-00	154
880-203-00	153	880-307-18	153	880-331-18	153	881-233-00	154
880-204-00	153	880-307-22	153	880-331-22	153	881-234-00	154
880-205-00	153	880-308-18	153	880-332-18	153	881-235-00	154
880-206-00	153	880-308-22	153	880-332-22	153	881-236-00	154
880-207-00	153	880-309-18	153	880-333-18	153	881-250-00	150
880-208-00	153	880-309-22	153	880-333-22	153	881-264-00	150
880-209-00	153	880-310-18	153	880-334-18	153	881-301-18	154
880-210-00	153	880-310-22	153	880-334-22	153	881-301-22	154
880-211-00	153	880-311-18	153	880-335-18	153	881-302-18	154
880-212-00	153	880-311-22	153	880-335-22	153	881-302-22	154
880-213-00	153	880-312-18	153	880-336-18	153	881-303-18	154
880-214-00	153	880-312-22	153	880-336-22	153	881-303-22	154
880-215-00	153	880-313-18	153	880-350-18	150	881-304-18	154
880-216-00	153	880-313-22	153	880-350-22	150	881-304-22	154
880-217-00	153	880-314-18	153	880-364-18	150	881-305-18	154
880-218-00	153	880-314-22	153	880-364-22	150	881-305-22	154
880-219-00	153	880-315-18	153	881-201-00	154	881-306-18	154
880-220-00	153	880-315-22	153	881-202-00	154	881-306-22	154
880-221-00	153	880-316-18	153	881-203-00	154	881-307-18	154
880-222-00	153	880-316-22	153	881-204-00	154	881-307-22	154
880-223-00	153	880-317-18	153	881-205-00	154	881-308-18	154
880-224-00	153	880-317-22	153	881-206-00	154	881-308-22	154
880-225-00	153	880-318-18	153	881-207-00	154	881-309-18	154
880-226-00	153	880-318-22	153	881-208-00	154	881-309-22	154
880-227-00	153	880-319-18	153	881-209-00	154	881-310-18	154

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
881-310-22	154	881-334-22	154	882-301-18	157	882-325-18	157
881-311-18	154	881-335-18	154	882-301-22	157	882-325-22	157
881-311-22	154	881-335-22	154	882-302-18	157	882-326-18	157
881-312-18	154	881-336-18	154	882-302-22	157	882-326-22	157
881-312-22	154	881-336-22	154	882-303-18	157	882-327-18	157
881-313-18	154	881-350-18	150	882-303-22	157	882-327-22	157
881-313-22	154	881-350-22	150	882-304-18	157	882-328-18	157
881-314-18	154	881-364-18	150	882-304-22	157	882-328-22	157
881-314-22	154	881-364-22	150	882-305-18	157	882-329-18	157
881-315-18	154	882-001-00	157	882-305-22	157	882-329-22	157
881-315-22	154	882-002-00	157	882-306-18	157	882-330-18	157
881-316-18	154	882-003-00	157	882-306-22	157	882-330-22	157
881-316-22	154	882-004-00	157	882-307-18	157	882-331-18	157
881-317-18	154	882-005-00	157	882-307-22	157	882-331-22	157
881-317-22	154	882-006-00	157	882-308-18	157	882-332-18	157
881-318-18	154	882-007-00	157	882-308-22	157	882-332-22	157
881-318-22	154	882-008-00	157	882-309-18	157	882-333-18	157
881-319-18	154	882-009-00	157	882-309-22	157	882-333-22	157
881-319-22	154	882-010-00	157	882-310-18	157	882-334-18	157
881-320-18	154	882-011-00	157	882-310-22	157	882-334-22	157
881-320-22	154	882-012-00	157	882-311-18	157	882-335-18	157
881-321-18	154	882-013-00	157	882-311-22	157	882-335-22	157
881-321-22	154	882-014-00	157	882-312-18	157	882-336-18	157
881-322-18	154	882-015-00	157	882-312-22	157	882-336-22	157
881-322-22	154	882-016-00	157	882-313-18	157	882-350-18	155
881-323-18	154	882-017-00	157	882-313-22	157	882-350-22	155
881-323-22	154	882-018-00	157	882-314-18	157	882-364-18	155
881-324-18	154	882-019-00	157	882-314-22	157	882-364-22	155
881-324-22	154	882-020-00	157	882-315-18	157	883-001-00	158
881-325-18	154	882-021-00	157	882-315-22	157	883-002-00	158
881-325-22	154	882-022-00	157	882-316-18	157	883-003-00	158
881-326-18	154	882-023-00	157	882-316-22	157	883-004-00	158
881-326-22	154	882-024-00	157	882-317-18	157	883-005-00	158
881-327-18	154	882-025-00	157	882-317-22	157	883-006-00	158
881-327-22	154	882-026-00	157	882-318-18	157	883-007-00	158
881-328-18	154	882-027-00	157	882-318-22	157	883-008-00	158
881-328-22	154	882-028-00	157	882-319-18	157	883-009-00	158
881-329-18	154	882-029-00	157	882-319-22	157	883-010-00	158
881-329-22	154	882-030-00	157	882-320-18	157	883-011-00	158
881-330-18	154	882-031-00	157	882-320-22	157	883-012-00	158
881-330-22	154	882-032-00	157	882-321-18	157	883-013-00	158
881-331-18	154	882-033-00	157	882-321-22	157	883-014-00	158
881-331-22	154	882-034-00	157	882-322-18	157	883-015-00	158
881-332-18	154	882-035-00	157	882-322-22	157	883-016-00	158
881-332-22	154	882-036-00	157	882-323-18	157	883-017-00	158
881-333-18	154	882-064-00	155	882-323-22	157	883-018-00	158
881-333-22	154	882-150-00	155	882-324-18	157	883-019-00	158
881-334-18	154	882-300-00	155	882-324-22	157	883-020-00	158

Index numerisch

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
883-021-00	158	883-315-22	158	884-002-00	159	884-306-18	159
883-022-00	158	883-316-18	158	884-003-00	159	884-306-22	159
883-023-00	158	883-316-22	158	884-004-00	159	884-307-18	159
883-024-00	158	883-317-18	158	884-005-00	159	884-307-22	159
883-025-00	158	883-317-22	158	884-006-00	159	884-308-18	159
883-026-00	158	883-318-18	158	884-007-00	159	884-308-22	159
883-027-00	158	883-318-22	158	884-008-00	159	884-309-18	159
883-028-00	158	883-319-18	158	884-009-00	159	884-309-22	159
883-029-00	158	883-319-22	158	884-010-00	159	884-310-18	159
883-030-00	158	883-320-18	158	884-011-00	159	884-310-22	159
883-031-00	158	883-320-22	158	884-012-00	159	884-311-18	159
883-032-00	158	883-321-18	158	884-013-00	159	884-311-22	159
883-033-00	158	883-321-22	158	884-014-00	159	884-312-18	159
883-034-00	158	883-322-18	158	884-015-00	159	884-312-22	159
883-035-00	158	883-322-22	158	884-016-00	159	884-313-18	159
883-036-00	158	883-323-18	158	884-017-00	159	884-313-22	159
883-064-00	155	883-323-22	158	884-018-00	159	884-314-18	159
883-150-00	155	883-324-18	158	884-019-00	159	884-314-22	159
883-300-00	155	883-324-22	158	884-020-00	159	884-315-18	159
883-301-18	158	883-325-18	158	884-021-00	159	884-315-22	159
883-301-22	158	883-325-22	158	884-022-00	159	884-316-18	159
883-302-18	158	883-326-18	158	884-023-00	159	884-316-22	159
883-302-22	158	883-326-22	158	884-024-00	159	884-317-18	159
883-303-18	158	883-327-18	158	884-025-00	159	884-317-22	159
883-303-22	158	883-327-22	158	884-026-00	159	884-318-18	159
883-304-18	158	883-328-18	158	884-027-00	159	884-318-22	159
883-304-22	158	883-328-22	158	884-028-00	159	884-319-18	159
883-305-18	158	883-329-18	158	884-029-00	159	884-319-22	159
883-305-22	158	883-329-22	158	884-030-00	159	884-320-18	159
883-306-18	158	883-330-18	158	884-031-00	159	884-320-22	159
883-306-22	158	883-330-22	158	884-032-00	159	884-321-18	159
883-307-18	158	883-331-18	158	884-033-00	159	884-321-22	159
883-307-22	158	883-331-22	158	884-034-00	159	884-322-18	159
883-308-18	158	883-332-18	158	884-035-00	159	884-322-22	159
883-308-22	158	883-332-22	158	884-036-00	159	884-323-18	159
883-309-18	158	883-333-18	158	884-064-00	156	884-323-22	159
883-309-22	158	883-333-22	158	884-150-00	156	884-324-18	159
883-310-18	158	883-334-18	158	884-300-00	156	884-324-22	159
883-310-22	158	883-334-22	158	884-301-18	159	884-325-18	159
883-311-18	158	883-335-18	158	884-301-22	159	884-325-22	159
883-311-22	158	883-335-22	158	884-302-18	159	884-326-18	159
883-312-18	158	883-336-18	158	884-302-22	159	884-326-22	159
883-312-22	158	883-336-22	158	884-303-18	159	884-327-18	159
883-313-18	158	883-350-18	155	884-303-22	159	884-327-22	159
883-313-22	158	883-350-22	155	884-304-18	159	884-328-18	159
883-314-18	158	883-364-18	155	884-304-22	159	884-328-22	159
883-314-22	158	883-364-22	155	884-305-18	159	884-329-18	159
883-315-18	158	884-001-00	159	884-305-22	159	884-329-22	159

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
884-330-18	159	885-031-00	160	885-320-22	160	886-012-00	161
884-330-22	159	885-032-00	160	885-321-18	160	886-013-00	161
884-331-18	159	885-033-00	160	885-321-22	160	886-014-00	161
884-331-22	159	885-034-00	160	885-322-18	160	886-015-00	161
884-332-18	159	885-035-00	160	885-322-22	160	886-016-00	161
884-332-22	159	885-036-00	160	885-323-18	160	886-017-00	161
884-333-18	159	885-064-00	156	885-323-22	160	886-018-00	161
884-333-22	159	885-150-00	156	885-324-18	160	886-019-00	161
884-334-18	159	885-300-00	156	885-324-22	160	886-020-00	161
884-334-22	159	885-301-18	160	885-325-18	160	886-021-00	161
884-335-18	159	885-301-22	160	885-325-22	160	886-022-00	161
884-335-22	159	885-302-18	160	885-326-18	160	886-023-00	161
884-336-18	159	885-302-22	160	885-326-22	160	886-024-00	161
884-336-22	159	885-303-18	160	885-327-18	160	886-025-00	161
884-350-18	156	885-303-22	160	885-327-22	160	886-026-00	161
884-350-22	156	885-304-18	160	885-328-18	160	886-027-00	161
884-364-18	156	885-304-22	160	885-328-22	160	886-028-00	161
884-364-22	156	885-305-18	160	885-329-18	160	886-029-00	161
885-001-00	160	885-305-22	160	885-329-22	160	886-030-00	161
885-002-00	160	885-306-18	160	885-330-18	160	886-031-00	161
885-003-00	160	885-306-22	160	885-330-22	160	886-032-00	161
885-004-00	160	885-307-18	160	885-331-18	160	886-064-00	155
885-005-00	160	885-307-22	160	885-331-22	160	886-150-00	155
885-006-00	160	885-308-18	160	885-332-18	160	887-001-00	162
885-007-00	160	885-308-22	160	885-332-22	160	887-002-00	162
885-008-00	160	885-309-18	160	885-333-18	160	887-003-00	162
885-009-00	160	885-309-22	160	885-333-22	160	887-004-00	162
885-010-00	160	885-310-18	160	885-334-18	160	887-005-00	162
885-011-00	160	885-310-22	160	885-334-22	160	887-006-00	162
885-012-00	160	885-311-18	160	885-335-18	160	887-007-00	162
885-013-00	160	885-311-22	160	885-335-22	160	887-008-00	162
885-014-00	160	885-312-18	160	885-336-18	160	887-009-00	162
885-015-00	160	885-312-22	160	885-336-22	160	887-010-00	162
885-016-00	160	885-313-18	160	885-350-18	156	887-011-00	162
885-017-00	160	885-313-22	160	885-350-22	156	887-012-00	162
885-018-00	160	885-314-18	160	885-364-18	156	887-013-00	162
885-019-00	160	885-314-22	160	885-364-22	156	887-014-00	162
885-020-00	160	885-315-18	160	886-001-00	161	887-015-00	162
885-021-00	160	885-315-22	160	886-002-00	161	887-016-00	162
885-022-00	160	885-316-18	160	886-003-00	161	887-017-00	162
885-023-00	160	885-316-22	160	886-004-00	161	887-018-00	162
885-024-00	160	885-317-18	160	886-005-00	161	887-019-00	162
885-025-00	160	885-317-22	160	886-006-00	161	887-020-00	162
885-026-00	160	885-318-18	160	886-007-00	161	887-021-00	162
885-027-00	160	885-318-22	160	886-008-00	161	887-022-00	162
885-028-00	160	885-319-18	160	886-009-00	161	887-023-00	162
885-029-00	160	885-319-22	160	886-010-00	161	887-024-00	162
885-030-00	160	885-320-18	160	886-011-00	161	887-025-00	162

Index numerisch

REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite	REF	Seite
887-026-00	162	889-006-00	164	890-431-00	177	892-000-19	66, 326
887-027-00	162	889-007-00	164	890-432-00	177	892-000-20	325
887-028-00	162	889-008-00	164	890-433-00	177	892-000-21	117, 325
887-029-00	162	889-009-00	164	891-001-00	123	892-000-22	58, 325
887-030-00	162	889-010-00	164	891-002-00	123	892-000-26	261, 313, 326
887-031-00	162	889-011-00	164	891-180-00	76	892-000-29	31, 326
887-032-00	162	889-012-00	164	891-181-00	76	892-001-00	323
887-064-00	155	889-013-00	164	891-182-00	76	892-002-01	323
887-150-00	155	889-014-00	164	891-183-00	77	892-002-02	324
888-001-00	163	889-015-00	164	891-184-00	77	892-003-00	324
888-002-00	163	889-016-00	164	891-185-00	77	903-920-10	449
888-003-00	163	889-017-00	164	891-188-00	78	903-920-20	449
888-004-00	163	889-018-00	164	891-189-00	78	903-920-30	449
888-005-00	163	889-019-00	164	891-196-00	78	903-920-40	449
888-006-00	163	889-020-00	164	891-261-00	79	989-501-11	450
888-007-00	163	889-021-00	164	891-262-00	79		
888-008-00	163	889-022-00	164	891-263-00	79		
888-009-00	163	889-023-00	164	891-295-00	76		
888-010-00	163	889-024-00	164	891-296-00	76		
888-011-00	163	889-025-00	164	891-297-00	76		
888-012-00	163	889-026-00	164	891-298-00	77		
888-013-00	163	889-027-00	164	891-299-00	77		
888-014-00	163	889-028-00	164	891-300-00	77		
888-015-00	163	889-029-00	164	891-333-00	86		
888-016-00	163	889-030-00	164	891-334-00	86		
888-017-00	163	889-031-00	164	891-335-00	86		
888-018-00	163	889-032-00	164	891-336-00	86		
888-019-00	163	889-064-00	156	891-337-00	86		
888-020-00	163	889-150-00	156	891-338-00	86		
888-021-00	163	890-402-00	178	891-339-00	87		
888-022-00	163	890-403-00	178	891-340-00	87		
888-023-00	163	890-406-00	177	891-341-00	87		
888-024-00	163	890-407-00	178	891-342-00	87		
888-025-00	163	890-412-00	177	891-343-00	87		
888-026-00	163	890-414-00	150, 155, 156, 165, 168, 177, 178	891-344-00	87		
888-027-00	163			891-375-00	78		
888-028-00	163	890-414-10	178	891-376-00	78		
888-029-00	163	890-420-00	177	891-377-00	78		
888-030-00	163	890-421-00	177	891-400-00	116		
888-031-00	163	890-422-00	177	891-404-00	116		
888-032-00	163	890-423-00	177	891-406-00	54		
888-064-00	156	890-424-00	177	891-407-00	54		
888-150-00	156	890-425-00	177	891-408-00	54		
889-001-00	164	890-426-00	177	891-409-00	54		
889-002-00	164	890-427-00	177	892-000-07	324		
889-003-00	164	890-428-00	177	892-000-14	324		
889-004-00	164	890-429-00	177	892-000-17	66, 326		
889-005-00	164	890-430-00	177	892-000-18	117, 325		

Liefer- und Zahlungsbedingungen, Stand 1. Januar 2003

1. Geltung

- 1.1 Für alle unsere Lieferungen und Leistungen gelten gegenüber Unternehmern i.S.v. § 13 BGB ausschließlich die nachstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen.
- 1.2 Entgegenstehende Einkaufs- oder andere Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nicht, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprochen haben. Abweichende Regelungen sind nur gültig, wenn sie schriftlich vereinbart worden sind.
- 1.3 Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für alle künftigen Vertragsverhältnisse zwischen den Vertragsparteien, ohne dass es im Einzelfall eines erneuten Hinweises auf sie bedarf.

2. Vertragsabschluss und -änderungen

- 2.1 Unsere Angebote sind unverbindlich, soweit wir sie nicht ausdrücklich als bindend bezeichnet haben. Ein wirksamer Vertrag kommt erst zu Stande mit unserer Bestätigung des Kundenauftrages; dies kann durch Lieferung der bestellten Ware oder Ausführung der vereinbarten Leistung erfolgen.
- 2.2 Für den Vertragsinhalt ist allein unsere Auftragsbestätigung maßgeblich, die auch in Form einer der Ware beigefügten Rechnung erfolgen kann.
- 2.3 Hat der Kunde Einwendungen gegen den Inhalt der Auftragsbestätigung, so muss er der Bestätigung unverzüglich widersprechen.
- 2.4 Ergänzungen und Änderungen des Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer schriftlichen Bestätigung durch uns.

3. Preise

- 3.1 Vorbehaltlich einer besonderen schriftlichen Vereinbarung gelten die Preise, die in unserer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in Kraft befindlichen Preisliste oder dem gültigen Katalog ausgewiesen sind.
- 3.2 Sämtliche Preisangaben in Preislisten und Katalogen erfolgen in Euro. Die Preise gelten ausschließlich Verpackung, Mehrwertsteuer, Versand- und Versicherungskosten ab Werk Ispringen. Der Kunde hat nach Maßgabe der in den Preislisten und Katalogen enthaltenen besonderen Regelungen die Kosten für Transportversicherung und Versand zu tragen.
- 3.3 Wir sind berechtigt, für die Durchführung von Kleinaufträgen einen Mindermengenzuschlag und für eine vom Kunden gewünschte Lieferung an eine von der Rechnungsanschrift abweichende Lieferadresse eine Bearbeitungsgebühr zu berechnen (die Wertgrenze für Kleinaufträge, die Höhe des Zuschlages sowie die Bearbeitungsgebühr ergeben sich aus den Preislisten und Katalogen).

4. Lieferzeit

- 4.1 Die von uns angegebenen Lieferzeiten sind vorbehaltlich einer ausdrücklichen Abrede unverbindlich.
- 4.2 Eine verbindlich vereinbarte Lieferzeit ist eingehalten, wenn die Ware bis zu ihrem Ablauf unser Werk Ispringen verlassen hat oder wir dem Kunden die Versandbereitschaft mitgeteilt haben.
- 4.3 Die Lieferzeit verlängert sich automatisch um einen angemessenen Zeitraum bei höherer Gewalt, Streik und Aussperrung, Lieferverzögerungen bei Vorlieferanten, behördlichen Maßnahmen und sonstigen außergewöhnlichen unverschuldeten Umständen, soweit diese auf die Lieferzeit Einfluss haben. Dauern diese Umstände mehr als 4 Monate an, sind beide Parteien berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Auf Verlangen des Kunden haben wir zu erklären, ob wir zurücktreten oder innerhalb einer von uns zu bestimmenden Frist liefern werden. Schadenersatzansprüche des Kunden sind insoweit ausgeschlossen.
- 4.4 Im Falle einer verspäteten Leistung geraten wir dennoch nicht in Verzug, solange dies auf Umständen beruht, die wir bei billigerweise zu erwartender Sorgfalt nicht voraussehen und durch zumutbare Maßnahmen nicht haben verhüten können.
- 4.5 Haben wir die Überschreitung der Lieferzeit zu vertreten, ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, nachdem er uns schriftlich eine angemessene Nachfrist gesetzt hat und diese ungenutzt verstrichen ist.
- 4.6 Wir sind zur Zurückhaltung unserer Leistung berechtigt, solange der Kunde seine Verpflichtungen aus diesem oder einem anderen Vertrag oder einem sonstigen Rechtsgrund nicht erfüllt.

5. Lieferung in Teilmengen und auf Abruf

- 5.1 Wir sind berechtigt, unsere Lieferverpflichtung in Teilmengen zu erfüllen, soweit dies für den Kunden zumutbar ist. Die Teilleistungen gelten als selbständige Rechtsgeschäfte, die nach Maßgabe von Ziffer 7 gesondert zu bezahlen sind. Erfolgt die Zahlung einer Teillieferung nicht rechtzeitig, sind wir berechtigt, die Erfüllung der noch ausstehenden Teillieferungen zu verweigern.
- 5.2 Im Falle einer auf Abruf bestellten Ware ist der Kunde vorbehaltlich einer abweichenden vertraglichen Frist verpflichtet, diese innerhalb von 6 Monaten vollständig abzurufen; der Abruf muss in angemessener Frist vor dem Liefertermin erfolgen.

6. Transport und Gefahrübergang

- 6.1 Der Versand erfolgt – soweit nichts anderes vereinbart ist – auf Kosten und Gefahr des Kunden. Der Kunde hat die Transportgefahr auch dann zu tragen, wenn wir ausnahmsweise die Versandkosten übernommen haben.
- 6.2 Wir sind vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung zur Bestimmung des Transportmittels berechtigt; für günstige Verfrachtung sowie Transportlaufzeit wird keine Haftung übernommen.
- 6.3 Schadenersatzansprüche wegen Nichtbeachtung einer Versandanweisung oder wegen mangelhafter Verpackung der Ware sind ausgeschlossen, sofern uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Liefer- und Zahlungsbedingungen, Stand 1. Januar 2003

- 6.4 Die Gefahr geht auf den Kunden über im Zeitpunkt der Übergabe der Ware in Ispringen an den Frachtführer.
In den Fällen, in denen es aus Gründen, die allein der Kunde zu vertreten hat, zu einer Verzögerung bei Entgegennahme, Auslieferung oder Versand der Ware kommt oder er die Abrufaufträge nicht fristgerecht abrufen, gehen alle Gefahren einschließlich der Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs der Ware bereits mit der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über. Erfolgt in einem solchen Fall eine Einlagerung der Ware, ist er zur Zahlung eines dabei üblicherweise anfallenden Lagergeldes verpflichtet, sofern er nicht nachweist, dass keine oder geringere Lagerkosten entstanden sind; wird die Ware bei Dritten eingelagert, hat er die dabei tatsächlich entstandenen Kosten zu tragen.
- 6.5 Bei Beschädigungen oder Verlust der Ware auf dem Transport ist der Kunde verpflichtet, beim Frachtführer/Beförderer unverzüglich eine Tatbestandsaufnahme zu veranlassen.
- 6.6 Die Anlieferung von Rohstoffen und Teilfabrikaten zum Zwecke der Lohnverarbeitung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden.

7. Zahlungsbedingungen

- 7.1 Unsere Rechnungen sind – sofern nicht anders vereinbart – binnen 30 Tagen ab Gefahrübergang i.S.v. 6.4 rein netto zahlbar; bei Zahlungseingang innerhalb von 10 Tagen gewähren wir 2% Skonto vom Nettowarenwert.
Ersatzteile, Sonderanfertigungen sowie Lohnarbeiten und Reparaturen sind sofort ohne Abzug zahlbar; dies gilt auch für Kleinaufträge (die maßgebliche Wertgrenze ergibt sich aus den in Preislisten und Katalogen enthaltenen Regelungen).
- 7.2 Der Kunde hat auch ohne ausdrückliche Vereinbarung alle im Zusammenhang mit der Zahlung anfallenden Spesen (wie insbesondere Einzugsgebühren, Diskont- und Wechselspesen) zu tragen. Die Zahlung mit Scheck oder Wechsel bedarf der vorherigen Vereinbarung; diese Zahlungsmittel werden nur zahlungshalber angenommen. Bei Wechselzahlung wird kein Skontoabzug gewährt.
- 7.3 Der Kunde gerät mit Überschreitung des vereinbarten Zahlungszieles in Verzug. In einem solchen Fall sind wir berechtigt, diesem nach der ersten Mahnung Verzugszinsen i.H.v. 8 % über dem Basiszinsatz zu berechnen; der Anspruch auf Ersatz eines weitergehenden Schadens bleibt hiervon unberührt.
Im Falle des Zahlungsverzugs sind wir berechtigt, die vom Kunden geleisteten Zahlungen auf bereits vorbestehende Zahlungsrückstände zu verrechnen.
- 7.4 Befindet sich der Kunde im Zahlungsverzug oder werden uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt, die erhebliche Zweifel an seiner Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit begründen (Vermögensverfall, Zahlungseinstellung, Überschuldung, Wechsel- und Scheckproteste, Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen oder Eröffnung oder Ablehnung desselben), sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt; weitere gesetzliche Ansprüche bleiben hiervon unberührt. Schadenersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen.
Tritt beim Kunden eine solche Vermögensverschlechterung ein, werden zudem sämtliche Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung – auch bei Stundung oder sonstigem Zahlungsaufschub – sofort fällig. Zudem sind wir berechtigt, weitere Warenlieferungen oder sonstige Leistungen zu verweigern oder Vorauszahlung und die Stellung angemessener Sicherheiten für unsere Gegenforderung zu verlangen.
- 7.5 Der Kunde darf gegen uns zustehenden Forderungen nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen die Aufrechnung erklären oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen. Das Recht des Kunden zur Zurückhaltung eines angemessenen Teils der Gegenleistung wegen eines Mangels der von uns gelieferten Ware oder erbrachten Leistung bleibt jedoch unberührt.

8. Eigentumsvorbehalt

- 8.1 Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren vor bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung sowie der Erfüllung aller sonstigen gegen den Kunden gerichteten Forderungen.
Wird im Zusammenhang mit der Zahlungspflicht des Kunden für uns eine wechselseitige Haftung begründet, erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor der vollständigen Einlösung aller Wechsel.
- 8.2 Während des Eigentumsvorbehaltes ist der Kunde zum Besitz der Ware berechtigt. Weiterhin ist er berechtigt, über die Ware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges zu verfügen; hiervon ausgenommen sind außergewöhnliche Verfügungen wie insbesondere Sicherungsübereignung, Verpfändung und jegliche Abtretung.
- 8.3 Im Falle einer Weiterveräußerung tritt der Kunde die entstehenden Zahlungsansprüche schon jetzt in Höhe des Warenwertes (Faktura-Endbetrag einschließlich gesetzlicher MwSt) sowie alle sonstigen Forderungen und Nebenrechte an uns ab. Der Kunde ist zur Einziehung der Forderung berechtigt; unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt.
- 8.4 Bei einem vertragswidrigen Verhalten des Kunden – insbesondere bei einem Zahlungsrückstand – sind wir berechtigt, die Ware an uns zu nehmen und die Ermächtigung zum Einzug der im Falle einer Weiterveräußerung entstehenden Forderungen zu widerrufen. Der Kunde hat uns in einem solchen Fall auf Verlangen alle zur Geltendmachung der ihm zustehenden Rechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen und den Schuldner die Forderungsabtretung anzuzeigen.
- 8.5 Der Kunde ist verpflichtet, uns bei Pfändungen, Verfügungen oder sonstigen Eingriffen durch Dritte sowie über behördliche Maßnahmen unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Er trägt alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Aufhebung des Zugriffs und Wiederbeschaffung der gelieferten Ware aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von dem Dritten eingezogen werden können.

Liefer- und Zahlungsbedingungen, Stand 1. Januar 2003

- 8.6 Eine Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware durch den Kunden erfolgt stets für uns; wir gelten als Hersteller i.S.v. § 950 BGB. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen untrennbar vermischt oder vermengt oder verbunden, so dass sie wesentlicher Bestandteil einer einheitlichen Sache wird, so erwerben wir das Eigentum an der neuen Sache in Höhe des Fakturaendbetrages der gelieferten Ware (einschließlich gesetzlicher MwSt.) im Verhältnis zu dem Anschaffungs- oder Herstellungspreis der neuen Sache zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Erfolgt eine solche Verarbeitung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so erwerben wir an deren Wert Miteigentum im vorgenannten Verhältnis.
- 8.7 Soweit der Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt, werden wir auf Verlangen Sicherheit nach unserer Wahl freigeben.

9. Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (Gewährleistung)

- 9.1 Der Kunde hat die Ware unmittelbar nach Erhalt zu untersuchen und erkennbare Mängel unverzüglich schriftlich zu rügen. Ist ein Mangel bei Lieferung nicht erkennbar, ist er verpflichtet, die Anzeige unverzüglich nachzuholen, sobald er den Mangel entdeckt hat. Der Kunde verliert das Recht, sich auf einen Mangel zu berufen, wenn er diesen nicht unverzüglich nach dem Zeitpunkt, in dem er ihn festgestellt hat oder hätte feststellen müssen, schriftlich anzeigt und genau bezeichnet.
- 9.2 Ist die Ware bei Gefahrübergang mangelhaft, sind wir nach unserer Wahl zunächst berechtigt zur Nacherfüllung in Form der Beseitigung des Mangels oder der Lieferung mangelfreier Ware im Tausch gegen die mangelhaft gelieferte.
- In den Fällen, in denen eine Nacherfüllung nicht möglich, endgültig fehlgeschlagen, für den Kunden unzumutbar, wir eine Nacherfüllung abgelehnt haben oder eine vom Kunden hierfür schriftlich gesetzte angemessene Frist fruchtlos verstrichen ist, kann dieser nach seiner Wahl die Gegenleistung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; sofern nur ein unerheblicher Mangel vorliegt, ist der Kunde nur zur Minderung der Vergütung berechtigt.
- Eine Übernahme der Kosten für eine Nachbesserung durch den Kunden oder Dritte setzt unsere ausdrückliche vorherige Zustimmung voraus; eine eigenmächtige Nachbesserung führt zum Verlust aller Mängelansprüche.
- 9.3 Rechte des Kunden wegen Mängeln verjähren 24 Monate nach Ablieferung der Ware oder Erbringung der Leistung. In den Fällen, in denen sich die Entgegennahme der Ware ohne unser Verschulden verzögert, ist die Mitteilung der Versandbereitschaft maßgeblich.
- 9.4 Eine Gewährleistung ist ferner ausgeschlossen, wenn ein Mangel auf eine ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, fehlerhafte Montage oder Inbetriebnahme durch den Kunden oder einen Dritten, natürliche Abnutzung (Verschleiß), nicht ordnungsgemäße Wartung, unsachgemäße Nachbesserung oder Änderungen sowie Nichtbeachtung der Bedienungs- und Betriebsanleitung oder sonstiger Produktinformationen zurückzuführen ist.
- Ein Gewährleistungsausschluss besteht für vom Kunden geliefertes oder aufgrund von ihm vorgegebener Spezifikation beschafftes Material sowie für von ihm vorgegebene Konstruktionen.
- 9.5 In den Fällen, in denen wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder ausdrücklich eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben, gilt jeweils die gesetzliche Regelung.
- 9.6 Für Schadensersatzansprüche wegen eines Sach- oder Rechtsmangels gilt die in Ziffer 10 enthaltene Haftungsbegrenzung.

10. Haftung

- 10.1 Die nachfolgenden Haftungsregelungen gelten für alle auf Schadenersatz gerichtete Ansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund.
- 10.2 Unsere Haftung ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit; für leichte Fahrlässigkeit haften wir nur bei der Verletzung einer uns obliegenden vertragswesentlichen Pflicht.
- 10.3 Alle weitergehenden Ansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen; dies umfasst insbesondere sämtliche Schadenersatzansprüche einschließlich des Anspruchs auf Schadenersatz statt der Leistung, den Ersatz vergeblicher Aufwendungen sowie den Ersatz von Schäden jeder Art, die bei Anbahnung, Abschluss oder Abwicklung des Vertrages im Zusammenhang mit der Verletzung vorvertraglicher und vertraglicher Pflichten und Nebenpflichten oder aufgrund unerlaubten Handlungen entstanden sind oder auf Gewährleistung beruhen.
- 10.4 Der Umfang der Haftung ist – außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – beschränkt auf den Ersatz des vertragstypischen und aufgrund eines gewöhnlichen Geschehensablaufs vernünftigerweise vorhersehbaren und im einzelnen nachgewiesenen Schadens.
- 10.5 Schadenersatzansprüche des Kunden unter dem Gesichtspunkt des Verzuges sind ausgeschlossen, sofern die Verzögerung nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.
- 10.6 Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei einer besonderen ausdrücklich übernommenen Garantie, bei Arglist sowie in den Fällen, in denen nach dem Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden zwingend gehaftet wird; gleiches gilt nicht für einen Schadenersatzanspruch, der auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruht.

11. Sonderanfertigungen – Schutzrechtsverletzung

- 11.1 In den Fällen, in denen wir die Ware oder eine sonstige Leistung nach Zeichnungen, Mustern oder sonstigen Vorgaben oder unter Verwendung von bereitgestellten Teilen des Kunden anfertigen oder erbringen (Sonderanfertigungen), hat dieser dafür einzustehen, dass etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Er hat uns von etwaigen Ansprüchen Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten freizustellen und den uns entstehenden Schaden sowie alle Aufwendungen einschließlich gerichtlicher und außergerichtlicher Kosten zu ersetzen.

Liefer- und Zahlungsbedingungen, Stand 1. Januar 2003

11.2 Sonderanfertigungen sind von Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen.

11.3 Wir verpflichten uns, Vorrichtungen und Formen für Nachbestellungen aufzubewahren. Die Aufbewahrungspflicht erlischt, wenn vom Kunden innerhalb von 2 Jahren nach der letzten Lieferung keine weiteren Bestellungen über einen identischen Liefergegenstand eingehen. Die Aufbewahrungspflicht erlischt sofort im Falle einer nicht rechtzeitigen Zahlung der gelieferten Waren.

12. Eigentums-, Urheber- und sonstige Rechte

12.1 Sämtliche Verkaufsunterlagen (Kataloge, Preislisten), Zeichnungen, Muster, Modelle und sonstige Unterlagen, die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, bleiben unser Eigentum; alle Rechte hieran wie insbesondere Urheber-, Patent-, und sonstige gewerbliche Schutzrechte sowie das Eigentum an Erfindungen stehen ausschließlich uns zu. Der Kunde darf sie Dritten nicht zugänglich machen; er hat sie auf Verlangen zurückzugeben.

12.2 Der Kunde darf uns zustehende Warenzeichen und sonstige Kennzeichnungen nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung und nur in unserem Interesse verwenden.

13. Rechtswahl – Erfüllungsort – Gerichtsstand

13.1 Das Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland; internationales Kaufrecht findet keine Anwendung.

13.2 Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Pforzheim-Ispringen.

13.3 Sofern es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, um eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt oder der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik hat, ist Pforzheim Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis einschließlich solcher über sein Entstehen und über seine Wirksamkeit ergebenden Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wechsel- und Scheckklagen. Wir sind berechtigt, auch am Sitz des Kunden zu klagen.

Wichtige Hinweise, Stand Januar 2021

Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ergänzend zu den in diesem Katalog / Preisliste abgedruckten Liefer- und Zahlungsbedingungen die nachstehenden besonderen Regelungen:

1. Transportversicherung

Alle Warensendungen sind gegen Transportschäden versichert.

Beim Empfang der Warenlieferung festgestellte Schäden sind sowohl dem Frachtführer als auch uns (Telefon: 072 31/803-200) unverzüglich anzuzeigen.

2. Versandkosten

Auf der Grundlage von Ziffer 3.2 Satz 3 der Liefer- und Zahlungsbedingungen wird dem Kunden ein vom Warenwert abhängiger Versandkostenpauschalbetrag in Rechnung gestellt. Dieser beträgt 7,00 EUR bis zu einem Warenauftragswert von 249,99 EUR.

Diese Kostenpauschale wird von uns übernommen, wenn die Bestellung einen Warenauftragswert von 250,00 EUR übersteigt – dies gilt jedoch nicht für Händler oder Wiederverkäufer (diese haben nach Maßgabe der Liefer- und Zahlungsbedingungen alle Kosten für Versand und Verpackung zu tragen).

Weiterhin anfallende Kostenpositionen wie insbesondere Gebühren für Nachnahme und Expresszustellung sowie Gefahrgutzuschläge werden den Kunden immer in Rechnung gestellt.

3. Bearbeitungsgebühren

Unter Hinweis auf Ziffer 3.3 der Liefer- und Zahlungsbedingungen sind wir berechtigt, bei einem Versand an eine von der Rechnungsanschrift abweichende Lieferadresse, eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 EUR zu erheben.

4. Rücksendungen

Eine Rücksendung der Ware ist innerhalb einer Frist von 4 Wochen ab Erhalt der Lieferung in ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung und unter Beifügung der Rechnung im Original oder einer Rechenungskopie möglich – für die Rechtzeitigkeit der Rücksendung ist der Eingang der Rücklieferung am Sitz unseres Unternehmens maßgeblich. Der Mindestwarenwert bei einer Rücksendung zur Gutschrift beträgt 25,00 EUR; für Gutschriften wird eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 EUR erhoben.

5. Geltung der Preise

Die in diesem Katalog/Preisliste ausgewiesenen Preise gelten ausschließlich für Lieferungen in die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Österreich. Wir weisen darauf hin, dass wir jederzeit zur Abänderung einzelner Preise berechtigt sind.

Bestellung

Fax 0800 / 4 14 24 34 (gebührenfrei aus DE)
Fax +49 72 31 / 803-219 (International)
E-Mail verkauf@dentaurum.de

D
DENTAURUM
Turnstr. 31 | 75228 Ispringen
Tel. 072 31 / 803-210
www.dentaurum.com

Besteller:

Kunden-Nummer					
Name					
Straße/Nr.					
PLZ/Ort					

Dentaurum GmbH & Co. KG
Postfach 100440
75104 Pforzheim

	Menge	REF						Notizen
1				-			-	
2				-			-	
3				-			-	
4				-			-	
5				-			-	
6				-			-	
7				-			-	
8				-			-	
9				-			-	
10				-			-	

Für diese Bestellung gelten die aktuellen Liefer- und Zahlungsbedingungen von Dentaurum.

Meine Bestellung besteht aus insgesamt _____ Seiten!

Datum

Unterschrift

Fax

0800 / 4 14 24 34 National (gebührenfrei)

Fax

+49 72 31 / 803-295 International

Bestellung

Fax 0800 / 4 14 24 34 (gebührenfrei aus DE)
Fax +49 72 31 / 803-219 (International)
E-Mail verkauf@dentaurum.de

D
DENTAURUM
Turnstr. 31 | 75228 Ispringen
Tel. 072 31 / 803-210
www.dentaurum.com

Besteller:

Kunden-Nummer					
Name					
Straße/Nr.					
PLZ/Ort					

Dentaurum GmbH & Co. KG
Postfach 100440
75104 Pforzheim

	Menge	REF						Notizen
1				-			-	
2				-			-	
3				-			-	
4				-			-	
5				-			-	
6				-			-	
7				-			-	
8				-			-	
9				-			-	
10				-			-	

Für diese Bestellung gelten die aktuellen Liefer- und Zahlungsbedingungen von Dentaurum.

Meine Bestellung besteht aus insgesamt _____ Seiten!

Datum

Unterschrift

Fax

0800 / 4 14 24 34 National (gebührenfrei)

Fax

+49 72 31 / 803-295 International

Konzeption/Layout

Dentaurum-Werbeabteilung

Katalog-Nr. 24

989-780-00

Im Zuge der Weiterentwicklung bleiben uns Verbesserungen, Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen an Geräten und Materialien vorbehalten.
Der Nachdruck des Kataloges – auch auszugsweise – ist ohne unser ausdrückliches Einverständnis untersagt. Geschmacksmuster angemeldet.

© Copyright Dentaurum GmbH & Co. KG

Bildnachweis:

- © Christian Ferrari® – S. 5
- © anson tsui / stock.adobe.com – S. 390/391
- © Artco / stock.adobe.com – S. 9
- © Astrovectro / stock.adobe.com – S. 463
- © Beboy / stock.adobe.com – S. 454
- © Bojan / stock.adobe.com – S. 473
- © daboo / stock.adobe.com – S. 285, 453
- © davooda / stock.adobe.com – S. 9
- © Drobot Dean / stock.adobe.com – S. 471
- © Fons Laure / stock.adobe.com – S. 110/111
- © FR Design / stock.adobe.com – S. 458
- © Jezper / stock.adobe.com – Rücktitel
- © kwasny221 / stock.adobe.com – S. 52/53
- © master1305 / stock.adobe.com – S. 20
- © nexusby / stock.adobe.com – S. 9
- © poppstyle / stock.adobe.com – S. 455
- © S / stock.adobe.com – S. 72/73
- © Sashkin / stock.adobe.com – S. 74/75
- © spiral media / stock.adobe.com – S. 9
- © Stephanie Swartz / stock.adobe.com – S. 108/109

Dentaurum

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
und in über weiteren 130 Ländern weltweit.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

KUNDENSERVICE

+49 72 31 / 803 - *Durchwahl*

Festsitzende Technik	-550
Herausnehmbare Technik	-555
Customer Support Digital	-280
Auftragsannahme	-210

Faxbestellung 0800 / 4 14 24 34
(gebührenfrei aus Deutschland)



ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com



Stand der Information: 2024-02
Änderungen vorbehalten

D
DENTAURUM

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germany | Telefon +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295
www.dentaurum.com | info@dentaurum.com