



Digitale Kieferorthopädie.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com

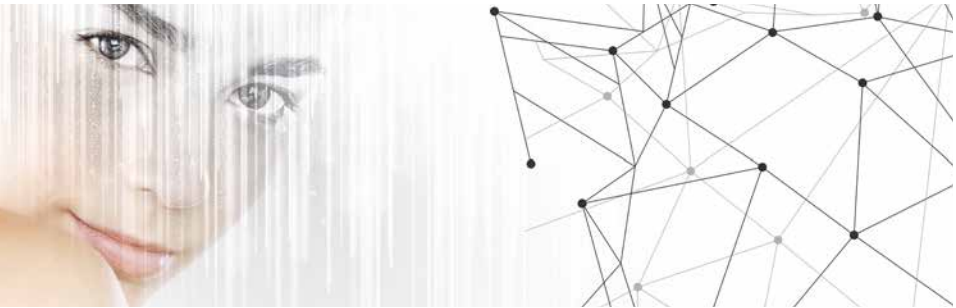

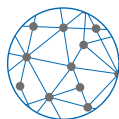

DENTAURUM
DIGITAL


Innovative Bestellplattform für patientenindividuelle
Produkte und Dienstleistungen.





passion and precision.



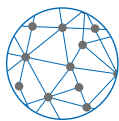

DENTAURUM
DIGITAL

Innovative Bestellplattform für patientenindividuelle Produkte und Dienstleistungen.

2-Schienensystem:

Innovatives Schienenkonzept für optimale Behandlungsergebnisse.

» Effektiv | Präzise | Ästhetisch | Kompetent







Kieferorthopädische Alignertherapie von Dentaureum.

Vorteile:

- » Digitale Fallplanung mit OnyxCeph^{3TM}.
- » Aligner bedeckt einen Teil der Gingiva für bessere Kraftübertragung.
- » Transparentes Alignermaterial für eine nahezu unsichtbare Behandlung.
- » Persönliche Beratung durch erfahrenes Support-Team.

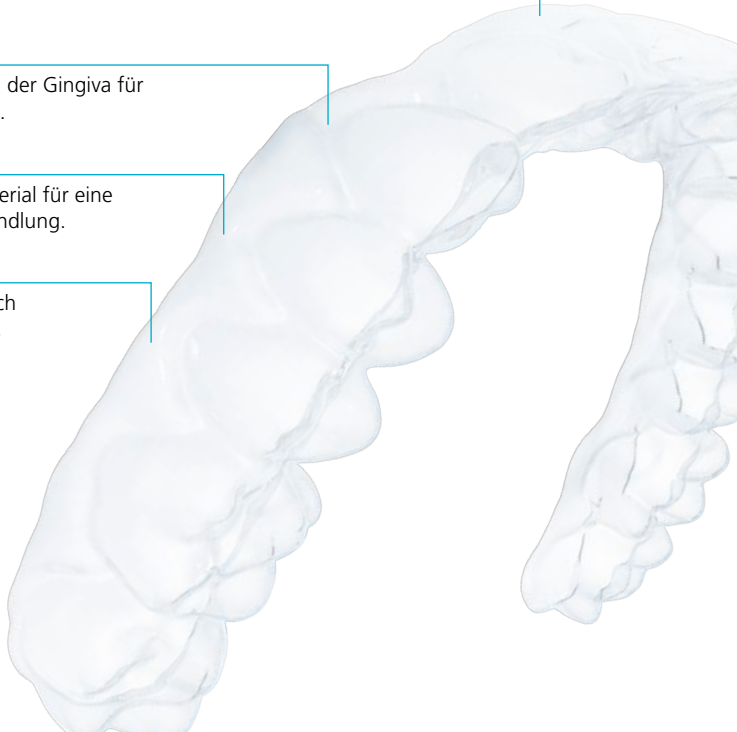

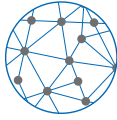


DENTAURUM
DIGITAL

Innovative Bestellplattform für patientenindividuelle Produkte und Dienstleistungen.



prime4me® Modelldruck.

Die gedruckten Sockel- und Zahnkranzmodelle für die Kieferorthopädie werden in höchster Präzision produziert und liefern die ideale Arbeitsgrundlage für alle kieferorthopädischen Behandlungsapparaturen. Bei der Produktion gilt dabei wie immer Dentaurums Qualitätsanspruch: Höchster Industriestandard bei Maschinen und validierte Prozesse mit hochqualifiziertem Personal.

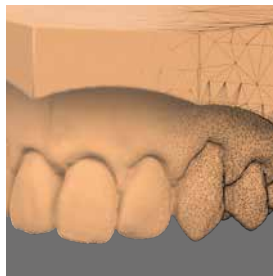




prime4me® RETAIN3R bringt viele Vorteile.

Der nach Kundenwunsch designte Retainer besitzt durch die einzigartige, dreidimensionale Konstruktionsgestaltung eine optimale, individuelle Passform. Auch enge Platzverhältnisse können durch das digitale Design berücksichtigt werden. Für beste Biokompatibilität sorgt das Material, Titan Grade 5, wodurch sich der prime4me® RETAIN3R auch hervorragend für Nickel-Allergiker eignet.

Nach Designfreigabe wird der Retainer eins zu eins aus einem Titan Blank gefräst. Für den Patienten bedeutet dies maximalen Tragekomfort durch die hohe Passgenauigkeit lingual und kleinere Klebeflächen, die wiederum eine bessere und einfachere Mundhygiene ermöglichen.

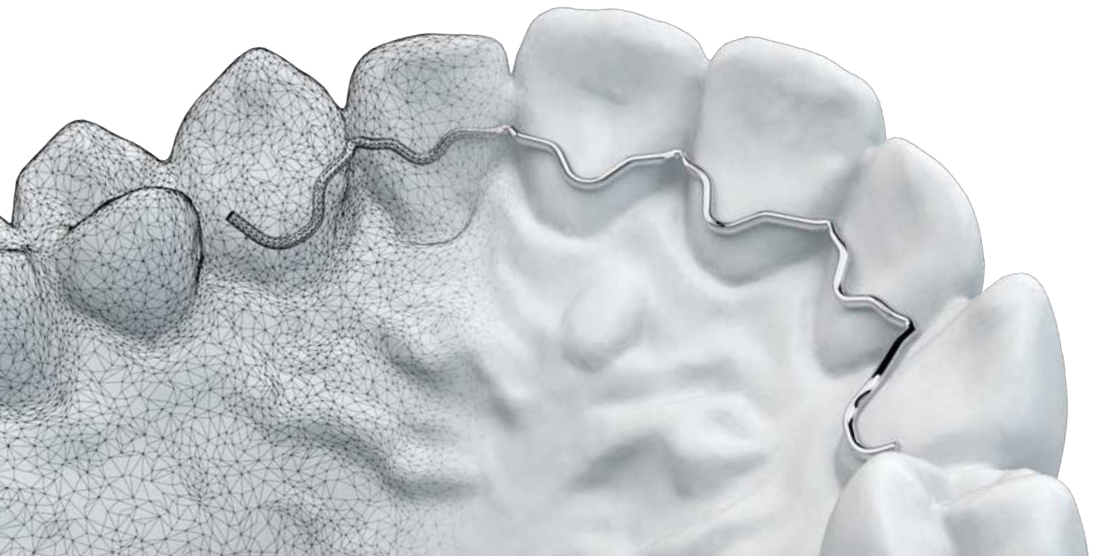

3shape Laborscanner

Laborscanner für jeden Anspruch.

Die passende Wahl für jedes Labor.

Rüsten Sie Ihr Labor mit einer schnelleren und präziseren Scanlösung auf, die extra für die höchste Produktivität optimiert ist. Mit Generation Red E-Scannern oder dem neuesten Scanner F8 mit Dual Scanning Technologie war es noch nie einfacher, Ihr Labor auf die nächste Stufe zu heben.

Ihre Vorteile:

-  ISO-dokumentierte Präzision.
-  Hochgeschwindigkeitsscannen von Modellen und Abdrücken.
-  Kieferorthopädische Laborsoftware.
-  Laborscanner für Ihre Anforderungen und Ihr Budget.



3shape TRIOS

Der Intraoralscanner.

Jedes TRIOS Modell bietet unterschiedliche Möglichkeiten.

Unabhängig davon, ob Sie ein Neueinsteiger in den digitalen Technologien sind oder schon eine vollständig digital arbeitende Praxis haben: TRIOS bietet Ihnen die Möglichkeit durch die Erweiterung Ihres Dienstleistungsangebotes eine herausragende Patientenversorgung anzubieten.

5 Gründe für TRIOS:

- Ausgezeichnete Scantechnologien.
- Naturgetreue Farben.
- Flexible Hardwarekonfigurationen.
- Software zur Analyse und Behandlungsplanung.
- Reibungsloser Auftragsaustausch mit Laboren.




3shape  TRIOS 5




Die dentale Imaging Software.

Mit OnyxCeph^{3TM} ist Image Instruments der Inbegriff dentaler Imaging Software. Die umfangreichen Lösungen für Archivierung, Diagnostik, Behandlungsplanung und Patientenberatung werden von Kunden in mehr als 99 Ländern rund um den Globus eingesetzt – mit beeindruckendem Erfolg.


Behandlungsplanung und Anwendungsgebiete:

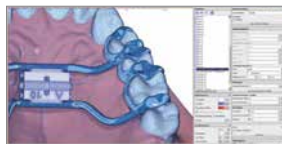


Modul Ortho Apps 3D

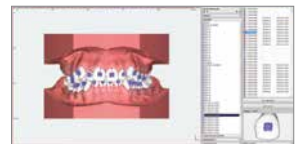


Modul FA_Bonding 3D

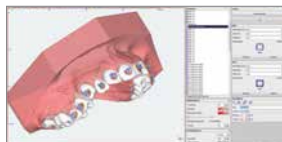


Modul Kylix 3D

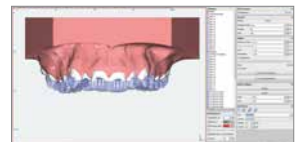

Modul Bonding Trays 3D

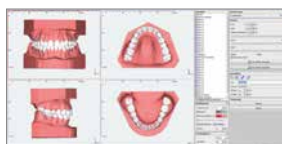

Modul Retainer 3D

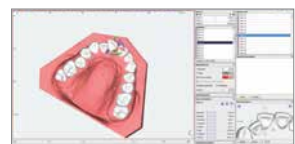

Modul Aligner 3D

OnyxCeph^{3TM} – Programmversionen und optionale Module zur idealen Kombination mit Laborscannern oder TRIOS.

	Programmversion*	
	3D PRO REF 410-004-00	3D LAB REF 410-005-00
SQL-Datenbank		
Netzwerk-Lizenz (konkurrente Clients Server)	5 1	20 1
Einzelplatz-Lizenz (Client Server)	1 1	1 1
Imaging Module 2D		
Bild hinzufügen (inkl. Schnittstellen zu Digitalröntgen)	■	■
Bild anpassen (Bild klassifizieren, ausrichten)	■	■
Bildbefund duplizieren	■	■
Bild editieren (Kopie)	■	■
Auswertung (kephalometrische Analysen)	■	■
Kombinieren	■	■
Spiegeln	■	■
CO CR-Konvertierung	■	■
Behandlungssimulation (KFO/MKG)	■	■
Ricketts V.T.O.	■	■
Befundvergleich	■	■
Copy Save as Send to Show Print	■	■
Imaging Module 3D		
Bild hinzufügen (inkl. DICOM extrahieren)	■	■
Bild anpassen (Bild klassifizieren, ausrichten)	■	■
Bildbefund duplizieren	■	■
Auswertung (kephalometrische Analysen)	■	■
Kombinieren	■	■
Spiegeln	■	■
Behandlungssimulation	□	□
Modellausrichtung	■	■
Segmentieren	■	■
FA_Bonding	■	■
V.T.O.3D (Virtuelles Set-Up)	□	■
Wire_Bonding 3D	□	□
Kylix 3D (Indirektes Übertragen)	■	■
Bonding Trays 3D (Indirektes Übertragen)	□	□
Bonding Jigs 3D (Indirektes Übertragen)	■	■
Bracket Erase 3D	□	□
Aligner 3D	□	□
Retainer 3D	□	□
Bite Splint 3D	□	□
Ortho Apps 3D	□	□
Wafer Creation 3D	□	□
TADmatch TM	□	□
3D Export (STL,OBJ, ZPR, u.a.)		■
Presentation (Slide Show, Media)	■	■
Briefe	■	■
Online Formulare (DHTML)	■	■
Internet Browser	■	■
Papierkorb (Lost & Found)	■	■
Web Reports	■	■
Container Exchange	■	■
Bild- und Resultatexport	■	■
Befundlexikon	■	■

* zzgl. jährlicher Supportgebühren
□ optionale Komponenten gegen Aufpreis

Dentaurum Digital



prime4me® Aligner

Nach Prüfung Ihrer Daten wird der Planer ein geeignetes Aligner-Paket für Sie auswählen.

Bezeichnung	REF	Menge
prime4me® Aligner smart	430-140-20	1 Fall
prime4me® Aligner advanced	430-141-21	1 Fall
prime4me® Aligner performance	430-142-21	1 Fall



Aligner Pakete

	smart	advanced	performance
Umfang	Behandlungsplanung	Behandlungsplanung	Behandlungsplanung
	Aligner für bis zu 5 Steps (2-10 Aligner pro Kiefer)	Aligner für 6-9 Steps (12-18 Aligner pro Kiefer)	Aligner für 10-15 Steps (20-30 Aligner pro Kiefer)
		Zwischenkontrolle	Zwischenkontrolle
	1 Attachment Guide (falls Attachments nötig) je behandeltem Kiefer	1 Attachment Guide (falls Attachments nötig) je behandeltem Kiefer	1 Attachment Guide (falls Attachments nötig) je behandeltem Kiefer
	1 Retainerschiene je behandeltem Kiefer	1 Retainerschiene je behandeltem Kiefer	1 Retainerschiene je behandeltem Kiefer
Lieferung	1 Paket	2 Teillieferungen mit 1 Zwischenkontrolle	3 Teillieferungen mit 2 Zwischenkontrollen



prime4me® Sockelmodell

Gedruckte Sockelmodelle für die Kieferorthopädie.

REF 430-110-10	1 Stück
-----------------------	---------



prime4me® Zahnkranzmodell

Gedruckte Zahnkranzmodelle für die Kieferorthopädie.

REF 430-110-30	1 Stück
-----------------------	---------



Jetzt bestellen:
digital.dentaurum.de

3D Isoliermittel

Bildet eine Isolierschicht zwischen Kunststoffmodellen und Orthocryl® / Orthocryl® LC.
Farbe: grün

REF 162-801-00

100 ml



prime4me® RETAIN3R OK

Einzigartige Passung durch dreidimensionale Konstruktionsgestaltung und höchste Biokompatibilität: gefräster Retainer aus Titan Grade 5.

Optional in Verbindung mit prime4me® RETAIN3R bestellbar: Übertragungsschlüssel für prime4me® RETAIN3R für das Einsetzen beim Patienten.

REF 430-120-30

1 Stück



prime4me® RETAIN3R UK

Einzigartige Passung durch dreidimensionale Konstruktionsgestaltung und höchste Biokompatibilität: gefräster Retainer aus Titan Grade 5.

Optional in Verbindung mit prime4me® RETAIN3R bestellbar: Übertragungsschlüssel für prime4me® RETAIN3R für das Einsetzen beim Patienten.

REF 430-120-40

1 Stück



Transfer tray

Übertragungsschlüssel für prime4me® RETAIN3R für das Einsetzen beim Patienten.

Nur in Verbindung mit prime4me® RETAIN3R bestellbar.

REF 430-120-90

1 Stück

NEU



KFO-Demonstrationsmodell

prime4me® RETAIN3R

Zur Patienten-Demonstration.

Bestückt mit:

- prime4me® Sockelmodell
- prime4me® RETAIN3R OK
- Transfer tray für prime4me® RETAIN3R

REF 892-000-29

1 Stück

NEU



Download Datensätze
für die digitale KFO:



Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow



hyrax® click Mini – 7

GNE-Schraube mit Rückdrehsicherung Click

Für eine effiziente und sichere Gaumennahterweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- die perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase
- sicheres Aktivieren / Deaktivieren der Schraube mit deutlichem Spüren des Einrastens nach einer $\frac{1}{4}$ Umdrehung
- kein unbeabsichtigtes Zurückdrehen beim Aktivieren durch das Herausziehen des Sicherheitsschlüssels
- Dehnwegbegrenzung, somit kein Auseinanderfallen der Schraube am Ende der Behandlung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- abgesetzter Körper zum frühestmöglichen Abwinkeln der Arme
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Schraubenkörper: 9,8 mm


Maximale Dehnung: 7,0 mm

4 x $\frac{1}{4}$ Umdrehung = 0,80 mm



Material: Edelstahl

Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-830-12	1 Stück	602-830-32	10 Stück

9,8 mm

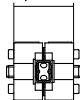

10,9 mm

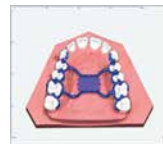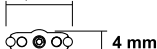

hyrax® click Medium – 10

GNE-Schraube mit Rückdrehsicherung Click

Für eine effiziente und sichere Gaumennahterweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- die perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase
- sicheres Aktivieren / Deaktivieren der Schraube mit deutlichem Spüren des Einrastens nach einer $\frac{1}{4}$ Umdrehung
- kein unbeabsichtigtes Zurückdrehen beim Aktivieren durch das Herausziehen des Sicherheitsschlüssels
- Dehnwegbegrenzung, somit kein Auseinanderfallen der Schraube am Ende der Behandlung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- abgesetzter Körper zum frühestmöglichen Abwinkeln der Arme
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Schraubenkörper: 12,8 mm

Maximale Dehnung: 10,0 mm

4 x $\frac{1}{4}$ Umdrehung = 0,80 mm


Material: Edelstahl

Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-832-12	1 Stück	602-832-32	10 Stück

12,8 mm



10,9 mm

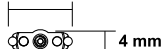

Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow

hyrax® click Maxi – 12

GNE-Schraube mit Rückdrehsicherung Click

Für eine effiziente und sichere Gaumennahterweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- die perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase
 - sicheres Aktivieren / Deaktivieren der Schraube mit deutlichem Spüren des Einrastens nach einer 1/4 Umdrehung
 - kein unbeabsichtigtes Zurückdrehen beim Aktivieren durch das Herausziehen des Sicherheitsschlüssels
 - Dehnbegrenzung, somit kein Auseinanderfallen der Schraube am Ende der Behandlung
 - kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
 - abgesetzter Körper zum frühestmöglichen Abwinkeln der Arme
 - Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Schraubenkörper: 14,8 mm



Maximale Dehnung: 12,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl



Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-834-12	1 Stück	602-834-32	10 Stück

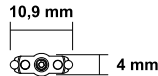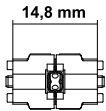

Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow



hyrax® Mini – 7

GNE-Schraube

Für Gaumennaherweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- Dehnwegbegrenzung, somit kein Auseinanderfallen der Schraube am Ende der Behandlung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- abgesetzter Körper zum frühestmöglichen Abwinkeln der Arme
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.




Schraubenkörper: 9,4 mm

Maximale Dehnung: 7,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-800-12	1 Stück	602-800-32	10 Stück

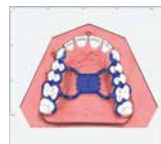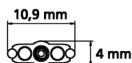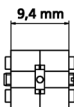

hyrax® Medium – 10

GNE-Schraube

Für Gaumennaherweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- Dehnwegbegrenzung, somit kein Auseinanderfallen der Schraube am Ende der Behandlung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- abgesetzter Körper zum frühestmöglichen Abwinkeln der Arme
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.



Schraubenkörper: 12,4 mm

Maximale Dehnung: 10,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-808-12	1 Stück	602-808-32	10 Stück

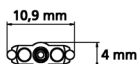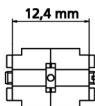

Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow

hyrax® Maxi – 12

GNE-Schraube

Für Gaumennahterweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- Dehnwegbegrenzung, somit kein Auseinanderfallen der Schraube am Ende der Behandlung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- abgesetzter Körper zum frühestmöglichen Abwinkeln der Arme
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Schraubenkörper: 14,4 mm



Maximale Dehnung: 12,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl



Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-811-12	1 Stück	602-811-32	10 Stück

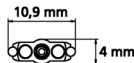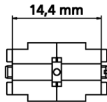

hyrax® neo Mini – 7

GNE-Schraube

Für Gaumennahterweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- (keine aktive) Dehnwegbegrenzung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- TAD optimiertes Design
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Schraubenkörper: 11,2 mm



Maximale Dehnung: 7,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl



Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-845-12	1 Stück	602-845-32	10 Stück

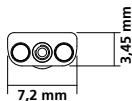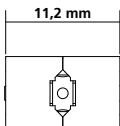

Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow



hyrax® neo Medium – 10

GNE-Schraube

Für Gaumennaherweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- (keine aktive) Dehnwegbegrenzung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- TAD optimiertes Design
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.



Schraubenkörper: 12,4 mm

Maximale Dehnung: 10,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-846-12	1 Stück	602-846-32	10 Stück

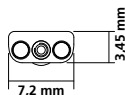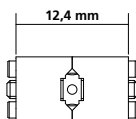

hyrax® neo Maxi – 12

GNE-Schraube

Für Gaumennaherweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

- (keine aktive) Dehnwegbegrenzung
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- TAD optimiertes Design
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.



Schraubenkörper: 14,4 mm

Maximale Dehnung: 12,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-847-12	1 Stück	602-847-32	10 Stück

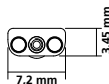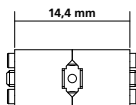

Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow

Titan hyrax® Maxi – 12

GNE-Schraube aus Titan

Für Gaumennahterweiterung mit Hilfe einer festsitzenden Apparatur.

Die Verankerung an den Zähnen erfolgt über in Titan gegossene und angelaserte Kappenschienen oder alternativ mittels Kunststoff-Kappenschienen aus Orthocryl® Kunststoff.

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Schraubenkörper: 14,4 mm



Maximale Dehnung: 12,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Titan



Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-810-12	1 Stück	602-810-32	10 Stück

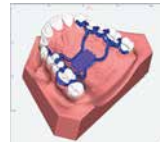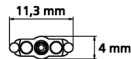

Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow



Variety click Mini – 8

Einführige Spezial-Dehnschraube mit Rückdrehsicherung Click. In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- die perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- sicheres Aktivieren / Deaktivieren der Schraube mit deutlichem Spüren des Einrastens nach einer $\frac{1}{4}$ Umdrehung
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 12,9 mm

Schraubenkörper: 9,6 mm

Maximale Dehnung: 8,0 mm

4 x $\frac{1}{4}$ Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-836-12	1 Stück	602-836-32	10 Stück



Variety click SP (small palate) Mini – 8

Einführige Spezial-Dehnschraube mit Rückdrehsicherung Click. Zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- die perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase
- besonders geeignet für sehr schmale Kiefer
- Abbiegen der Retentionsarme sehr nah am Schraubenkörper möglich
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- sicheres Aktivieren / Deaktivieren der Schraube mit deutlichem Spüren des Einrastens nach einer $\frac{1}{4}$ Umdrehung
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 12,9 mm

Schraubenkörper: 9,6 mm



Maximale Dehnung: 8,0 mm

4 x $\frac{1}{4}$ Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-838-12	1 Stück	602-838-32	10 Stück

Maße Variety click / Variety click SP Mini – 8

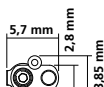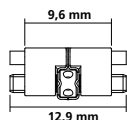

Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow

Variety click Maxi – 12

Einführige Spezial-Dehnschraube mit Rückdrehsicherung Click. In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- die perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- sicheres Aktivieren / Deaktivieren der Schraube mit deutlichem Spüren des Einrastens nach einer 1/4 Umdrehung
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 17,2 mm

Schraubenkörper: 9,6 mm

Maximale Dehnung: 12,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl



Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-837-12	1 Stück	602-837-32	10 Stück

Variety click SP (small palate) Maxi – 12

Einführige Spezial-Dehnschraube mit Rückdrehsicherung Click. In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- die perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase
- besonders geeignet für sehr schmale Kiefer
- Abbiegen der Retentionsarme sehr nah am Schraubenkörper möglich
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- sicheres Aktivieren / Deaktivieren der Schraube mit deutlichem Spüren des Einrastens nach einer 1/4 Umdrehung
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 17,2 mm

Schraubenkörper: 9,6 mm

Maximale Dehnung: 12,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl





Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-839-12	1 Stück	602-839-32	10 Stück

Variety  click



Variety  click SP

Maße Variety click / Variety click SP Maxi – 12

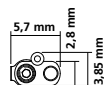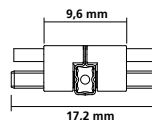

Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow



Variety Mini – 8

Einführige Spezial-Dehnschraube. In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 12,9 mm

Schraubenkörper: 9,6 mm

Maximale Dehnung: 8,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-815-12	1 Stück	602-815-32	10 Stück



Variety SP (small palate) Mini – 8

Einführige Spezial-Dehnschraube. In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- besonders geeignet für sehr schmale Kiefer
- Abbiegen der Retentionsarme sehr nah am Schraubenkörper möglich
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 12,9 mm

Schraubenkörper: 9,6 mm



Maximale Dehnung: 8,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl

Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-819-12	1 Stück	602-819-32	10 Stück

Maße Variety/ Variety SP Mini – 8

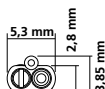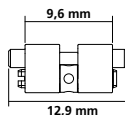

Dehnschrauben ohne Arme für den digitalen Workflow

Variety Maxi – 12

Einführige Spezial-Dehnschraube. In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 14,9 mm

Schraubenkörper: 9,6 mm

Maximale Dehnung: 12,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl



Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-806-12	1 Stück	602-806-32	10 Stück

Variety SP (small palate) Maxi – 12

Einführige Spezial-Dehnschraube. In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z.B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

- besonders geeignet für sehr schmale Kiefer
- Abbiegen der Retentionsarme sehr nah am Schraubenkörper möglich
- kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg
- Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen
- Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert
- Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich

Packung (1 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel, Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln.

Einbaumaß: 14,9 mm

Schraubenkörper: 9,6 mm

Maximale Dehnung: 12,0 mm

4 x 1/4 Umdrehung = 0,80 mm

Material: Edelstahl



Retentionsarme	REF	Menge	REF	Menge
ohne	602-809-12	1 Stück	602-809-32	10 Stück



Variety



Variety SP



Maße Variety / Variety SP Maxi – 12

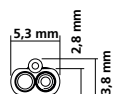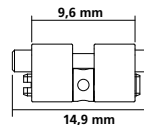

3Shape Laborscanner



Laborscanner E2, Ortho System Scan Only

mit Ortho System Standard (inkl. PC).
Erhöhte Produktivität und Scannen von Texturen.
Optimal für die Archivierung von KFO-Modellen

1 Stück



Laborscanner E3, Ortho System Scan Only

mit Ortho System Standard (inkl. PC).
Hohe Leistungsfähigkeit und Farbscannen.

1 Stück



Laborscanner E4, Ortho System Scan Only

mit Ortho System Standard (inkl. PC).
Extrem hohe Geschwindigkeit und Präzision.

1 Stück



Laborscanner F8, Ortho System Scan Only

Noch schneller mit Dual Scanning Technologie.

1 Stück

NEU

TRIOS 5 Pod

Lieferumfang:

- TRIOS 5 Scanner
- Ladegerät inkl. Netzkabel
- 3 x Akku
- 5 x TRIOS 5 Spitze
- TRIOS 5 Schutzaufsatz
- TRIOS 5 Pod
- Wireless Adapter
- USB Dongle mit Software
- 3Shape Dongle für Jahresgebühr
- 100 x TRIOS Sleeve
- Dokumentation

REF 421-731-00	1 Stück
----------------	---------

NEU

TRIOS 4 Wireless Pod Pen

Lieferumfang:

- TRIOS 4 Wireless Scanner
- Ladegerät inkl. Netzkabel
- Wandmontage-Set für Ladegerät
- 3 x Akku für Pen
- 5 x TRIOS 4 Spitze
- TRIOS 4 Schutzaufsatz
- TRIOS 4 Kalibrierungsskit
- TRIOS 4 Wireless Pod / Wired Pod
- Wireless Adapter
- USB Dongle mit Software
- 3Shape Dongle für Jahresgebühr
- Dokumentation

REF 421-431-01	1 Set
----------------	-------



3Shape TRIOS Intraoralscanner



TRIOS 3 Wireless Pod Pen

Lieferumfang:

- TRIOS 3 Wireless Scanner
- Ladegerät inkl. Netzkabel
- Wandmontage-Set für Ladegerät
- 3 x Akku für Pen
- 5 x TRIOS 3 Spitze
- TRIOS 3 Schutzaufsatz
- TRIOS 3 Kalibrieraufsatz
- TRIOS 3 Kalibrierungskit
- TRIOS 3 Wireless Pod
- TRIOS 3 Wireless Adapter
- USB Dongle mit Software
- 3Shape Dongle für Jahresgebühr
- Dokumentation

REF 421-131-00

1 Set



TRIOS 3 Pod Pen

Lieferumfang:

- TRIOS 3 Scanner
- 5 x TRIOS 3 Spitze
- TRIOS 3 Schutzaufsatz
- TRIOS 3 Kalibrieraufsatz
- TRIOS 3 Kalibrierungskit
- TRIOS 3 Pod
- Verbindungskabel
- USB / Ethernet Adapter
- Pod PSU inkl. Netzkabel
- USB Dongle mit Software
- 3Shape Dongle für Jahresgebühr
- Pod Installationsanleitung
- Dokumentation

REF 421-231-00

1 Set

3Shape TRIOS Intraoralscanner

TRIOS Move+

Ohne Scanner. Kompatibel mit TRIOS 3, TRIOS 4 und TRIOS 5.

REF 420-100-40	1 Stück
----------------	---------



TRIOS 5 Spitzen sterilisierbar

REF 420-100-38	3 Stück
----------------	---------



TRIOS 4 Spitzen sterilisierbar

REF 420-100-25	3 Stück
----------------	---------



TRIOS 3 Spitzen sterilisierbar

REF 420-100-01	3 Stück
----------------	---------



OnyxCeph^{3TM}


 OnyxCeph^{3TM}	OnyxCeph^{3TM} Basic (Kauflizenz) Software für Archivierung und Patientenberatung inklusive 5 gleichzeitig nutzbarer Netz-Arbeitsplätze.	REF 410-001-00	1 Stück
 OnyxCeph^{3TM}	OnyxCeph^{3TM} 2D Pro (Kauflizenz) Software für Archivierung, Diagnostik, Behandlungsplanung und Patientenberatung in 2D inklusive 5 gleichzeitig nutzbarer Netz-Arbeitsplätze.	REF 410-002-00	1 Stück
 OnyxCeph^{3TM}	OnyxCeph^{3TM} 3D Pro (Kauflizenz) Software für Archivierung, Diagnostik, Behandlungsplanung und Patientenberatung in 3D inklusive 5 gleichzeitig nutzbarer Netz-Arbeitsplätze.	REF 410-004-00	1 Stück
 OnyxCeph^{3TM}	OnyxCeph^{3TM} 3D Lab (Kauflizenz) Software für Archivierung, Diagnostik, Behandlungsplanung und Patientenberatung in 3D inklusive der Option Virtuelles Setup (V.T.O.3D) sowie insgesamt 20 gleichzeitig nutzbarer Netz-Arbeitsplätze.	REF 410-005-00	1 Stück
 OnyxCeph^{3TM}	Zusätzliche Serverlizenz Zweitpraxis-Serverlizenz (LAN 5/1) zur gleichen Praxis.	REF 410-000-01	1 Stück
 OnyxCeph^{3TM}	Zusätzliche Einzelplatzlizenz Notebooklizenz (1/1) zum gleichen Praxisnamen.	REF 410-000-02	1 Stück
 OnyxCeph^{3TM}	Zusätzlicher Arbeitsplatz Zusätzlicher Arbeitsplatz im Netzwerk.	REF 410-000-03	1 Stück
 OnyxCeph^{3TM}	Anwenderverwaltung Rechtevergabe in Abhängigkeit vom Nutzer-Login.	REF 410-000-04	1 Stück
 OnyxCeph^{3TM}	Statistik-Paket Statistische Auswertung von Befundergebnissen.	REF 410-000-05	1 Stück

Modul Waefer Creation

Erstellung chirurgischer Splints.

REF 410-000-06

1 Stück

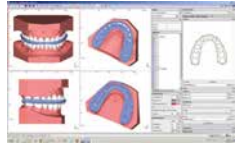


Modul V.T.O.3D (Virtual Treatment Objective)

Erstellung virtueller Zielsetups.

REF 410-000-07

1 Stück

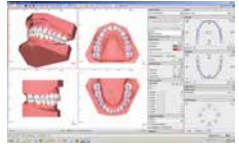


Modul Bonding Trays 3D

Konstruktion von Bracket-Übertragungsschienen.

REF 410-000-11

1 Stück

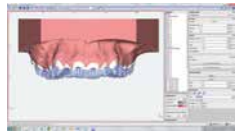


OnyxCeph^{3TM} Modul Bite Splint 3D

Konstruktion von Aufbiss-, Schnarcher-, Sport- u.a. Schienen.

REF 410-000-13

1 Stück

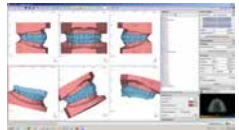


Modul Ortho Apps 3D


Konstruktion von GNE-, Lingualbogen-, Herbst- u.a. Apparaturen.

REF 410-000-14

1 Stück

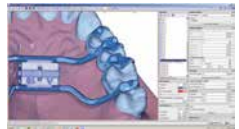

OnyxCeph^{3TM}

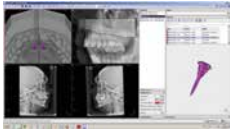


Modul TADmatch™

Modul von OnyxCeph^{3TM} zum virtuellen Setzen von tomas®-pin und als Basis zur Herstellung von Insertionsschablonen.

REF 410-000-15

1 Stück

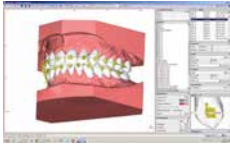


Modul Wire_Bonding

Positionierung von Drähten / Brackets am Set-Up.

REF 410-000-08

1 Stück

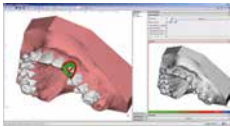


Modul Bracket Erase 3D

Virtuelles Bracket entfernen.

REF 410-000-12

1 Stück

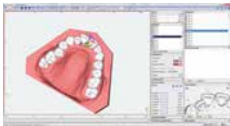


Modul Aligner 3D

Planung von Alignern.

REF 410-000-09

1 Stück

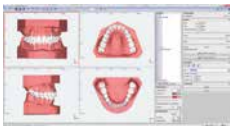

Modul Retainer 3D

Planung von Retainern.

REF 410-000-10

1 Stück

