



NOTRE
CONTENTION 3D
SUR-MESURE



D
DENTAURUM
1886

”

LA

CONTENTION 3D

AUSSI INDIVIDUELLE
QUE CHAQUE PATIENT

DÉVELOPPÉE PAR DES **EXPERTS**

Le **prime4me® RETAIN3R** est la
solution sur-mesure pour vos patients

Grâce à son design 3D innovant, la contention s'adapte à la **structure individuelle** des dents, même dans les espaces restreints.

Fabriquée à partir de **titane de grade 5** de haute qualité, notre contention 3D offre non seulement une biocompatibilité élevée, mais est également idéale pour les patients qui préfèrent les matériaux sans nickel.

L'ajustage précis offre un grand confort en bouche et facilite l'hygiène bucco-dentaire - pour la satisfaction des patients et le maintien optimal des résultats de traitements orthodontiques.



En savoir plus

LA


3^{ÈME} DIMENSION

QUI FAIT LA
DIFFÉRENCE

Profil transversal
plat, demi-rond


Contention 3D gracie,
robuste et durable,
épaisseur 0,5 mm

PRÉCISE · AJUSTÉE · PERSONNALISÉE · STABLE · DURABLE

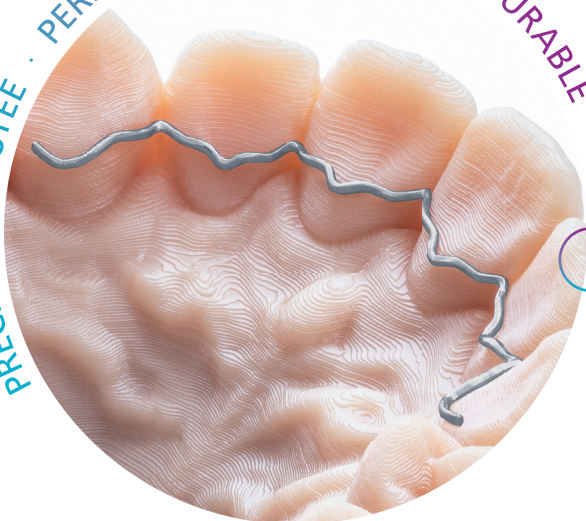

Précision dans
toutes les dimensions

Plan sagittal, transversal et
vertical pris en compte

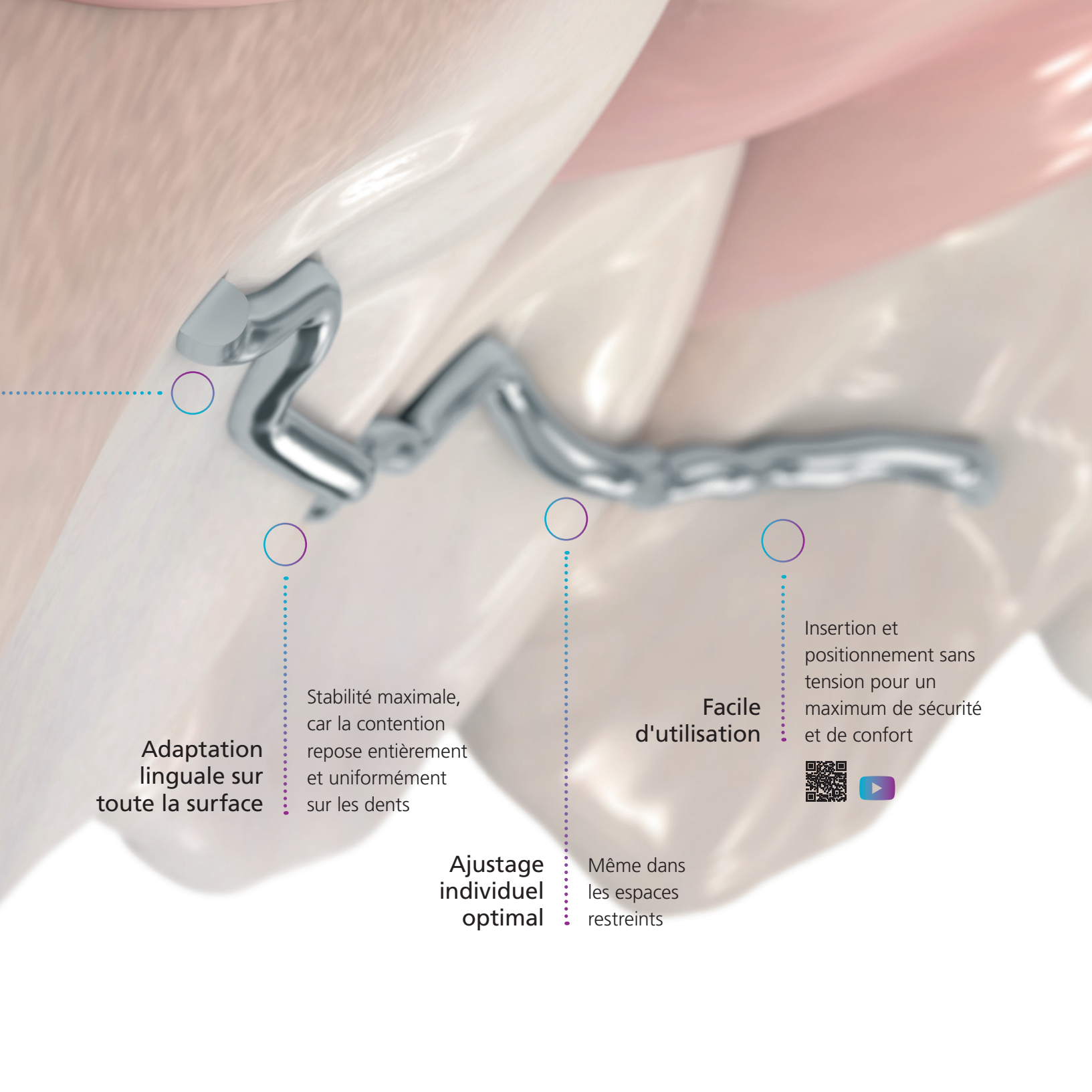

**Adaptation
linguale sur
toute la surface**

Stabilité maximale,
car la contention
repose entièrement
et uniformément
sur les dents

**Ajustage
individuel
optimal**

Même dans
les espaces
restreints

**Facile
d'utilisation**

Insertion et
positionnement sans
tension pour un
maximum de sécurité
et de confort



Ti

Titanium

by DENTAURUM

**Haute résistance
mécanique :**


matériau idéal pour
les contentions.

Haute biocompatibilité :

compatibilité optimale avec le
corps humain, y compris pour
les patients qui préfèrent les
matériaux sans nickel.

**Haute résistance à
la corrosion :**

favorise une longue
durabilité du produit.

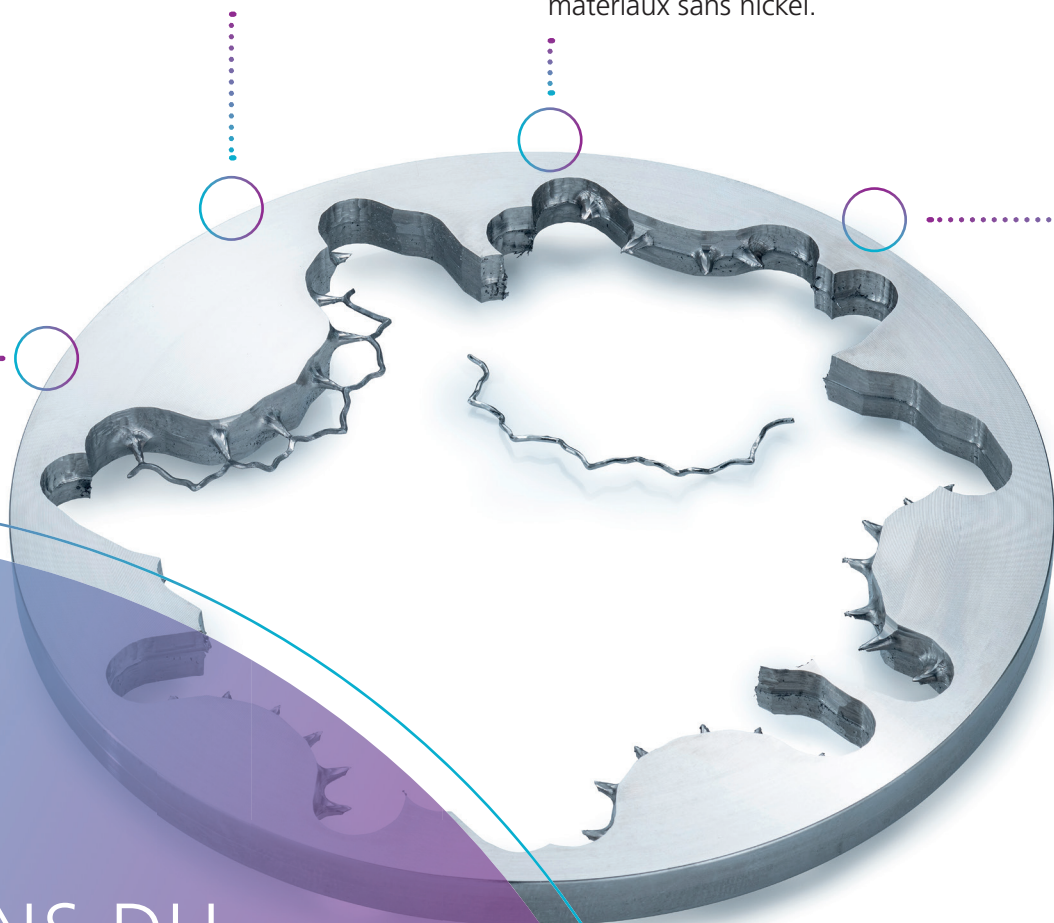


NOUS
UTILISONS DU
TITANE DE GRADE 5

PROFITEZ DE NOTRE **SAVOIR-FAIRE**

D'une seule pièce :

..... pas de pliage
ni de cintrage.

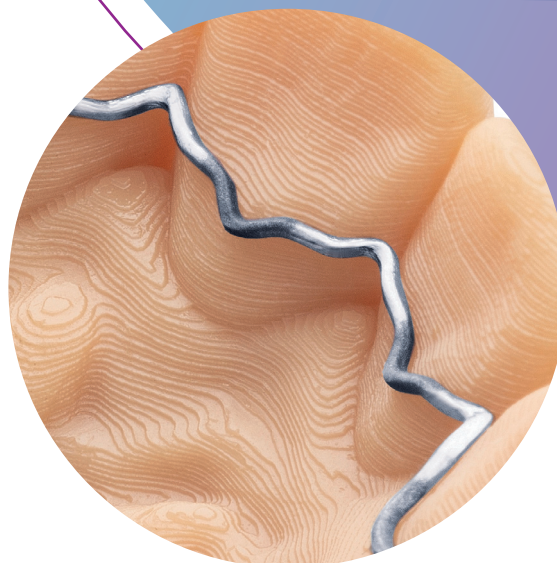


Dentaurum High-Tech

Grâce à une technique de fraisage moderne, notre **prime4me® RETAIN3R** est totalement passif : le matériau est soustrait du sique d'usinage et n'est ni plié, ni cintré. et n'est ni formé ni cintré. Ce processus de fabrication est idéal pour préserver et stabiliser les résultats de vos traitements orthodontiques. Les dents conservent leur mobilité naturelle. Les surfaces de collage sont sablées pour améliorer l'adhérence.

Nous offrons 24 mois de garantie.



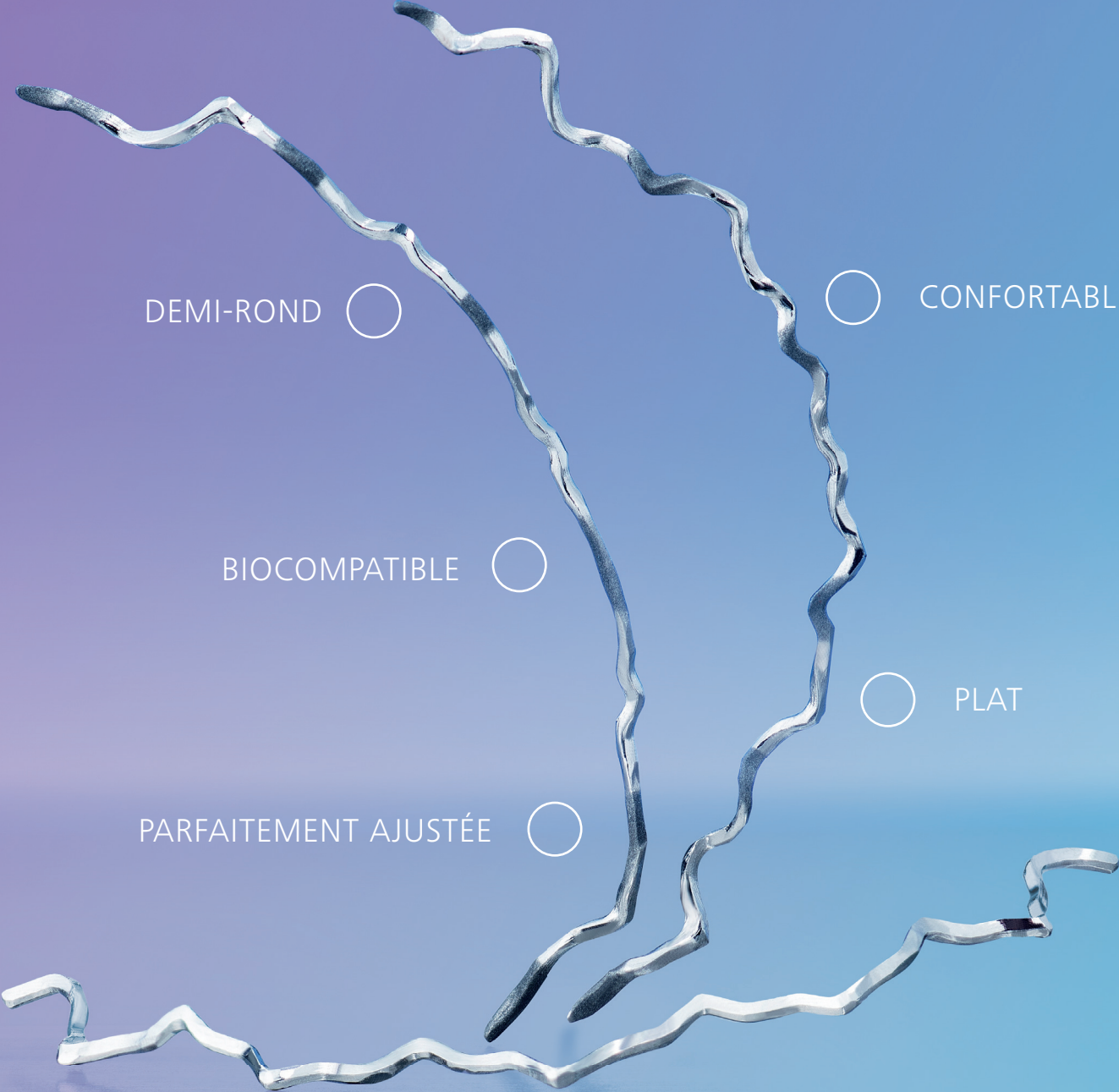

DEMI-ROND ☐

☐ CONFORTABLE

BIOCOMPATIBLE ☐

☐ PLAT

PARFAITEMENT AJUSTÉE ☐

Agréable à porter

L'ajustage précis assure une assise linguale agréable et réduit les surfaces de collage - pour une sensation de port à peine perceptible.

Amélioration de l'hygiène bucco-dentaire

Le profil plat et demi-rond facilite le nettoyage des dents et des espaces interdentaires pour une hygiène bucco-dentaire simple et efficace.

Très bonne tolérance

Fabriquée à partir de titane biocompatible de grade 5, cette contention est également idéale pour les patients qui préfèrent les matériaux sans nickel.



DE
NOMBREUX
AVANTAGES
POUR VOS PATIENTS

COMMANDER FACILEMENT EN QUELQUES CLICS



Vous pouvez commander
ici directement :
digital.dentaurum.de



1. Commande
avec scan intra-oral,
scan du modèle



2. Validation du
design 3D optimal

D'autres questions ?

Profitez des conseils avisés de nos experts en CFAO.
Nous vous accompagnons tout au long du processus.

Support Clients numérique :

☎ +49 72 31 / 803 - 280 🌐 digital@dentaurum.de

Vous pouvez nous joindre (HNEC) :
du lundi au jeudi de 08 h 00 à 17 h 00
vendredi : 8 h 00 - 15 h 00



3. Fabrication du
prime4me[®] RETAIN3R



4. Contrôle qualité



5. Remise à
l'expédition

..... Les délais de livraison dépendent du pays de destination.

DURÉE : 5 JOURS*

* jours ouvrés



CONTACT
DENTAURUM

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31/803-0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM