



NUESTRO
RETAINER 3D
ENCAJA A LA
PERFECCIÓN



D
DENTAURUM
1886

”

EL

RETAINER 3DTAN INDIVIDUAL
COMO CADA PACIENTE

DESARROLLADO POR **EXPERTOS**

El **prime4me® RETAIN3R** es la solución personalizada para sus pacientes

Gracias a su innovador diseño 3D, el retenedor se adapta a la **estructura individual** del diente, incluso en espacios reducidos.

Fabricado en **Titanio de grado 5** de alta calidad, nuestro retenedor 3D no solo ofrece una alta biocompatibilidad, sino que también es ideal para pacientes que prefieren materiales libres de níquel.

Su **precisión de ajuste** ofrece una gran comodidad para el paciente y facilita la higiene bucal. Para pacientes satisfechos y la conservación óptima de los resultados de su tratamiento de ortodoncia. Para toda la vida



Más informaciones

LA

3.^a DIMENSIÓN

MARCA LA
DIFERENCIA

Perfil de sección
transversal plano
y semicircular


Retenedor 3D,
robusto y duradero,
espesor 0,5 mm

PRECISO · AJUSTADO · INDIVIDUAL · ESTABLE · DURADERO



Precisión en
cualquier dimensión

Se toman en cuenta los planos
sagital, transversal y vertical

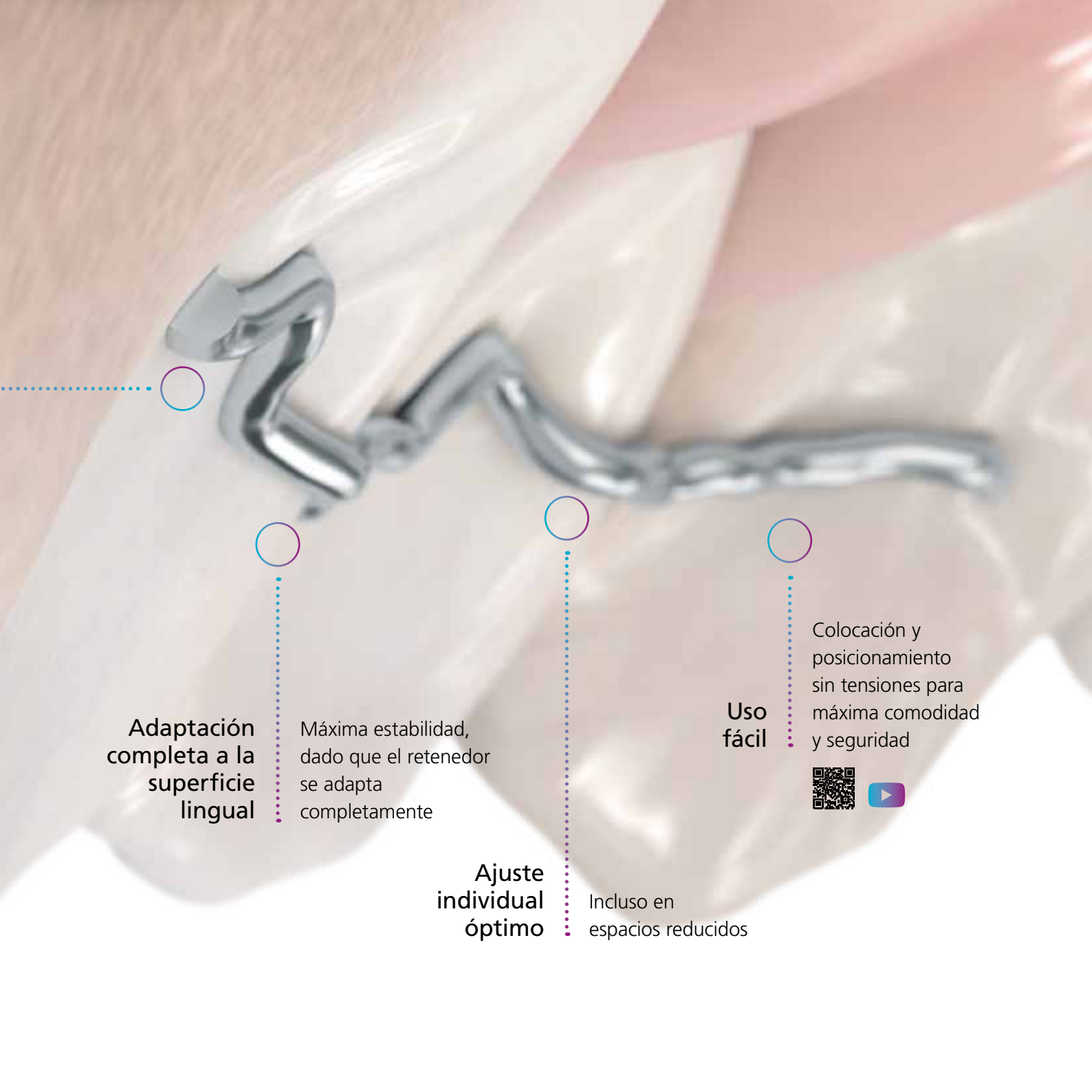

**Adaptación
completa a la
superficie
lingual**

Máxima estabilidad,
dado que el retenedor
se adapta
completamente

**Ajuste
individual
óptimo**

Incluso en
espacios reducidos

**Uso
fácil**

Colocación y
posicionamiento
sin tensiones para
máxima comodidad
y seguridad



Ti

Titanium

by DENTAURUM

**Gran resistencia
mecánica:** Material
ideal para el retenedor.

Alta biocompatibilidad:

óptimamente compatible con el
cuerpo humano, incluso para
pacientes que prefieren materiales
libres de níquel.

**Alta resistencia
a la corrosión:**
favorece una larga
vida del producto.




UTILIZAMOS

TITANIO DE GRADO 5

SÁQUELE PROVECHO A NUESTRO **KNOW-HOW**

De una pieza:

ni se deforma
ni se dobla.

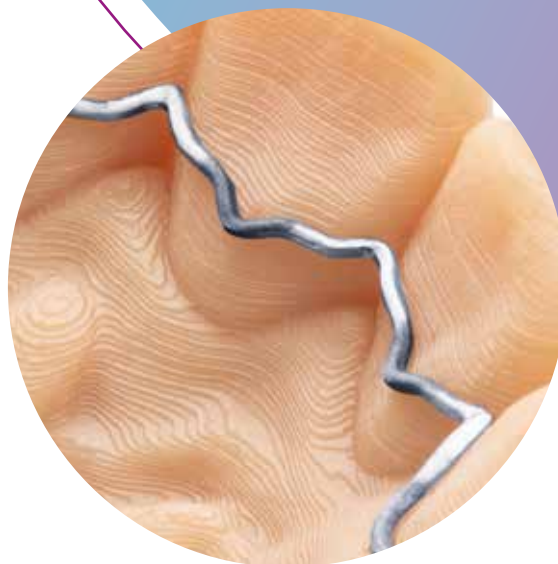


Dentaurum High-Tech

Gracias a la técnica de fresado de última generación, nuestro **prime4me® RETAIN3R** es pasivo: Está mecanizado, por lo cual el material no ha sido ni deformado ni doblado durante el proceso. Este proceso de fabricación es ideal para mantener y estabilizar los resultados de su tratamiento de ortodoncia. Sin embargo la movilidad propia de los dientes se mantiene. Para mejorar la unión del adhesivo se arenan las zonas a pegar.

Ofrecemos 24 meses de garantía.



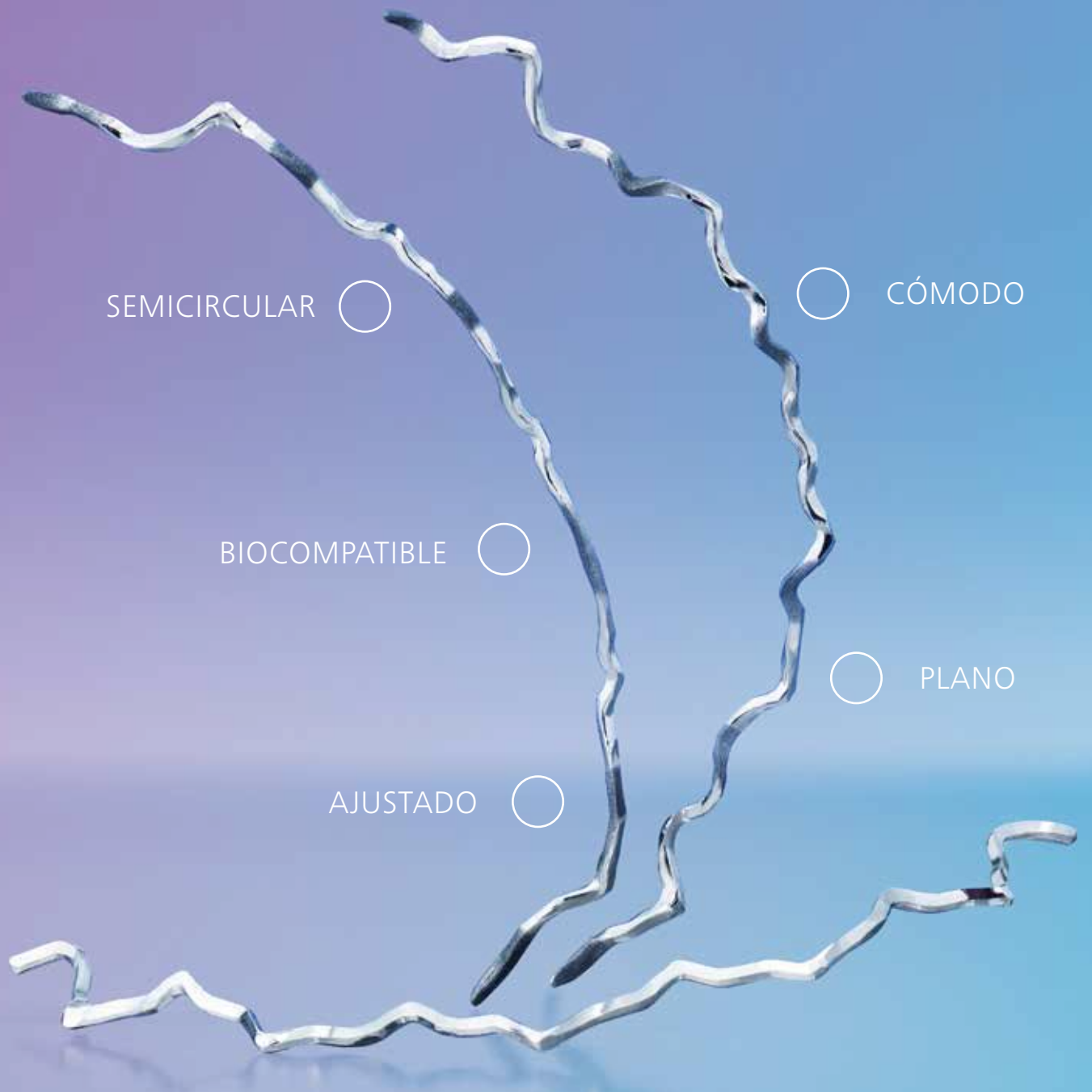

SEMICIRCULAR

CÓMODO

BIOCOMPATIBLE

PLANO

AJUSTADO

Muy cómodo para el paciente

El ajuste preciso garantiza una cómoda adaptación lingual y reduce las superficies de pegado para una sensación de uso casi imperceptible.

Mejor higiene bucal

Su perfil plano, semicircular facilita la limpieza de los dientes y espacios interdientales para una higiene bucal mas fácil y efectiva.

Muy buena tolerancia

El retenedor, fabricado en Titanio de grado 5 biocompatible, es ideal para pacientes que prefieren materiales libres de níquel.



MUCHAS
VENTAJAS
PARA SUS
PACIENTES

FÁCILMENTE
HAGA SU PEDIDO
CON POCOS
CLICS



Aquí puede hacer su
pedido directamente:
digital.dentaurum.de



1. Pedido con
escaneo intraoral



2. Aprobación del
diseño 3D óptimo

¿Alguna pregunta?

Benefíciase del asesoramiento
competente de nuestros expertos en CAD/CAM.
Le acompañamos durante todo el proceso.

Customer Support Digital:

☎ +49 72 31 / 803 - 280 🌐 digital@dentaurum.de

Estamos a su disposición (CET):
de lunes a jueves de 8:00–17:00 hs
Viernes: de 8:00 a 15:00 hs



3. Elaboración del
prime4me[®] RETAIN3R



4. Comprobación de la
calidad y limpieza



5. Entrega
a expedición

Los plazos de entrega dependen del país de destino.
Aquí encontrará una descripción detallada:



DURACIÓN: **5 DÍAS**



CONTACT
DENTAURUM

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31/803-0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM